

HistoCore Arcadia H

Centro de inclusión de tejidos

Manual de instrucciones
Español

N.º de pedido: 14 0393 81116 – Revisión 0

Guarde siempre este manual de instrucciones junto al equipo.
Léalo detenidamente antes de trabajar con el equipo.



La información, los datos numéricos, las indicaciones y los juicios de valor contenidos en el presente manual de instrucciones corresponden al estado actual del conocimiento científico y la tecnología de vanguardia como la entendemos tras haber realizado una extensa investigación en este ámbito.

No estamos obligados a actualizar periódicamente este manual de instrucciones de acuerdo con los últimos avances técnicos, ni a entregar a nuestros clientes copias suplementarias, actualizaciones, etc. de este manual de instrucciones.

En la medida en que las normativas nacionales pertinentes lo permitan en cada caso particular, no nos haremos responsables de afirmaciones, ilustraciones, esquemas técnicos, etc. contenidos en las presentes instrucciones que puedan incurrir en errores. En particular, no se acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida financiera o daños consiguientes causados por o relacionados con el cumplimiento de las declaraciones u otra información contenida en este manual de instrucciones.

Los datos, los esbozos, las ilustraciones y demás información que se incluyen en el presente manual de instrucciones, ya sean de carácter documental o técnico, no pueden considerarse como características garantizadas de nuestros productos.

Estas últimas se determinan únicamente por los acuerdos contractuales establecidos entre nuestros clientes y nuestra empresa.

Leica Biosystems se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones técnicas, así como los procesos de fabricación. Solo de esta manera es posible asegurar una continua mejora técnica y de los procesos de fabricación de nuestros productos.

Quedan reservados los derechos de autor sobre el presente documento. Leica Biosystems Nussloch GmbH es el titular único del copyright sobre este manual.

Queda prohibida la reproducción del texto y las ilustraciones (parcial o total) por impresión, fotocopia, microfilm, webcam o por cualquier otro método, incluido el uso de todo tipo de sistemas y medios electrónicos, salvo previa autorización explícita escrita de Leica Biosystems Nussloch GmbH.

El número de serie y el año de fabricación del instrumento están indicados en la placa de datos situada en la parte trasera del mismo.



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Strasse 17 - 19
D-69226 Nussloch
Alemania
Tel.: +49 - (0) 6224 - 143 0
Fax: +49 - (0) 6224 - 143 268
Web: www.LeicaBiosystems.com

Montaje contratado con Leica Microsystems Ltd. Shanghai

1.	Indicaciones importantes	6
1.1	Convenciones de nomenclatura	6
1.2	Símbolos en el texto y su significado	6
1.3	Tipo de instrumento.....	10
1.4	Uso previsto del instrumento.....	10
1.5	Cualificación del personal.....	10
2.	Seguridad	11
2.1	Indicaciones de seguridad.....	11
2.2	Advertencias	12
2.3	Sistemas de seguridad integrados.....	13
3.	Componentes del equipo y especificaciones	14
3.1	Vista general: componentes del equipo	14
3.2	Características principales del equipo.....	15
3.3	Datos técnicos	16
4.	Configuración del instrumento.....	18
4.1	Requisitos del emplazamiento.....	18
4.2	Volumen de suministro: elementos del paquete	18
4.3	Desembalaje e instalación.....	19
4.4	Trabajos de montaje necesarios.....	20
4.5	Conexión eléctrica.....	22
4.6	Desplazamiento del equipo.....	22
5.	Funcionamiento.....	23
5.1	Partes integrantes y sus funciones	23
5.2	Encendido del instrumento	28
5.3	Funciones del panel de control	29
5.4	Modos de funcionamiento	33
5.5	Calefactor del instrumento.....	34
6.	Mantenimiento y limpieza.....	35
6.1	Limpieza del instrumento.....	35
6.2	Instrucciones de mantenimiento	36
7.	Resolución de problemas.....	37
7.1	Mensaje de error	37
7.2	Posibles fallos	40
7.3	Recambiar fusibles.....	42
8.	Accesorios opcionales.....	43
8.1	Lupa.....	43
8.2	Interruptor de pie.....	43
8.3	Vaso del prefiltro.....	45
8.4	Asa de la cesta.....	45
8.5	Información para pedidos.....	46

9.	Garantía y servicio	47
10.	Confirmación de descontaminación	48

1. Indicaciones importantes

1.1 Convenciones de nomenclatura



Nota

El nombre completo del dispositivo es Centro de inclusión de tejidos HistoCore Arcadia H. El dispositivo se denomina HistoCore Arcadia H para asegurar la legibilidad del manual de instrucciones.

1.2 Símbolos en el texto y su significado

Símbolo:



Título del símbolo:

Advertencia

Descripción:

Las advertencias se muestran sobre fondo blanco y están indicadas con un triángulo de aviso.

Símbolo:



Título del símbolo:

Nota

Descripción:

Las notas, es decir, la información importante para el usuario, se muestran sobre fondo blanco y están identificadas con un símbolo informativo.

Símbolo:

→ "Fig. 7-1"

Título del símbolo:

Número de elemento

Descripción:

Números de elementos para la numeración de ilustraciones. Los números de color rojo se refieren a números de elementos en las ilustraciones.

Símbolo:

Guardar

Título del símbolo:

Tecla de función

Descripción:

Las teclas de función que deben pulsarse en la pantalla se muestran como texto gris en negrita.

Símbolo:



Título del símbolo:

Advertencia de superficie caliente

Descripción:

Las superficies del equipo que se calientan durante el funcionamiento están marcadas con este símbolo. No toque estas superficies – peligro de sufrir quemaduras!

Símbolo:



Título del símbolo:

Inflamable

Descripción:

Los reactivos, disolventes y productos de limpieza inflamables están identificados con este símbolo.

Símbolo:



Título del símbolo:

Atención

Descripción:

Indica que el usuario debe consultar el manual de instrucciones para obtener información importante sobre precauciones y advertencias que no pueden, por algún motivo, indicarse en el dispositivo médico.

Símbolo:**Título del símbolo:****Descripción:****ENCENDIDO** (alimentación)

Al pulsar el interruptor de red se establece la conexión con la alimentación.

Símbolo:**Título del símbolo:****Descripción:****APAGADO** (alimentación)

Al pulsar el interruptor de red se interrumpe la alimentación.

Símbolo:**Título del símbolo:****Descripción:**

Consulte el manual de instrucciones

Advierte de la necesidad de que el usuario consulte el manual de instrucciones.

Símbolo:**Título del símbolo:****Descripción:**

Fabricante

Indica el fabricante del dispositivo médico.

Símbolo:**Título del símbolo:****Descripción:**

Fecha de fabricación

Indica la fecha de fabricación del dispositivo médico.

Símbolo:**Título del símbolo:**

Corriente alterna

Símbolo:**Título del símbolo:**

Puesta a tierra

Símbolo:**Título del símbolo:****Descripción:**

Número de artículo

Indica el número de catálogo del fabricante para poder identificar el dispositivo médico.

Símbolo:**Título del símbolo:****Descripción:**

Número de serie

Indica el número de serie del fabricante para poder identificar un dispositivo médico determinado.

Símbolo:**Título del símbolo:****Descripción:**

ROHS China

Símbolo de protección medioambiental de la Directiva China RoHS. El número del símbolo indica el "tiempo de uso seguro para el medio ambiente" del producto en años. El símbolo se utiliza cuando una sustancia limitada en China se utiliza por encima del límite máximo autorizado.

Símbolo:**Título del símbolo:****Descripción:**

Símbolo RAEE

El símbolo RAEE indica la recogida separada de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y consiste en un contenedor con ruedas tachado (§ 7 ElektroG).

Símbolo:**Título del símbolo:****Descripción:**

Conformidad CE

La identificación CE es la declaración del fabricante de que el dispositivo médico cumple todos los requisitos de las directivas aplicables en la UE.

Símbolo:**Título del símbolo:****Descripción:**

CSA Statement (Canada/USA)

Este producto cumple los requisitos de la norma CAN/CSA-C22.2 N.º 61010.

Símbolo:**Título del símbolo:****Descripción:**

Frágil, manipular con cuidado

Designa un dispositivo médico que puede romperse o dañarse si no se manipula con el debido cuidado.

Símbolo:**Título del símbolo:****Descripción:**

Guardar seco

Indica la necesidad de proteger el dispositivo médico frente a la humedad.

Símbolo:**Título del símbolo:****Descripción:**

Arriba

Indica la posición vertical de la caja.


Símbolo:**Título del símbolo:****Descripción:**

Límite de apilado

Permite apilar únicamente 2 unidades.

Símbolo:

Transport temperature range:

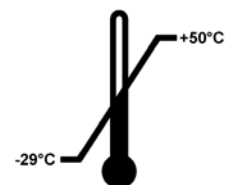
**Título del símbolo:****Descripción:**

Límite de temperatura para el transporte

Indica los límites de temperatura para el transporte seguro del dispositivo médico.


Símbolo:

Storage temperature range:

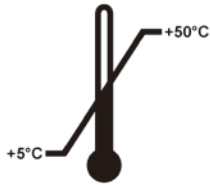**Título del símbolo:****Descripción:**

Límite de temperatura para el almacenamiento

Indica los límites de temperatura para el almacenamiento seguro del dispositivo médico.

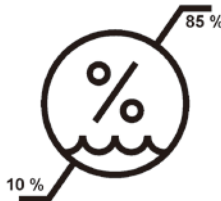Símbolo:**Título del símbolo:****Descripción:**

Límite de humedad para el transporte y el almacenamiento

Indica el rango de humedad admisible para un transporte y almacenamiento seguro del dispositivo médico.

Símbolo:**Título del símbolo:****Descripción:**

Indicador de impactos Shockdot

En el sistema Shockwatch, un punto muestra las descargas o los golpes que superen una determinada magnitud mediante una coloración roja. Al superar una aceleración definida (valor g), se colorea el tubo indicador.

Símbolo:**Título del símbolo:****Descripción:**

Reciclaje

Indica que el equipo se puede reciclar en caso de que existan instalaciones adecuadas.

Símbolo:**Título del símbolo:****Descripción:**

Marca de cumplimiento normativo (RCM)

La marca de cumplimiento normativo (RCM) indica el cumplimiento de un dispositivo con las normas técnicas ACMA pertinentes de Nueva Zelanda y Australia, es decir, para telecomunicaciones, comunicaciones por radio, EMC y EME.

1.3 Tipo de instrumento

El contenido de este manual de instrucciones solo es aplicable al tipo de equipo indicado en la portada. En la parte posterior del equipo encontrará una placa de datos y en el lateral una etiqueta con el número de serie.

1.4 Uso previsto del instrumento

El HistoCore Arcadia H es un centro de inclusión de tejidos moderno controlado por microprocesador.

El uso previsto de HistoCore Arcadia H consiste en la inclusión de muestras histológicas en parafina, dentro del ámbito de los laboratorios de histopatología.

Está diseñado sólo para las aplicaciones siguientes:

- Licuación de parafina para la inclusión de muestras y mantenimiento de la parafina líquida a temperatura de trabajo.
- Dispensar parafina en los moldes de inclusión donde se colocan las muestras.
- Calentar y mantener calientes las cajas para accesorios con muestras y los moldes de inclusión, así como las pinzas necesarias para la orientación de las muestras.



Advertencia

Todo uso del aparato fuera del indicado no está conforme al previsto.

1.5 Cualificación del personal

- El sistema HistoCore Arcadia H debe ser manejado únicamente por personal de laboratorio debidamente formado. El equipo está previsto para su uso exclusivo por profesionales.
- Los usuarios solo deben utilizar el equipo después de haber leído detenidamente este manual de instrucciones y haberse familiarizado con todos los detalles técnicos.

2. Seguridad

2.1 Indicaciones de seguridad



Advertencia

Preste atención especial a las advertencias e instrucciones de seguridad que se recogen en este capítulo. Tenga en cuenta que debe leer estas notas aunque esté familiarizado con el manejo y uso de otros equipos Leica Biosystems.

Este manual de instrucciones contiene información e instrucciones importantes referentes a la seguridad del funcionamiento y al mantenimiento del equipo.

Forma parte integrante del producto y debe leerse cuidadosamente antes de la puesta en servicio y el manejo del equipo; debe estar disponible en todo momento en el lugar de uso del instrumento.

Este equipo ha sido fabricado y sometido a un control de calidad conforme a las normas de seguridad vigentes para equipos eléctricos de medición, control y laboratorio.

Para mantener el equipo en estas condiciones y garantizar un funcionamiento seguro, el usuario deberá tener en cuenta todas las indicaciones y advertencias contenidas en este manual de instrucciones.



Nota

Siempre que sea necesario, el manual de instrucciones debe complementarse con las pertinentes normas nacionales para la prevención de accidentes y de protección medioambiental.



Advertencia

- Los dispositivos de seguridad, instalados en el equipo y en los accesorios, no deben ni quitarse ni modificarse. El equipo solo puede ser abierto y reparado por técnicos autorizados del servicio técnico de Leica Biosystems.
- Utilice exclusivamente el cable de alimentación suministrado. Éste debe reemplazarse por otro cable de alimentación si el enchufe de red no es compatible con los enchufes de su país. Póngase en contacto con el servicio técnico de Leica Biosystems.
- La carga máxima de la tapa del depósito de parafina es de 1 kg. No supere dicha carga; de lo contrario, la tapa del depósito de parafina podría sufrir daños.

Riesgos residuales

- El equipo ha sido diseñado y construido con los últimos adelantos técnicos y conforme a las normas y directrices reconocidas en materia de tecnología de seguridad. Un uso y manejo inadecuados pueden suponer un peligro para la vida del usuario o de terceros, así como originar daños en el equipo o en otros valores materiales. El equipo debe utilizarse únicamente para su uso previsto, siempre y cuando se encuentre en perfecto estado desde el punto de vista técnico y de seguridad. Deben subsanarse todos aquellos fallos que puedan afectar a la seguridad.



Nota

Encontrará información actualizada sobre las directivas aplicables en la Declaración de conformidad de la CE en Internet, en la dirección:
<http://www.LeicaBiosystems.com>

2.2 Advertencias

Los dispositivos de seguridad incorporados en el equipo por el fabricante únicamente constituyen la base para la prevención de accidentes. El manejo seguro del equipo es responsabilidad sobre todo del propietario del equipo, así como de las personas que designe para su manejo, mantenimiento y reparación.

Para garantizar el funcionamiento correcto del equipo, deberá prestar atención a las indicaciones y advertencias especificadas a continuación.

Indicaciones de peligro y seguridad en el propio aparato



Advertencia

- Las indicaciones de seguridad del instrumento marcadas con un triángulo de advertencia indican que han de seguirse los pasos de trabajo correctos, tal y como se describen en este manual de instrucciones, cuando se esté manejando o se vaya a sustituir la parte del equipo correspondiente. Si no se observan estas indicaciones existe riesgo de sufrir accidentes, lesiones y/o daños en el aparato o en los accesorios.



- Algunas superficies específicas del equipo están calientes durante el funcionamiento en condiciones normales. Éstas están provistas del triángulo de advertencia mencionado. Tocar estas superficies sin unas medidas de seguridad adecuadas puede provocar quemaduras.

Indicaciones de peligro – Transporte e instalación



Advertencia

- El aparato deberá ser transportado en posición vertical una vez desembalado.
- Coloque el aparato en una mesa de laboratorio y asegúrese de que esté nivelado.
- ¡Evitar la incidencia de rayos solares directos sobre el aparato (ventana)!
- Enchufe el aparato sólo a una toma eléctrica con puesta a tierra. Si hay que utilizar un cable de prolongación, asegúrese de que disponga de un conductor de puesta a tierra de protección.
- Conecte el equipo a un enchufe con la tensión de alimentación correcta según el tipo de instrumento, 100~120 V o 220~240 V.
- El lugar de instalación debe estar bien ventilado y no debe encontrarse ningún tipo de fuente de ignición.
- ¡El equipo no debe accionarse en locales donde exista peligro de explosión!
- Si hay cambios bruscos de temperatura entre el lugar de almacenamiento y el lugar de instalación y si la humedad del aire es alta, puede formarse agua de condensación. En tal caso hay que esperar por lo menos dos horas antes de poner el equipo en marcha.

Indicaciones de peligro – Trabajos en el aparato**Advertencia**

- ¡Parafina es un material inflamable y por consecuencia debe manejarse con el debido cuidado!
- Residuos de parafina solidificada en las superficies de trabajo no deben quitarse con objetos duros, ya que éstos podrían dañar la capa de revestimiento. ¡Utilice la espátula suministrada junto con el equipo!
- Cuando el equipo está funcionando, el depósito de parafina, el recipiente para moldes de inclusión, el recipiente para cassettes, la superficie de trabajo y el portapinzas están calientes.
- ¡Peligro de quemarse!
- No desplace el equipo durante su funcionamiento.
- ¡Sustancias inflamables no deben almacenarse cerca del equipo! Existe peligro de incendio si se trabaja en lugares directamente contiguos al equipo con llamas abiertas (p. ej. mecheros Bunsen) (vapores de disolventes). Por ello se debe mantener una distancia mínima de seguridad de 2 metros.
- Espere 30 minutos antes de tocar el instrumento después de apagarlo.
- El incumplimiento de las instrucciones especificadas por el fabricante puede dañar la protección proporcionada por el equipo.

Indicaciones de peligro – Mantenimiento y limpieza**Advertencia**

- Antes de proceder a las tareas de mantenimiento desconecte el aparato y extraiga el enchufe de red.
- Al utilizar detergentes de limpieza, siga las instrucciones de seguridad del fabricante así como los reglamentos de laboratorio pertinentes.
- Antes de cambiar fusibles, siempre hay que desconectar el interruptor principal y desenchufar el aparato de la red.
El usuario puede cambiar los fusibles del portafusible del panel posterior.
- Durante el trabajo y la limpieza, no debe entrar ningún líquido en el interior del equipo.

2.3 Sistemas de seguridad integrados

El equipo está provisto de los siguientes dispositivos de seguridad:

Fusibles en los elementos de calefacción

Todos los elementos de calefacción de CA del equipo están provistos de fusibles contra sobrecalentamiento, que reaccionan en caso de sobrecalentamiento, apagando el elemento en cuestión.

**Advertencia**

- Los fusibles se reinician sólo una vez que se desconecta el instrumento de la red y que la temperatura de la unidad de calefacción baja de 50 °C.
- Tenga en cuenta que la única manera de desconectar la alimentación del instrumento es retirar el enchufe de red.

3 Componentes del equipo y especificaciones

3. Componentes del equipo y especificaciones

3.1 Vista general: componentes del equipo

Vista frontal del equipo



Fig. 1

- | | | | |
|---|-------------------------------|----|------------------------------------|
| 1 | Interruptor principal | 8 | Punto frío |
| 2 | Panel de control | 9 | Recipientes colectores de parafina |
| 3 | Dispensador | 10 | Tapa del recipiente derecho |
| 4 | Portapinzas | 11 | Recipiente derecho |
| 5 | Recipiente izquierdo | 12 | Iluminación de la zona de trabajo |
| 6 | Tapa del recipiente izquierdo | 13 | Depósito de parafina |
| 7 | Superficie de trabajo | | |

Parte posterior del equipo

Fig. 2

- | | | | |
|---|-------------------------------------|---|----------------|
| 1 | Puerto para el interruptor de pie | 4 | Fusibles de CA |
| 2 | Panel posterior | 5 | Pie |
| 3 | Puerto para suministro de corriente | | |

3.2 Características principales del equipo

- Depósito de parafina de 4 litros de capacidad.
- Pantalla LCD de 5,7 pulgadas y botones táctiles capacitivos integrados.
- Activación del flujo de parafina mediante una abrazadera de altura ajustable, pivotante; activación manual mediante pulsación o un interruptor de pie (opcional).
- Velocidad de flujo regulable.
- Recipientes colectores de parafina extraíbles.
- Superficie de trabajo calefactable, grande y de fácil limpieza con punto frío integrado, también para cajas para accesorios extragrandes ("supercassettes") con sistema de salida de parafina.
- Recipientes para cassettes y/o moldes de inclusión con tapa plegable, extraíble e intercambiable.
- Portapinzas extraíble, calefactable para 6 pinzas, accesible por los dos lados.
- Iluminación óptima de la superficie de trabajo mediante lámpara de LED, controlada con la tecla del panel de control LCD.
- Temperatura del recipiente para cassettes/moldes de inclusión, de la superficie de trabajo y del depósito de parafina regulable entre 50 °C (122 °F) y 75 °C (167 °F).
- Se puede programar la hora de comienzo y fin de trabajo, así como los días de trabajo.
- Emite el mensaje de error para la monitorización del estado de funcionamiento.
- Ofrece la función de calefacción mejorada para un fundido de la parafina más rápido.

3.3 Datos técnicos

Generales

Tensión (voltaje) de red	100-120 VCA, 220-240 VCA, 50/60 Hz
Corriente nominal	10 A máx.
Clase de protección ¹⁾	I
Grado de contaminación ¹⁾	2
Categoría de sobretensión	II
Temperaturas de trabajo	De 50 °C (122 °F) a 75 °C (167 °F), ajustable en aumentos de 1 °C (o 1 °F)
Grado de protección IP	IP20
Grado de protección IP (interruptor de pie)	IPX8

Entorno de trabajo

Temperatura ambiente de trabajo	De +20 °C a +30 °C
Humedad relativa de trabajo	Entre 20 % y 80 %, sin condensación
Altitud de trabajo	Hasta 2000 m

Entorno de conservación y transporte

Temperatura de transporte	–29 °C hasta +50 °C
Temperatura de conservación	De +5 °C a +50 °C
Humedad relativa de transporte y conservación	Entre 10 % y 85 %, sin condensación

Entorno electromagnético

Entorno electromagnético básico

Fusibles

Fusibles retardados 5 x 20 mm	2 x T10 A, 250 V
-------------------------------	------------------

Dimensiones y pesos

Altura	384 mm
Anchura	560 mm
Profundidad	636 mm
Peso	27 kg

Capacidades

Depósito de parafina	Máx. 4 l
Bandejas removibles	• Bandeja de cartuchos: máx. 150 cartuchos de histología de tamaño estándar (40 x 27 mm) • Bandeja de moldes de inclusión: máx. 500 moldes de inclusión

Parámetros programables

Temperatura

- Depósito/dispensador de parafina
- Recipiente para moldes de inclusión/
recipiente para cassettes
- Superficie de trabajo/portapinzas

Hora

- Días de trabajo, día actual de la semana
- Horario laboral (comienzo/final),
hora actual

¹⁾ según IEC-61010, EN 61010

4. Configuración del instrumento

4.1 Requisitos del emplazamiento

- Mesa de laboratorio estable y sin vibraciones, con una superficie plana y horizontal y suelo sin vibraciones en la medida de lo posible.
- El equipo no debe usarse cerca de la corriente de alimentación de un acondicionador de aire y debe protegerse de la luz solar fuerte (ventana).
- Para que el disipador de calor pueda funcionar debidamente, debe mantenerse una distancia de por lo menos 15 cm detrás del instrumento.
- Colocar el equipo en un emplazamiento que permita desconectarlo fácilmente de la red eléctrica. El cable de alimentación debe estar situado en un lugar fácilmente accesible.
- Las zonas cercanas al lugar de trabajo han de estar exentas de aceite y vapores químicos.



Advertencia

El lugar de instalación debe estar bien ventilado y no debe encontrarse ningún tipo de fuente de ignición. El equipo no debe accionarse en locales donde exista peligro de explosión!

4.2 Volumen de suministro: elementos del paquete

Cant.	Nombre	N.º de pedido
1	Unidad básica HistoCore Arcadia H	
	220-240 VCA	14 0393 57257
	220-240 VCA, China	14 0393 57259
	100-120 VCA	14 0393 57258
2	Recipientes izquierdo/derecho, extraíbles	14 0393 57311
2	Tapas para los recipientes izquierdo/derecho	14 0393 57665
1	Rasqueta de parafina	14 0393 53643
1	Portapinzas, extraíble	14 0393 55225
1	Filtro del depósito de parafina	14 0393 53559
4	Juegos de fusibles de recambio, 250 V, 10 A	14 6000 04975
1	Manual de instrucciones (impreso en inglés, con CD de idiomas 14 0393 81200)	14 0393 81001

El cable de conexión específico del país en cuestión debe pedirse aparte. Acceda a una lista de todos los cables de conexión disponibles para su dispositivo en la sección de productos de nuestra web www.LeicaBiosystems.com.



Nota

Compare las piezas suministradas con la lista de empaquetado, el albarán y su pedido. En caso de discrepancias, póngase en contacto con el distribuidor de Leica Biosystems encargado de su pedido.

4.3 Desembalaje e instalación



Nota

El envase tiene un indicador de impacto ShockDot que avisa de un transporte inadecuado. Revíselo en primer lugar cuando se realice la entrega del instrumento. Si el indicador se ha activado, el envase no se manipuló como se indicó. En caso de ser así, marque los documentos de envío como corresponde y revise el envío en busca de daños.



Advertencia

Estas instrucciones de desembalaje se aplican solo si la caja se coloca con los símbolos  orientados hacia arriba.



Fig. 3

1. Retire la correa del embalaje (→ Fig. 3-1) y la cinta adhesiva (→ Fig. 3-2).
2. Abra la caja. Retire la caja de cartón desplazándola hacia arriba (→ Fig. 3-3).



Fig. 4

3. Retire la caja de accesorios (→ Fig. 4-4).
4. Retire los protectores de espuma (→ Fig. 4-5) de uno en uno.

4 Configuración del instrumento

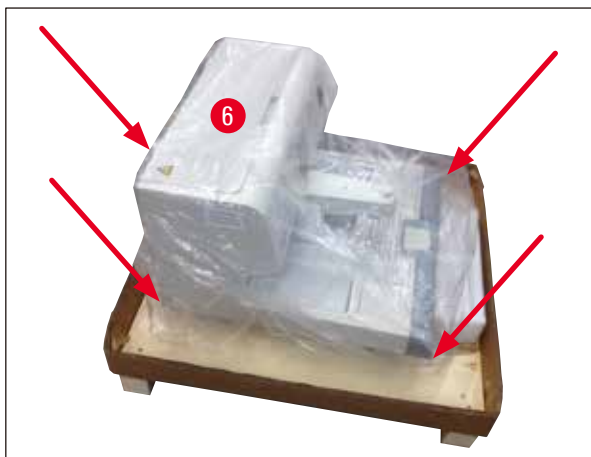


Fig. 5

5. Asegúrese de que al retirar el instrumento (→ Fig. 5-6) del palé haya dos personas para levantar las cuatro esquinas inferiores de la base de soporte (→ Fig. 5).



Fig. 6

6. Coloque el equipo en una mesa de laboratorio estable.
7. Retire los accesorios contenidos en la caja de accesorios (→ Fig. 6-7) de la base del palé.



Nota

El embalaje se debe guardar durante el tiempo de garantía. En caso de volver a transportarlo, proceder en el orden inverso.

4.4 Trabajos de montaje necesarios

En preparación para la puesta en servicio hay que realizar los siguientes pasos:

- Instale los accesorios.
- Instale la lupa de enfoque (opcional), (→ P. 43 – 8.1 Lupa).
- Conecte el interruptor de pie (opcional), (→ P. 43 – 8.2 Interruptor de pie).
- Establezca conexión a la red eléctrica.
- Instale el vaso del prefiltro (opcional), (→ P. 45 – 8.3 Vaso del prefiltro).

Instalación de los accesorios

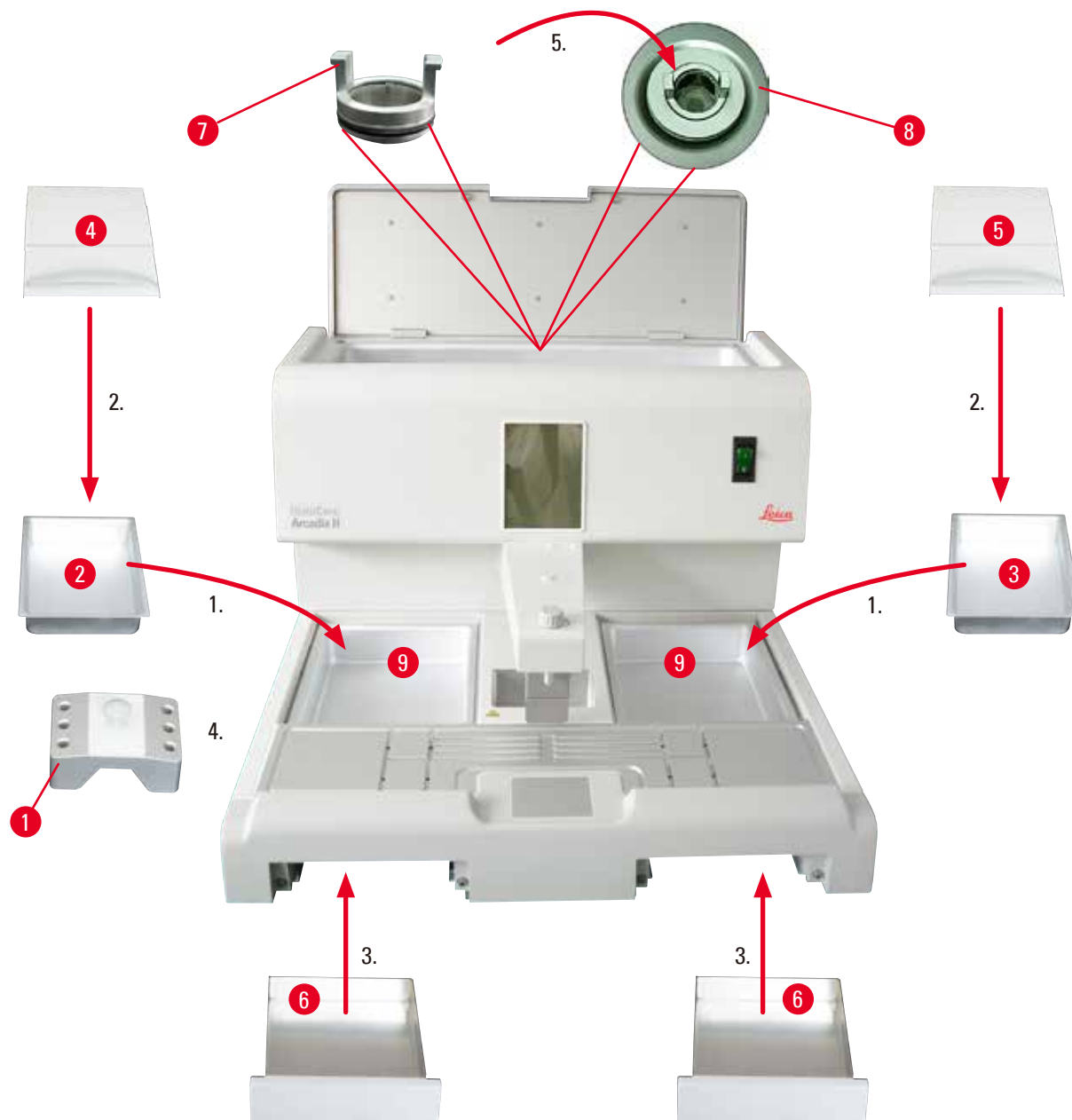


Fig. 7

1. Instale el recipiente izquierdo (→ Fig. 7-2) y el recipiente derecho (→ Fig. 7-3). Según la dirección de trabajo preferida, puede decidir cual de los dos depósitos calentables (→ Fig. 7-9) quiere usar para los cassetes y cual para los moldes.
2. Cierre el recipiente izquierdo/derecho con las tapas correspondientes (→ Fig. 7-4), (→ Fig. 7-5).
3. Inserte el recipiente colector de parafina (→ Fig. 7-6) en la guía por debajo de la superficie de trabajo.
4. Inserte el portapinzas (→ Fig. 7-1).
5. Inserte el filtro de parafina (→ Fig. 7-7) en el orificio de salida de parafina (→ Fig. 7-8) dentro del depósito de parafina, de modo que el anillo tórico de color negro hermetice el orificio.

4.5 Conexión eléctrica

**Advertencia**

El aparato DEBE conectarse a un enchufe de red con toma de tierra y tensión de CA correcta.

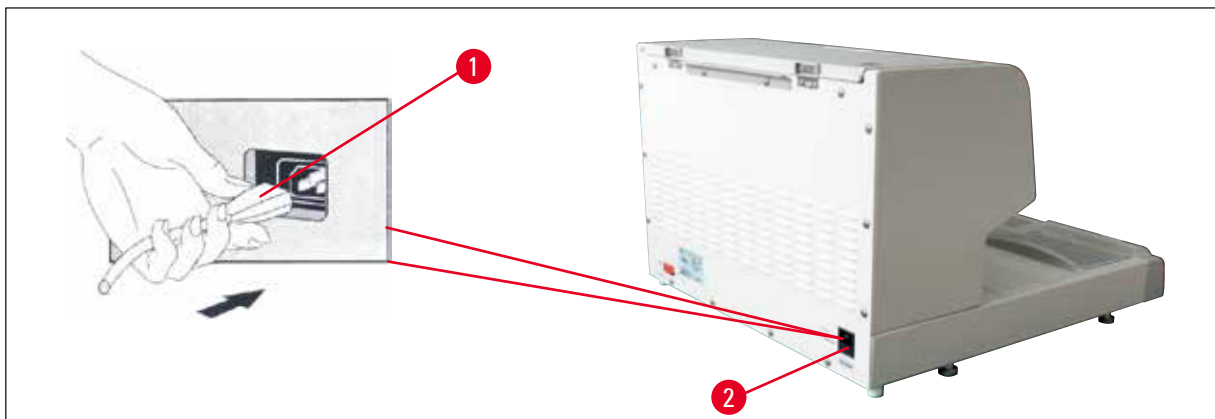
Conexión del cable de conexión

Fig. 8

- Inserte el enchufe (→ Fig. 8-1) del cable de alimentación a la toma de conexión (→ Fig. 8-2) de la parte posterior del equipo.
- Conecte el cable de alimentación a la toma de red.

4.6 Desplazamiento del equipo

**Advertencia**

- No desplace el equipo durante su funcionamiento.
- Antes de desplazar el equipo, asegúrese de que no haya parafina en el depósito ni en los dos recipientes, de que el equipo se haya enfriado y de que el cable de conexión esté desconectado de la red eléctrica.
- Si se levanta el aparato por el dispensador (→ Fig. 9-2) o por el depósito de parafina (→ Fig. 9-3) podría causar daños graves.



Fig. 9

Sujete el equipo por la parte delantera y trasera de la base de soporte inferior para desplazarlo.

5. Funcionamiento

5.1 Partes integrantes y sus funciones

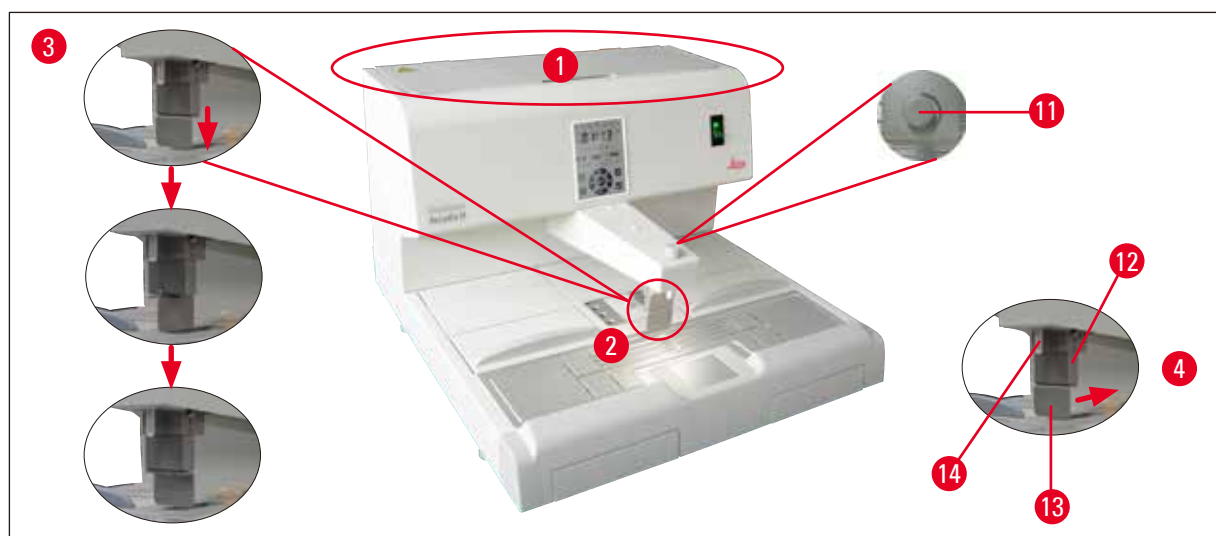


Fig. 10

Depósito de parafina (→ Fig. 10-1)

- El depósito de parafina tiene una capacidad máxima de 4 litros. La temperatura de la parafina se puede ajustar entre 50 °C (122 °F) y 75 °C (167 °F) en incrementos de 1 °C (o 1 °F). El depósito de parafina siempre tiene que estar tapado para que la temperatura seleccionada se mantenga. Un fusible de sobretensión protege frente al sobrecalentamiento de la parafina en caso de que la regulación de temperatura falle.
- Un filtro integrado evita que las partículas que contiene la parafina alcancen el sistema de tubos.



Advertencia

- Cierre con cuidado la tapa del depósito de parafina. ¡Peligro de pinzamiento!
- En HistoCore Arcadia H NO debe emplearse parafina reciclada, ya que ello conlleva peligro de contaminación.
- Una parafina de mala calidad podría provocar un bloqueo. Emplee una parafina correcta y adecuada.
- Si se rellena con distintas parafinas podría provocar grietas en los bloques de parafina. Se recomienda el uso del mismo tipo de parafina.
- Rellene con cuidado la parafina. ¡Peligro de quemarse!

Dispensador (→ Fig. 10-2)

- El dispensador se calienta por un sistema de calefacción independiente. El ajuste de temperatura del dispensador y del depósito de parafina están emparejados.
- Es posible ajustar de forma gradual la cantidad de parafina que ha de salir del tubo de llenado (→ Fig. 10-14) mediante el tornillo dosificador (→ Fig. 10-11).
- El estribo del dispensador (→ Fig. 10-12) sirve para dispensar manualmente. Tiene una abrazadera de presión (→ Fig. 10-13) ajustable en altura. La abrazadera de presión puede invertirse para dejar más espacio para los megacassettes debajo del tubo de llenado (→ Fig. 10-14), (→ Fig. 10-3).

- Para activar el mango del dispensador, empuje el molde (o un dedo) contra la abrazadera de presión. Al empujar, se abre la válvula dispensadora (→ Fig. 10-4). Una vez liberado, el mango regresa a su posición original, con lo cual se vuelve a cerrar la válvula.



Nota

La circulación del flujo no se puede cortar del todo con el tornillo dosificador (→ Fig. 10-11). ¡Éste último no debe girarse en estado frío!



Advertencia

No utilice el dispensador con el instrumento desconectado. De lo contrario, el dispensador podría sufrir daños mecánicos.



Fig. 11

Superficie de trabajo (→ Fig. 11-3)

- La superficie de trabajo incluye la zona de inclusión (→ Fig. 11-3), el portapinzas (→ Fig. 11-5) y el punto frío (→ Fig. 11-4).
- La temperatura de la zona de inclusión (→ Fig. 11-3) y del portapinzas (→ Fig. 11-5) puede ajustarse entre 50 °C (122 °F) y 75 °C (167 °F) en incrementos de 1 °C (o 1 °F).
- La zona de trabajo tiene ranuras y varios orificios de salida (→ Fig. 11-15), a través de los cuales se elimina rápidamente el exceso de parafina.

Punto frío (→ Fig. 11-4)

- El punto frío está integrado en la superficie de trabajo.
- Para orientar la muestra, primero llenar un tercio del molde con parafina líquida. La parafina comienza a solidificarse rápidamente en el punto frío.
- Cuando la parafina ha quedado viscosa, la muestra puede orientarse con facilidad. A continuación, es posible llenar por completo el molde de parafina rápidamente.

Portapinzas (→ Fig. 11-5)

El portapinzas extraíble situado bajo el dispensador tiene cabida para un máximo de 6 pinzas.



Nota

- Mientras se orientan las muestras, la parafina no debe solidificarse demasiado, ya que entonces pueden formarse rajaduras finas dentro del bloque, las cuales causarán problemas al cortar el bloque.
- Se recomienda limpiar el portapinzas antes de su uso.



Advertencia

El portapinzas alcanza una temperatura de entre 50 °C (122 °F) y 75 °C (167 °F) durante su uso.
¡Peligro de quemarse!



Fig. 12

Recipiente colector de parafina (→ Fig. 12-8)

Debajo de la superficie de trabajo se encuentran dos recipientes colectores de parafina calentables de forma indirecta que se encargan de recoger el exceso de parafina.



Advertencia

- El recipiente colector de parafina ha de vaciarse diariamente o siempre que esté lleno. Para evitar posibles contaminaciones, no vuelva a utilizar esta parafina.
- Si se pone en funcionamiento el aparato sin los recipientes colectores de parafina, existe peligro de sufrir quemaduras.

Recipiente para moldes de inclusión y recipiente para cassettes (→ Fig. 12-16)

- Según la dirección de trabajo preferida, puede decidir cual de los dos depósitos calentables (→ Fig. 12-6), (→ Fig. 12-7) quiere usar para los cassettes y cual para los moldes de inclusión. La temperatura se puede ajustar entre 50 °C (122 °F) y 75 °C (167 °F).
- Un depósito (→ Fig. 12-16) para moldes o cassettes se inserta en cada lado del equipo.
- Cada depósito (→ Fig. 12-17) está provisto de una tapa (→ Fig. 12-16) para proteger el contenido contra pérdida de calor y suciedad. Para facilitar el acceso, la tapa puede abatirse.



Advertencia

- Use la caja para accesorios, el recipiente para moldes de inclusión y el depósito de parafina sólo con las tapas facilitadas.
- Póngase guantes para abrir las tapas.
- Se recomienda limpiar el recipiente para cassettes antes de añadir una muestra nueva.



Nota

- Si se trabaja con la tapa abierta parcialmente (→ Fig. 12-17), ajuste la temperatura de modo que la parafina se mantenga fundida.
- Use los recipientes extraíbles en el recipiente para cassettes/moldes con un flujo de trabajo normal.
- Use la cesta compatible con los recipientes. Use los moldes correctos.
- Asegúrese de que todos los cassettes estén totalmente cubiertos durante el funcionamiento.
- No llene en exceso con parafina el recipiente para cassettes/moldes. ¡Peligro de quemarse!



Fig. 13

Interruptor principal (→ Fig. 13-9)

- Active/desactive el interruptor principal para conectar/cortar la alimentación eléctrica.
"1" = **ACTIVAR** "0" = **DESACTIVAR**

- Se enciende la luz del interruptor para indicar que el equipo está conectado a la alimentación eléctrica.
- Una vez que el equipo haya sido puesto en servicio, el interruptor principal sólo debe emplearse para desconectar el equipo por un período prolongado.



Nota

Para poder activar procedimientos programados, el interruptor principal (→ Fig. 13-9) tiene que estar encendido y el instrumento tiene que estar en modo Standby.
Para más información, consulte (→ P. 33 – 5.4 Modos de funcionamiento).

Iluminación de la zona de trabajo (→ Fig. 13-10)

- El sistema de luces LED de la zona de trabajo proporciona una iluminación homogénea y difusa de la superficie de inclusión y del punto frío. Gracias a ello se dan condiciones de visibilidad óptimas al dispensar la parafina y posicionar la muestra.
- Se puede controlar la luz pulsando el botón de luz (→ Fig. 13-15), (→ Fig. 17-15) del panel de control.

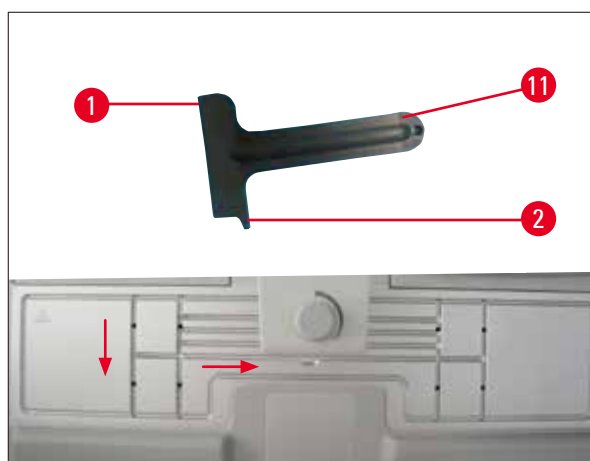


Fig. 14

Rasqueta (→ Fig. 14-11)

- Use la cabeza de la rasqueta (→ Fig. 14-1) para retirar los restos de parafina del instrumento.
- Use el dedo de la rasqueta (→ Fig. 14-2) para retirar los restos de parafina de las ranuras de la superficie de trabajo.



Advertencia

Desplace el dedo de la rasqueta (→ Fig. 14-2) a lo largo de las ranuras de la superficie de trabajo como se muestra en la (→ Fig. 14). De lo contrario, el dedo de la rasqueta (→ Fig. 14-2) podría romperse.

5.2 Encendido del instrumento

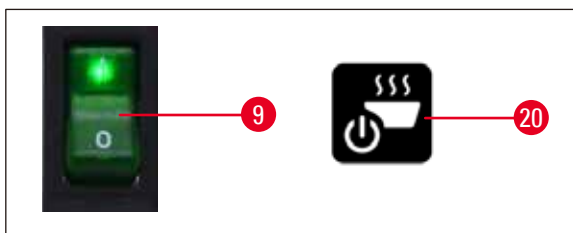


Fig. 15

Para activar el instrumento por primera vez, siga estos pasos.

- Llene el depósito de parafina.
- Ponga el interruptor principal (lado derecho, junto al panel de control) en la posición "I" (→ Fig. 15-9), (→ Fig. 16-9).
- El instrumento lleva a cabo una prueba automática. Todos los iconos de la pantalla táctil se encienden brevemente y se apagan. A continuación aparecen repetidamente por orden durante unos segundos cuatro botones (Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda). Cuando desaparecen los cuatro botones, aparecen en pantalla el botón **Funcionamiento/Standby** (→ Fig. 15-20), (→ Fig. 17-20) y el botón de luz. El instrumento pasa al modo Standby.
- Toque el botón **Funcionamiento/Standby** durante al menos 1 segundo y el instrumento pasará al modo de funcionamiento.

**Nota**

- Los modos normales del instrumento son Standby y Funcionamiento. Para pasar de un modo a otro, use el botón **Funcionamiento/Standby**.
- Use el interruptor principal sólo si el equipo va a desactivarse durante un periodo prolongado o si se van a aplicar nuevos ajustes de hora de inicio y finalización.
- Ajuste la temperatura del área de calentamiento, el día de trabajo, la hora local, la hora de inicio y la hora de finalización. Para ajustar estos valores (→ P. 29 – 5.3 Funciones del panel de control).
- Los calefactores se activan. El indicador de fundido (→ Fig. 17-13) parpadea una vez por segundo durante la fase de calentamiento. Los ajustes de temperatura pueden modificarse durante la fase de calentamiento.

**Nota**

Antes de salir de fábrica, el HistoCore Arcadia H se somete a un control de calidad rígido en condiciones de laboratorio. Compruebe el depósito de parafina y el dispensador antes de utilizarlo o después del mantenimiento. Habrá una pequeña cantidad de parafina limpia en el depósito de parafina o a la salida del dispensador. Esta parafina está absolutamente limpia y puede seguir usándose sin ningún reparo.

**Advertencia**

- Durante el uso, se recomienda no llenar el equipo con parafina sólida cuando la parafina del depósito ya está fundida.
- ¡Peligro de quemarse!
- Peligro de bloqueo del depósito de parafina donde conecta con el tubo de llenado.
- No añada más de 4 l de parafina en el depósito.

5.3 Funciones del panel de control

Vista general del panel de control

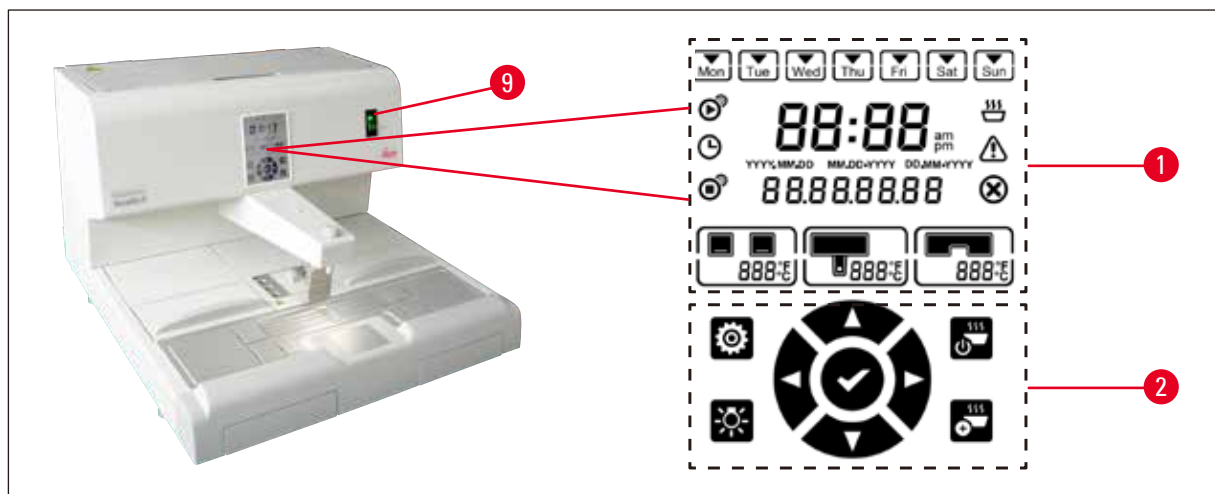


Fig. 16

El panel de control junto al interruptor principal (→ Fig. 16-9) es una pantalla táctil retroiluminada. Se compone de iconos (→ Fig. 16-1) y botones de programación y control táctil (→ Fig. 16-2).

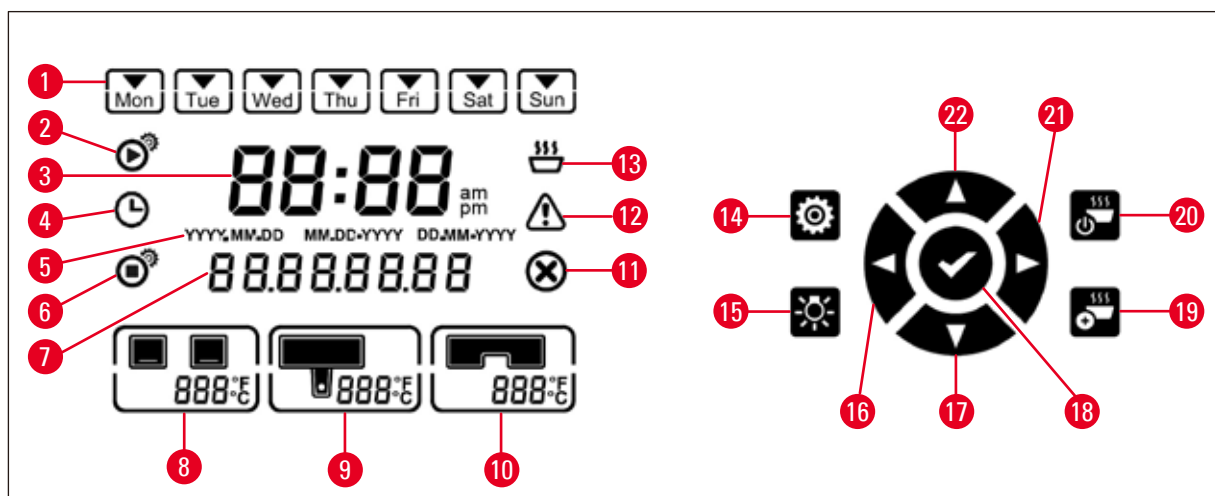


Fig. 17

1	Día de la semana/día de trabajo	9	Temperatura del depósito de parafina	15	Luz
2	Hora de inicio	10	Temperatura de la superficie de trabajo	16	Izquierda
3	Hora actual	11	Error	17	Abajo
4	Programador	12	Advertencia	18	Intro
5	Formato de fecha	13	Indicador de fundido	19	Calentamiento rápido
6	Hora de finalización	14	Configuración	20	Funcionamiento/Standby
7	Código de fecha/mensaje			21	Derecha
8	Temperatura de los recipientes			22	Arriba

**Nota**

Si en 60 segundos no se recibe una acción táctil, se abandona de forma automática el modo de configuración. Todos los ajustes quedan almacenados hasta que el usuario vuelva a cambiarlos, aunque se desconecte el equipo con el interruptor principal.

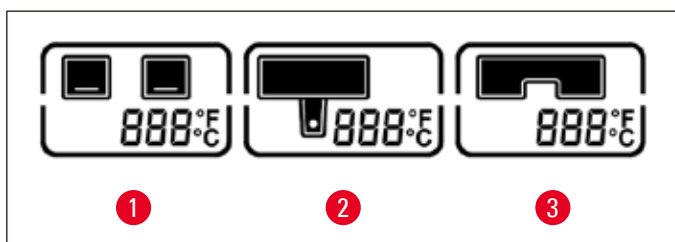
Ajuste de la temperatura

Fig. 18

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Temperatura de los recipientes | 3 | Temperatura de la superficie de trabajo/portapinzas |
| 2 | Temperatura del depósito/dispensador de parafina | | |

Las temperaturas de las distintas áreas de calefacción de los instrumentos pueden ajustarse por separado entre 50 °C (122 °F) y 75 °C (167 °F) en aumentos de 1 °C (o 1 °F).

**Advertencia**

Cuando se ajuste la temperatura es necesario tener en cuenta las especificaciones del fabricante de la parafina (en cuanto a la temperatura máxima permitida).

1. Toque el botón **Configuración** (→ Fig. 17-14) y la temperatura de los recipientes parpadea.
2. Ajuste el valor de la temperatura con los botones **Arriba** (→ Fig. 17-22) / **Abajo** (→ Fig. 17-17).
Pulse el botón **Arriba/Abajo** durante más de 2 segundos y el valor ajustado cambia continuamente. Toque los botones **Izquierda** (→ Fig. 17-16) / **Derecha** (→ Fig. 17-21) para pasar a la temperatura de los recipientes, temperatura del depósito/dispensador de parafina, temperatura de la superficie de trabajo/portapinzas, unidad de temperatura (°C o °F).
3. De ser necesario, toque los botones **Arriba** (→ Fig. 17-22) / **Abajo** (→ Fig. 17-17) para seleccionar grados Celsius (°C) o Fahrenheit (°F).
4. Toque el botón **Intro** (→ Fig. 17-18) para guardar la configuración.
Una vez alcanzados 75 °C (167 °F), la temperatura vuelve a 50 °C (122 °F). Cada valor seleccionado queda almacenado hasta que el usuario vuelva a cambiarlo.

Ajuste de los días de trabajo

El mando temporizador del equipo funciona en conjunto con la selección de los días individuales de la semana. Por eso hay que definir cada día laboral, en los que el mando temporizador debe activarse.



Nota

Sólo en aquellos días de la semana que se definen como días de trabajo, el equipo estará a la temperatura necesaria y listo para el servicio.

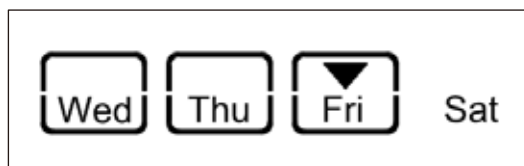


Fig. 19

1. Toque el botón **Configuración** (→ Fig. 17-14).
2. Toque el botón **Intro** (→ Fig. 17-18) las veces que sea necesario hasta que el parpadee el icono de Mon (lunes).
3. Toque los botones **Izquierda** (→ Fig. 17-16) / **Derecha** (→ Fig. 17-21) para pasar por los días de la semana y ajustar los días de trabajo con los botones **Arriba** (→ Fig. 17-22) / **Abajo** (→ Fig. 17-17). El día de trabajo seleccionado queda resaltado con un rectángulo. El día actual se identifica con un triángulo invertido.
4. Toque el botón **Intro** (→ Fig. 17-18) para guardar la configuración.

Ajuste de la fecha y la hora

La fecha y hora indicadas en el panel de control tienen que ajustarse conforme a la hora local para garantizar el correcto funcionamiento del mando temporizador.

1. Toque el botón **Configuración** (→ Fig. 17-14).
2. Toque el botón **Intro** (→ Fig. 17-18) las veces que sea necesario hasta que el formato de fecha parpadee.
3. Toque los botones **Arriba** (→ Fig. 17-22) / **Abajo** (→ Fig. 17-17) para escoger el formato de fecha.
Formatos de fecha:
 - **AAAA.MM.DD.** Con este formato de fecha, el formato de la hora es de 24 horas.
 - **MM.DD.AAAA.** Con este formato de fecha, el formato de la hora es de 12 horas.
 - **DD.MM.AAAA.** Con este formato de fecha, el formato de la hora es de 24 horas.
4. Toque el botón **Derecha** (→ Fig. 17-21).
5. Ajuste la fecha y hora con los botones **Arriba** (→ Fig. 17-22) / **Abajo** (→ Fig. 17-17). Toque los botones **Izquierda** (→ Fig. 17-16) / **Derecha** (→ Fig. 17-21) para pasar por los valores de año, mes, día, hora, minuto, am y pm (sólo en formato de 12 horas). Pulse el botón **Arriba/Abajo** durante más de 2 segundos y el valor ajustado cambia continuamente.
6. Toque el botón **Intro** (→ Fig. 17-18) para guardar la configuración.

Ajuste de la hora de inicio

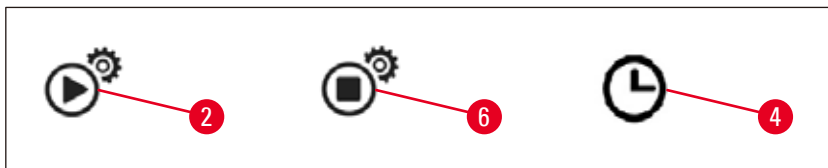


Fig. 20

La hora de inicio es la hora en la que el instrumento entra automáticamente en el modo de funcionamiento.

1. Toque el botón **Configuración** (→ Fig. 17-14).
2. Toque el botón **Intro** (→ Fig. 17-18) tantas veces como sea necesario hasta que el icono de Hora de inicio (→ Fig. 20-2) aparezca y el valor de la hora parpadee.
3. Ajuste la hora con los botones **Arriba** (→ Fig. 17-22) / **Abajo** (→ Fig. 17-17). Pulse el botón **Arriba/Abajo** durante más de 2 segundos y el valor ajustado cambia continuamente.
4. Toque el botón **Derecha** (→ Fig. 17-21) y el valor de los minutos parpadeará.
5. Ajuste los minutos con los botones **Arriba** (→ Fig. 17-22) / **Abajo** (→ Fig. 17-17). Si se ha seleccionado el formato de 12 horas, toque el botón **Derecha** (→ Fig. 17-21) y use los botones **Arriba** (→ Fig. 17-22) / **Abajo** (→ Fig. 17-17) para ajustar am y pm.
6. Toque el botón **Intro** (→ Fig. 17-18) para guardar la configuración.

Establecer la hora de finalización

La hora de finalización es la hora en la que el aparato pasa del modo de funcionamiento al modo standby.

1. Toque el botón **Configuración** (→ Fig. 17-14).
2. Toque el botón **Intro** (→ Fig. 17-18) tantas veces como sea necesario hasta que el icono de Hora de finalización (→ Fig. 20-6) aparezca y el valor de la hora parpadee.
3. Siga los pasos 3, 4, 5 y 6 del apartado **Ajuste de la hora de inicio**, para ajustar la hora de finalización.

Una vez ajustados la hora de inicio y la hora de finalización, apague y encienda el equipo con el botón físico (→ Fig. 15-9), y aparecerá el icono del programador en el panel de control (→ Fig. 20-4).

Para desactivar el programador (→ P. 33 – 5.4 Modos de funcionamiento).



Advertencia

- El programador funciona sólo si el instrumento está encendido.
- La hora de inicio y la hora de finalización siguen siendo válidas en el modo standby.

5.4 Modos de funcionamiento

Modo "Standby"

Si el programador está habilitado, el instrumento pasa al modo de funcionamiento y al modo standby de forma automática a la hora de inicio y la hora de finalización programadas.

En modo standby:

- Todos los elementos de calefacción (depósito/dispensador de parafina, superficie de trabajo/portapinzas y recipientes) están desactivados.
- La refrigeración del punto frío está apagada.
- El control del dispensador está deshabilitado.
- Sólo aparecen en el panel de control el botón **Funcionamiento/Standby**, el botón de **Calentamiento rápido**, el botón de **Luz** y el icono del **Programador** (si ya se habilitó el día anterior).

Activación del modo de trabajo



Fig. 21

- Toque el botón **Funcionamiento/Standby** (→ Fig. 21-20) durante al menos 1 segundo.
- El equipo pasa del modo de standby al modo de funcionamiento. La hora actual y los iconos de los valores actualmente seleccionados se muestran en el panel de control.

Modo de 24 horas, operar en servicio de turnos

Si la hora de inicio y la hora de finalización se ajustan con el mismo valor, el instrumento funcionará de forma continua, incluso los días que no se han definido como días de trabajo.

Ejemplo: Hora de comienzo = **00:00** y hora final = **00:00**.

Para activar el programador (→ P. 29 – 5.3 Funciones del panel de control).



Advertencia

Atención:

El programador se anula cuando la hora de finalización es anterior a la hora de inicio. El icono del programador no se muestra.

P. ej., hora de comienzo: 08:00 h y hora final: 06:00.



Nota

En el modo de 24 horas debería activarse el modo de calentamiento rápido al rellenar de parafina dura (→ P. 34 – 5.5 Calefactor del instrumento) para acelerar el proceso de fundido.

5.5 Calefactor del instrumento

Modo de precalentamiento

Cuando el programador está habilitado y el tiempo de precalentamiento disponible no es inferior a 5 horas, el equipo pasa a modo de precalentamiento 5 horas antes de la hora de inicio.

- Todos los elementos de calefacción (depósito/dispensador de parafina, superficie de trabajo/portapinzas y recipientes):
El calentamiento comienza 5 horas antes de la hora de inicio.
- Punto frío y ventilador:
Empieza 25 minutos antes de la hora de inicio.

Durante la fase de precalentamiento, sólo aparecen en el panel de control el botón de **Funcionamiento/Standby**, el icono del **Programador**, el botón de **Luz** y el icono de **Fundido** que parpadea.

Modo de calentamiento rápido

Para fundir la parafina se necesita una gran cantidad de calor. Esto solo será posible en el modo "Standby" mediante el plazo de desarrollo correspondiente. Sin embargo, en el modo de funcionamiento, el depósito de parafina se calienta lo suficiente para mantener la parafina a la temperatura seleccionada. Por lo tanto, en caso necesario (p. ej., cuando hay que añadir parafina en el depósito en funcionamiento continuo), se puede acelerar el proceso de fundido mediante la aplicación de una cantidad de calor mayor (modo de calentamiento rápido). El depósito de parafina se calienta entonces a una temperatura superior (modo de calentamiento rápido).

Para activar el modo de calentamiento rápido durante el modo de funcionamiento, toque el botón de calentamiento rápido.

Aparece el botón de calentamiento rápido y el indicador de fundido parpadea más rápido con el modo de calentamiento rápido habilitado.

El modo de calentamiento rápido puede apagarse en cualquier momento tocando el mismo botón.



Advertencia

Atención:

No use el instrumento durante el modo de calentamiento rápido. De lo contrario, podría dañarse la muestra.

No use el instrumento si parpadea el símbolo de advertencia (→ Fig. 17-12). Espere a que el símbolo de advertencia desaparezca.

6. Mantenimiento y limpieza

6.1 Limpieza del instrumento



Advertencia

- Aunque sea un solvente ideal para quitar parafina, ¡nunca utilice xilol para la limpieza del equipo! Los vapores del xilol son más pesados que el aire y pueden llegar a inflamarse incluso manteniendo la distancia con la fuente de calor.
- ¡Peligro de incendio!
- No use productos de limpieza no recomendados. Los restos de reactivo de limpieza podrían contaminar la muestra.
- Para evitar que la superficie del aparato se raye, sólo se debe utilizar al limpiarla la rasqueta de parafina suministrada. ¡No utilice en ningún caso herramientas metálicas!

Superficies de trabajo

- Para la limpieza de la superficie de trabajo se pueden utilizar todos los productos de limpieza de laboratorio corrientes que sean apropiados para retirar la parafina (p. ej., Polyguard o productos sustitutivos del xileno).
- Evite el contacto prolongado de disolventes orgánicos con la superficie del equipo.
- Utilice un pañuelo de papel seco sin pelusa para eliminar el agua de condensación del punto frío cuando sea necesario.

Panel de control

- Utilice un paño seco y sin pelusa para limpiar el panel de control semanalmente.
- Si se ha solidificado parafina en el panel de control, elimínela con cuidado.

Depósito de parafina

- Evite que caigan impurezas en el depósito de parafina.
- Vacíe la parafina a través del dispensador. Una vez que se ha extraído, deben quedar restos de parafina en el depósito para evitar que penetren partículas contaminantes en el dispensador.
- Retire esta parafina con un pañuelo o una servilleta de papel. No retire el filtro de parafina hasta que se haya retirado los restos de parafina.
- Las superficies internas del depósito pueden limpiarse con un pañuelo de papel.



Advertencia

La parafina fundida y el depósito de parafina están calientes.
¡Peligro de quemarse!

Portapinzas

El portapinzas suele ser un foco de contaminación y la suciedad se acumula fácilmente allí. Use un paño sin pelusas con reactivo de limpieza para limpiar el portapinzas y la cavidad semanalmente.

**Advertencia**

El portapinzas alcanza una temperatura de entre 50 °C (122 °F) y 75 °C (167 °F) durante su uso.
¡Peligro de quemarse!

Unidad de iluminación

La mala iluminación puede afectar al funcionamiento diario, p. ej., una orientación incorrecta de la muestra. Use un paño sin pelusas con reactivo de limpieza para limpiar la tapa de protección de los LED una vez al mes.

Recipiente colector de parafina

Antes de extraer los compartimentos del recipiente colector de parafina para su vaciado, es necesario retirar la parafina sobrante de la superficie de trabajo mediante celulosa para evitar que la parafina entre en el aparato.

**Advertencia**

Tener cuidado con las parafinas que se funden a baja temperatura, porque existe peligro de sufrir quemaduras al extraer el depósito colector de parafina si ésta estuviera líquida.

- Retire y vacíe el recipiente colector de parafina mientras esté caliente.
- No debe reutilizarse la parafina acumulada en el recipiente colector. Se corre el riesgo de que se contaminen las muestras.
- Vacíe los dos recipientes colectores de parafina regularmente para evitar que derrames en el aparato. La frecuencia depende de las características del trabajo, pero al menos una vez al día.

**Advertencia**

- Si los depósitos colectores de parafina no se vacían según lo prescrito, el exceso de parafina se derramaría en el interior del aparato o en la mesa de trabajo.
- Existe peligro de sufrir quemaduras y, además, pueden causarse daños en el equipo.

6.2 Instrucciones de mantenimiento**Advertencia**

Las tareas de mantenimiento y reparación del equipo únicamente deben ser realizadas por técnicos de servicio autorizados por Leica Biosystems.

Tenga en cuenta los siguientes puntos para garantizar la fiabilidad del equipo.

- Limpie el aparato detenidamente a diario.
- Quite periódicamente el polvo acumulado en las rejillas de ventilación situadas en la parte trasera del equipo con un pincel o un aspirador.
- Al finalizar el período de garantía, contrate un servicio de mantenimiento. En caso de que se precise más información al respecto contactar con el servicio posventa correspondiente.

7. Resolución de problemas

7.1 Mensaje de error

Cuando se produce un error instrumental, aparece un mensaje de error que parpadea en la zona de "Código de fecha/mensaje" (→ Fig. 17-7). Toque el botón **Intro** (→ Fig. 17-18) para que el mensaje de error deje de parpadear.

El mensaje de error no desaparece hasta que se reinicia el instrumento.

Siga las instrucciones indicadas en la columna **ACCIÓN DEL USUARIO**. Para obtener más información, consulte (→ P. 47 – 9. Garantía y servicio).

En la tabla siguiente se enumeran los mensajes de error que puede mostrar el panel de control.

N.º	Mensaje de error	Descripción	Comportamiento del instrumento	Acción del usuario
1	2_11	La temperatura del dispensador es superior al límite de temperatura superior.	1. Detener el calentamiento del dispensador 2. Mensaje de error e icono de error parpadeando	Informar al Servicio de Posventa.
2	2_12	La temperatura del dispensador baja por debajo del límite de temperatura inferior del objetivo.	Mensaje de error e icono de error parpadeando	Informar al Servicio de Posventa.
3	2_15	La temperatura del dispensador sube demasiado rápido.	Mensaje de error e icono de error parpadeando	Informar al Servicio de Posventa.
4	2_21	La temperatura del depósito de parafina es superior al límite de temperatura superior.	1. Detener el calentamiento del depósito 2. Mensaje de error e icono de error parpadeando	Informar al Servicio de Posventa.
5	2_22	La temperatura del depósito de parafina baja por debajo del límite de temperatura inferior del objetivo.	Mensaje de error e icono de error parpadeando	Informar al Servicio de Posventa.
6	2_23	El depósito de parafina no puede alcanzar la temperatura deseada pasadas 5 horas desde que el sistema inició el calentamiento.	1. Detener el calentamiento del depósito 2. Mensaje de error e icono de error parpadeando 3. Alarma sonora	Apagar el instrumento e informar al Servicio de Posventa.

N.º	Mensaje de error	Descripción	Comportamiento del instrumento	Acción del usuario
7	2_25	La temperatura del depósito de parafina sube demasiado rápido.	Mensaje de error e icono de error parpadeando	1. Sacar la muestra del instrumento. 2. Asegurarse de que la tensión de entrada es adecuada para el instrumento. 3. Informar al Servicio de Posventa.
8	2_31	La temperatura del recipiente izquierdo es superior al límite de temperatura superior.	1. Detener el calentamiento del recipiente izquierdo 2. Mensaje de error e icono de error parpadeando 3. Alarma sonora	Sacar la muestra del instrumento y contactar con el Servicio Posventa.
9	2_32	La temperatura del recipiente izquierdo baja por debajo del límite de temperatura inferior del objetivo.	Mensaje de error e icono de error parpadeando	Informar al Servicio de Posventa.
10	2_33	El recipiente izquierdo no puede alcanzar la temperatura deseada pasadas 5 horas desde que el sistema inició el calentamiento.	Mensaje de error e icono de error parpadeando	Informar al Servicio de Posventa.
11	2_35	La temperatura del recipiente izquierdo sube demasiado rápido.	Mensaje de error e icono de error parpadeando	1. Sacar la muestra del instrumento. 2. Asegurarse de que la tensión de entrada es adecuada para el instrumento. 3. Informar al Servicio de Posventa.
12	2_41	La temperatura del recipiente derecho es superior al límite de temperatura superior.	1. Detener el calentamiento del recipiente derecho 2. Mensaje de error e icono de error parpadeando 3. Alarma sonora	Sacar la muestra del instrumento y contactar con el Servicio Posventa.
13	2_42	La temperatura del recipiente derecho baja por debajo del límite de temperatura inferior del objetivo.	Mensaje de error e icono de error parpadeando	1. Reinicie el instrumento. 2. Si el mensaje de error persiste tras reiniciar el instrumento, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

N.º	Mensaje de error	Descripción	Comportamiento del instrumento	Acción del usuario
14	2_43	El recipiente derecho no puede alcanzar la temperatura deseada pasadas 5 horas desde que el sistema se encendió.	Mensaje de error e icono de error parpadeando	1. Asegurarse de que la tensión de entrada es adecuada para el instrumento. 2. Informar al Servicio de Posventa.
15	2_45	La temperatura del recipiente derecho sube demasiado rápido.	Mensaje de error e icono de error parpadeando	1. Sacar la muestra del instrumento. 2. Asegurarse de que la tensión de entrada es adecuada para el instrumento. 3. Informar al Servicio de Posventa.
16	2_51	La temperatura de la superficie de trabajo es superior al límite de temperatura superior.	1. Detener el calentamiento de la superficie de trabajo 2. Mensaje de error e icono de error parpadeando 3. Alarma sonora	Apagar el instrumento e informar al Servicio de Posventa.
17	2_52	La temperatura de la superficie de trabajo baja por debajo del límite de temperatura inferior del objetivo.	Mensaje de error e icono de error parpadeando	1. Asegurarse de que la tensión de entrada es adecuada para el instrumento. 2. Informar al Servicio de Posventa.
18	2_55	La temperatura de la superficie de trabajo sube demasiado rápido.	Mensaje de error e icono de error parpadeando	1. Parar el flujo de inclusión. 2. Asegurarse de que la tensión de entrada es adecuada para el instrumento. 3. Informar al Servicio de Posventa.
19	2_71	La temperatura del punto frío está por debajo del límite de temperatura inferior.	Mensaje de error e icono de error parpadeando	1. Asegurarse de que la temperatura ambiente esté entre 20 y 30 °C. 2. Informar al Servicio de Posventa.
20	2_72	La temperatura del punto frío es superior al límite de temperatura superior.	Mensaje de error e icono de error parpadeando	1. Asegurarse de que la temperatura ambiente esté entre 20 y 30 °C. 2. Informar al Servicio de Posventa.

N.º	Mensaje de error	Descripción	Comportamiento del instrumento	Acción del usuario
21	2_73	La temperatura del punto frío es superior al límite de temperatura superior una hora después de que el sistema se haya encendido.	Mensaje de error e icono de error parpadeando	1. Asegurarse de que la temperatura ambiente esté entre 20 y 30 °C. 2. Informar al Servicio de Posventa.
22	2_61	La temperatura del portapinzas es superior al límite de temperatura superior.	1. Detener el calentamiento del portapinzas 2. Mensaje de error e icono de error parpadeando 3. Alarma sonora	Sacar las pinzas del portapinzas y contactar con el Servicio Posventa.
23	2_62	La temperatura del portapinzas baja por debajo del límite de temperatura inferior del objetivo.	Mensaje de error e icono de error parpadeando	Informar al Servicio de Posventa.
24	/	Advertencia de temperatura del depósito. La temperatura del depósito es superior a 80 °C (176 °F).	El icono de advertencia parpadea a 1 Hz	No utilice el instrumento y espere hasta que desaparezca el icono. Si sigue parpadeando, apague el instrumento e informe al Servicio de Posventa.

7.2 Posibles fallos

Esta sección le ayudará a diagnosticar los problemas que pueden aparecer al trabajar con el instrumento.

Si no es posible solucionar el problema con estos consejos, póngase en contacto con el servicio técnico de Leica Biosystems. Para obtener más información, consulte ([→ P. 47 – 9. Garantía y servicio](#)).

En la tabla a la derecha están alistados los problemas más frecuentes junto con sus posibles causas y con consejos para remediar la situación.

Problema	Causa posible	Remedio
1. Panel de control El botón del panel de control no responde. El indicador de fundido sigue parpadeando cuando el tiempo de fundido definido se ha agotado.	• El cable/conector está suelto. • El panel táctil está contaminado con parafina. • El panel de control está roto. • Fallo del software.	• Informar al Servicio de Posventa. • Limpiar la parafina del panel táctil. • Informar al Servicio de Posventa. • Reinicie el instrumento. • Informar al Servicio de Posventa.
2. Depósito de parafina La parafina no se funde completamente. El depósito de parafina está sobrecalentado.	• La hora de inicio no es correcta. • La placa de control ha fallado. • El limitador de calefacción está roto.	• Compruebe la configuración del programador. • Informar al Servicio de Posventa. • Informar al Servicio de Posventa.
3. La iluminación no funciona.	• La placa de circuito impreso está rota. • El cable de los LED está roto. • El LED está roto.	• Informar al Servicio de Posventa. • Informar al Servicio de Posventa. • Informar al Servicio de Posventa.
4. Superficie de trabajo/ recipiente para moldes y cassettes/Punto frío La hora de inicio y la hora de finalización no son válidas.	• El ajuste de la hora local no es correcto. • La batería de la placa está descargada.	• Compruebe el ajuste de la hora local. • Informar al Servicio de Posventa.
Las muestras no están cubiertas de parafina en el recipiente para cassettes. La parafina del recipiente para cassettes no se está fundiendo. La parafina de la superficie de trabajo se enfría. La muestra se quema.	• La parafina del recipiente para cassettes no se encuentra al nivel correcto. • El ajuste de temperatura del recipiente para cassettes no es correcto. • El ajuste de temperatura de la superficie de trabajo no es correcto. • La temperatura del recipiente para cassettes es demasiado alta.	• Añadir parafina. • Ajustar el ajuste de temperatura del recipiente. • Ajustar el ajuste de temperatura de la superficie de trabajo. • Informar al Servicio de Posventa.
5. No fluye parafina desde el tubo del dispensador.	• La parafina del depósito de parafina no se ha fundido aún. • El dispensador está bloqueado.	• Ajustar el ajuste de temperatura del depósito de parafina. • Informar al Servicio de Posventa.
6. El instrumento no se puede apagar.	• El botón del interruptor principal está atascado con parafina.	• Limpiar la parafina del interruptor principal.

7.3 Recambiar fusibles



Advertencia

Desconectar el equipo y extraer el enchufe de red antes de cambiar un fusible. Utilizar SÓLO los fusibles de repuesto suministrados.

¡Importante!

Observe atentamente las siguientes indicaciones para asignar los fusibles de repuesto correctos al cartucho de fusibles correspondiente.

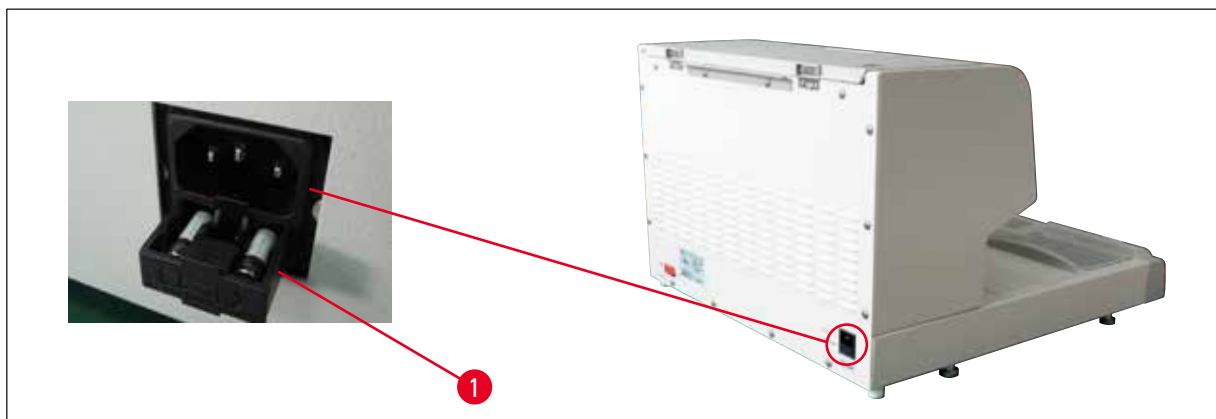


Fig. 22

Categoría de fusible: 10 A, 250 V

Use un destornillador para liberar el cajón de fusibles (→ Fig. 22-1). Una vez liberado, se puede sacar el cajón para ver los fusibles.

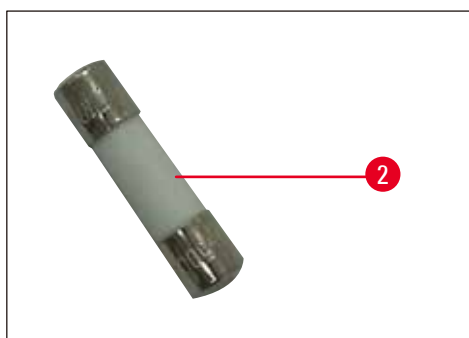


Fig. 23

Saque el fusible defectuoso (→ Fig. 23-2) del cajón de fusibles e introduzca un fusible de repuesto nuevo.

Empuje el cajón de fusibles hasta su ubicación original.

8. Accesorios opcionales

8.1 Lupa

La lupa de enfoque ofrece una visión ampliada del área de trabajo. Si el ajuste se ha realizado correctamente, puede obtenerse una vista ampliada tanto del dispensador como del punto frío.

Instalación de la lupa



Fig. 24

- En el dispensador (→ Fig. 24-4) hay agujeros roscados (→ Fig. 24-2), que se cierran con tornillos de nylon (→ Fig. 24-1).
- Retire los tornillos (→ Fig. 24-1) con un destornillador y guárdelos en un lugar seguro. A continuación, instale la lupa (→ Fig. 24-3) en el lado izquierdo o en el derecho y alinee la lupa.

8.2 Interruptor de pie



Advertencia

- Antes de conectar el cable de conexión al interruptor de pie, compruebe si el interruptor de modo standby (→ Fig. 25-1) se encuentra en la posición "0" ("0" = **Desconectado**).
- Es **INDISPENSABLE** que el conector del interruptor de pedal se atornille al jack. De lo contrario, puede escapar parafina caliente aun cuando no se esté accionando el pedal.
- **NO** siga presionando el interruptor de pie poniendo peso sobre éste.

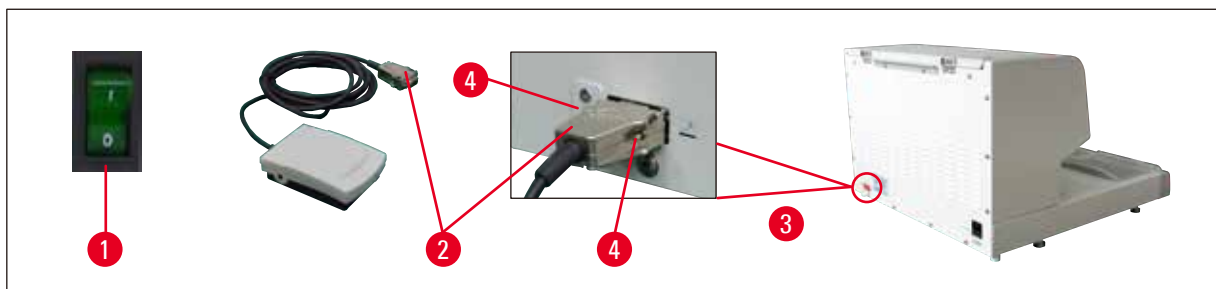


Fig. 25

- Conecte el enchufe (→ Fig. 25-2) del interruptor de pie en el zócalo de conexión (→ Fig. 25-3) situado en el lado posterior del aparato.
- Apriete los tornillos (→ Fig. 25-4) del enchufe.

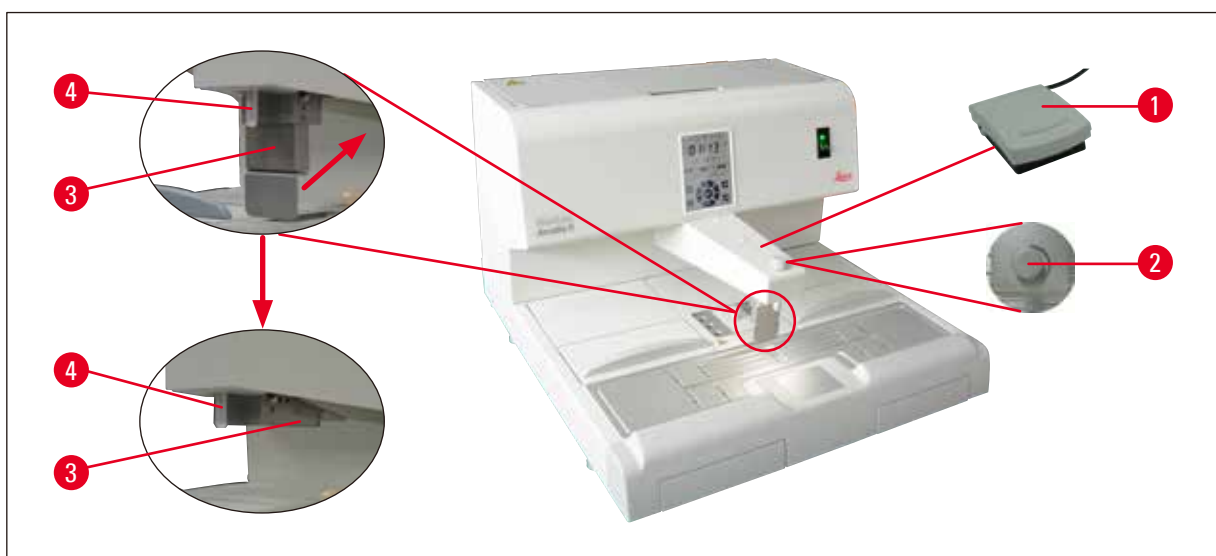


Fig. 26

- Al pisar el interruptor de pie (→ Fig. 26-1) se abre la válvula y al soltarlo, se cierra. La ventaja de este sistema es que al trabajar en el equipo ambas manos están libres.
- La cantidad de la circulación de flujo se ajusta mediante el tornillo dosificador (→ Fig. 26-2).
- Cuando se utiliza el interruptor de pie no es necesario usar el estribo del dispensador (→ Fig. 26-3) y puede abatirse hacia arriba.

Para ello, proceda del siguiente modo:

- Ajuste el tornillo dosificador (→ Fig. 26-2) al mínimo.
- Abata hacia atrás/arriba el mango del dispensador (→ Fig. 26-3) con cuidado con los dedos pulgar e índice.



Advertencia

¡Precaución al presionar el estribo del dispensador! Podría salir parafina caliente del tubo de llenado (→ Fig. 26-4).

¡PELIGRO DE QUEMADURAS!

8.3 Vaso del prefiltro



Fig. 27

- El vaso del prefiltro (→ Fig. 27-1) está diseñado para eliminar las impurezas de la parafina fundida.
- Coloque el vaso del prefiltro (→ Fig. 27-1) en el depósito de parafina (→ Fig. 27).
- Llène con parafina fundida el depósito de parafina a través del vaso del prefiltro.



Advertencia

- Sujete los mangos de plástico (→ Fig. 27-2) al colocar el vaso del prefiltro en el depósito de parafina.
NO toque el tamiz metálico. Peligro de quemaduras.
- No ponga la parafina sólida en el vaso del prefiltro.

8.4 Asa de la cesta



Fig. 28

El asa de la cesta está diseñada para transferir cestas portamuestras específicas capaces de alojar 150 cartuchos.

8.5 Información para pedidos

	N.º de pedido
Interruptor de pie (cable de 2,8 m, conector DB9)	14 0393 54121
Lupa (aumento 1)	14 0393 54116
Vaso del prefiltro (D=148 mm)	14 0393 53705
Juego de fusibles de recambio (10 A, 250 VCA)	14 6000 04975
Rasqueta de parafina (130 mm x 75 mm)	14 0393 53643
Filtro del depósito de parafina (D=28 mm)	14 0393 53559
Asa de la cesta	14 0393 57357

9. Garantía y servicio

Garantía

Leica Biosystems Nussloch GmbH garantiza que el producto contractual suministrado ha superado un control de calidad completo realizado conforme a las estrictas normas de verificación internas, que el producto está exento de defectos y que es conforme a las especificaciones técnicas y características garantizadas.

El alcance de la garantía depende, en cada caso, del contenido del contrato formalizado. Solo son vinculantes las condiciones de garantía del punto de venta Leica Biosystems o de la empresa en la que ha adquirido el producto del contrato.

Información de servicio

Si necesita la intervención del servicio técnico o piezas de repuesto, póngase en contacto con el representante o distribuidor local de Leica Biosystems que le vendió el equipo.

Tenga a mano la siguiente información:

- nombre del modelo y número de serie del instrumento;
- lugar de instalación del instrumento y nombre de la persona de contacto;
- motivo de su llamada;
- fecha de entrega.

Retirada de servicio y eliminación

El equipo y sus partes deben ser eliminadas de conformidad con la normativa local.

10. Confirmación de descontaminación

Cualquier producto devuelto a Leica Biosystems o que requiera mantenimiento in situ deberá estar debidamente limpio y descontaminado. Puede encontrar la plantilla correspondiente de la confirmación de descontaminación en el menú de productos de nuestro sitio web www.LeicaBiosystems.com. Debe usarse este modelo para recoger todos los datos necesarios.

Si se devuelve un producto, es necesario adjuntar o entregar al técnico de servicio una copia debidamente cumplimentada y firmada de la confirmación. El remitente será responsable de todo producto devuelto sin la confirmación o con un documento incompleto. Todo producto devuelto que se considere una potencial fuente de riesgo se enviará de nuevo al remitente, a expensas y a riesgo de este.

www.LeicaBiosystems.com



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Strasse 17 - 19
D-69226 Nussloch
Alemania

Tel.: +49 - (0) 6224 - 143 0
Fax: +49 - (0) 6224 - 143 268
Web: www.LeicaBiosystems.com