

HistoCore SPECTRA ST

Infärgare



Bruksanvisning
Svenska

Beställningsnr: 14 0512 80114 - Revision V

Ska alltid förvaras i närheten av instrumentet.
Ska läsas noggrant innan instrumentet tas i drift.



Informationen, sifferuppgifterna, anvisningarna och värdebedömningarna i denna bruksanvisning speglar den aktuella vetenskapliga och tekniska nivå som vi har kommit fram till i våra grundliga efterforskningar.

Vi är inte skyldiga att regelbundet anpassa denna bruksanvisning efter nya tekniska rön och inte heller att löpande förse våra kunder med nya exemplar, uppdateringar osv. av denna bruksanvisning.

I den omfattning respektive gällande nationell lagstiftning tillåter detta ansvarar vi inte för felaktiga uppgifter, ritningar, tekniska illustrationer osv. som finns i denna bruksanvisning. I synnerhet tar vi inte något ansvar för någon ekonomisk förlust eller följdskada orsakad av eller relaterad till efterlevnad av uppgifter eller annan information i denna bruksanvisning.

Uppgifter, skisser, bilder och övrig information av innehållsmässig samt teknisk karaktär i denna bruksanvisning ska inte tolkas som garanterade egenskaper hos våra produkter.

I det avseendet är det enbart de avtalsenliga bestämmelserna mellan oss och våra kunder som gäller.

Leica förbehåller sig rätten till ändringar av den tekniska specifikationen samt produktionsprocessen utan föregående meddelande. Det är endast på detta sätt som en fortlöpande teknisk och produktionsteknisk förbättringsprocess är möjlig.

Denna dokumentation är upphovsrättsligt skyddad. All upphovsrätt tillhör Leica Biosystems Nussloch GmbH.

All reproduktion av text och bilder (helt eller delvis) genom tryck, kopiering, mikrofilm, webbkamera eller andra metoder – inklusive samtliga elektroniska system och medier – är endast tillåtet med uttryckligt, skriftligt medgivande på förhand från Leica Biosystems Nussloch GmbH.

Serienummer samt tillverkningsår framgår av typskylten på instrumentets baksida.



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Strasse 17 - 19
69226 Nussloch
Tyskland
Tel.: +49 - (0) 6224 - 143 0
Fax: +49 - (0) 6224 - 143 268
Webb: www.LeicaBiosystems.com

Innehållsförteckning

1. Viktig information	7
1.1 Symboler och deras betydelse	7
1.2 Instrumenttyp	11
1.3 Målgrupp	12
1.4 Avsett ändamål	12
1.5 Upphovsrätt – Instrumentets programvara	12
2. Säkerhet	13
2.1 Säkerhetsföreskrifter	13
2.2 Varning	14
2.3 Inbyggda säkerhetsfunktioner	17
3. Instrumentets komponenter och specifikationer	18
3.1 Standardleverans	18
3.2 Specifikationer	19
3.3 Allmän översikt – framsida	21
3.4 Allmän översikt – baksida	22
3.5 Allmän översikt – insida	23
4. Installation och start	24
4.1 Krav för uppställningsplatsen	24
4.2 Kranvattenanslutning	25
4.2.1 Anslutning av samtliga 6 skölvattenstationer	26
4.2.2 Kombinerad anslutning 4+2 skölvattenstationer	27
4.2.3 Avloppsvattenanslutning	28
4.3 Elektrisk anslutning	28
4.3.1 Använda en extern avbrottsfri strömkälla (UPS)	29
4.4 Frånluftsanslutning	30
4.5 Starta och stänga av instrumentet	30
5. Användning	32
5.1 Användargränssnitt – Översikt	32
5.2 Element på statusskärmen	33
5.3 Processtatusvisning	34
5.4 Visning av facken	36
5.5 Huvudmeny – Översikt	37
5.5.1 Knappsatsen	38
5.6 Användarinställningar	40
5.7 Grundläggande inställningar	42
5.7.1 Språkinställningar	42
5.7.2 Regionala inställningar	43
5.7.3 Datum och tid	44
5.7.4 Meny för larmljud – fel- och signalljud	44
5.7.5 Ugnsinställningar	46
5.7.6 Rörelsehastighet – uppåt-/nedåtrörelse (agitering)	47
5.7.7 Datahantering	48
5.7.8 Serviceuttag	52
5.7.9 Händelsevisning	53
5.8 Reagenslista	55
5.8.1 Kopiera en reagens	58

5.8.2	Ändra RHS-data för en reagens	58
5.8.3	Processklasser	59
5.9	Infärgningsprogram	62
5.9.1	Tilldela ett infärgningsprogram en rackhandtagsfärg	63
5.9.2	Leica-infärgningsprogram (förinstallerade)	64
5.9.3	Anpassa Leica-H&E-färgningsprogram	65
5.9.4	Användardefinierade infärgningsprogram	67
5.9.5	Skapa eller kopiera ett nytt infärgningsprogram	67
5.9.6	Infoga eller kopiera ett nytt programsteg	70
5.9.7	Sortera om programsteg	71
5.9.8	Prioritera program för att skapa reagensuppställningen	73
5.9.9	Skapa reagensuppställningen	74
5.9.10	Fylla på reagenser efter det att reagensuppställningen har skapats	75
5.9.11	Anpassa en reagensuppställning	81
6.	Daglig inställning av instrumentet	85
6.1	Förbereda instrumentet för den dagliga inställningen	85
6.2	Daglig inställning av instrumentet	86
6.2.1	Förbereda och hantera reagenskyvetter	86
6.2.2	Automatisk skanning av påfyllningsnivå	88
6.3	Reagenshanteringssystem (RHS)	89
6.4	Stationsinformation	90
6.5	Förbereda racket	97
6.6	Infärgningsprocessen	101
6.6.1	Starta infärgningsprocessen	101
6.6.2	Övervaka infärgningsprocessen	104
6.6.3	Infärgningsprocess slutförd	104
6.6.4	Avbryta infärgningsprogrammet	106
6.6.5	Användning som arbetsstation	108
6.6.6	Slutföra den dagliga användningen	110
7.	Rengöring och underhåll	111
7.1	Viktig information om rengöring av instrumentet	111
7.2	Utvändiga ytor, lackerade ytor, instrumentets kåpa	111
7.3	TFT-pekskärm	111
7.4	Insida och avrinningskärl	112
7.5	Överföringsarmar	112
7.6	Avläsningsstation för objektglas	112
7.7	Laddnings- och utmatningsfack	113
7.8	Torr överföringsstation	113
7.9	Överföringsstation (tillval)	114
7.10	Reagenskyvetter och sköljvattenkyvetter	114
7.11	Rack och handtag	116
7.12	Vattenavlopp	117
7.13	Vattenavloppsslang	118
7.14	Byta filterpatronen till vatteninloppsfilter	118
7.15	Byta det aktiva kolfiltret	119
7.16	Rengöra ugnarna	120
7.17	Ugnens luftfilter	122
7.18	Intervall för underhåll och rengöring	122
7.18.1	Dagligt underhåll och rengöring	123
7.18.2	Underhåll och rengöring efter behov	123

Innehållsförteckning

7.18.3 Rengöring och underhåll varje vecka	124
7.18.4 Rengöring och underhåll varje månad	124
7.18.5 Rengöring och underhåll var tredje månad.....	124
7.18.6 Rengöring och underhåll varje år.....	124
8. Fel och felsökning.....	125
8.1 Åtgärder för fel på instrumentet.....	125
8.2 Strömavbrott och fel på instrumentet	128
8.2.1 Rutin vid strömavbrott	130
8.2.2 Återuppta infärgningsprocessen efter ett strömavbrott.....	133
8.2.3 Avbryta alla infärgningsprocesser vid ett strömavbrott	134
8.2.4 Avlägsna ett rack från griparmekanismen.....	136
8.2.5 Borttagning av rack från överföringsstationen	138
8.3 Byta ut huvudsäkringar	139
8.4 Stopp i vattenavloppet	140
8.5 Fel vid fastsättning, avlägsnande eller transport av rack.....	146
9. Instrumentets komponenter och specifikationer	148
9.1 Valbara komponenter till instrumentet.....	148
9.2 Valbara tillbehör	148
10. Garanti och service	156
11. Urdrifftagning och kassering	157
12. Saneringsbekräftelse	158
A1. Bilaga 1 – Godkända reagenser.....	159

1. Viktig information

1.1 Symboler och deras betydelse



Varning

Om nedanstående information, i synnerhet med avseende på transport och hantering av produkter, samt anvisningarna om försiktig hantering av instrumentet inte beaktas, tar Leica Biosystems Nussloch GmbH inget ansvar för eventuella följdskador.

Symbol:



Symbolens rubrik:

Beskrivning:

Riskvarning

Varningar visas i vita fält med orange rubrikfält. Varningar markeras med en varningstriangel.

Symbol:



Symbolens rubrik:

Beskrivning:

OBS!

Information som är viktig för användaren visas i vita fält med blå rubrikfält. Informationen markeras med en informationssymbol.

Symbol:

→ "Bild 7 - 1"

Symbolens rubrik:

Beskrivning:

Objektnummer

Objektnummer som numrerar bilder. Siffror i rött avser objektnummer i bilder.

Symbol:

Arbetsledare

Symbolens rubrik:

Beskrivning:

Funktionsknapp

Programvarubeteckningar som måste visas i inmatningsfönstret visas med fet, grå text.

Symbol:

Spara

Symbolens rubrik:

Beskrivning:

Funktionsknapp

Programvarusymboler som man måste trycka på i inmatningsfönstret visas som fet, grå och understruken text.

Symbol:

Strömbrytare

Symbolens rubrik:

Beskrivning:

Knappar på instrumentet

Knappar på instrumentet, som användaren ska trycka på i olika situationer, visas som fet, grå text.

Symbol:



Symbolens rubrik:

Beskrivning:

Obs!

Anger att användaren måste läsa bruksanvisningen, särskilt säkerhetsinformation som varningar och försiktighetsåtgärder som av olika skäl inte kan anges på den medicintekniska produkten.

Symbol:



Symbolens rubrik:

Beskrivning:

Varning, het yta

Denna varningssymbol indikerar ytor på instrumentet som blir heta när instrumentet är i drift. Direktkontakt ska undvikas eftersom det finns risk för brännskador.

Symbol:



Symbolens rubrik:

Beskrivning:

Tillverkare

Visar den medicintekniska produktens tillverkare.

Symbol:	Symbolens rubrik:	Tillverkningsdatum
	Beskrivning:	Visar datumet då den medicintekniska produkten tillverkades.
Symbol:	Symbolens rubrik:	CE-märkning
	Beskrivning:	CE-märkningen är tillverkarens försäkran om att den medicintekniska produkten uppfyller kraven i de tillämpliga EG-direktiven och EG-förordningarna.
Symbol:	Symbolens rubrik:	UKCA-märkning
	Beskrivning:	UKCA-märkningen (UK Conformity Assessed) är en ny brittisk produktmärkning som används för varor som marknadsförs i Storbritannien (England, Wales och Skottland). Den omfattar de flesta varor som tidigare krävde CE-märkning.
Symbol:	Symbolens rubrik:	CSA-förklaring (Kanada/USA)
	Beskrivning:	CSA-märket visas med de omgivande indikatorbokstäverna "C" och "US" för Kanada respektive USA (som indikerar att produkterna har tillverkats enligt kraven från både kanadensiska och amerikanska standarder) eller med enbart "US" för endast USA, eller utan någon indikator för endast Kanada.
Symbol:	Symbolens rubrik:	In vitro-diagnostik
	Beskrivning:	Indikerar en medicinteknisk produkt som är avsedd att användas för in vitro-diagnostik.
Symbol:	Symbolens rubrik:	China RoHS
	Beskrivning:	Miljöskyddssymbol i China ROHS-riktlinjen. Talet i symbolen anger produktens "miljösäkra användningstid" i år. Symbolen används när ett ämne som är begränsat i Kina används över den maximalt tillåtna gränsen.
Symbol:	Symbolens rubrik:	WEEE-symbol
	Beskrivning:	WEEE-symbolen anger att el- och elektronikavfall ska sorteras separat och är en överstruken avfallstunna på hjul (§ 7 ElektroG).
Symbol:	Symbolens rubrik:	Växelström
		
Symbol:	Symbolens rubrik:	Artikelnummer
	Beskrivning:	Anger tillverkarens katalognummer så att den medicinska enheten kan identifieras.
Symbol:	Symbolens rubrik:	Serienummer
	Beskrivning:	Anger tillverkarens serienummer så att en viss medicinteknisk produkt kan identifieras.

Symbol:



Symbolens rubrik:

Beskrivning:

Se bruksanvisningen

Anger att användaren behöver läsa i bruksanvisningen.

Symbol:



(01)04049188191953

Symbolens rubrik:

Beskrivning:

UDI

UDI står för Unik enhetsidentifierare (Unique Device Identifier) och är ett unikt produktidentifieringsnummer för medicintekniska produkter som består av en QR-kod och produktens GTIN/EAN-nummer.

Symbol:



Leica Microsystems (UK) Limited
Larch House, Woodlands Business Park, Milton Keynes,
England, United Kingdom, MK14 6FG

Symbolens rubrik:

Beskrivning:

Ansvarig person mot Storbritannien

Personen som har ansvar mot Storbritannien agerar åt en tillverkare utanför Storbritannien och ser till att utföra specifika uppdrag som rör tillverkarens plikter.

Symbol:



Symbolens rubrik:

Beskrivning:

TILL (Strömförsörjning)

Strömförsörjningen kopplas till med hjälp av strömbrytaren.

Symbol:



Symbolens rubrik:

Beskrivning:

FRÅN (Strömförsörjning)

Med strömbrytaren bryts strömförsörjningen.

Symbol:



Symbolens rubrik:

Beskrivning:

Varning, risk för elektrisk stöt

Denna varningssymbol indikerar ytor eller områden på instrumentet som står under elektrisk spänning när instrumentet är i drift. Direktkontakt ska därför undvikas.

Symbol:



Symbolens rubrik:

Varning: fara för krosskador

Symbol:



Symbolens rubrik:

Beskrivning:

Rör ej

Rör ej delar av enheten som är märkta med denna symbol.

Symbol:




Symbolens rubrik:

Beskrivning:


Brandfara

Brandfarliga reagenser, lösningsmedel och rengöringsmedel är märkta med den här symbolen.

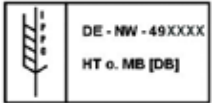Symbol:	Symbolens rubrik:	Observera varningen för laserstrålar och se Bruksanvisningen
	Beskrivning:	Produkten använder en laserkälla av klass 1. Bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna för hantering av lasrar måste följas.
Symbol:	Symbolens rubrik:	Använd inte någon form av alkohol vid rengöring och följ instruktionerna i bruksanvisningen
	Beskrivning:	Indikerar att användningen av alkohol eller rengöringsmedel innehållande alkohol vid rengöring av artikeln/delen inte är tillåten. Artikeln/delen blir förstörd om alkohol eller rengöringsmedel innehållande alkohol används vid rengöring.
Symbol:	Symbolens rubrik:	IPPC-symbol
	Beskrivning:	IPPC-symbolen innehåller: IPPC-symbol • Landskod enligt ISO 3166, t.ex. DE för Tyskland • Regionkod, t.ex. NW för Nordrhein-Westfalen • Registreringsnummer, ett unikt nummer som börjar med 49 • Behandlingsmetod, t.ex. HT (värmebehandling)
Symbol:	Symbolens rubrik:	Ursprungsland
	Beskrivning:	Rutan "Country of Origin" anger det land där den slutgiltiga utformningen av produkten har utförts.
Symbol:	Symbolens rubrik:	Ömtåligt, hanteras varsamt
	Beskrivning:	Betecknar en medicinteknisk produkt som vid oförsiktig hantering kan gå sönder eller skadas.
Symbol:	Symbolens rubrik:	Förvaras torrt
	Beskrivning:	Betecknar en medicinteknisk produkt som ska skyddas mot fukt.
Symbol:	Symbolens rubrik:	Begränsad stapling
	Beskrivning:	Det största antal identiska kollin som får staplas på varandra; "2" anger tillåtet antal kollin.
Symbol:	Symbolens rubrik:	Denna sida upp
	Beskrivning:	Visar korrekt upprätt placering av förpackningen.

Symbol:

Transport temperature range:

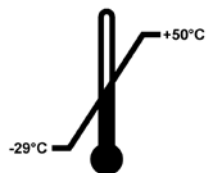

Symbolens rubrik:
Beskrivning:

Temperaturbegränsning vid transport

De angivna temperaturgränsvärdena vid transport är de som den medicintekniska produkten kan utsättas för utan risk.

Symbol:

Storage temperature range:

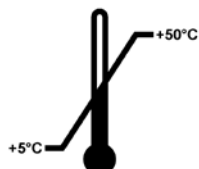
Symbolens rubrik:
Beskrivning:

Temperaturbegränsning vid förvaring

De angivna temperaturgränsvärdena vid förvaring är sådana som den medicintekniska produkten kan utsättas för utan risk.

Symbol:

Symbolens rubrik:
Beskrivning:

Luftfuktighetsgräns vid transport och förvaring

Betecknar den luftfuktighet som den medicintekniska produkten kan utsättas för utan risk vid transport och förvaring.

Utseende:

Beteckning:
Beskrivning:

Tippindikator

Indikator för att kontrollera att sändningen har transporterats och förvarats upprätt i enlighet med kraven. Från och med en lutning på 60° rinner blå kvartssand in i det pilformade visningsfältet och fastnar där. En eventuellt felaktig hantering av den tippkänsliga produkten syns genast och kan bevisas utan tvivel.


Obs!

- Vid leverans av instrumentet måste mottagaren kontrollera att tippindikatorn är intakt. Om alla indikatorer har utlösts måste den ansvariga Leica-representanten underrättas.
- Med Bruksanvisningen följer en inbunden broschyr för "RFID-registrering". Broschyren innehåller landsspecifik information gällande betydelsen av RFID-symboler och registreringsnummer som finns på förpackningen eller på typskylten på HistoCore SPECTRA ST.

1.2 Instrumenttyp

Alla uppgifter i denna bruksanvisning gäller enbart för den instrumenttyp som anges på titelsidan. En typskylt som indikerar instrumentets serienummer finns på baksidan av instrumentet. Dessutom finns en typskylt med kinesisk och japansk registreringsinformation på den bakre panelen på instrumentet.

1.3 Målgrupp

- HistoCore SPECTRA ST får endast användas av auktoriserad personal som har omfattande utbildning i att använda reagenser i ett laboratorium och tillämpa dessa histologiskt.
- Arbetet med instrumentet får inte påbörjas förrän användaren har läst denna bruksanvisning noggrant och är förtrogen med instrumentets samtliga tekniska detaljer. Instrumentet är endast avsett att användas i professionellt syfte.

1.4 Avsett ändamål

HistoCore SPECTRA ST är en automatiserad infärgare som är särskilt utformad för att färga in preparat med mänsklig vävnad för att kontrastera cellbildningar och deras komponenter, och används för histologisk medicinsk diagnostisering av en patolog, t.ex. för cancerdiagnoser.

HistoCore SPECTRA ST är utformad för in vitro-diagnostikapplikationer.



Varning

All avvikande användning av instrumentet klassas som ej ändamålsenlig. Felaktig användning kan leda till olyckor, personskador och/eller skador på instrumentet eller tillbehör. Till ändamålsenlig användning räknas att följa samtliga anvisningar i denna bruksanvisning, instruktionerna för inspektions- och underhållsarbeten samt fortlöpande kontroll av reagensernas hållbarhet och kvalitet. HistoCore SPECTRA ST utför de specifika infärgningsstegen automatiskt. Tillverkaren kan därför inte lämna någon garanti för infärgningsresultaten om infärgningssteg och program matas in på ett felaktigt sätt. Därför ansvarar slutanvändaren själv för egenhändigt skapade och applicerade reagenser eller programinmatningar.

1.5 Upphovsrätt – Instrumentets programvara

Programvaran som är installerad på HistoCore SPECTRA ST är föremål för följande licensavtal:

1. GNU General Public License Version 2.0, 3.0
2. GNU Lesser General Public License 2.1
3. ytterligare mjukvara är inte licensierad under GPL/LGPL

De fullständiga licensavtalen för den första och andra licensen finns i den medföljande språk-CD:n ([→ Sida 18 – 3.1 Standardleverans](#)) i mappen **Mjukvarulicenser**.

Leica Biosystems tillhandahåller en komplett, maskinläsbar kopia av källkoden till alla tredjeparter i enlighet med villkoren i GPL/LGPL gällande källkoden eller andra tillämpliga licenser. Kontakta oss på www.leicabiosystems.com och använd respektive kontaktformulär.

2. Säkerhet

2.1 Säkerhetsföreskrifter



Varning

- Säkerhetsanvisningarna och varningsinformationen i detta kapitel måste följas. De ska läsas även om du redan är förtrogen med hanteringen av andra Leica-instrument.
- Skyddsanordningarna på instrument och tillbehör får varken avlägsnas eller modifieras.
- Instrumentet får endast öppnas och repareras av servicetekniker som är auktoriserade av Leica.

Kvarstående risker:

- Instrumentet är tillverkat enligt den senaste tekniken och vedertagna säkerhetstekniska normer och regler. Felaktig användning eller hantering kan medföra livsfara för användaren eller tredje part, eller leda till att instrumentet eller annan materiell egendom skadas.
- Instrumentet får endast användas på ändamålsenligt sätt och om alla säkerhetsanordningar är i ett felfritt skick.
- Skulle det uppstå störningar som kan försämrare säkerheten ska instrumentet genast tas ur drift och ansvarig Leica-servicetekniker informeras.
- Endast originalreservdelar och godkända Leica-originaltillbehör får användas.
- Elektromagnetisk kompatibilitet, störsändningar och störtålighet samt kraven enligt IEC 61326-2-6 gäller. Kraven enligt IEC 61010-1, IEC 61010-2-101, IEC 62366 och ISO 14971 med avseende på säkerhetsinformation gäller.

Denna bruksanvisning innehåller viktiga anvisningar och information för instrumentets driftsäkerhet och underhåll.

Den utgör en viktig del av instrumentet och ska läsas noggrant innan instrumentet tas i drift och används, och ska sedan förvaras i anslutning till instrumentet.



Obs!

Bruksanvisningen ska kompletteras med anvisningar om detta krävs enligt gällande nationella föreskrifter om olycksförebyggande åtgärder och miljöskydd i det land där instrumentet används.

Instrumentets EG-försäkran om överensstämmelse och UKCA-försäkran om överensstämmelse finns online under:

<http://www.LeicaBiosystems.com>

Detta instrument är tillverkat och kontrollerat enligt säkerhetsbestämmelserna för elektrisk mät-, styr-, regler- och laboratorieutrustning. För att bevara instrumentets skick och säkerställa säker drift ska användaren följa samtliga anvisningar och varningar i denna bruksanvisning.



Varning

- Förekomst av skadlig mjukvara i systemet kan leda till att systemet uppför sig okontrollerat. instrumentets funktion enligt specifikationen kan i så fall inte längre garanteras! Om användaren misstänker att skadlig programvara finns i systemet ska den lokala IT-avdelningen genast informeras.
- Det är mycket viktigt att alltid se till att all data som överförs till instrumentet är fri från virus. Det ingår inga antivirusprogram i leveransen.
- Instrumentet är endast avsett att integreras i nätverk som skyddas av en brandvägg. Leica tar inget ansvar för fel som uppstår till följd av integrering i ett oskyddat nätverk.
- Anslutning av en USB-enhet (mus, tangentbord osv.) får ENDAST utföras av tekniker som är utbildade och godkända av Leica.

För att skydda preparaten indikerar HistoCore SPECTRA ST när användaren behöver ingripa. Detta görs med hjälp av skärmmeddelanden och ljudsignaler. Därmed måste användaren befinna sig inom höravstånd under användning av HistoCore SPECTRA ST.



Varning

Produkten använder en laserkälla av klass 1.

Obs! Laserstrålning! Titta inte in i strålen! Det kan ge skador på ögats näthinna.



Varning

LASERSTRÅLNING – TITTA INTE
IN I STRÅLEN
ISO 60825-1: 2014
P<1 mW, λ = 630 till 670 nm
Pulslängd = 500 μ s
Laserprodukt klass 1

2.2 Varning

Säkerhetsanordningarna som tillverkaren har monterat på detta instrument utgör endast ett grundläggande olycksskydd. Huvudansvaret för ett olycksfritt arbete ligger framför allt hos företaget där instrumentet används samt hos de utsedda personer som använder, underhåller eller reparerar instrumentet.

För att instrumentets felfria funktion ska kunna garanteras ska följande anvisningar och varningar följas.

Observera att det kan förekomma elektrostatiska urladdningar vid direkt eller indirekt kontakt med HistoCore SPECTRA ST.



Varning

En markering med en varningstriangel på instrumentets ytor på instrumentet betyder att användningsinstruktionerna (i enlighet med denna bruksanvisning) måste följas när den märkta delen används eller byts ut. Felaktig användning kan leda till olyckor, personskador och/eller skador på instrumentet/tillbehören eller förstörda, obrukbara prover.

**Varning**

Vissa ytor på instrumentet blir mycket varma även vid korrekt användning. De är försedda med denna varningssymbol. Kontakt med dessa ytor utan lämpliga skyddsåtgärder kan leda till brännskador.

Varningsinformation – transport och installation**Varning**

- Instrumentet får endast transporteras upprätt.
- Instrumentets tomvikt är 165 kg. Därför krävs det fyra kvalificerade personer för att lyfta eller bära instrumentet.
- Använd handskar med bra grepp när instrumentet ska lyftas.
- Leica rekommenderar att transport, uppställning och eventuell flytt av instrumentet överläts åt ett transportföretag.
- Spara instrumentets emballage.
- Ställ instrumentet på ett stabilt laboratoriebord med tillräcklig lastkapacitet och justera det så att det står vågrätt.
- Undvik att utsätta instrumentet för direkt solljus.
- Instrumentet får endast anslutas till ett jordat eluttag. Skyddsverkan får inte upphävas genom användning av en förlängningssladd utan jordningskabel.
- Vid extrema temperaturskillnader mellan förvarings- och uppställningsplats och samtidig hög luftfuktighet kan kondens bildas inuti instrumentet. Vänta i så fall minst två timmar innan instrumentet startas.
- Installationen av instrumentet på användningsplatsen får endast ske med och under anvisning av personal utbildad av Leica. Detta gäller även för eventuell transport till en ny användningsplats. Det rekommenderas att personal utbildad av Leica tar instrumentet i drift igen.
- Enligt gällande nationella regler och föreskrifter kan användarföretaget vara skyldigt att permanent säkra den allmänna vattenförsörjningen mot att förorenas av returvatten från installationen. I Europa sker valet av säkringsarmatur för dricksvatteninstallationen som ska anslutas enligt föreskrifterna i DIN EN 1717:2011-08 (informationen aktuell augusti 2013).

Varningsinformation – hantering av reagenser**Varning**

- Var försiktig när lösningsmedel hanteras.
- Bär alltid lämplig laboratoriekälsel samt handskar och skyddsglasögon vid hantering av kemikalierna som används i detta instrument.
- Uppställningsplatsen ska ha god ventilation. Dessutom rekommenderar vi starkt att man ansluter instrumentet till ett externt ventilationssystem. Kemikalierna som används i HistoCore SPECTRA ST är brandfarliga och kan utgöra en hälsofara.
- Drift i utrymmen med explosionsrisk är inte tillåten.
- När förbrukade reagenser kasseras ska gällande lokala bestämmelser samt avfallshanteringsreglerna på företaget/institutionen där instrumentet används alltid följas.
- Reagenskyvetter ska alltid fyllas på utanför instrumentet och i enlighet med säkerhetsanvisningarna.

Varningsinformation – arbete med instrumentet



Varning

- Instrumentet får endast användas av utbildad laboratoriepersonal. Den får endast användas i enlighet med instruktionerna i denna bruksanvisning. Vid arbete med instrumentet bör antistatisk skyddsklädsel (t.ex. av naturfiber) användas.
- När du arbetar med instrumentet ska du bära lämpliga skyddskläder (labbrock, skyddsglasögon och handskar) för att skydda dig mot reagenser och potentiellt smittsamma mikrobiologiska föroreningar.
- I nödfall ska **strömbrytaren** stängas av och strömkontakten (krets brytare enligt EN ISO 61010-1) dras ur.
- Vid allvarliga instrumentstörningar måste varnings- och felmeddelandena på bildskärmen följas. Prover som befinner sig i en process måste avlägsnas från instrumentet omedelbart. Användaren ansvarar för att den fortsatta bearbetningen av proverna sker på ett säkert sätt.
- Vid arbete med öppen eld (t.ex. bunsenbrännare) i närheten av instrumentet föreligger brandrisk på grund av ångor från lösningsmedel. Därför ska ett säkerhetsavstånd på minst två meter hållas.
- Du måste vara helt säker på att instrumentet används med ett aktivt kolfilter. Dessutom rekommenderar vi starkt att man ansluter instrumentet till ett externt ventilationssystem eftersom användningen av instrumentet kan leda till att det bildas lösningsmedelsångor som både är brandfarliga och skadliga för hälsan, även när instrumentet används korrekt.



Obs!

För att hantera avgaser från instrumentet rekommenderar Leica att en lufttillförsel på 50 m³/h och en 8x luftomsättning (25 m³/m²/h) används i labbet.



Varning

- Om överföringsarmen/-armarna måste lyftas och förflyttas får man inte vidröra sensorn/antennen eller använda detta område för att förflytta överföringsarmen/-armarna (→ "Bild 115-6"). Använd i stället griparens metall-del (→ "Bild 115-1") och lyft den manuellt. Förflytta sedan överföringsarmen/-armarna till önskad position.
- Vid arbeten rakt ovanför reagenskvetter som innehåller lösningsmedel måste personlig skyddsutrustning i form av andningsskydd användas.
- Om kåpan öppnas samtidigt som en eller flera infärgningsprogram är aktiva fördröjs respektive bearbetningssteg, eftersom det inte sker några överföringsrörelser under den tiden. Detta kan leda till förändringar av infärgningskvaliteten.
- Låt alltid kåpan vara stängd under tiden infärgningsprogram är aktiva. Leicas garantiansvar gäller inte kvalitetsförsämringar av infärgningsprogram som beror på att kåpan har öppnats under pågående infärgningsprocess.
- **VAR FÖRSIKTIG** när du stänger kåpan: Klämrisk! Sträck dig inte in i kåpans rörelseområde.
- Det får inte läcka in någon vätska bakom locken eller i mellanrummen medan instrumentet är i drift eller rengörs. Detta gäller även överföringsarmarna.
- **VAR FÖRSIKTIG** med program som börjar med ett ugnssteg! Laddningsstationen från vilken överföringsarmen tar ut objektglasen ur får då **INTE** innehålla någon lättantändlig reagens (t.ex. xylol, xylolsubstitut eller alkoholer). Ugnens temperatur är max 70 °C. Det kan leda till att reagensen antänds, vilket kan skada instrumentet och preparaten.
- I samband med pauser i arbetet och när instrumentet har stängts av ska vattentillförseln stängas av.

Varningar – Rengöring och underhåll



Varning

- Före allt underhåll ska instrumentet stängas av och strömkontakten dras ur.
- Bär lämpliga skyddskläder (labbrock och handskar) när du rengör instrumentet för att skydda dig mot reagenser och potentiellt smittsamma mikrobiologiska föroreningar.
- Vid hantering av rengöringsmedel ska tillverkarens säkerhetsföreskrifter och laboratorieföreskrifterna följas.
- Använd inget av följande vid rengöring av instrumentets utvändiga ytor: alkohol, rengöringsmedel med alkohol (glasputsmedel), rengöringspulver med slipmedel, lösningsmedel med aceton, ammoniak, klor eller xylene.
- Använd ingen form av alkohol eller rengöringsmedel som innehåller alkohol vid rengöring av vattenfilterkåpan (→ "Bild 5-5"). Det kan resultera i att vatten läcker ut okontrollerat och skadar laboratoriet och laboratoriemiljön.
- Kåpor och hölje ska rengöras med mildt, pH-neutralt kommersiellt hushållsrengöringsmedel. De lackerade ytorna tål inte lösningsmedel och xylensubstitut!
- Reagenskylvetterna i plast som hör till sköljvatten- och reagensstationerna kan rengöras i diskmaskin vid en temperatur på högst +65 °C. Vanligt diskmedel för laboratediskmaskiner kan användas. Reagenskylvetterna i plast får under inga omständigheter rengöras vid högre temperaturer, eftersom det kan leda till att de deformeras.

2.3 Inbyggda säkerhetsfunktioner

Så fort instrumentets kåpa öppnas kommer överföringsarmarnas rörelser att stanna i ett horisontellt läge (x och y-axel) av säkerhetsskäl, för att förhindra kollision med rörliga delar som kan utgöra fara för användaren och preparaten.



Varning

- Låt alltid kåpan vara stängd under tiden infärgningsprogram är aktiva. Leicas garantiansvar gäller inte kvalitetsförsämringar av infärgningsprogram som beror på att kåpan har öppnats under pågående infärgningsprocess.
- Om kåpan öppnas samtidigt som ett eller flera infärgningsprogram är aktiva fördröjs respektive bearbetningssteg, eftersom det inte sker några överföringsrörelser under den tiden. Detta kan leda till förändringar av infärgningskvaliteten.
- För att säkerställa att instrumentets mjukvara fortsatt fungerar bra måste instrumentet startas om minst var 3:e dag.

3. Instrumentets komponenter och specifikationer

3.1 Standardleverans

Antal	Beteckning	Beställningsnr
1	HistoCore SPECTRA ST Grundinstrument (lokal nätsladd ingår)	14 0512 54354
1	Reagenskyvettsats: 46 reagenskyvetter med lock 6 blå sköljvattenkyvetter 6 O-ringar 7x2	14 0512 47507
1	Sats med etiketter för laddnings- och utmatningsfacket: • 10 st. blanka • 5 st. "H ₂ O" = vatten • 5 st. "A" = alkohol • 5 st. "S" = lösningsmedel (t.ex. xylene)	14 0512 55161
1	Sats med aktiva kolfilter (2 st.)	14 0512 53772
1	Avloppsvattenslang, 2 m	14 0512 55279
1	Slangklämma 30 45/12 DIN 3017 RF	14 0422 31972
1	Vattenanslutningssats:	14 0512 49324
2	Vattentillförselslang, 10 mm, 2,5 m	14 0474 32325
1	Förlängningsslang 1,5 m	14 0512 49334
2	Kabelband 200 x 12,5 svarta	14 0512 59906
1	Y-koppling G3/4	14 3000 00351
2	Dubbelnippel G3/4 G1/2	14 3000 00359
1	Filterhus	14 0512 49331
1	Filterpatron	14 0512 49332
1	Rörkoppling G3/4	14 3000 00360
1	Blindkåpa G3/4	14 3000 00434
1	Packningsbricka	14 0512 54772
1	Skiftnyckel SW30 DIN894	14 0330 54755
1	Ventilationsslang, 2 m	14 0512 54365
2	Slangklämma 50 70/12 DIN 3017 RF	14 0422 31973
1	Skruvmejsel 5,5 x 150	14 0170 10702
2	Säkring T16 A	14 6000 04696
1	Molykote 111 smörjfett, 100 g	14 0336 35460
3	Rack för 30 objektglas; 3 st. per förpackning	14 0512 52473
1	Rackhandtag för 30 objektglas; gula, 3 st. per förpackning	14 0512 52476
1	Rackhandtag för 30 objektglas; mörkblå, 3 st. per förpackning	14 0512 52478
1	Rackhandtag för 30 objektglas; röda, 3 st. per förpackning	14 0512 52480
1	Rackhandtag för 30 objektglas; vita, 3 st. per förpackning	14 0512 52484

Antal	Beteckning	Beställningsnr
1	Internationellt paket Bruksanvisning (inkl. engelsk papperskopia och ytterligare språk på en datalagringsenhet 14 0512 80200)	14 0512 80001

Om den medföljande nätsladden är trasig eller försvinner, kontakta din lokala Leica-representant.



Obs!

De levererade komponenterna ska jämföras noggrant med packsedeln, leveranssedeln och beställningen. Om du upptäcker några avvikelser ska du kontakta ansvarigt Leica-försäljningskontor direkt.

3.2 Specifikationer

Märkspänning:	100–240 V AC $\pm 10\%$
Märkfrekvens:	50/60 Hz
Effektförbrukning:	1580 VA
Säkringar:	2 x T16 A H 250 V AC
Skyddsklassning enligt IEC 61010-1	Klass I (PE ansluten)
Föroreningsgrad enligt IEC 61010-1	2
Överspänningskategori enligt IEC 61010-1	II
Skyddsklassning enligt IEC 60529	IP20
A-viktad bullernivå, uppmätt på 1 m avstånd	< 70 dB (A)
Värmeavgivning	1580 J/s
Laserklass enligt IEC 60825-1	1
Färskvattenanslutning:	
Slangmaterial:	PVC
Slanglängd:	2500 mm
Anslutningsstycke:	G3/4
Innerdiameter:	10 mm
Ytterdiameter:	16 mm
Invändigt tryck: minimum/maximum:	2 bar/6 bar
Nödändig vattenflödesmängd:	Min. 1,7 l/minut
Nödändig kranvattenkvalitet:	Dricksvattenkvalitet, enligt tillämpliga officiella bestämmelser
Nödändig kvalitet på avjoniserat vatten (tillvalsanslutning):	ISO 3696: 1995 Typ 3/ASTM D1193-91 Typ IV
Avloppsvattenanslutning:	
Slanglängd:	2000 mm/4000 mm
Innerdiameter:	32 mm
Ytterdiameter:	36,8 mm

Frånluft:		
Slanglängd:		2000 mm
Innerdiameter:		50 mm
Ytterdiameter:		60 mm
Utsugseffekt:		27,3 m ³ /h
Utsug av frånluft:		Aktivt kolfilter och ventilationsslang för anslutning till ett externt ventilationssystem
Värmealstring:		1580 J/s
A-viktad bullernivå:		< 70 dB (A)
Internationell skyddsklass:		IP20
Anslutningar:	1 x RJ45 Ethernet (bak):	RJ45 – LAN (extern datahantering)
	1 x RJ45 Ethernet (fram):	Endast för serviceändamål
	2 x USB 2.0:	5 V/500 mA (service och datalagring)

**Obs!**

Vid användning av en extern avbrottsfri strömförsörjning (UPS) bör denna vara konstruerad för en kapacitet på minst 1 580 VA och kunna säkra driften i minst 10 minuter.

Omgivningsvillkor:

Miljövillkor	Endast användning inomhus
Användning:	
Temperatur:	+18 °C till +30 °C
Relativ luftfuktighet:	20 % till 80 %, icke kondenserande
Driftshöjd:	Upp till max. 2 000 m över havet
Förvaring:	
Temperatur:	+5 °C till +50 °C
Relativ luftfuktighet:	10 % till 85 %, icke kondenserande
Transport:	
Temperatur:	–29 °C till +50 °C
Relativ luftfuktighet:	10 % till 85 %, icke kondenserande
Mått och vikt:	
Mått (bredd x djup x höjd):	Stängd kåpa: 1 354 x 785,5 x 615 mm Öppen kåpa: 1 354 x 785,5 x 1 060 mm
Tomvikt (utan överföringsstation, reagenser, och tillbehör)	165 kg
Fullvikt (med överföringsstation, reagenser, och tillbehör)	215 kg

3.3 Allmän översikt – framsida

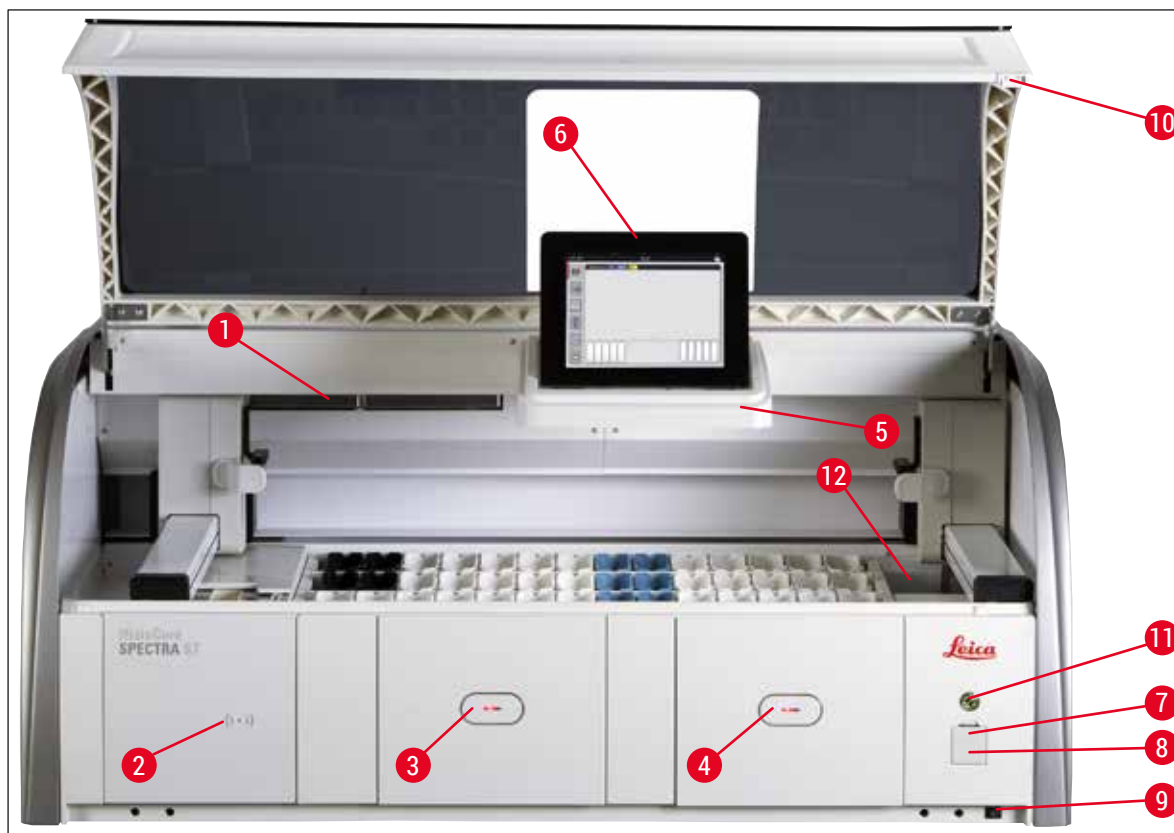


Bild 1

- | | | | |
|---|--------------------------------------|----|---|
| 1 | Isättning av aktivt kolfilter | 7 | USB-uttag (2 st.) |
| 2 | Inläsningsområde för Leica-reagenser | 8 | Serviceuttag |
| 3 | Laddningsfack (inmatare) | 9 | <u>TILL/FRÅN</u> -brytare (<u>strömbrytare</u>) |
| 4 | Utmatningsfack (utmatare) | 10 | Kåpa |
| 5 | Skärnhållare med intern belysning | 11 | <u>Driftströmbrytare</u> |
| 6 | Bildskärm med användargränssnitt | 12 | Överföringsstation (tillval) |

**Varning**

- Serviceuttaget (→ "Bild 1-8") får endast användas av servicetekniker certifierade av Leica!
- Luckan till inläsningsområdet (→ "Bild 1-2") får endast avlägsnas av servicetekniker certifierade av Leica.

3.4 Allmän översikt – baksida

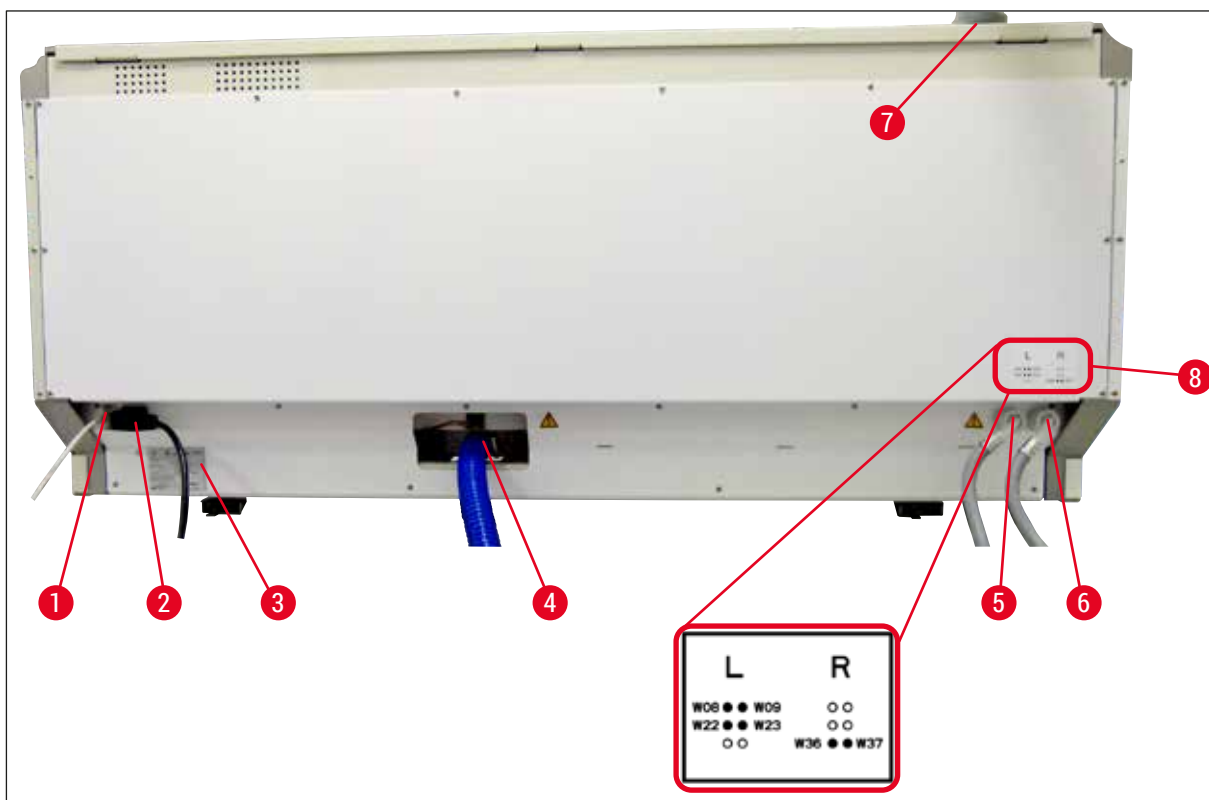


Bild 2

- 1 Nätverksanslutning (frånkopplad)
- 2 Strömanslutning
- 3 Typskylt
- 4 Avloppsvattenanslutning
- 5 Sköljvattenanslutning (grupp om 4)
- 6 Anslutning för destillerat vatten eller kranvatten (grupp om två)
- 7 Frånluftsanslutning
- 8 Vattenanslutningsschema

3.5 Allmän översikt – insida

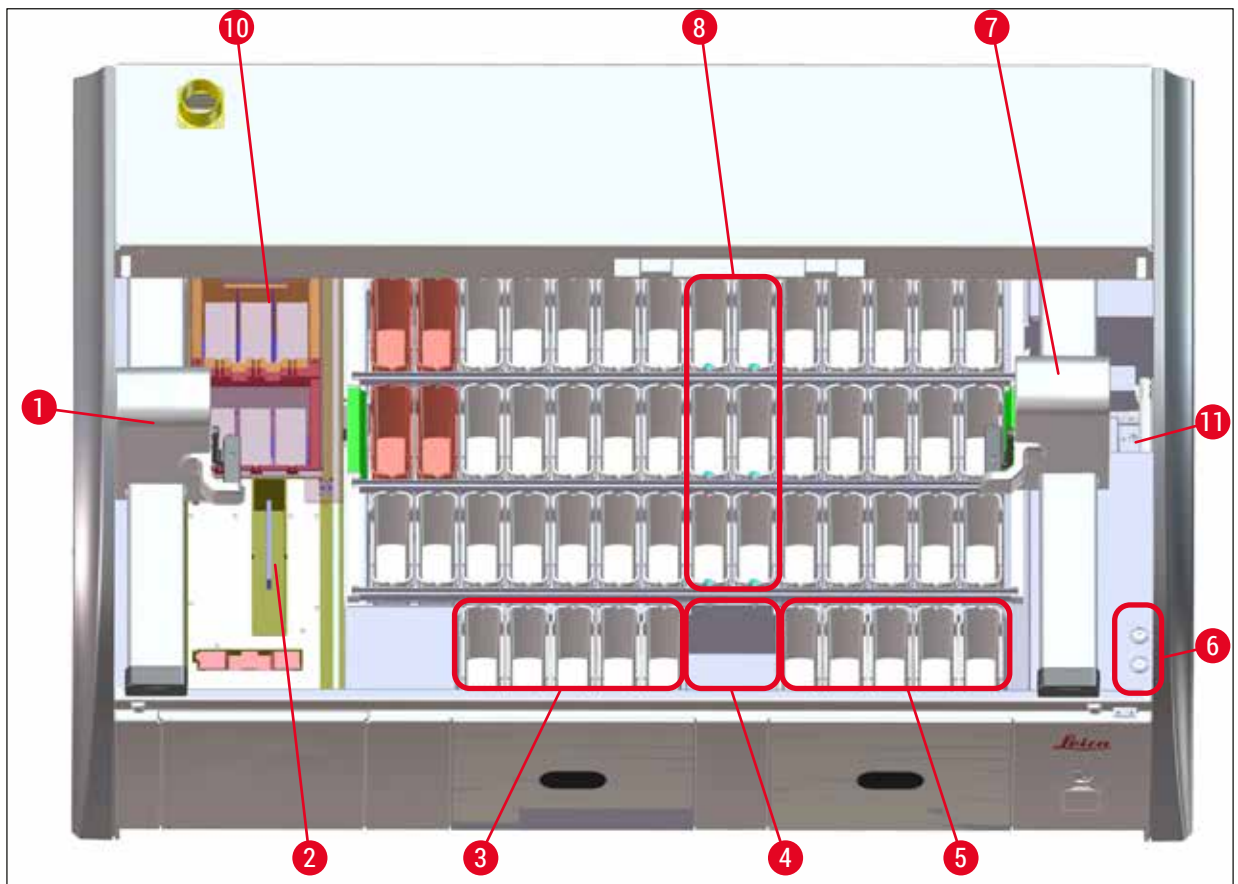


Bild 3

- 1 Vänster överföringsarm
- 2 Avläsningsstation för objektglas
- 3 Laddningsstationer, 5 st.
- 4 Torra överföringsstationer, 2 st.
- 5 Utmatningsstationer, 5 st.
- 6 Säkringshållare, 2 st.
- 7 Höger överföringsarm
- 8 Sköljvattenstationer, 6 st.
- 10 Torkugnsstationer, 6 st.
- 11 Överföringsstation till HistoCore SPECTRA CV (tillval)

4. Installation och start

4.1 Krav för uppställningsplatsen



Obs!

- Uppställning och planjustering utförs som en del av instrumentets installation och får endast utföras av auktoriserad Leica-personal!
- Det krävs fyra kvalificerade personer för att lyfta instrumentet; Ta tag i alla hörn på ramen och lyft jämnt.

- Golvet ska i möjligaste mån vara vibrationsfritt och det ska finnas tillräckligt med fritt utrymme (ca 1,10 m) ovanför laboriebordet så att kåpan kan öppnas obehindrat.
- Det är användarens ansvar att säkerställa en elektromagnetiskt kompatibel omgivning för instrumentet så att det fungerar som det ska.
- Vid extrema temperaturskillnader mellan förvarings- och uppställningsplats och samtidig hög luftfuktighet kan kondens bildas. Vänta i minst två timmar innan instrumentet startas. Instrumentet kan skadas om dessa anvisningar inte följs.
- Stabilt, absolut vågrätt och plant laboriebord, minst 1,40 m brett och 0,80 m djupt.
- Bordsytan måste vara vibrationsfri och vågrät.
- Dragskåp på högst 2,0 m avstånd från instrumentet.
- Instrumentet är endast avsett för drift inomhus.
- Platsen där det används ska ha god ventilation. Dessutom rekommenderas starkt att det finns ett externt ventilationssystem.
- Det måste finnas en kranvattenanslutning på högst 2,5 m avstånd från instrumentet. Denna anslutning måste vara lättillgänglig även efter att instrumentet har installerats.
- Det måste finnas en avloppsvattenanslutning på högst 2 m avstånd. Denna anslutning måste vara ansluten till instrumentet på ett sätt som gör att avloppsvattenslangen har ett permanent fall.



Varning

- En anslutning till ett externt ventilationssystem (rekommenderas starkt), teknisk ventilation samt ett integrerat utsugssystem med aktivt kolfilter minskar koncentrationen av lösningsmedelsångor i rumsluften. Även vid anslutning till ett externt ventilationssystem måste aktiva kolfilter användas. Detta är obligatoriskt.
- Användarföretaget ansvarar för att arbetsplatsens gränsvärden inte överskrids samt de åtgärder som krävs för detta, inklusive dokumentation.

- Ett **JORDAT ELUTTAG** måste finnas på högst 3 m avstånd.

4.2 Kranvattenanslutning



Obs!

- Det finns två olika anslutningar att välja mellan (→ Sida 26 – 4.2.1 Anslutning av samtliga 6 sköljvattenstationer). Instrumentet måste programmeras för den anslutningsvariant som används (→ Sida 92 – Bild 74).

För båda anslutningsvarianter gäller följande installationsanvisningar:

- Ta ur kranvattenslangen (→ "Bild 4-1") ur förpackningen.
- Vattenanslutningsslangen är rak (→ "Bild 4-3"), anslutningsslangen till instrumentet är böjd (→ "Bild 4-4").
- Kontrollera att tätningsringarna (→ "Bild 4-2") sitter fast på vattenanslutningsslangen (→ "Bild 4-3") och på anslutningen till instrumentet (→ "Bild 4-4").



Varning

Slangen kan inte anslutas om tätningsringarna saknas! Kontakta i så fall Leicas tekniska service.

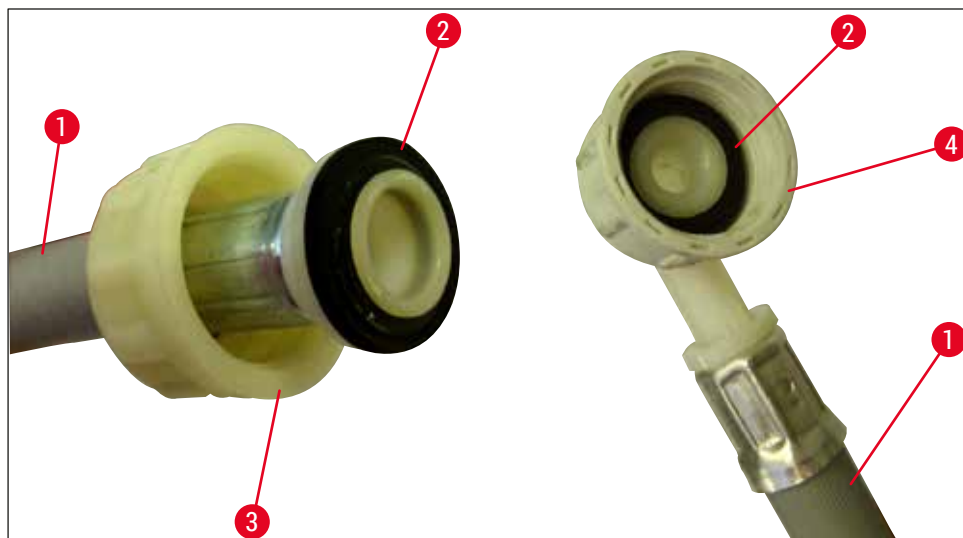


Bild 4



Varning

Oberoende av vilken anslutningsvariant som väljs (sex kranvattenstationer eller fyra kranvattenstationer och två stationer för destillerat/avjoniserat vatten) måste alltid båda tilloppsslangarna anslutas till instrumentet.

Vattentillförseln ska stängas av i samband med pauser i arbetet och när instrumentet har stängts av.

4 Installation och start

4.2.1 Anslutning av samtliga 6 sköljvattenstationer

Om alla sköljvattenkyvetter (6 sköljvattenstationer) ska anslutas måste båda tilloppslangarna (→ "Bild 5") användas enligt anvisningarna. Båda anslutningarna för rinnande vatten är (→ "Bild 5-4") anslutna till en vattenkran med (→ "Bild 5-8") ett Y-rör:

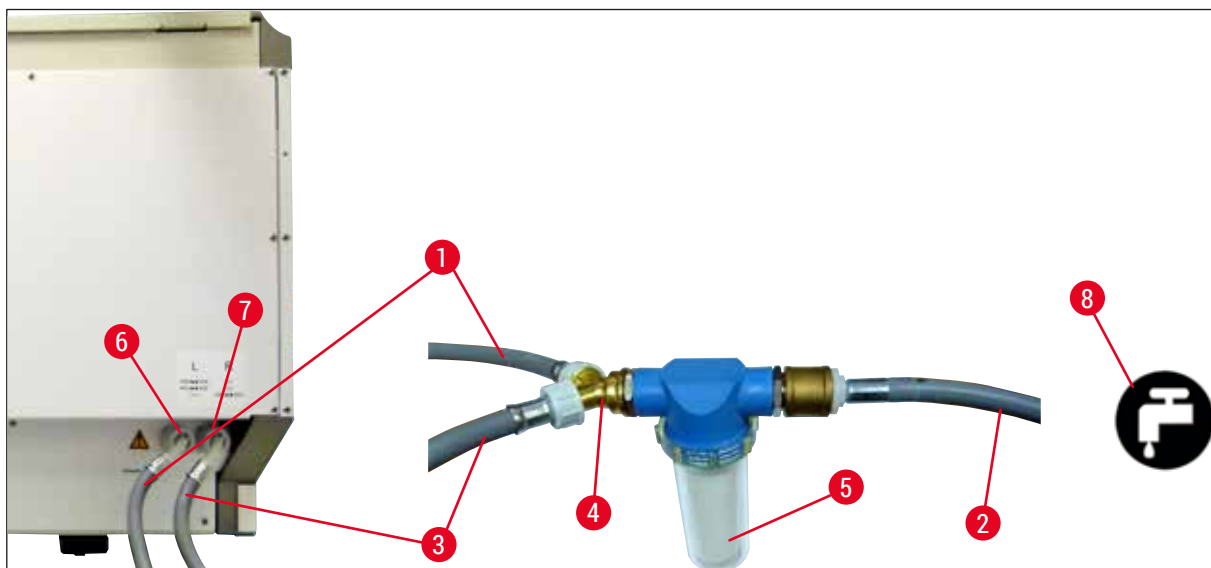


Bild 5

- | | |
|---|---|
| 1 | Vattentillförselslang 1 (2,5 m) |
| 2 | Förlängningsslang 1,5 m |
| 3 | Vattentillförselslang 2 (2,5 m) |
| 4 | Y-koppling |
| 5 | Filterhus |
| 6 | Sköljvattenanslutning (grupp om 4) |
| 7 | Anslutning för destillerat vatten eller kranvatten (grupp om två) |
| 8 | Kranvattenanslutning i laboratoriet |

Beställningsnr: 14 0474 32325
Beställningsnr: 14 0512 49334
Beställningsnr: 14 0474 32325
Beställningsnr: 14 3000 00351
Beställningsnr: 14 0512 49331

4.2.2 Kombinerad anslutning 4+2 sköljvattenstationer

Om huvudanslutningen (fyra sköljvattenstationer) ska anslutas till färskvatten och den andra anslutningen (2 sköljvattenstationer) till en källa för destillerat eller avjoniserat vatten i laboratoriet ska följande anslutningsschema användas:

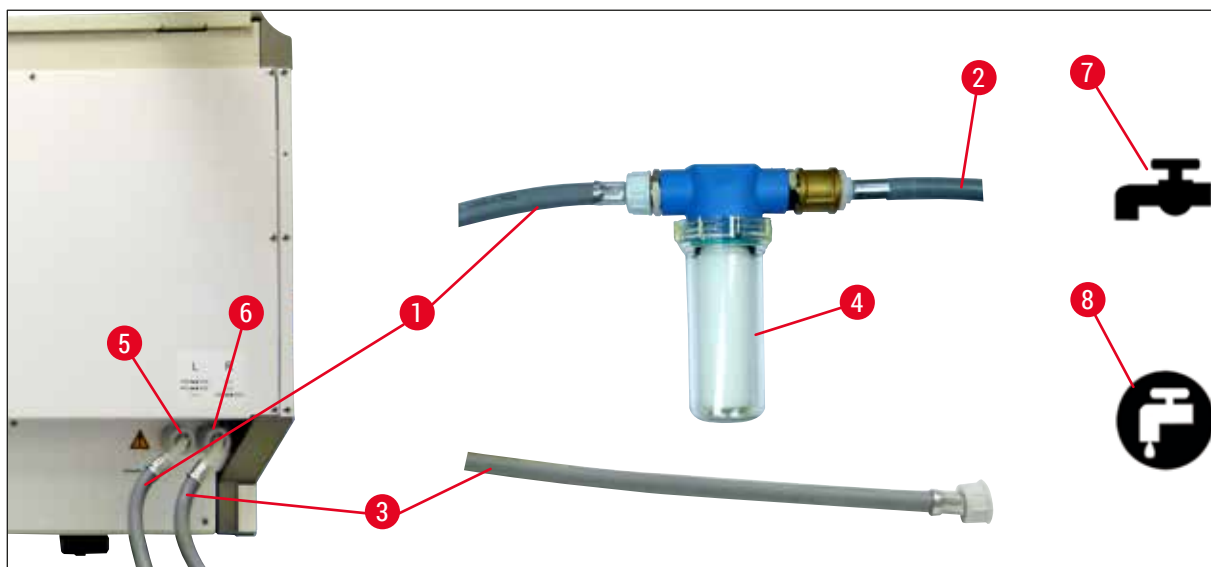


Bild 6

- | | | |
|---|---|-------------------------------|
| 1 | Vattentillförselslang 1 (2,5 m) | Beställningsnr: 14 0474 32325 |
| 2 | Förlängningsslang 1,5 m | Beställningsnr: 14 0512 49334 |
| 3 | Vattentillförselslang 2 (2,5 m) | Beställningsnr: 14 0474 32325 |
| 4 | Filterhus | Beställningsnr: 14 0512 49331 |
| 5 | Sköljvattenanslutning (grupp om 4) | |
| 6 | Anslutning för destillerat vatten eller kranvatten (grupp om två) | |
| 7 | Kranvattenanslutning i laboratoriet | |
| 8 | Anslutning för destillerat/avjoniserat vatten i laboratoriet | |



Varning

Det är viktigt att slangarna ansluts på rätt sätt (→ "Bild 2-8")!

4.2.3 Avloppsvattenanslutning

**Obs!**

Instrumentet har en passiv avloppsvattenavrinning. Laboratoriets avloppssifon måste därför sitta minst 50 cm under instrumentets avloppsvattenanslutning.

**Varning**

Avloppsslangen (→ "Bild 7-1") måste ledas med ett jämnt fall nedåt och får inte höjas.

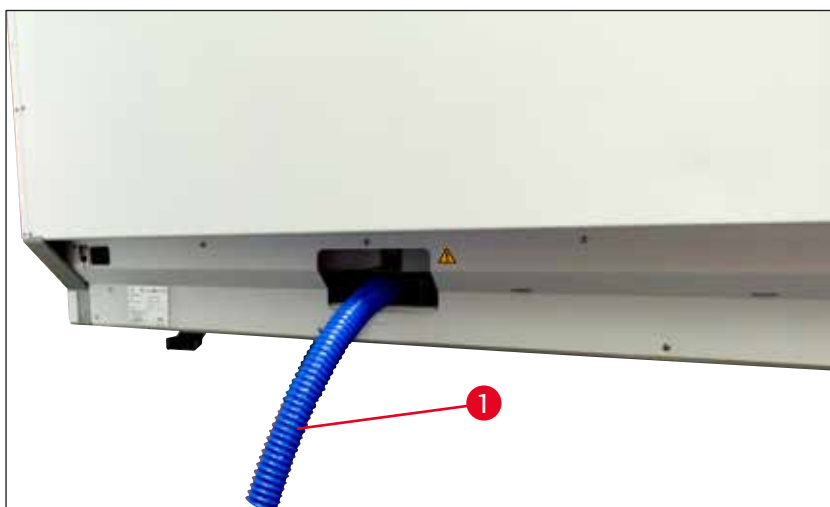


Bild 7

4.3 Elektrisk anslutning

**Varning**

- Använd endast den medföljande strömkabeln som är till för lokal strömförsörjning.
- Innan strömkontakten ansluts till uttaget måste du kontrollera att strömbrytaren nere till höger på instrumentets framsida står på **FRÅN** ("0").

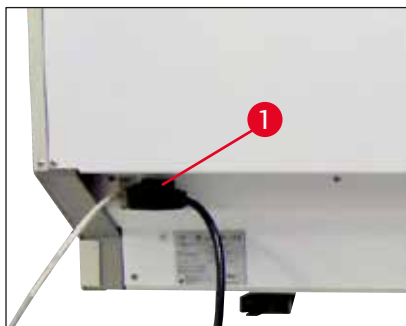


Bild 8

- Anslut strömkabeln till uttaget på baksidan av instrumentet (→ "Bild 8-1").
- Sätt i strömkontakten i ett jordat eluttag.

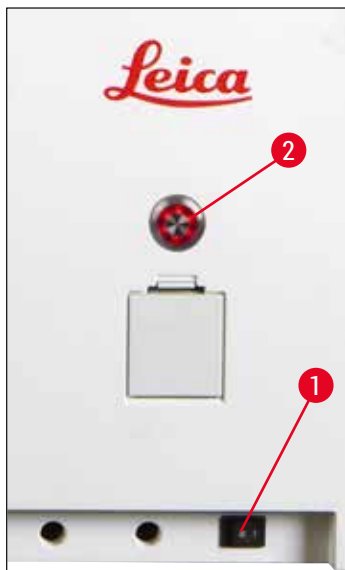


Bild 9

- Koppla till strömbrytaren (→ "Bild 9-1").
- Efter en liten stund börjar driftströmbrytaren att lysa orange. När programmets startsekvens är slutförd lyser brytaren röd (→ "Bild 9-2") och instrumentet är i standby-läge.
- Driftströmbrytaren kan nu användas (→ Sida 30 – 4.5 Starta och stänga av instrumentet).

4.3.1 Använda en extern avbrottsfri strömkälla (UPS)

Ett avbrott av infärgningsprocessen vid tillfälliga strömvbrott kan undvikas med hjälp av en batteridrivna avbrottsfri strömkälla (→ "Bild 10-1") (UPS). UPS:en bör kunna leverera en effekt på minst 1 580 VA i tio minuter. UPS:en måste vara avsedd för driftspänningen på uppställningsplatsen. Anslut den genom att ansluta strömkabeln på HistoCore SPECTRA ST till UPS-uttaget. UPS:en ansluts till laboratoriets eluttag.

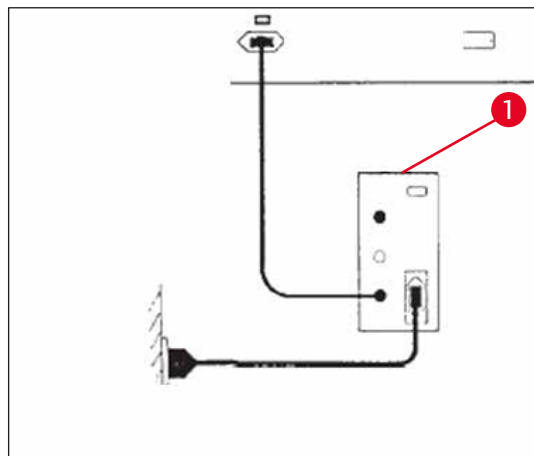


Bild 10



Varning

Strömkabeln till UPS:en måste alltid vara ansluten till eluttaget i labbet, även vid strömvbrott. Eftersom instrumentets jordning annars inte är säkerställd!

4.4 Frånluftsanslutning

- » Anslut ena änden av ventilationsslangen (→ "Bild 11-1") till ventilationsuttaget (→ "Bild 11-2") på instrumentets ovansida. Och den andra änden till laboratoriets frånluftsventilation.

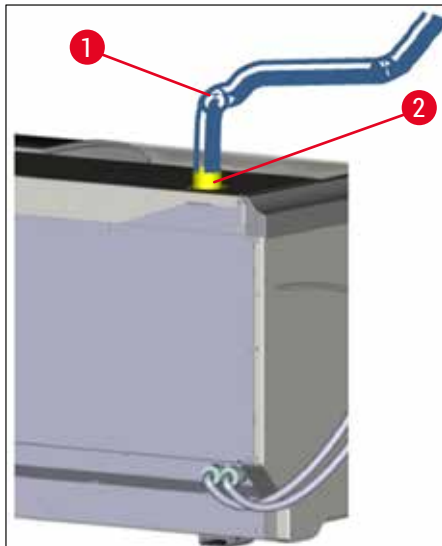


Bild 11



Varning

- En anslutning till ett externt ventilationssystem (rekommenderas starkt) och ett integrerat utsugssystem med ett aktivt kolfilter minskar koncentrationen lösningsmedel i luften och måste användas. För att undvika onödig avdunstning av reagenser ska kyvetterna täckas över när de inte används.
- Vid arbeten med farliga ämnen ska användarföretaget kontrollera att arbetsplatsens gränsvärden inte överskrids.

4.5 Starta och stänga av instrumentet



Varning

Instrumentet ska vara anslutet till ett jordat eluttag. För att skydda (de elektriska) säkringarna ytterligare rekommenderar vi att HistoCore SPECTRA ST kopplas till ett uttag med en jordfelsbrytare (RCCB).

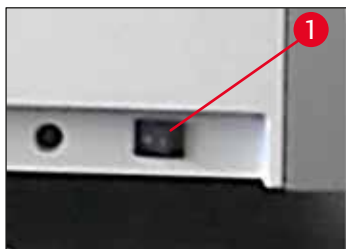


Bild 12

- Sätt strömbrytaren längst ner på instrumentets främre högra sida på TILL ("I") (→ "Bild 12-1").



Bild 13

- Några sekunder efter att strömbrytaren har kopplats till kommer driftströmbrytaren att lysa orange (→ "Bild 13"). Mjukvarans startprocess är slutförd när driftströmbrytaren lyser rött.

**Obs!**

Om du trycker på driftströmbrytaren medan den lyser orange startar inte instrumentet.



Bild 14

- För att starta instrumentet trycker du på driftströmbrytaren (→ "Bild 13") som blinkar rött. En ljudsignal hörs.
- Under initieringen utförs automatiskt en kontroll av alla stationer (skanning av påfyllningsnivå).
- Driftströmbrytaren lyser grönt när instrumentet är redo för start.
- När initieringsfasen är slutförd visas huvudmenyn (→ "Bild 14") på skärmen.

Avstängning av instrumentet

- Tryck två gånger på driftströmbrytaren (→ "Bild 13") för att försätta instrumentet i standby-läge (t.ex. över natten). Driftströmbrytaren lyser då rött.
- Inför rengöring och underhåll ska instrumentet stängas av med strömbrytaren (→ "Bild 12-1").

**Obs!**

När instrumentet installeras eller om inga reagenser har tillsatts identifieras de ofyllda stationerna och markeras på skärmen (→ Sida 88 – 6.2.2 Automatisk skanning av påfyllningsnivå).

**Varning**

Om ett ugnssteg har programmerats som första steg i infärgningsprogrammet kan programmet markeras som "ej startklart" efter start av instrumentet, eftersom ugnen ännu inte har nått drifttemperaturen. Så snart drifttemperaturen har uppnåtts visas programmet som startklart.

5 Användning

5. Användning

5.1 Användargränssnitt – Översikt

HistoCore SPECTRA ST programmeras och används via en pekskärm i färg. När bildskärmen har slagits på ser den ut på följande sätt om ingen infärgningsprocess (inget program) är i gång.

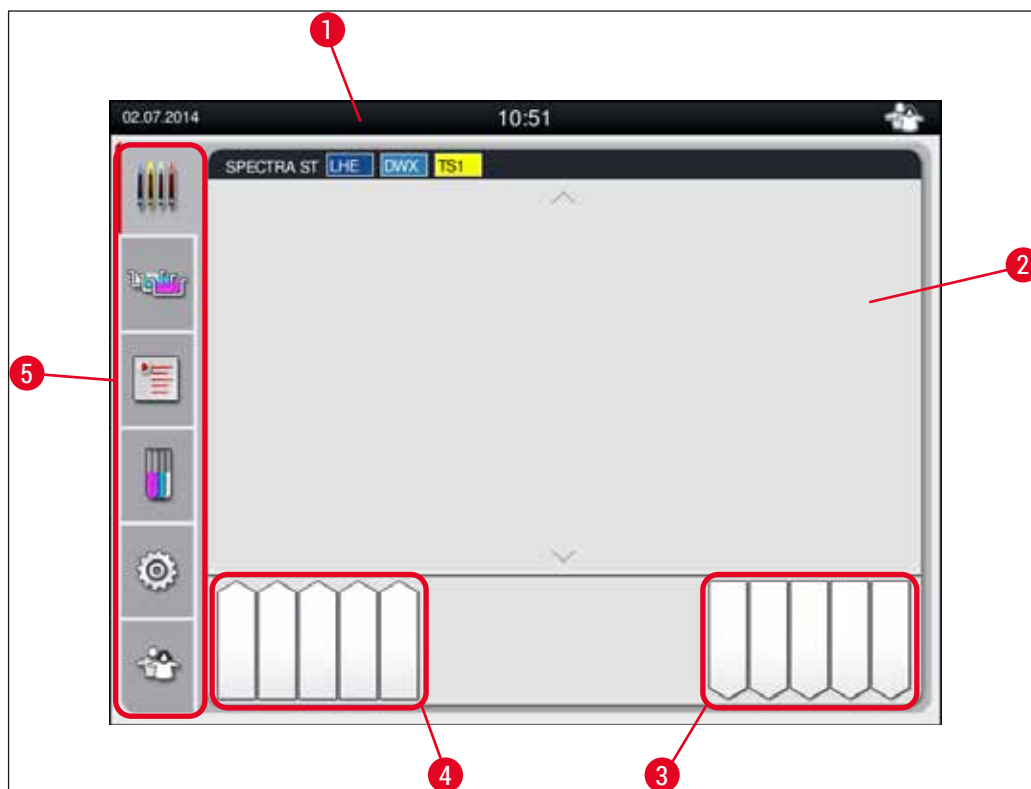


Bild 15

- 1 Statusrad
- 2 Processtatusvisning
- 3 Statusvisning för utmatningsfacket
- 4 Statusvisning för laddningsfacket
- 5 Huvudmeny (→ Sida 37 – 5.5 Huvudmeny – Översikt)

5.2 Element på statusskärmen

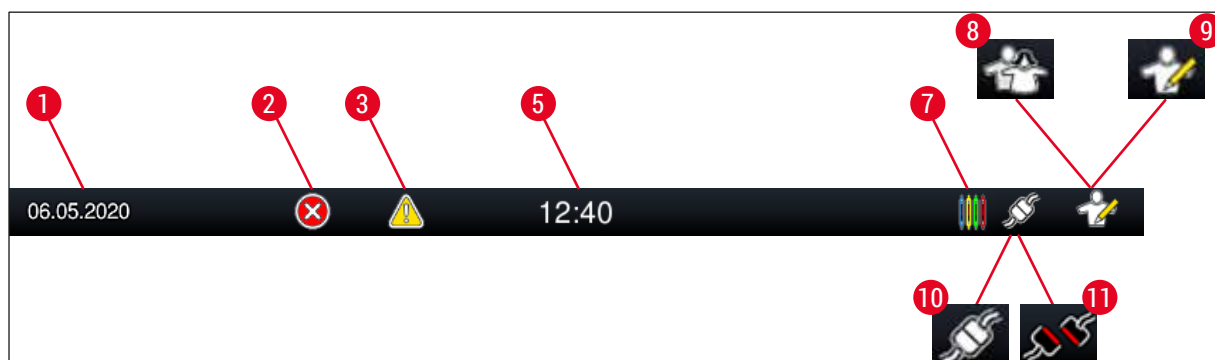


Bild 16

- 1 Aktuellt datum
- 2 Om larm och felinformation visas när instrumentet är i drift syns denna larmsymbol. Genom att trycka på denna symbol kan du öppna de 20 senaste aktiva informationsmeddelandena igen.
- 3 Om varningar och information visas när instrumentet är i drift syns denna informationssymbol. Genom att trycka på denna symbol kan du öppna de 20 senaste aktiva informationsmeddelandena igen.
- 5 Lokal tid
- 7 "Process"-symbolen indikerar att det finns aktiva infärgningsprocesser och att det fortfarande kan finnas rack i utmatningsfacket.
- 8 Den här "**användar**"-symbolen indikerar att instrumentet är i användarläge, vilket möjliggör en förenklad användning av instrumentet, utan lösenord.
- 9 När instrumentet används i "**arbetsledarläge**" indikeras det av denna symbol. Detta läge ger ännu fler användnings- och inställningsmöjligheter för utbildad personal. Åtkomst till detta läge kräver lösenord.
- 10 Anslutning har upprättats mellan HistoCore SPECTRA ST och HistoCore SPECTRA CV.
- 11 Anslutningen mellan HistoCore SPECTRA ST och HistoCore SPECTRA CV har avbrutits.

5.3 Processtatusvisning

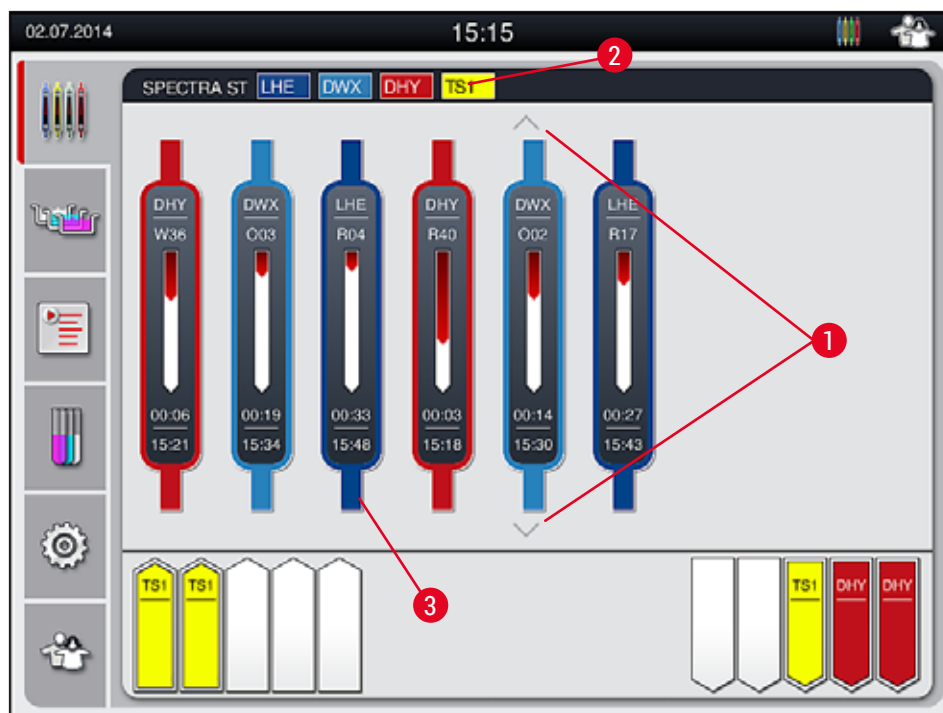


Bild 17

Huvudfönstret (→ "Bild 17") visar alla rack (→ "Bild 17-3") som finns i processen.



Obs!

För att visa en aktiv infärgningsprocess visas den övre delen av handtaget i respektive färg (→ "Bild 17-3"). Om antalet rack i processen överstiger det maximala antal som kan visas i huvudfönstret (max. 9) kan du bläddra uppåt och nedåt i skärmområdet med hjälp av (→ "Bild 17-1")-knapparna. Om en knapp är gråmarkerad är den inaktiv och det finns inga andra element i det område som inte visas.

Namnlisten i huvudfönstret (→ "Bild 17-2") indikerar instrumenttypen [SPECTRA ST] och listar de infärgningsprogram som kan startas för tillfället med angivna förkortningar och den färg som har tilldelats racket.



Varning

- Tillgängligheten för och valt antal olika utmatningsstationer är inte synliga för användaren i processtatusvisningen. Det rekommenderas att använda reagensuppställningsmenyn för processövervakning (→ "Bild 85") när olika reagenser används i utmatningsstationerna, för att man ska kunna reagera i tid när utmatningskapaciteten nås.
- Om färdiga rack inte avlägsnas från utmatningsstationerna i tid kan detta leda till störningar i infärgningsprocessen och kan påverka infärgningsresultaten.

**Obs!**

Varje pågående infärgningsprocess illustreras med en rackhandtagssymbol. Den visas i samma färg som det faktiska rackhandtaget. Olika typer av informationen visas på handtagssymbolen (→ "Bild 18").

Om HistoCore SPECTRA ST-infärgaren är permanent ansluten till en HistoCore SPECTRA CV automatisk täckglasapplikator kan båda instrumenten användas som arbetsstation. Detta möjliggör ett kontinuerligt arbetsflöde, från infärgningsprocessen till avlägsnandet av de slutförda objektglasen med täckglas. Tiden för överföring till HistoCore SPECTRA CV visas också i processtatusraden (→ "Bild 18-6").

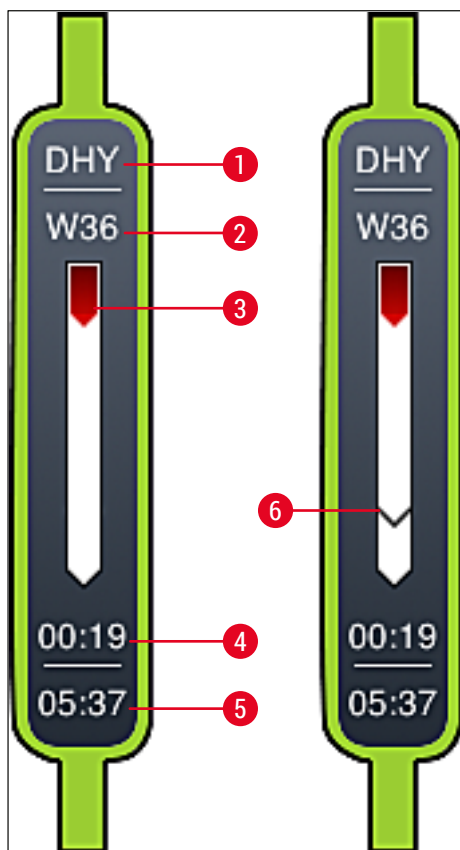


Bild 18

- 1 Programnamnets förkortning
- 2 Rackets aktuella position i instrumentet
- 3 Visning av förloppet för hela infärgningsprocessen
- 4 Förväntad återstående tid för programmet (hh:mm)
- 5 Klockslag vid programmets slut
- 6 Tid för överföring till den automatiska täckglasapplikatorn HistoCore SPECTRA CV vid användning som arbetsstation (→ Sida 108 – 6.6.5 Användning som arbetsstation)

5 Användning

5.4 Visning av facken

Längst ner i huvudfönstret visas status för laddnings- och utmatningsfacken.

- Stationerna med en pil som pekar i riktning in mot instrumentet (→ "Bild 19-1") symboliserar laddningsfacket och stationerna med en pil som pekar bort från instrumentet (→ "Bild 19-2") symboliserar utmatningsfacket, vart och ett med fem positioner.
- Beräknad starttid (→ "Bild 19-5") visas för varje rack i laddningsfacket.
- Respektive fack öppnas och stängs automatiskt när du trycker på fackknappen (→ "Bild 19-3") eller (→ "Bild 19-4").
- Instrumentet känner automatiskt av om rack sätts i eller tas ur när facket stängs.
- De rack som är placerade i inmatnings- eller utmatningsfacket visas med respektive rackhandtagsfärg och den tilldelade programförkortningen på skärmen.
- Lediga positioner visas i vitt.



Obs!

Laddnings- och utmatningsfacken kan öppnas när fackknappen lyser grönt (→ "Bild 19-4"). När rack transporteras ut ur laddningsfacket eller in i utmatningsfacket lyser knappen för respektive fack röd (→ "Bild 19-3") och facket kan inte öppnas.

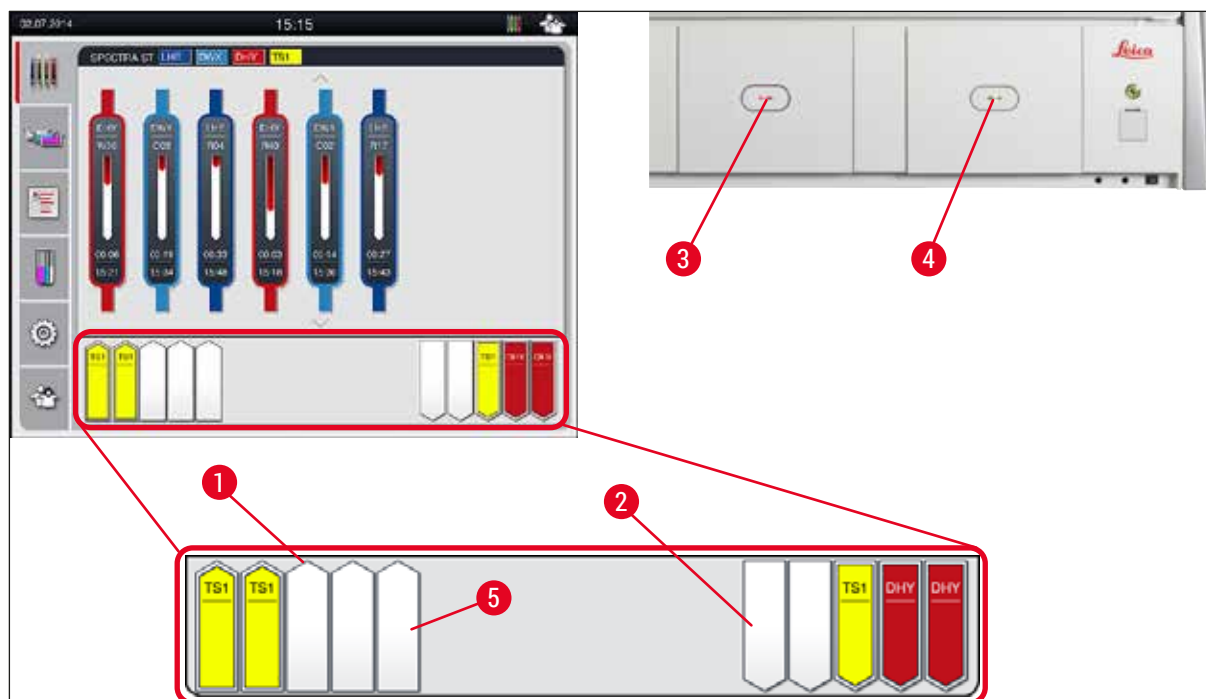


Bild 19



Varning

Se upp när facken öppnas eller stängs. Klämrisk! Facken är motordrivna och öppnas automatiskt när knappen trycks in. Blockera inte fackens rörelseområde.

5.5 Huvudmeny – Översikt

Huvudmenyn är placerad till vänster på skärmen (→ "Bild 15-5") och indelad enligt beskrivningen nedan. Denna meny syns i alla undermenyer och gör att du när som helst kan byta till en annan undermeny.



Processtatusvisningen visar aktuell status för alla pågående rack. Här visas respektive handtag som en symbol på racket i respektive färg.

Denna visning utgör standardvisningen.



Reagensuppställning visar alla stationer i instrumentet ovanifrån. De enskilda reagensstationerna visas med förkortningar av reagensnamnen, stationsnumren och de pågående racken.



När **Programlista** aktiveras visas alla infärgningsprogram som är tillgängliga i instrumentet i listform. I menyn kan du mata in infärgningsprogram på nytt eller ändra dem, ändra deras prioritet samt skapa reagensuppställningen.



När **Reagenslista** aktiveras visas alla tidigare inmatade reagenser i listform. Med hjälp av menyn kan du ändra befintliga eller lägga in nya infärgningsreagenser, t.ex. för integrering av nya infärgningsprogram. Reagenserna måste läggas in innan programmet skapas.



I menyn **Inställningar** kan grundinställningar göras. Här kan språk, datum och tid, ugnstemperatur och andra parametrar anpassas efter lokala behov.



I menyn **Användarinställningar** kan ett individuellt lösenord läggas in, så att inga obehöriga kan göra ändringar i program och reagenslistor (**Arbetsledarläge**). I **Användarläge** kan instrumentet dock användas utan lösenord.

5.5.1 Knappsatsen

**Obs!**

En knappsats visas (→ "Bild 20") när något måste matas in (t.ex. för att skapa program, redigera program eller för att ange ett lösenord). Användningen sker via pekskärmen.

Observera att knappsatsens beror på vilket språk som är inställt.

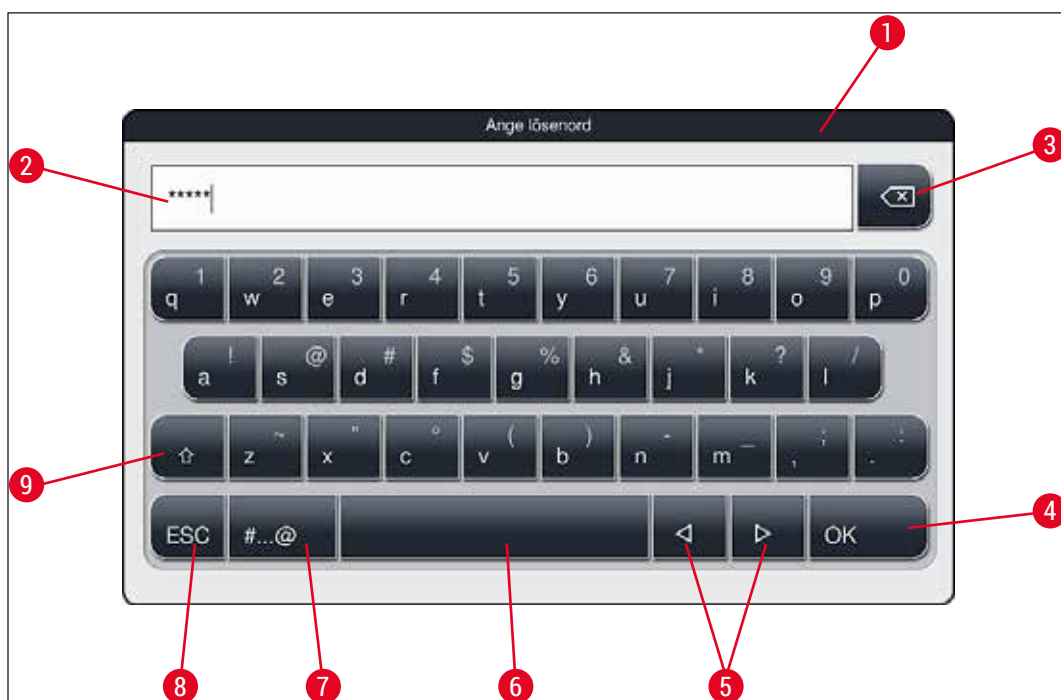


Bild 20

- 1 Namnlist
- 2 Inmatningsfält
- 3 Radera senast inmatat tecken
- 4 Bekräftelse
- 5 Flytta markören åt vänster eller höger
- 6 Mellanslagstangent
- 7 Shifttangent för specialtecken (→ "Bild 21")
- 8 Avbryt (inmatningar sparas inte!)
- 9 Stora/små bokstäver (om man trycker två gånger på tangenten aktiveras versaler permanent, vilket visas genom att tangenten blir röd. Trycker man på tangenten igen aktiveras gemener.)

Knappsats med specialtecken



Bild 21

Ytterligare specialtecken



Bild 22

- För att skriva ett specialtecken eller diakritiskt tecken som inte finns på knappsatsen med specialtecken (→ "Bild 21") håller du in motsvarande normal tangent på knappsatsen.
- Exempel: Om du håller in **a**-tangenten får du en rad andra alternativ (→ "Bild 22").
- Tryck på önskat tecken för att välja det på det nya, enradiga tangentbordet.



Obs!

Följande teckenbegränsningar gäller för lösenord och beteckningar:

- Reagensnamn: max. 30 tecken/reagensförkortningar: max. 10 tecken
- Programnamn: max. 32 tecken/programförkortningar: max. 3 tecken
- Lösenord: minst 4 och max. 16 tecken

5.6 Användarinställningar



I den här menyn kan motsvarande behörighetsnivå ställas in. Man skiljer mellan:

- Standardanvändare
- Arbetsledare (lösenordsskyddad)
- Servicetekniker (lösenordsskyddad)

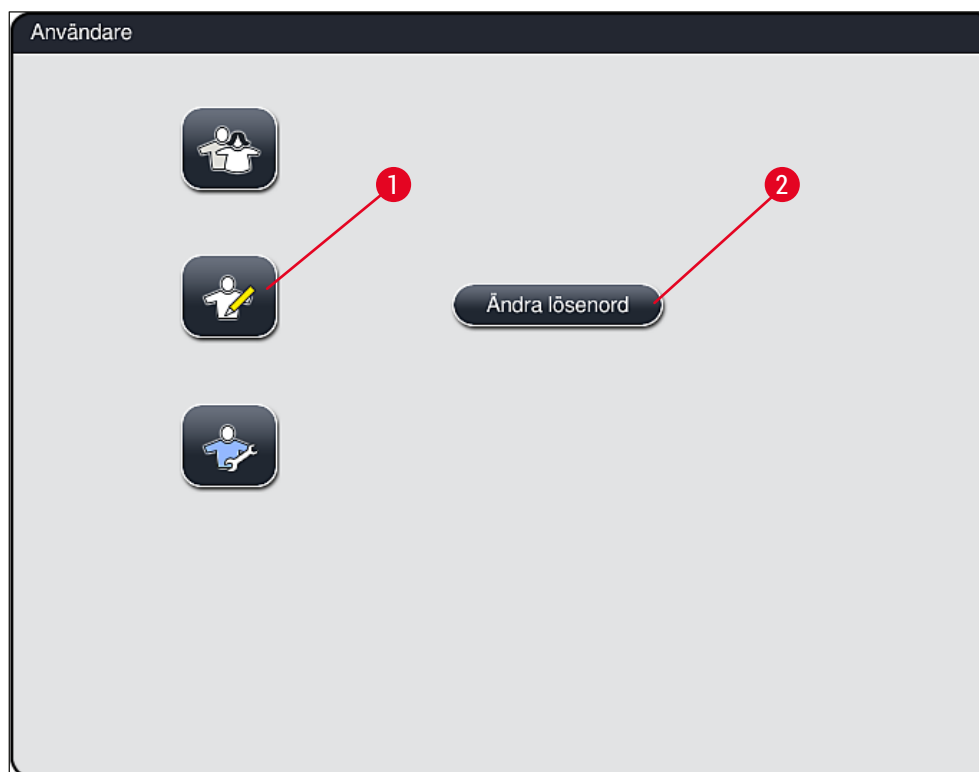


Bild 23

**Standardanvändare:**

Standardanvändaren behöver inget lösenord och kan använda det färdiginställda instrumentet för alla vanliga användningsområden. Ändringar i program och inställningar kan inte göras av denna användargrupp.

**Arbetsledare:**

Arbetsledaren har samma behörighet som standardanvändaren men kan dessutom skapa program och ställa in instrumentet när det tas i drift. Arbetsledarbehörigheten är därför lösenordsskyddad.

Gör så här för att aktivera arbetsledarläget:

1. Tryck på knappen **Arbetsledare** (→ "Bild 23-1").
2. Sedan visas en knappsats (→ "Bild 24") som kan användas för att ange lösenordet.
3. Med **OK** avslutas inmatningen och det angivna lösenordets giltighet kontrolleras.
4. Aktuell användarstatus visas med respektive symbol i statusraden (→ "Bild 16") längst upp till höger.



Bild 24



Obs!

Lösenordet som är inställt från fabrik bör ändras första gången det används.

Gör så här för att ändra arbetsledarens lösenord:

1. För att ändra lösenordet trycker du på knappen **Ändra lösenord** (→ "Bild 23-2") och anger det gamla lösenordet.
2. Ange sedan det nya lösenordet två gånger med hjälp av knappsatsen och bekräfta med **OK**.



Obs!

Ett lösenord måste innehålla minst 4 tecken och får vara högst 16 tecken långt.



Servicetekniker:

Serviceteknikern har åtkomst till systemfiler och kan utföra grundläggande inställningar och tester.

5.7 Grundläggande inställningar



Obs!

Vissa inställningar kan endast ändras i arbetsledarläge, till exempel när instrumentet installeras för första gången (→ Sida 41 – Gör så här för att aktivera arbetsledarläget:).

Om du trycker på kugghjulssymbolen (→ "Bild 25-1") öppnas menyn **Inställningar** (→ "Bild 25"). I denna meny kan grundläggande instrument- och mjukvaruinställningar göras.

- Om du trycker på en symbol (→ "Bild 25-2") väljs den och markeras med rött.
- I bildskärmens högra område visas respektive inställningsfönster.
- De enskilda undermenyerna beskrivs nedan.



Bild 25

5.7.1 Språkeställningar



- Menyn för språkval visas när du trycker på symbolen för **Språk** (→ "Bild 25-2"). Denna meny innehåller en översikt över alla språk som är installerade på instrumentet. Här kan du välja önskat visningsspråk.

- Välj önskat språk och bekräfta med knappen **Spara**.
- Skärmbilden, informationsmeddelanden och etiketter visas omedelbart på det aktuella konfigurerade språket.

**Obs!**

En arbetsledare eller Leica-servicetekniker kan lägga till fler språk med hjälp av Import (→ Sida 48 – 5.7.7 Datahantering).

5.7.2 Regionala inställningar

I den här menyn kan grundläggande skärminställningar (→ "Bild 26") konfigureras.

Temperaturenhet

- Ställ in temperaturenheten (→ "Bild 26-1") på Celsius eller Fahrenheit. Dra skjutreglaget till önskad enhet för att göra detta.

Tidsformat

- Tidsvisningen (→ "Bild 26-2") kan ändras från 24-timmarsformat till 12-timmarsformat (a.m. = morgon/ p.m. = eftermiddag) med hjälp av skjutreglaget.

Datumformat

- Konfigurera datumvisningen (→ "Bild 26-3") till internationellt, ISO- eller USA-format genom att trycka på motsvarande radioknapp bredvid formatet.
- Den aktiva inställningen markeras med en röd ram (→ "Bild 26-4").
- Tryck på knappen **Spara** för att spara inställningarna.

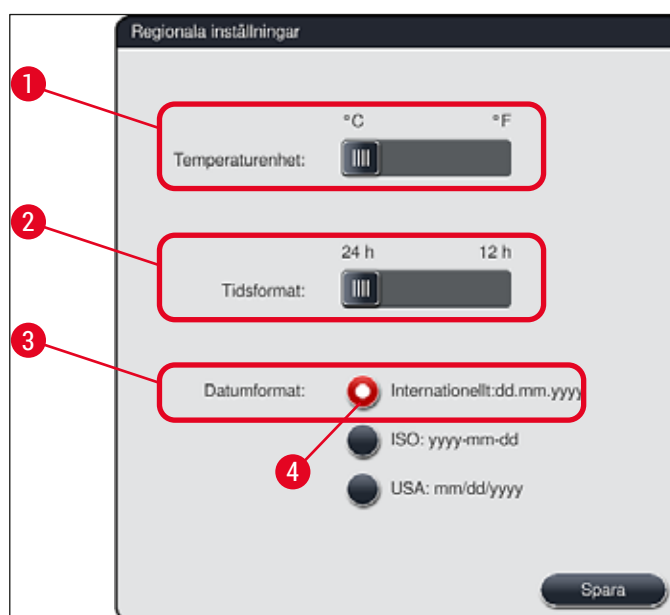


Bild 26

5.7.3 Datum och tid



I den här menyn (→ "Bild 27") kan du ställa in aktuellt datum och lokal tid genom att vrida på de enskilda hjulen.

**Obs!**

I 12-timmarsvisningen anges dessutom a.m. (förmiddag) och p.m. (eftermiddag) under timsiffrorna, så att en korrekt inställning kan göras.

Inställningen av tid och datum får inte avvika med mer än 24 timmar från systemtiden som är inställd från fabrik.

- Tryck på knappen **Spara** för att spara inställningarna.



Bild 27

5.7.4 Meny för larmljud – fel- och signalljud



I den här menyn kan du välja larm- och ljudsignaler, justera volymen och kontrollera att de fungerar (→ "Bild 28-6").

När menyn har öppnats visas aktuell inställning av larm- och ljudsignaler.



Varning

- När instrumentet startas spelas en larmsignal upp. Om så inte är fallet får instrumentet inte användas, detta för att skydda proverna och användaren. Kontakta i så fall Leicas tekniska service.
- De akustiska larmsignalerna kan inte avaktiveras. Minsta konfigurerbara värde för volymen är 2. Det högsta värdet är 9.

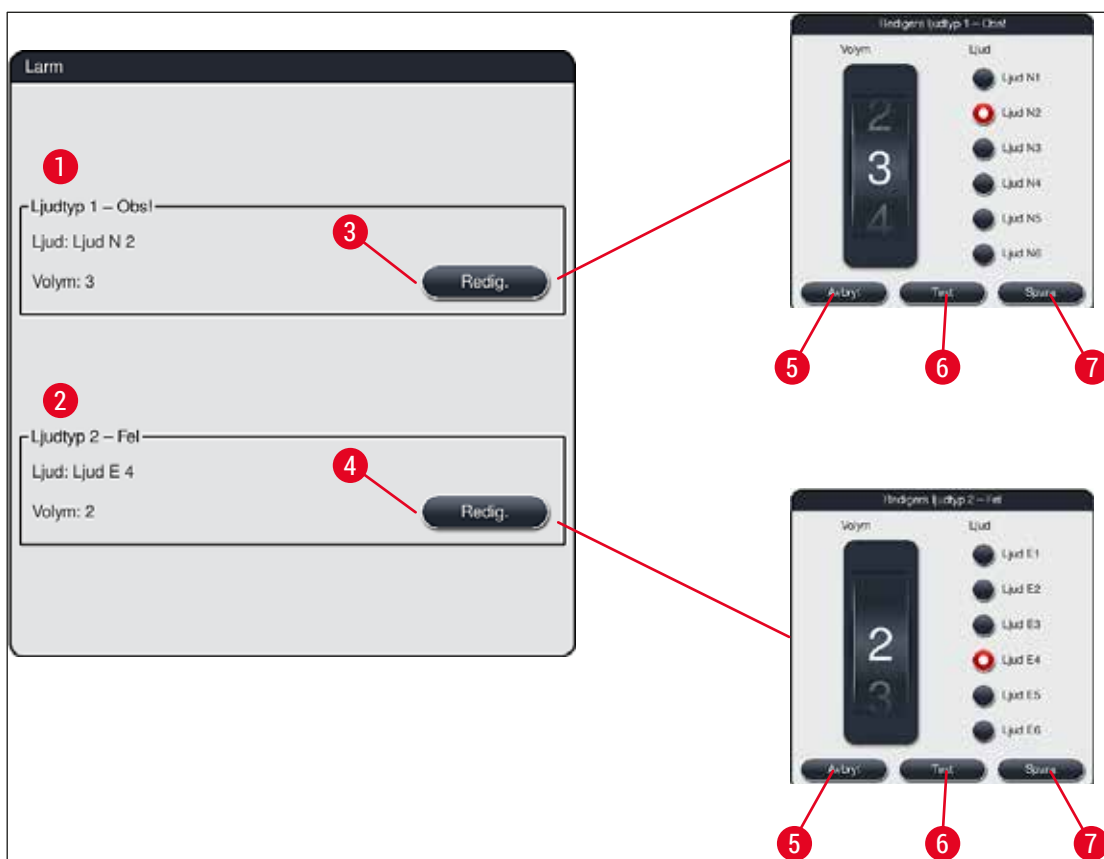


Bild 28



Ljudtyp 1 – Obs! (→ "Bild 28-1")

Ljudsignaler avges när varningsmeddelanden eller anvisningar visas på skärmen. Det går att välja en av sex olika ljudsignaler. För att ändra inställningarna trycker du på knappen **Redig.** (→ "Bild 28-3"). Volymen kan ställas in stegvis (0 till 9) med hjälp av hjulet.



Ljudtyp 2 – Fel (→ "Bild 28-2")

Larmsignaler hörs när ett felmeddelande visas på bildskärmen. Detta kräver att användaren genast ingriper. Det går att välja en av sex olika ljudsignaler. För att ändra inställningarna trycker du på knappen **Redig.** (→ "Bild 28-4").

- Med hjälp av hjulet **Volym** kan larmsignalernas volyminställning anpassas. För larmtyperna finns det sex olika ljudsignaler att välja mellan. Knappen **Test** (→ "Bild 28-6") kan användas för att lyssna på de olika ljuden.
- Tryck på knappen **Spara** (→ "Bild 28-7") för att spara inställningarna. Använd knappen **Avbryt** (→ "Bild 28-5") för att stänga fönstret utan att bekräfta inställningarna.

5.7.5 Ugnsinställningar



Ugnens temperatur och driftläge kan konfigureras i menyn för ugnsinställningar (→ "Bild 29"). När menyn har öppnats visas de aktuella ugnsinställningarna.



Varning

Ändringar av ugnstemperaturen kan leda till att infärgningsresultatet påverkas. Om ugnstemperaturen är för högt inställd kan det påverka provet.

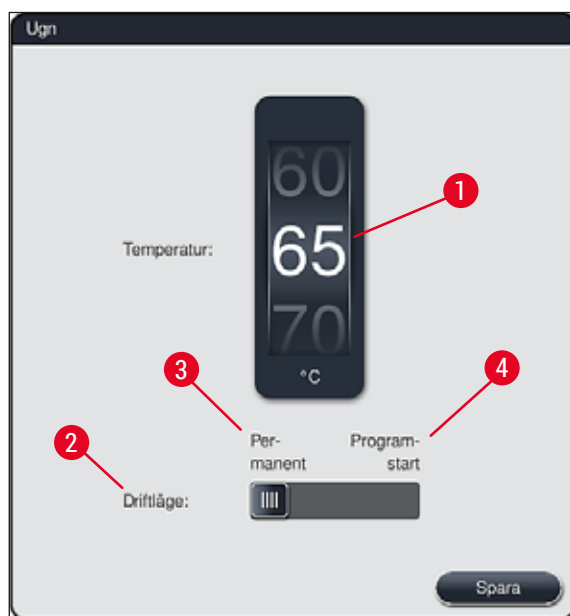


Bild 29

Temperatur:

Ugnens måltemperatur kan ställas in i steg om 5 °C från 40 °C till 70 °C med hjälp av hjulet (→ "Bild 29-1").

Driftläge:

För driftläget (→ "Bild 29-2") kan du välja mellan:

- uppvärmning av ugnen i samband med att ett program (→ "Bild 29-4") startas (**Programstart**) eller
- start av ugnen i samband med att instrumentet (→ "Bild 29-3") startas (**Permanent**).
- Inställningen ändras genom att skjutreglaget ställs i motsvarande läge.
- Inställningarna sparas genom att man trycker på knappen **Spara**.

**Obs!**

- För att ändringarna ska sparas måste det lösenordsskyddade användarläget **Arbetsledare** användas. I det vanliga användarläget är knappen **Spara** grå och därmed inaktiv.
- Om Leica-infärgningsprogram har integrerats i reagensuppställningen (→ Sida 74 – 5.9.9 Skapa reagensuppställningen) kan inte temperaturinställningen ändras. Se informationen som medföljer Leica Reagent Kit för standardtemperaturen.

**Varning**

- Det rekommenderas att **Permanent** används som inställning för att undvika upprepade väntetider till följd av ugnens uppvärmning.
- På grund av omgivningsvillkoren kan den inställda ugnstemperaturen ibland avvika med -8 °C till $+5\text{ °C}$ från det inställda värdet. För särskilt känsliga preparat bör den inställda temperaturen därför väljas med hänsyn till detta (t.ex. den inställda temperaturen sänkas med 5 °C och ugnsmomentet förlängas motsvarande).

5.7.6 Rörelsehastighet – uppåt-/nedåtrörelse (agitering)

I menyn **Agitering** (→ "Bild 30") kan hastigheten för rackhållarens uppåt-/nedåtrörelse justeras. Rackhandtagen ligger på hållarens ram som rör sig uppåt och nedåt under infärgningsprocessen (agitering).

När menyn har öppnats visas den aktuella inställningen.

**Obs!**

Agiteringen bidrar till att de påfyllda reagenserna blandas ordentligt under pågående infärgningsprocess. För att rörelsehastigheten (agitering) ska kunna justeras måste det lösenordsskyddade användarläget **Arbetsledare** användas.

Hastighet:

Genom att rotera hjulet **Hastighet** (→ "Bild 30-1") kan du ställa in agiteringsfrekvensen (provernas rörelse) i fem steg (0 = agitering inaktiverad, 5 = högsta hastighet). Högre värden innebär en högre agiteringsfrekvens.

Inställningarna sparas genom att man trycker på knappen **Spara**.

**Obs!**

- Agiteringshastigheten för användardefinierade program kan bara ändras om inget validerat Leica-program är aktivt. Hjulet är i så fall svart och aktivt.
- Agiteringen är förinställd (fast) för validerade Leica-program (se bruksanvisningen till Leica Reagent Kit). Hjulet är då grått och inaktivt.


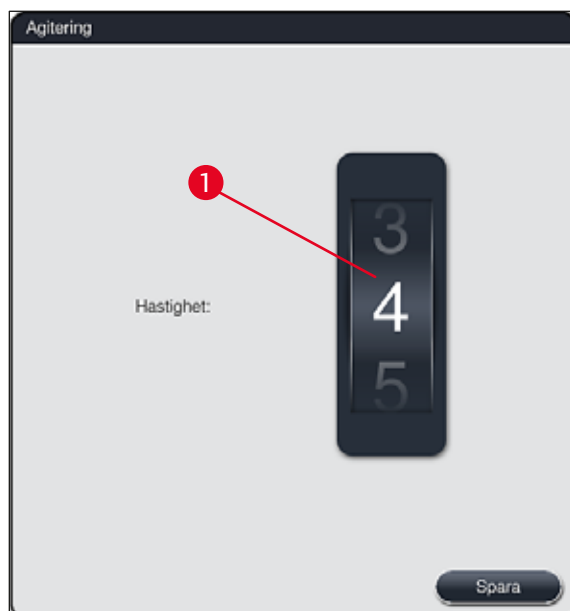


Bild 30

5.7.7 Datahantering

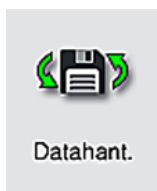

I menyn **Datahantering** (→ "Bild 31") kan du exportera och importera data, inställningar och händelseloggar (loggfiler). Ett USB-minne som ansluts till ett av USB-uttagen på instrumentets framsida (→ "Bild 1-7") krävs för alla exporter och importer (förutom fjärrmjukvaruuppdateringar).

**Obs!**

Det anslutna USB-minnet måste vara formaterat med FAT32.

Användarexport (→ "Bild 31-1")

Funktionen **Användarexport** används för att spara information på ett anslutet USB-minne (→ "Bild 1-7"):

- En **zip**-fil med händelseloggarna från de 30 senaste arbetsdagarna och **RHS**-information i CSV-format.
- En **PDF**-fil som innehåller alla användardefinierade program, aktiva program, användarvalda inställningar för Leica-program, reagensuppställning och reagenslista.
- En krypterad **lpkg**-fil som innehåller alla användardefinierade program samt reagenslistan.

**Obs!**

lpkg-filen kan inte öppnas och visas av användaren.

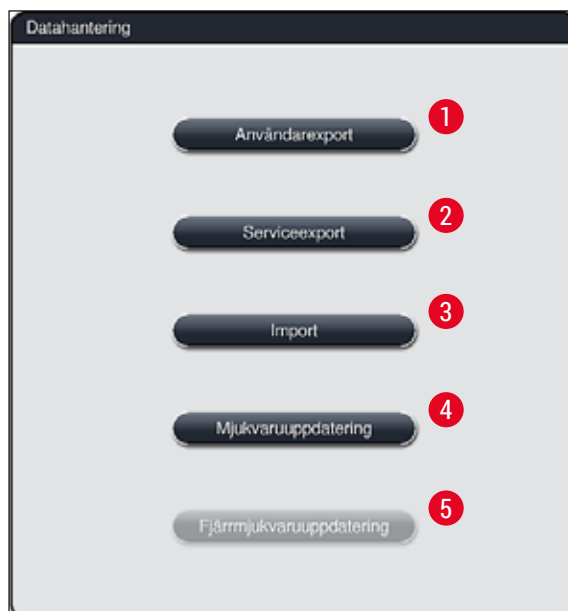


Bild 31

Användardefinierade program och reagenslistan kan överföras till en annan HistoCore SPECTRA ST med samma konfiguration med hjälp av funktionen **Import** (→ "Bild 31-3").

- Medan dataexporten pågår visas informationsmeddelandet **Användardata exporteras....**
- Informationsmeddelandet **Export lyckades** informerar användaren om att dataöverföringen är slutförd och att säker borttagning av USB-minnet kan ske.
- Om informationsmeddelandet **Export misslyckades** visas har ett fel inträffat (t.ex. har USB-minnet tagits bort för tidigt). Utför i så fall exporten på nytt.

**Obs!**

Det rekommenderas att man gör en export av data när instrumentet har installerats, så att denna data är åtkomliga vid en eventuell ominstallation.

Serviceexport (→ "Bild 31-2")

Funktionen **Serviceexport** används för att spara **lpkg**-filer på ett anslutet USB-minne (→ "Bild 1-7"):

Den krypterade **lpkg**-filen innehåller ett fördefinierat antal händelseloggar samt följande:

- | | |
|---|-------------------------------|
| • Information från reagenshanteringssystemet (RHS) | • Reagensdata |
| • Användardefinierade programnamn | • Annan servicerelaterad data |

**Obs!**

lpkg-filen kan inte öppnas och visas av användaren.

- När man trycker på knappen **Serviceexport** visas en urvals meny där användaren kan välja önskat antal dataposter som ska exporteras (5, 10, 15 eller 30 dagar).
- Tryck på **OK** för att bekräfta valet.
- Medan dataexporten pågår visas informationsmeddelandet **Servicedata exporteras....**
- Informationsmeddelandet **Export lyckades** informerar användaren om att dataöverföringen är slutförd och att säker borttagning av USB-minnet kan ske.
- Om informationsmeddelandet **Export misslyckades** visas har ett fel inträffat (t.ex. har USB-minnet tagits bort för tidigt). Utför i så fall exporten på nytt.

Import (→ "Bild 31-3")

**Obs!**

- Det lösenordsskyddade användarläget **Arbetsledare** krävs för import.
- Om det finns en eller flera filer i dialogrutan kan du använda filnamnet för att ange datumet då filen sparades och instrumentets serienummer. Välj filen som ska importeras och bekräfta meddelandet som följer på bildskärmen med **OK**.
- Instrumentets mjukvara ser till att inga befintliga Leica-program och -reagenser skrivs över när data importeras (program och reagenser). Dubbletter av förkortningar för program och reagenser samt dubbletter av reagensnamn ersätts automatiskt av en platshållare, alternativt läggs en platshållare till i namnet. Om det finns objektglas med dubblerade handtagsfärger får det importerade programmet färgen vit.

Handtagsfärg objektglas:

- Om ett program som importeras innehåller ett objektglas vars handtagsfärg redan har ett tilldelat program, byts denna handtagsfärg ut till vit vid importen.

Förkortning av programnamn:

- Om ett program ska importeras vars förkortning redan används för ett befintligt ersätter mjukvaran automatiskt denna förkortning med en platshållare. Det långa programnamnet förblir detsamma.
- Förkortning av det befintliga programmet: PAS
- Ändrad förkortning av det importerade programmet: +01

Reagensnamn och förkortning av reagensnamn:

- Om en reagens importeras vars namn och/eller förkortning redan används lägger mjukvaran automatiskt till en platshållare ("_?").
- Befintligt reagensnamn: 100 % alkoholdehyd 1 S
- Ändrat reagensnamn på den importerade reagensen: 100 % alkoholdehyd 1 S_?
- Befintlig förkortning: 100Dhy 1S
- Ändrad förkortning av den importerade reagensen: 100Dhy 1+01

Importerade program och reagenser kan integreras i reagensuppställningen, även med platshållare. Du kan byta namn på dem senare.

**Varning**

När du importerar data från ett USB-minne skrivs alla användardefinierade program och reagenser som redan finns på instrumentet över och ersätts av den data som importeras. Det går inte att markera endast enstaka filer för import! Leica rekommenderar att denna funktion endast används för att importera säkerhetskopior eller för att installera ytterligare en HistoCore SPECTRA ST med samma parametrar.

Funktionen **Import** gör det möjligt att importera data från den krypterade listan med program och reagenser, ytterligare validerade Leica-program och ytterligare språkpaket från ett anslutet USB-minne.

Denna data kan också användas för att förse en annan HistoCore SPECTRA ST med samma data med hjälp av funktionen Export/Import.

- För att göra detta sätter du i USB-minnet med tidigare exporterad data i ett av USB-uttagen på instrumentets framsida (→ "Bild 1-7").
- Välj sedan funktionen **Import**. Data importeras.
- Ett informationsmeddelande bekräftar att dataimporten har lyckats.

**Varning**

I allmänhet behöver en ny reagensuppställning skapas när funktionen **Import** används (och när ett nytt Leica-infärgningsprogram importeras). Alla Leica-reagenser som finns i instrumentet kommer att förfalla och måste ersättas med ett nytt, motsvarande Leica Reagent Kit.

Mjukvaruuppdatering (→ "Bild 31-4")

Om det finns mjukvaruuppdateringar och ytterligare språkpaket tillgängliga kan dessa köras eller installeras på följande sätt i användarläget **Arbetsledare** eller av en servicetekniker som är auktoriserad av Leica.

Utföra en mjukvaruuppdatering

1. Kopiera filen för mjukvaruuppdateringen till ett USB-minne som är formaterat med FAT32.
2. Sätt i USB-minnet i ett av de två USB-uttagen (→ "Bild 1-7") på instrumentets framsida.
3. Byt därefter till menyn **Datahantering** och klicka på **Mjukvaruuppdatering** (→ "Bild 31-4").
4. Mjukvaruuppdateringen startar.

✓ Ett informationsmeddelande informerar användaren om att uppdateringen har utförts.

**Varning**


Om uppdateringen inte kan genomföras får användaren information om detta. Kontakta Leica-service om orsaken till detta inte är uppenbar.

**Obs!**

Laboratoriespecifika inställningar raderas inte när mjukvaran till HistoCore SPECTRA ST uppdateras. Efter en mjukvaruuppdatering måste det kontrolleras att instrumentet fungerar korrekt.

Fjärrmjukvaruuppdatering (→ "Bild 31-5")

Den här funktionen är för närvarande inaktiverad.

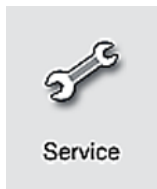5.7.8 Serviceuttag

Den här menyn (→ "Bild 32") ger Leica-auktoriserade servicetekniker åtkomst till tekniska funktioner för diagnos och reparationer av HistoCore SPECTRA ST.


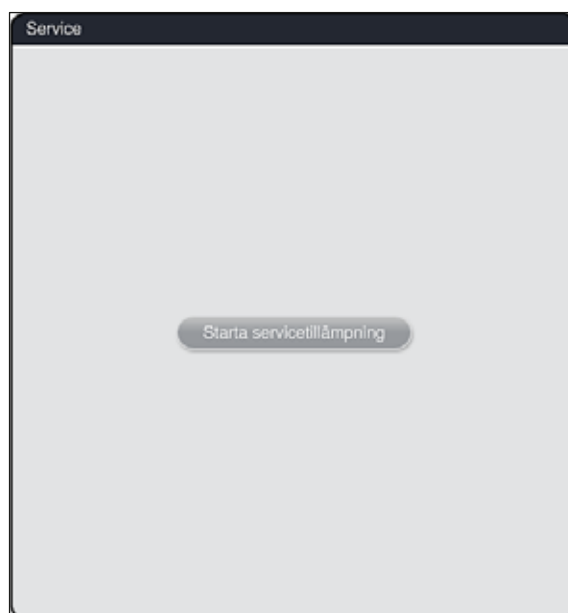


Bild 32

**Obs!**

Åtkomsten till servicemjukvaran är spärrad för alla andra användargrupper.

5.7.9 Händelsevisning

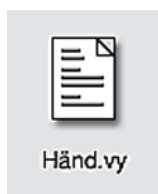

För varje dag som instrumentet har varit påslaget skapas en ny protokollfil. Öppna denna fil genom att välja filen **DailyRunLog** i händelsevyn (→ "Bild 33").

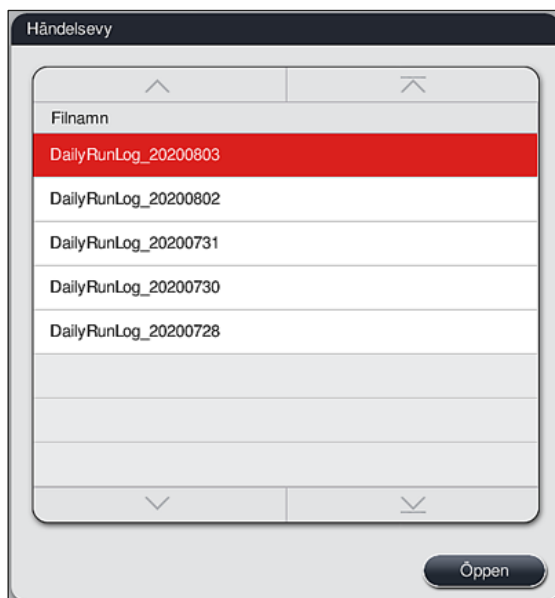


Bild 33

- I **händelsevyn** kan du välja en händelselogg från en lista med tillgängliga loggar och öppna den genom att trycka på knappen **Öppna**.

**Obs!**

Filnamnet kompletteras med datumet då filen skapades i ISO format, vilket gör det lättare att organisera filerna. Filen skapas på det språk som är inställt.

- Alla händelseposter börjar med en tidsstämpel (→ "Bild 34-1"), som visar det datum och klockslag då posten skapades.
- Namnlisterna i händelsevisningen visar också serienumret (→ "Bild 34-2") och den aktuella installerade mjukvaruversionen (→ "Bild 34-3") för HistoCore SPECTRA ST.
- Du kan bläddra uppåt och nedåt i listan och loggfilen med hjälp av piltangenterna (→ "Bild 34-4"). Genom att trycka på den vänstra knappen kan du bläddra genom händelsevisningen sida för sida. Om du trycker på den högra knappen bläddrar du till början eller slutet av händelsevisningen.

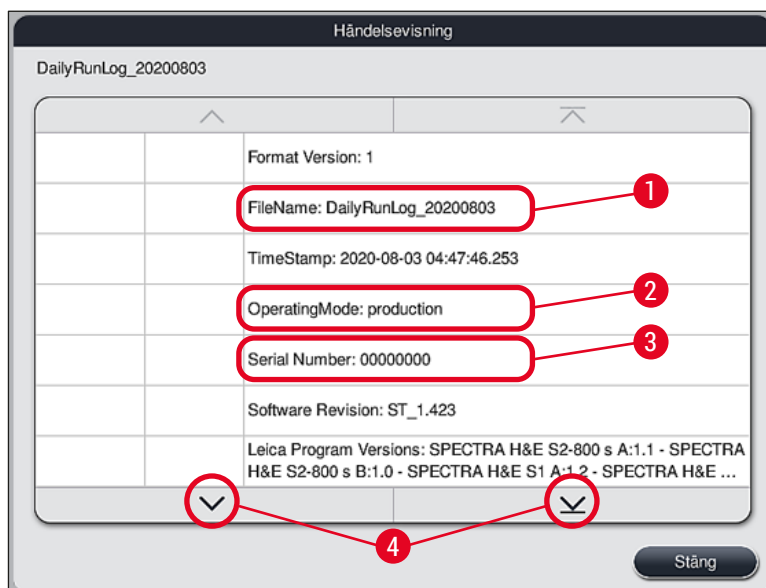


Bild 34

Inmatningarna i **Händelsevyn** får olika färgmarkeringar för att göra det enkelt för användaren att snabbt identifiera viktiga meddelanden. När man klickar på en post i listan visas det aktuella meddelandet på skärmen.

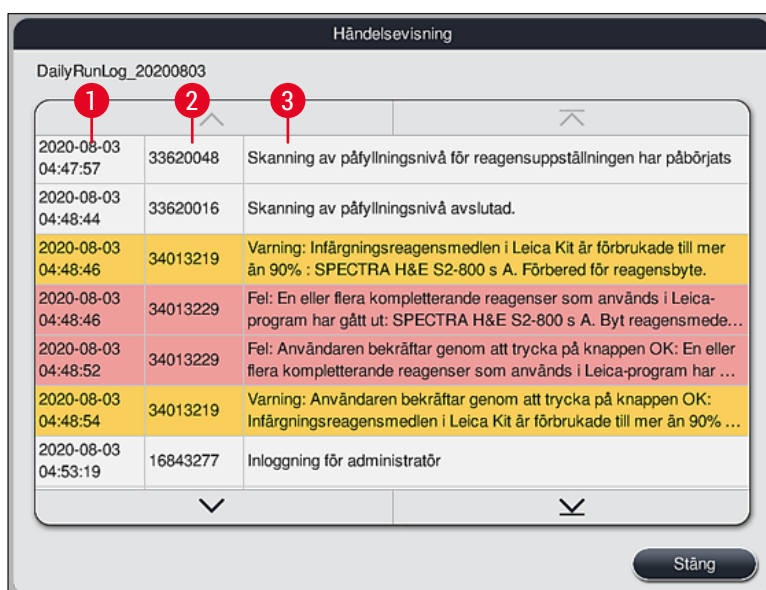


Bild 35

- 1 Tidsstämpel
- 2 Händelse-ID
- 3 Meddelande

Färg: Grå

Indikerar en händelse eller information

Färg: Orange

Indikerar ett varningsmeddelande

Färg: Röd

Indikerar ett felmeddelande

5.8 Reagenslista



Öppna reagenslistan genom att trycka på knappen här bredvid. Listan visar alla definierade reagenser i alfabetisk ordning.

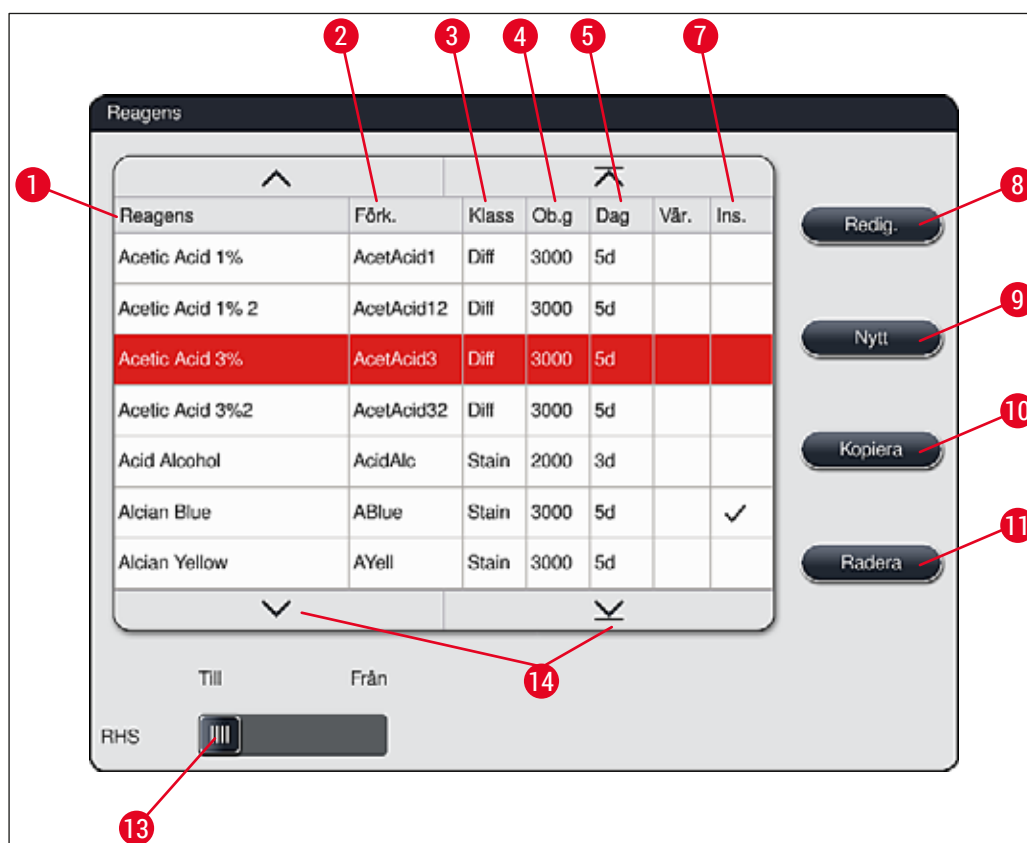


Bild 36

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Reagensnamn | 8 | Redigera vald reagens |
| 2 | Reagensnamnets förkortning | 9 | Skapa en ny reagens |
| 3 | Processklass | 10 | Kopiera vald reagens |
| 4 | Maximalt antal objektglas | 11 | Radera vald reagens |
| 5 | Maximal användningstid | | |
| 7 | Mellanlägg för specialinfärgning ja/nej | 13 | Aktivera/inaktivera RHS |
| | | 14 | Med hjälp av piltangenterna kan du bläddra genom reagenslistan |

**Obs!**

- När instrumentet installeras innehåller reagenslistan endast reagenser från de förinstallerade Leica-programmen och fyra fördefinierade utmatningsreagenser (→ Sida 67 – 5.9.5 Skapa eller kopiera ett nytt infärgningsprogram).
- Vid behov kan ytterligare reagenser läggas till i reagenslistan eller deras egenskaper ändras.
- För att skapa eller redigera en reagens måste läget "Arbetsledare" användas. I läget **Användare** är det endast möjligt att visa reagensdata.
- Reagenser som har integrerats i reagensuppställningen i aktiva program kan inte raderas från reagenslistan.

**Varning**

- **RHS**-skjutreglage: **Till – Från** (→ "Bild 36-13") gör det möjligt att slå av och på reagenshanteringssystemet = **RHS** (→ Sida 89 – 6.3 Reagenshanteringssystem (RHS)). Systemet styr övervakningen av reagensförbrukningen. Vi rekommenderar att **RHS** alltid är aktiverat och att instruktionerna för att ersätta en reagens följs. Det går inte att inaktivera reagenshanteringen för reagenser i Leica-infärgningskit.
- Om de föreskrivna intervallen inte följs kan infärgningskvaliteten påverkas negativt. **RHS** fungerar tillförlitligt endast om användaren har lagt in data korrekt i förväg.
- Tillverkaren tar inget ansvar för infärgningsresultaten om reagensdata har matats in felaktigt.
- **RHS**-data för de reagenser som är validerade av Leica samt deras beteckningar kan inte redigeras av användaren.

Skapa en ny reagens eller kopiera en reagens**Obs!**

- En ny reagens kan skapas med knappen **Nytt** (→ "Bild 36-9") eller **Kopiera** (→ "Bild 36-10").
- För att skapa, kopiera eller redigera en reagens måste arbetsledarläget användas. I läget **Användare** är det endast möjligt att visa reagensdata.

- För att lägga till en ny reagens i reagenslistan trycker du på knappen **Nytt** (→ "Bild 36-9").
- Ett inmatningsfönster öppnas (→ "Bild 39") där du kan skapa den nya reagensen.

Bild 39

Följande parametrar kan anges:

- Reagensnamn:**
- Tryck på knappen **Reagensnamn** (→ "Bild 39-1") och använd knappsatsen på skärmen för att ange ett unikt reagensnamn som inte har använts tidigare. Du kan använda upp till 30 tecken (inklusive mellanslag).
- Förkortning:**
- Tryck på knappen **Förkortning** (→ "Bild 39-2") och använd knappsatsen på skärmen för att ange en unik förkortning för reagensen (max. 10 tecken inklusive blanksteg).
- Max objektglas:**
- Hjulet (→ "Bild 39-3") används för att konfigurera det maximala antalet objektglas som kan bearbetas med den här reagensen innan ett reagensbyte begärs. Med hjälp av hjulet kan värden från 1 till 3999 väljas.
- Max dagar:**
- Ställ in det maximala antalet dagar (→ "Bild 39-4") som reagensen får befinna sig i instrumentet genom att vrida på hjulet. Värden från 1 till 99 kan anges.
- Mellanlägg:**
- Om en reagenskyvett är utrustad med ett mellanlägg för specialinfärgning (→ Sida 86 – 6.2.1 Förbereda och hantera reagenskyvetter) för att möjliggöra en mindre reagensvolym, går det endast att använda ett rack för 5 objektglas i kyvetten. För att göra detta måste du dra skjutreglaget till **Ja** (→ "Bild 39-5").
 - Användning av ett rack för 30 objektglas i den här kyvetten är nu inaktiverad.

**Varning**

Om du vill använda mellanlägget för specialinfärgning i en eller flera reagenskyvetter måste du dra skjutreglaget till läget **Ja**. Om skjutreglaget inte är korrekt inställt för den berörda reagenskyvetten kan det leda till att ett rack för 30 objektglas används i kyvetten, vilket orsakar allvarliga fel på utrustningen och möjlig förlust av preparat.

Processklass:

- Reagenserna måste tilldelas till processklasser (→ "Bild 39-6") (→ Sida 59 – 5.8.3 Processklasser) eftersom detta, tillsammans med prioritering av program, är avgörande för den automatiska beräkningen av de enskilda positionerna i reagensuppställningen (→ Sida 73 – 5.9.8 Prioritera program för att skapa reagensuppställningen).
- Spara inmatningarna med knappen **Spara** (→ "Bild 39-7") eller stäng inmatningsfönstret med knappen **Avbryt** (→ "Bild 39-8") utan att spara ändringarna.

**Obs!**

Det går inte längre att ändra processklassen i efterhand när man har sparat första gången. Reagensen kan bara raderas och skapas på nytt, eller kopieras och sedan ändras.

5.8.1 Kopiera en reagens**Obs!**

Om en reagens med olika parametrar används i HistoCore SPECTRA ST kan en befintlig reagens kopieras.

- Markera den reagens som ska kopieras i reagenslistan (→ "Bild 36") genom att trycka lätt på den. Tryck sedan på knappen **Kopiera** (→ "Bild 36-10").
- Ett inmatningsfönster öppnas (→ "Bild 39") där du kan skapa den nya reagensen.
- Använd det föreslagna reagensnamnet eller skriv över det med ett nytt reagensnamn.
- Den föreslagna förkortningen kan användas eller skrivas över med en ny förkortning.
- Ändra parametrarna för reagenserna vid behov på motsvarande sätt eller använd de befintliga.
- Spara inmatningarna med knappen **Spara** (→ "Bild 39-7") eller stäng inmatningsfönstret med knappen **Avbryt** (→ "Bild 39-8") utan att spara ändringarna.

5.8.2 Ändra RHS-data för en reagens**Obs!**

Om du ska göra ändringar i **RHS-data** (**Max objektglas** och/eller **Max dagar**) måste du utföra följande steg så att ändrade inställningar visas korrekt i stationsinformationen (→ Sida 95 – Bild 76).

- Markera den reagens som ska ändras i reagenslistan (→ "Bild 36") genom att trycka lätt på den. Tryck sedan på knappen **Redigera** (→ "Bild 36-8").
- Använd hjulen för att ange nya värden för **Max objektglas** (→ "Bild 39-3") och/eller **Max dagar** (→ "Bild 39-4") och bekräfta ändringarna med **Spara**.

- Observera efterföljande informationsmeddelande och bekräfta med **OK**.
- Öppna sedan reagensuppställningen och tryck på den tillhörande reagensstationen för att välja den.
- I stationsinformationen som visas, tryck på knappen **Uppdatera reagens** (→ "Bild 76-10").
- Visningen av stationsinformationen stängs, **RHS**-data har sparats.

5.8.3 Processklasser



Varning

Processklasser måste tilldelas korrekt. Annars finns det en risk för fördröjda arbetsflöden i infärkningsprocesserna samt avvikande eller bristfälliga infärkningsresultat.

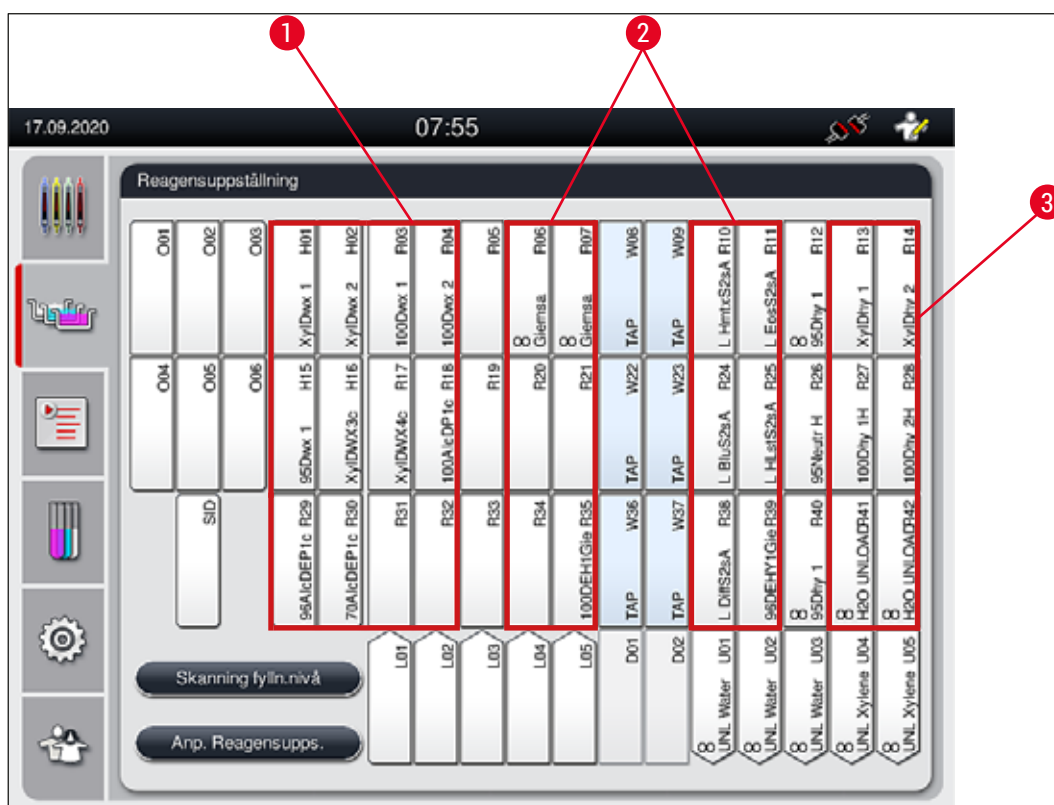


Bild 40

- 1 Den föredragna zonen för avväxningsreagenser är vänster sida av reagensuppställningen.
- 2 Den föredragna zonen för infärkningslösningar eller differentieringslösningar är de två raderna till vänster och höger om sköljvattenstationerna.
- 3 Den föredragna zonen för dehydratiserande reagenser är höger sida av reagensuppställningen.



Obs!

Det går inte att programmera två på varandra följande sköljvattensteg (sköljvattensteg till destillerat vatten eller omvänt). Om denna ordningsföljd ska gälla för programstegen måste ett av stegen definieras som reagens med processklassstilldelning (t.ex. neutralisering).

Processklass	Beskrivning	Exempel på reagenser
Avvaxning (Dewaxing)	Lösningsmedel som avlägsnar paraffinet eller som hör till den efterföljande sjunkande alkoholserien, i början av ett infärgningsprogram.	- Xylen - Xylensubstitut - Sjunkande alkoholserie: 100 %, 95 %, 70 % alkohol
Neutraliserande (Neutralising)	- Reagenser som har ingen eller endast liten påverkan på färgbeläggningen respektive färgutvecklingen och som är närmast pH-neutrala. - Exempel: Steg med destillerat vatten före ett infärgningssteg.	- Destillerat (avjoniserat)/ färskvatten (inte i kranvattenstationer!) - Thinner med destillerat vatten - Vattenhaltiga alkohollösningar (t.ex. 70 % etanol)
Infärgning (Staining)	- Infärgningslösningar - Betning - Oxidationsmedel (t.ex. PAS-infärgningens perjodsyra)	- Alla infärgningslösningar - Betning och oxidationsmedel
Differentiering (Differentiating)	- Reagenser som avlägsnar överflödigt färg från produkten. - Reagenser som är nödvändiga för färgutvecklingen eller ett färgomslag.	- HCL-lösning (alkohol- eller vattenhaltig) - Ättiksyra - Ammoniakvatten - Scott's Tap water - Bluing Solution - Blue Buffer - Litiumkarbonat - Alkoholer (olika koncentrationer)
Dehydratiserande (Dehydrating)	- Reagenser i den stigande alkoholserien, i slutet av ett infärgningsprogram. - Efterföljande steg med lösningsmedel (xylen eller xylensubstitut) i slutet av ett infärgningsprogram, för förberedelse av täckglasappliceringen.	Dehydrering: - Stigande alkoholserie: 70 %, 95 %, 100 % alkohol Förberedelse av täckglasappliceringen: - Xylen - Xylensubstitut
Utmatare (Unloader)	Reagens som särskilt har definierats av användaren som ett sista programsteg och som kan tilldelas en utmatningsstation (t.ex. för ett xylensubstitut och/eller ytterligare en alkohol etc.). Det rekommenderas att använda UNL i reagensnamnet och förkortningen för att göra den enklare att identifiera.	Fördefinierade i reagenslistan: - Alkohol (UNL Alcohol) - Xylen (UNL Xylene) - Vatten (UNL Water) - Tom (UNL Empty) Andra användardefinierade: - Xylensubstitut - och andra reagenser
Ingen klass (no class)	Reagenser som inte kräver någon särskild tilldelning i reagensupställningen	

**Varning**

Observera följande när du förbereder täckglasappliceringen:

- Det lösningsmedel som används i slutet av programmet och i den följande bearbetningen måste vara kompatibelt med monteringsmedlet.

**Obs!**

Det är viktigt att tilldelningen till processklasserna är korrekt för att kunna beräkna en optimal reagensuppställning och för att undvika långa transportsträckor och -tider.

Följande grundläggande riktlinjer för att skapa en reagensuppställning automatiskt bör följas:

- Överföringen från det vänstra till det högra kyvettfältet ska om möjligt ske via en sköljvattenstation.
- Program som inte innehåller något steg med en sköljvattenstation använder sig av den torra överföringsstationen för denna överföring.
- Infärgningsreagenser som kräver ett efterföljande sköljvattensteg ska placeras nära sköljvattenkyvetterna (→ "Bild 40").
- Reagenser som har tilldelats **Ingen klass** som processklass kan placeras i vilken position som helst när reagensuppställningen skapas automatiskt.
- I stället för tilldelningen **Ingen klass** rekommenderar vi att dessa reagenser tilldelas till processklassen **Different.** eller **Neutralis.** så att angränsande stationer i reagensuppställningen kan tas med i beräkningen för programstegsserier.

5.9 Infärgningsprogram



Listan över infärningsprogram som är installerade på HistoCore SPECTRA ST kan öppnas med hjälp av knappen **Program**.

Det finns två olika typer av infärningsprogram:

- Förinstallerade Leica-infärningsprogram (→ Sida 64 – 5.9.2 Leica-infärningsprogram (förinstallerade))
- Användardefinierade infärningsprogram (→ Sida 67 – 5.9.4 Användardefinierade infärningsprogram)



Bild 41

- 1 En bock i den här kolumnen innebär att programmet tas med i den aktuella reagensuppställningen.
- 2 Tilldelad programfärg
- 3 Programförkortning
- 4 Programnamn
- 5 Förinstallerat Leica-program
- 6 Redigera program
- 7 Skapa nytt program
- 8 Kopiera valt program
- 9 Radera valt program
- 10 Tilldela valt program en färg
- 11 Definiera reagensuppställning

5.9.1 Tilldela ett infärgningsprogram en rackhandtagsfärg

**Obs!**

Varje program måste tilldelas en rackhandtagsfärg.
För att tilldela rackhandtagsfärger till program krävs användarläget **Arbetsledare**.

- För att tilldela en rackhandtagsfärg till ett program trycker du på motsvarande program i programlistan (→ "Bild 41") för att markera det.
- Om du trycker på knappen "Färg" (→ "Bild 41-10") visas ett urvalsfält (→ "Bild 42") där du kan tilldela det valda programmet en rackhandtagsfärg.



Bild 42

**Obs!**

Alla tillgängliga färger visas i (→ "Bild 42"). Om det står en förkortning i färgfältet har ett program redan tilldelats den färgen.

Om en redan tilldelad färg väljs visas en dialogruta med en säkerhetsfråga om den befintliga tilldelningen ska upphävas. Detta kan bekräftas med **OK** eller avbrytas med **Avbryt**.

- Välj en färg som ännu inte har tilldelats genom att trycka på den.
- Med **Spara** tilldelar du färgen och stänger dialogrutan.
- Med **Avbryt** stängs dialogrutan utan att ändringarna tillämpas.

**Obs!**

Om det inte finns tillräckligt många tillgängliga rackhandtag i en färg kan ett rackhandtag i vitt, den så kallade **JOKERFÄRGEN**, användas.

När du lägger in ett rack med ett vitt handtag öppnas ett programvalsfönster där ett färgprogram som är aktiverat i reagensuppställningen måste tilldelas till det vita handtaget (endast för detta program).

Om överföringsstationen är definierad som den sista stationen i det tilldelade programmet måste det vita racket också tilldelas en lämplig parameteruppsättning för täckglasappliceringen i HistoCore SPECTRA CV. Användaren uppmanas att göra så i ett parametervalsfönster.

När det valda programmet är avslutat slocknar denna tilldelning igen.

5.9.2 Leica-infärgningsprogram (förinstallerade)

Beteckningar på reagenskiten



Obs!

I följande avsnitt förenklas HistoCore SPECTRA ST-infärgningssystemen och programmen som tillverkas av Leica i enlighet med användargränssnittet och namnges med beteckningen på Leica Reagent Kit och Leica-infärgningsprogrammen.

Nya Leica-infärgningsprogram kan beställas från den ansvariga Leica-försäljningsavdelningen.



Varning

Bruksanvisningen som medföljer Leica Reagent Kit innehåller viktig information om förinställda värden, loggar och nödvändiga tillägg till reagensuppställningen som måste följas noggrant. Följ bruksanvisningen.

För att importera nya Leica-infärgningsprogram följer du instruktionerna i kapitel (→ Sida 48 – 5.7.7 Datahantering). Nya Leica-program läggs till i den befintliga programlistan (→ Sida 62 – 5.9 Infärgningsprogram). Ingen data raderas.

- Leica-infärgningsprogram förinstalleras på fabriken, där deras funktion och infärgningsegenskaper testas. Programmen garanterar en jämn infärgningskvalitet för ett angivet antal objektglas.
- Leica-infärgningsprogram markeras med ett kursivt Leica-*L* (→ "Bild 41-5") i kolumnen längst till höger.

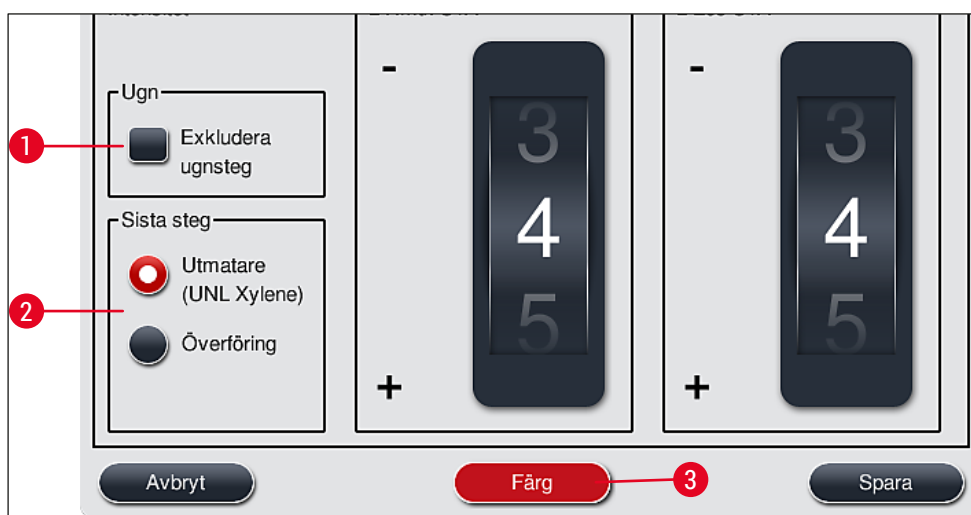


Bild 43

**Obs!**

- Med Leica-infärgningsprogram måste det specifika Leica Reagent Kit användas.
- Leica-infärgningsprogram kan inte kopieras, vilket innebär att ett Leica-infärgningsprogram endast kan läggas till i programlistan en gång.
- De enskilda programstegen i Leica-infärgningsprogrammet kan inte visas, redigeras, kopieras eller raderas.
- En rackhandtagsfärg (→ "Bild 43-3") kan tilldelas till Leica-infärgningsprogrammet.
- Om Leica-infärgningsprogrammet tillåter det kan ugnssteget aktiveras eller inaktiveras i Arbetsledarläget (→ "Bild 43-1") och utmatningsstation eller överföringsstation (→ "Bild 43-2") kan definieras som sista steg. Överföringsstation visas endast om HistoCore SPECTRA ST används med en HistoCore SPECTRA CV som arbetsstation.
- Reagenser (t.ex. xylen, alkohol) som används i ett Leica-infärgningsprogram kan inte raderas.

**Varning**

- Om ett steg för avlägsnande av paraffin inte är det första steget i Leica-infärgningsprogrammet får ugnssteget (→ "Bild 43-1") (→ "Bild 44-1") inte aktiveras, eftersom det kan leda till att preparaten förstörs!
- Den fastställda ugnstemperaturen för Leica-infärgningsprogrammen används för användardefinierade infärgningsprogram och kan inte anpassas individuellt.

Flera installationer och användning av Leica-infärgningsprogram**Obs!**

Vissa av Leica-infärgningsprogrammen kan användas parallellt med olika inställningar (infärgningsintensitet, ugnssteg) (→ Sida 65 – 5.9.3 Anpassa Leica-H&E-färgningsprogram). De här programmen har förinstallerats två gånger i programlistan (→ "Bild 41"). Förkortningarna för dessa dubbelt förinstallerade hematoxylin-eosin-infärgningsprogram från Leica är S1A och S1B, eller S2A och S2B. Detta för att lättare kunna skilja dem åt. Dessa program innehåller exakt samma programsteg. Om två identiska program integreras i reagensuppställningen måste även två identiska Leica-infärgningspaket skannas och fyllas på.

5.9.3 Anpassa Leica-H&E-färgningsprogram**Obs!**

- Med Leica-H&E-färgningsprogrammet kan infärgningsintensiteten för hematoxylin och eosin justeras i Arbetsledarläget. Andra Leica-infärgningsprogram tillåter inga justeringar av infärgningsintensiteten.
- Om Leica-infärgningsprogrammet tillåter det kan ugnssteget aktiveras eller inaktiveras (→ "Bild 44-1").
- För Leica-infärgningsprogram kan överföring till en ansluten automatisk täckglasapplikator HistoCore SPECTRA CV väljas som sista steg om man väljer Överföringsstation (→ "Bild 44-4") eller Utmatare och överför det redan infärgade racket till utmatningsfacket (→ "Bild 44-3").
- Justeringar och ändringar av Leica-infärgningsprogram och användardefinierade program kan endast konfigureras om inga infärgningsprocesser är aktiva och alla rack har avlägsnats från instrumentet.



Bild 44

**Varning**

När användaren har justerat infärgningsintensiteten måste infärgningsresultaten kontrolleras med ett kontrollobjektglas med representativa vävnadsprover innan inställningarna används för att utföra kliniska diagnoser av patientpreparat.

Välj Leica-programmet i programlistan och tryck på **Redigera** (→ "Bild 41-6"). En dialogruta öppnas där du kan konfigurera inställningarna.

- Ställ in värdena för infärgningsintensitet genom att vrida på hjulen (→ "Bild 44-2"). Lägre numeriska värden ger en ljusare infärgningsintensitet; högre numeriska värden ger en mörkare infärgningsintensitet.
- En handtagsfärg måste tilldelas till programmet (→ Sida 63 – 5.9.1 Tilldela ett infärgningsprogram en rackhandtagsfärg).
- Använd **Spara** för att spara inställningarna och stänga dialogrutan.
- Använd **Avbryt** för att stänga dialogrutan utan att spara ändringarna.

5.9.4 Användardefinierade infärgningsprogram

**Varning**

- Leica kan varken kontrollera eller ansvara för användardefinierade program.
- Användaren måste testa dessa infärgningsprogram i labbet med de olika reagenser som används och de inställda temperaturerna. För detta ändamål måste infärgningsresultatet först kontrolleras med ett provförlopp (testsnitt) innan programmet används på patientprover för klinisk diagnostik.

**Obs!**

Ett nytt program kan skapas med knapparna **Nytt** (→ "Bild 45-1") och **Kopiera** (→ "Bild 45-2"). För att skapa, kopiera eller redigera ett program måste läget "Arbetsledare" användas. I läget **Användare** kan man endast visa programstegen.

5.9.5 Skapa eller kopiera ett nytt infärgningsprogram

- Tryck på **Nytt** (→ "Bild 45-1") i listvyn för program.



Bild 45

- Ett fönster för ett nytt program öppnas (→ "Bild 46").

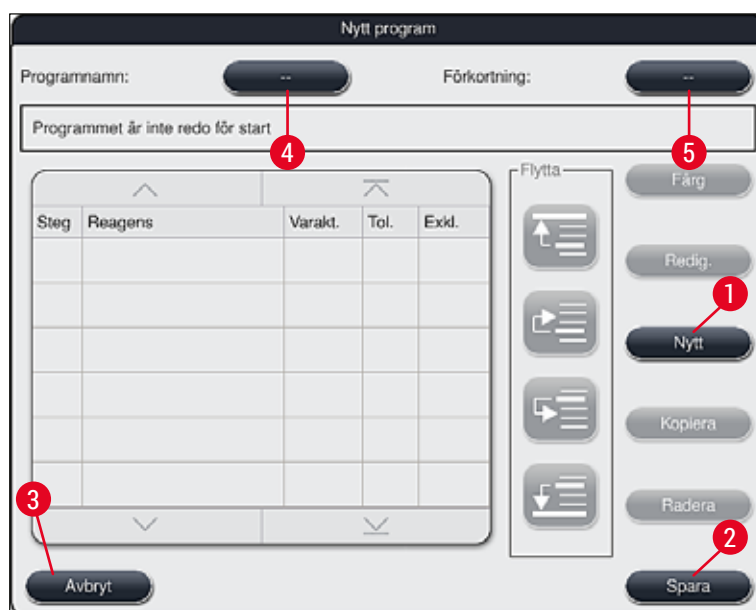


Bild 46

Upptill i detta fönster är två tomma tangenter avbildade som är avsedda för programnamnet och dess förkortning.

- Tryck på knappen -- bredvid **Programnamn**. beteckning (→ "Bild 46-4"). Ett inmatningsfönster med knappsats visas.
- Ange programnamnet och bekräfta namnet med **OK**.

Gör på samma sätt som ovan för **Förkortning** (→ "Bild 46-5").



Obs!

- För att skapa ett nytt infärgningsprogram lägger du till flera programsteg efter varandra till programmet.
- Obs! Användardefinierade program kan inte sparas med beteckningen **SPECTRA** som programnamn. Ett informationsmeddelande informerar användaren om detta om hen försöker spara. Det går att spara först när ett annat programnamn har angetts.

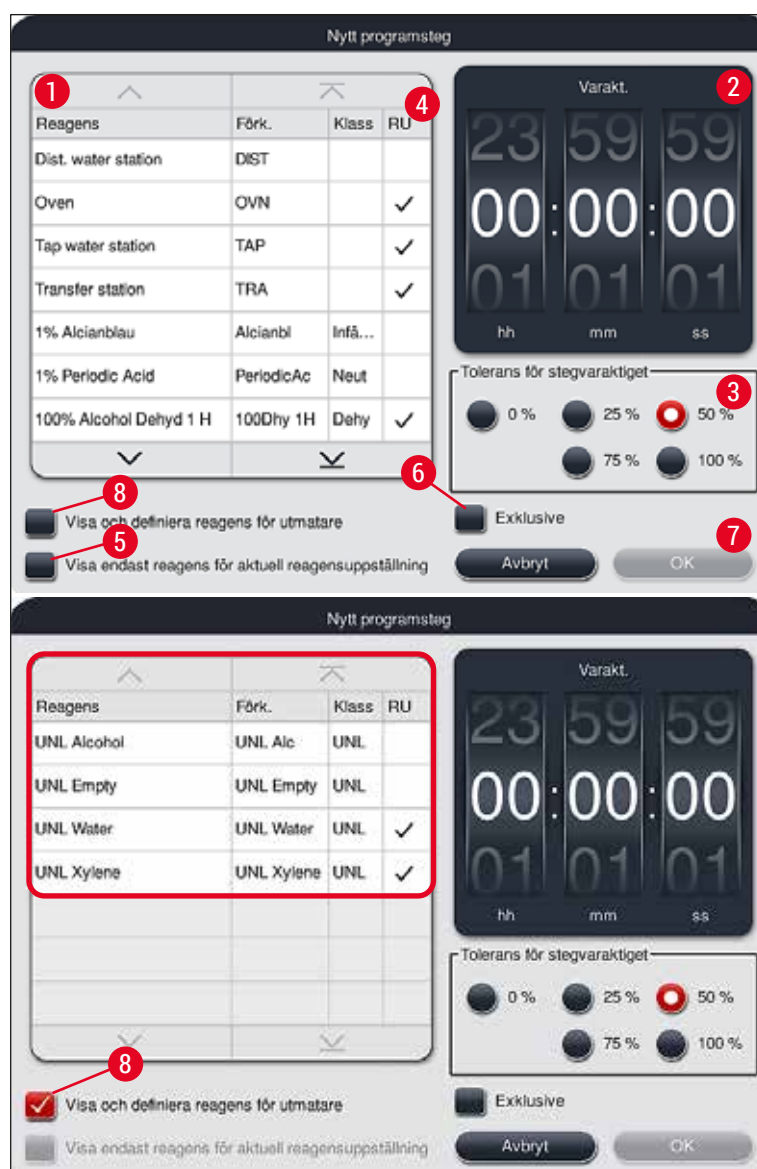


Bild 47

- När ett nytt program har skapats trycker du på knappen **Nytt** (→ "Bild 46-1").
- Ett fönster öppnas där du kan ange programsteget (→ "Bild 47").
- De reagenser som redan har definierats av användaren visas i en lista till vänster (→ "Bild 47-1"). Om du väljer en reagens markeras den.
- Vrid på hjulen (→ "Bild 47-2") till höger för att ange reaktionstiden (hh/mm/ss) för preparaten i reagensen.
- Det giltiga inställningsområdet sträcker sig från 1 sek. upp till 23 tim. 59 min. och 59 sek.
- Här konfigureras den tillåtna **Toleransen** (→ "Bild 47-3") för steget. Om ett exakt programsteg krävs som inte tillåter någon tidsmässig utökning av den angivna tiden måste toleransen ställas in på 0 %. Toleransen kan väljas i steg om 25 % upp till ett maximalt överskridande med 100 %, dvs. instrumentet kan vid behov låta steget ta dubbelt så lång tid som den angivna tiden.

**Obs!**

De enskilda programstegens varaktighet består av de programmerade stegtiderna plus de inställda toleranserna. Om toleranser > 0 % ställs in för ett program kan återstående stationstider och programmets preliminära återstående tid komma att överskridas.

Kopiera ett program**Obs!**

Om ett befintligt program med andra parametrar ska användas kan programmet kopieras.

- Markera det program som ska kopieras i listvyn (→ "Bild 45") genom att trycka lätt på det. Tryck sedan på **Kopiera** (→ "Bild 45-2").
- Ett inmatningsfönster öppnas (→ "Bild 46") där du kan skapa det nya programmet.
- Använd det föreslagna programnamnet eller skriv över det med ett nytt programnamn.
- Ange därefter en förkortning.
- Ändra/redigera de enskilda stegen eller lägg till nya programsteg efter behov (→ "Bild 46-1") (→ Sida 70 – 5.9.6 Infoga eller kopiera ett nytt programsteg).
- Spara inmatningarna med knappen **Spara** (→ "Bild 46-2") eller stäng inmatningsfönstret med knappen **Avbryt** (→ "Bild 46-3") utan att spara ändringarna.

5.9.6 Infoga eller kopiera ett nytt programsteg**Infoga ett nytt programsteg****Obs!**

En hög tidstoleransinställning rekommenderas om det inte förväntas leda till några negativa effekter på infärgningsresultatet. Det innebär nämligen att instrumentet ges större utrymme att tidsmässigt stämma av steg i flera program som pågår samtidigt.

- Om det finns en bock i kolumnen **RU** (→ "Bild 47-4") innebär det att reagensen redan är integrerad i reagensuppställningen.
- För att endast visa reagenser som redan används aktivt i reagensuppställningen markerar du radioknappen **Visa endast reagens för aktuell reagensuppställning** (→ "Bild 47-5").
- För att endast visa reagenser för utmatningsfack markerar du radioknappen **Visa och definiera reagens för utmatare** (→ "Bild 47-8").
- Om kryssrutan **Exklusiv** (→ "Bild 47-6") är markerad kan den valda reagensen endast användas för det skapade programmet och inte i andra program.
- Programstegets inmatning slutförs med **OK** (→ "Bild 47-7").
- Allt efter behov kan ytterligare programsteg läggas till på samma sätt tills samtliga infärgningsprocessteg i programmet är avbildade.

**Obs!**

Ett program måste alltid avslutas med ett sista målstationssteg. Som sista steg måste utmatningsfacket eller, om HistoCore SPECTRA ST är permanent ansluten som arbetsstation med en HistoCore SPECTRA CV, överföringsstationen väljas.

Ett informationsmeddelande (→ "Bild 48") indikerar att det inte går att spara programmet utan att ange målstationen som det sista steget.

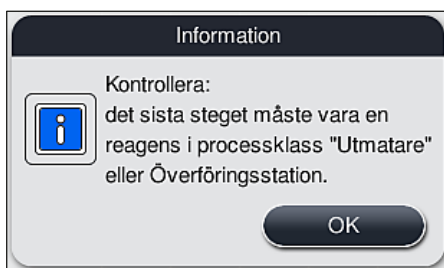


Bild 48

Kopiera ett programsteg**Obs!**

När ett nytt program skapas eller ett befintligt ändras kan ett programsteg med redan inställda parametrar kopieras och anpassas, om reagensen förekommer mer än en gång i reagenslistan.

- Markera respektive programsteg genom att trycka lätt på det och sedan trycka på knappen **Kopiera** (→ "Bild 49-5").
- Fönstret **Redigera program** (→ "Bild 49") öppnas.
- Om en reagens har valts som endast förekommer en gång informerar ett informationsmeddelande användaren om detta. I detta fall måste en annan reagens väljas för programsteget.
- Parametrarna (Tolerans, Varaktighet och Exklusiv) för det ursprungligen valda programsteget bibehålls.
- Ändra vid behov parametrarna för programsteget på motsvarande sätt eller använd de befintliga och tryck på knappen **OK**.
- Programsteget placeras i slutet av programmet.
- Sortera om programsteget enligt beskrivningen i (→ Sida 71 – 5.9.7 Sortera om programsteg).

5.9.7 Sortera om programsteg

- När ett programsteg väljs blir det rödmarkerat. Nu är **Flytta**-knapparna (→ "Bild 49-1") (→ "Bild 49-2") (→ "Bild 49-3") (→ "Bild 49-4") aktiva.

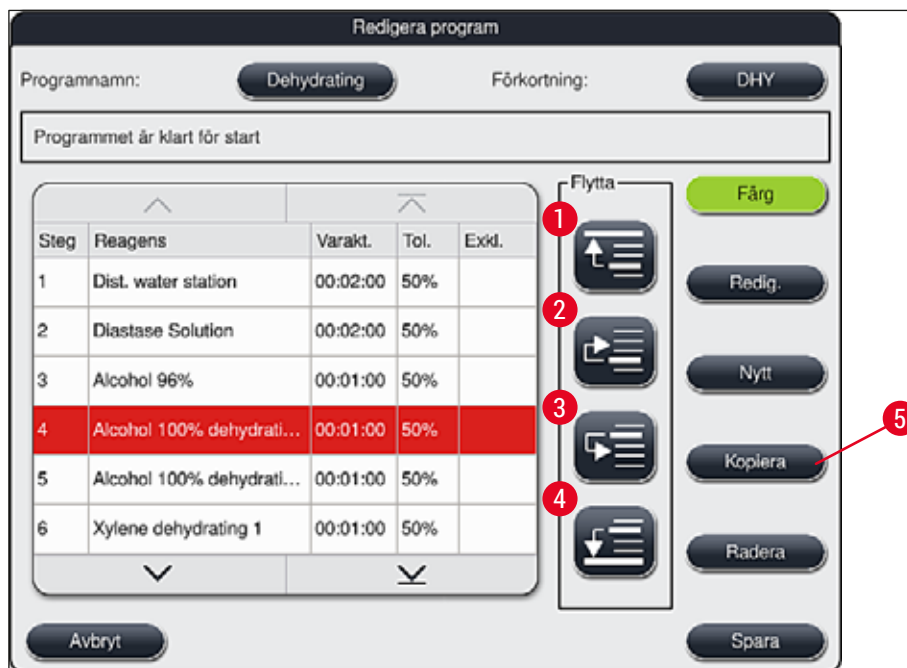


Bild 49

- 1 Tryck för att flytta det valda programsteget till första raden.
- 2 Tryck för att flytta det valda programsteget en rad uppåt.
- 3 Tryck för att flytta det valda programsteget en rad nedåt.
- 4 Tryck för att flytta det valda programsteget till sista raden.



Varning

Om ett ugnssteg används som första programsteg får det under inga omständigheter finnas något lättantändligt lösningsmedel i laddningsfackets laddningsstation.

Det kan nämligen medföra brand i ugnen och leda till brännskador på användaren, förlust av prover och skador på instrument och utrustning.

- Ändringarna kan sparas med knappen **Spara** (→ "Bild 49"). Om man trycker på knappen **Avbryt** raderas ändringarna.

5.9.8 Prioritera program för att skapa reagensuppställningen



Bild 50

När alla önskade infärgningsprogram har matats in måste reagensuppställningen genereras. För att göra detta går du tillväga på följande sätt:

- I det första steget anger **arbetsledaren** vilka program som ska inkluderas i reagensuppställningen. Programmen aktiveras med hjälp av radioknapparna (→ "Bild 50-1").
- Programmets position avgör dess prioritet för integreringen i reagensuppställningen.

**Obs!****Prioritet:**

- Det är bara positioner för användardefinierade program som kan flyttas. Leica-infärgningsprogram står alltid på de översta positionerna i reagenslistan.
- De användardefinierade programmen med låga positionsnummer är lättare att inkludera än program med höga positionsnummer när reagensuppställningen skapas.
- Det rekommenderas att användardefinierade program med hög provgenomströmning placeras i början av programlistan, i anslutning till Leica-infärgningsprogrammen.

Om ett infärgningsprogram ska tilldelas en högre eller lägre prioritet markerar du programmet i listan och flyttar det högre upp eller längre ner i listan med hjälp av **Flytta**-knapparna:

- Programmet flyttas till högst upp i listan (→ "Bild 50-2")
- Programmet flyttas en rad uppåt (→ "Bild 50-3")
- Programmet flyttas en rad nedåt (→ "Bild 50-4")
- Programmet flyttas till sist i listan (→ "Bild 50-5")

- Reagensuppställningen måste skapas om utifrån den nya prioriteringsordningen (→ Sida 74 – 5.9.9 Skapa reagensuppställningen).

5.9.9 Skapa reagensuppställningen



Obs!

Placeringen av reagensstationerna i instrumentet beräknas med hjälp av de prioriterade infärgningsprogrammen (→ Sida 73 – 5.9.8 Prioritera program för att skapa reagensuppställningen).

I samband med det tas hänsyn bland annat till att

- Leica-infärgningsprogram inkluderas först,
- infärgnings- och differentieringslösningar placeras så nära sköljvattenkyvetterna som möjligt,
- programprioriteringen och processklasstilldelningen beaktas,
- sekventiella processreagenser måste placeras i närheten av varandra.

- Välj de program som ska ingå i reagensuppställningen genom att trycka på knappen **Definiera Reagensuppställning** (→ "Bild 45-3").
- Markera och ange prioritet för respektive program. Tryck sedan på knappen **Utför Reagensuppställning** (→ "Bild 50-6") eller på knappen **Avbryt** för att återgå till val av program.



Varning

Läs det informationsmeddelande (→ "Bild 51") som visas efter det att knappen **Definiera Reagensuppställning** har tryckts in. Tryck på **Fortsätt** för att visa resultatet av beräkningen i reagensuppställningen.

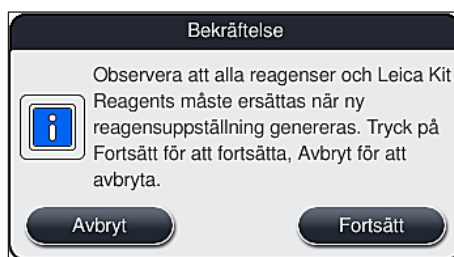


Bild 51



Obs!

- Om fler program har valts än vad som kan integreras i reagensuppställningen informeras användaren i fönstret **Resultat av reagensuppställninggenerering** (→ "Bild 52"). Program som har integrerats markeras med en bock i kolumnen **Redo** (→ "Bild 52-1").
- För program som inte kan integreras anges orsaken (→ "Bild 52-2") i kolumnen **Ej redo, orsak** (→ "Bild 52-3").
- Observera att listan måste kontrolleras ända till slutet.

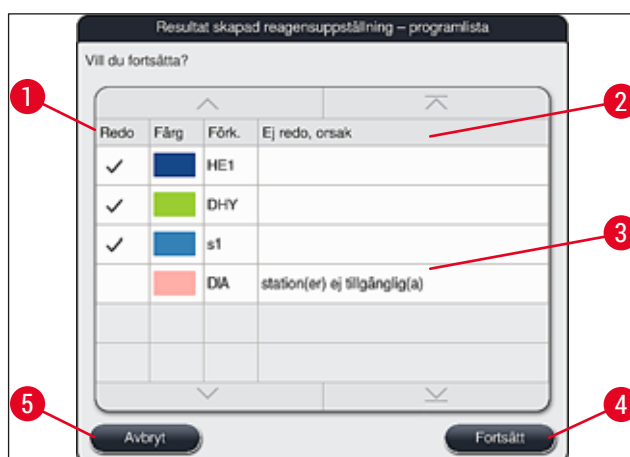


Bild 52

- Tryck på knappen **Fortsätt** (→ "Bild 52-4") för att gå vidare eller på knappen **Avbryt** (→ "Bild 52-5") för att återgå till val av program (→ "Bild 50").

**Varning**

Även bruksanvisningen som medföljer Leica Reagent Kit måste läsas innan Leica-reagenser skannas!

5.9.10 Fylla på reagenser efter det att reagensuppställningen har skapats

**Obs!**

- Skapa reagensuppställningen och fortsätt enligt beskrivningen (→ Sida 74 – 5.9.9 Skapa reagensuppställningen).
- Om reagensuppställningen som visas ska sparas utan konfigurering av reagenspåfyllning trycker du på knappen **Spara** (→ "Bild 53-3"). Den sparade reagensuppställningen kan sedan öppnas i reagensuppställningsmenyn. Vid behov kan ytterligare justeringar göras i den här menyn (→ Sida 81 – 5.9.11 Anpassa en reagensuppställning). Fyllningen av reagenskyvetten kan också konfigureras så att den sker vid en önskad tidpunkt med hjälp av reagensuppställningsmenyn (→ Sida 90 – 6.4 Stationsinformation).

**Varning**

- Det är obligatoriskt att alla kyvetter, i synnerhet de för utmatningsstationerna, fylls över den lägsta fyllnadsnivån (→ Sida 86 – 6.2.1 Förbereda och hantera reagenskyvetter). Undantaget är utmatningsstationerna, med tilldelningen UNL Empty.
- Om man använder duplicerade utmatningsstationer kan programmet dock vara startklart om endast en station är tillräckligt fylld. Detta kan ha en negativ inverkan på utmatningskapaciteten och leda till störningar av infärgningsprocessen.
- Tillgängligheten för utmatningsstationerna måste kontrolleras efter skanning av påfyllningsnivå och korrigeras vid behov.

- Efter att mjukvaran har beräknat reagensuppställningen med hjälp av de prioriterade programmen visas en översikt över resultaten på skärmen (→ "Bild 53").

**Obs!**

- Om inga Leica-program har integrerats i reagensuppställningen ser skärmen (→ "Bild 53") annorlunda ut än den som visas här. I detta fall kan reagenserna fyllas på enligt beskrivningen (→ Sida 78 – Fylla på reagenser).
- Om Leica-program ska integreras i reagensuppställningen tas minst 2 utmatningsstationer med tilldelningen UNL Xylene i position U04 och U05 med i beräkningen när reagensuppställningen genereras.
- Om Leica-program har integrerats i reagensuppställningen måste reagensen 95 % alkoholdehyd 1 först dupliceras. Den berörda stationen är markerad med en blå ram i reagensuppställningen (→ "Bild 53-1").
- Reagensen 95 % alkoholdehyd 1 som ska dupliceras visas med förkortningen "95Dhy1" i reagensuppställningen.

Resultat av reagensuppställninggenerering

H01	XyDwx 1	H02	XyDwx 2	R03	100Dwx 1	R04	100Dwx 2	R05		R06	Gemsa	R07	Gemsa	W08	TAP	W09	TAP	R10	L HmtS2sA	R11	L HmtS2sA	R12	95Dhy 1	R13	XyDhy 1	R14	XyDhy 2
H15	95Dwx 1	H16	XyDwx3c	R17	XyDwx4c	R18	100AcDP1c	R19		R20	Gemsa	R21	Gemsa	W22	TAP	W23	TAP	R24	L BUSZsA	R25	L HmtS2sA	R26	95Nauf H	R27	100Dhy 1H	R28	100Dhy 2H
R29	96AcDEP1c	R30	70AcDEP1c	R31		R32		R33		R34		R35		W36	TAP	W37	TAP	R38	L DfS2sA	R39	96DEHY1Gle	R40	100DEHY1Gle	R41	H2O UNLOADR41	R42	H2O UNLOADR42
U01	UNL Water	U02	UNL Water	U03	UNL Water	U04	UNL Xylene	U05	UNL Xylene																		

För godkända HistoCore SPECTRA H&E-program måste 95% Alcohol Dehyd 1 (95Dhy 1) dupliceras funktionen Anp. Reagensups.

2

Avbryt Anp. Reagensups. Fyll reagens 3 Spara

Bild 53

Duplicera reagensen 95Dhy1**Obs!**

Om det inte finns någon tillgänglig reagensstation baserat på de valda programmen kan du ta hjälp av Leicas försäljningsavdelning och försöka optimera användardefinierade program.

Så här gör du för att duplicera reagensen 95Dhy1:

1. Tryck på knappen **Anp. Reagensupps.** (→ "Bild 53-2").
2. Observera alltid det efterföljande informationsmeddelandet och bekräfta det med **OK**. Ett nytt fönster, **Urklipp** (→ "Bild 54"), öppnas.

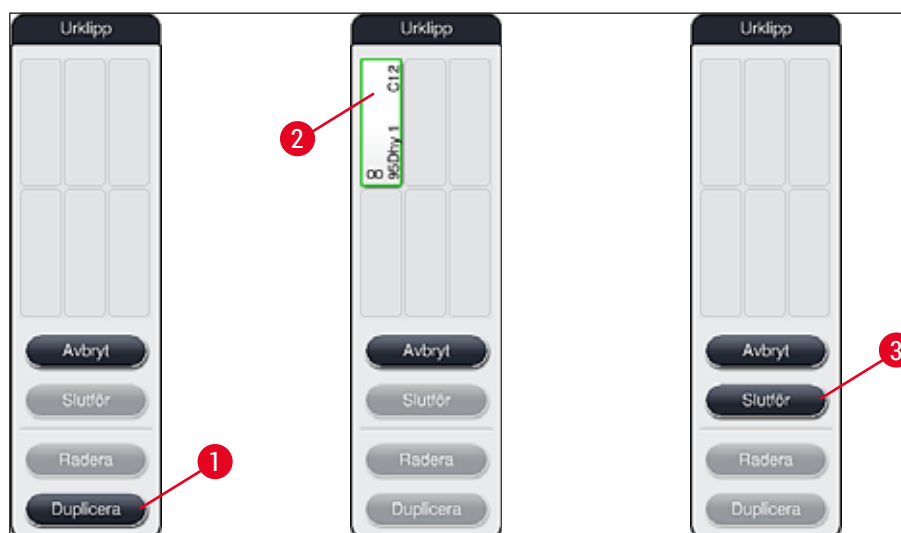


Bild 54

3. Markera stationen **95Dhy1** (→ "Bild 53-1") i reagensuppställningen genom att trycka lätt på den (stationen är markerad i grönt). Klicka sedan på **Duplicera** (→ "Bild 54-1") i fönstret **Urklipp**. En identisk kopia av den valda stationen visas nu i **Urklipp** (→ "Bild 54-2").
4. Markera stationen i "**Urklipp**" och klicka sedan på en ledig position i "**Reagensuppställning**". Den duplicerade stationen flyttas från urklippsfönstret till reagensuppställningen (→ "Bild 55-1").

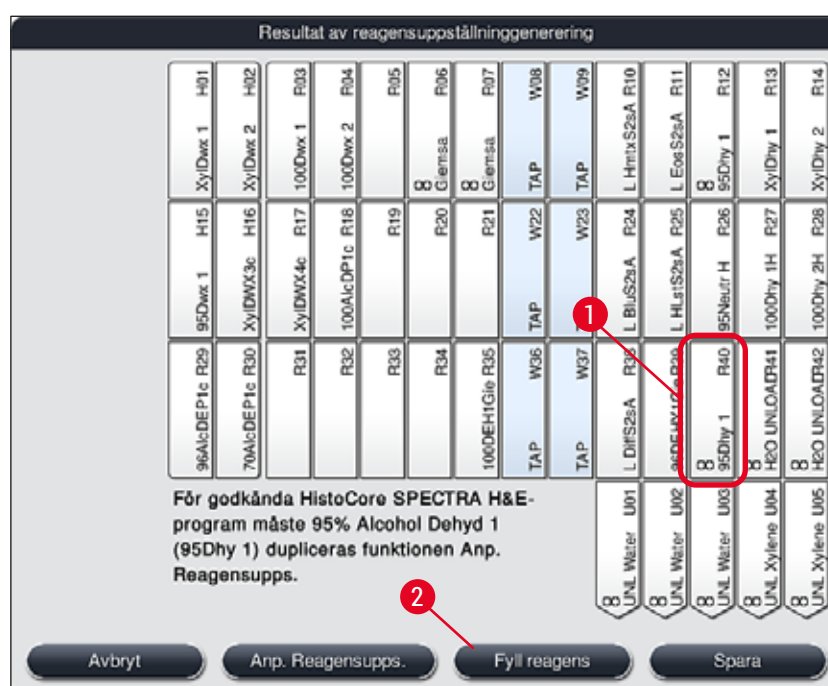


Bild 55

5 Användning

- Tryck på **Slutför** (→ "Bild 54-3") i **Urklipp** och bekräfta det efterföljande informationsmeddelande med "Ja" för att tillämpa ändringen och stänga urklippsfönstret.
- ✓ Den duplicerade stationen **95Dhy1** och den ursprungliga stationen markeras med en oändlighetssymbol (∞) i reagensuppställningen (→ "Bild 55-1").

Fylla på reagenser

- Tryck på knappen **Fyll reagens** (→ "Bild 55-2").
- I det nya fönstret **Fyll reagens** (→ "Bild 56") är de stationer som ska fyllas markerade med orange (→ "Bild 56-1").



Obs!

Endast användardefinierade och tillagda reagenser från Leica-infärgningsprogram får en orange markering (→ "Bild 56"). Därefter skannas reagenserna från Leica Reagent Kit (→ Sida 79 – Fylla på reagenser från Leica Reagent Kit).

- Fyll de markerade reagenskyvetterna en och en med respektive reagens utanför instrumentet och sätt tillbaka dem i rätt position i instrumentet.
- Bekräfta att reagenskyvetterna har fyllts och satts tillbaka genom att trycka på respektive station (→ "Bild 56-1") på skärmen.
- Upprepa dessa steg för alla stationer som är markerade med orange, inklusive utmatningsstationerna (→ "Bild 56-2").

Fyll reagens

96AcDEP1c R29	H15	H01	Xy/Dwx 1	H02	R03	100Dwx 1	R04	R05	R06	R07	W08	W09	L HmixS2aA R10	R11	R12	R13	R14
70AcDEP1c R30	H16	Xy/Dwx 2	Xy/Dwx 3c	H17	100Dwx 2	100Dwx 3c	R18	R19	Gensa	Gensa	TAP	TAP	L HmixS2aA R24	L HmixS2aA R25	95Dhy 1	Xy/Dhy 1	Xy/Dhy 2
R31	Xy/DWX4c	R17	Xy/DWX4c	R18	100AcDP1c	R19	R20	R21	W22	W23	W24	W25	L HmixS2aA R26	L HmixS2aA R27	100Dhy 1H	100Dhy 2H	100Dhy 3H
R32	100AcDP1c	R20	100AcDP1c	R21	100AcDP1c	R22	100AcDP1c	100DEH1G1c R25	TAP	TAP	TAP	TAP	L HmixS2aA R28	L HmixS2aA R29	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	L HmixS2aA R46	L HmixS2aA R47	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R46	R47	R48	R49	R50	R51	R52	R53	R54	R55	R56	R57	R58	L HmixS2aA R59	L HmixS2aA R60	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R59	R60	R61	R62	R63	R64	R65	R66	R67	R68	R69	R70	R71	L HmixS2aA R72	L HmixS2aA R73	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R72	R73	R74	R75	R76	R77	R78	R79	R80	R81	R82	R83	R84	L HmixS2aA R85	L HmixS2aA R86	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R85	R86	R87	R88	R89	R90	R91	R92	R93	R94	R95	R96	R97	L HmixS2aA R98	L HmixS2aA R99	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R98	R99	R100	R101	R102	R103	R104	R105	R106	R107	R108	R109	R110	L HmixS2aA R111	L HmixS2aA R112	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R111	R112	R113	R114	R115	R116	R117	R118	R119	R120	R121	R122	R123	L HmixS2aA R124	L HmixS2aA R125	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R124	R125	R126	R127	R128	R129	R130	R131	R132	R133	R134	R135	R136	L HmixS2aA R137	L HmixS2aA R138	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R137	R138	R139	R140	R141	R142	R143	R144	R145	R146	R147	R148	R149	L HmixS2aA R150	L HmixS2aA R151	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R150	R151	R152	R153	R154	R155	R156	R157	R158	R159	R160	R161	R162	L HmixS2aA R163	L HmixS2aA R164	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R163	R164	R165	R166	R167	R168	R169	R170	R171	R172	R173	R174	R175	L HmixS2aA R176	L HmixS2aA R177	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R176	R177	R178	R179	R180	R181	R182	R183	R184	R185	R186	R187	R188	L HmixS2aA R189	L HmixS2aA R190	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R189	R190	R191	R192	R193	R194	R195	R196	R197	R198	R199	R200	R201	L HmixS2aA R202	L HmixS2aA R203	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R202	R203	R204	R205	R206	R207	R208	R209	R210	R211	R212	R213	R214	L HmixS2aA R215	L HmixS2aA R216	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R215	R216	R217	R218	R219	R220	R221	R222	R223	R224	R225	R226	R227	L HmixS2aA R228	L HmixS2aA R229	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R228	R229	R230	R231	R232	R233	R234	R235	R236	R237	R238	R239	R240	L HmixS2aA R241	L HmixS2aA R242	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R241	R242	R243	R244	R245	R246	R247	R248	R249	R250	R251	R252	R253	L HmixS2aA R254	L HmixS2aA R255	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R254	R255	R256	R257	R258	R259	R260	R261	R262	R263	R264	R265	R266	L HmixS2aA R267	L HmixS2aA R268	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R267	R268	R269	R270	R271	R272	R273	R274	R275	R276	R277	R278	R279	L HmixS2aA R280	L HmixS2aA R281	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R280	R281	R282	R283	R284	R285	R286	R287	R288	R289	R290	R291	R292	L HmixS2aA R293	L HmixS2aA R294	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R293	R294	R295	R296	R297	R298	R299	R300	R301	R302	R303	R304	R305	L HmixS2aA R306	L HmixS2aA R307	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R306	R307	R308	R309	R310	R311	R312	R313	R314	R315	R316	R317	R318	L HmixS2aA R319	L HmixS2aA R320	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R319	R320	R321	R322	R323	R324	R325	R326	R327	R328	R329	R330	R331	L HmixS2aA R332	L HmixS2aA R333	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R332	R333	R334	R335	R336	R337	R338	R339	R340	R341	R342	R343	R344	L HmixS2aA R345	L HmixS2aA R346	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R345	R346	R347	R348	R349	R350	R351	R352	R353	R354	R355	R356	R357	L HmixS2aA R358	L HmixS2aA R359	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R358	R359	R360	R361	R362	R363	R364	R365	R366	R367	R368	R369	R370	L HmixS2aA R371	L HmixS2aA R372	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R371	R372	R373	R374	R375	R376	R377	R378	R379	R380	R381	R382	R383	L HmixS2aA R384	L HmixS2aA R385	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R384	R385	R386	R387	R388	R389	R390	R391	R392	R393	R394	R395	R396	L HmixS2aA R397	L HmixS2aA R398	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R397	R398	R399	R400	R401	R402	R403	R404	R405	R406	R407	R408	R409	L HmixS2aA R410	L HmixS2aA R411	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R410	R411	R412	R413	R414	R415	R416	R417	R418	R419	R420	R421	R422	L HmixS2aA R423	L HmixS2aA R424	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R423	R424	R425	R426	R427	R428	R429	R430	R431	R432	R433	R434	R435	L HmixS2aA R436	L HmixS2aA R437	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R436	R437	R438	R439	R440	R441	R442	R443	R444	R445	R446	R447	R448	L HmixS2aA R449	L HmixS2aA R450	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R449	R450	R451	R452	R453	R454	R455	R456	R457	R458	R459	R460	R461	L HmixS2aA R462	L HmixS2aA R463	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R462	R463	R464	R465	R466	R467	R468	R469	R470	R471	R472	R473	R474	L HmixS2aA R475	L HmixS2aA R476	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R475	R476	R477	R478	R479	R480	R481	R482	R483	R484	R485	R486	R487	L HmixS2aA R488	L HmixS2aA R489	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R488	R489	R490	R491	R492	R493	R494	R495	R496	R497	R498	R499	R500	L HmixS2aA R501	L HmixS2aA R502	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R501	R502	R503	R504	R505	R506	R507	R508	R509	R510	R511	R512	R513	L HmixS2aA R514	L HmixS2aA R515	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R514	R515	R516	R517	R518	R519	R520	R521	R522	R523	R524	R525	R526	L HmixS2aA R527	L HmixS2aA R528	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R527	R528	R529	R530	R531	R532	R533	R534	R535	R536	R537	R538	R539	L HmixS2aA R540	L HmixS2aA R541	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R540	R541	R542	R543	R544	R545	R546	R547	R548	R549	R550	R551	R552	L HmixS2aA R553	L HmixS2aA R554	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R553	R554	R555	R556	R557	R558	R559	R560	R561	R562	R563	R564	R565	L HmixS2aA R566	L HmixS2aA R567	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R566	R567	R568	R569	R570	R571	R572	R573	R574	R575	R576	R577	R578	L HmixS2aA R579	L HmixS2aA R580	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R579	R580	R581	R582	R583	R584	R585	R586	R587	R588	R589	R590	R591	L HmixS2aA R592	L HmixS2aA R593	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R592	R593	R594	R595	R596	R597	R598	R599	R600	R601	R602	R603	R604	L HmixS2aA R605	L HmixS2aA R606	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R605	R606	R607	R608	R609	R610	R611	R612	R613	R614	R615	R616	R617	L HmixS2aA R618	L HmixS2aA R619	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R618	R619	R620	R621	R622	R623	R624	R625	R626	R627	R628	R629	R630	L HmixS2aA R631	L HmixS2aA R632	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R631	R632	R633	R634	R635	R636	R637	R638	R639	R640	R641	R642	R643	L HmixS2aA R644	L HmixS2aA R645	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R644	R645	R646	R647	R648	R649	R650	R651	R652	R653	R654	R655	R656	L HmixS2aA R657	L HmixS2aA R658	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R657	R658	R659	R660	R661	R662	R663	R664	R665	R666	R667	R668	R669	L HmixS2aA R670	L HmixS2aA R671	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R670	R671	R672	R673	R674	R675	R676	R677	R678	R679	R680	R681	R682	L HmixS2aA R683	L HmixS2aA R684	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R683	R684	R685	R686	R687	R688	R689	R690	R691	R692	R693	R694	R695	L HmixS2aA R696	L HmixS2aA R697	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R696	R697	R698	R699	R700	R701	R702	R703	R704	R705	R706	R707	R708	L HmixS2aA R709	L HmixS2aA R710	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R709	R710	R711	R712	R713	R714	R715	R716	R717	R718	R719	R720	R721	L HmixS2aA R722	L HmixS2aA R723	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R722	R723	R724	R725	R726	R727	R728	R729	R730	R731	R732	R733	R734	L HmixS2aA R735	L HmixS2aA R736	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R735	R736	R737	R738	R739	R740	R741	R742	R743	R744	R745	R746	R747	L HmixS2aA R748	L HmixS2aA R749	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R748	R749	R750	R751	R752	R753	R754	R755	R756	R757	R758	R759	R760	L HmixS2aA R761	L HmixS2aA R762	95Dhy 1	95Dhy 2	95Dhy 3
R761	R762	R763	R764	R765	R766	R767	R768	R769	R770	R771	R772	R773	L HmixS2aA R774				

Fylla på reagenser från Leica Reagent Kit

**Obs!**

När reagensstationen **95 % Alcohol Dehyd1** (→ Sida 76 – Duplicera reagensen 95Dhy1) har duplicerats och reagenserna har fyllts på (→ Sida 78 – Fylla på reagenser), skannas Leica Reagents Kit.

1. Om ett informationsmeddelande (→ "Bild 57") visas på skärmen ska du placera förpackningens etikett framför RFID-sensorn på instrumentets framsida (→ "Bild 58-1") för att skanna den.
2. Börja sedan med att skanna den första Leica Reagent-flaskan när ett informationsmeddelande om detta visas (→ "Bild 58-2"). Håll etiketten på reagensflaskan framför RFID-sensorn på instrumentets framsida (→ "Bild 58-1") för att skanna den.
3. I det nya fönstret **Byt Leica Kit Reagent** (→ "Bild 59"), är den station som ska fyllas markerad med orange (→ "Bild 59-1").
4. Fyll den markerade reagenskyvetten med respektive Leica-reagens utanför instrumentet och sätt tillbaka den i rätt position i instrumentet.
5. Bekräfta att reagenskyvetten har fyllts och satts tillbaka genom att trycka på respektive station (→ "Bild 59-1") på skärmen.
6. Skanna sedan etiketterna på de enskilda reagensflaskorna när du uppmanas att göra det (→ "Bild 58-2") och upprepa steg 2-5.

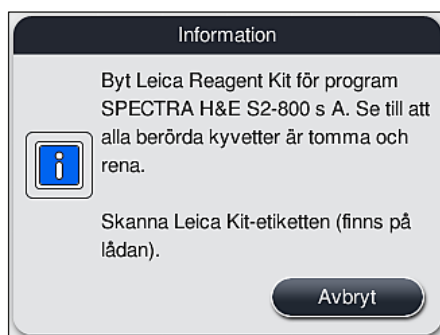
**Bild 57****Bild 58**



Bild 59

**Obs!**

Användaren har 5 minuter på sig att skanna reagenser med hjälp av förpackningens etikett och 5 minuter per reagensflaska.

Om skanningen av en reagensflaska eller etikett misslyckas har användaren ytterligare två försök på sig innan reagensetiketten blir ogiltig.

**Varning**

Varje Leica Reagent Kit kan endast skannas en gång!

- Skanningen av Leica Reagent Kit kan endast avbrytas med knappen **Avbryt** i informationsmeddelandet som visas i (→ "Bild 57"). Den måste avbrytas innan förpackningens etikett börjar läsas in för att inte Leica Reagent Kit ska förfalla.
- Skanningen kan utföras senare. Mer information som kan behövas för denna åtgärd finns i (→ Sida 96 – Reagensbyte) (→ "Bild 76") och (→ "Bild 78").
- Om åtgärden inte avbryts förrän efter det att den första etiketten (förpackning av kartong) har skannats förfaller Leica Reagent Kit.

**Obs!**

Reagenshanteringssystemet (RHS) tillämpar automatiskt följande data för Leica-reagenserna:


- Bäst före-datum (efter öppnande)
- Kvarstående antal objektglas
- Högsta antal objektglas
- Utgångsdatum
- Partinummer

**Varning**

- Ordningen i reagensuppställningen ska följas exakt. En avvikelse kan leda till oönskade infärgningsresultat.
- Alla Leica Reagent Kit-flaskor ska skannas.
- Se till att inga Leica-reagenser från andra Leica Reagent Kit används.
- Reagenskyvetter ska alltid fyllas på utanför instrumentet och i enlighet med säkerhetsanvisningarna.

**Obs!**

Slutligen får användaren ett informationsmeddelande på skärmen med en uppmaning om att starta skanning av påfyllningsnivån. Tryck på knappen **OK** i informationsmeddelandet (→ "Bild 60") för att starta skanningen.

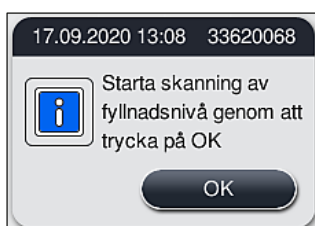**Bild 60****5.9.11 Anpassa en reagensuppställning****Varning**

Den automatiskt genererade reagensuppställningen är optimerad och ska endast anpassas om det finns specifika användarbehov eller om detta krävs av ett Leica-program. I detta fall måste bruksanvisningen som medföljer Leica Reagent Kit följas! Arbetsledarläget krävs för att anpassa reagensuppställningen.

Alla anpassningar av reagensuppställningen kan påverka preparatgenomströmningen och infärgningsresultatet negativt!

Följande regler måste följas när reagensuppställningen anpassas:

- Undvik att flytta reagensstationer från ena sidan av kyvettfältet till den andra, eftersom detta medför onödigt långa överföringstider.
- Duplicerade stationer måste befinna sig på samma sida i kyvettfältet (→ "Bild 40") (→ "Bild 65"), annars kan inte anpassningen av reagensuppställningen sparas.
- För att inte störa utmatningskapaciteten och för att förhindra oväntade störningar av infärgningsprocessen måste en utmatningsreagens tilldelas var och en av de 5 utmatningsstationerna (→ Sida 67 – 5.9.5 Skapa eller kopiera ett nytt infärgningsprogram).
- Om en utmatningsstation används för utmatning till en ofylld kyvett måste korrekt tilldelning alltid ske i slutet av programmet till **UNL Empty** (→ Sida 59 – 5.8.3 Processklasser). Under inga omständigheter får en oanvänd position i de 5 utmatningsstationerna skapas genom att man raderar en reagens som redan tilldelats utmatningsstationen. Detta kan ha en negativ inverkan på utmatningskapaciteten och leda till störningar av infärgningsprocessen.

**Obs!**

När en reagensuppställning genereras tilldelas de valda reagenserna för det sista programsteget (UNL, för utmatning) automatiskt de enskilda utmatningsstationerna. Därför är det mycket viktigt att kontrollera att det tilldelade antalet enskilda utmatningsstationer motsvarar den genomströmning som förväntas av användaren och laboratoriets arbetsflöde. Det inbördes förhållandet mellan de tilldelade utmatningsstationerna kan ändras med funktionen **Anp. Reagensups.** Enskilda utmatningsstationer kan dupliceras eller raderas vid behov.

Om du behöver anpassa den reagensuppställning som har skapats av HistoCore SPECTRA ST, som inkluderar alla regler för optimering, kan du göra detta med hjälp av funktionen **Anp. Reagensups.** (→ "Bild 61-1").

Med den här funktionen kan stationerna flyttas till sina positioner inom reagensuppställningen och/eller dupliceras.

För att göra detta går du tillväga på följande sätt:

- I reagensuppställningsvyn (→ "Bild 61"), trycker du på knappen **Anp. Reagensups.** (→ "Bild 61-1").
- Observera de informationsmeddelanden som följer (→ "Bild 62") (→ "Bild 63") och bekräfta dem eller tryck på **Avbryt** (→ "Bild 63") för att återgå till reagensuppställningsvyn.
- När du har bekräftat kommer **Urklipp** (→ "Bild 64") att öppnas. Upp till 6 reagensstationer (→ "Bild 64-1") kan flyttas hit.



Bild 61



Bild 62

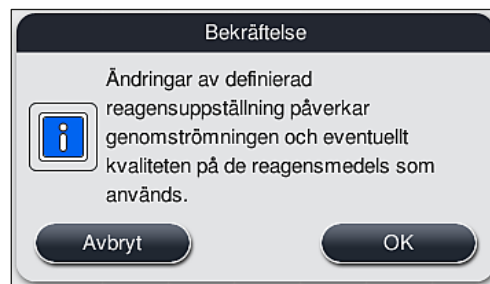


Bild 63

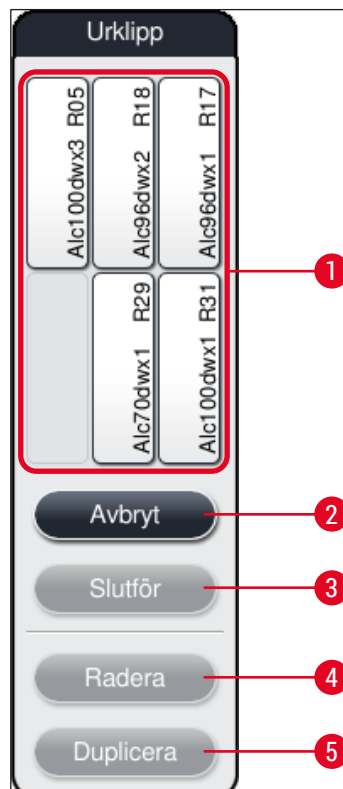


Bild 64

**Obs!**

- Leica-reagensstationer med ett L före reagensnamnet (→ "Bild 61-3") kan flyttas men inte dupliceras.

**Obs!**

- Urklippsfönstret kan stängas först när det inte längre finns några reagensstationer i det.
- Efter varje ändring som utförs med funktionen **Anp. Reagenssupps.** visas ett informationsmeddelande på skärmen som uppmanar användaren att starta den automatiska skanningen av påfyllningsnivån. Tryck på knappen **OK** i informationsmeddelandet för att starta skanningen.

Det finns två alternativ för att ändra reagensuppställningen:Flytta reagensstationer:

1. För att flytta reagensstationer markerar du dem en och en i reagensuppställningen (→ "Bild 61") genom att trycka på skärmen och sedan trycka lätt på en ledig position i urklippsfönstret (→ "Bild 64-1").
2. Reagensstationen flyttas då till urklippsfönstret (→ "Bild 64-1").
3. Markera slutligen reagensstationen i urklippsfönstret genom att trycka lätt på den och dra den sedan till önskad (ledig) station (→ "Bild 61-2") i reagensuppställningen.
4. För att spara ändringarna trycker du på knappen **Slutför** (→ "Bild 64-3"). Bekräfta efterföljande informationsmeddelande med **Ja** eller återgå till urklippsfönstret med **Nej**.
5. För att ångra ändringarna trycker du på **Avbryt** (→ "Bild 64-2") och bekräftar det efterföljande informationsmeddelandet med **Ja**.

Duplicera en reagensstation

1. För att duplicera en reagensstation markerar du den i reagensuppställningen genom att trycka på skärmen.
 2. Därefter trycker du på knappen **Duplicera** (→ "Bild 64-5").
 3. Reagensstationen dyker då upp i urklippsfönstret. Denna station och den ursprungliga stationen markeras med en oändlighetssymbol (→ "Bild 61-4").
 4. Markera därefter den duplicerade reagensstationen i urklippsfönstret genom att trycka på skärmen och placera den sedan i önskad (ledig) station, i närheten av den ursprungliga stationen, i reagensuppställningen.
 5. För att spara ändringarna trycker du på knappen **Slutför**. Bekräfta efterföljande informationsmeddelande med **Ja** eller återgå till urklippsfönstret med **Nej**.
- För att ångra ändringarna trycker du på **Avbryt** och bekräftar det efterföljande informationsmeddelandet med **Ja**.

**Obs!**

- Duplicerade reagensstationer är lämpliga för programsteg med reagenser som har en lång verkningstid. Duplicerade stationer innebär att ett programsteg har tillgång till två likvärdiga reagensstationer, vilket garanterar en hög reagensgenomströmning.
- Duplicerade reagensstationer kan raderas med hjälp av knappen **Radera** (→ "Bild 64-4"). För att göra detta markerar du dem i reagensuppställningen genom att trycka på dem och därefter på **Radera**.

6. Daglig inställning av instrumentet

6.1 Förbereda instrumentet för den dagliga inställningen

**Obs!**

- (→ "Bild 65") visar en översikt över de olika stationerna i kyvettfältet.
- Kyvettfältet består av totalt 36 reagensstationer och 6 sköljvattenstationer.
- Varje reagenskyvett rymmer max. 380 ml.

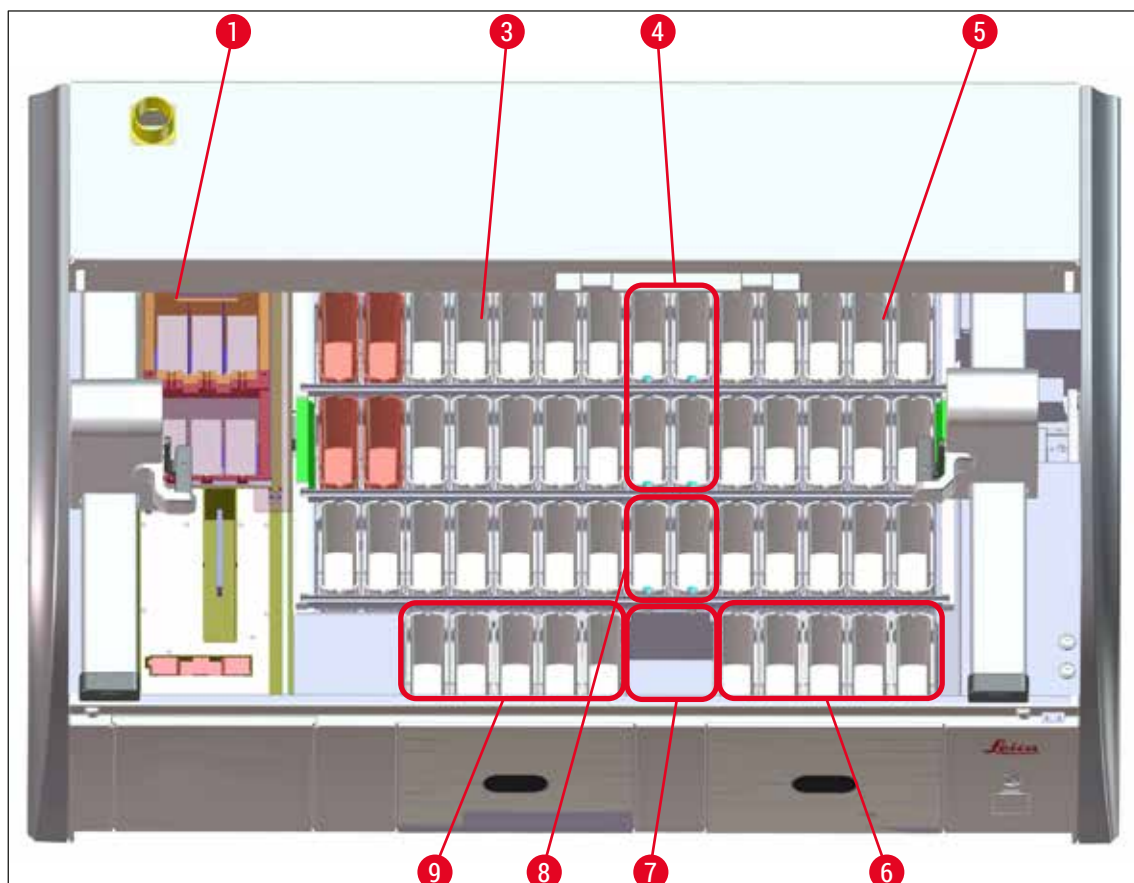


Bild 65

- 1 6 ugnsstationer
- 3 Vänster kyvettfält
- 4 Sköljvattenstationer (grupp om fyra)
- 5 Höger kyvettfält
- 6 5 utmatningsstationer
- 7 Torr överföringsstation
- 8 Sköljvattenstationer (grupp om två)
- 9 5 laddningsstationer

6.2 Daglig inställning av instrumentet



Obs!

Före den dagliga idrifttagningen av instrumentet ska vattentillförseln till instrumentet kontrolleras och vid behov kopplas till.

- Öppna instrumentets kåpa och ta bort locken från reagenskyvetterna.
- Starta instrumentet.

Automatisk skanning av fyllnadsnivå i samband med att instrumentets initieras

Under initieringen utförs skanningen av fyllnadsnivå automatiskt i följande områden:

- Reagenskyvetter
- Sköljvattenkyvetter
- Laddnings- och utmatningsstationens reagenskyvetter
- Ugnstation



Obs!

Om instrumentet fortfarande innehåller rack, reagenskyvetter som inte är tillräckligt fyllda eller fortfarande täckta, och/eller sköljvattenkyvetter som inte är redo att användas, upptäcks detta under den automatiska skanningen av fyllnadsnivån och visas när denna är slutförd.

6.2.1 Förbereda och hantera reagenskyvetter

För att säkerställa att allt fungerar som det ska i instrumentet ska du följa anvisningarna nedan och gå tillväga på följande sätt.

Sätta fast reagenskyvetthandtaget

Kontrollera att reagenskyvetthandtaget är korrekt fastsatt på reagenskyvetten. Om detta inte är fallet ska handtaget sättas fast enligt (→ "Bild 66").

Fylla på och tömma reagenskyvetter



Varning

Reagenskyvetterna ska normalt fyllas på eller tömmas utanför instrumentet för att undvika eller minska risken för att spillta reagenser i andra reagenskyvetter eller på instrumentets invändiga delar. Var försiktig när du fyller eller tömmer reagenskyvetterna och följ de gällande laboratorieföreskrifterna. Om reagenser har spillts ut eller om andra reagensstationer har kontaminerats måste dessa rengöras och fyllas på igen. För att undvika onödig avdunstning av reagenser ska kyvetterna täckas över när de inte används.

Korrekt fyllnadsnivå i reagenskyvetter

- Observera nivåmarkeringen på insidan av reagenskyvetten när du fyller den, oavsett typ av kyvett (→ "Bild 66") (→ "Bild 67").
- En tillräcklig fyllnadsnivå garanteras om reagensernas nivå ligger mellan markeringarna för högsta (→ "Bild 66-1") och lägsta (→ "Bild 66-2") fyllnadsnivå.
- Om mellanlägg för specialinfärgning (→ "Bild 67") används i reagenskyvettorna för att reducera reagensvolymen ska dessa sättas i reagenskyvetten innan reagensen fylls på (minst upp till den markerade lägsta fyllnadsnivån (→ "Bild 67-2"), men inte över den högsta fyllnadsnivån (→ "Bild 67-1").

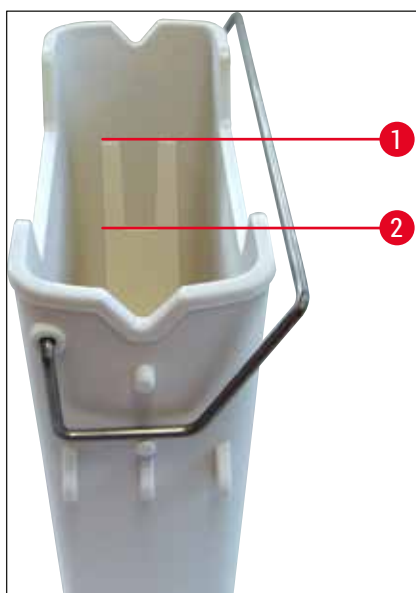


Bild 66

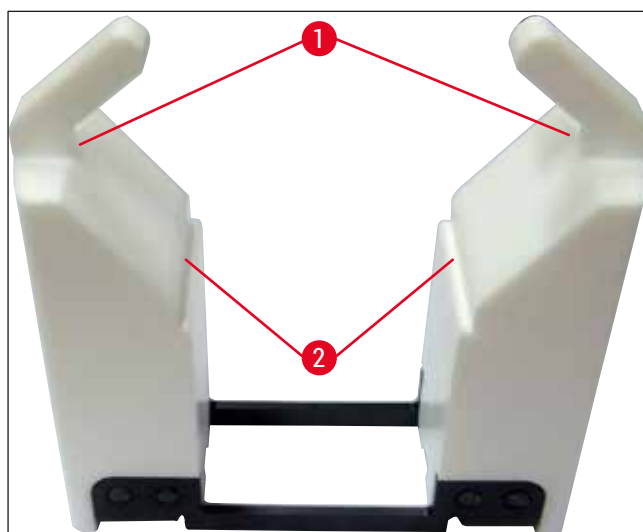


Bild 67

Sätta i reagenskyvetten i kyvettfältet

- Välj **Reagensuppställning** (→ Sida 37 – 5.5 Huvudmeny – Översikt) i huvudmenyn och placera reagenskyvetten i rätt position enligt ordningen i reagensuppställningen.

**Obs!**

Sätt försiktigt i reagenskyvetten med handtaget i kyvettfältet så att handtaget sitter på höger sida om reagenskyvetten när du tittar på kyvettfältet (→ "Bild 68-1"). Denna riktning på handtaget rekommenderas också för placeringen av reagenskyvettorna i laddnings- eller utmatningsstationen.

**Obs!**

Liksom rackhandtaget för 5 objektglas är mellanlägget för specialinfärgning försett med en specialbeläggning som förhindrar kemiska interaktioner med reagenser för särskilda användningsområden (t. ex. berlinerblå infärgning för påvisning av järn eller silverinfärgning som Grocott eller Gömöri). För mer information om reagenser som ska användas med belagda tillbehör, se (→ Sida 159 – A1. Bilaga 1 – Godkända reagenser).

6 Daglig inställning av instrumentet

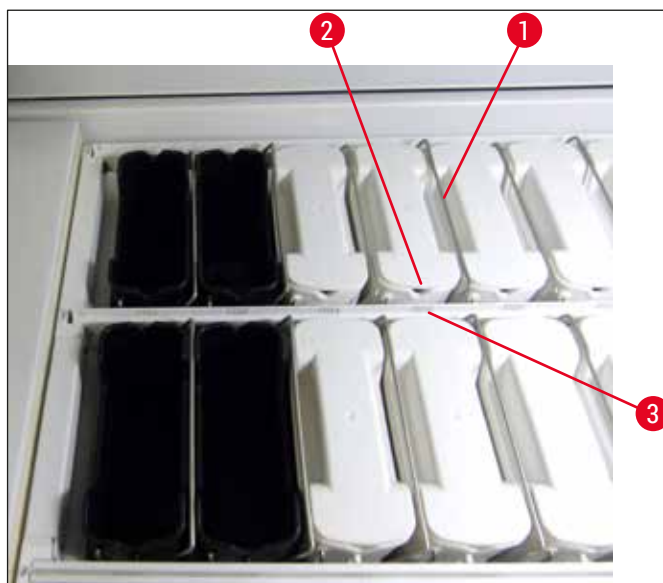


Bild 68



Varning

Reagenskyvetterna får inte stå vridna i sidled i förhållande till stationsnumret. Se till att skåran på reagenskyvettens framsida (→ "Bild 68-2") och stationsnumret (→ "Bild 68-3") är på samma höjd.

6.2.2 Automatisk skanning av påfyllningsnivå

När reagenskyvetten har fyllts och satts i ska den automatiska skanningen av påfyllningsnivån (→ "Bild 69-1") utföras för att bekräfta att alla reagenser som används har rätt påfyllningsnivå.



Obs!

- Laddnings- och utmatningsstationerna tas inte med i beräkningen när reagensuppställningen skapas. Reagenser i in- och utmatningsstationerna måste definieras och övervakas av användaren.
- Reagenserna i laddnings- och utmatningsstationerna övervakas inte av reagenshanteringssystemet. Därför ansvarar användaren för att reagenserna i dessa stationer är i ett felfritt skick.

Skanningen av påfyllningsnivån startas på följande sätt:

1. Öppna **Reagensuppställning** (→ Sida 37 – 5.5 Huvudmeny – Översikt) i huvudmenyn.
2. Knappen **Skanning fylln.nivå** (→ "Bild 69-1") finns nere till vänster på menyskärmen.
3. Tryck på den knappen för att starta skanningen av påfyllningsnivån.



Obs!

Avvikelser under skanningen visas på bildskärmen. Följ meddelandena och korrigerar till exempel påfyllningsnivåer, ta bort lock, lägg till reagenskyvetter osv.

6.3 Reagenshanteringssystem (RHS)



Reagensuppställningen (→ "Bild 69") i instrumentet visas när du trycker på motsvarande menyknapp. Denna visning återger den aktuella uppställningen av reagensstationerna, sköljvattenstationerna samt laddnings- och utmatningsstationerna i instrumentet.



Bild 69

Reagensuppställningen är tom när instrumentet levereras eftersom reagenserna inte har angetts ännu och ingen reagensuppställning har skapats.

När reagenser (→ Sida 56 – Skapa en ny reagens eller kopiera en reagens) och program (→ Sida 67 – 5.9.5 Skapa eller kopiera ett nytt infärgningsprogram) har angetts och reagensuppställningen har skapats (→ Sida 74 – 5.9.9 Skapa reagensuppställningen), visar översikten (→ "Bild 69") alla stationer i instrumentet i rätt ordning.

Varje reagenskyvett som visas i reagensuppställningen innehåller ytterligare information:

- Stationsnummer (→ "Bild 69-2")
- Reagensnamnets förkortning (→ "Bild 69-3")
- En bakgrundsfärg (→ "Bild 70")
- Oändlighetssymbol för en duplicerad reagensstation (→ "Bild 69-4")

**Obs!**

- Bakgrundsfärgen anger reagensens förbrukningsstatus (→ "Bild 70"). När reagensen är förbrukad stiger färgpelaren nedifrån och upp och ändrar färg beroende på förbrukningsstatus.
- En reagens måste bytas ut så snart dess förbrukningsstatus blir **RÖD** (→ "Bild 70-3") och absolut senast när stationen blinkar rött. Om detta inte görs kan inga Leica-infärgningsprogram startas.
- För mer information om RHS, se (→ Sida 55 – 5.8 Reagenslista).

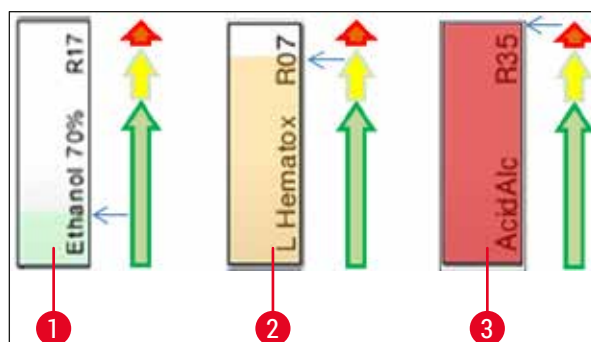


Bild 70

- 1 Grön: Förbrukningsstatus 0-80 % av den maximala förbrukningsnivån
- 2 Gul: Förbrukningsstatus 80-95 % av den maximala förbrukningsnivån
- 3 Röd: Förbrukningsstatus 95-100 % av den maximala förbrukningsnivån

6.4 Stationsinformation

Om du trycker på en station i reagensuppställningen visas mer information (stationsinformation). Man skiljer mellan följande stationstyper med hjälp av deras förkortningar:

L01-L05	Laddningsstationer
SID	Avläsningsstation för objektglas och skrivfälts-ID (tillval)
O01-O06	Ugnsstationer för torkning av objektglas och smältning av paraffin
R01-R42	Reagensstationer
W08-W09	Sköljvattenstationer (grupp om fyra)
W22-W23	
W36-W37	Sköljvattenstationer (grupp om två)
D01-D02	Torra överföringsstationer
U01-U05	Utmatningsfackets utmatningsstationer

Avläsningsstation för objektglas (SID):

Om du trycker på den här stationen visas ett meddelande som indikerar att det här är stationen för inläsning av objektglas. Använd knappen **Stäng** (→ "Bild 71") för att stänga visningen.



Bild 71

Ugnsstationer:

Den detaljerade visningen (→ "Bild 72") för en ugnsstation innehåller:

- Aktuell temperatur (→ "Bild 72-1"),
- Den inställda måltemperaturen (→ "Bild 72-2") och
- Driftläget (→ "Bild 72-3") för de 6 ugnsstationerna.

Använd knappen **Stäng** (→ "Bild 72-4") för att stänga visningen.

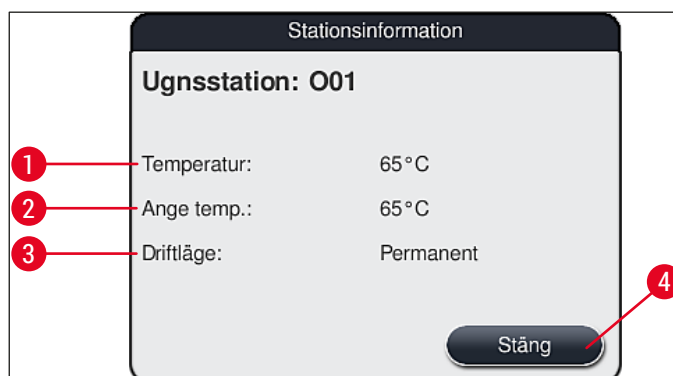


Bild 72

Sköljvattenstationer (grupp om fyra):

Den detaljerade visningen för en sköljvattenstation (→ "Bild 73") visar alla sköljvattenstationer som är anslutna till samma vattenkrets. Använd knappen **Stäng** för att stänga visningen.

6 Daglig inställning av instrumentet



Bild 73

Sköljvattenstationer (grupp om två):

När du trycker på en sköljvattenstation som ingår en grupp av två öppnas ett informationsfönster som visar de 2 vattenstationerna som är anslutna till den andra vattenkretsen med till exempel destillerat vatten, avjoniserat vatten (→ "Bild 74-1") eller kranvatten (→ "Bild 74-2").



Obs!

Beroende på anslutningen (→ Sida 26 – 4.2.1 Anslutning av samtliga 6 sköljvattenstationer) (→ Sida 27 – 4.2.2 Kombinerad anslutning 4+2 sköljvattenstationer), måste du göra ett motsvarande val i den här menyn.

Sköljvattenstationerna (grupp med två) kan endast programmeras i **arbetsledar-läge**.



Varning

Rätt tilldelning och korrekt anslutning av sköljvattenkyvetterna är ett krav för att uppnå en god infärgningskvalitet.

- Tryck på knappen **Spara** (→ "Bild 74-3") för att tillämpa inställningarna eller på **Avbryt** (→ "Bild 74-4") för att stänga fönstret utan att tillämpa eventuella ändringar.



Bild 74

Laddningsfackets laddningsstationer

När instrumentet levereras till kund har laddningsstationen ännu inte tilldelats några reagenser.

Utför följande steg för att tilldela en reagens till en laddningsstation:

1. Markera stationen i reagensuppställningen (→ "Bild 19-1") genom att trycka lätt på den.
2. I fönstret **Stationsinformation** trycker du på den svarta knappen **Reagensnamn** (→ "Bild 75-1") för att öppna listan med tillgängliga reagenser (→ Sida 55 – 5.8 Reagenslista).
3. Välj önskad reagens genom att trycka lätt på den och tryck sedan på **Tillämpa**.
4. Tryck på knappen **Spara** (→ "Bild 75-2") för att tillämpa inställningarna eller på **Avbryt** (→ "Bild 15-3") för att stänga fönstret utan att tillämpa eventuella ändringar.

✓ Det tilldelade reagensnamnet visas i reagensuppställningen.

Om en reagens inte längre behövs i den valda laddningsstationen kan tilldelningen till respektive reagens tas bort med hjälp av knapparna **Rensa** (→ "Bild 75-4") och **Spara** (→ "Bild 75-2") i fönstret **Stationsinformation**.



Bild 75



Obs!

Laddningsstationerna tas inte med i beräkningen när reagensuppställningen skapas. Reagenser i laddningsstationerna måste definieras och övervakas av användaren.

Utmatningsfackets utmatningsstationer

Tilldelningen av reagenserna till de 5 utmatningsstationerna beror på tilldelningen av de sista stegen i de valda program som implementerats i reagensuppställningen. Programets sista steg måste vara antingen en utmatningsstation i utmatningsfacket eller överföringsstationen till HistoCore SPECTRA CV i arbetsstationsläge. Om programmet ska avslutas i en av de 5 utmatningsstationerna är det obligatoriskt att tilldela en skapad eller fördefinierad reagens med processklass **UNL** som det sista programsteget.



Varning

Racken transporteras antingen till överföringsstationen i slutet av programmet eller till en ledig utmatningsstation fylld med korrekt utmatningsreagens som definierats i programmet som det sista steget. Om detta inte följs kan det leda till att proverna skadas.

Eftersom utmatningsstationerna kan ha olika tilldelningar måste färdiga rack avlägsnas från utmatningsstationerna i tid. Detta kan annars ha en negativ inverkan på utmatningskapaciteten och leda till störningar av infärgningsprocessen.

Reagensstationer och utmatningsstationer

När du trycker på reagensstationen eller utmatningsstationen öppnas ett informationsfönster. Det visar ytterligare relevant information om stationstypen (reagensstation (→ "Bild 76"), Leica-reagensstation (→ "Bild 78") eller utmatningsstation).

Reagensnamn (→ "Bild 76-1"), (→ Sida 56 – Skapa en ny reagens eller kopiera en reagens)
Förkortning (→ "Bild 76-2")

Reagensnamn, utmatningsstation
 (→ "Bild 77-1")

Förbrukningsstatus (→ "Bild 76-3") (→ Sida 89 – 6.3 Reagenshanteringssystem (RHS))

Återstående objektglas (→ "Bild 76-4"), Visar antalet återstående objektglas som kan behandlas.
Max objektglas. (→ "Bild 76-6") När ett rack sätts i instrumentet räknas objektglasen i racket av avläsningsstationen för objektglas och subtraheras från antalet återstående objektglas.

Objektglas ef. utbyte (→ "Bild 76-5") Visar antalet objektglas som har bearbetats sedan det senaste reagensbytet.

Längsta lagringsdatum efter bruten förpackning (→ "Bild 76-7") Visar lagringsdatumet för den reagens som reagenskyvetten har fyllts med.

Mellanlägg Ja/Nej (→ "Bild 76-8") **Ja** indikerar att mellanlägget för specialinfärgning och rack för 5 objektglas används. Den här stationen kan inte användas för program med rack för 30 objektglas (→ Sida 55 – 5.8 Reagenslista).

Exklusive Ja/Nej (→ "Bild 76-9") Inställningen **Ja** innebär att reagensen enbart tilldelas till ett enda program. **Nej** gör det möjligt att använda den med flera program (→ Sida 70 – 5.9.6 Infoga eller kopiera ett nytt programsteg).

Utgångsdatum (→ "Bild 78-1"),
Partinummer (→ "Bild 78-2") läggs in automatiskt när förpackningen till Leica Reagent Kit skannas.

Detaljerad visning av reagensstation

Stationsinformation

Reagensstation: R04

1 Reagensnamn: 100% Alcohol Dewax 2

2 Förkortning: 100Dwx 2

3 Reagensanvändn.status: 0%

4 Återstående objektglas: 800

5 Objektglas ef. utbyte: 0

6 Max objektglas: 800

7 Längsta lagring-datum: 22.09.2020

8 Insats: Nej

9 Exklusiv: Nej

10 Uppdatera reagens

11 Stäng

Bild 76

Detaljerad visning av utmatningsstation

Stationsinformation

Reagensstation: U01

1 Reagensnamn: UNL Water

Förkortning: UNL Water

Reagensanvändn.status: 1%

Återstående objektglas: 1200

Objektglas ef. utbyte: 0

Max objektglas: 1200

Längsta lagring-datum: 23:41

Insats: Nej

Exklusiv: Nej

Uppdatera reagens

Stäng

Bild 77

Detaljerad visning av Leica-reagensstation

Stationsinformation	
Reagensstation: R10	
Reagensnamn:	SPECTRA Hematoxylin S2-800s A
Förkortning:	L HmtxS2sA
Reagensanvändn.status:	0%
Återstående objektglas:	800
Objektglas ef. utbyte:	0
Max objektglas:	800
Längsta lagring-datum:	24.09.2020
Utgångsdatum:	16.09.2021
Partinr:	40021
Insats:	Nej
Exklusive:	Ja
Uppdatera reagens Stäng	

Bild 78

Reagensbyte

- Om reagenshanteringssystemet RHS visar att en reagens är nästan eller helt förbrukad måste ett reagensbyte göras. Detta byte måste bekräftas med en tryckning på knappen **Uppdatera reagens** (→ "Bild 76-10").
- När du byter ut Leica-reagenser ska du trycka på **Uppdatera reagens** och sedan följa instruktionerna för fyllning och skanning som visas på skärmen (→ Sida 79 – Fylla på reagenser från Leica Reagent Kit).
- Använd knappen **Stäng** (→ "Bild 76-11") för att stänga visningen.



Obs!

- Obs! Ett byte av reagenser följt av en uppdatering av RHS-data är endast möjligt om instrumentet befinner sig i ett driftläge och det inte längre finns några rack i instrumentet (inklusive laddnings- och utmatningsfacken).
- Om ett användardefinierat infärgningsprogram fortfarande används trots att ett reagensbyte måste utföras, kommer antalet objektglas att överstiga värdet **Max objektglas** (→ "Bild 76-6"). Det överskridna antalet objektglas kan avgöras genom att man jämför informationen på raderna **Objektglas ef. utbyte** och **Max objektglas** i stationsinformationen (→ "Bild 76-5").
- För reagenser i Leica Reagent Kit gäller ett gränsvärde på 30 överskridande objektglas. Detta gränsvärde gäller inte övriga reagenser som hör till Leica-programmet (t.ex. alkohol, xylen).



Varning

- En uppdatering av reagensstatusen utan att motsvarande reagens har bytts kommer att påverka infärgningskvaliteten negativt.
- Tryck **ALDRIG** på knappen **Uppdatera reagens** om inte reagensen har bytts ut.

**Obs!**

Varje Leica Reagent Kit kan endast skannas en gång!
Redan tillagda Leica-reagenser går ut innan bäst före-datumet om en reagensuppställning skapas på nytt.

6.5 Förbereda racket**Varning**

Varje rackhandtag (→ "Bild 80-1") innehåller 2 RFID-chip. Därför kan rackhandtagen fästas på racket (→ "Bild 80-2") först efter ett mikrovågssteg för förberedelse av preparat.

Det finns två olika typer av rack med kompatibla handtag som kan användas i infärgaren HistoCore SPECTRA ST:

- Rack för 30 objektglas för vanlig infärgning (→ "Bild 80").
- Rack för 5 objektglas för specialinfärgning (→ "Bild 81").

**Obs!**

Om en täckglasapplikator från en annan tillverkare används för täckglasapplicering av HistoCore SPECTRA ST-infärgade rack kan HistoCore SPECTRA ST användas med rack från andra tillverkare. Dessa rack måste vara försedda med rackhandtag från Leica och vara godkända för tillverkaren. Rack från andra tillverkare överförs normalt till utmatningsfacket i HistoCore SPECTRA ST efter infärgningen, och användaren måste ta bort dem därifrån.
Tillgängliga rackhandtag anges i (→ Sida 150 – Rackhandtag för rack från andra tillverkare).

De färgade handtagen måste sättas fast korrekt innan racket används i instrumentet.

Rackhandtagen måste sättas fast i enlighet med den fördefinierade programfärgen (→ Sida 63 – 5.9.1 Tilldela ett infärgningsprogram en rackhandtagsfärg).

Objektglashandtagen finns i 9 färger (8 programfärger & vit)
(→ Sida 148 – 9.2 Valbara tillbehör).

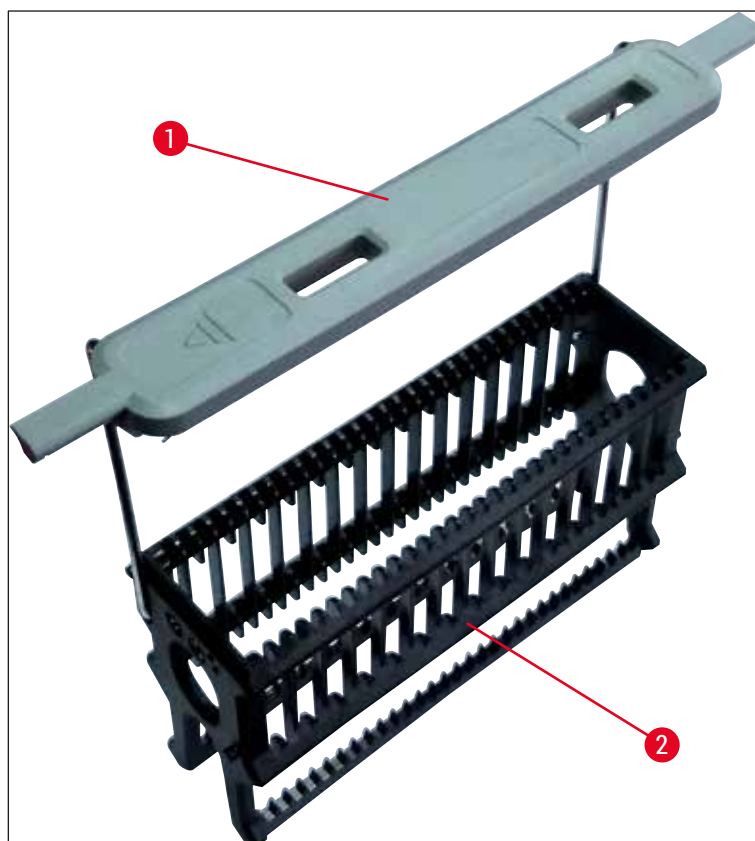


Bild 80



Bild 81

**Obs!**

Rackhandtaget för 5 objektglas har en specialbeläggning som förhindrar kemiska interaktioner med reagenser för särskilda användningsområden (t.ex. berlinerblå infärgning för påvisning av järn eller silverinfärgning som Grocott eller Gömöri). För mer information om reagenser som ska användas med belagda tillbehör, se (→ Sida 159 – A1. Bilaga 1 – Godkända reagenser).

Det vita handtagets specialfunktion:

- Det vita handtaget kan inte tilldelas till ett infärgningsprogram permanent.
- På grund av handtagets **JOKERFUNKTION** måste en programfärg tilldelas det vita handtaget på nytt vid varje programstart.
- För detta ändamål öppnas en urvalsmeny automatiskt på skärmen när racket har satts i.

Gör på följande sätt för att sätta fast eller byta ut rackhandtagen:

Lossa ett handtag från racket:

- Dra handtaget lätt åt sidorna (→ "Bild 82") så att ståltrådarna kan dras ut ur hålen i racket.

Sätta fast ett handtag på racket:

- Dra handtaget lätt åt sidorna och lyft racket så att ståltråden snäpper fast i hålen på höger och vänster sida i racket (→ "Bild 82-1") (→ "Bild 82-2").



Bild 82

**Obs!**

- Se till att handtaget sitter korrekt i den övre positionen, centrerat ovanför racket (→ "Bild 82").
- För att göra racket stabilare vid fyllning (→ "Bild 83-3") kan du vika handtaget (→ "Bild 83-1") åt sidan så långt det går (→ "Bild 83-2") så att det fungerar som ett ytterligare skydd och gör att racket inte tippas.

6 Daglig inställning av instrumentet

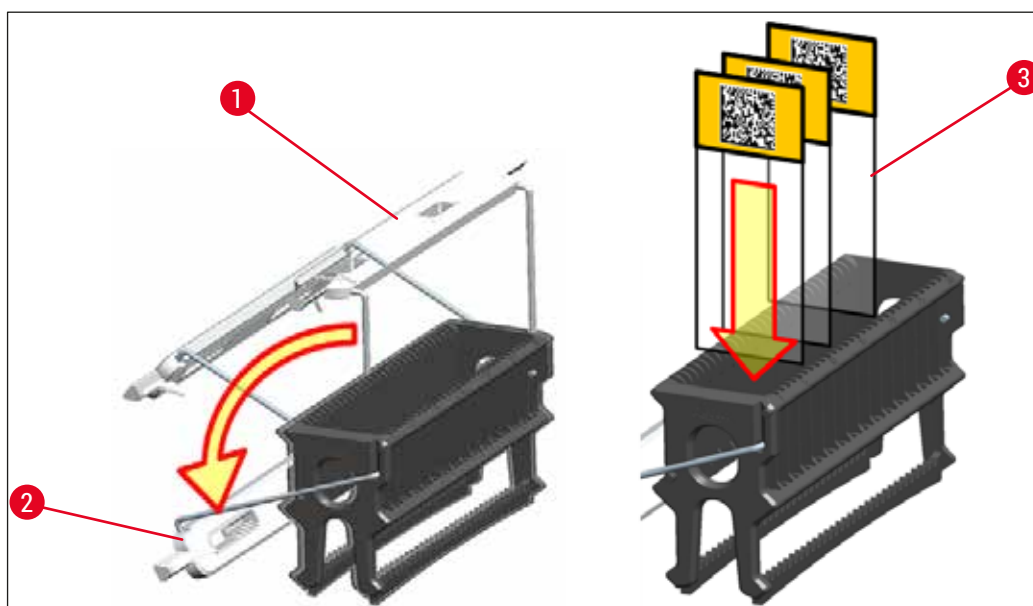


Bild 83



Varning

- När du sätter i objektglasen (→ "Bild 83-3"), måste du se till att objektglasetiketten pekar uppåt och är vänd mot användaren. Sidan av glasets preparatet på måste vara vänd mot rackets framsida.
- Rackets framsida är markerad med Leica-logotypen. När handtaget är fastsatt går det att läsa texten **FRONT** på handtaget (→ "Bild 83").
- Om objektglasen inte sätts i korrekt kan proverna skadas under den fortsatta processen.
- Etiketterna och/eller den skriftliga märkningen som används på objektglas måste tåla de lösningsmedel som förekommer i instrumentet.



Obs!

- Endast objektglas som motsvarar DIN ISO-standard 8037-1 får användas.
- Om tomma eller handskrivna etiketter används på rackhandtagen och objektglasen måste du kontrollera att de tål lösningsmedel innan de används.
- När du sätter i objektglasets i racket måste du se till att glasen placeras i respektive fack för det önskade infärgningsprogrammet. De färgade rackhandtagen gör att de kan tilldelas till respektive infärgningsprogram på ett tillförlitligt sätt.
- Se till att endast ett objektglas placeras i varje utrymme och att glasen inte fastnar.

6.6 Infärgningsprocessen

För att infärgningsprocessen ska kunna genomföras måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

- Alla inställningar har optimerats (parametrar för ugn, etc.).
- De program som krävs för infärgningen har skapats
(→ Sida 67 – 5.9.5 Skapa eller kopiera ett nytt infärgningsprogram).
- Reagensstationerna är fyllda med rätt reagenser
(→ Sida 86 – 6.2.1 Förbereda och hantera reagenskyvetter).
- En skanning av fyllnadsnivån har utförts (→ Sida 86 – 6.2 Daglig inställning av instrumentet).
- De rack som är avsedda för infärgning är fyllda och rätt handtag är fästa på dem
(→ Sida 97 – 6.5 Förbereda racket).



Obs!

En kontrollerad avstängning av instrumentet inleds om **driftströmbrytaren** (→ "Bild 13") trycks in under en pågående infärgningsprocess (→ Sida 110 – 6.6.6 Slutföra den dagliga användningen). Användaren måste bekräfta avstängningen av instrumentet genom att trycka på **driftströmbrytaren** två gånger.

6.6.1 Starta infärgningsprocessen



Varning

- Sträck dig inte in i laddningsfackets rörelseområde. Då kan du skada dig.
- Racket kan endast sättas i med hjälp av laddningsfacket. Det är inte tillåtet att sätta i det direkt i en reagens eller ugnstation genom att öppna instrumentets kåpa. Rack som sätts i på detta sätt kan inte identifieras av instrumentet och därmed orsaka kollisioner!
- Om kåpan öppnas medan infärgningsprogram är aktiva fördröjs respektive bearbetningssteg, eftersom det inte sker några överföringsrörelser under denna tidsperiod. Detta kan leda till förändringar av infärgningskvaliteten.
- Låt alltid kåpan vara stängd under tiden infärgningsprogram är aktiva. Leica tar inget ansvar för kvalitetsförsämringar som uppstår på detta sätt.
- Om rack med vita handtag har placerats i laddningsfacket och tilldelats till ett program, måste programmets tilldelning göras om efter det att facket och/eller kåpan har öppnats igen. Följ informationsmeddelandena som visas på bildskärmen när det ska göras.

6 Daglig inställning av instrumentet

Starta infärningsprocessen

1. Fäll upp rackhandtaget så att det är upprätt (→ "Bild 83").
2. Om laddningsfacket lyser grönt (→ "Bild 84-1") trycker du på det och öppnar facket.
3. Sätt i racket i en ledig position i laddningsfacket enligt (→ "Bild 84-2").



Bild 84

4. Sätt i racket så att både Leica-logotypen på rackets framsida och markeringen "Front" (Framsida) på det färgade handtags ovansida pekar mot användaren. Pilen på ovansidan av det färgade handtaget ska peka in mot instrumentet.
5. Tryck på laddningsfackets knapp igen för att stänga det.
6. Om laddningsfacket är öppet i mer än 60 sekunder informerar ett informationsmeddelande användaren om detta.



Varning

Se upp när facken öppnas eller stängs. Klämrisk! Facken är motordrivna och öppnas automatiskt när knappen trycks in. Blockera inte fackens rörelseområde.

7. När laddningsfacket stängs känner instrumentet av RFID-chipet i det färgade handtaget.
8. Den identifierade handtagsfärgen och den tilldelade programförkortningen visas på respektive station i reagensuppställningen (→ "Bild 85").



Bild 85

**Obs!**

- Instrumentet upptäcker och indikerar när ett rack har satts i på fel sätt och måste korrigeras av användaren.
- Om ett rack har satts i laddningsfacket med en rackhandtagsfärg för vilken det inte finns något angett program i reagensuppställningen (→ "Bild 86") upptäcker instrumentet detta och informerar användaren genom att visa ett informationsmeddelande. Racket måste avlägsnas från instrumentet. Fäst ett handtag med rätt färg enligt programmen (→ Sida 67 – Bild 45) och sätt tillbaka det i laddningsfacket.

SPECTRA ST

LHE

DWX

DHY

TS1

Bild 86

**Obs!**

För de isatta racken beräknar instrumentet genomströmningsoptimerade starttider som kan avvika från de isatta rackens ordningsföljd.

- Före det första programsteget räknar instrumentet de glas som har satts i racket i avläsningsstationen för objektglas (→ "Bild 3-2").
- Det fastställda antalet objektglas registreras och bearbetas i RHS och förbrukningsstatusen för respektive reagens uppdateras.
- Därefter transporteras racket till en ugnstation eller reagensstation, beroende på vad som har angetts som första programsteg.



Varning

Om laddningsfacket och instrumentets kåpa har öppnats samtidigt innan en infäringsprocess startas (t.ex. för okulärbesiktning av reagenserna), visar instrumentet efter 60 sekunder ett informationsmeddelande som uppmanar användaren att stänga laddningsfacket. Om racket sätts i innan laddningsfacket stängs måste du se till att kåpan är stängd och att programmen startar. Om programmet inte startas automatiskt ska laddningsfacket öppnas och stängas igen.

6.6.2 Övervaka infäringsprocessen

Med hjälp av följande menyer kan användaren öppna eller kontrollera övervaka information om program som är i gång:

- Reagensupställning med stationsinformation (→ "Bild 85").
- Visning av processtatus med beräknade kvarvarande programtider och stegtider (→ Sida 34 – 5.3 Processtatusvisning).
- Statusrad (→ Sida 33 – 5.2 Element på statusskärmen) med datum, tid och symboler gällande informationsmeddelanden och varningar som har visats.



Obs!

De 20 senaste aktiva informationsmeddelandena och varningarna kan öppnas genom att man trycker på respektive symbol i statusraden (→ "Bild 16-2") (→ "Bild 16-3"). På så vis kan användaren hålla sig informerad om aktuella situationer när han eller hon har varit borta från instrumentet, och vidta nödvändiga åtgärder vid behov.

6.6.3 Infäringsprocess slutförd

- När ett rack har gått igenom infäringsprocessen transporteras det till utmatningsfacket (→ "Bild 19-4") och placeras i en ledig position (→ "Bild 87"). Användaren informeras om detta via ett informationsmeddelande och en ljudsignal.

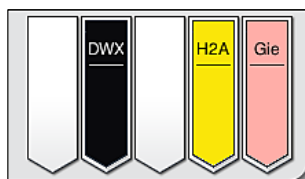


Bild 87

- För att avlägsna racket från utmatningsstationen trycker du på knappen på utmatningsfacket (→ "Bild 19-4") för att öppna det och ta bort racket.
- Tryck sedan på knappen igen för att stänga utmatningsfacket.

**Varning**

- Tillgängligheten för och valt antal olika utmatningsstationer är inte synliga för användaren i processtatusvisningen. Det rekommenderas att använda reagensuppställningsmenyn för processövervakning (→ "Bild 85") när olika reagenser används i utmatningsstationerna, för att man ska kunna reagera i tid när utmatningskapaciteten nås.
- Om färdiga rack inte avlägsnas från utmatningsstationerna i tid kan detta leda till störningar i infärgningsprocessen och kan påverka infärgningsresultaten.
- Sträck dig inte in i utmatningsfackets rörelseområde. Då kan du skada dig.
- Utmatningsfacket måste öppnas och racken avlägsnas senast när varningsmeddelandet om att utmatningsstationen är helt full visas (→ "Bild 88"). Om du inte tar hänsyn till varningsmeddelandet kan det resultera i att det inte går att transportera fler rack till utmatningsstationerna. Avvikande stegtider och fördröjningar i infärgningsprocessen kan leda till förändrade infärgningsresultat som kan vara svåra eller omöjliga att analysera.

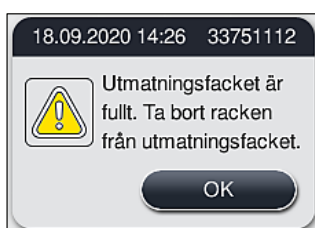


Bild 88

- Om utmatningsfacket är öppet i mer än 60 sekunder informerar ett informationsmeddelande (→ "Bild 89") användaren om detta.



Bild 89

**Obs!**

Varningsmeddelandet uppmanar användaren att stänga utmatningsfacket för att undvika eventuella fördröjningar. När utmatningsfacket är öppet kan instrumentet inte placera färdiga rack i utmatningsstationerna. Avvikande stegtider och fördröjningar i infärgningsprocessen kan leda till förändrade infärgningsresultat som kan vara svåra eller omöjliga att analysera.

- Tryck på knappen på utmatningsfacket för att stänga det.

6.6.4 Avbryta infärgningsprogrammet

**Obs!**

- Infärgningsprogram kan endast avslutas via **processtatusvisningen**.
- Ett program som redan befinner sig vid avläsningsstationen för objektglas (→ "Bild 3-2") kan inte avbrytas.

1. För att avbryta ett infärgningsprogram markerar du motsvarande rack i **processtatusvisningen** (→ "Bild 17-3") genom att trycka lätt på det.
2. En lista med programsteg (→ "Bild 90") visas; det aktuella steget är rödmarkerat (→ "Bild 90-1").



Bild 90

3. Fönstrets ram visar färgen som har tilldelats programmet, programnamnet samt förkortningen som har lagts in.
4. Tryck på knappen **Avbryta program** (→ "Bild 90-2").
5. I det efterföljande informationsmeddelandet (→ "Bild 91") bekräftar du att programmet ska avslutas med **Ja** eller återgår till processtatusvisningen med **Nej**.

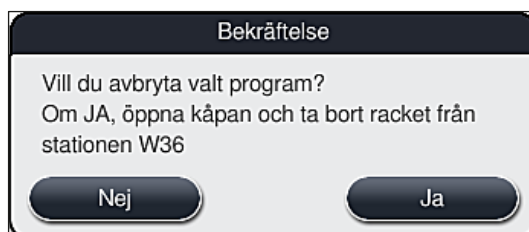


Bild 91

**Obs!**

Informationen i meddelandet (→ "Bild 91") måste följas.

- Reagensuppställningen visas när du trycker på **Ja**. Rackets position i instrumentet är markerad med orange (→ "Bild 92-1").
- Öppna instrumentets kåpa och ta bort racket från den markerade stationen.



Varning

Om den markerade stationen är en ugnstation kan den vänstra överföringsarmen (→ "Bild 3-1") behöva flyttas till mitten av instrumentet.

Vidrör inte sensorn/antennen och använd inte detta område för att förflytta överföringsarmen/-armarna (→ "Bild 115-6")! Använd i stället griparens metalldel (→ "Bild 115-1") och lyft den manuellt. Förflytta sedan överföringsarmen/-armarna till önskad position.

Dra sedan den öppna kåpan framåt och ta bort racket.

- Bekräfta att racket har tagits bort genom att trycka på den markerade stationen (→ "Bild 92-1") och stäng sedan kåpan igen.

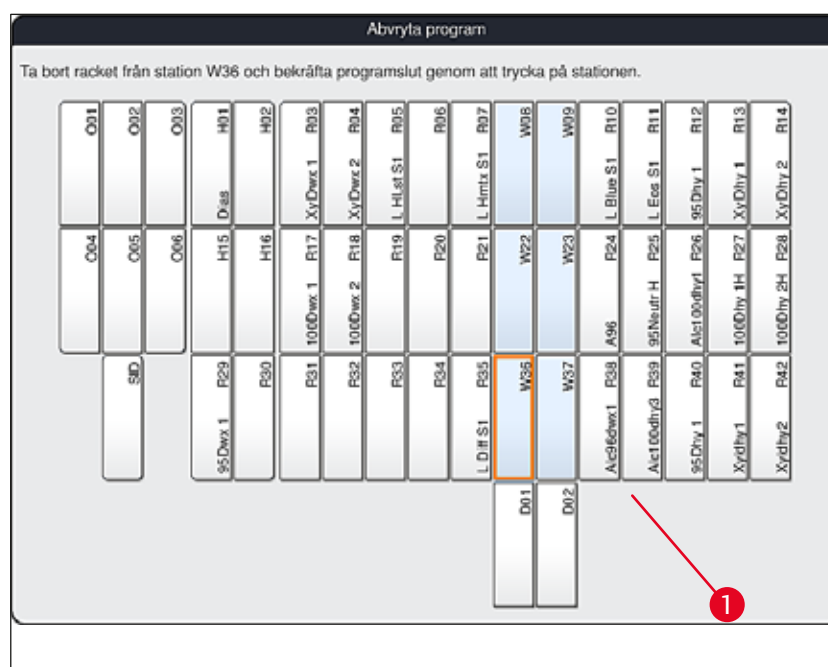


Bild 92



Varning

- Var snabb när du tar bort racket och se till att kåpan endast är öppen en kort stund. Av säkerhetsskäl avbryts alla rörelser när kåpan öppnas och startar inte igen förrän den stängs. Att öppna kåpan under en pågående infärgningsprocess kan medföra avvikande stegtider, fördröjningar och förändrade infärgningsresultat.
- Sträck dig inte in i ugnsluckans rörelseområde (ugns svängradie).



Obs!

Återstående infärgningsprogram fortsätter efter ett programavbrott.

6.6.5 Användning som arbetsstation

HistoCore SPECTRA ST kan användas som en arbetsstation tillsammans med en HistoCore SPECTRA CV automatisk täckglasapplikator. Detta möjliggör ett arbetsflöde utan avbrott, från infärgningsprocessen till avlägsnandet av de färdiga objektglasen med täckglas.

En överföringsstation finns som tillval för detta ändamål ([→ Sida 148 – 9.1 Valbara komponenter till instrumentet](#)).



Obs!

- Överföringsstationen (tillval) och anslutningen av en HistoCore SPECTRA CV till HistoCore SPECTRA ST kan endast installeras i efterhand av en servicetekniker certifierad av Leica.
- Alla program måste programmeras med en slutlig målstation. I arbetsstationsläge ska överföringsstationen väljas som sista steg.
- När du lägger in ett rack med ett vitt handtag öppnas ett programvalsfönster där ett färgprogram som är aktiverat i reagensuppställningen måste tilldelas till det vita handtaget (endast för detta program).
- Om överföringsstationen är definierad som den sista stationen i det tilldelade programmet måste det vita racket också tilldelas en lämplig parameteruppsättning för täckglasappliceringen i HistoCore SPECTRA CV. Användaren uppmanas att göra så i ett parametervalsfönster.

**Varning**

Användaren måste följa nedanstående punkter om instrumentet används som arbetsstation!

- Minst två utmatningsstationer i HistoCore SPECTRA ST måste vara tilldelade till och fyllda med samma godkända reagens (**UNL Xylene**) som laddningsstationerna i HistoCore SPECTRA CV.
- Det är helt nödvändigt att fylla utmatningsstationerna i HistoCore SPECTRA ST och laddningsstationerna i HistoCore SPECTRA CV med samma reagens, eftersom racken överförs till utmatningsstationen efter infärgningsprocessen om HistoCore SPECTRA CV inte är tillgänglig. Denna situation kan uppstå om reagenskyvetterna i laddningsfacket i HistoCore SPECTRA CV redan är fyllda med rack, om förbrukningsartiklar inte har fyllts på i tid eller på grund av instrumentfel.
- Om HistoCore SPECTRA CV temporärt inte kan ta emot rack från HistoCore SPECTRA ST på grund av att laddningsfacket i HistoCore SPECTRA CV är upptaget, transporteras racken till utmatningsfacket i HistoCore SPECTRA ST.
- Om det föreligger ett instrumentfel för överföringsstationen i HistoCore SPECTRA ST eller om laddningsfacket i HistoCore SPECTRA CV inte är helt stängt, transporteras racken till utmatningsfacket i HistoCore SPECTRA ST.
- Om det föreligger ett kvarstående fel för överföringsstationen ska man försöka göra en ominitialisering efter att infärgningsprocessen har avslutats. Kontakta Leicas tekniska service om detta inte fungerar.
- Ett rack för 5 objektglas kan inte överföras till HistoCore SPECTRA CV. Dessa rack placeras alltid i utmatningsfacket i slutet av infärgningsprocessen, oavsett om överföringsstationen har angetts som sista station i infärgningsprogrammet eller inte.
- Om ett vitt rackhandtag används måste färgen i infärgningsprogrammet väljas när racket förs in i laddningsfacket. Därefter öppnas ett andra fönster där en parameteruppsättning måste väljas för HistoCore SPECTRA CV. Färgen i parameteruppsättningen i HistoCore SPECTRA CV behöver inte överensstämma med färgen i det valda infärgningsprogrammet. Om HistoCore SPECTRA CV-parameteruppsättningen inte tilldelas transporteras racket till utmatningsfacket i HistoCore SPECTRA ST efter infärgningen. Ett meddelande informerar användaren om det.
- Användningen som arbetsstation beskrivs i detalj i bruksanvisningen för HistoCore SPECTRA CV.

**Varning**

Om de angivna stationerna inte har fyllts enligt rekommendationerna kan det leda till skadade preparat med sämre infärgningsresultat och lägre täckglasappliceringskvalitet. Att inte fylla de angivna stationerna kan leda till att preparat förstörs på grund av att de torkar ut.

6.6.6 Slutföra den dagliga användningen

När den dagliga infärgningen har slutförts ska instrumentet försättas i **standby-läge**:

1. Kontrollera om det finns rack kvar i följande stationer och avlägsna dem:
 - Laddningsfack (→ "Bild 65-9")
 - Utmatningsfack (→ "Bild 65-6")
 - Ugn (→ "Bild 65-1")
 - Torr överföringsstation (→ "Bild 65-7")
 - Reagenskyvettfält (→ "Bild 65-3"), (→ "Bild 65-4"), (→ "Bild 65-5") och (→ "Bild 65-8")
2. Täck därefter över alla reagenskyvetter med reagenskyvettlocken.
3. Tryck en gång på den gröna **driftströmbrytaren** (→ "Bild 9-2").
4. Instrumentet uppmanar användaren att bekräfta att instrumentet ska stängas av genom att trycka på **driftströmbrytaren** igen.
5. Efter den andra tryckningen på **driftströmbrytaren** sker en kontrollerad avstängning av instrumentet.
6. **Driftströmbrytaren** lyser nu rött och instrumentet befinner sig i **standby-läge**.
7. Stäng avslutningsvis av vattentillförseln.

**Varning**

- Om rengöring eller underhåll ska utföras på instrumentet måste det också stängas av med hjälp av **huvudströmbrytaren** (→ "Bild 9-1").
- För att säkerställa att instrumentets mjukvara fortsatt fungerar bra måste instrumentet startas om minst var 3:e dag. Detta gäller både för HistoCore SPECTRA ST och HistoCore SPECTRA CV som fristående användning samt vid användning som arbetsstation. Detta innebär även att HistoCore SPECTRA CV måste startas om minst var 3:e dag.

7. Rengöring och underhåll

7.1 Viktig information om rengöring av instrumentet



Varning

Allmän information:

- Före all rengöring ska instrumentet stängas av med **driftströmbrytaren** (→ "Bild 9-2") och sedan kopplas från med **huvudströmbrytaren** (→ "Bild 9-1").
- Bär lämpliga skyddskläder (labbrock och handskar) när du rengör instrumentet för att skydda dig mot reagenser och potentiellt smittsamma mikrobiologiska föroreningar.
- Ingen vätska får komma i kontakt med de elektriska anslutningarna, komma in i instrumentet eller i höljet under överföringsarmarna.
- Om överföringsarmen/-armarna måste lyftas och förflyttas får man inte vidröra sensorn/antennen eller använda detta område för att förflytta överföringsarmen/-armarna (→ "Bild 115-6"). Använd i stället griparens metalldel (→ "Bild 115-1") och lyft den manuellt. Förflytta sedan överföringsarmen/-armarna till önskad position.
- Vid hantering av rengöringsmedel ska tillverkarens säkerhetsföreskrifter och de laboratorieföreskrifter som gäller i användarlandet följas.
- Kassera förbrukade reagenser i enlighet med de riktlinjer för laboratorier som gäller i användarlandet.

För alla ytor på instrumentet gäller:

- Torka genast upp utspillda lösningsmedel (reagenser). Kåpans yta tål inte att utsättas för lösningsmedel under längre tid!
- Använd inget av följande vid rengöring av instrumentets utvändiga ytor: alkohol, rengöringsmedel som innehåller alkohol (t.ex. fönsterputsmedel), rengöringspulver med slipmedel, lösningsmedel som innehåller aceton eller xylene.

7.2 Utvändiga ytor, lackerade ytor, instrumentets kåpa

Ytorna kan rengöras med ett mildt och pH-neutralt kommersiellt rengöringsmedel. Efter rengöringen ska ytorna torkas av med en trasa som har fuktats med vatten.



Varning

Lackerade instrumentytor och ytor av plast (t.ex. instrumentets kåpa) får inte rengöras med lösningsmedel såsom aceton, xylene, toluol, xylensubstitut, alkohol, alkoholblandningar eller slipande medel! Ytorna och instrumentets kåpa tål inte att utsättas för lösningsmedel under längre tid.

7.3 TFT-pekskärm

Rengör bildskärmen med en luddfri trasa. Lämpliga rengöringsmedel för bildskärmar kan användas om tillverkarens anvisningar följs.

7.4 Insida och avrinningskärl

- Vid rengöring av det invändiga utrymmet och avrinningskärlet ska reagenskyvetterna och sköljvattenkyvetterna tas bort.

Använd ett mildt och pH-neutralt kommersiellt rengöringsmedel när du rengör dessa områden.

- När avrinningskärlet har rengjorts ska det tvättas noggrant med vatten.

7.5 Överföringsarmar

Rengör överföringsarmarnas ytor (→ "Bild 93-1") genom att torka av dem med en trasa fuktad med vatten eller ett mildt och pH-neutralt rengöringsmedel.



Varning

Se till att inga vätskor spills under höljet (→ "Bild 93-2") till överföringsarmarna eftersom det finns ömtåliga komponenter där.

7.6 Avläsningsstation för objektglas

Kontrollera att det inte finns någon smuts eller rester av reagenser i fördjupningen under avläsningsstationen för objektglas. Om objektglas med skadade kanter används kan små glasskärvor och flisor ha samlats upp här (→ "Bild 93-3"). Därför måste alla föroreningar avlägsnas försiktigt så att skador undviks.



Varning

Bär lämpliga skyddskläder (labbrock och handskar) för att skydda dig mot skärsår.

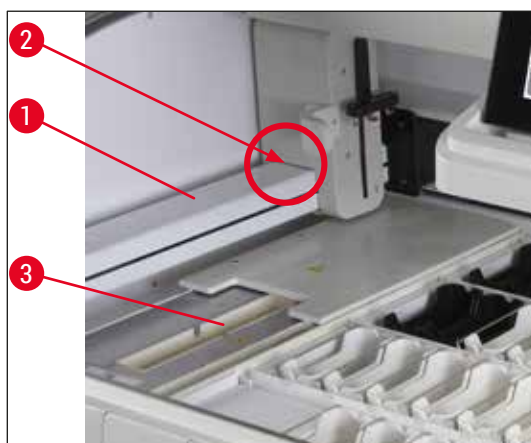


Bild 93

7.7 Laddnings- och utmatningsfack

- Ta ut reagenskyvetterna ur båda facken och förvara dem utanför instrumentet.
- Kontrollera att det inte finns någon reagens kvar i facken. Avlägsna eventuella rester.
- Sätt avslutningsvis tillbaka reagenskyvetterna på rätt plats.
- Observera märkningen (→ "Bild 94-1") för stationer i facken.

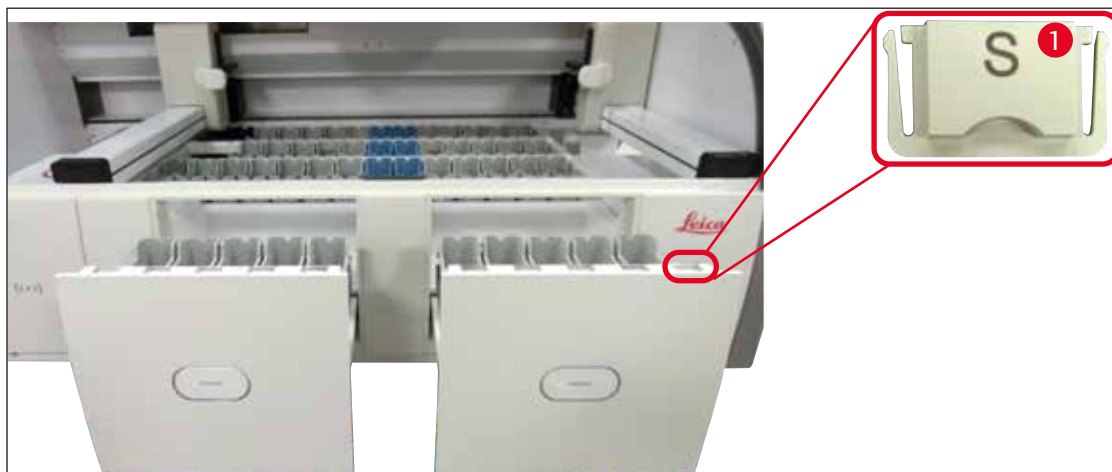


Bild 94



Obs!

Använd etiketterna som finns i (→ Sida 18 – 3.1 Standardleverans) för att märka reagenskyvetterna i laddnings- och utmatningsfacken. De präglade bokstäverna har följande innebörd:

- H₂O = vatten eller destillerat vatten
- A = alkohol
- S = lösningsmedel (engelska: solvent), t.ex. xylen

7.8 Torr överföringsstation

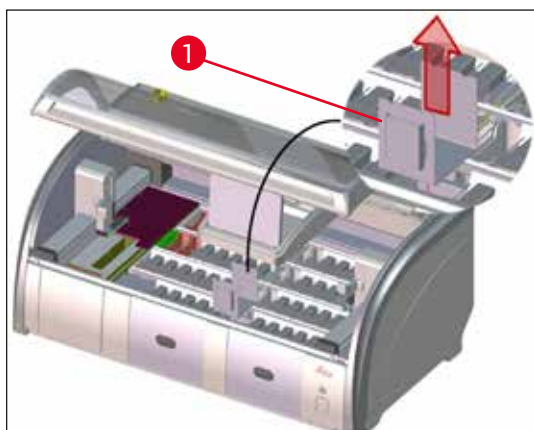


Bild 95

Reagenser kan droppa ner på den torra överföringsstationens mellanlägg. Dessa rester ska avlägsnas regelbundet.

- För att göra detta avlägsnar du mellanlägget (→ "Bild 95-1") till den torra överföringsstationen genom att dra det uppåt. Kontrollera om det är kontaminerat och rengör det vid behov.
- Sätt därefter tillbaka mellanlägget och se till att det hakar fast korrekt.

7.9 Överföringsstation (tillval)

- Kontrollera överföringsstationen (→ "Bild 96") regelbundet för att se om det finns kvarvarande reagenser i den.
Rengör den med ett kommersiellt mildt, pH-neutralt rengöringsmedel vid behov.

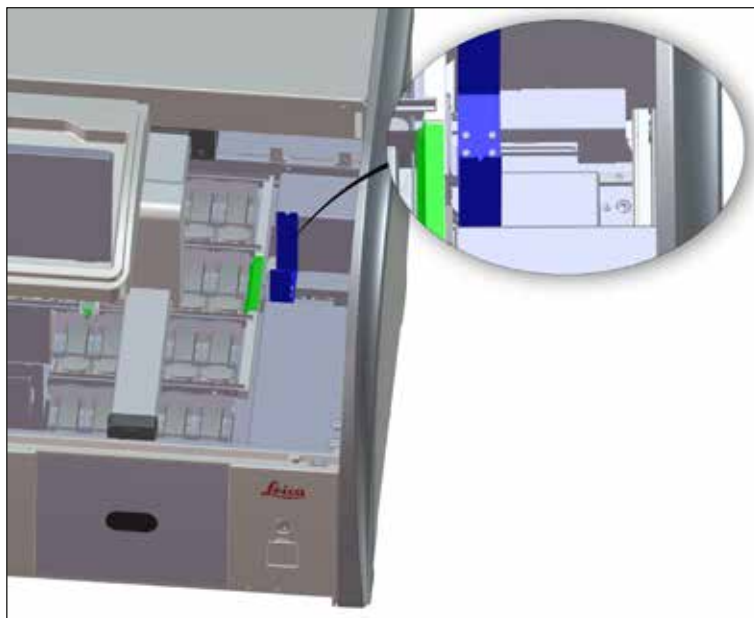


Bild 96

7.10 Reagenskyvetter och sköljvattenkyvetter

Allmänt

- Lyft ut kyvetterna en och en i handtaget. Se till att handtaget sitter i rätt position (→ Sida 86 – 6.2.1 [Förbereda och hantera reagenskyvetter](#)) för att förhindra att reagensen spills.
- Kassera reagenserna enligt de lokala laboratorieföreskrifterna.
- Reagens- och sköljvattenkyvetter kan rengöras i diskmaskin med en maxtemperatur på 65 °C och ett vanligt, kommersiellt diskmedel för laboratoriediskmaskiner. Handtagen kan sitta kvar på de olika kyvetterna när de rengörs.
- O-ringen (→ "Bild 97-1") måste sitta kvar på sköljvattenkyvetten.



Varning

- Reagenskyvetterna av plast får under inga omständigheter rengöras vid högre temperaturer än 65 °C, eftersom det kan leda till att reagenskyvetterna deformeras.

Reagenskyvetter



Varning

- För att förhindra skador på beläggningsen på belagda tillbehör (mellanlägg för specialinfärgning och objektglashandtag för 5 objektglas) får dessa inte rengöras i diskmaskin. Se också till att beläggningsen inte skadas när tillbehören rengörs för hand. Om belagda tillbehör är skadade kan de orsaka kemiska reaktioner med reagenser för särskilda användningsområden (→ Sida 159 – A1. Bilaga 1 – Godkända reagenser).
- Färgningsreagenskyvetter ska rengöras för hand innan de körs i diskmaskin. Färgrester ska i möjligaste mån avlägsnas så att de övriga reagenskyvetterna i diskmaskinen inte missfärgas.
- Om de rengjorda och fyllda reagenskyvetterna ska sättas tillbaka i instrumentet måste de placeras i rätt position enligt ordningen i reagensuppställningen (→ Sida 74 – 5.9.9 Skapa reagensuppställningen). Starta instrumentet och initiera instrumentet för att göra detta.

Sköljvattenkyvetter

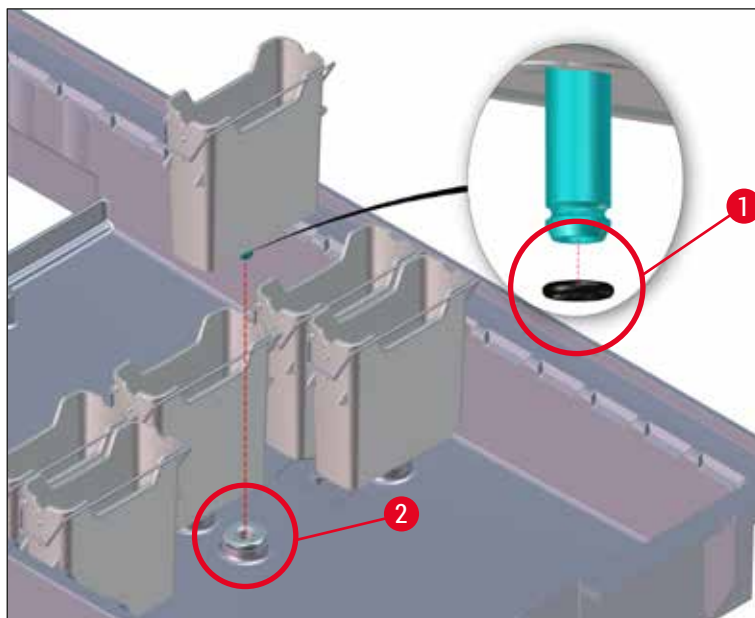


Bild 97



Varning

- Sätt inte tillbaka sköljvattenkyvetter utan O-ring eller med en skadad O-ring! Om en O-ring inte omedelbart kan bytas ut måste den aktuella sköljvattenkyvetten avlägsnas från instrumentet.
- Användaren måste då göra en **Skanning av påfyllningsnivå**. Programvaran upptäcker den saknade kyvetten och markerar den som defekt. Om endast 1 eller 2 sköljvattenkyvetter påverkas kan program som innehåller ett steg med sköljvatten fortfarande startas.
- Om de två främre sköljvattenkyvetterna definieras som avjoniserat vatten och en av de två saknas kan det ske fördröjningar i program som innehåller ett steg med avjoniserat vatten. Om båda sköljvattenkyvetterna måste avlägsnas kan program som innehåller ett steg med avjoniserat vatten inte startas!
- Byt ut den saknade/defekta O-ringen och smörj med Molykote111. Sätt tillbaka sköljvattenkyvetten i enheten och gör en **Skanning av påfyllningsnivå**. Programvaran känner av att sköljvattenkyvetterna är redo att användas igen.



Obs!

- Sköljvattenkyvetterna ska kontrolleras regelbundet med avseende på kalkavlagringar, synliga mikrobiologiska bakteriebeläggning, svamp, alger samt genomsläpplighet. Kalkrester kan avlägsnas med hjälp av en mild ättikslösning. Därefter ska kyvetterna sköljas med rent vatten tills inga rester av rengöringsmedlet finns kvar. O-ringar (→ "Bild 97-1") måste kontrolleras med avseende på skador. Byt ut skadade O-ringar mot nya (→ Sida 148 – 9.2 Valbara tillbehör).
- Efter att du har rengjort sköljvattenkyvetterna och innan du sätter in dem i instrumentet igen måste anslutningsstycket till vattentillförselsystemet kontrolleras så att det sitter rätt på O-ringen (→ "Bild 97-1").
- Om det finns O-ringar kvar i instrumentet när en sköljvattenkyvett tas ur (→ "Bild 97-2") ska de avlägsnas försiktigt med en tång och sättas tillbaka på anslutningsstycket.
- Om en O-ring saknas eller sitter fel får sköljvattenkyvetterna inte sättas tillbaka efter rengöringen eftersom det då finns risk för att sköljningen inte fungerar som den ska under infärgningsprocessen.
- När en O-ring har satts fast eller rättats till ska den smörjas med Molykote 111 smörjfett som ingår i (→ Sida 18 – 3.1 Standardleverans).
- Därefter kan sköljvattenkyvetterna sättas tillbaka på sin plats.

7.11 Rack och handtag

- Racket ska kontrolleras regelbundet så att det inte finns några infärgningsrester eller andra möjliga föroreningar på det.
- Det färgade handtaget måste avlägsnas från instrumentet när det ska rengöras.
- För att avlägsna infärgningsrester från racken ska de sänkas ner i ett bad med ljummet vatten och ett milt, pH-neutralt rengöringsmedel för laboratorier. Låt rengöringsmedlet verka. Det är viktigt att noggrant följa tillverkarens anvisningar för rengöringsmedlet samt rekommenderat användningsområde.
- Svåra infärgningsföroreningar kan avlägsnas med en borste.
- Tvätta sedan racken noggrant med rent vatten tills inga rester av infärgning eller rengöringsmedel kvarstår.
- Om det finns kvar rester av monteringsmedel på racken kan de läggas i ett bad med lösningsmedel.

**Varning**

Racken och handtagen får inte ligga kvar i lösningsmedlet för länge (t.ex. flera timmar eller över natten), eftersom det kan leda till deformationer!

Det är viktigt att säkerställa att det lösningsmedel som används är kompatibelt med monteringsmedlet. Xylen- eller toluenbaserade monteringsmedel kan avlägsnas i xylenbad. Xylensubstitutbaserade monteringsmedel kan avlägsnas i bad bestående av motsvarande xylensubstitut.

**Obs!**

Verkningstiden i badet med lösningsmedel får vara högst en till två timmar. Därefter kan lösningsmedlet tvättas bort med alkohol. Tvätta racken noggrant med vatten och torka dem. Om en extern torkugn används för torkning får temperaturen inte överstiga 70 °C.

7.12 Vattenavlopp**Varning**

Instrumentets inbyggda avloppssystem måste regelbundet rengöras och kontrolleras så att flödet är korrekt. Om denna åtgärd inte har utförts kan det bli stopp i avloppssystemet, vilket kan leda till avbrott eller fel i infärgningsprocessen.

- För att rengöra av avloppssystemet tar du bort de fyra sköljvattenkyvetterna (→ "Bild 65-4") och alla kringliggande reagenskyvetter.
- Resterande reagenskyvetter ska täckas över med lock.
- Ta bort avloppssilen och rengör den vid behov (→ "Bild 98-1").
- För att avlägsna diverse rester (reagenser, bakterier, svamp, alger): Lägg en eller två rengöringstabletter med aktivt syre (t.ex. tandprotesrengöring) i avloppet och lös upp dem med vatten.
- Rengör sedan hela det svängda avloppsområdet inuti instrumentet med en lång, böjbar borste (→ "Bild 98-2").
- Spola ordentligt med vatten för att kontrollera att genomflödet är tillräckligt.
- Sätt i avloppssilen igen och sätt tillbaka kyvetterna i deras ursprungliga, angivna position.

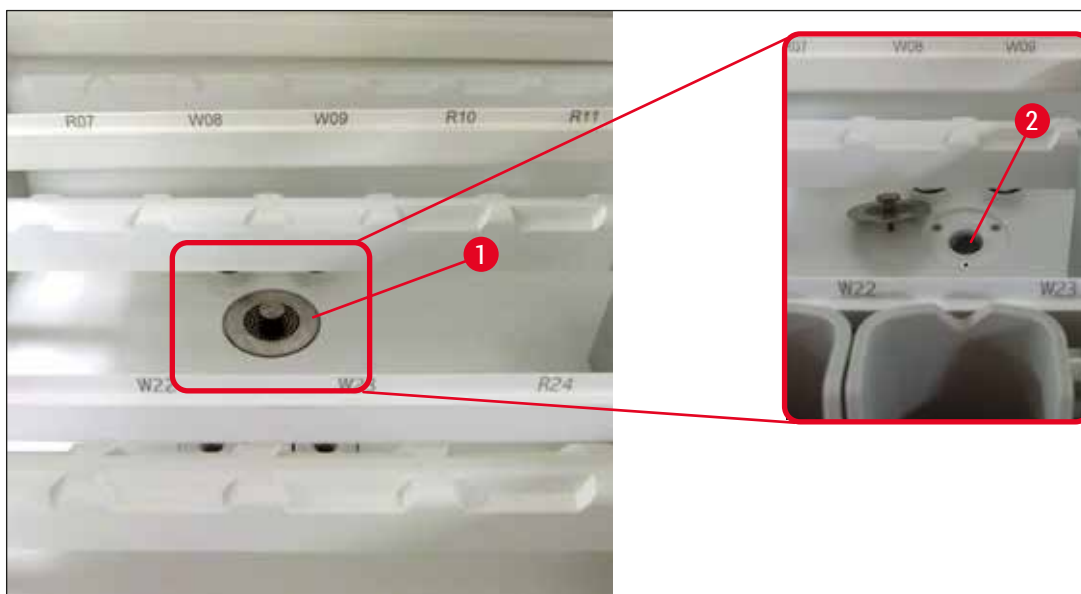


Bild 98

7.13 Vattenavloppsslang

Vattenavloppsslangen måste kontrolleras en gång om året av en Leica-auktoriserad servicetekniker.

7.14 Byta filterpatronen till vatteninloppsfiltret



Varning

Vattenfilterkåpan är inte lösningsmedelsbeständig och kan därför bli skör och gå sönder. Använd ingen form av alkohol eller rengöringsmedel som innehåller alkohol vid rengöring av vattenfilterkåpan (→ "Bild 99-2"). Det kan resultera i att vatten läcker ut okontrollerat och skadar laboratoriet och laboratoriemiljön.

Vatteninloppsfiltret med filterpatron bör kontrolleras och bytas en gång om året av en Leica-auktoriserad servicetekniker.

Det inbyggda vatteninloppsfiltret (→ "Bild 99") skyddar instrumentets invändiga vattenkretskomponenter mot skador som orsakas av avlagringar och mineralbeläggningar.

Vattenfiltrets hållbarhet beror på vattenkvaliteten på installationsplatsen. Den maximala livslängden för vattenfiltret är ett år.

Vatteninloppsfiltret ska därför kontrolleras regelbundet genom att man tittar genom filterhuset för att se om det finns synliga föroreningar.

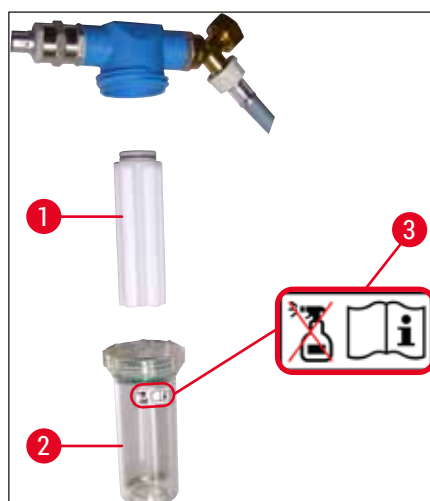


Bild 99

- 1 Filterhus
- 2 Filterpatron, Beställningsnr 14 0512 49332
- 3 Varningsetikett: Använd inte någon form av alkohol vid rengöring och följ instruktionerna i bruksanvisningen

**Obs!**

Om det finns betydande mängder synliga föroreningar i vattenfiltret innan underhållsintervallet (1 år) har passerat måste det bytas ut av en servicetekniker från Leica.

7.15 Byta det aktiva kolfiltret

De aktiva kolfiltren (→ "Bild 1-1") som är installerade i instrumentet bidrar till att reducera mängden reagensångor i den luft som släpps ut. Filtrets livslängd kan variera kraftigt beroende på hur ofta instrumentet används och reagenserna. Byt därför det aktiva kolfiltret regelbundet, men som minst var tredje månad, och kassera det på ett korrekt sätt enligt de laboratorieföreskrifter som gäller i användarlandet.

- Filterenheten består av två separata filterelement (→ "Bild 100-1") som användaren kommer åt från instrumentets framsida.
- Du kommer åt dem utan verktyg och avlägsnar dem genom att dra i dragflikarna (→ "Bild 100-2").
- Sätt i de nya filterelementen så att det går att komma åt dragflikarna när de är helt isatta och så att artikelnumret (→ "Bild 100-3") som är tryckt på dem går att läsa.
- Skriv isättningsdatumet för filterelementet på den vita etiketten och fäst etiketten på det aktiva kolfiltrets vänstra eller högra sida (→ "Bild 100-4").
- Båda de aktiva kolfiltren måste skjutas in tills det känns att de ligger an mot instrumentets bakvägg.



Bild 100

**Varning**

Om de sätts i fel kan de aktiva kolfiltren sticka ut i de två överföringsarmarnas rörelseområde och på så sätt hindra eller avbryta infärgningsprocessen.

7.16 Rengöra ugnarna**Varning**

- Varning för heta ytor: När ugnen har använts i infärgningsprocessen ska instrumentet först stängas av och ugnen svalna i minst 10 minuter innan den rengörs. Vidrör bara ugnsinseterna på de anvisade ställena.
- Ugnens insida får inte rengöras med lösningsmedel eftersom det finns risk för att rester av lösningsmedlet tränger in i ugnen och sedan förångas när processen startar.

Kontrollera regelbundet om det finns smuts på plåtsinseterna som samlar upp paraffinrester i ugnen.

- Dra ut det rörliga locket till ugnen för hand (→ "Bild 101-1") i riktning mot instrumentets framsida. Ugnsluckan får då inte vara uppfälld i sidled.
- Vid behov kan den vänstra överföringsarmen försiktigt skjutas åt sidan så att det går att komma åt ugnsinseten utan problem.

**Varning**

Om överföringsarmen/-armarna måste lyftas och förflyttas får man inte vidröra sensorn/antennen eller använda detta område för att förflytta överföringsarmen/-armarna (→ "Bild 115-6"). Använd i stället griparens metalldel (→ "Bild 115-1") och lyft den manuellt. Förflytta sedan överföringsarmen/-armarna till önskad position.

- Ta först tag i sidorna på den främre ugninsatsen (→ "Bild 101-2") och lyft den uppåt, ut ur instrumentet. Ta sedan bort den bakre ugninsatsen (→ "Bild 102-2").
- Ta isär de båda ugnskamrarna genom att dra dem uppåt, från varandra.
- Du kan sedan dra ut insatsen som samlar upp paraffinrester ur respektive ugninsats (→ "Bild 102-3") och (→ "Bild 102-4").
- Kontrollera om det finns paraffinrester och föroreningar på plåtmellanläggen. För att smälta paraffinet kan mellanläggen läggas i en extern laboratorieugn.
- När de har värmts upp kan paraffinresterna torkas bort med en luddfri trasa.
- Kontrollera att ventilationsspjällen som sitter i ugnskamrarna fungerar korrekt. Torka försiktigt bort eventuell synlig smuts med en luddfri trasa.
- Skjut tillbaka plåtmellanläggen åt rätt håll (den perforerade sidan uppåt) i respektive ugninsats.
- Efter rengöringen sätter du först tillbaka den bakre ugninsatsen (→ "Bild 102-2") i instrumentet och därefter det främre ugninsatsen (→ "Bild 101-2"). Se till att de hopsatta ugninsatserna sitter korrekt.

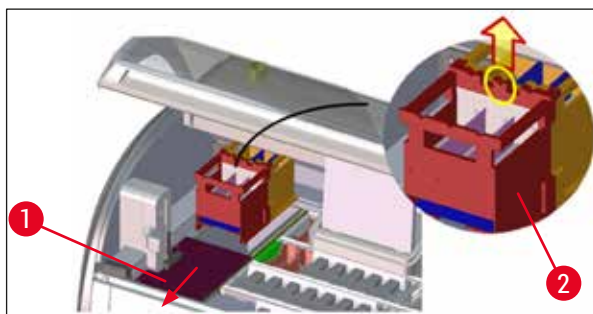


Bild 101

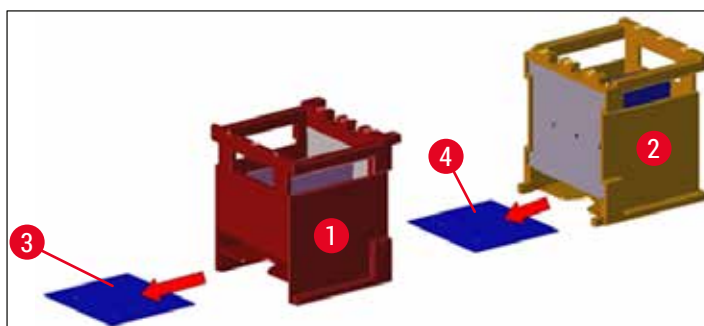


Bild 102

7.17 Ugnens luftfilter

Ugnens luftfilter bör kontrolleras regelbundet och rengöras eller bytas ut.

- För att göra detta tar du först bort filterinsatsen (→ "Bild 103-1") och skakar ur den eller ersätter den med en ny filterinsats (→ Sida 148 – 9.2 Valbara tillbehör).
- Efter kontroll och rengöring ska den sättas tillbaka i ugnen på samma sätt.

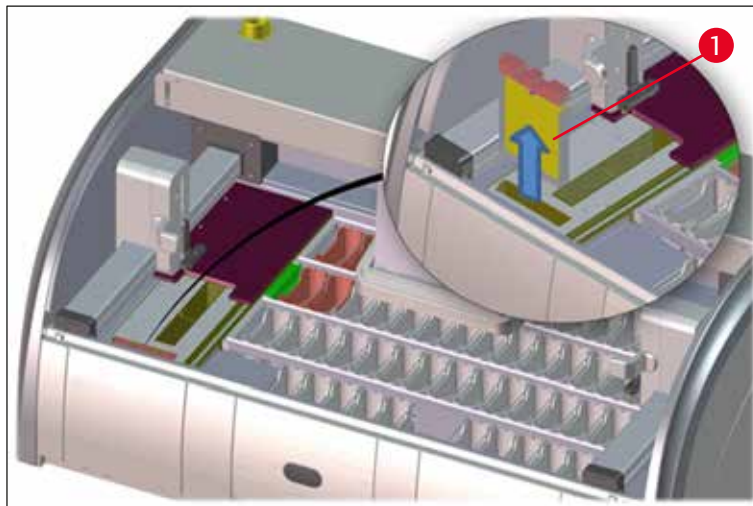


Bild 103



Obs!

Monteringen sker i omvänd ordning.

7.18 Intervall för underhåll och rengöring



Varning

- Följande underhålls- och rengöringsarbeten måste utföras.
- Minst en gång om året ska instrumentet kontrolleras av en Leica-auktoriserad servicetekniker för att en fortsatt funktionsduglighet ska kunna garanteras.

För att säkerställa att instrumentet fungerar felfritt på lång sikt rekommenderas följande:

- Att ett underhållsavtal tecknas efter garantitidens utgång. Mer information om detta finns hos ansvarig serviceorganisation.

7.18.1 Dagligt underhåll och rengöring

**Varning**

Om ömtåliga instrumentdelar och -områden blir väldigt smutsiga eller om reagenser spills på dem måste delarna rengöras direkt för att säkerställa ett driftsäkert arbetsflöde.

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Kontrollera och fyll/fyll på reagenskyvetterna. | (→ Sida 86 – 6.2.1 Förbereda och hantera reagenskyvetter) |
| 2 | Täck över reagenskyvetterna och förvara dem övertäckta i kylskåp vid behov. | |
| 3 | Kontrollera om det finns paraffin- eller färgrester och krossat glas i racken och på handtagen. | (→ Sida 116 – 7.11 Rack och handtag) |
| 4 | Kontrollera om det finns reagensrester i avläsningsstationen för objektglas och rengör den vid behov. | (→ Sida 112 – 7.6 Avläsningsstation för objektglas) |
| 5 | Kontrollera om det finns lösningsmedelsrester på ytorna kring laddnings- och utmatningsfacken och rengör dem vid behov. | (→ Sida 113 – 7.7 Laddnings- och utmatningsfack) |
| 6 | Kontrollera och rengör den torra överföringsstationens mellanlägg vid behov. | (→ Sida 113 – 7.8 Torr överföringsstation) |
| 8 | Kontrollera om det finns reagensrester i överföringsstationen (tillval) och rengör den vid behov. | (→ Sida 114 – 7.9 Överföringsstation (tillval)) |

7.18.2 Underhåll och rengöring efter behov

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Rengör bildskärmen med en luddfri trasa. Ett rengöringsmedel för bildskärmar kan användas om tillverkarens anvisningar följs. | (→ Sida 111 – 7.3 TFT-pekskärm) |
| 2 | Rengör utvändiga/målade ytor. | (→ Sida 111 – 7.2 Utvändiga ytor, lackerade ytor, instrumentets kåpa) |
| 3 | Rengör instrumentets kåpa. | (→ Sida 111 – 7.2 Utvändiga ytor, lackerade ytor, instrumentets kåpa) |
| 4 | För att säkerställa att instrumentets mjukvara fortsatt fungerar bra måste instrumentet startas om minst var 3:e dag. | (→ Sida 110 – 6.6.6 Slutföra den dagliga användningen) |

7.18.3 Rengöring och underhåll varje vecka

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Kontrollera sköljvattenkyvetterna och rengör om det finns bakteriella kontamineringar. Kontrollera att O-ringarna är hela och att de sitter på plats. Skadade O-ringar måste bytas ut mot nya. | (→ Sida 114 – 7.10 Reagenskyvetter och sköljvattenkyvetter) |
| 2 | Rengör reagenskyvetterna. | (→ Sida 114 – 7.10 Reagenskyvetter och sköljvattenkyvetter) |
| 4 | Rengör racken och handtagen. | (→ Sida 116 – 7.11 Rack och handtag) |
| 5 | Kontrollera att vattenavloppet och silen inuti instrumentet fungerar och rengör vid behov. | (→ Sida 117 – 7.12 Vattenavlopp) |
| 6 | Kontrollera om det finns smuts på överföringsarmarna och rengör dem vid behov. | (→ Sida 112 – 7.5 Överföringsarmar) |

7.18.4 Rengöring och underhåll varje månad

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Kontrollera vattentillloppsfiltret (visuell kontroll genom filterhuset). | (→ Sida 118 – 7.14 Byta filterpatronen till vatteninloppsfiltret) |
| 2 | Kontrollera, rengör eller byt vid behov ut luftfiltret till torkugnen. | (→ Sida 148 – 9.2 Valbara tillbehör)
(→ Sida 122 – 7.17 Ugnens luftfilter) |
| 3 | Rengör dräneringstråget. | (→ Sida 112 – 7.4 Insida och avrinningskärl) |
| 4 | Kontrollera om det finns paraffinrester på torkugnsinsatsen och uppsamlingsbrickan. Rengör vid behov. | (→ Sida 120 – 7.16 Rengöra ugnarna) |

7.18.5 Rengöring och underhåll var tredje månad

- | | | |
|---|----------------------------|--|
| 1 | Byt det aktiva kolfiltret. | (→ Sida 119 – 7.15 Byta det aktiva kolfiltret) |
|---|----------------------------|--|

7.18.6 Rengöring och underhåll varje år

- | | |
|---|---|
| 1 | Kontroll och underhåll av instrumentet som utförs av en Leica-auktoriserad servicetekniker. |
|---|---|

8. Fel och felsökning

8.1 Åtgärder för fel på instrumentet

Fel/avvikelse

Stigande vattennivå i avrinningskärlet med larm.

Orsak

Vattenavloppet helt eller delvis blockerat

Avloppssystemet inuti instrumentet och/eller avloppssilen helt eller delvis blockerade.

Felsökning

Kontroll och underhåll av vattenavloppsslangen (→ "Bild 7-1"). Kontakta ansvarig Leica-service för detta.

Kontroll och underhåll av avloppssystemet i instrumentet.

Se rengöringsanvisningarna i avsnittet (→ Sida 122 – 7.18 Intervall för underhåll och rengöring).

Om blockeringen kvarstår stoppas vattenflödet till sköljvattenkyvetterna och infärgningsprocessen avbryts. Därför måste preparaten avlägsnas från instrumentet och placeras på en säker plats eller på en tillfällig förvaringsplats (→ Sida 128 – 8.2 Strömavbrott och fel på instrumentet).

Kontroll och underhåll av sköljvattenkyvetterna.

Se rengöringsanvisningarna (→ Sida 114 – 7.10 Reagenskyvetter och sköljvattenkyvetter). Kontrollera O-ringen och kontaktdonet till sköljvattenkyvett.

Följ regelbundna underhållsintervall.

Minskad tvättning under pågående infärgningsförlopp med möjliga inkonsekventa infärgningsresultat.

Vattentillförseln i sköljvattenkyvetterna reducerad/blockerad.

Möjliga orsaker:

- Sköljvattenkyvetterna sitter inte ordentligt (trasigt kontaktdon till sköljvattenkyvett eller trasig O-ring).
- Kalkavlagringar i sköljvattenkyvetterna.

Sköljvattenkyvetterna töms inte automatiskt under instrumentets driftuppehåll. Stillastående vatten kan utgöra en källa till mikrobiologisk förorening av sköljvattenkyvetterna och proverna.

Det extra avloppshålet längst ner i sköljvattenkyvetterna är igensatt av avlagringar/smuts.

Kontroll och underhåll av sköljvattenkyvetterna.

Se rengöringsanvisningarna (→ Sida 114 – 7.10 Reagenskyvetter och sköljvattenkyvetter).

Följ regelbundna underhållsintervall.

Fel/avvikelse	Orsak	Felsökning
Otillräcklig sköljning under pågående infärgningsprocesser kan leda till inkonsekventa infärgningsresultat.	Vattentrycket i labbets vattensystem är för lågt eller växlar under dagen.	De angivna minimikraven för vattentryck (→ Sida 19 – 3.2 Specifikationer) måste uppfyllas (även under eventuella avvikelser under dagtid).
Reagenskyvetterna är deformerade.	Användning av otillåtna reagenser (t.ex. fenol i Ziehl-Neelsen-infärgning eller Gram-infärgning osv.). Felaktigt utförd rengöring.	Kontrollera reagenserna med hjälp av listan över godkända reagenser (→ Sida 159 – A1. Bilaga 1 – Godkända reagenser). Se rengöringsanvisningarna (→ Sida 114 – 7.10 Reagenskyvetter och sköljvattenkyvetter).
Inkonsekventa infärgningsresultat	Toleransen för ett programsteg för infärgningsreagenser är inte korrekt angiven.	Kontrollera infärgningsprogram och reagenser. De flesta korta programsteg kräver att infärgningssteget följs exakt. Reagensens tolerans måste ställas in på 0 %.
Avvikande infärgningsresultat	Processklasserna (avlägsnande av paraffin, infärgning osv.) för reagenser har inte tilldelats korrekt. Det här innebär att reagensuppställningen inte har skapats på ett korrekt sätt. Reagenser som endast ska användas i ett program används av flera program. Reagensen var förorenad eftersom den inte hade programmerats som "Exklusive".	Kontroll och korrigering av tilldelade reagensklasser (→ Sida 56 – Skapa en ny reagens eller kopiera en reagens).
Bristfällig infärgningskvalitet	Vattenkvaliteten motsvarar inte: • ISO 3696: 1995 Typ 3/ASTM D1193-91 Typ IV • Dricksvattenkvalitet, enligt tillämpliga officiella bestämmelser Olämpligt surt pH-värde i den anslutna vattentillförseln kan påverka infärgningens reaktion och kan leda till avvikande infärgningsresultat.	Testa vattenkvaliteten enligt ISO 3696: 1995 Typ 3/ASTM D1193-91 Typ IV och justera vattenkvaliteten vid behov. Om problemet fortfarande kvarstår, kontakta din lokala Leica-support för service och tillämpning för att diskutera andra alternativ anpassning av installation och protokoll.

Fel/avvikelse	Orsak	Felsökning
Otillräcklig vattenkvalitet påverkar vattenkyvetternas stigningsfunktion (instrumentdelar kan skadas)	Vattenkvaliteten motsvarar inte: - ISO 3696: 1995 Typ 3/ASTM D1193-91 Typ IV - Dricksvattenkvalitet, enligt tillämpliga officiella bestämmelser	Testa vattenkvaliteten enligt ISO 3696: 1995 Typ 3/ASTM D1193-91 Typ IV och justera vattenkvaliteten vid behov. Om problemet fortfarande kvarstår, kontakta din lokala Leica-support för service och tillämpning för att diskutera andra alternativ anpassning av installation och protokoll.
Vävnad fäster dåligt på objektglaset efter torkning och flyter iväg under infärgningsprocessen.	Surt pH-värde kan skada instrumentdelar av rostfritt stål	Kontrollera och korrigera uppvärmningstid och ugnstemperatur för kunddefinierade program.
Trots att infärgningsprocesserna är slutförda går det inte att utföra nya eller ytterligare programmeringar (arbetsledarläge).	Kunddefinierade program: Den valda uppvärmningstiden och/eller ugnstemperaturen är för lågt inställda. Programmering kan endast slutföras när instrumentet befinner sig i viloläge. Detta innebär att inga rack får vara aktiva, inklusive utmatningsfacken.	Avlägsna racken från utmatningsfacket. Utför därefter programmeringen.
Initieringen av instrumentet kan inte slutföras.	Armarna är blockerade.	Kontrollera att det aktiva kolfiltret sitter korrekt.
Den automatiska skanningen av påfyllningsnivå visar felaktiga resultat.	De handtag som används till reagenskyvetterna sticker ut över reagenskyvetterna och tolkas felaktigt i skanningen av påfyllningsnivån.	Kontrollera att reagenskyvetternas handtag sitter korrekt och korrigera vid behov.
Den automatiska skanningen av påfyllningsnivån visar felaktiga resultat för laddningsfackets stationer och/eller den torra överföringsstationen. Enstaka stationer rapporteras som "Saknas".	Avlagringar på botten av de tomma reagenskyvetterna och/eller den torra överföringsstationen påverkar mätmetoden för den automatiska skanningen av påfyllningsnivån.	Rengör reagenskyvetterna och/eller den torra överföringsstationen och avlägsna eventuella kalkrester. Upprepa därefter skanningen av påfyllningsnivån (→ Sida 88 – 6.2.2 Automatisk skanning av påfyllningsnivå).

**Obs!**

Skärmmeddelanden för vissa fel innehåller bildsekvenser för att vägleda användaren genom felsökningsprocessen (→ ["Bild 120"](#)).

8.2 Strömavbrott och fel på instrumentet

**Obs!**

- I händelse av ett kortvarigt strömavbrott (några sekunder) har HistoCore SPECTRA ST en intern UPS (avbrottssäker strömkälla). Användaren informeras om det kortvariga strömavbrottet via ett informationsmeddelande på skärmen. Informationsmeddelandet försvinner så fort strömmen kommer tillbaka. Händelsen läggs till i händelseloggen.
- Att kringgå ett längre strömavbrott är endast möjligt med hjälp av en extern UPS (→ [Sida 29 – 4.3.1 Använda en extern avbrottsfri strömkälla \(UPS\)](#)).

Instrumentet stängs av vid ett längre strömavbrott (> 3 sekunder). Händelsen läggs till i händelseloggen.

Den interna UPS:en säkerställer att överförbara rack placeras i en säker position ovanför två reagensstationer (→ "[Bild 104](#)") för att förhindra att dessa av misstag sänks ner i en felaktig reagens.

**Varning**

Reagenser kan hamna fel till följd av att det finns reagenser kvar när ett rack flyttas. Kontrollera om det finns föroreningar i reagenskylvetterna och byt ut dem vid behov innan en infärgningsprocess startas (→ [Sida 96 – Reagensbyte](#)).



Bild 104

Instrumentet startas om så fort strömmen kommer tillbaka.

Under initieringen skickar instrumentets mjukvara ut en serie meddelanden och instruktioner till användaren, vilket ger hen information om strömavbrottet samt instruktioner om åtgärder.

Användaren kan avbryta eller fortsätta infärngningsprocessens mjukvara med hjälp av informationen på skärmen.



Varning

Rack som befinner sig i en "kritisk" position måste omedelbart avlägsnas från instrumentet av användaren.

Reagensstationer som räknas som i "kritiska" positioner är de vars överdrivet långa verkningstid kan leda till försämrade infärngningskvalitet eller förstörda prover.

Kritiska positioner:

- » Stationer för kranvatten (→ "Bild 105-1") och avjoniserat vatten (→ "Bild 105-2")
- ① Kyvetterna kan tömmas och preparaten kan torka ut genom automatisk, kontinuerlig uttömning av vatten i kyvetternas botten. Preparaten måste avlägsnas från instrumentet och förvaras på ett säkert sätt, dvs. infärngningen måste slutföras manuellt.
- » Torr överföringsstation (→ "Bild 105-3")
- ① Preparatet är inte placerat i en reagens och kan torka ut. Preparaten måste avlägsnas från instrumentet och förvaras på ett säkert sätt, dvs. infärngningen måste slutföras manuellt.
- » Avläsningsstation för objektglas (SID): (→ "Bild 105-4")
- ① Vid strömavbrott placeras ett rack som är isatt i avläsningsstationen för objektglas på en säker plats mellan två reagensstationer (→ "Bild 104"). Avlägsna racket enligt beskrivningen i (→ Sida 136 – 8.2.4 Avlägsna ett rack från griparmmekanismen) och sätt tillbaka det i laddningsfacket.
- » Ugnstationer: (→ "Bild 105-5")
- ① Temperaturen i ugnstationen kan sjunka under ett långvarigt strömavbrott. Det kan leda till att preparaten inte torkar ordentligt. De berörda racken ska avlägsnas från ugnen och sättas tillbaka i laddningsfacket.
- » Överföringsstation (→ "Bild 105-8")
- ① Preparaten är inte placerade i en reagens och kan torka ut. Preparaten ska avlägsnas från instrumentet och förvaras säkert eller sättas i manuellt och förses med täckglas i laddningsfacket i HistoCore SPECTRA CV.

**Varning**

Användaren måste kontrollera om det finns ytterligare rack i de kvarvarande reagensstationerna (→ "Bild 105-6"), i vilka för långa verkningstider kan leda till dålig infärgningskvalitet beroende på vilka reagenser som används i dessa stationer. Preparaten måste avlägsnas från instrumentet och förvaras på ett säkert sätt, dvs. infärgningen måste slutföras manuellt.

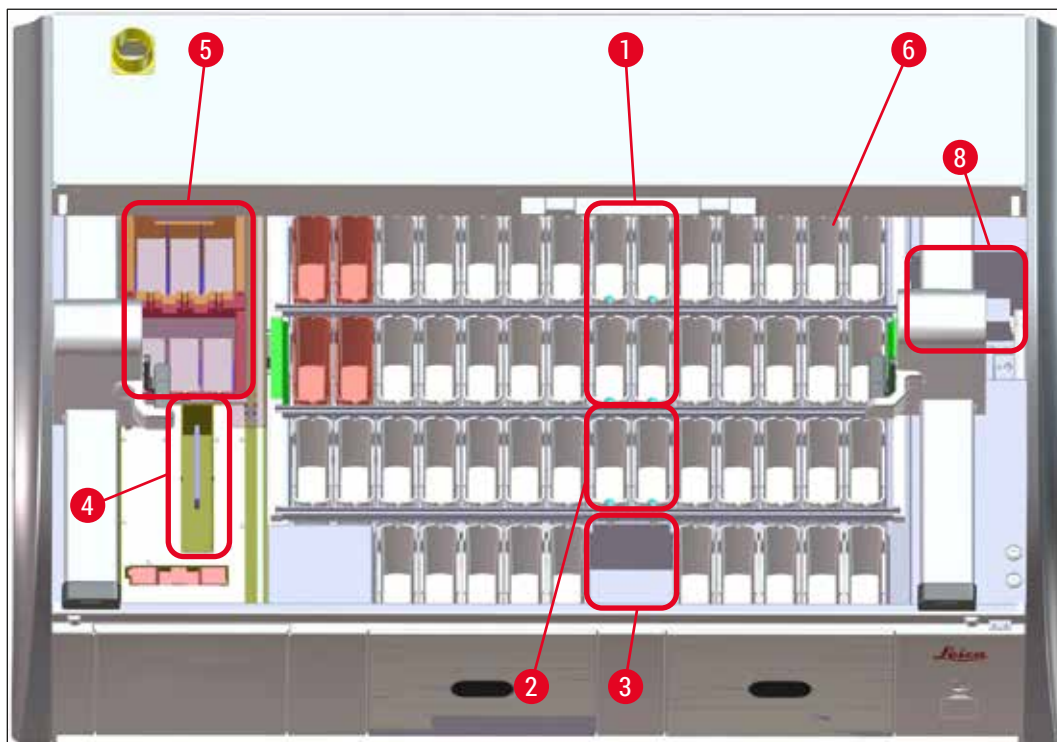


Bild 105

8.2.1 Rutin vid strömavbrott

- ① Det första informationsmeddelandet efter det att enheten har startats om informerar operatören om tidpunkten för strömavbrottet (→ "Bild 106"). Bekräfta informationsmeddelandet genom att trycka på **OK** för att få instruktioner för att fortsätta infärgningen.

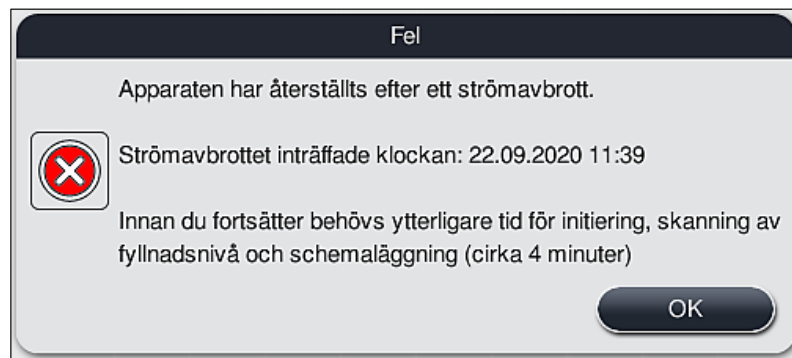


Bild 106

1. Efter det att informationsmeddelandet har bekräftats får användaren information om att infärgningsperioderna kan ha överskridits, dvs. enskilda rack kan ha legat för länge i en reagens vid vissa förhållanden eller i en kritisk station, vilket kan försämma infärgningskvaliteten. Bekräfta informationsmeddelandet (→ "Bild 107") och fortsätt genom att trycka på **OK**.



Bild 107

2. Därefter uppmanas användaren att kontrollera (→ "Bild 108") om instrumentet har placerat ett eller två rack i en säker position mellan två reagenskyvetter (→ "Bild 104").



Bild 108

3. Efter det att användaren har tryckt på knappen **OK** (→ "Bild 108") visas ett annat informationsmeddelande (→ "Bild 109") som informerar om hur respektive rack ska avlägsnas på ett korrekt sätt.

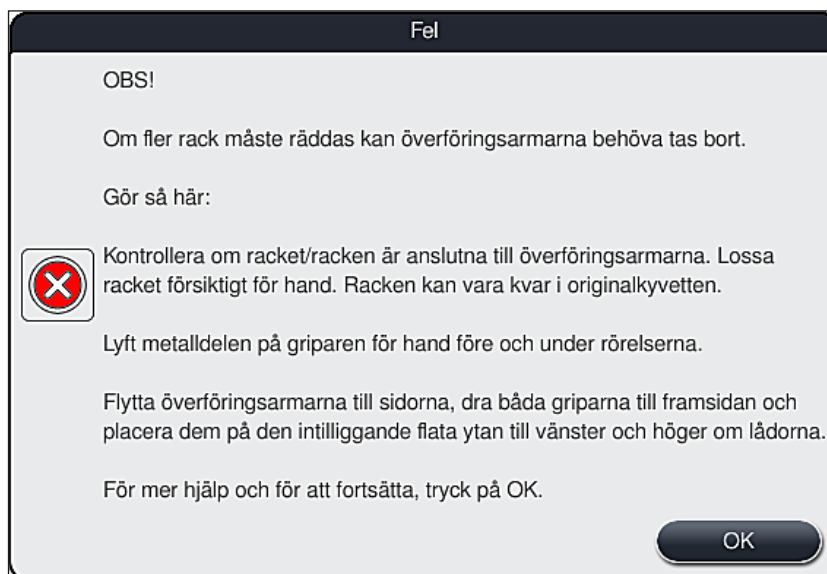


Bild 109

4. Därefter kan användaren välja att återuppta infärgningsprocessen (→ Sida 133 – 8.2.2 Återuppta infärgningsprocessen efter ett strömavbrott) eller avbryta den (→ Sida 134 – 8.2.3 Avbryta alla infärgningsprocesser vid ett strömavbrott) (→ "Bild 110").

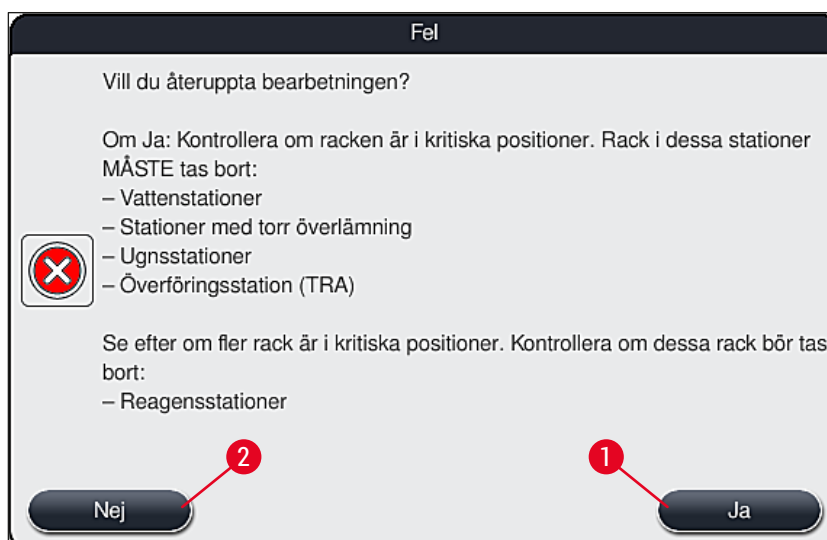


Bild 110

8.2.2 Återuppta infärgningsprocessen efter ett strömavbrott

1. För att återuppta infärgningsprocessen trycker du på knappen **Ja** (→ "Bild 110-1").

**Obs!**

I följande meny visas racken som är aktiva i översikten av reagensuppställningen (→ "Bild 111").

2. Avlägsna kritiska rack från instrumentet enligt instruktionerna i det tidigare informationsmeddelandet (→ "Bild 110") och bekräfta borttagningen genom att trycka på motsvarande station (→ "Bild 111-1") på skärmen.

**Obs!**

- Vid strömavbrott kan de aktiva racken endast avlägsnas på det sätt som beskrivs här.
- Preparaten från de borttagna racken måste förvaras på ett säkert sätt utanför instrumentet, dvs. infärgningen måste slutföras manuellt.

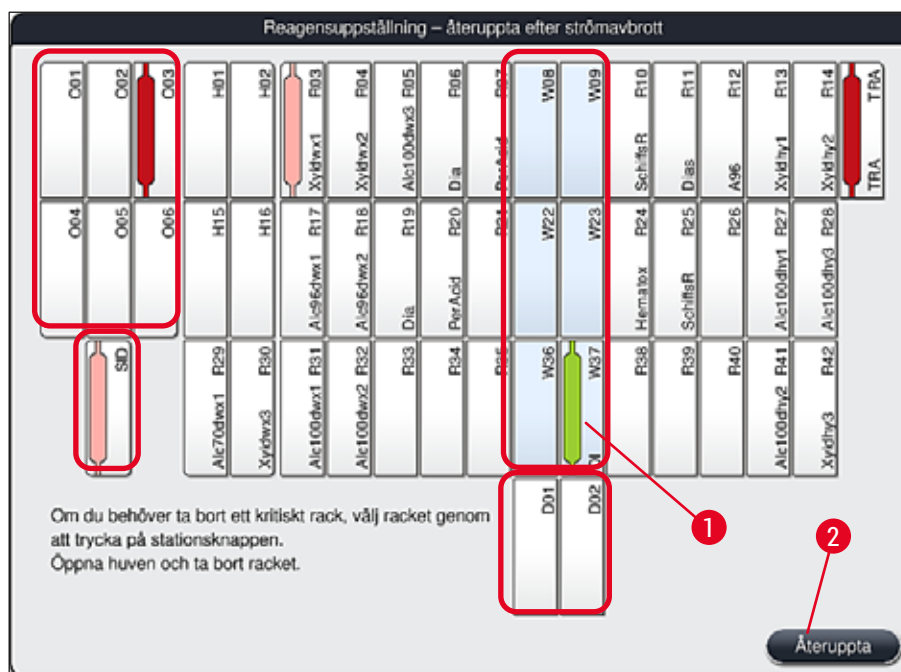


Bild 111

3. När alla kritiska rack har avlägsnats trycker du på knappen **Återuppta**. Se det efterföljande informationsmeddelandet och bekräfta genom att trycka på knappen **OK**.
4. Instrumentet kommer slutligen att utföra en automatisk skanning av påfyllningsnivån och återupptar infärgningsprocessen för de rack som är kvar i instrumentet.

**Varning**


- De kvarvarande racken i laddningsfacket upptäcks inte under vissa omständigheter. Öppna i så fall laddningsfacket och stäng det igen.
- Ett program måste tilldelas till de vita racken igen.
- När det gäller vita rack måste laddningsfacket öppnas och objektglasmarkeringen kontrolleras för att identifiera det program som ska tilldelas igen.

8.2.3 Avbryta alla infärgningsprocesser vid ett strömavbrott

1. Om infärgningsprocessen ska avbrytas för alla rack trycker du på knappen **Nej** (→ "Bild 110-2") och bekräftar det efterföljande varningsmeddelandet genom att trycka på **OK** (→ "Bild 112-1") för att börja avlägsna racken.

**Obs!**

Du kan ångra avbrottet av infärningen och återgå till den tidigare urvalsmenyn (→ "Bild 110") genom att trycka på knappen **Avbryt** (→ "Bild 112-2").

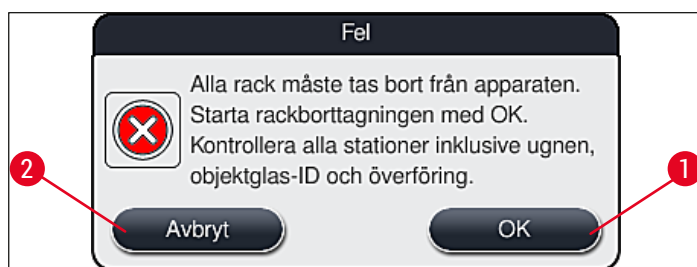**Bild 112**

2. Öppna instrumentets kåpa och avlägsna alla rack.
3. Bekräfta borttagningen av rack genom att trycka på motsvarande station (→ "Bild 113-1") på skärmen.

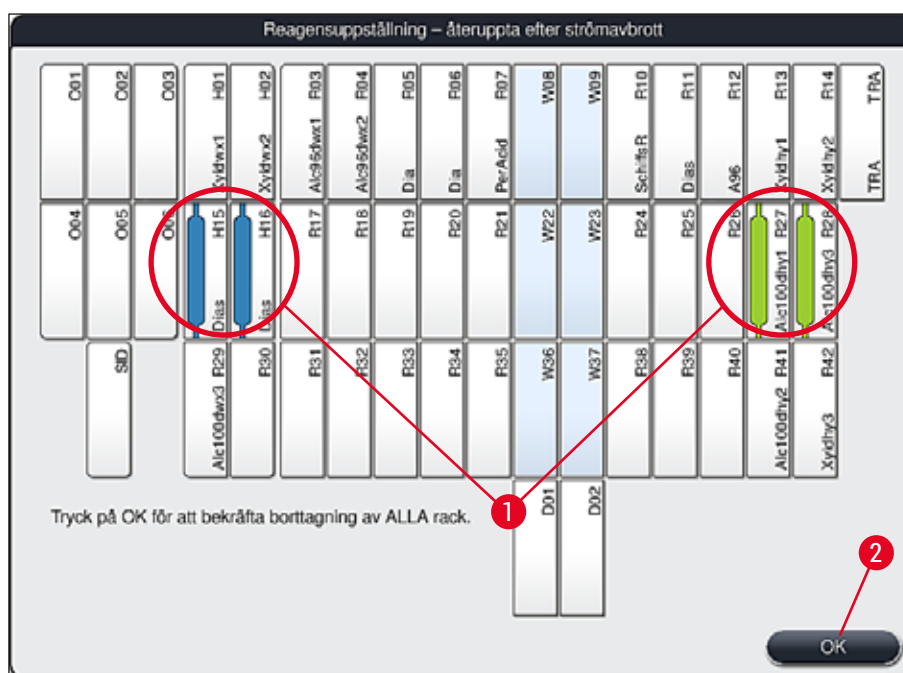


Bild 113

4. Efter att ha tagit bort alla rack trycker du på knappen **OK** (→ "Bild 113-2") för att lämna menyn och återgå till instrumentets initiering.



Varning

- De kvarvarande racken i laddningsfacket upptäcks inte under vissa omständigheter. Öppna i så fall laddningsfacket och stäng det igen.
- Ett program måste tilldelas till de vita racken igen.
- När det gäller vita rack måste laddningsfacket öppnas och objektglasmarkeringen kontrolleras för att identifiera rätt program.

- ✓ Efter det att kritiska rack har avlägsnats från instrumentet fortsätter behandlingen av kvarvarande rack och nya rack kan sättas i laddningsfacket.

8.2.4 Avlägsna ett rack från griparmekanismen

- ① Racken är fästa i den nedre delen av griparmekanismen med hjälp av två krokar. Vid strömavbrott måste racken avlägsnas från griparmekanismen för att kunna tas bort från instrumentet.



Varning

Om överföringsarmen(arna) måste lyftas och flyttas, observera symbolen på framsidan (→ "Bild 115-7") och rör inte och flytta in överföringsarmen(arna) vid sensor-/antennområdet (→ "Bild 115-6"). Använd i stället griparens metallidél (→ "Bild 115-1") och lyft den manuellt. Förflytta sedan överföringsarmen/-armarna till önskad position.

1. Ta tag i undersidan av det färgade rackhantaget med en hand (→ "Bild 115-2") och tryck det försiktigt uppåt (→ "Bild 115-3").
2. Skjut racket ca 1 cm mot preparatet (→ "Bild 115-4").
3. Ta tag i griparmekanismen (→ "Bild 115-1") med din lediga hand, skjut det uppåt (→ "Bild 115-5") och håll fast ordentligt.
4. Racket kan nu avlägsnas från instrumentet och läggas åt sidan.
5. Slutligen ska du dra griparmekanismen framåt och försiktigt lägga den på den fria ytan bredvid det vänstra laddningsfacket (→ "Bild 116-3") eller bredvid det högra utmatningsfacket (→ "Bild 116-6").

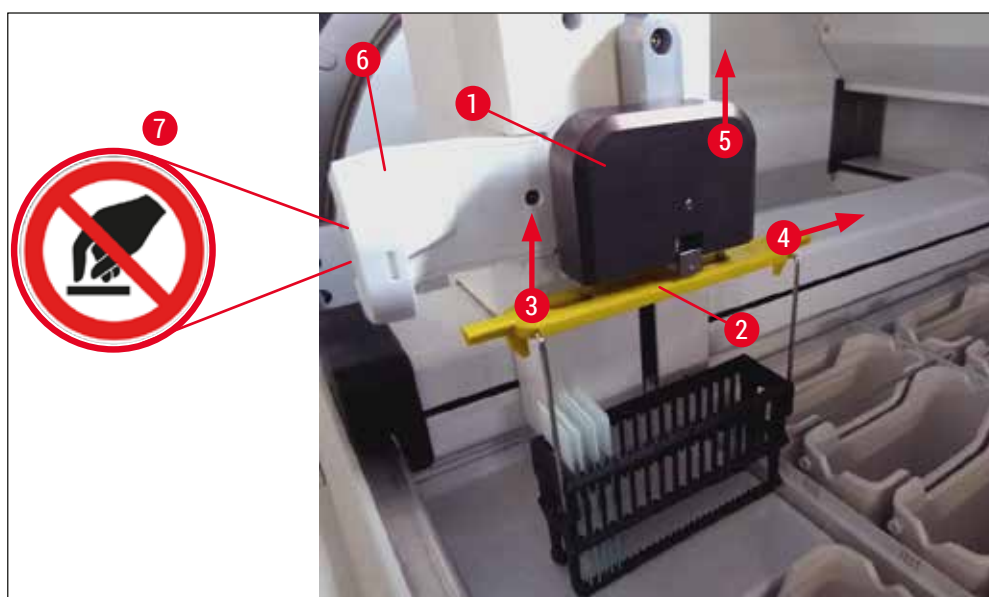


Bild 115

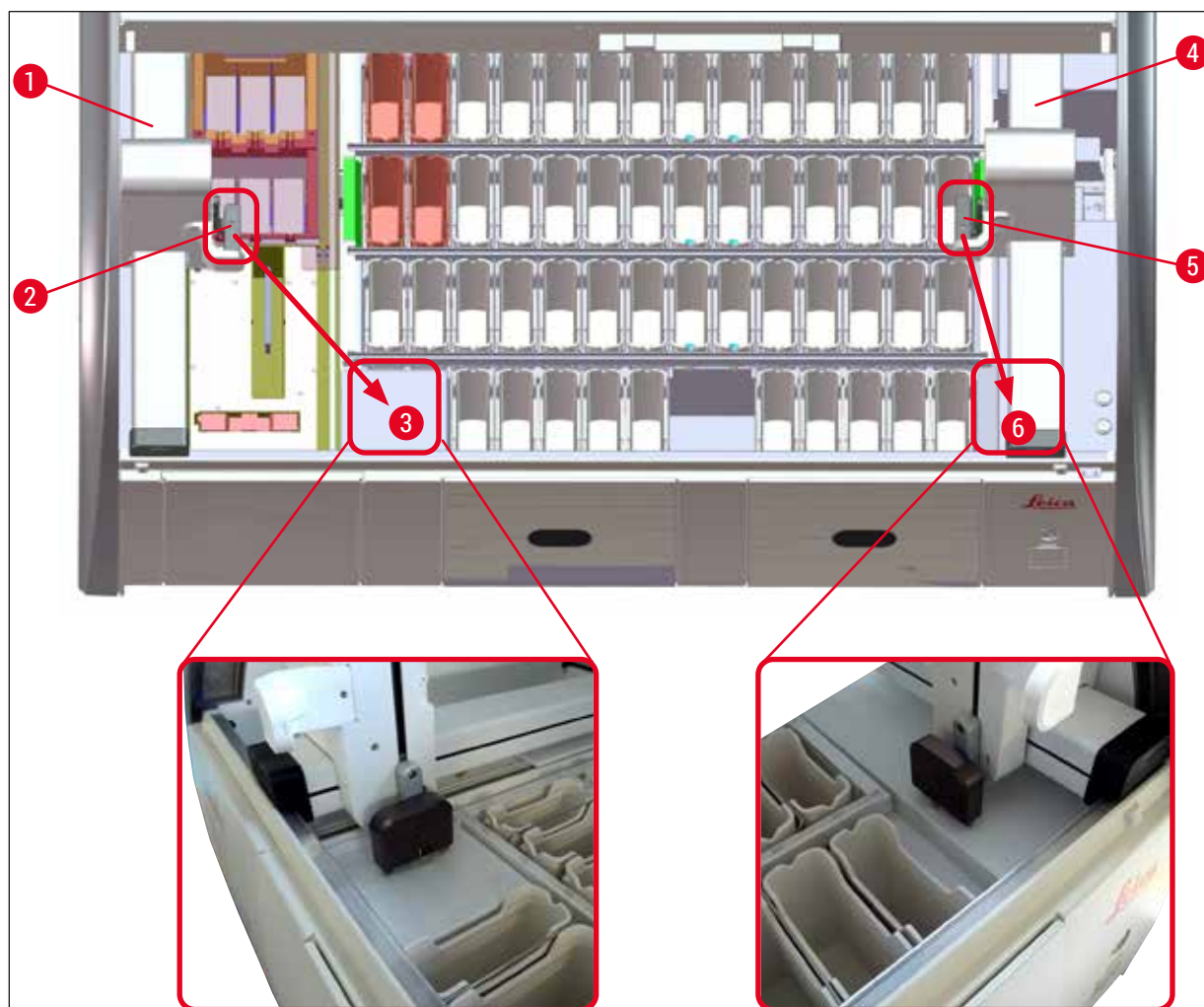


Bild 116

**Varning**

När instrumentet har startats om kommer ett felmeddelande att visas, vilket kan användas för att öppna reagensuppställningen (→ "Bild 40") för att få hjälp med att ta bort det specifika racket. Alla aktiva rack måste avlägsnas manuellt från instrumentet av användaren. Kontrollera även avläsningsstationen för objektglas (→ "Bild 3-2") samt ugnen (→ "Bild 3-10") på racket och byt ut dem vid behov:

Preparaten måste förvaras i en lämplig reagens utanför instrumentet och de påbörjade infärgningsprogrammen måste slutföras manuellt. Användaren är ansvarig för den fortsatta bearbetningen av proverna.

- När strömförsörjningen är återställd kan instrumentet startas på nytt och laddas med nya preparat.

**Obs!**

Vid allvarliga funktionsfel som kräver att proverna avlägsnas ur instrumentet på grund av att infärgningsprocessen avbryts ska anvisningarna i strömavbrottsscenarioet följas. Allvarliga instrumentfel indikeras av en särskild larmsignal (→ Sida 44 – 5.7.4 Meny för larmjud – fel- och signalljud).

8.2.5 Borttagning av rack från överföringsstationen

- ① Om funktionsfel uppstår i arbetsstationsläge medan överföringsenheten i HistoCore SPECTRA ST för över rack till HistoCore SPECTRA CV med överföringsstationen, måste användaren se efter var racken är placerade.
1. Öppna kåpan på HistoCore SPECTRA ST.
 2. Se efter om något rack fortfarande syns från överföringsstationen (→ "Bild 117-1").

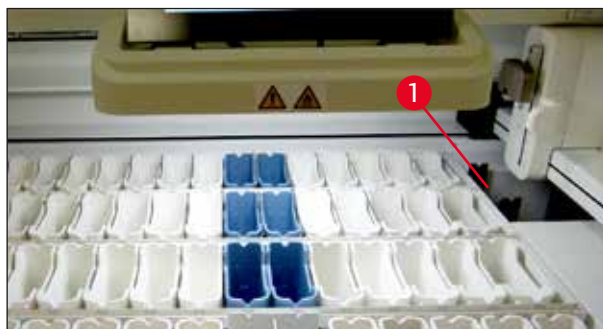


Bild 117

3. Om så är fallet, tryck tillbaka överföringsstationens släde (→ "Bild 118-1") i HistoCore SPECTRA ST manuellt (→ "Bild 118-2") och ta bort racket (→ "Bild 118-3") från hållaren (→ "Bild 118-4").

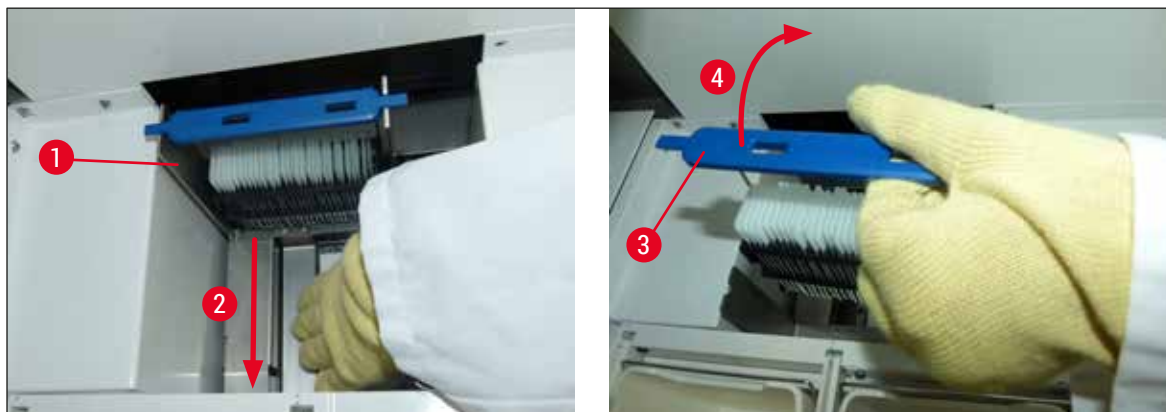


Bild 118

4. Ta därefter bort racket från instrumentet och förvara det på ett säkert sätt.
5. När instrumentets funktionsfel har åtgärdats, för in racket i laddningsfacket på HistoCore SPECTRA CV så att täckglasappliceringen startar.

8.3 Byta ut huvudsäkringar



Varning

Om instrumentet slutar fungera ska det stängas av med hjälp av strömbrytaren och kopplas bort från elnätet. Huvudsäkringarna kan nu kontrolleras.

- Öppna kåpan och skruva loss de två säkringshållarna överst på höger lucka (→ "Bild 119-1") med en spårskruvmejsel och kontrollera att de är hela.



Varning

Använd en lämplig spårskruvmejsel så att säkringshållaren inte skadas.



Varning

Se upp om säkringen är trasig! Det kan finnas risk för skador på grund av krossat glas!



Bild 119

- Om en säkring är trasig, avlägsna den från säkringshållaren och sätt i en ny säkring (→ Sida 18 – 3.1 Standardleverans).
- Monteringen sker i omvänd ordning.

8.4 Stopp i vattenavloppet

Ett stopp i vattenavloppssystemet kan orsakas av en blockerad avloppssil (→ "Bild 98-1") eller avloppsslang (→ "Bild 7-1"). Ett sådant stopp kan leda till en stigande vattennivå i avrinningskärlet. Detta kan leda till kritiska vattennivåer i instrumentet. Användaren får ett felmeddelande (→ "Bild 120") på skärmen och en larmsignal utlöses. Felmeddelandet ger användaren vägledning i hur stoppet ska lösas genom steg-för-steg-bilder (→ "Bild 122").



Bild 120



Varning

Dålig kvalitet och fördröjd infärgning kan uppstå vid kritiska vattennivåer i instrumentet till följd av ett stopp i vattenavloppssystemet. Pågående infärgningsprogram stoppas tillfälligt. Stoppet ska omedelbart åtgärdas av användaren enligt beskrivningen nedan.

Åtgärda ett stopp i vattenavloppssystemet

1. Öppna kåpan.
2. Kontrollera vattenavloppssystemet (→ Sida 117 – 7.12 Vattenavlopp).



Obs!

- Om racken är kvar i sköljvattenkyvetterna (→ "Bild 122-1") ska de avlägsnas (→ "Bild 122-2") och förvaras i vatten utanför instrumentet (→ "Bild 122-3").
- Notera det borttagna racks position för att se till att infärgningen kan återupptas efter att stoppet åtgärdats.
- De närliggande reagenskyvetterna ska täckas över för att skyddas och kan vara kvar i instrumentet.
- Om vattennivån i avrinningskärlet sjunker under kritisk nivå under tiden man försöker lösa problemet försvinner meddelandet (→ "Bild 120") och ett annat meddelande på skärmen meddelar användaren om att infärgningsprocessen nu kan fortsättas.

3. Avlägsna försiktigt sköljvattenkyvetterna (→ "Bild 122-4") och (vid behov) de reagenskyvetter som sitter ovanför avloppssilen (→ Sida 117 – 7.12 Vattenavlopp).



Varning

Var försiktig när du avlägsnar sköljvattenkyvetterna. Plocka ur varje sköljvattenkyvett för sig och låt vattnet som är inuti rinna av i avrinningskärlet. Sköljvattenkyvetterna måste tömmas helt för att de ska kunna avlägsnas från instrumentet utan att vatten droppar ner i reagenskyvetterna.

4. Kontrollera om det är stopp i avloppssilen eller den böjda avloppsslangen inuti instrumentet (→ "Bild 122-5") och rengör dem enligt anvisningarna i (→ Sida 117 – 7.12 Vattenavlopp) och (→ Sida 118 – 7.13 Vattenavloppsslang) vid behov.
 5. Sätt tillbaka de borttagna sköljvattenkyvetterna (→ "Bild 122-6") och reagenskyvetterna. Sätt tillbaka racken (→ "Bild 122-7") i deras ursprungliga position (→ "Bild 122-8").
 6. Tryck på **OK** (→ "Bild 120-1") för att fortsätta.
- ✓ Om stoppet avlägsnas och vattnet rinner undan meddelar ett annat meddelande på skärmen (→ "Bild 121") att infärgningsprogrammen kan fortsättas. Tryck på **OK** (→ "Bild 121") för att fortsätta.



Bild 121

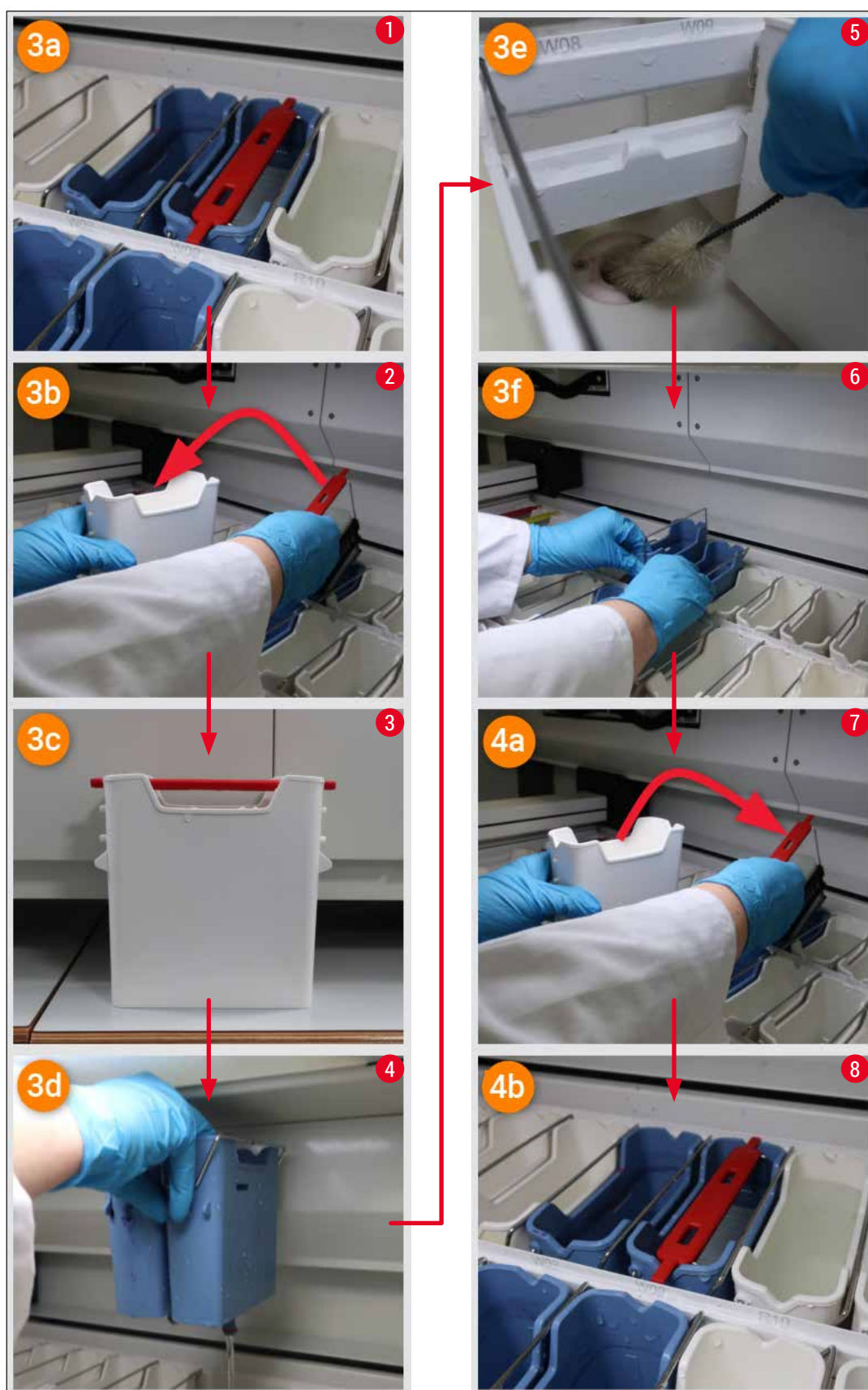



Bild 122

Stoppet i vattenavloppssystemet har inte avlägsnats, stoppet kvarstår

Om meddelande (→ "Bild 120-1") bekräftas med **OK** men stoppet kvarstår meddelas användaren om detta genom ett nytt meddelande (→ "Bild 123") om att systemet kommer att kontrollera den fortsatt höga vattennivån i kärlet kontinuerligt i ytterligare 5 minuter. Under den här tiden kan användaren utföra fler rengöringsförsök.

**Obs!**

Vid behov kan användaren avsluta alla rack som behöver ett vattensteg. Tryck då på **Avbryt** (→ "Bild 123-1") och bekräfta efterföljande meddelande genom att trycka på **Ja** (→ "Bild 123-2") för att inleda processen för kontrollerad avslutning. Tryck på **Nej** (→ "Bild 123-3") för att fortsätta väntetiden.

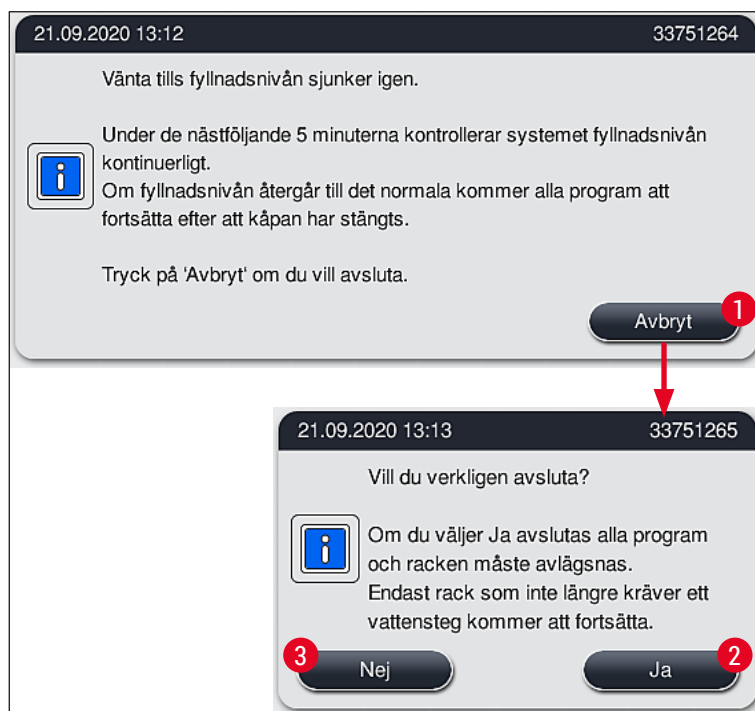**Bild 123**

I det här läget finns 3 olika alternativ:

1. Om rengöringen lyckas och stoppet kan avlägsnas kommer vattennivåerna att sjunka under kritisk nivå. Ett meddelande på skärmen (→ "Bild 121") meddelar användaren att infärgningsprogrammen kan fortsättas. Tryck på **OK** (→ "Bild 121") för att fortsätta. Programmens startbarhet visas och programmen i processen kan fortsätta automatiskt.
2. När 5 minuter av ytterligare rengöringsförsök har gått och stoppet fortfarande kvarstår visas ett meddelande (→ "Bild 124") på skärmen om att vattennivån fortfarande är för hög. Genom att trycka på **Nej** (→ "Bild 124-1") kan användaren förlänga väntetiden med ytterligare 5 minuter och utföra fler rengöringsförsök. Om dessa nya rengöringsförsök lyckas kan situationen lösas på samma sätt som beskrivs i 1. Om det krävs ytterligare tid för rengöring, tryck på **Nej** (→ "Bild 124-1") igen. Detta kan upprepas flera gånger. Om stoppet inte kan lösas trots upprepade rengöringsförsök, tryck på **Ja** (→ "Bild 124-2") för att inleda en process för kontrollerad avslutning, se avsnitt 3 och 4 nedan.

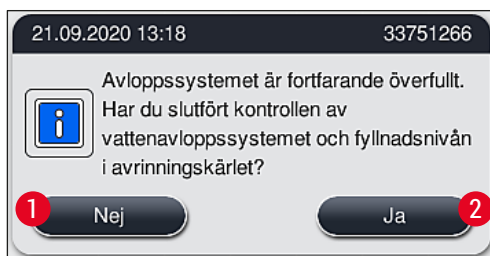


Bild 124

3. Om stoppet inte kan lösas trots upprepade rengöringsförsök avaktiveras vattenstationerna på grund av den kvarliggande kritiska vattennivån. Vattenstationerna visas som defekta på skärmen. För att avsluta ett eller flera program, tryck på antingen (→ "Bild 123-2") eller (→ "Bild 124-2") för att inleda processen för kontrollerad avslutning. Program som inte kräver ett vattensteg fortsätter till slutet av infärgningsprocessen. Eventuella kvarvarande rack som kräver minst ett vattensteg måste avbrytas och avlägsnas från instrumentet. Bekräfta meddelandet nedan (→ "Bild 125") genom att trycka på **OK**.

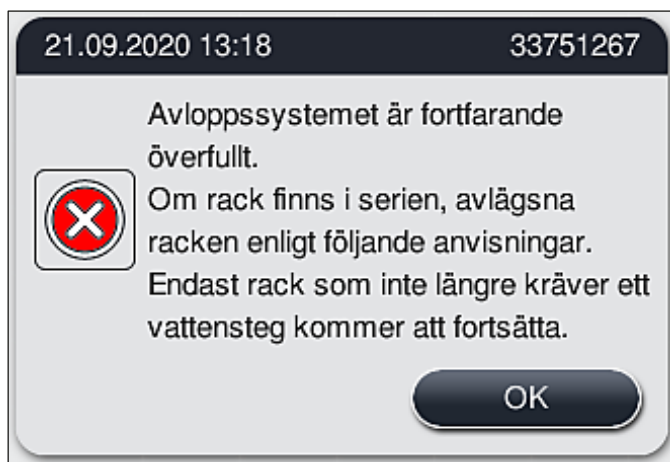


Bild 125

4. För varje rack som ska tas bort visas ett likadant meddelande på skärmen (→ "Bild 126"). Öppna kåpan och ta ut racket ur den station som visas i meddelandet. Bekräfta avlägsnandet med **OK**. Fortsätt tills alla påverkade rack har avlägsnats.



Bild 126

- ✓ När det sista racket har avlägsnats meddelas användaren om vilka program som inte längre kan startas på grund av avaktiverade vattenstationer. Tryck på **OK** (→ "Bild 127-1") för att fortsätta. Vattenstationerna visas som defekta (→ "Bild 127-2") på skärmen.

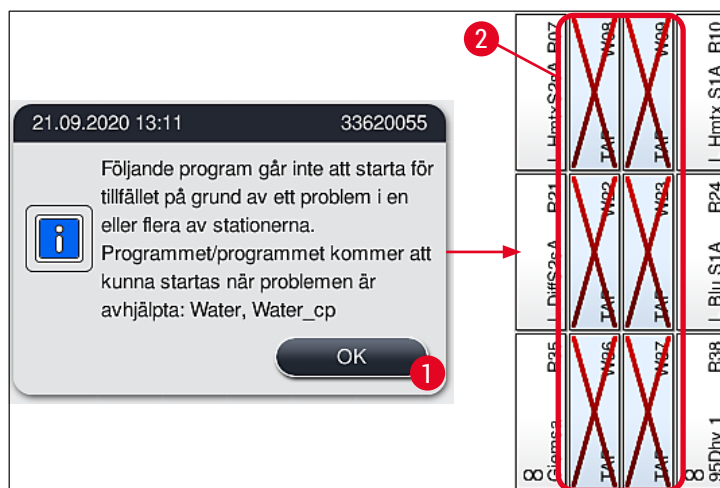


Bild 127

**Varning**

Kontakta Leicas tekniska service om problemet med kvarvarande eller frekventa stopp kvarstår.

**Obs!**

Program som inte innehåller ett vattensteg kan fortfarande startas. Det rekommenderas starkt att kontakta ansvarig Leicas tekniska service.

8.5 Fel vid fastsättning, avlägsnande eller transport av rack



Varning

Om griparen och/eller överföringsarmen inte kan lyfta, placera eller transportera ett rack meddelas användaren om det genom ett varningsmeddelande på skärmen (→ "Bild 128"). Öppna **ALDRIG** kåpan i det här läget, för att undvika att alla pågående rack avslutas. Då måste de avslutade racken avlägsnas från instrumentet omedelbart och infärgningen måste avslutas manuellt!

Om överföringsarmen/-armarna måste lyftas och förflyttas får man inte vidröra sensorn/antennen eller använda detta område för att förflytta överföringsarmen/-armarna (→ "Bild 115-6"). Använd i stället griparens metallidél (→ "Bild 115-1") och lyft den manuellt. Förflytta sedan överföringsarmen/-armarna till önskad position.

1. Meddelandet upplyser om var felet uppstått. Kontrollera platsen genom den stängda kåpan för att se om det föreligger stopp eller hinder.
2. Om man inte kan se några stopp eller hinder, tryck på **OK** (→ "Bild 128-1") för att försöka lyfta, placera eller transportera racket igen.

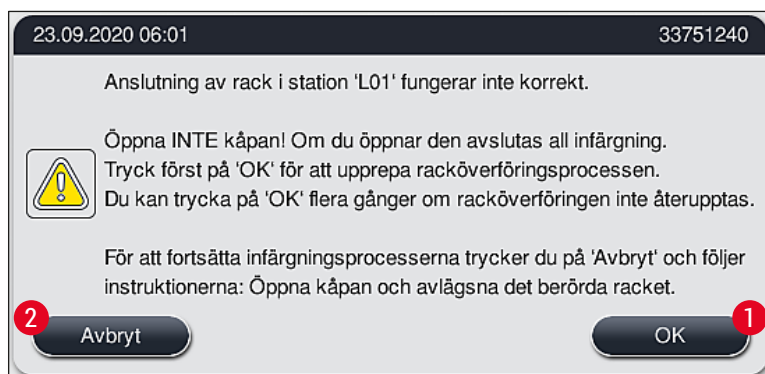


Bild 128



Obs!

Man kan trycka på knappen **OK** (→ "Bild 128-1") flera gånger om racktransporten inte fortsätter.

3. Om man upptäcker ett stopp/hinder eller om man har tryckt på **OK** upprepade gånger utan framgång, tryck på **Avbryt** (→ "Bild 128-2") för att avsluta det enskilda racket på ett säkert sett och fortsätta infärgningsprocessen för de kvarvarande racken.
4. **NU** kan man öppna instrumentets kåpa och ta bort racket från instrumentet.
5. Bekräfta genom att trycka på **OK** (→ "Bild 129").



Bild 129

**Obs!**

- Observera att det rack som tagits bort inte kan fortsätta bearbetas! Alla andra pågående rack kommer att slutföras.
- Förvara det avlägsnade racket utanför instrumentet i lämplig reagens. Infärgningen av objektglasen i detta rack måste slutföras manuellt.

9. Instrumentets komponenter och specifikationer

9.1 Valbara komponenter till instrumentet

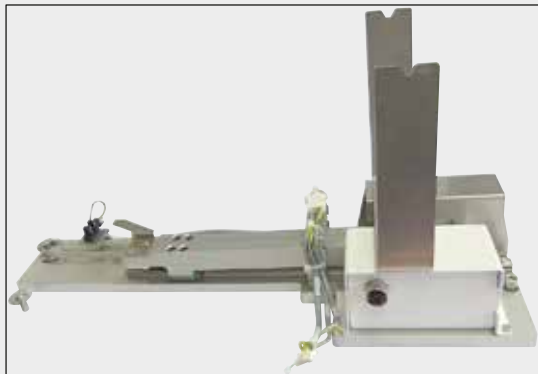


Bild 131

HistoCore arbetsstationssats

Till för användning i HistoCore SPECTRA ST för att överföra provet till en ansluten automatisk täckglasapplikator, HistoCore SPECTRA CV. De två instrumenten bildar en arbetsstation efter det att satsen har installerats.

Satsen innehåller överföringsmodulen och alla delar som behövs för integrering i HistoCore SPECTRA ST.

Beställningsnr:

14 0512 54355

9.2 Valbara tillbehör

Beteckning	Beställningsnr
Ventilationsslang, 2 m	14 0512 54365
Sats med aktiva kolfilter (2 st.)	14 0512 53772
Reservfilter till ugnens luftfilter (3 st.)	14 0512 54943
Avloppsvattenslang, 2 m	14 0512 55279
Tilloppsslang	14 0474 32325
Reagenskyvett, komplett, inklusive reagenskyvettlock	14 0512 47086
Sats med kyvettlock, 3 stycken per sats	14 0512 57846
Vattenanslutningssats:	14 0512 49324
2 st. vattentillförselslang, 10 mm, 2,5 m	14 0474 32325
1 st. förlängningsslang 1,5 m	14 0512 49334
1 st. Y-koppling G3/4	14 3000 00351
1 st. dubbelnippel G3/4 G1/2	14 3000 00359
1 st. filterhus	14 0512 49331
1 st. filterpatron	14 0512 49332
1 st. rörkoppling G3/4	14 3000 00360
1 st. blindkåpa G3/4	14 3000 00434
1 st. packningsbricka	14 0512 54772
1 st. skiftnyckel SW30 DIN894	14 0330 54755

Beteckning	Beställningsnr
HistoCore arbetsstationssats	14 0512 54355
Mellanlägg för speciell infärgning	14 0512 49261
Vattenfilterhållare	14 0512 59363
Sköljvattenkyvett, blå, sats	14 0512 47087
Molykote 111 smörjfett, 100 g	14 0336 35460
Sats med etiketter för matnings- och utmatningsfack (10 blanka, 5 st "H2O"=vatten, "A"=alkohol och "S"=lösningsmedel, t.ex. xylene)	14 0512 55161
O-ringar 7x2, för anslutningsstycke till sköljvattenkyvett (12 st. per förpackning)	14 0253 54716
Rack för 30 objektglas* (3 st. per förpackning)	14 0512 52473
Rack för 5 objektglas* (3 st. per förpackning)	14 0512 52475
Handtag till rack för 30 objektglas* (gula, 3 st. per förpackning)	14 0512 52476
Handtag till rack för 30 objektglas* (ljusblå, 3 st. per förpackning)	14 0512 52477
Handtag till rack för 30 objektglas* (mörkblå, 3 st. per förpackning)	14 0512 52478
Handtag till rack för 30 objektglas* (rosa, 3 st. per förpackning)	14 0512 52479
Handtag till rack för 30 objektglas* (röda, 3 st. per förpackning)	14 0512 52480
Handtag till rack för 30 objektglas* (gröna, 3 st. per förpackning)	14 0512 52481
Handtag till rack för 30 objektglas* (svarta, 3 st. per förpackning)	14 0512 52482
Handtag till rack för 30 objektglas* (grå, 3 st. per förpackning)	14 0512 52483
Handtag till rack för 30 objektglas* (vita, 3 st. per förpackning)	14 0512 52484
Handtag till rack för 5 objektglas* (gula, 3 st. per förpackning)	14 0512 52494
Handtag till rack för 5 objektglas* (ljusblå, 3 st. per förpackning)	14 0512 52495
Handtag till rack för 5 objektglas* (mörkblå, 3 st. per förpackning)	14 0512 52496
Handtag till rack för 5 objektglas* (rosa, 3 st. per förpackning)	14 0512 52497
Handtag till rack för 5 objektglas* (röda, 3 st. per förpackning)	14 0512 52498
Handtag till rack för 5 objektglas* (gröna, 3 st. per förpackning)	14 0512 52499
Handtag till rack för 5 objektglas* (svarta, 3 st. per förpackning)	14 0512 52500
Handtag till rack för 5 objektglas* (grå, 3 st. per förpackning)	14 0512 52501
Handtag till rack för 5 objektglas* (vita, 3 st. per förpackning)	14 0512 52502

(* Objektglas)

**Obs!**

- Information om tillgängliga Leica Reagent Kit och godkända Leicaprogram kan fås på begäran av ansvarig försäljningsavdelning på Leica.
- Dessutom medföljer en bruksanvisning varje Leica Reagent Kit, där källan för import av godkända Leica-program anges.

Rackhandtag för rack från andra tillverkare

**Obs!**

Användning av den här rackadaptorn har kontrollerats en gång i HistoCore SPECTRA ST tillsammans med Sakura-objektglashållare (Sakura 20 objektglaskorg, produktkod 4768) finns från och med oktober 2017.

Eftersom objektglashållarens tillverkare kan ha ändrat hållarens utformning efter det att Leica provat den, rekommenderar vi att kunden testkör hållaren innan adaptorn används för kliniska prov.

Adapterhandtag för Sakura 20-rack (gula, 3 st per förpackning)	14 0512 55661
Adapterhandtag för Sakura 20-rack (ljusblå, 3 st per förpackning)	14 0512 55662
Adapterhandtag för Sakura 20-rack (mörkblå, 3 st per förpackning)	14 0512 55663
Adapterhandtag för Sakura 20-rack (rosa, 3 st per förpackning)	14 0512 55664
Adapterhandtag för Sakura 20-rack (röda, 3 st per förpackning)	14 0512 55665
Adapterhandtag för Sakura 20-rack (ljusgröna, 3 st per förpackning)	14 0512 55666
Adapterhandtag för Sakura 20-rack (svarta, 3 st per förpackning)	14 0512 55667
Adapterhandtag för Sakura 20-rack (grå, 3 st per förpackning)	14 0512 55668
Adapterhandtag för Sakura 20-rack (vita, 3 st per förpackning)	14 0512 55669



Bild 132

Avloppsslang

Längd: 2 m

Beställningsnr:

14 0512 55279



Bild 133

Tilloppsslang för kranvatten

Längd: 2,50 m sats med 3/4" anslutning för vattenkran, inkl. reservtätning

Beställningsnr:

14 0474 32325



Bild 134

Vattenanslutningssats

Beställningsnr:

14 0512 49324

Bestående av:

- 2 st. vattentillförselslangar, 10 mm, 2,5 m 14 0474 32325
- Förlängningsslang, 1,5 m 14 0512 49334
- Y-koppling G3/4 14 3000 00351
- 2 st. dubbelnippel G3/4 G1/2 14 3000 00359
- Filterhus 14 0512 49331
- Filterpatron 14 0512 49332
- Rörskoppling G3/4 14 3000 00360
- Blindkåpa G3/4 14 3000 00434
- Packningsbricka 14 0512 54772
- Skiftnyckel SW30 DIN894 14 0330 54755



Bild 135

Ventilationsslang

Längd: 2 m

Beställningsnr:**14 0512 54365**

Bild 136

Aktivt kolfilter

1 sats bestående av 2 st.

Beställningsnr:**14 0512 53772**

Bild 137

Reagenskyvett

Sats inkl. reagenskyvettlock

Beställningsnr:**14 0512 47086**

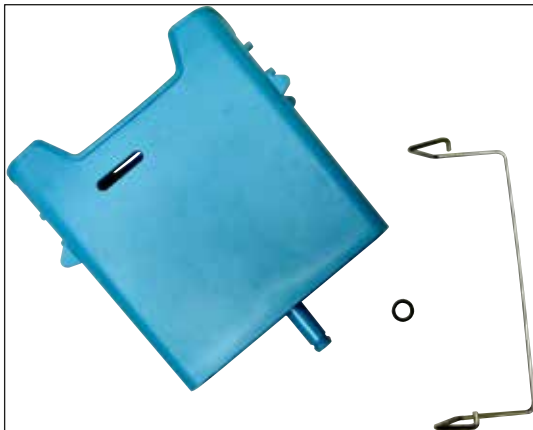


Bild 138

Sköljvattenkyvett
sats

Beställningsnr:

14 0512 47087



Bild 139

Mellanlägg för speciell infärgning
(endast för rack som är till för 5 objektglas)

Beställningsnr:

14 0512 49261



Bild 140

Rack
30 objektglas (3 st. per förpackning)

Beställningsnr:

14 0512 52473



Bild 141

Rackhandtag

30 objektglas (3 st. per förpackning)

Färg

- gult
- ljusblå
- mörkblå
- rosa
- rött
- ljusgrönt
- svart
- grått
- vitt

Beställningsnr:

14 0512 52476
 14 0512 52477
 14 0512 52478
 14 0512 52479
 14 0512 52480
 14 0512 52481
 14 0512 52482
 14 0512 52483
 14 0512 52484



Bild 142

Rack

5 objektglas (3 st. per förpackning)

Beställningsnr:**14 0512 52475**

Bild 143

Rackhandtag

5 objektglas (3 st. per förpackning)

Färg

- gult
- ljusblå
- mörkblå
- rosa
- rött
- ljusgrönt
- svart
- grått
- vitt

Beställningsnr:

14 0512 52494
 14 0512 52495
 14 0512 52496
 14 0512 52497
 14 0512 52498
 14 0512 52499
 14 0512 52500
 14 0512 52501
 14 0512 52502



Bild 144

Sats med kyvettlock

Med ett lock kan en hel rad med reagenskyvetter (14 stycken) i kyvettfältet (→ "Bild 65") täckas.

Beställningsnr: 14 0512 57846

Bestående av:

- 3 kyvettlock 14 0512 57847

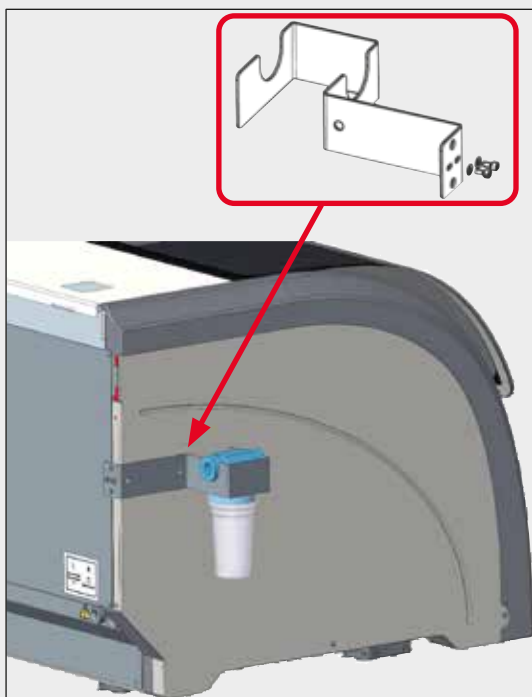


Bild 145

Vattenfilterhållare

Ska placeras till vänster om HistoCore SPECTRA ST

Vattenfilterhållaren kan användas för att fästa vattenfiltret och för att ge användaren förbättrad åtkomst och sikt.

Beställningsnr: 14 0512 59363

Bestående av:

- 1 Vattenfilterhållare 14 0512 59364
- 2 insexskruvar 14 2101 03234
- 2 brickor 14 2171 02114

Obs! Installationen av vattenfilterhållaren får endast utföras av auktoriserad Leica-personal!

10. Garanti och service

Garanti

Leica Biosystems Nussloch GmbH garanterar att den kontraktssenliga levererade produkten har genomgått omfattande kvalitetstester baserade på Leicas lokala teststandarder, samt att produkten är felfri och uppfyller samtliga tekniska specifikationer och/eller överenskomna egenskaper.

Garantins omfattning styrs av innehållet i avtalet som har slutits. Endast garantivillkoren från din ansvariga Leica-försäljningsavdelning eller den organisation där du har köpt instrumentet gäller.

Årligt förebyggande underhåll

Leica rekommenderar att man utför förebyggande underhåll varje år. Detta ska utföras av behörig representant från Leicas tekniska service.

Serviceinformation

Om du behöver teknisk service eller reservdelar ska du vända dig till din Leica-representant eller Leica-återförsäljaren där du har köpt instrumentet.

Ange följande information om instrumentet:

- Instrumentets modellbeteckning och serienummer.
- Instrumentets uppställningsplats och namn på en kontaktperson.
- Orsaken till serviceförfrågan.
- Instrumentets leveransdatum.

11. Urdrifttagning och kassering



Varning

Instrumentet eller dess delar ska kasseras i enlighet med gällande lokala föreskrifter. Alla föremål som har kontaminerats av utspillda reagenser ska genast desinficeras med ett lämpligt desinfektionsmedel för att utesluta spridning till andra delar av laboratoriet eller till laboratoriepersonalen.

Se avsnittet (→ Sida 111 – 7. Rengöring och underhåll) och avsnittet gällande saneringsbekräftelse (→ Sida 158 – 12. Saneringsbekräftelse) i slutet av denna bruksanvisning för information om rengöring av infärgaren HistoCore SPECTRA ST.

Instrumentet kan ha kontaminerats vid användning av biologiskt farliga prover. Innan instrumentet tas i drift igen eller kasseras krävs en grundlig desinficering (t.ex. flera rengöringssteg, desinficering eller sterilisering). Följ gällande laboratorieföreskrifter när instrumentet kasseras.

För mer information kan du vända dig till din ansvariga Leica-representant.



Komponenter i ditt instrument som är märkta med en överstruken avfallstunna, t.ex. datorn, bildskärmen osv., omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om hantering av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning.

Dessa föremål ska kasseras via samlingsställen i enlighet med lokala föreskrifter. Mer information om kasseringen av instrumentet kan du få av ditt lokala avfallshanteringsföretag eller en medarbetare på din lokala Leica-support.

12. Saneringsbekräftelse

Alla produkter som returneras till Leica Biosystems eller som behöver underhållas på plats måste rengöras och dekontamineras ordentligt. Den särskilda mallen för dekontamineringsdeklaration finns i produktmenyn på vår hemsida www.LeicaBiosystems.com. Denna mall måste användas för att samla in alla data som behövs.

Vid produktretur måste en kopia av den ifyllda och undertecknade bekräftelsen bifogas eller skickas vidare till serviceteknikern. Avsändaren har fullt ansvar för produkter som returneras utan denna bekräftelse eller med en ofullständig bekräftelse. Returnerade varor som bedöms vara en potentiell fara för företaget skickas tillbaka på avsändarens bekostnad och risk.

A1. Bilaga 1 – Godkända reagenser

**Varning**

- Användning av reagenser som inte listas här (t.ex. aceton eller fenolhaltiga lösningar), eller reagenser och syror i högre koncentration än vad som beskrivs, kan leda till att prover förstörs eller till att användaren eller instrumentet skadas. Sådan användning av instrumentet sker på egen risk. Inga som helst garantianspråk eller andra krav på ansvar kan göras gällande mot Leica Biosystems eller associerade försäljnings- och serviceorganisationer.
- På grund av risken för brand och explosion får brännbara reagenser och lösningsmedel inte upphettas. Vid hantering av brännbara lösningsmedel och reagenser ska alla antändningskällor hållas borta.

**Obs!**

Alla Leica-reagenser för förinställda Leica-program har testats med instrumentet gällande infärgningskvalitet och kompatibilitet med andra material.

Infärgningsmetod eller reagensgrupp		Reagensnamn	Anteckningar
H&E-sats	Leica Infinity	ST Hemalast ST Hematoxylin ST Differentiator ST Bluing ST Eosin	
	Leica SelecTech	Hemotoxylin 560 Hemotoxylin 560MX Define MX-aq Blue Buffer-8 (buffertlösning) Alcoholic Eosin Y 515 (alkoholhaltigt eosin) Alcoholic Eosin Y 515LT (alkoholhaltigt eosin) Eosin Trichrome 515 (trefärgning) Eosin Phloxine	

Infärgningsmetod eller reagensgrupp		Reagensnamn	Anteckningar
Andra H&E-reagenser	Leica	Gill II Hematoxylin Gill III Hematoxylin Harris Hematoxylin Mayer's Hemalaun	
	Leica	Alcoholic Eosin (alkoholhaltigt eosin) Aqueous Eosin (1 %) (vattenhaltigt eosin)	
	Leica	Scott's Tap Water Solution (vattenlösning)	
	Leica	Acid Alcohol 0,5 % (syrahaltig alkohol)	
	Leica	Acid Alcohol 1,0 % (syrahaltig alkohol)	
	Användardefinierat	Hydrochloric Acid 2 % (saltsyra)	
PAS	Leica	Periodic Acid 0,5 % (perjodsyra)	
	Användardefinierat	Periodic Acid (up to 10 %) (perjodsyra, upp till 10 %)	
	Leica	Schiff's Reagent (Schiffreagens)	
Diastas-PAS	Leica	Diastase solution (37 °C) (diastaslösning)	
Alcianblå-PAS	Leica	Alcian Blue-Solution (alcianblå lösning)	
Alcianblå	Leica		
Alcianblå och andra infärgningsmetoder	Leica	Nuclear fast Red	
Gömöri trefärgning, blå och grön kollagenfärgning	Leica	Weigert Hematoxylin (A+B Solution) (A+B-lösning) Gömori Trichrome Blue Stain (Gömöri trefärgning blå) 1 % Acetic Acid (ättiksyra) Light green (ljusgrön)	
Perl's järninfärgning	Leica	Potassium ferrocyanide solution (kaliumferrocyanidlösning) Hydrochloride Acid Solution (saltsyralösning)	• Får inte komma i kontakt med metalljoner • Använd endast med belagda rackhandtag från 5-serien

Infärgningsmetod eller reagensgrupp		Reagensnamn	Anteckningar
Giemsa	Leica	Methanol Solution A (metanollösning)	
		Stain 1 Solution B (infärgning 1, lösning B)	
		Stain 2 Solution C (infärgning 2, lösning C)	
		Buffer Solution D (buffertlösning D)	
Kongoröd amyloidinfärgning	Leica	Congo Red Solution (kongoröd lösning)	
	Leica	1 % Potassium Hydroxide Solution (kaliumhydroxidlösning)	
	Användardefinierat	Saturated Lithium Carbonate Solution (mättad litiumkarbonatlösning)	
Alciangul för heliobacter pylori	Leica	Alcian Yellow-Solution (0,25 % Alcian Yellow) (alciangul lösning, 0,25 % alciangul)	
		5 % Periodic Acid (perjodsyra)	
		5 % Sodium Metabisulfite (natriummetabisulfit)	
		6,8 pH Sorensen Buffer (Sörensenbuffert)	
		Toluidin Blue Solution (toluidinblå lösning)	
Elastisk infärgning/ Verhoeff's van Gieson	Leica	5 % Alcoholic Hematoxylin (alkoholhaltigt hematoxylin)	
		10 % Ferric Chloride (järntriklorid)	
		Lugol's Iodin Solution (Lugols jodlösning)	
		2 % Ferric Chloride (järntriklorid)	
		Verhoeff's Staining Solution (Verhoeffs infärgningslösning)	
		Van Gieson's Stain (Van Giesons infärgning)	

Infärgningsmetod eller reagensgrupp	Reagensnamn	Anteckningar
Gömöri metenamin silverinfärgning	Leica	Modified Chromic Acid (up to 5 %) (modifierad kromlösning, upp till 5 %)
		Methenamine Borax (metenaminborax)
		0,5 % Silver Nitrate (silverniträt)
		1 % Sodium Bisulfate (natriumbisulfat)
		1 % Gold Chloride (guldklorid)
Cellprov (PAP)	Leica	EA-50
	Leica	Orange G-6
	Leica	EA-65 (Secondary Counter Stain) (sekundär/motfärgning)
Schmorls reduktion		Schmorl's Solution (Schmorls lösning)
(Müller) Kolloidalt järn		Colloidal Iron Solution (kolloidal järnlösning)
		Ferrocyanide-Hydrochloric Acid Solution (ferrocyanid-saltsyralösning)
Andra reagenser	Användardefinierat	Anilin Blue (anilinblå)
	Användardefinierat	Methylene Blue (metylenblå)
	Användardefinierat	Fast Green (snabbgrön)
	Användardefinierat	Carmin
	Användardefinierat	Southgate or Mayer's Micicarmine (Southgate eller Mayers mucicarmin)
	Användardefinierat	Neutral Red (neutralrött)
	Användardefinierat	Safranin

Infärgningsmetod eller reagensgrupp		Reagensnamn	Anteckningar
Lösningsmedel	Leica/ Användardefinierat	Xylen, toluol	
	Leica	Leica Ultra ST	Xylensubstitut baserat på alifatiska kolväten
	Leica	Leica Clearene	Limonenbaserat xylensubstitut
	Merck	Merck Neo-Clear	Xylensubstitut baserat på alifatiska kolväten
	Carl Roth	Roti®-Histol	Limonenbaserat xylensubstitut
	Richard-Allen Scientific/Thermo Scientific	Clear-Rite 3	Xylensubstitut baserat på alifatiska kolväten
	Richard-Allen Scientific/Thermo Scientific	Citrus Clearing Solvent (klarningslösning citrus)	Limonenbaserat xylensubstitut
Alkohol	Leica/ Användardefinierat	2-Propanol (Isopropanol)	
	Leica/ Användardefinierat	Etanol Metanol	
	Richard-Allen Scientific/Thermo Scientific	Dehydrant (dehydrerare)	Etylalkohol, metylalkohol
	Richard-Allen Scientific/Thermo Scientific	Flex	Isopropyl, alkohol, metylalkohol
Vanliga syror, max. koncentration	Användardefinierat	Ättiksyra (upp till 15 %) Saltsyra (upp till 5 %) Piric Acid (up to 3 %) (pirkinsyra, upp till 3 %)	



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Strasse 17 - 19
69226 Nussloch
Tyskland

Tel.: +49 - (0) 6224 - 143 0
Fax: +49 - (0) 6224 - 143 268
Webb: www.LeicaBiosystems.com