

## 고객 고지 사항

### 1. 개요

고객 고지 사항의 목적은 Leica Biosystems 제품 사용 설명서의 업데이트에 관한 정보를 적시에 제공하기 위한 것입니다. 본 고객 고지 사항에는 Leica Biosystems 제품에 대한 정보가 포함되어 있으며, 이는 향후 출시될 하나 이상의 제품 사용자 설명서에 포함될 예정입니다. 이 정보에는 새로운 지침 콘텐츠, 업데이트된 사양 또는 제품 사용 또는 관리에 대한 추가 정보가 포함될 수 있습니다. 개정된 사용 설명서가 나올 때까지 이 문서를 보조 정보로 활용하세요.

본 고객 고지 사항은 Aperio GT 450 릴리스 1.3.3에서 제공되는 새로운 기능 사용에 대한 정보와 지침을 제공합니다.

이 문서에는 다음 섹션이 포함되어 있습니다.

- 1. 개요
- 2. Aperio GT 450 릴리스 1.3.3 개요
- 3. SAM에서 피라미드 레벨 다운스케일링 옵션 구성

### 영향을 받는 제품

Aperio GT 450 스캐너, 스캐너 관리자 소프트웨어 및 Aperio GT 450 컨트롤러 버전 1.3.3.

### 영향을 받는 사용 설명서

이 문서에 포함된 정보는 다음 주요 릴리스 예정 시 다음 사용 설명서에 통합될 예정입니다.

문서 제목	기본 문서 번호
Aperio GT 450 IT 관리자 및 검사실 관리자 설명서(IT Manager and Lab Administrator Guide)	MAN-0394

## 2. Aperio GT 450 릴리스 1.3.3 개요


이 Aperio GT 450 릴리스 1.3.3를 통해 연구소 관리자는 GT 450이 생성하는 이미지 파일에 포함할 피라미드 레벨의 수를 구성할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 일부 타사 뷰어에서 사용자의 시청 환경이 개선될 수 있습니다. 이전 릴리스에서는 이 옵션을 사용하려면 Leica 현장 서비스 담당자가 설정을 구성해야 했습니다.

## 3. SAM에서 피라미드 레벨 다운스케일링 옵션 구성

검사실 관리자 권한을 가진 사용자만이 구성을 변경할 수 있습니다.

스캐너의 피라미드 레벨 다운스케일링 설정을 구성하려면 다음 단계를 따릅니다:

1. SAM Software에 로그인합니다.
2. SAM 홈 화면이 나타나면 배너에 있는 Scanners(스캐너) 아이콘이 선택되어 있고 페이지가 스캐너 목록을 보여주는지 확인합니다. 필요한 경우, Scanners(스캐너) 아이콘을 클릭하여 목록을 표시합니다.

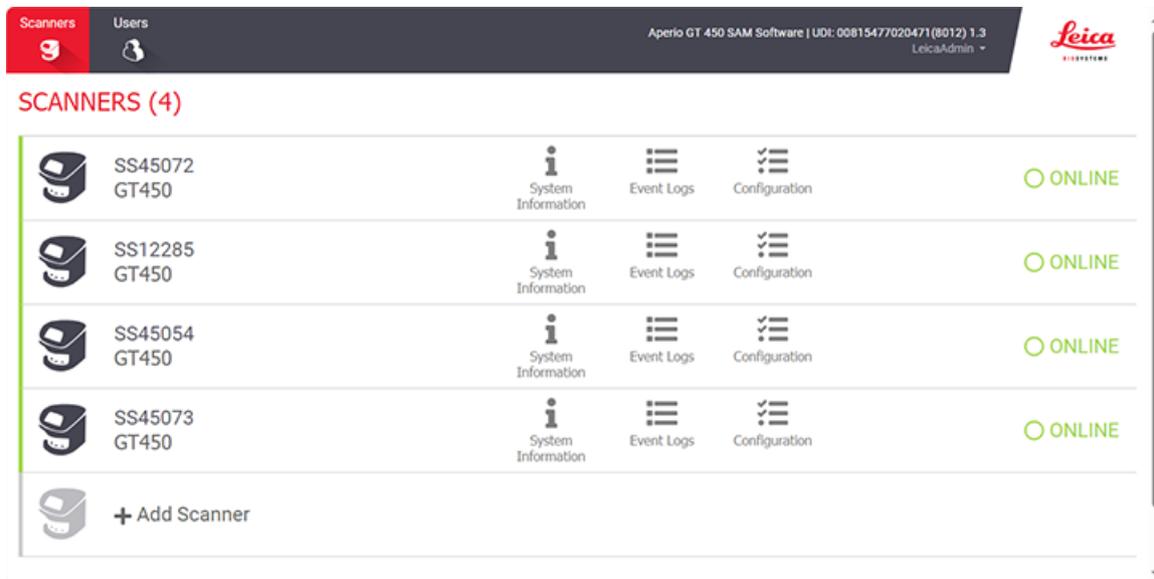

3. 적절한 스캐너의 Configuration(구성) 아이콘을 클릭합니다.



4. Images(이미지) 페이지에서 Edit(편집)을 클릭한 후 페이지 하단으로 스크롤합니다.

5. PYRAMID LEVEL DOWNSCALING(피라미드 레벨 다운스케일링) 필드에서 2x(2배)를 선택하여 2배 피라미드 레벨 다운스케일링 옵션을 활성화합니다.

The screenshot shows the configuration page for the Leica Aperio GT 450 SAM Software. The interface includes a top navigation bar with 'Scanners' and 'Users' tabs, and a user profile 'LeicaAdmin'. The main content area is titled 'SS45054 GT450' and features a sidebar menu on the left with options like 'Images', 'DSR', 'Event Handling', 'PIN Management', 'Backup & Restore', 'Message Debugger', 'Power Control', 'RTF Report', 'Time Zone', 'Test Utility', and 'Scan Settings'. The main configuration area contains several settings: 'BARCODE VALUE MODIFIER', 'BARCODE VALUE SUBSTITUTION FORMAT', 'IMAGE OUTPUT FORMAT' (set to 'SVS'), 'SLIDE ID FORMAT', 'CASE ID FORMAT', 'DIMENSION ORGANIZATION TYPE' (set to 'Full'), 'REQUIRE BARCODE ID' (toggle off), and 'ALLOW MULTIPLE BARCODES' (toggle off). The 'PYRAMID LEVEL DOWNSCALING' field is highlighted with an orange border and shows '2x' selected from a dropdown menu.

6. Save(저장)를 클릭합니다.

# 고지 사항

CN-0005-ko, 개정 A | 8월 2024

원본 지침.

## 저작권 공지

- 저작권 © 2024 Leica Biosystems Imaging, Inc. 모든 권리 보유. LEICA와 Leica 로고는 Microsystems IR GmbH의 등록 상표입니다. , GT 및 GT 450은 미국과 선택적으로 기타 국가에서 Leica Biosystems Imaging, Inc. 의 상표입니다. 기타 로고, 제품 및/또는 회사 이름은 각 소유자의 상표일 수 있습니다.
- 이 제품은 등록 특허에 의해 보호됩니다. 특허 목록을 원하시면 Leica Biosystems 에 문의하십시오.

## 고객 자원

- Leica Biosystems 제품과 서비스에 대한 최신 정보를 [LeicaBiosystems.com/Aperio](https://www.leicabiosystems.com/Aperio)에서 찾아볼 수 있습니다.

## 연락처 – Leica Biosystems Imaging, Inc.

본사	고객 지원
 Leica Biosystems Imaging, Inc. 1360 Park Center Drive Vista, CA 92081 미국 전화: +1 (866) 478-4111(수신자 부담) 직통 국제 전화: +1 (760) 539-1100	질의와 서비스 요청에 대해서는 현지 지원 담당자에게 문의하십시오.  <a href="https://www.leicabiosystems.com/contact-us/">https://www.leicabiosystems.com/contact-us/</a>

**연구용으로만 사용할 수 있습니다. 진단의 목적으로 사용할 수 없습니다.**



00815477020228, 00815477020471, 00815477020495



23GT450, 23GT450SAMSW, 23GT450-R