

Leica IP S

Imprimante pour lames porte-objets

Mode d'emploi
Français

Numéro de référence : 14 0601 80105 - Révision L

Toujours garder ce mode d'emploi à proximité de l'appareil.
Lire soigneusement avant la mise en service.

CE



Les informations, données numériques, notes et valeurs de jugement figurant dans le présent mode d'emploi représentent l'état actuel des connaissances scientifiques et de la technologie de pointe, tel que nous le concevons suite aux recherches approfondies effectuées dans ce domaine.

Nous ne sommes pas tenus de procéder à une mise à jour périodique et sur une base permanente du présent mode d'emploi selon les dernières évolutions techniques, ni de fournir à nos clients des copies, mises à jour supplémentaires, etc. du mode d'emploi.

Dans les limites autorisées par le système légal national applicable dans chaque cas particulier, notre responsabilité n'est pas engagée pour les énoncés, croquis, illustrations techniques erronés contenus dans le présent mode d'emploi. En particulier, toute responsabilité quant aux pertes financières ou dommages consécutifs causés par ou en relation avec les énoncés ou autres informations contenus dans le présent mode d'emploi est exclue.

Les énoncés, croquis, illustrations et autres informations relatives aux contenus ou les détails techniques figurant dans le présent mode d'emploi ne peuvent être considérés comme des caractéristiques garanties de nos produits.

Sur ce point, seules les dispositions contractuelles établies entre nous et nos clients font autorité.

Leica se réserve le droit de modifier les spécifications techniques ainsi que le processus de fabrication sans préavis. C'est seulement ainsi qu'un processus permanent d'amélioration de la technologie et du processus de fabrication de nos produits est possible.

Cette documentation est protégée par le droit d'auteur. Tous les droits d'auteur portant sur la présente documentation sont détenus par Leica Biosystems Nussloch GmbH.

Toute reproduction (même partielle) du texte et des illustrations par impression, photocopie, microfilm, Web Cam ou autres procédés, y compris tous les systèmes et supports électroniques, est soumise à l'autorisation préalable expresse et par écrit de Leica Biosystems Nussloch GmbH.

Le numéro de série et l'année de fabrication de l'appareil sont indiqués sur la plaque signalétique figurant au dos de l'appareil.



Leica Biosystems Nussloch GmbH

Heidelberger Str. 17 - 19

69226 Nussloch

Allemagne

Tél. : +49 - (0) 6224 - 143 0

Fax : +49 - (0) 6224 - 143 268

Web : www.LeicaBiosystems.com

Sommaire

1. Information importante	6
1.1 Signification des symboles utilisés.....	6
1.2 Qualification du personnel.....	10
1.3 Utilisation conforme à la destination.....	10
1.4 Type d'appareil	10
2. Sécurité	11
2.1 Consignes de sécurité	11
2.2 Indications de danger.....	12
3. Composants de l'appareil et spécifications.....	14
3.1 Vue d'ensemble – appareil	14
3.2 Caractéristiques techniques.....	17
3.3 Caractéristiques d'impression	19
3.3.1 Conditions à respecter pour l'utilisation des lames porte-objets	19
3.3.2 Caractéristiques d'impression	20
3.3.3 Impression de codes-barres.....	21
4. Mise en service de l'appareil	25
4.1 Emplacement approprié	25
4.2 Déballage de l'appareil.....	25
4.2.1 Installation de l'imprimante	28
4.3 Équipement standard	28
4.4 Installation de la station de prélèvement manuel	29
4.5 Station de prélèvement automatique (en option).....	30
4.6 Montage/remplacement de la lampe flash	32
4.7 Remplissage et insertion des chargeurs	35
4.8 Connexion électrique	36
4.9 Remplacement de la cartouche de transport par une cartouche d'encre.....	38
4.10 Installation du pilote de l'imprimante	44
5. Fonctionnement.....	45
5.1 Fonctions du panneau de commande	45
5.2 Indications affichées.....	51
5.3 Fonctions d'alarme.....	53
5.4 Réglages du pilote de l'imprimante	54
6. Nettoyage et maintenance	58
6.1 Nettoyage de l'appareil	58
6.2 Nettoyage de la tête d'impression.....	60
6.3 Remplacement des cartouches	63
6.3.1 Retrait de la cartouche d'encre usagée.....	63
6.3.2 Introduction de la cartouche d'encre neuve.....	64
6.3.3 Retrait du capuchon de protection.....	64
6.4 Instructions de maintenance générale.....	64
6.5 Entreposage de l'appareil	65

7.	Correction des erreurs.....	70
7.1	Défaillances.....	70
7.2	Messages d'état.....	71
7.3	Messages d'erreur.....	72
7.4	Remplacement de la lampe flash.....	75
7.5	Panne de courant.....	76
7.6	Remplacement des fusibles secondaires.....	77
8.	Garantie et service après-vente	78
9.	Certificat de décontamination.....	79

1. Information importante

1.1 Signification des symboles utilisés



Avertissement

Leica Biosystems GmbH n'assume aucune responsabilité quant aux pertes ou dommages consécutifs résultant du non-respect des instructions suivantes, en particulier concernant le transport et la manipulation du paquet et le non-respect des instructions concernant la manipulation minutieuse de l'appareil.

Symbole :



Titre du symbole :

Avertissement

Description :

Les avertissements apparaissent dans un cadre gris et sont repérés par un triangle de sécurité.

Symbole :



Titre du symbole :

REMARQUE

Description :

Notes, c.-à-d. des informations utilisateur importantes, apparaissent dans un cadre gris et sont repérées par un symbole d'information.

Symbole :

→ "Fig. 7 - 1"

Titre du symbole :

Numéro d'article

Description :

Numéros d'article pour la numérotation des figures. Les numéros en rouge se réfèrent aux numéros d'articles contenus dans les figures.

Symbole :

START (DÉMARRER)

Titre du symbole :

Touche de fonction

Description :

Les touches fonctionnelles que l'utilisateur doit presser sur l'appareil sont affichées en lettres capitales, en gras, et en texte de couleur noire.

Symbole :

Prêt

Titre du symbole :

Clé logicielle et/ou messages d'affichage

Description :

Les clés logicielles que l'utilisateur doit presser sur l'affichage et/ou des messages sur l'affichage sont affichés en gras, en texte gris.

Symbole :



Titre du symbole :

Avertissement, surface chaude

Description :

Ce symbole de mise en garde identifie les surfaces de l'appareil qui sont chaudes pendant le fonctionnement. Évitez tout contact direct afin de prévenir les risques de brûlure.

Symbole :




Titre du symbole :

Avertissement, risque de choc électrique

Description :


Les surfaces de l'appareil ou zones qui sont sous tension pendant le fonctionnement sont repérées par ce symbole. C'est pourquoi tout contact doit être évité.

<p>Symbole :</p> 	<p>Titre du symbole :</p> <p>Description :</p>	<p>Fabricant</p> <p>Indique le nom du fabricant du dispositif médical.</p>
<p>Symbole :</p> 	<p>Titre du symbole :</p> <p>Description :</p>	<p>Date de fabrication</p> <p>Indique la date de fabrication du dispositif médical.</p>
<p>Symbole :</p> 	<p>Titre du symbole :</p> <p>Description :</p>	<p>Marque de conformité réglementaire (RCM)</p> <p>La marque de conformité réglementaire (RCM) indique la conformité d'un dispositif avec les normes techniques ACMA applicables de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, c.-à-d. pour les télécommunications, les communications radio, la CEM et l'environnement électromagnétique.</p>
<p>Symbole :</p> 	<p>Titre du symbole :</p> <p>Description :</p>	<p>Conformité CE</p> <p>Le marquage CE est une déclaration de la part du fabricant que le produit médical correspond aux exigences des directives CE applicables.</p>
<p>Symbole :</p> 	<p>Titre du symbole :</p> <p>Description :</p>	<p>Déclaration CSA (Canada/États-Unis)</p> <p>La marque de contrôle CSA signifie qu'un produit a été testé et qu'il satisfait aux normes de sécurité et/ou de performance applicables, y compris les normes pertinentes définies ou administrées par l'American National Standards Institute (ANSI, institut national de normalisation américain), les Underwriters Laboratories (UL), l'association canadienne de normalisation (CSA), la National Sanitation Foundation International (NSF) et autres.</p>
<p>Symbole :</p> 	<p>Titre du symbole :</p> <p>Description :</p>	<p>RoHS Chine</p> <p>Symbole de protection de l'environnement de la directive RoHS Chine. Le nombre correspond à la "période d'utilisation avec protection de l'environnement" du produit en années. Ce symbole est employé quand un matériau limité en Chine est utilisé au-delà de la limite maximale admissible.</p>
<p>Symbole :</p> 	<p>Titre du symbole :</p> <p>Description :</p>	<p>Symbole DEEE</p> <p>Le symbole DEEE, indiquant la collecte séparée de DEEE, déchets d'équipements électriques et électroniques, représente une poubelle sur roues barrée d'une croix (article 7 de la loi allemande sur les équipements électriques et électroniques, ElektroG).</p>

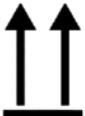Symbole :	Titre du symbole :	courant alternatif
		
Symbole :	Titre du symbole :	Numéro d'article
	Description :	Indique le numéro du catalogue du fabricant de sorte que le dispositif médical puisse être identifié.
Symbole :	Titre du symbole :	Numéro de série
	Description :	Indique le numéro de série du fabricant de sorte qu'un dispositif médical spécifique puisse être identifié.
Symbole :	Titre du symbole :	Consulter le mode d'emploi
	Description :	Indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter le mode d'emploi.
Symbole :	Titre du symbole :	MARCHE (alimentation)
	Description :	L'alimentation en courant est connectée en actionnant l' interrupteur réseau .
Symbole :	Titre du symbole :	ARRÊT (alimentation)
	Description :	L'alimentation en courant est déconnectée en actionnant l' interrupteur réseau .
Symbole :	Titre du symbole :	Fragile, à manipuler avec précaution
	Description :	Signale un dispositif médical pouvant être cassé ou endommagé s'il n'est pas manipulé avec précaution.
Symbole :	Titre du symbole :	Entreposer dans un endroit sec
	Description :	Signale un dispositif médical qui doit être protégé de l'humidité.
Symbole :	Titre du symbole :	Restrictions relatives à l'empilage
	Description :	Il est interdit d'empiler des paquets, et aucune charge ne doit être placée au-dessus du paquet.
Symbole :	Titre du symbole :	Position droite
	Description :	Indique la position verticale correcte du colis.

Symbole :

Storage temperature range:

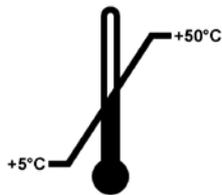

Titre du symbole :

Description :

Limite de température pour le transport

Indique les limites de température auxquelles le dispositif médical peut être exposé en toute sécurité pendant le transport.

Symbole :




Titre du symbole :

Description :

Limite d'humidité pour le transport et le stockage

Indique la plage d'humidité à laquelle le dispositif médical peut être exposé en toute sécurité pendant le transport et le stockage.

Symbole :

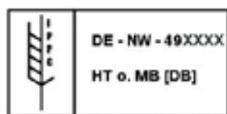

Titre du symbole :

Description :

Symbole CIPV

Le symbole CIPV inclut

Symbole CIPV

- Code de pays selon ISO 3166, par ex. DE pour l'Allemagne
- Identifiant régional, par ex. NW pour la Rhénanie-du-Nord-Westphalie
- Numéro d'enregistrement, numéro commençant uniquement par 49.
- Méthode de traitement, par ex. HT (traitement thermique)

Symbole :



Titre du symbole :

Description :

Inflammable (étiquette d'emballage)

Marquage de l'emballage, conformément à l'ordonnance allemande sur le transport de marchandises dangereuses par route et voie ferrée (GGVSE)/accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR), pour le transport de marchandises dangereuses.

Classe 3 : "LIQUIDE INFLAMMABLE"

Symbole :



Titre du symbole :

Description :

Indicateur d'inclinaison

Indicateur permettant de surveiller si le colis a été transporté et stocké en position verticale conformément à vos exigences. Si le colis est incliné à 60° ou plus, du sable quartzéux bleu s'écoule dans le champ d'affichage en forme de flèche et y reste collé. Une manipulation non conforme du colis est donc visible immédiatement et peut être décelée indubitablement.

1.2 Qualification du personnel

- L'imprimante Leica IP S ne doit être utilisée que par un personnel de laboratoire qualifié.
- L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions figurant dans le mode d'emploi. L'appareil est exclusivement prévu pour un usage professionnel.

1.3 Utilisation conforme à la destination

Système d'impression Leica IP S pour lames porte-objets standard.

- L'appareil a été mis au point notamment pour les laboratoires de pathologie, d'histologie, de cytologie, de toxicologie et sert uniquement à l'impression de lames porte-objets standard.
- Seuls les lames porte-objets et réactifs mentionnés en ([→ P. 19 – 3.3 Caractéristiques d'impression](#)) garantissent une qualité satisfaisante et une résistance suffisante des impressions au traitement ultérieur dans les préparateurs de tissus.
- L'appareil doit seulement être utilisé conformément aux instructions figurant dans le mode d'emploi.

Toute autre utilisation de l'appareil sera considérée comme non conforme à sa destination.



Note

Le respect de toutes les consignes mentionnées dans le mode d'emploi et des travaux d'inspection et de maintenance est également considéré comme condition de l'utilisation conforme.

1.4 Type d'appareil

Toutes les informations contenues dans ce mode d'emploi sont uniquement applicables au type d'appareil mentionné sur la page de garde. Une plaque signalétique portant le numéro de série est fixée au dos de l'appareil.

2. Sécurité



Avertissement

Suivez impérativement les consignes de sécurité et les indications de danger contenues dans ce chapitre.

Lisez ces consignes et indications même si vous êtes déjà familiarisé avec la manipulation et l'utilisation d'un Leica.

2.1 Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi contient des instructions et informations importantes pour la sécurité de fonctionnement et le maintien en bon état de l'appareil.

Il fait partie intégrante de l'appareil. Il convient de le lire attentivement avant la mise en service et l'utilisation et de le conserver auprès de l'appareil.

L'appareil a été fabriqué et contrôlé conformément aux dispositions relatives à la sécurité des instruments électriques de mesure, de commande, de réglage et des instruments de laboratoire.

Pour bénéficier de ce niveau de sécurité et travailler sans risque sur l'appareil, l'utilisateur devra se conformer à toutes les instructions et mises en garde contenues dans ce mode d'emploi.



Note

Le présent mode d'emploi doit être complété, si besoin est, par la réglementation nationale en vigueur pour la prévention des accidents et la protection de l'environnement dans le pays de l'utilisateur.

Vous trouverez des informations actuelles sur les normes utilisées dans la Déclaration de conformité CE qui est disponible sur Internet à l'adresse suivante :

<http://www.LeicaBiosystems.com>



Avertissement

Ne jamais supprimer ou modifier les dispositifs de sécurité de l'instrument ou de ses accessoires. Seuls les techniciens du service après-vente agréés et qualifiés sont habilités à ouvrir et réparer l'appareil.

Utilisez uniquement le câble secteur fourni. Il ne faut pas le remplacer par un câble secteur différent. Si la fiche secteur ne passe pas dans votre prise, veuillez contacter notre service après-vente.

Autres risques :

L'appareil a été fabriqué selon l'état actuel de la technique et conformément aux règles de sécurité reconnues. L'utilisation et la manipulation non conformes peuvent présenter un risque pour l'intégrité physique et la vie de l'utilisateur ou de tiers, ou des dommages matériels. L'appareil doit être utilisé conformément à l'usage prévu et seulement s'il est en parfait état de fonctionnement. Les défaillances susceptibles d'avoir des conséquences en termes de sécurité doivent être immédiatement éliminées.

2.2 Indications de danger

Les dispositifs de sécurité qui ont été installés sur cet appareil par le fabricant ne sont que l'élément de base de la prévention des accidents. Ce sont en premier lieu l'exploitant chez lequel l'appareil est employé, ainsi que les personnes mandatées par l'exploitant et chargées de commander, entretenir ou réparer cet appareil qui assument la responsabilité principale pour une exécution des travaux sans accidents.

Pour garantir un fonctionnement impeccable de l'appareil, il convient de tenir compte des instructions et mises en garde suivantes.

Remarques relatives aux dangers - transport et installation



Avertissement

- Une fois sorti de son emballage, transporter impérativement l'appareil en position droite.
- L'appareil ne doit pas être exposé aux rayons de lumière directe (fenêtre, lampes de forte intensité).
- Raccorder impérativement l'appareil à une prise de courant mise à la terre. La mise à la terre ne doit pas être neutralisée par une rallonge sans conducteur de protection.
- Il est interdit d'exploiter l'appareil dans des locaux exposés à un risque d'explosion !
- Une condensation peut se former si une grande différence de température existe entre le lieu de stockage et le lieu d'utilisation de l'appareil, en conjonction avec une hygrométrie élevée. Dans ce cas, il faut attendre au moins deux heures avant de mettre l'appareil sous tension. Le non-respect de ce délai exposerait l'appareil à des dommages.

Remarques relatives aux dangers - consignes de sécurité figurant sur l'appareil



Avertissement

Les consignes de sécurité mises en évidence sur l'appareil par un triangle de sécurité signifient que les étapes appropriées doivent être exécutées pendant l'utilisation ou l'échange du composant considéré conformément au présent mode d'emploi.

Le non-respect de ces instructions risque d'occasionner des accidents, blessures et d'endommager l'appareil ou les accessoires.

Certaines surfaces de l'appareil s'échauffent après la mise en marche. Elles sont mises en évidence par cette indication de danger :



Toucher ces surfaces risque d'entraîner des brûlures.

Remarques relatives aux dangers - utilisation de l'appareil**Avertissement**

- Cet appareil ne doit être utilisé que par un personnel de laboratoire initié. Il sera exclusivement utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été conçu et selon les instructions fournies dans le présent mode d'emploi.
- Une fois le câble secteur débranché (disjoncteur), l'appareil est hors tension, débrancher la fiche secteur en cas d'urgence.
- Lorsque l'appareil est en service, il est interdit de saisir la glissière. Risque de blessure !
- Ne pas ouvrir le réflecteur de la lampe flash quand l'appareil est **allumé**, ceci peut occasionner un risque de brûlure et d'éblouissement.
- Le responsable de l'appareil est tenu de respecter et de consigner les valeurs limites du lieu de travail en vigueur au niveau local.

Remarques relatives aux dangers - maintenance et nettoyage**Avertissement**

- Avant chaque opération de maintenance, éteindre l'appareil et retirer le câble d'alimentation de la prise secteur.
- Pour nettoyer les surfaces extérieures, utiliser un nettoyant ménager doux au pH neutre, en vente dans le commerce. NE doivent PAS être utilisés : les alcools, les produits de nettoyage à base d'alcool, (lave-vitres !), les produits abrasifs ainsi que les solvants à base d'acétone ou de xylène ! Les surfaces laquées et le panneau de commande ne sont pas résistants au xylène et à l'acétone.
- Lors du fonctionnement et du nettoyage de l'appareil, veiller à ce qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur.

3 Composants de l'appareil et spécifications

3. Composants de l'appareil et spécifications

3.1 Vue d'ensemble – appareil

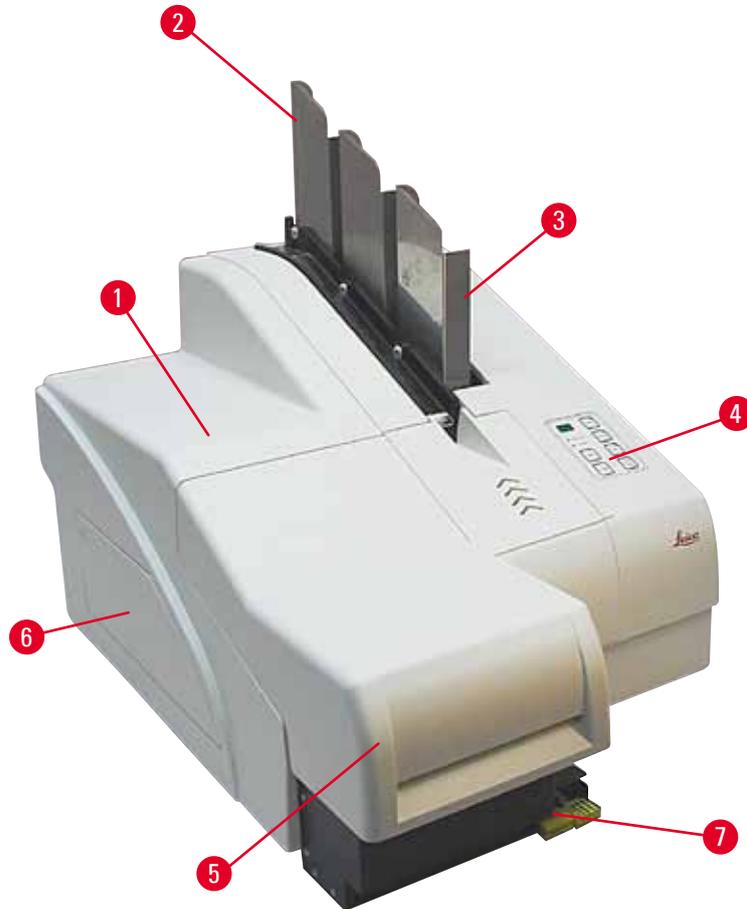


Fig. 1

- 1 Appareil de base
- 2 Chargeurs pour lames porte-objets
- 3 Chargeur n° 1
- 4 Panneau de commande
- 5 Capot
- 6 Couvercle du compartiment des cartouches
- 7 Station de prélèvement (manuelle)

Face sans capot

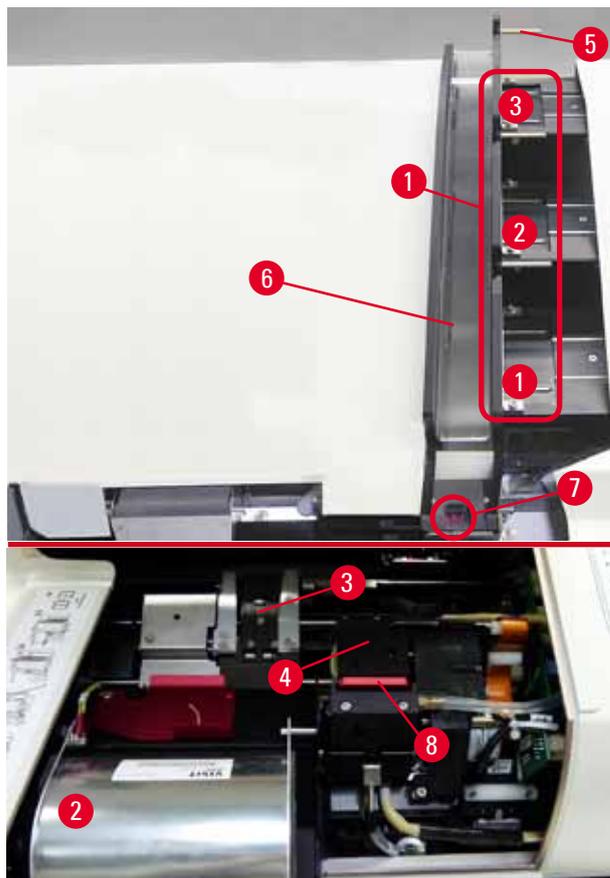


Fig. 2

- 1 Emplacements du chargeur n° 1 à 3
- 2 Couvercle de la lampe flash
- 3 Pince à lames porte-objets
- 4 Tête d'impression
- 5 Porte-chargeurs
- 6 Glissière de chargement avec couvercle
- 7 Point de transfert : glissière --> pince à lames porte-objets, avec capteur
- 8 Disque amovible avec joint à lèvres

3 Composants de l'appareil et spécifications

Dos et raccords électriques

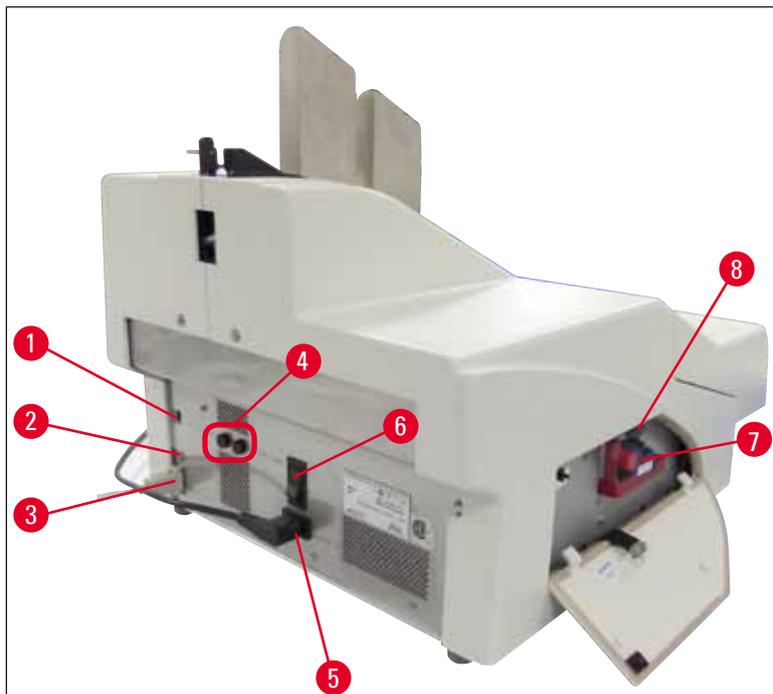


Fig. 3

- 1 Interrupteur DIL
- 2 Prise pour alarme externe
- 3 Prise pour câble d'imprimante
- 4 Fusibles secondaires
- 5 Connexion à l'alimentation électrique
- 6 Interrupteur principal
- 7 Cartouche de transport/cartouche d'encre
- 8 Tiroir à débris



Note

Une attention particulière doit être accordée à la (→ "Fig. 3-7"). L'appareil est livré avec la cartouche de transport installée !

Pour que l'imprimante fonctionne, une cartouche d'encre doit être insérée à la place de la cartouche de transport (→ P. 38 – 4.9 Remplacement de la cartouche de transport par une cartouche d'encre).

3.2 Caractéristiques techniques

Informations générales sur l'appareil

Homologations :	les symboles des homologations spécifiques de l'appareil sont indiqués au dos de l'appareil, à côté de la plaque signalétique.
Tension nominale :	100 à 120 V ~ +/- 10 % 200 à 240 V ~ +/- 10 %
Fréquence nominale :	50 à 60 Hz
Fusible secteur :	2x T 3,15 A L250 V
Courant absorbé max à 100 - 120 V :	4,0 A
Courant absorbé max à 200 - 240 V :	2,8 A
Courant de fuite à 240 V/50 Hz :	env. 2,4 mA
Puissance nominale :	700 VA
Classification selon CEI 1010 :	classe de protection 1, degré de pollution 2 Catégorie de surtension II
Altitude :	jusqu'à max. 2 000 m au-dessus du niveau de la mer
Niveau sonore A :	< 70 dB (A)
Classe de protection IP (CEI 60529)	IP20

Conditions climatiques nécessaires au fonctionnement de l'appareil :

Température :	+15 °C à +30 °C
Hygrométrie relative :	20 - 85 %, sans condensation

Conditions climatiques nécessaires au transport de l'appareil emballé :

Plage de température de stockage :	+5 °C à +50 °C
Plage de température de transport :	-29 °C à +50 °C
Hygrométrie relative :	10 - 85 %, sans condensation

Dimensions et poids :

Dimensions de l'appareil de base

Largeur x profondeur :	475 x 650 mm
Hauteur, chargeur inclus:	560 mm

Dimensions, station de prélèvement incluse :

Largeur x profondeur :	548 x 650 mm
Hauteur, chargeur inclus:	655 mm
Poids à vide de l'appareil de base :	env. 28 kg
Poids, emballage inclus :	env. 65 kg
Poids à vide de la station de prélèvement :	env. 14 kg
Poids, emballage inclus :	env. 32 kg

Performance :

Capacité de chargement : jusqu'à 3 chargeurs,
jusqu'à 150 lames porte-objets par chargeur

Vitesse d'impression¹ :

Impression de lots : 14 lames porte-objets/minute (impression sur deux lignes)

Impression individuelle : 10 s par lame porte-objets

Capacité de la cartouche d'encre² : env. 60 000 impressions ou 3,5 mois

Durée de vie de la lampe flash : env. 150.000 flashes

Impression :

Résolution d'impression³ : 360 x 360 dpi / 180 x 180 dpi, réglable

Support d'impression : lame porte-objets en verre avec zone imprimable à revêtement

76 x 26 mm, épaisseur max. 1,2 mm

Formats d'impression : Slide

Surface d'impression : max. 25,4 x 18,0 mm

Configuration informatique requise :

PC compatible IBM

Fréquence d'impulsions du processeur : min. 800 MHz

Mémoire principale (RAM) : min. 256 Mo

Disque dur : min. 6 Go

Lecteur de CD-ROM

1 interface série disponible

Systèmes d'exploitation : Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows 8.1 (32 bits et 64 bits), Windows 10 (32 bits et 64 bits)

¹) Valeur moyenne - la vitesse exacte dépend dans chaque cas de la configuration du système et du logiciel utilisé.

²) Valeur moyenne - le nombre exact de lames porte-objets dépend dans chaque cas de la quantité à imprimer et du degré de noircissement de l'impression.

³) Mesure effectuée en points de trames adressables/pouce.

3.3 Caractéristiques d'impression

Seules les lames porte-objets standard à bords colorés imprimables (→ "Fig. 4-1") peuvent être imprimées dans le Leica IP S (→ "Fig. 4").

Il n'est pas possible d'imprimer directement sur le verre.

Les lames porte-objets ayant les dimensions suivantes peuvent être traitées : 76 x 26 mm, épaisseur max. 1,2 mm.

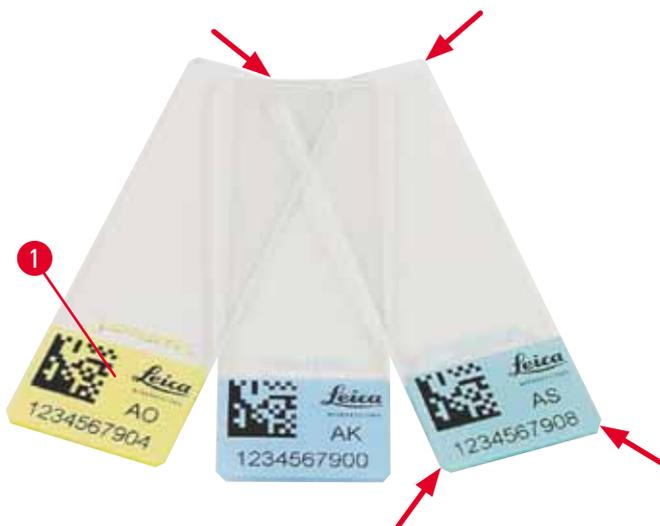


Fig. 4

La nature de la surface imprimable de la lame porte-objets est déterminante pour l'obtention d'un résultat d'impression optimal et pour la durabilité de l'impression. La surface imprimable peut énormément varier d'un fabricant à un autre et dépend, en outre, fortement de la couleur et du revêtement (chargement positif). Il peut également y avoir de grandes différences dans un même lot. Contrairement au blanc pur, les surfaces de couleur peuvent renfermer des pigments qui permettront à l'encre de se répartir uniformément et de mieux adhérer.

La qualité d'impression et la stabilité de l'encre des lames porte-objets ayant une surface d'impression blanche doivent avoir été contrôlées avant l'achat. La surface d'impression ainsi que le verre de certaines lames porte-objets portent un revêtement, ce qui peut poser des problèmes concernant l'adhérence de l'encre. Il faut donc aussi contrôler la qualité d'impression et la durabilité de l'encre au préalable pour ces lames porte-objets.

3.3.1 Conditions à respecter pour l'utilisation des lames porte-objets

- Pour réduire la quantité de poussière de verre et éviter toute panne mécanique, seules des lames porte-objets à coins biseautés (angle de 45° à chaque coin, (→ "Fig. 4")) doivent être utilisées.
- Les lames porte-objets utilisées pour l'impression doivent toujours être conservées dans un coffret fermé, à l'abri de la poussière et de l'humidité.
- Les lames porte-objets chargées positivement adhèrent les unes aux autres, il convient donc de les manipuler avec un soin particulier afin de garantir un travail fiable de l'imprimante.

3 Composants de l'appareil et spécifications

- La surface imprimée de la lame porte-objets doit être traitée immédiatement après l'impression. Il est à noter toutefois que l'encre spéciale est fabriquée à base d'alcool et que la qualité de l'impression peut diminuer considérablement si l'encre est exposée à l'alcool et que l'on repasse dessus par exemple.

Supports d'impression testés et recommandés pour l'imprimante jet d'encre Leica IP S



Note

L'utilisation d'autres supports d'impression pourrait altérer la qualité de l'impression ; les lames porte-objets/cassettes risquent de plus de rester coincées lors du processus d'impression !
Si les lames porte-objets/cassettes que vous utilisez ne sont pas répertoriées ci-dessous, veuillez contacter votre représentant local Leica.

Lames porte-objets recommandées par Leica :

- Leica Snowcoat® Clipped Corner Slide
- Leica Clipped Corner X-tra® Adhesive Slides
- Lames porte-objets à coins biseautés Apex



Avertissement

Si vous utilisez des lames porte-objets d'autres fabricants, un test doit avoir été impérativement exécuté avant utilisation.

Ce test doit porter sur les points suivants :

- la compatibilité mécanique avec l'appareil,
- la qualité des impressions,
- la stabilité chimique et mécanique des impressions face aux réactifs avec lesquels les lames porte-objets entrent en contact lors des processus suivants (→ [P. 23 – Stabilité face aux réactifs](#)).

Important ! Leica Biosystems ne sera pas tenu responsable des dommages résultant d'impressions de mauvaise qualité ou ayant une résistance insuffisante aux réactifs.

3.3.2 Caractéristiques d'impression

Zone d'impression

Les paramètres se rapportant à la zone d'impression () qui sont indiqués dans le tableau suivant sont définis dans le pilote de l'imprimante.

Format	Largeur		Hauteur	
	Points	mm	Points	mm
Slide	360	25.4	256	18.0

Résolution de l'impression

La tête d'impression de l'appareil présente une résolution préconfigurée de 360 dpi dans les deux directions (verticale et horizontale). La hauteur maximale de chaque ligne imprimée est de 128 points. Cela correspond à une valeur de 9,03 mm. La zone imprimable d'une lame porte-objets est prévue pour deux lignes d'impression au maximum. Horizontalement, la surface imprimable est seulement limitée par la taille de l'objet sur lequel l'impression doit être exécutée (→ "Fig. 5"). Dans l'application utilisée pour l'impression, il convient de tenir compte des valeurs ci-dessus lors du réglage de la zone d'impression ("format du papier").

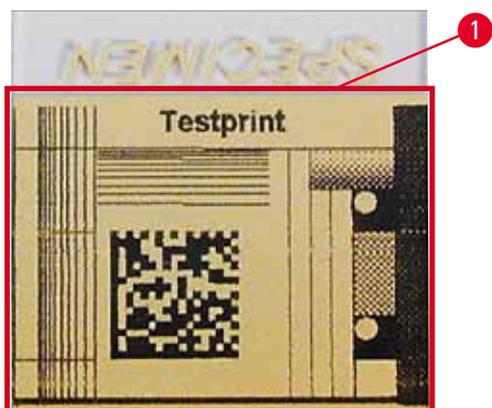


Fig. 5

Qualité de l'impression

La qualité des impressions et la résolution dépendent :

- de la matière de la surface imprimable/des colorants utilisés pour colorer la surface imprimable,
- de la structure de la surface imprimable (→ "Fig. 5-1").

La résolution finale de l'impression n'est pas seulement définie par la résolution de la tête d'impression.

Si la surface de la lame porte-objets ne convient pas à une résolution de 360 dpi, l'encre "s'écoulant" risque de produire de mauvais résultats d'impression. Dans ce cas, il faut utiliser une résolution inférieure.

À cet effet, le pilote offre la possibilité de baisser la résolution de 360 dpi à 180 dpi (→ P. 54 – 5.4 Réglages du pilote de l'imprimante).

3.3.3 Impression de codes-barres

La production de codes-barres lisibles dépend de plusieurs facteurs qui sont déterminants pour l'obtention d'un archivage fiable des résultats. Les principaux facteurs qui influencent les résultats sont les suivants :

- Technologie d'impression
- le type de production du code-barres
- le support d'impression
- le type de lecteur de codes-barres utilisé

Technologie d'impression

- En tant qu'imprimante matricielle point, cet appareil peut seulement traiter des informations sous forme de points imprimés ou non. Il n'est pas possible de transmettre des données de codes-barres, de sélectionner un type de code-barres spécifique ni de créer et d'imprimer le code-barres requis avec l'imprimante.

Création du code-barres

- Les lames porte-objets n'offrant qu'une zone d'impression limitée, le code-barres ne doit contenir que des informations indispensables.
- Un code de contrôle d'erreur doit être utilisé pour faciliter la détection des erreurs au lecteur de codes-barres. Certains codes prennent même en charge la correction des erreurs.
- Lors du calcul et de la production de codes-barres, la résolution de l'imprimante doit toujours être prise en compte.

La taille du module correspond à la largeur du plus petit élément d'un code-barres. Les traits larges et les espaces sont considérés comme des multiples de la taille du module.

La taille du module doit toujours être un diviseur entier de la résolution de l'imprimante car la technologie utilisée ne permet d'imprimer que des points entiers. Bien que l'impression paraisse nette et correcte, des erreurs de lecture peuvent se produire si, après la conversion, la largeur du module et la résolution ne concordent plus.



Avertissement

Afin qu'aucune information ne soit perdue pour ces raisons, toutes les données doivent être imprimées non seulement sous forme de codes-barres mais aussi sous forme de texte (ligne d'écriture en langage clair au-dessus ou en dessous du code).

Conditions requises pour l'impression du code-barres

La qualité et la lisibilité du code-barres imprimé dépendent, pour l'essentiel, des facteurs suivants :

- La nature et la qualité de la surface imprimable sur la zone sélectionnée de la lame porte-objets.
- La couleur de la zone imprimable.
- Le type de code-barres (1D ou 2D).
- Le nombre et le type de caractères requis dans le code-barres.
- La qualité et la capacité de résolution du lecteur de codes-barres.

Là encore, les supports d'impression recommandés par Leica permettent d'obtenir la meilleure qualité d'impression qui soit. Toutefois, chaque solution de code-barres doit avoir été impérativement testée avant la première utilisation. Veuillez contacter votre représentant local pour connaître les détails relatifs au nombre maximal de caractères pouvant être obtenus avec le code-barres 2 D.

Lecteur de codes-barres utilisé

Outre la création du code-barres correct et la qualité des lames porte-objets utilisées, les résultats de balayage dépendent finalement aussi des propriétés du lecteur de codes-barres.

Propriétés à prendre en considération :

- Tolérance de lecture :
Différence de la largeur de trait actuelle par rapport à la taille nominale du module.
- Couleur de la lumière :
Pour obtenir un contraste élevé, la couleur de la lumière du lecteur de codes-barres doit être complémentaire des couleurs des lames porte-objets utilisées.
- Résolution optique :
doit être supérieure à la taille du module.

Selon l'application, les propriétés suivantes doivent être prises en compte :

- Distance de lecture maximale
- Inclinaison maximale possible

Leica a testé avec succès les lecteurs de codes-barres ZEBRA DS6707 et DS 8108.

Stabilité face aux réactifs



Avertissement

Il est expressément stipulé que chaque laboratoire doit réaliser ses propres tests pour garantir qu'aucun problème lié à la stabilité de l'encre ne se posera lors du traitement ultérieur des lames porte-objets avec divers réactifs.

Il existe de très nombreux facteurs sur lesquels Leica n'a aucune influence et qui pourraient pourtant avoir des effets négatifs sur le résultat.

Les cassettes imprimées ont été traitées selon les conditions indiquées ci-après ; ces dernières ne peuvent toutefois que servir de base pour les spécifications de tests propres au laboratoire.

La responsabilité d'une impression lisible, même après un traitement avec des réactifs, incombe en tout cas au laboratoire utilisant l'appareil.

3 Composants de l'appareil et spécifications

Conditions de test

Les lames porte-objets imprimées ont été testées avec divers réactifs dans les conditions habituelles pour le processus de coloration.

Les lames porte-objets des fabricants suivants ont été testées :

Apex	Lame à coins biseautés
Knittel GmbH	Printer slides, adhesive slides
Leica	Clipped Corner X-tra® Adhesive Slides
Leica	Snowcoat® Clipped Corner Slide

Pour toutes les lames porte-objets, différentes couleurs (mais pas toutes les couleurs disponibles pour le type de lame porte-objets) de zone imprimable ont été utilisées.

Il n'a pas pu être prouvé que la couleur de la zone imprimable influait sur la stabilité de l'impression.



Avertissement

Il ne peut pas être garanti que l'encre sera absolument ineffaçable dans toutes les conditions de laboratoire imaginables, car la nature de la surface de la zone imprimable des lames porte-objets utilisées joue un rôle déterminant.

Important !

La zone imprimable des lames porte-objets imprimées ne doit pas être touchée avec les mains ni essuyée quand elle est encore humide.

4. Mise en service de l'appareil

4.1 Emplacement approprié



Avertissement

Il est interdit d'exploiter la machine dans des locaux exposés à un risque d'explosion !
L'appareil ne peut fonctionner correctement que si toutes les parois se trouvent à une distance minimale de 10 cm des murs et des équipements qui l'entourent.

- L'appareil requiert une zone d'installation d'env. 650 x 550 mm.
- Hygrométrie relative max. 20 à 85 %, sans condensation
- Température ambiante constamment comprise entre +15 °C et +30 °C
- Altitude : jusqu'à max. 2 000 m au-dessus du niveau de la mer
- L'appareil est exclusivement prévu pour un usage en intérieur.
- La fiche secteur/le sectionneur doivent être dégagés et aisément accessibles.
- L'alimentation électrique doit se situer dans le périmètre de la longueur du câble secteur : l'utilisation d'une rallonge est proscrite.
- La paillasse doit présenter une capacité de charge suffisante et une rigidité conforme au poids de l'appareil.
- Il convient d'éviter les vibrations, l'ensoleillement direct et les fortes variations de température. Le local où l'appareil est utilisé doit être bien aéré et exempt de toute source inflammable.
- L'appareil DOIT être raccordé à une prise de courant mise à la terre.
- Utiliser uniquement le câble secteur fourni avec l'appareil et prévu pour l'alimentation électrique locale.
- Le local doit être protégé contre les décharges électrostatiques.

4.2 Déballage de l'appareil



Avertissement

À la livraison de l'appareil, vérifier l'indicateur d'inclinaison (→ "Fig. 6") sur l'emballage (→ "Fig. 7-1"). Si la pointe de la flèche est bleue, cela signifie que l'envoi n'a pas été transporté conformément aux prescriptions.
Veuillez le mentionner sur les documents d'accompagnement et vérifiez si le colis est éventuellement endommagé.

4 Mise en service de l'appareil



Fig. 6

1. Dévisser les 8 vis (→ "Fig. 7-2") sur les côtés de la caisse en bois, puis desserrer le couvercle.
2. Retirer la boîte d'accessoires (→ "Fig. 8-1") (qui contient les accessoires et le matériel d'emballage) directement sous le capot.
3. Dévisser les 8 vis (→ "Fig. 7-3") situées en bas, à l'extérieur de la caisse en bois.

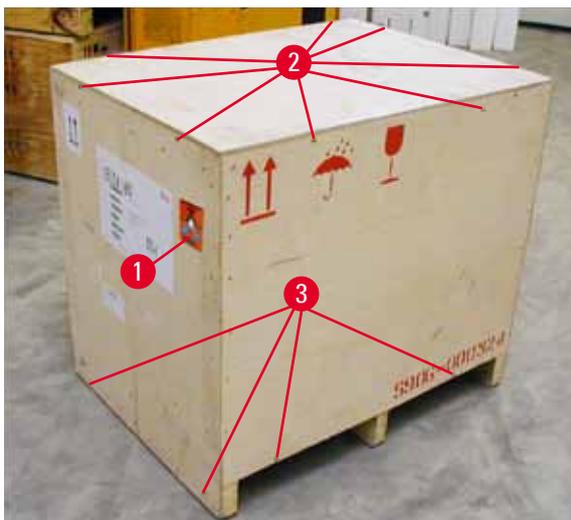


Fig. 7



Fig. 8

4. Ôter le carton intérieur autour de l'appareil.
5. Détacher la caisse en bois du fond avec précaution.
6. L'imprimante est fixée sur le fond en bois de la caisse par 4 plaques (→ "Fig. 9-2"). Desserrer les deux vis (→ "Fig. 9-1") situées à la base de l'appareil. Retirer les plaques du fond.

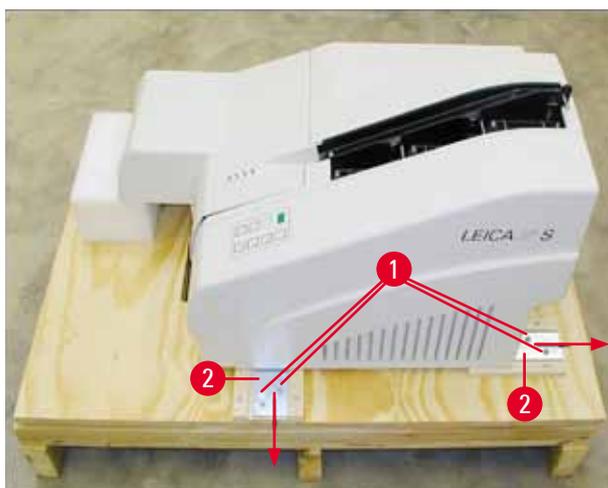


Fig. 9

7. Détacher l'imprimante du fond en bois et la transporter sur une paillasse stable, ou le cas échéant, sur la station de prélèvement automatique. Vérifier que la paillasse est bien à l'horizontale !



Avertissement

Lors du déballage de l'imprimante, il faut impérativement veiller à ce que l'appareil soit soulevé et déposé par au moins 2 personnes (une de chaque côté).

8. Une fois l'appareil installé sur son emplacement final, retirer les cales de transport en mousse (→ "Fig. 10-1") (tirer vers le haut).
9. Retirer avec précaution les éventuelles bandes adhésives.



Fig. 10

4 Mise en service de l'appareil

4.2.1 Installation de l'imprimante

- Vérifier que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport (ne pas le mettre sous tension en cas de dommage !).
- Contrôler l'intégralité des accessoires fournis, conformément à la commande passée, et vérifier qu'il n'y a aucune différence.
- Procéder aux opérations de montage suivantes :
 1. Installer les accessoires.
 2. Mettre en place le verre de protection.
 3. Mettre en place la lampe flash.
 4. Effectuer les branchements électriques.
 5. Changer de cartouche.
 6. Connecter l'appareil au PC.
 7. Installer le pilote de l'imprimante.
 8. Placer les lames porte-objets dans le chargeur.
 9. Exécuter un test d'impression.

4.3 Équipement standard

L'équipement standard de l'imprimante Leica IP S comprend les pièces suivantes :

1	Appareil de base Leica IP S, sans station de prélèvement	14 0601 33201
1	Cartouche de transport (dans l'appareil)	14 0601 42865
1	Cartouche d'encre anti-UV Leica	14 0601 42350
1	Station de prélèvement S (manuelle), complète	14 0602 35990
1	Kit d'accessoires composé de :	14 0602 38350
1	Lampe flash	14 0601 37152
3	Chargeurs pour lames porte-objets, (1 conditionnement de 3 unités)	14 0601 36689
1	Câble d'imprimante, série	14 0601 37044
1	Trousse à outils composée de :	14 0601 37000
1	Tournevis pour écrous à fente 4 x 100	14 0170 38504
1	Clé mâle à six pans, ouverture de 2,5	14 0222 04137
1	Pinceau "Leica"	14 0183 30751
1	Kit de fusibles de rechange composé de :	
2	fusibles 3.15 A T (5 x 20 mm)	14 6943 03150
1	Dispositif de verrouillage de cartouche (dans l'appareil)	14 0601 39615
2	Verres de protection	14 0601 42533
2	Plaques de transport	14 0601 40196
1	Mode d'emploi, imprimé (anglais), CD multilingue 14 0601 80200 et manuel d'installation 14 0602 82101, imprimé (anglais)	14 0601 80001

Le cordon d'alimentation spécifique du pays d'installation doit être commandé séparément. Vous trouverez la liste de tous les cordons d'alimentation disponibles pour votre appareil sur notre site Web, www.LeicaBiosystems.com, dans la rubrique Produits.

Accessoires en option

1	Station de prélèvement de lames porte-objets multi-niveaux automatique pour Leica IP S	14 0601 33225
1	Lot de plateaux de lames porte-objets pour station de prélèvement S (conditionnement de 10 unités)	14 0601 33252
1	Porte-chargeurs S pour 6 chargeurs	14 0601 36940
1	Aide au remplissage des chargeurs	14 0601 35979
1	Kit cartouche, 280 ml	14 0601 43506
1	Cartouche d'encre	14 0601 52658
1	Lot de bâtonnets de nettoyage	14 0601 39637
1	Disque amovible	14 0601 40162

4.4 Installation de la station de prélèvement manuel

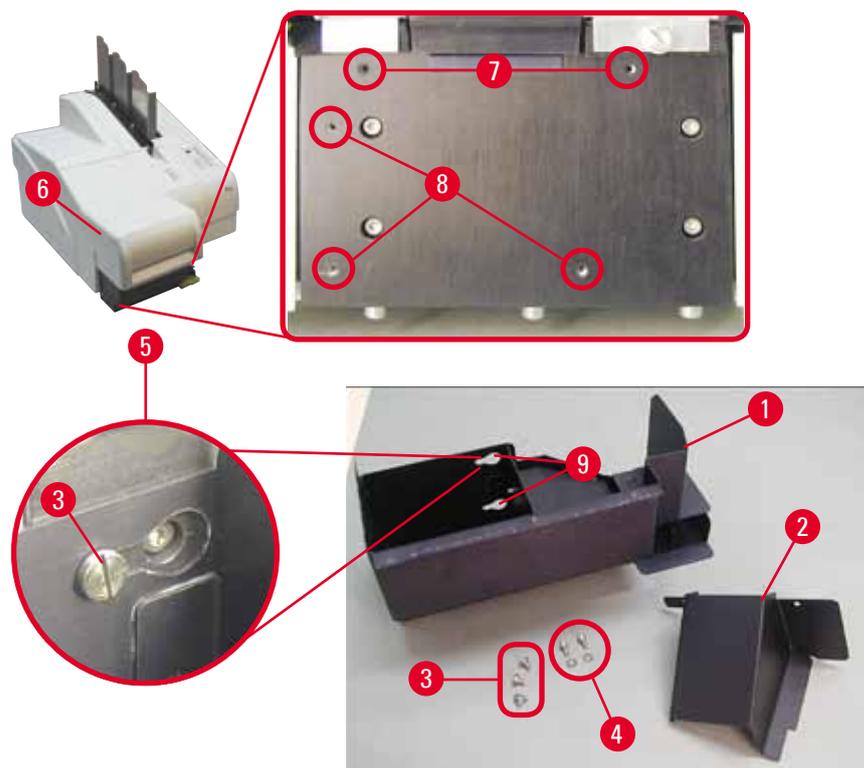


Fig. 11

Le système de prélèvement fourni se compose des éléments suivants :

- Station de prélèvement (→ "Fig. 11-1")
- Plaque de protection (→ "Fig. 11-2")
- Vis à embase (3 unités) (→ "Fig. 11-3")
- Vis à tête fendue et rondelles (2 unités) (→ "Fig. 11-4")

4 Mise en service de l'appareil

Pour le montage, procéder comme suit (→ "Fig. 11") :

1. Ouvrir le capot (→ "Fig. 11-6").
2. Il y a 5 trous taraudés (2 x (→ "Fig. 11-7") et 3 x (→ "Fig. 11-8")) dans la surface de montage située sous le réflecteur.
3. Au moyen d'un tournevis, introduire 3 vis à embase (→ "Fig. 11-3") dans les trous taraudés (→ "Fig. 11-8") jusqu'à la butée.
4. Puis, fixer le couvercle (→ "Fig. 11-2") dans les trous taraudés (→ "Fig. 11-7") à l'aide des deux vis à tête fendue et des rondelles (→ "Fig. 11-4").
5. Pour fixer la station de prélèvement à l'appareil, positionner la partie la plus large de chacun des trois trous oblongs (→ "Fig. 11-9") au-dessus de la tête de chacune des trois vis à embase (→ "Fig. 11-3").



Note

L'agrandissement de l'image (→ "Fig. 11-5") montre l'emplacement correct de la vis à embase dans le trou oblong, la station de prélèvement étant en place.

6. Adosser la station de prélèvement contre la plaque de montage tout en la faisant glisser vers la droite jusqu'à l'enclenchement (voir l'image agrandie (→ "Fig. 11-5")). S'il n'est pas possible de faire glisser la station de prélèvement sur la tôle de protection, soulever légèrement l'appareil vers l'avant.
7. Fermer le capot (→ "Fig. 11-6"), veiller à ne pas bloquer le capot avec la station de prélèvement.



Avertissement

En cas d'utilisation du système de prélèvement manuel, les lames porte-objets imprimées doivent être prélevées régulièrement. Dans le cas contraire, un bourrage se produit dans la station de prélèvement, l'impression est arrêtée et le message d'erreur 44 s'affiche.

4.5 Station de prélèvement automatique (en option)

Une station de prélèvement de lames porte-objets multi-niveaux automatique est disponible en option pour l'imprimante. Les lames porte-objets imprimées y sont rassemblées dans l'ordre d'impression sur des plateaux empilables et amovibles individuellement (→ "Fig. 12-6").

10 plateaux pouvant être insérés simultanément sont livrés avec la station de prélèvement multi-lames. Chaque plateau peut contenir jusqu'à 11 lames porte-objets.

Pour le montage de la station de prélèvement multi-lames, procéder comme suit :

1. Sortir de l'emballage la station de prélèvement automatique et la poser à l'endroit prévu.



Avertissement

Important ! L'imprimante doit être hors tension et débranchée.

Le système de prélèvement manuel décrit en (→ P. 29 – 4.4 Installation de la station de prélèvement manuel) ne doit pas être monté avant la mise en place de l'imprimante. Il faut également ôter les vis à embase (→ "Fig. 11-3").

2. Poser l'appareil sur la station de prélèvement.



Avertissement

Cette opération requiert l'intervention de 2 personnes !

3. Tenir l'imprimante par les côtés (droit et gauche) et la positionner de sorte que les deux boulons arrière (→ "Fig. 12-1") s'insèrent d'abord dans le socle, comme illustré sur la (→ "Fig. 12").
4. Puis, l'abaisser avec précaution vers l'avant jusqu'au troisième boulon (→ "Fig. 12-2") de sorte que la connexion enfichable (→ "Fig. 12-3") se bloque en place dans le socle de l'imprimante et que l'imprimante reste solidement fixée sur la station de prélèvement.
5. Poser la pile de plateaux (→ "Fig. 12-5") sur la plaque élévatrice (→ "Fig. 12-4") de la station de prélèvement automatique. Pour de plus amples informations sur la plaque élévatrice, voir (→ P. 51 – 5.2 Indications affichées).

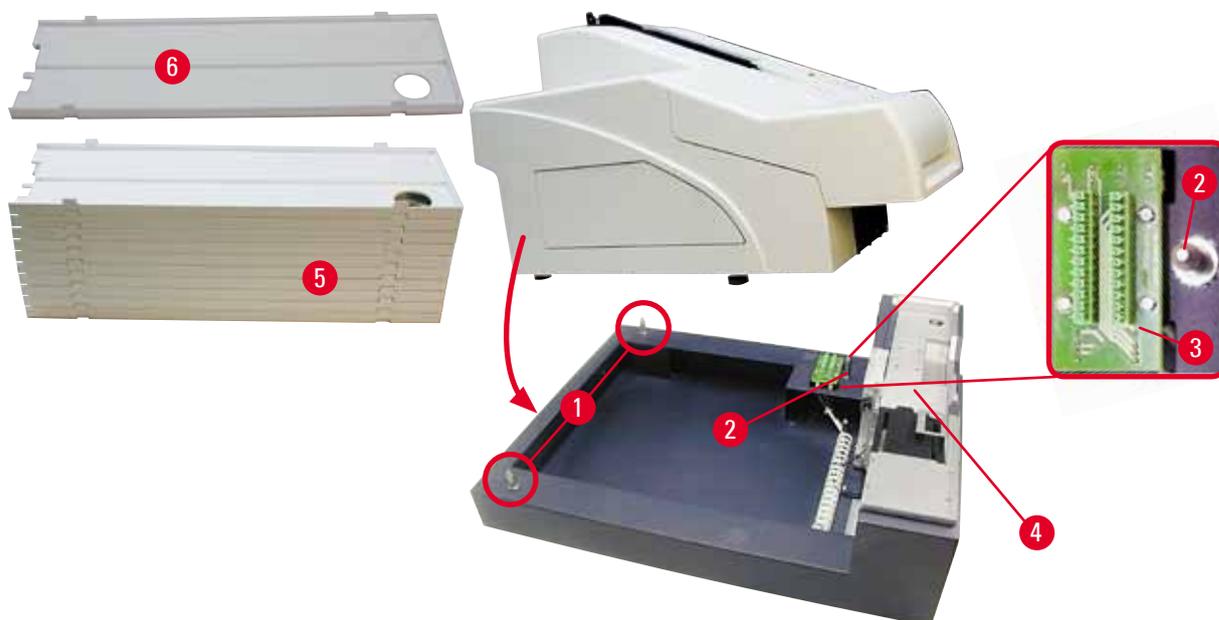


Fig. 12

4.6 Montage/remplacement de la lampe flash

Remplacement - retrait de la lampe flash



Avertissement

Mettre l'appareil hors tension et retirer la fiche secteur. Laisser la lampe flash refroidir avant de la retirer. Ne jamais toucher la lampe flash à mains nues. Il faut toujours porter des gants ou utiliser un chiffon.

1. Ouvrir le capot (→ "Fig. 11-6") pour accéder au réflecteur (→ "Fig. 13-1").
2. Ôter la vis (→ "Fig. 13-3") (utiliser le tournevis fourni dans la trousse à outils). Faire attention à la rondelle (→ "Fig. 13-2").
3. Pivoter le réflecteur (→ "Fig. 13-1") vers le haut.

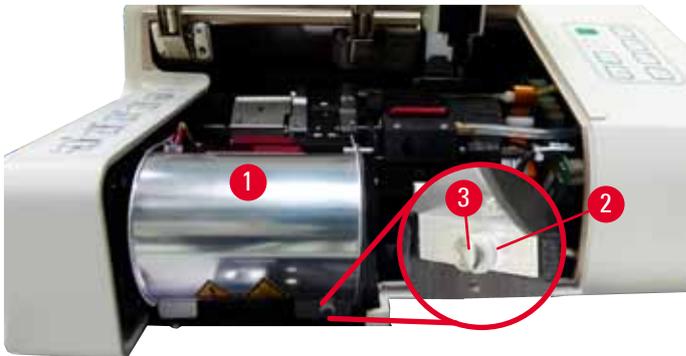


Fig. 13



Avertissement

Lors de la mise en place/du retrait de la lampe flash, il faut la tenir comme l'indique la (→ "Fig. 14") (à gauche). Ne pas la saisir comme indiqué sur la (→ "Fig. 15").



Fig. 14



Fig. 15

4. Retirer la lampe flash usagée (→ "Fig. 16-1") par la droite avec précaution sans la déformer. S'il n'est pas possible de retirer la lampe flash car elle est trop serrée, tenter de la bouger légèrement d'avant en arrière dans son logement afin de la décoincer.

5. Veiller à ce que le ressort de contact (→ "Fig. 16-2") se détache du fil d'amorce (→ "Fig. 17-4") de la lampe (voir également (→ "Fig. 17") et (→ "Fig. 18-1")).

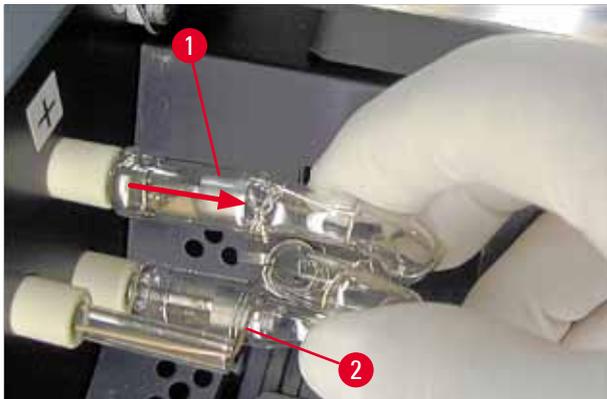


Fig. 16

Mise en place de la lampe flash

1. Commencer par insérer un verre de protection (→ "Fig. 17-1") dans les deux supports (→ "Fig. 17-2").

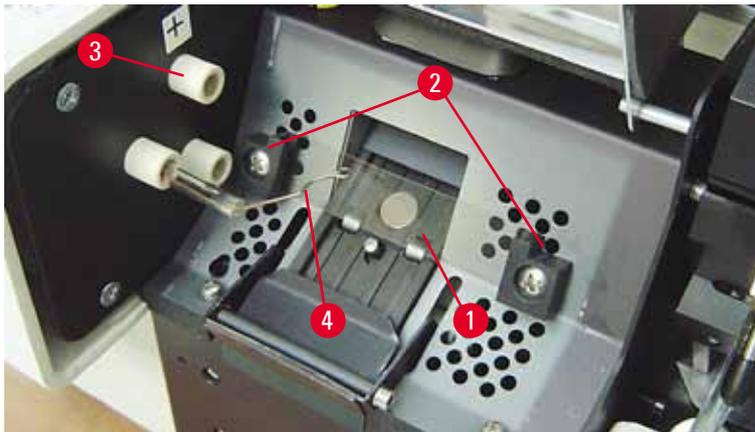


Fig. 17

2. Introduire la lampe flash neuve (→ "Fig. 18") dans le socle (→ "Fig. 17-3") ; puis l'enfoncer avec précaution jusqu'à la butée (→ "Fig. 20") (le repère de polarité (+) ne doit plus être visible). Effectuer de petits mouvements ascendants et descendants, toujours avec précaution, si nécessaire.

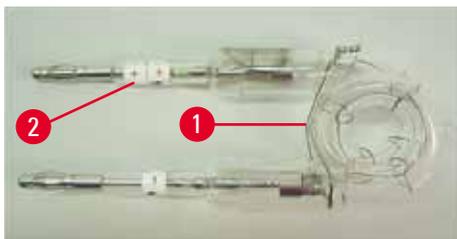


Fig. 18

4 Mise en service de l'appareil

3. Vérifier que la lampe flash est insérée correctement. L'électrode portant le repère + (→ "Fig. 19-1") doit être introduite dans le support (→ "Fig. 17-3") portant le repère correspondant (→ "Fig. 19-2").



Attention

Si la polarité n'est pas respectée, la lampe flash fonctionnera certes encore, mais sa durée de vie sera considérablement réduite.



Fig. 19

4. Après la mise en place de la lampe, le ressort de contact (→ "Fig. 20-1") doit toucher le fil d'amorce (→ "Fig. 20-2").

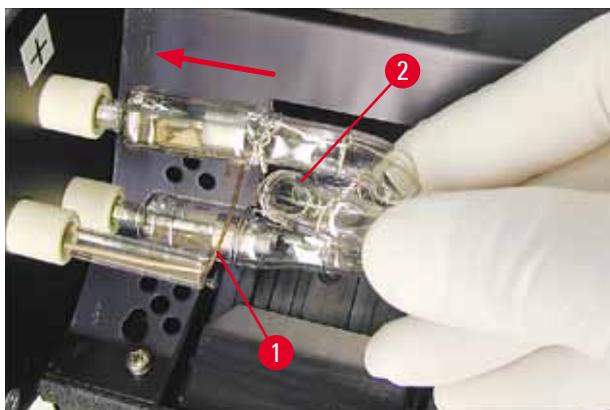


Fig. 20

5. Pivoter le réflecteur vers le bas. Remettre la vis (→ "Fig. 13-3") en place et la resserrer.
6. Refermer le capot (→ "Fig. 11-6") de l'appareil.

4.7 Remplissage et insertion des chargeurs

1. Remplissez l'un des chargeurs (→ "Fig. 21-1") de lames porte-objets (→ "Fig. 21-2"). Ce faisant, veiller à ce que la surface à imprimer (→ "Fig. 21-3") soit à gauche et orientée vers le haut.
2. Afin que les lames porte-objets soient éjectées correctement, veiller à ce qu'elles soient insérées dans le chargeur précisément alignées les unes au-dessus des autres (→ "Fig. 24") et perpendiculairement à l'ouverture (→ "Fig. 25").
3. Tenir le chargeur (→ "Fig. 21-1") légèrement incliné (→ "Fig. 22") afin d'empêcher que les lames porte-objets ne tombent du chargeur. Placer le chargeur sur l'imprimante, comme indiqué sur l'image, puis l'introduire dans le support prévu à cet effet. Les deux goupilles (→ "Fig. 22-2") du chargeur doivent être verrouillées dans la fente (→ "Fig. 22-1").



Fig. 21



Fig. 22



Fig. 23

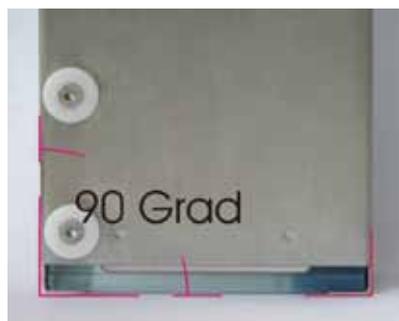


Fig. 24



Fig. 25

4 Mise en service de l'appareil



Fig. 26

Capacité :

Chaque chargeur (→ "Fig. 26-1") peut recevoir jusqu'à 150 lames porte-objets (selon l'épaisseur des différentes lames porte-objets).

La hauteur de remplissage maximale d'un chargeur est indiquée par le repère "max." (→ "Fig. 26-2") et ne doit pas être dépassée.

Les lames porte-objets chargées positivement adhèrent si fortement les unes aux autres qu'il convient de les manipuler avec un soin particulier afin de garantir une manipulation mécanique fiable de ce type de lames porte-objets par l'imprimante.

En cas d'utilisation de lames porte-objets chargées positivement, il convient d'observer les instructions suivantes :

- Avant de remplir le chargeur, les lames porte-objets chargées positivement doivent d'abord être séparées les unes des autres.
- Le chargeur doit contenir au maximum 72 lames porte-objets afin d'éviter tout problème lors de l'éjection. Ceci correspond au repère inférieur (→ "Fig. 26-3").
- Un chargement inférieur améliorera considérablement la capacité de l'appareil à éjecter les lames porte-objets chargées positivement.

4.8 Connexion électrique



Avertissement

L'appareil doit être raccordé à une prise de courant mise à la terre.

Veiller à utiliser uniquement le câble prévu pour le secteur local (la fiche doit correspondre à la prise murale).

Raccordement au secteur

① Les connexions électriques sont situées sur le panneau arrière de l'appareil (→ "Fig. 27").

1. Vérifier que l'imprimante est **hors tension**, interrupteur principal (→ "Fig. 27-3") sur "0" = **ARRÊT**.
2. Insérer le câble secteur adapté dans la prise d'entrée secteur (→ "Fig. 27-4").
3. Mettre l'appareil sous tension avec l'interrupteur principal (interrupteur sur "I" = **MARCHE**).

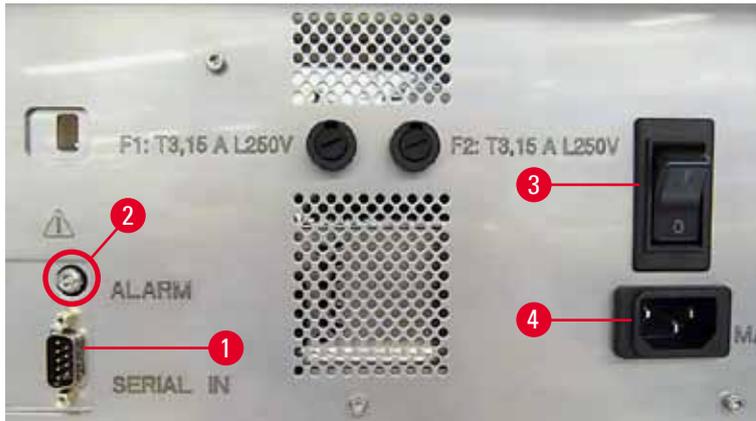


Fig. 27



Note

Après la première mise sous tension, l'interrupteur principal (→ "Fig. 27-3") doit toujours rester en position "I" = **MARCHE**.

Connexion de l'appareil au PC

- ① Le fonctionnement de l'imprimante nécessite un câble de données série (→ "Fig. 28") (→ P. 28 – 4.3 Équipement standard).
- 1. Brancher le câble sur le port de l'imprimante (→ "Fig. 27-1").
- 2. Raccorder le câble à l'un des ports série (**COM 1**, **COM 2**) du PC sur lequel le logiciel de commande fonctionne.



Fig. 28

Connexion d'un émetteur d'alarme à distance

- ① Si nécessaire, connecter le système d'alarme externe (en option) à la prise femelle (→ "Fig. 28-2").
- 1. L'émetteur d'alarme à distance se connecte à l'imprimante au moyen d'une fiche jack de 3,5 mm de diamètre.
- 2. Pour de plus amples informations sur l'alarme à distance, voir (→ P. 53 – 5.3 Fonctions d'alarme).

4 Mise en service de l'appareil



Avertissement

Tout dispositif connecté à l'une des interfaces de l'appareil doit satisfaire aux exigences imposées aux circuits de type SELV.

4.9 Remplacement de la cartouche de transport par une cartouche d'encre

À sa sortie d'usine, l'imprimante est livrée avec une cartouche de transport (→ "Fig. 29-3") insérée. Pour pouvoir imprimer, il faut remplacer la cartouche de transport par une cartouche d'encre (→ P. 28 – 4.3 Équipement standard). Pour cela, procéder comme suit :

1. Ouvrir le couvercle (→ "Fig. 29-2") situé à gauche de l'appareil (en appuyant sur l'angle supérieur gauche).
2. Desserrer le capuchon rouge (→ "Fig. 29-4") de la cartouche de transport (→ "Fig. 29-3") en le dévissant d'un tour, puis mettre l'imprimante sous tension en appuyant sur l'interrupteur principal situé à l'arrière (→ "Fig. 27-3"). Patienter jusqu'à la fin de l'initialisation.

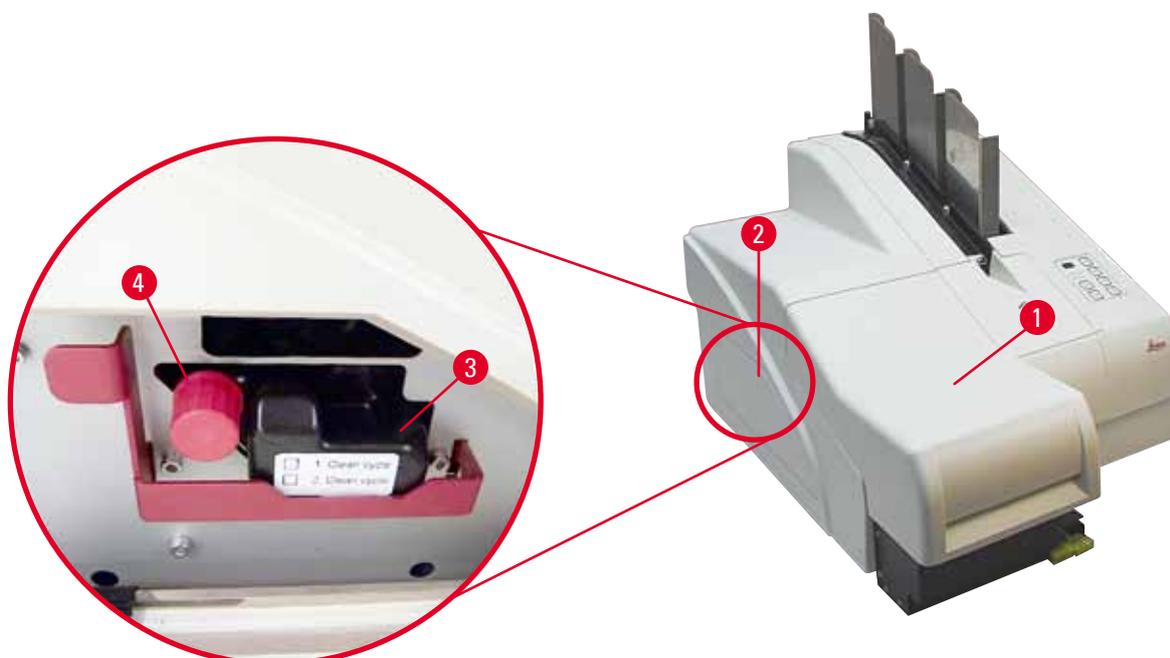


Fig. 29



3. Ouvrir le capot (→ "Fig. 29-1"), puis appuyer simultanément sur les touches **CLEAN (NETTOYAGE)** et **LOADED (CHARGÉ)** du panneau de commande (→ "Fig. 32-1").

4. La tête d'impression (→ "Fig. 30-2") s'élève jusqu'à env. 1 cm du joint à lèvres (→ "Fig. 30").
5. Lever le levier (→ "Fig. 30-1"), puis retirer la plaque de transport noire (→ "Fig. 30-3") et introduire le disque amovible (→ "Fig. 31-1") requis pour l'impression.

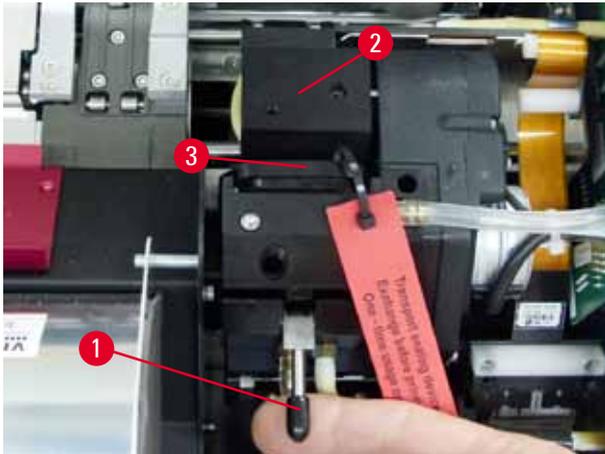


Fig. 30



Avertissement

Ne pas réutiliser de plaque de transport usagée (→ "Fig. 31-2"), elle ne permettra pas d'obtenir une tête d'impression complètement étanche.

Afin d'éviter d'endommager la tête d'impression, l'impression ne doit être effectuée qu'avec le disque amovible rouge (→ "Fig. 31-1").

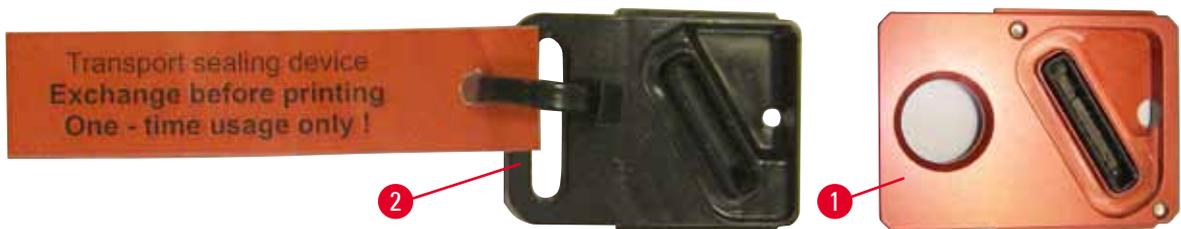


Fig. 31

6. Rabaissez le petit levier (→ "Fig. 30-1") dans sa position initiale.
7. Appuyer sur une touche quelconque du panneau de commande (→ "Fig. 32-1") afin de repositionner la tête d'impression. Après cette action, l'imprimante sera opérationnelle.



Attention

Si aucune touche n'est activée, la tête d'impression se ferme automatiquement 150 s après l'ouverture afin d'éviter tout séchage. Après 120 secondes, un signal sonore retentit (5 bips), puis le compte à rebours des 30 dernières secondes s'affiche à l'écran (→ "Fig. 32-2").

4 Mise en service de l'appareil

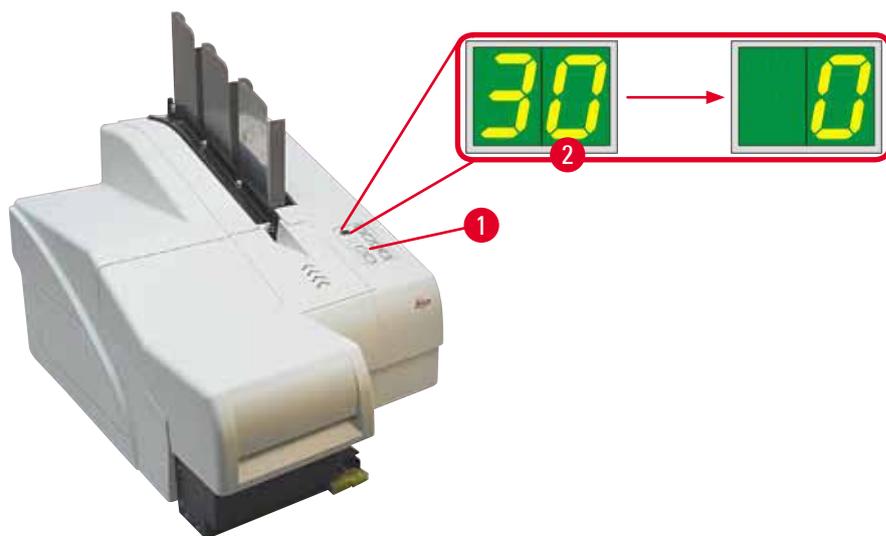


Fig. 32

8. Abaisser le support de fixation rouge (→ "Fig. 33-1") et le maintenir dans cette position afin de pouvoir retirer la cartouche de transport.
9. Extraire env. 30 mm de la cartouche de transport (→ "Fig. 33-4") hors de l'appareil jusqu'à ce que la LED **INK EMPTY (ENCRE VIDE)** s'allume (→ "Fig. 33-2").
10. Resserer le capuchon rouge (→ "Fig. 33-3"), puis retirer la cartouche entièrement (→ "Fig. 33-5").
11. Relâcher le support de fixation rouge.

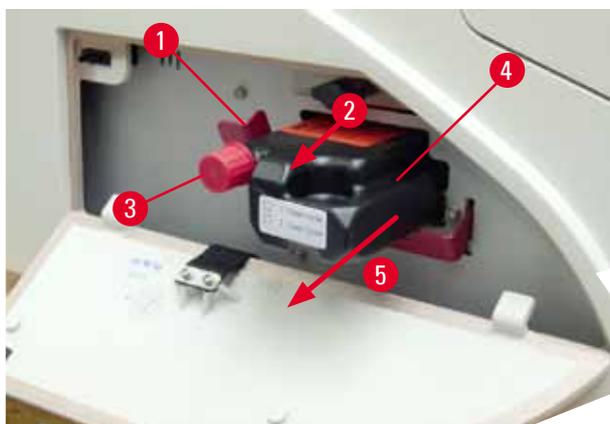


Fig. 33

- ① Afin d'éviter que le système d'encre n'aspire de l'air, toutes les fonctions sont désormais verrouillées via l'action d'un capteur se trouvant dans le compartiment des cartouches.



12. Le témoin d'affichage à **LED INK EMPTY** est allumé en permanence.

- ✓ Conserver dans un récipient fermé la cartouche de transport qui a été retirée de l'imprimante. Elle est pleine et peut encore être utilisée deux fois pour nettoyer la tête d'impression. La date limite d'utilisation est indiquée sur l'étiquette rouge.

Introduction de la cartouche d'encre



Note

- Le présent mode d'emploi utilise l'imprimante Leica IP S pour illustrer un exemple d'introduction de la cartouche d'encre.
- Respecter les informations figurant sur l'étiquette apposée sur la cartouche d'encre.



Avertissement

La cartouche d'encre doit être remplacée après 3,5 mois au plus tard ou après 60 000 impressions. Sur la surface blanche de la face avant de la cartouche d'encre, noter la date d'insertion de la cartouche d'encre.

1. Prendre une cartouche d'encre neuve dans le carton, puis retirer l'emballage en plastique.
2. Agiter la cartouche d'encre 2 ou 3 fois avec précaution.
3. Tirer le support de fixation rouge (→ "Fig. 34-1") vers l'avant, puis insérer la cartouche d'encre neuve jusqu'à la moitié dans le compartiment (→ "Fig. 34-2").
4. Ouvrir le capuchon de protection rouge (→ "Fig. 34-3") en lui faisant faire un tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

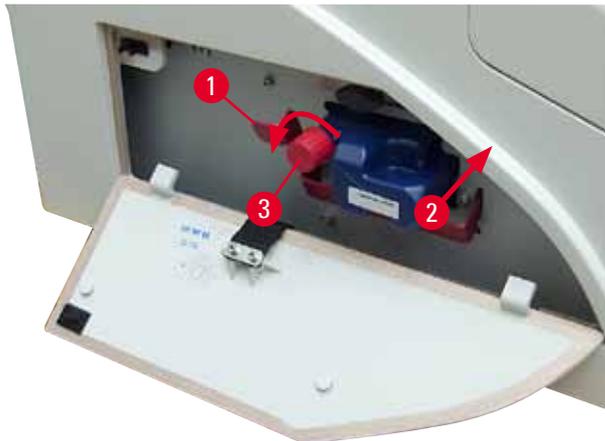


Fig. 34

- ✓ Puis, introduire la cartouche d'encre entièrement dans le compartiment.



Note

La perforation du joint de la cartouche nécessite une certaine force (→ "Fig. 35-1").

4 Mise en service de l'appareil



Fig. 35

Retrait du capuchon de protection rouge

1. Dévisser entièrement le capuchon de protection rouge (→ "Fig. 34-3").
2. Ôter l'étiquette d'information et placer le capuchon de protection rouge dans l'évidement de la cartouche d'encre (→ "Fig. 36-1").
3. Après exécution de cette tâche, vérifier que le support de fixation rouge est dans la position correcte (→ "Fig. 36-2"), puis fermer le couvercle (→ "Fig. 36-3") de l'imprimante.



Fig. 36




Avertissement

Ne jamais appuyer sur la touche **CLEAN** lorsqu'une cartouche d'encre neuve ou usagée est dans l'appareil !

Très important ! Le capuchon (→ "Fig. 34-3") doit être vissé sur la buse avant chaque transport de l'imprimante afin d'éviter tout écoulement de l'encre.

4. Le capteur du compartiment des cartouches détecte la présence d'une cartouche neuve.
5. Le témoin d'affichage à **LED INK EMPTY** s'éteint et l'indication **88** s'affiche à l'écran.

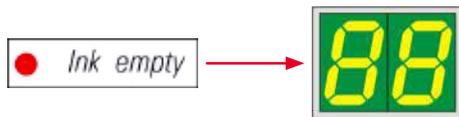

L'appareil doit maintenant être "informé" du type de cartouche récemment introduit.

Il y a trois possibilités :

1. Cartouche d'encre neuve :

» Appuyer sur **LOADED** ; L'imprimante règle le niveau d'encre sur "full" (plein).



2. Cartouche d'encre usagée :

» Appuyer sur **ERROR** (erreur) ; l'imprimante reprend la mesure du niveau d'encre là où il était auparavant.



3. Cartouche de transport usagée ou neuve :



Attention

Ne JAMAIS appuyer sur **CLEAN** quand une cartouche d'encre est dans l'appareil ! Toute l'encre contenue dans la cartouche s'écoulerait dans l'imprimante.

» Appuyer sur la touche **CLEAN** ; la valeur actuelle du compteur du niveau d'encre est enregistrée.



Note

Le niveau d'encre de la cartouche de transport n'est pas surveillé. Chaque utilisation de la cartouche de nettoyage doit être indiquée sur la cartouche. La cartouche peut être utilisée 2 fois. En cas d'insertion d'une cartouche de transport, le temps de cycle dure env. 3,5 minutes, il est donc beaucoup plus long qu'avec une cartouche d'encre.

4 Mise en service de l'appareil

- Après actionné l'une des trois touches, la routine du logiciel d'échange de l'encre démarre ; l'air est évacué de la tubulure, puis le système se remplit de liquide.

✓ L'affichage **88** s'éteint à la fin de la procédure.



Exécuter un test d'impression

① Pour contrôler si la tête d'impression fonctionne correctement, il est possible d'exécuter un test d'impression.

1. Pour ce faire, remplir le chargeur avec quelques lames porte-objets, et le placer en position 1.
2. Appuyer sur la touche **CLEAN** (Nettoyer) et la laisser enfoncée jusqu'à ce que l'affichage "**00**" apparaisse. Puis relâcher la touche. Une lame porte-objets est imprimée avec une image test enregistrée.



✓ La procédure peut être répétée plusieurs fois si l'image imprimée n'est pas satisfaisante.

4.10 Installation du pilote de l'imprimante



Note

Pour de plus amples informations sur l'installation du pilote d'imprimante, consulter le manuel d'installation du logiciel fourni avec ce mode d'emploi. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation du nouveau pilote d'imprimante, veuillez contacter le service clientèle local de Leica.

5. Fonctionnement

5.1 Fonctions du panneau de commande

Le panneau de commande

- se compose d'un clavier à membrane de six touches (dont quatre sont pourvues d'une **LED**, deux témoins d'affichage à **LED** ainsi que d'un écran constitué d'un affichage à 7 segments et 2 chiffres (→ "Fig. 37-1"),
- Sert à commander les fonctions de l'imprimante et à gérer les tâches d'impression définies avec le logiciel,
- Indique l'état actuel de l'imprimante et des processus en cours,
- Affiche les erreurs et/ou messages d'erreur
- Commande la station de prélèvement automatique (en option).

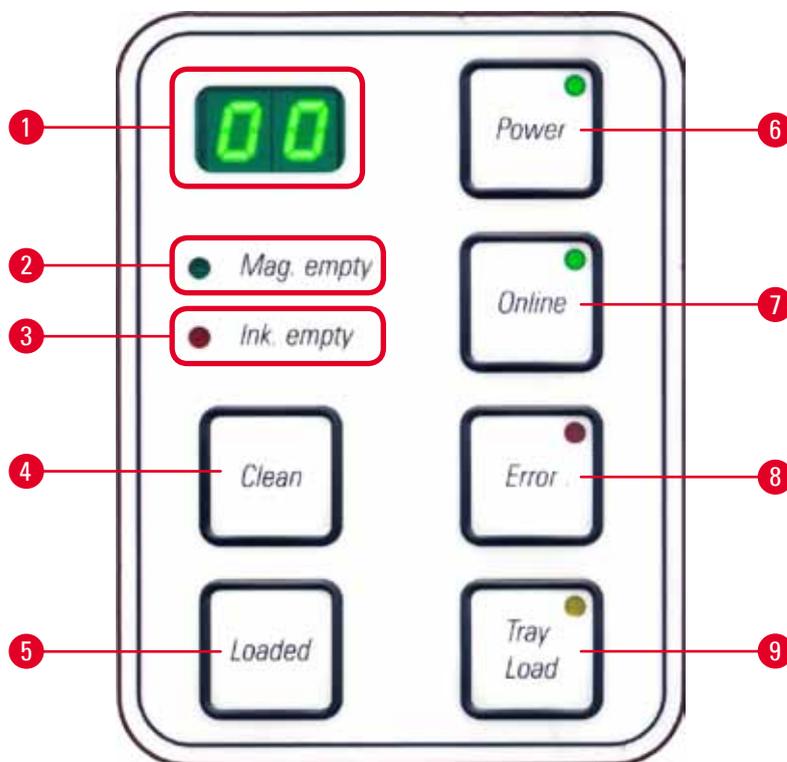


Fig. 37


LED MAG. EMPTY (chargeur vide) (→ "Fig. 37-2")

LED éteinte :

- Les chargeurs sont pleins ou, jusqu'à ce stade, aucune autre lame porte-objets n'a été réclamée à un chargeur qui venait juste d'être vidé.

LED clignotante :

- La **LED** clignotante et le nombre affiché à l'écran indique quel chargeur est vide.

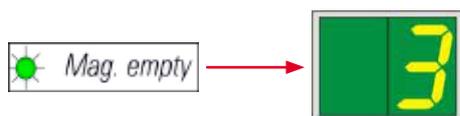

- Quand plusieurs chargeurs se vident simultanément, les numéros des chargeurs correspondants s'affichent en boucle.
- Après avoir rempli le chargeur, appuyer sur **LOADED** (→ "Fig. 37-5") pour communiquer à l'imprimante que le chargeur affiché est à nouveau plein.
- Si une tâche d'impression a été interrompue, elle sera reprise et achevée.

LED INK EMPTY (→ "Fig. 37-3")

LED éteinte :

- Quantité d'encre restante suffisante - l'impression est possible sans restriction.

LED clignotante :

- Le réservoir d'encre est bientôt vide, préparer une cartouche d'encre de rechange.



LED allumée :

- Le réservoir d'encre est vide, il n'est plus possible d'imprimer.



POWER (MARCHE/ARRÊT) (→ "Fig. 37-6")

Commutation entre le mode **POWER ON (Marche)** et **STANDBY (Veille)** et inversement

LED allumée : mode **POWER ON**

- Tous les systèmes de l'imprimante sont sous tension.
- Le bloc d'alimentation du flash est chargé en continu.
- L'imprimante est prête à imprimer immédiatement.

LED clignotante : mode **STANDBY**

- Tous les consommateurs d'électricité de l'imprimante, à l'exception de l'environnement direct du processeur, sont éteints (mode économie d'énergie).
- L'imprimante nettoie la tête à intervalles réguliers (par ex. 4 fois par jour). Elle passe alors rapidement en mode **POWER ON**.

LED éteinte :

- Imprimante débranchée.



Note

L'impression n'est possible qu'en mode **POWER ON**.

Si l'imprimante était en mode **STANDBY**, activer le mode **POWER ON** en appuyant sur la touche **POWER**. Le mode **POWER ON** est automatiquement activé par l'interface utilisateur du PC.

Si aucune commande n'est envoyée pendant une certaine période, l'imprimante passe automatiquement en mode **STANDBY**. Après la commutation du mode **STANDBY** au mode **POWER ON**, le rendement d'impression est réduit jusqu'à ce que tous les systèmes aient atteint la température de service adéquate.

LOADED (chargé) (→ "Fig. 37-5")

Confirmation d'un remplacement de chargeur

Brève pression sur **LOADED** :

- Indique à l'imprimante qu'un chargeur qui était vide a été rechargé et remis en place. (Ou qu'un chargeur a été retiré et remplacé par un autre chargeur contenant des lames porte-objets de couleur différente).

Pression longue sur **LOADED** pendant env. 10 s en mode Offline :

- Indique à l'imprimante qu'un changement de cartouche a eu lieu (→ P. 38 – 4.9 Remplacement de la cartouche de transport par une cartouche d'encre).

ONLINE (→ "Fig. 37-7")

Interruption d'une tâche d'impression en cours.

LED allumée :

L'imprimante est prête à imprimer et attend une nouvelle tâche d'impression.

LED clignotante :

- Une transmission de données a lieu ou une tâche d'impression est en cours d'exécution.
- Une pression sur la touche **ONLINE** pendant la tâche d'impression en cours interrompt la procédure d'impression. L'impression en cours est toutefois menée à terme. La **LED ONLINE** s'éteint. À ce stade, il est possible d'accéder aux composants de l'imprimante (par ex. pour extraire un chargeur à moitié vide et faire l'appoint).
- Une nouvelle pression sur la touche **ONLINE** entraîne la poursuite de la tâche d'impression interrompue. La **LED ONLINE** s'allume à nouveau ou, si d'autres tâches d'impression se trouvent dans la file d'attente de l'imprimante, **ELLE** se met clignoter.

LED éteinte :

- L'imprimante est en mode Offline. Aucune tâche d'impression n'est exécutée tant que l'imprimante n'est pas prête (la **LED** est allumée quand l'imprimante est prête).

ERROR (Erreur) (→ "Fig. 37-8")

Confirmation d'une erreur annoncée précédemment.

LED clignotante :

- Une erreur s'est produite. L'écran affiche le code d'erreur correspondant.



- Si, après suppression de la source d'erreur et libération des voies, vous appuyez sur la touche **ERROR**, l'imprimante recommence à fonctionner et le message d'erreur disparaît.
- Si plusieurs erreurs se produisent simultanément, l'erreur ayant la priorité la plus élevée s'affiche. Si cette erreur est confirmée par une pression sur la touche **ERROR**, le message d'erreur ayant la priorité immédiatement inférieure s'affiche.

CLEAN (→ "Fig. 37-4")

Nettoyage de la tête d'impression et réalisation du test d'impression

Appuyer brièvement sur CLEAN

Pour la tâche d'impression en cours :

- La tâche d'impression est interrompue. L'écran affiche **00** pendant env. 2 s.
- Un nettoyage de la tête d'impression est exécuté. Ensuite, l'impression de la tâche reprend.

Si l'imprimante est à vide :

- Après l'affichage **00**, un nettoyage de la tête d'impression est immédiatement réalisé.



Note

Le fait d'appuyer brièvement sur la touche **CLEAN** et de la relâcher démarre le nettoyage de la tête d'impression (signalé à l'utilisateur par l'affichage **00**). La durée du nettoyage peut être prolongée de 10 s max., si après l'affichage de **00** à l'écran, on appuie immédiatement sur la touche **CLEAN** tout en la maintenant enfoncée pendant la durée du nettoyage souhaitée (durée max. = 10 s).

Pression de la touche CLEAN pendant une période prolongée (minimum 3 secondes)

Pour la tâche d'impression en cours :

- La tâche d'impression est interrompue. L'imprimante passe ensuite en mode Offline. L'écran affiche **00** pendant env. 2 s.
- Un nettoyage de la tête d'impression est réalisé et un test d'impression est exécuté sur la lame porte-objets en cours de traitement. L'imprimante reste en mode Offline afin de permettre l'évaluation de la qualité d'impression avant la poursuite de la tâche d'impression.
- Il est possible de démarrer un nettoyage supplémentaire si nécessaire.
- Pour poursuivre l'impression, il faut appuyer sur la touche **ONLINE** afin de repasser en mode Online.
- La tâche d'impression est reprise là où elle avait été arrêtée.



Si l'imprimante est à vide :

- L'imprimante passe en mode Offline.
- Tous les points décrits ci-dessus sont alors exécutés.

**Note**

Lors d'impressions de longue durée, l'imprimante effectue, à intervalles réguliers, un nettoyage intermédiaire de la tête d'impression. Dans ce cas, l'impression est interrompue pendant env. 10 s ; elle se poursuit ensuite automatiquement.

TRAY LOAD (chargement plateau) (→ "Fig. 37-9")**Note**

Sur les imprimantes sans station de prélèvement, la touche n'est associée à aucune fonction.

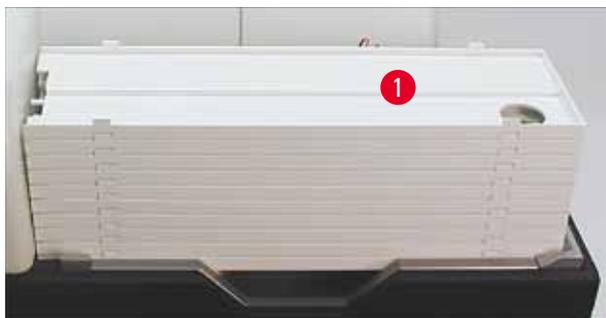


Fig. 38

Fonction :

- L'imprimante fait glisser sur le plateau du haut les lames porte-objets dont l'impression est terminée.
- À l'extrémité droite du plateau se trouve un capteur (→ "Fig. 39-1") qui déclenche un signal lorsqu'il est couvert. La pile s'élève d'un plateau.
- Quand tous les plateaux sont pleins, l'appareil émet un signal sonore (bip), la **LED** de la touche **TRAY LOAD** (CHARGEMENT PLATEAU) se met à clignoter : le retrait de la pile de plateaux est alors possible.

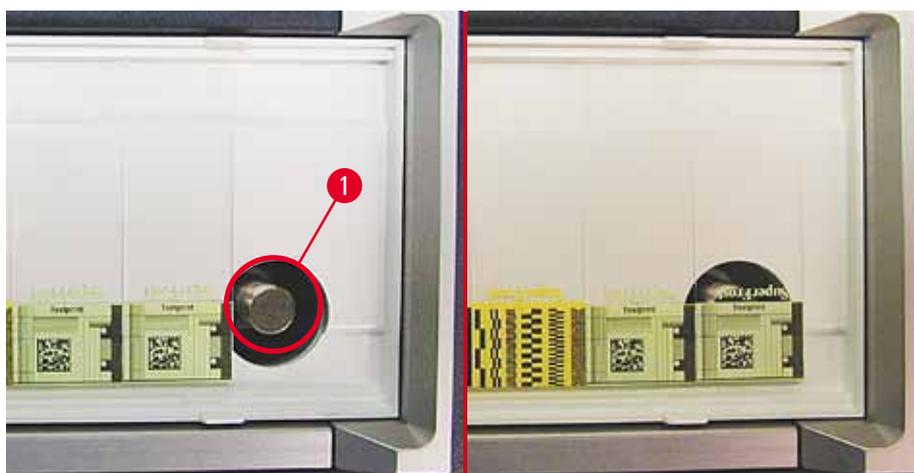


Fig. 39

Commande le déplacement de la plaque élévatrice de la station de prélèvement automatique (en option).

1. Poser la pile de plateaux (→ "Fig. 38-1") sur la plaque élévatrice de la station de prélèvement (→ "Fig. 38").
2. Le nombre de plateaux peut être compris entre 1 et 10 car l'imprimante compte les plateaux en début de course.
3. Si la plaque élévatrice est dans la position la plus élevée, la **LED** (→ "Fig. 37-9") de la touche clignote.
4. Maintenir enfoncée la touche **TRAY LOAD** (plus d'une seconde).
5. La pile de plateaux rentre complètement dans la station de prélèvement, la **LED** de la touche s'éteint ; l'imprimante passe en mode **ONLINE**.
6. Si une tâche d'impression est en cours, celle-ci est exécutée.
7. Si la pile de plateaux est rentrée complètement ou partiellement dans la station de prélèvement :
8. Appuyer brièvement sur **TRAY LOAD**.
9. La pile élève un plateau.

Si la touche **TRAY LOAD** est maintenue enfoncée pendant plus d'une seconde :


- » La pile de plateaux sort complètement de la station de prélèvement, la **LED** de la touche clignote. Si une impression est en cours, elle est interrompue.

**Note**

À chaque mise sous tension de l'imprimante, la pile de plateaux se déplace automatiquement vers le haut afin que chaque nouvelle tâche d'impression commence avec un tableau vide.


**Avertissement**

Attention en cas de manipulation à proximité du capteur (→ "Fig. 39-1"). Il déclenche toujours un lavage s'il détecte des objets à moins de 2 mm.

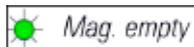5.2 Indications affichées**Indication affichée****Chargeur vide (en combinaison avec LED MAG. EMPTY)**

- 1 - Chargeur n° 1 vide
- 2 - Chargeur n° 2 vide
- 3 - Chargeur n° 3 vide

Si l'option **MANUAL FEED (AVANCE MANUELLE)** est sélectionnée dans les paramètres du pilote de l'imprimante, l'écran affiche **0** après l'envoi de la tâche d'impression. L'imprimante attend qu'une lame porte-objets à imprimer soit posée sur la glissière de chargement.

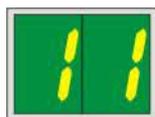Affichage**Messages d'état**

00 Nettoyage de la tête d'impression en cours.

11 Température du bloc d'alimentation du flash trop élevée.

L'imprimante est trop chaude et marque une courte pause afin de se refroidir.

La tâche d'impression se poursuit automatiquement après un bref instant. Afin d'éviter des pauses de refroidissement trop fréquentes, veiller à ce que la fente d'aération de l'imprimante ne soit pas obstruée, les autres sources de chaleur doivent être éloignées de l'imprimante.

Si possible, utiliser l'imprimante dans un local climatisé. Si la température ne descend pas à une valeur comprise dans la plage admissible dans un délai de 10 minutes, le message **55** s'affiche. Mettre l'appareil hors tension et le laisser refroidir. Contrôler la température ambiante.

13 Fin de la durée de vie de la lampe flash atteinte.

Il faut impérativement remplacer la lampe.

Si ce message est ignoré, des problèmes de résistance peuvent se poser pour les impressions.

Affichage



Messages d'état

14 **Demande d'exécution de la maintenance.**

Cela signifie que des travaux de maintenance doivent être effectués dans les prochaines semaines. Confirmer le message en appuyant sur **ERROR** (ERREUR).

Le message s'affiche à nouveau après 8 semaines et reste affiché à l'écran après la confirmation par **ERROR**.

15 **Nettoyage obligatoire de la tête d'impression.**

Cette invite qui apparaît tous les 7 jours demande à l'utilisateur d'effectuer un nettoyage manuel de la tête d'impression.

- Seuil d'alerte 1 : les tâches d'impression ne sont pas envoyées à l'imprimante tant que l'erreur 15 n'est pas acquittée. Il n'est pas nécessaire de nettoyer la tête d'impression pour acquitter cette erreur afin de poursuivre l'impression. Cependant, il est vivement recommandé de nettoyer la tête d'impression immédiatement.
- Seuil d'alerte 2 : après que l'utilisateur a acquitté l'erreur 15 sans nettoyer la tête d'impression le jour précédent pour poursuivre l'impression, l'erreur réapparaît le 8e jour et ne peut pas être acquittée tant que l'utilisateur n'aura pas nettoyé la tête d'impression manuellement. Il sera seulement possible de poursuivre l'impression après le nettoyage de la tête d'impression.

87 **Après le dernier changement de cartouche, la touche CLEAN**

a été actionnée pour indiquer à l'imprimante qu'une cartouche de transport a été insérée. L'imprimante a reçu une tâche d'impression mais ne peut pas imprimer avec du liquide de nettoyage !

Remède :

Terminer la tâche d'impression. Mettre l'imprimante hors tension, puis sous tension et remplacer la cartouche. Confirmer ensuite par la touche **LOADED** ou **ERROR**, puis attendre 2 min.



Attention

Ne jamais confirmer par **LOADED** (CHARGÉ) après la réintroduction d'une cartouche d'encre usagée. Cela peut endommager l'imprimante durablement.

81-83 **Avertissement: Problème lors de l'expulsion de la lame porte-objets d'un chargeur !**

L'affichage est divisé en deux parties : Le 8 avertit que la plaque coulissante d'un chargeur se bloque. Le deuxième chiffre du message (1-3) indique le numéro du chargeur concerné.

Messages d'erreur

Tous les nombres affichés de 20 à 78 et 89 à 93.

5.3 Fonctions d'alarme

L'imprimante Leica IP S est équipée de deux fonctions d'alarme différentes :

Alarme de l'appareil

L'imprimante est pourvue d'un émetteur de signaux sonores permettant d'informer des fonctions et des états importants au moyen de diverses tonalités.

- Pression sur une touche : 1 bip court
- Chargeur vide/pile de plateaux pleine : 2 bips courts
- En cas d'erreur : 5 bips courts
- À la fin du nettoyage de la tête : 5 bips courts

L'émetteur de signaux se désactive au moyen d'un interrupteur DIL situé sur la face arrière de l'imprimante.

- » Pour désactiver l'émetteur de signaux, basculer l'interrupteur le plus bas (→ "Fig. 40-1") à droite (→ "Fig. 40").

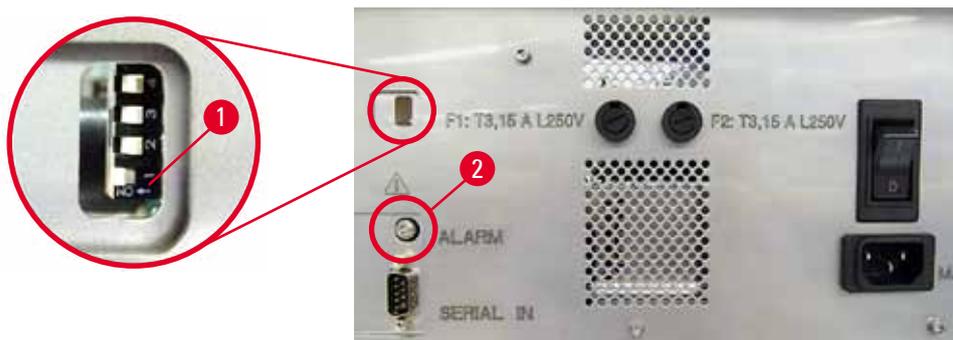


Fig. 40

Alarme à distance

Un émetteur d'alarme peut être installé hors de la pièce où l'imprimante est placée.

- L'émetteur d'alarme à distance se connecte à l'imprimante au moyen d'une fiche jack de 3,5 mm de diamètre (→ "Fig. 40-2").
- L'alarme se déclenche si l'imprimante n'est plus sous tension ou si elle a été mise hors tension via l'interrupteur principal situé sur la face arrière de l'imprimante.



Avertissement

Le dispositif de l'alarme à distance raccordé à l'appareil doit être inférieur à 100 mA. La tension doit être de 24 Vcc au maximum.

Pour de plus amples informations sur la méthode de connexion d'un dispositif d'alarme à distance à l'imprimante Leica IP S, veuillez contacter directement votre représentant commercial local Leica ou le fabricant.

5.4 Réglages du pilote de l'imprimante



Note

Il est possible d'imprimer des lames porte-objets avec l'imprimante Leica IP S à partir de tout programme Windows permettant de configurer l'impression séparément. La description ci-dessous se réfère à Microsoft Wordpad, un programme qui fait partie de tout programme d'installation de Windows et est donc présent sur tous les ordinateurs pris en charge par le pilote de l'imprimante. Les boîtes de dialogue auxquelles on accède dans d'autres programmes peuvent être nommées différemment, mais les paramètres du pilote qui doivent être sélectionnés sont nommés de manière identique dans tous les programmes.

Configurer l'imprimante dans l'application où s'effectuera l'impression des lames porte-objets :

1. Cliquer sur **File** (Fichier) > **Print** (Imprimer) pour ouvrir la boîte de dialogue **Print**.
2. Dans la liste d'imprimantes disponibles, sélectionner Leica IP S (le nom de cette imprimante a été ajouté lors de l'installation du pilote de l'imprimante (→ P. 44 – 4.10 Installation du pilote de l'imprimante)), puis confirmer en appuyant sur la touche correspondante.
3. Commencer par sélectionner les réglages de page : Cliquer sur **File** > **Page Setup** (Configuration de page) pour ouvrir la boîte de dialogue **Page Setup** (→ "Fig. 41").
4. Dans le champ **Margins** (Marges) (→ "Fig. 41-1"), régler toutes les marges sur 0 ; la plage d'impression changera comme illustré (→ "Fig. 41-5").
5. Dans le champ **Orientation** sélectionner **Portrait** (→ "Fig. 41-2").
6. Si l'imprimante est configurée comme indiqué ci-dessus, un format de lame porte-objets (**SLIDE**) figure déjà dans le champ **PAPER** du menu **SIZE** (→ "Fig. 41-3").
7. Dans le menu **SOURCE** (→ "Fig. 41-4") se trouvant directement en dessous, sélectionner le chargeur dont la lame porte-objets à imprimer doit sortir.
8. Désactiver **Print Page Numbers** (Nombre de pages à imprimer) (→ "Fig. 41-6").

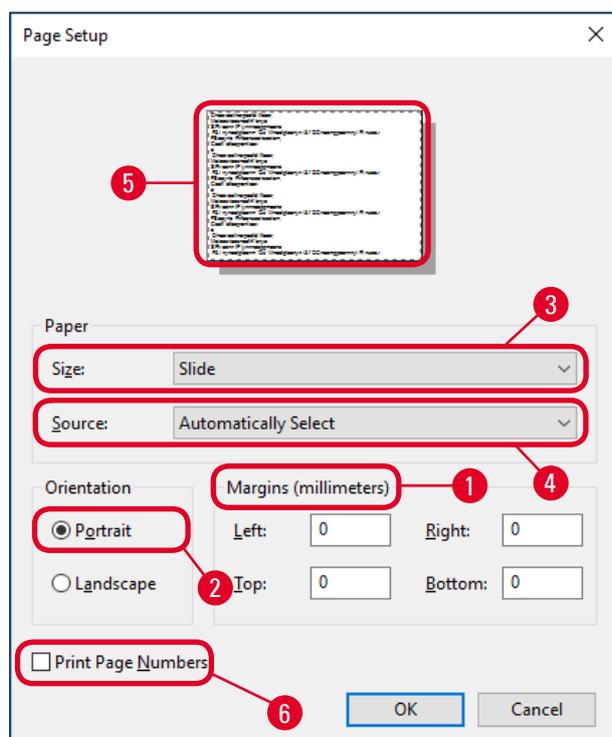


Fig. 41

Options sélectionnables dans la boîte de dialogue Paper > Source

Cliquer sur le champ de saisie Source pour ouvrir une liste, triée par ordre alphabétique, de toutes les options d'approvisionnement en lames porte-objets à partir des 3 chargeurs.

- **Manual feed** (Avance manuelle) (→ "Fig. 42-1") signifie que les différentes lames porte-objets seront placées sur la glissière (→ "Fig. 2-6") et imprimées. L'imprimante ne démarre pas l'impression tant que le capteur (→ "Fig. 2-7") ne réagit pas (→ P. 51 – 5.2 Indications affichées).
- Les chargeurs 1 à 3 constituent des options supplémentaires. Si un chargeur déterminé est sélectionné comme source, l'impression s'arrête quand le magasin est vide.
- Si un groupe de chargeurs est sélectionné (tel que **F (1|2|3)**), l'impression continue jusqu'à ce que le dernier chargeur du groupe soit vide, c.-à-d. que l'impression ne s'arrête pas si seul un chargeur est vide.

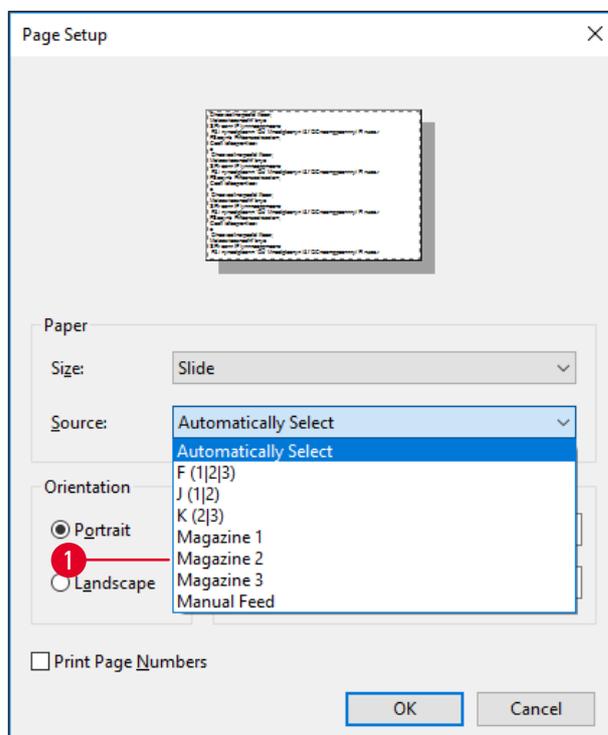


Fig. 42



Note

Le travail avec les groupes de chargeurs est utile pour l'impression de tâches d'envergure, par ex. comportant davantage de lames porte-objets qu'un chargeur peut en contenir ou quand plusieurs chargeurs sont remplis de lames porte-objets du même type (par ex. de la même couleur). Les chargeurs sont traités selon l'ordre d'entrée dans la liste.

Accès à la boîte de dialogue Advanced Options (Options avancées)

1. Pour sélectionner les paramètres avancés, cliquer sur **File > Print...** pour accéder à la boîte de dialogue **Print**.
2. Cliquer sur **Preferences...** (Préférences) pour accéder à la boîte de dialogue **Printing Preferences** (Préférences d'impression).
3. Cliquer sur **Advanced...** (Avancé) pour accéder à la boîte de dialogue **Advanced Options**.

La boîte de dialogue Advanced Options (→ "Fig. 43")

Un clic sur les options de menu entraîne l'affichage à droite d'un menu déroulant dans lequel s'effectue le paramétrage.

Toutes les options de menu non décrites ici n'ont aucune influence sur l'imprimante. C'est pourquoi les réglages standard de toutes les options de menu non décrites doivent être conservés.

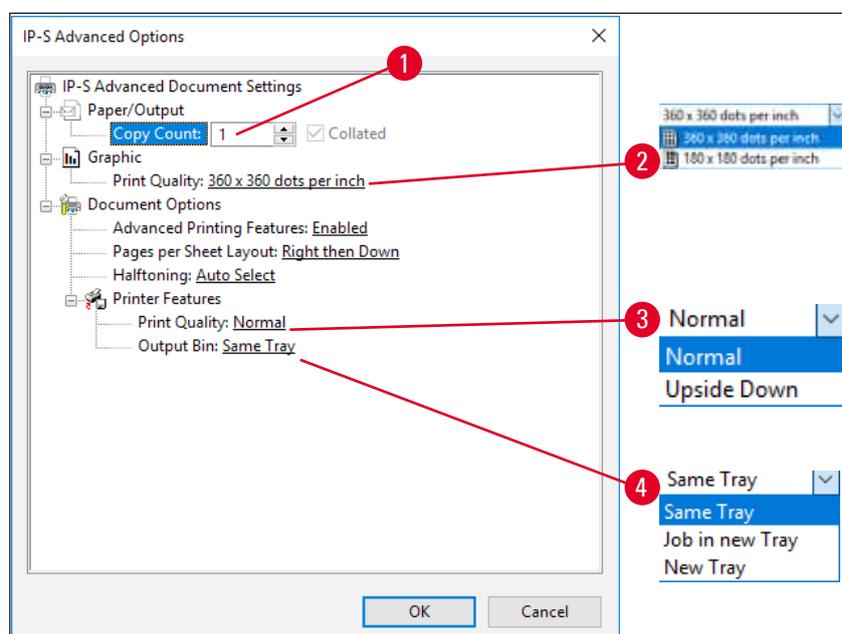


Fig. 43

Menu Paper/Output (Papier/Sortie) > Copy Count (nombre de copies) (→ "Fig. 43-1"):

- Le nombre de copies à imprimer peut être saisi ici.

Menu Graphic (Graphique) > Print Quality (qualité d'impression) (→ "Fig. 43-2")

- La résolution de la tête d'impression peut être réglée entre 360 et 180 dpi . Si la surface de la lame porte-objets ne convient pas à une résolution de 360 dpi, la sélection de cette option risque de produire de mauvais résultats d'impression. Pour de telles lames porte-objets, il convient de sélectionner une résolution de 180 dpi.

Menu Printer Features (Propriétés de l'imprimante) > Print Quality (Qualité d'impression)

(→ "Fig. 43-3")

- Vous pouvez définir si une impression doit être appliquée sur une lame porte-objets normalement (**NORMAL**) ou tournée à 180° (**UPSIDE DOWN**) (À l'envers).

Menu Printer Features > Output Bin (Bac de sortie) (→ "Fig. 43-4"): L'option de menu est surtout importante pour la station de prélèvement multi-lames.

- **Same Tray** (Même plateau) : les lames porte-objets glissent sur le plateau jusqu'à ce que celui-ci soit plein.
- **Job in new Tray** (Tâche dans nouveau plateau) : Chaque tâche d'impression commence avec un nouveau plateau.
- **New Tray** (Nouveau plateau) : Pour les applications particulières seulement, ne doit pas être sélectionné parmi les programmes Windows standard.

**Note**

En cas d'utilisation du système de prélèvement manuel, les paramètres réglés dans l'option de menu **Paper/Output** ne sont pas pris en compte par l'appareil.

6. Nettoyage et maintenance**6.1 Nettoyage de l'appareil****Avertissement**

- Avant toute opération de nettoyage, éteindre l'appareil et le débrancher.
- Observer les consignes de sécurité du fabricant et les consignes du laboratoire applicables dans le pays d'exploitation pour l'utilisation des produits de nettoyage !
- Pour nettoyer les surfaces extérieures, utiliser un nettoyant ménager doux au pH neutre, en vente dans le commerce.
- NE doivent PAS être utilisés : les alcools, les produits de nettoyage à base d'alcool, (lave-vitres !), les produits abrasifs ainsi que les solvants à base d'acétone ou de xylène ! Les surfaces laquées et le panneau de commande ne sont pas résistants au xylène et à l'acétone.
- Veiller à empêcher tout écoulement sur les connexions électriques ou à l'intérieur de l'appareil !
- Pendant le nettoyage, il convient de porter des gants de protection contre les coupures ainsi qu'une protection oculaire afin d'éviter toute blessure pouvant être occasionnée par les éclats de verre.
- Pendant le nettoyage à l'aspirateur, il est interdit de diriger le courant d'air vers les personnes car les débris de verre sont susceptibles d'occasionner des blessures.

Éléments de guidage des lames porte-objets

Nettoyez l'imprimante IP S avec un petit aspirateur pour éliminer les déchets, et en particulier la poussière de verre, quotidiennement en cas d'usage intensif de l'imprimante (ou une fois par semaine, en cas d'usage peu fréquent).

Il est particulièrement important de nettoyer les éléments suivants indiqués par une flèche :

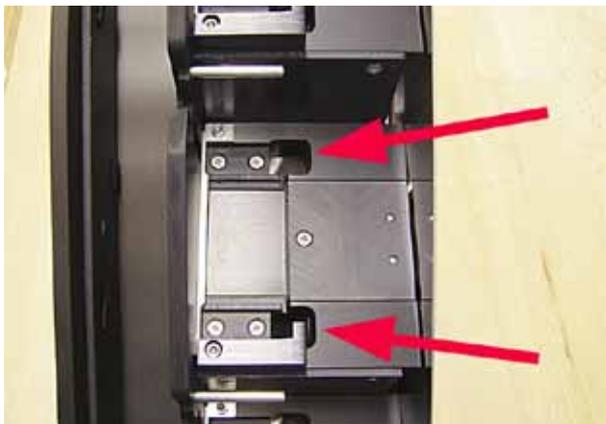


Fig. 44

- Station de chargement (→ "Fig. 44")
L'unité d'extraction des chargeurs, des supports de chargeurs et de la glissière.
Le capteur situé à l'extrémité de la glissière doit toujours être propre.

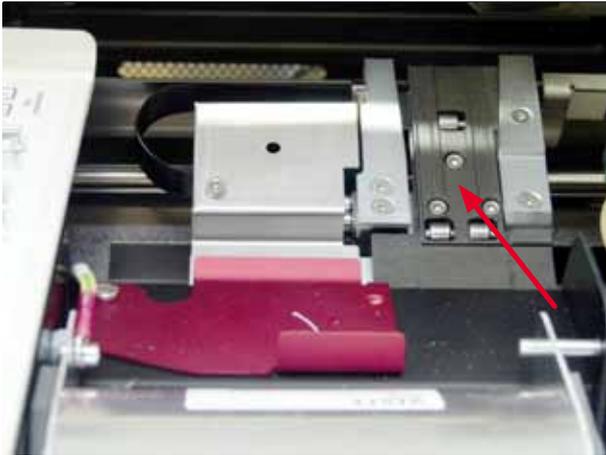


Fig. 45



Fig. 46



Fig. 47

- Station de transport (→ "Fig. 45")
Éliminer la poussière et les résidus de la pince de la lame porte-objets.

- Glissière de distribution de lames porte-objets (→ "Fig. 47")
Le volet pivotant doit être ouvert (→ "Fig. 46-1")
La glissière doit être propre (→ "Fig. 47").



Attention

Cette partie de l'appareil contient des composants électroniques sensibles.
Il ne faut donc utiliser aucun liquide dans cette partie !

- Fermer le volet après le nettoyage et avant l'utilisation de l'appareil .



Fig. 48

- Le tiroir pour bris de verre (→ "Fig. 48-2") est placé au-dessus de la fente destinée à la cartouche d'encre, derrière le couvercle gauche (→ "Fig. 48-1"). Ainsi, la poussière de verre et les bris de verre ne tombent pas à l'intérieur de l'appareil. Le tiroir qui peut être retiré latéralement par la poignée noire (→ "Fig. 48-3") doit être nettoyé régulièrement.
- Les bris de verre s'éliminent facilement ; à l'aide d'un pinceau, éliminer les éclats de verre en les faisant passer par l'ouverture du milieu du tiroir.

Surfaces extérieures

- Les surfaces extérieures (y compris celles de la station de prélèvement automatique des lames porte-objets) peuvent être nettoyées avec un nettoyant doux et essuyées avec un chiffon humide.
- Ne pas traiter les surfaces extérieures et le capot avec des solvants !

Station de prélèvement automatique

- Retirer les plateaux ; À l'aide d'un pinceau, éliminer la poussière et les débris des éléments de guidage et de la plaque coulissante.
- Les plateaux peuvent être nettoyés avec un produit de nettoyage à usage domestique.
- Ne pas utiliser de dissolvant sur les plateaux !
- Avant de les réinsérer dans l'appareil, les plateaux doivent être parfaitement secs.

6.2 Nettoyage de la tête d'impression

Préparation de l'imprimante :

La tête d'impression doit être nettoyée manuellement une fois par semaine ou si le message 15 s'affiche.



1. Ouvrir le capot de l'imprimante (→ "Fig. 29-1"), puis appuyer simultanément sur les touches **CLEAN** et **LOADED**.



2. La tête d'impression (→ "Fig. 49-1") s'élève jusqu'à env. 1 cm du joint à lèvres (→ "Fig. 49").

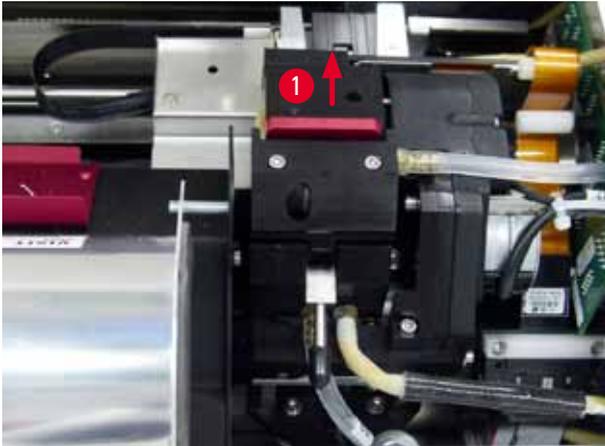


Fig. 49

3. Lever le levier (→ "Fig. 50-1"), puis retirer le disque amovible rouge (→ "Fig. 50-2") avec le joint à lèvres.

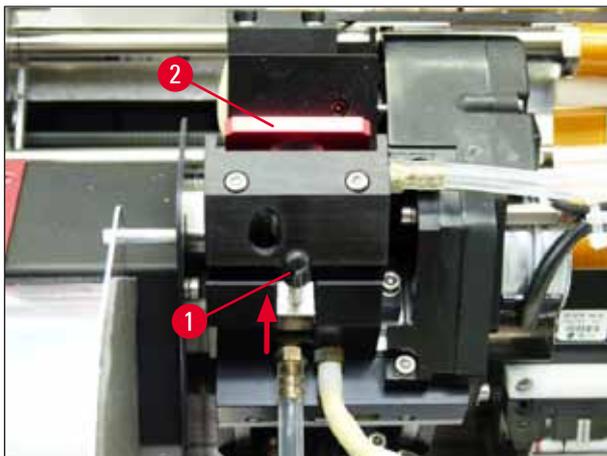


Fig. 50

4. Imbiber d'un peu d'alcool l'un des bâtonnets de nettoyage fournis avec l'appareil (→ "Fig. 51-1"). Veiller à ne pas en absorber de trop car l'alcool ne doit pas goutter dans l'appareil.

**Avertissement**

Il est formellement interdit d'utiliser de l'acétone ou du xylène. Pour le nettoyage, n'utiliser que de l'alcool à 95 % ou à 100 %.

5. Glisser le bâtonnet de nettoyage avec précaution dans la fente située sous la tête d'impression (→ "Fig. 51"). Appliquer une légère pression vers le haut (sur la tête d'impression) et bouger la mousse d'avant en arrière (env. 10 fois). Cela permet d'éliminer et d'enlever l'encre.

**Avertissement**

Ne tourner en aucun cas le bâtonnet, cela risquerait d'endommager les buses de l'imprimante.

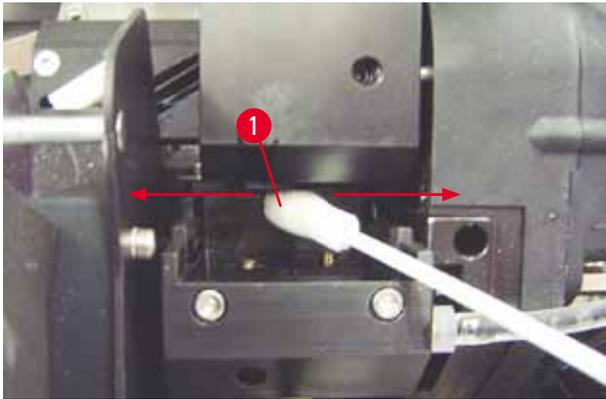


Fig. 51

6. Nettoyer aussi le disque amovible (→ "Fig. 52-1") et le joint à lèvres avec de l'alcool (propre). Il ne doit plus rester d'encre sur le joint à lèvres (→ "Fig. 52-2"). Vérifier que le joint à lèvres n'est pas endommagé. Remplacer le disque amovible dont le joint à lèvres est endommagé.

Disque amovible



Fig. 52

7. Réintroduire le disque amovible (→ "Fig. 52-1").



Attention

Le disque amovible doit être complètement sec.

8. Pour confirmer la procédure de nettoyage achevée, appuyer sur une touche quelconque du panneau de commande.
9. La tête d'impression revient à la position d'arrêt ; le message 15 disparaît.



✓ L'imprimante est désormais prête à fonctionner.



Avertissement

Si aucune touche n'est actionnée pour terminer le processus de nettoyage, l'imprimante ferme la tête automatiquement après quelques minutes afin d'éviter tout dessèchement.

Cependant, le message **15** reste affiché car le système suppose que le nettoyage n'a pas été effectué.

6.3 Remplacement des cartouches



Note

La cartouche d'encre doit être remplacée après 3,5 mois au plus tard ou après 60 000 impressions. Sur la surface blanche de la face avant de la cartouche d'encre, noter la date d'insertion de la cartouche d'encre.

6.3.1 Retrait de la cartouche d'encre usagée

1. Ouvrir le couvercle (→ "Fig. 29-2") situé à gauche de l'appareil en appuyant sur l'angle supérieur gauche (→ "Fig. 29").
2. Fermer le capuchon rouge (→ "Fig. 34-3") et le desserrer à nouveau d'un tour complet.
3. Abaisser le support de fixation rouge (→ "Fig. 53-1") et retirer la cartouche d'encre (→ "Fig. 53-2") sur env. 30 mm jusqu'à ce que la **LED INK EMPTY** (Encre vide) (→ "Fig. 53-3") s'allume.
4. Resserer le capuchon rouge, puis retirer la cartouche entièrement de l'imprimante.
5. Entreposer la cartouche d'encre à l'horizontale dans un récipient fermé hermétiquement.
6. Éliminez la cartouche d'encre usagée conformément aux règlements de votre laboratoire et de la législation en vigueur.

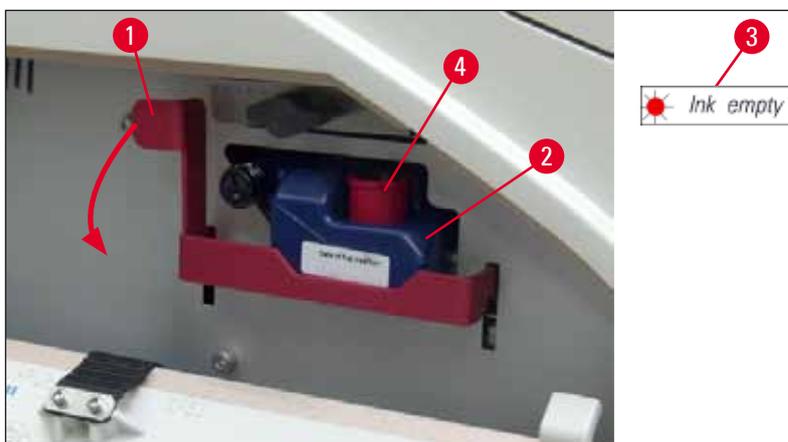


Fig. 53

6.3.2 Introduction de la cartouche d'encre neuve

1. Prendre une cartouche d'encre neuve dans le carton, puis retirer l'emballage en plastique.
2. Agiter la cartouche d'encre 2 ou 3 fois avec précaution.
3. Tirer le support de fixation rouge vers l'avant, puis insérer la cartouche d'encre neuve jusqu'à la moitié dans le compartiment.
4. Respecter les informations figurant sur l'étiquette apposée sur la cartouche d'encre.
5. Ouvrir le capuchon de protection rouge (→ "Fig. 34-3") en lui faisant faire un tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
6. Introduire la cartouche d'encre entièrement dans le compartiment.

6.3.3 Retrait du capuchon de protection

1. Dévisser complètement le capuchon de protection rouge, retirer l'étiquette d'information et placer le capuchon de protection rouge dans l'évidement de la cartouche d'encre (→ "Fig. 53-4").
2. Après exécution de cette tâche, vérifier que le support de fixation rouge est dans la position correcte (→ "Fig. 35-1"), puis fermer le couvercle. **88** est affiché sur le panneau de commande.



Note

Ne jamais appuyer sur la touche **CLEAN** lorsqu'une cartouche d'encre neuve ou usagée est dans l'appareil !

3. Sur le panneau de commande, appuyer sur **LOADED** (Chargé) (→ "Fig. 37-5").
4. Insérer le disque amovible neuf (composant du kit de cartouche d'encre).

Information sur le retrait ou l'insertion du disque amovible et sur le nettoyage manuel de la tête d'impression : (→ P. 65 – 6.5 Entreposage de l'appareil) et (→ P. 60 – 6.2 Nettoyage de la tête d'impression).

6.4 Instructions de maintenance générale



Avertissement

Pour les opérations de maintenance ou les réparations, l'appareil ne peut être ouvert que par des techniciens de SAV autorisés par Leica.

L'imprimante Leica IP S est pratiquement sans maintenance.

Pour assurer son bon fonctionnement à long terme, on observera toutefois les recommandations suivantes :

- Nettoyer soigneusement l'appareil tous les jours.
- Enlever régulièrement la poussière présente sur les fentes d'aération au dos de l'appareil avec un pinceau ou un petit aspirateur.
- Faire contrôler l'appareil au moins une fois par an par un technicien de service après-vente agréé par Leica.
- Conclure un contrat de maintenance au terme de la durée de garantie. Veuillez vous renseigner à ce sujet auprès du S.A.V.

6.5 Entreposage de l'appareil

Règles générales pour l'entreposage de l'appareil :

Période d'entreposage	Méthode d'entreposage et mesures requises
Jusqu'à 24 h	L'appareil peut être débranché, la cartouche d'encre doit être fermée par le capuchon rouge (→ "Fig. 54-2") lors du transport, mais la cartouche peut rester à l'intérieur de l'imprimante. Aucune mesure supplémentaire n'est requise.
24 h à 3,5 mois	L'appareil doit rester branché à l'alimentation et la cartouche d'encre insérée. La cartouche d'encre peut rester dans l'imprimante jusqu'à sa date limite d'utilisation. Un nettoyage hebdomadaire est requis. L'imprimante fera circuler l'encre régulièrement autour de la tête d'impression pour stopper le séchage de la tête d'impression.
3,5 h à 6 mois	La cartouche d'encre doit être remplacée par la cartouche de transport. L'alimentation de l'appareil doit être coupée.



Note

- La cartouche d'encre doit être impérativement remplacée à la date limite d'utilisation.



Avertissement

Une imprimante doit être entreposée pour une durée maximale de six mois après exécution de la procédure décrite ci-dessous. Une durée d'entreposage plus longue risquerait d'endommager la tête d'impression.

Pendant le transport ou quand l'alimentation de l'imprimante doit être coupée pour une durée prolongée (de plus de 24 h à six mois), une cartouche de transport doit être insérée. Pour cela, procéder comme suit :

1. (→ P. 63 – 6.3.1 Retrait de la cartouche d'encre usagée): Suivre les étapes 1 à 6.



Note

La cartouche d'encre ne peut pas être utilisée dans une autre imprimante parce que le niveau de la cartouche est enregistrée dans cette imprimante.

2. Sortir la cartouche de transport (neuve) (→ "Fig. 54-1") du carton de livraison.
3. Retirer le film de protection, puis insérer la cartouche jusqu'à la moitié dans le compartiment des cartouches (→ "Fig. 54").
4. Desserrer le capuchon de protection rouge (→ "Fig. 54-2") en lui faisant effectuer un tour.
5. Pousser la cartouche de transport à fond, puis vérifier que le support de fixation rouge (→ "Fig. 53-1") est positionné correctement.
6. Dévisser le capuchon de protection rouge (→ "Fig. 54-2") et le placer dans l'évidement prévu à cet effet de la cartouche (→ "Fig. 54-3").
7. Marquer une des deux boîtes sur la face avant de la cartouche afin de s'assurer que la cartouche de transport ne sera utilisée que deux fois.
8. Fermer le couvercle sur le côté gauche de l'imprimante.

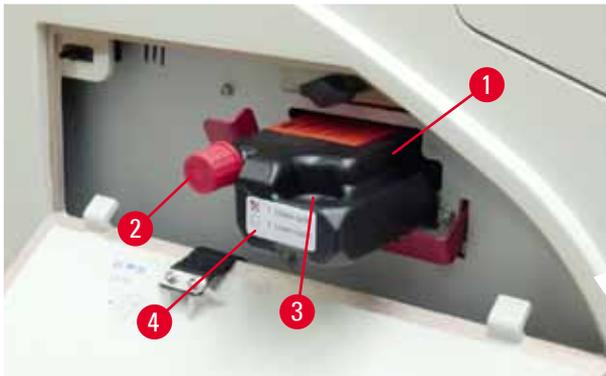


Fig. 54

9. La **LED INK EMPTY** s'éteint, l'indication **88** s'affiche à l'écran.



10. Appuyer sur **CLEAN** pour nettoyer la tête d'impression (durée : approx. 3,5 min) - **00** apparaît à l'écran. Une fois la procédure de nettoyage terminée, l'affichage s'éteint.



Note

La procédure de nettoyage exécutée avec le liquide de nettoyage dure env. 3,5 min.

11. Ouvrir le capot de l'imprimante (→ "Fig. 29-1"), puis appuyer simultanément sur les touches **CLEAN** et **LOADED**.



12. Le fait d'appuyer sur les touches élève la tête d'impression (→ "Fig. 55-1") et l'éloigne du disque amovible.

13. Élever le levier (→ "Fig. 55-2") pour permettre le retrait du disque amovible.

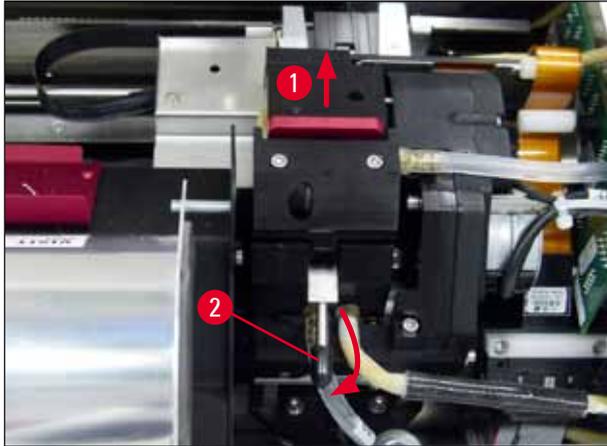


Fig. 55

14. Retirer le disque amovible rouge (→ "Fig. 56-1").
15. Le nettoyer avec de l'alcool (95 %-100 %).

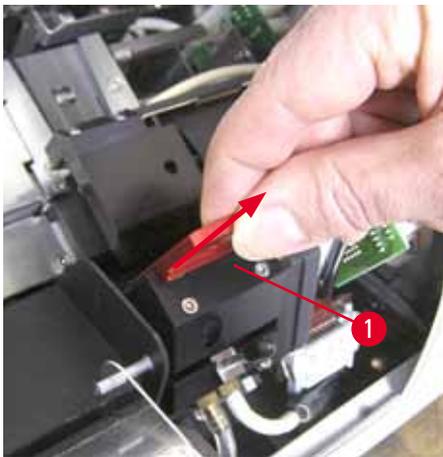


Fig. 56

16. Nettoyer la tête d'impression avec de l'alcool (95 %-100 %) et les bâtonnets de nettoyage fournis (→ "Fig. 57-1"). Pour ce faire, pousser le bâtonnet sous la tête d'impression, la lever en exerçant une légère pression (sur la tête d'impression) et déplacer le bâtonnet du coin inférieur droit au coin supérieur gauche (le long du joint à lèvres). Tourner légèrement le bâtonnet après chaque mouvement ascendant.

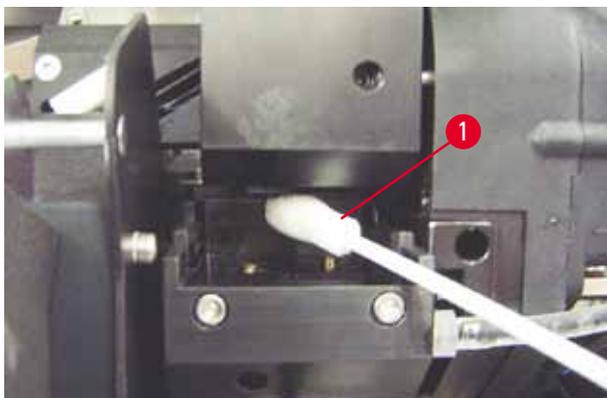


Fig. 57

**Note**

Le bâtonnet de nettoyage de la tête d'impression ne s'utilise qu'une seule fois. Ne tourner en aucun cas le bâtonnet, cela risquerait d'endommager les buses de l'imprimante.

17. Puis, pousser la plaque de transport noire neuve (→ "Fig. 58-1") jusqu'à la butée.



Fig. 58

18. Rabaisser le petit levier (→ "Fig. 55-2") pour sécuriser le disque amovible.

19. Appuyer sur une touche quelconque pour fermer la tête d'impression.

**Avertissement**

Si le fait d'appuyer sur une touche ne met pas fin au remplacement du disque amovible, l'imprimante ferme automatiquement la tête d'impression après 2,5 min. Un signal retentit 30 s avant qu'elle se ferme automatiquement et un compte à rebours s'affiche. Afin d'éviter d'endommager la tête d'impression, éviter d'insérer la plaque de transport à ce moment ; au lieu de cela, attendre la fermeture de la tête d'impression et répéter l'opération pour insérer la plaque de transport.

20. Fermer le capot de l'imprimante.

21. Resserrer le capuchon rouge (→ "Fig. 54-2") de la cartouche de transport, puis fermer le couvercle sur le côté de l'imprimante.

**Avertissement**

- Éteindre l'imprimante et couper l'alimentation afin d'éviter d'endommager la tête d'impression !
- Ne jamais utiliser une cartouche de transport avec une plaque de remplacement !
- Afin de pouvoir réutiliser l'imprimante, la plaque de transport doit être retirée et une plaque de remplacement neuve doit être insérée.
- Ne pas réutiliser de plaque de transport usagée, elle ne permettra pas d'obtenir une tête d'impression complètement étanche.

22. De même, nettoyer le disque amovible (→ "Fig. 59-1") et le joint à lèvres (→ "Fig. 59-2") avec de l'alcool (propre) et un bâtonnet de nettoyage (→ "Fig. 59-3").

23. Il ne doit plus rester d'encre sur le joint à lèvres (→ "Fig. 59-2"). Vérifier que le joint à lèvres n'est pas endommagé.

**Avertissement**

Ne pas réutiliser les disques amovibles dont le joint à lèvres est endommagé !



Fig. 59

24. Nettoyer entièrement l'appareil conformément aux instructions contenues dans ce chapitre.

Transport de l'appareil

Si l'imprimante doit être expédiée, suivre rigoureusement les instructions relatives à l'entreposage décrites ci-dessus.

Prendre ensuite les mesures suivantes :

1. Ouvrir le capot (→ "Fig. 29-1") de l'imprimante et desserrer la vis du couvercle de la lampe flash.
2. Extraire ensuite la lampe flash. Pour de plus amples informations, voir (→ P. 32 – 4.6 [Montage/remplacement de la lampe flash](#)).
3. Fermer le couvercle de la lampe flash et le capot.
4. Utiliser l'emballage original et visser l'imprimante sur le socle (suivre les instructions de déballage).
5. Remettre en place les cales de transport (→ "Fig. 10-1") et fixer le capot à l'aide d'un ruban adhésif.
6. L'appareil doit être impérativement transporté en position droite.

7. Correction des erreurs

7.1 Défaillances



Note

En cas de dysfonctionnement de l'imprimante pendant l'impression, un code d'erreur correspondant est affiché et la **LED** de la touche **ERROR** commence à clignoter simultanément.



Correction des erreurs :

1. Rechercher la cause de l'erreur dans la liste des messages d'erreur
(→ P. 72 – 7.3 Messages d'erreur).
2. Lever le(s) verrouillage(s) ; Ouvrir le capot si nécessaire.



Avertissement

Important !

Enlever toutes les lames porte-objets encore présentes sur la glissière, à l'intérieur et à côté de la pince ainsi que dans la station de séchage. Ces lames porte-objets ne doivent pas être réutilisées.

Confirmer l'élimination de l'erreur :

1. Fermer le capot et appuyer sur **ERROR** pour confirmer à l'imprimante que la cause de l'erreur a été éliminée.



2. L'imprimante vérifie ensuite si toutes les voies sont dégagées et si toutes les causes d'erreur sont supprimées.
3. Si toutes les voies n'ont pas été libérées ou si la cause de l'erreur n'a pas été entièrement supprimée, l'imprimante affiche un autre message d'erreur.
4. Les tâches d'impression interrompues sont reprises et achevées.
5. Si un message d'erreur s'affiche à nouveau, bien que toutes les causes d'erreur aient été supprimées, il faut procéder à une réinitialisation.

Réinitialisation :

1. Appuyer simultanément sur les touches **LOADED** et **ERROR**, puis les relâcher simultanément.



2. La réinitialisation restaure l'état où était l'imprimante directement après la mise sous tension. Toutes les tâches d'impression qui étaient dans la mémoire de l'imprimante sont perdues.
3. Si la même erreur s'affiche à nouveau à l'écran après une réinitialisation, l'imprimante peut être mise hors tension au moyen de l'interrupteur principal (face arrière) et remise sous tension après un bref délai d'attente (env. 30 s). Si ce problème persiste, il faut en informer le service après-vente Leica.

7.2 Messages d'état

(Pour de plus amples informations, voir (→ P. 51 – 5.2 Indications affichées))

Code d'affichage	LED	Signification
	MAG. EMPTY clignote	L'imprimante attend qu'une lame porte-objets à imprimer individuellement soit posée sur la glissière de chargement.
	MAG. EMPTY clignote	Chargeur n° 1 vide
	MAG. EMPTY clignote	Chargeur n° 2 vide
	MAG. EMPTY clignote	Chargeur n° 3 vide
	–	Nettoyage de la tête d'impression actif.
	–	Température du bloc d'alimentation du flash trop élevée.
	–	Fin de la durée de vie de la lampe flash atteinte.
	–	Demande d'exécution de la maintenance.
	–	Demande de nettoyage de la tête d'impression.
	INK EMPTY clignote	Remplacement de la cartouche d'encre effectué. appareil attend la confirmation par la touche ERROR , CLEAN ou LOADED .

7.3 Messages d'erreur

Code d'affichage	Causes des erreurs	Correction des erreurs
	Blocage mécanique de l'expulsion du chargeur.	Supprimer la cause du blocage.
	Expulsion défectueuse de la lame porte-objets. Expulsion du chargeur bloquée.	Retirer la lame porte-objets.
	Échec du transfert d'une lame porte-objets de la glissière de chargement au chariot d'impression. Mauvais positionnement ou blocage mécanique de l'entraînement horizontal.	Retirer la lame porte-objets.
	La lame porte-objets est dans la glissière de chargement.	Retirer la lame porte-objets.
	Blocage mécanique de l'entraînement horizontal.	Fermer le volet pivotant du module de la lampe flash (→ "Fig. 46-1"). Retirer la lame porte-objets. Si l'erreur persiste, informer le service technique Leica.
	Blocage mécanique de l'entraînement vertical.	Retirer la lame porte-objets. Si l'erreur persiste, informer le service technique Leica.
	Blocage mécanique de la rotation.	Retirer la lame porte-objets. Si l'erreur persiste, informer le service technique Leica.
	Pince de la lame porte-objets défectueuse. La lame porte-objets n'a pas complètement atteint la pince mais a quitté la glissière de chargement.	Retirer la lame porte-objets de la pince.
	La lame porte-objets n'a pas quitté la pince ou est encore dans la pince pendant l'initialisation.	Retirer la lame porte-objets de la pince.
	Tête d'impression trop chaude. Température ambiante trop élevée ou électronique défectueuse.	Mettre l'appareil hors tension et le laisser refroidir. L'appareil reste bloqué jusqu'à ce que la température de la tête d'impression soit à nouveau normale. Contrôler la température ambiante.

Code d'affichage	Causes des erreurs	Correction des erreurs
	Absence de tension ou tension incorrecte de la tête d'impression.	Informez le service technique.
	<ul style="list-style-type: none"> Le couvercle (→ "Fig. 1-5") n'est pas fermé correctement. Les commutateurs de sécurité ont réagi. La préparation du flash ne s'effectue pas dans le temps prescrit. Électronique de chargement défectueuse. 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier si le capot est bloqué, par le système de prélèvement manuel, par exemple. Fermer complètement le capot. Informez le service technique.
	<p>Durée du flash trop courte ou aucune flash ne se produit.</p> <p>Lampe flash encrassée ou défectueuse.</p>	<p>Contrôlez s'il y a un flash, observez la lumière parasite s'échappant du couvercle.</p> <p>Ne jamais ouvrir le couvercle pour vérifier si un flash s'est déclenché !</p> <p>Absence de flash --> mettre en place une nouvelle lampe flash (→ P. 32 – 4.6 Montage/remplacement de la lampe flash).</p>
	Blocage mécanique de la station de prélèvement.	Supprimer la cause du blocage.
	Le ventilateur ne fonctionne pas ou sa vitesse de rotation est trop faible.	Informez le service technique.
	Il n'y a aucune lame porte-objets à flasher dans la station de séchage. La lame porte-objets a quitté la pince mais n'a pas complètement atteint la station de séchage.	Retirer la lame porte-objets.
	La lame porte-objets n'a pas quitté la station de séchage lors de l'expulsion.	Retirer la lame porte-objets.
	La lame porte-objets est dans la station de séchage pendant une initialisation ou avant une tâche d'impression.	Supprimer la cause du blocage.
	Le clapet de la station de séchage ne se ferme ou ne s'ouvre pas. Le clapet est bloqué (par une lame porte-objets par ex.).	Supprimer la cause du blocage.
	Le capteur situé à l'extrémité de la plaque élévatrice ne fonctionne pas.	Informez le service technique.

Code d'affichage	Causes des erreurs	Correction des erreurs
	Le capteur de position de la plaque élévatrice ne réagit pas lors du positionnement.	Informez le service technique.
	Bloc d'alimentation du flash : Surchauffe depuis plus de 10 minutes.	Informez le service technique.
	Des données de contrôle erronées ont été reçues (erreur de programmation). Paramétrage erroné de l'interface série ou les configurations de l'appareil et du PC ne concordent pas.	Réinitialiser l'imprimante (RESET). Vérifier que le branchement des câbles au PC est correct. Vérifier la configuration de l'interface série du PC associé et redémarrer le PC.
	Accusé de réception des données émises manquant ou le PC n'a pas accusé réception des données émises.	Effectuer la même procédure que pour ERROR 60 . Faire un essai avec un autre câble d'imprimante.
	L'image imprimée dépasse la taille autorisée dans le sens de la hauteur.	Erreur occasionnée par le logiciel d'application.
	L'image imprimée dépasse la taille autorisée dans le sens de la largeur.	Erreur occasionnée par le logiciel d'application.
	Lors de la mise sous tension de l'appareil, le contrôle CRC de l'EEPROM a donné un résultat erroné.	Informez le service technique.
 ↓ 	Erreur de firmware interne ou contrôleur défaillant.	Informez le service technique.
 ↓ 	L'expulsion des lames porte-objets d'un chargeur est perturbée par un problème mécanique.	Contrôlez l'expulsion du chargeur. Retirez les corps étrangers, puis nettoyez à l'aide du pinceau.
	L'exécution d'une tâche d'impression a été tentée alors qu'une cartouche de transport était insérée.	Retirez la cartouche de stockage. Insérez la cartouche d'encre et confirmez par LOADED (→ P. 38 – 4.9 Remplacement de la cartouche de transport par une cartouche d'encre).

Code d'affichage	Causes des erreurs	Correction des erreurs
	Le bloc d'alimentation n'arrive pas à fournir la tension normale.	Informez le service technique.
	Le firmware n'est pas chargé ou il ne l'est que partiellement. Mémoire flash défectueuse.	Informez le service technique.
	Firmware incorrect.	Informez le service technique.

7.4 Remplacement de la lampe flash

Quand la durée de vie de la lampe flash touche à sa fin, le code **13** s'affiche sur l'écran de l'imprimante.



Le code **13** signifie que la lampe flash doit être remplacée.

Pour de plus amples informations sur la méthode d'insertion/de remplacement de la lampe flash, voir ([→ P. 32 – 4.6 Montage/remplacement de la lampe flash](#)).




Avertissement

Avant de procéder au remplacement de la lampe flash, il faut éteindre l'imprimante et la débrancher.

10 s

1. Allumer l'imprimante après avoir remplacé la lampe.
2. Passer ensuite en mode Offline, puis maintenir la touche **ERROR** enfoncée pendant 10 s ; le code "13" disparaît de l'écran.

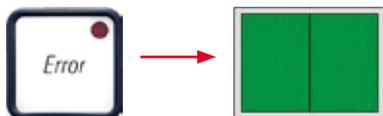

Avertissement

Une lampe flash défectueuse ayant été remplacée sans que le message "13" ne s'affiche à l'écran, doit également être confirmée en suivant la procédure susmentionnée (maintenir la touche **ERROR** enfoncée pendant 10 s).

7.5 Panne de courant

- Vérifier qu'il ne s'agit pas d'une panne de courant générale (aucune alimentation).
- Vérifier si la fiche secteur est branchée correctement dans la prise secteur, et si la prise secteur est alimentée en courant électrique.
- Vérifier si l'interrupteur principal est correctement enclenché. Il se peut que le fusible primaire ait réagi. Dans ce cas, l'interrupteur principal se trouve en position "0" = **ARRÊT** (→ "Fig. 60-1").



Fig. 60

- Vérifier si l'un des deux fusibles secondaires (→ "Fig. 61") est défectueux (**F1**, **F2** au dos de l'appareil (→ "Fig. 62")).
- Certains dysfonctionnements ou signes de défaillance de l'appareil peuvent être causés par un fusible défectueux.



Fig. 61

Dysfonctionnement

- L'appareil ne fonctionne pas.
- Absence d'affichage à l'écran.
- L'appareil ne fonctionne pas à la vitesse habituelle. L'impression d'une lame porte-objets dure env. 8 s même après la phase de préchauffage.

Vérifier le fusible.

Fusible **F2**

Fusible **F2**

Fusible **F1**

7.6 Remplacement des fusibles secondaires



Avertissement

Avant de changer un fusible, il faut toujours mettre l'appareil hors tension et le débrancher. Utiliser uniquement les fusibles de rechange fournis.

Remplacement des fusibles

1. Insérer un tournevis (→ "Fig. 62-2") dans la fente d'une douille de fusible (→ "Fig. 62-1"); avec un tournevis, enfoncer légèrement la douille de fusible et faire 1/4 de tour vers la gauche.

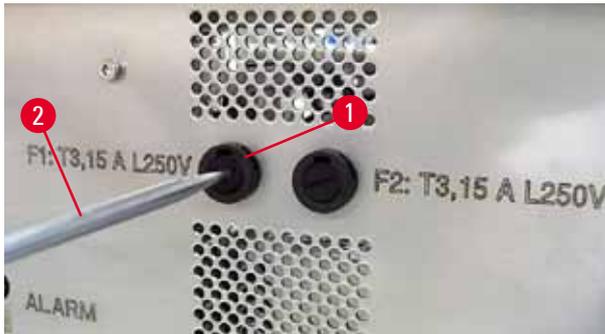


Fig. 62

2. La douille de fusible sort de son logement et peut être extraite.
3. Sortir le fusible usagé (→ "Fig. 63-2") de la douille (→ "Fig. 63-1"), puis insérer un fusible de rechange de même type.



Fig. 63

4. Mettre en place la douille de fusible avec le fusible de rechange. L'enfoncer avec un tournevis et la fixer en faisant 1/4 de tour vers la droite.

8. Garantie et service après-vente**Garantie**

Leica Biosystems Nussloch GmbH garantit que le produit contractuel livré a fait l'objet d'un contrôle de qualité approfondi basé sur les normes de vérification internes de Leica, que le produit est sans défaut et qu'il comporte toutes les spécifications techniques garanties et/ou les caractéristiques convenues.

L'étendue de la garantie dépend du contenu du contrat. Seules s'appliquent les conditions de garantie de votre société de vente de produits Leica compétente ou de la société qui vous a livré le produit contractuel.

Informations concernant le service après-vente

Si vous avez besoin d'une intervention du service technique ou de pièces de rechange, veuillez contacter votre agent ou le revendeur Leica qui vous a vendu l'appareil.

Il est nécessaire de communiquer les données suivantes de l'appareil :

- Nom du modèle et numéro de série de l'appareil.
- Lieu d'implantation de l'appareil et personne à contacter.
- Motif de la demande adressée au service après-vente.
- Date de livraison.

Mise hors service et mise au rebut

L'appareil ou les pièces détachées de l'appareil doivent être mis au rebut conformément aux dispositions légales respectives en vigueur.

Pour de plus amples informations sur l'élimination correcte de la cartouche d'encre, suivre les instructions de la fiche technique de sécurité (voir <https://www.msdsonline.com>).

9. Certificat de décontamination

Tout produit à retourner à Leica Biosystems ou nécessitant une maintenance sur site doit être correctement nettoyé et décontaminé. Vous trouverez le modèle correspondant de la confirmation de décontamination sur notre site Web www.LeicaBiosystems.com dans le menu des produits. Ce modèle doit être utilisé pour collecter toutes les données requises.

Lors du retour d'un produit, une copie de la confirmation dûment complétée et signée doit être jointe ou remise au technicien de service. La responsabilité des produits retournés sans cette confirmation ou avec une confirmation incomplète incombe à l'expéditeur. Les biens retournés qui sont considérés comme une source de danger potentielle par l'entreprise seront retournés aux frais et aux risques de l'expéditeur.

www.LeicaBiosystems.com



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17 - 19
69226 Nussloch
Allemagne

Tél. : +49 - (0) 6224 - 143 0
Télécopie : +49 - (0) 6224 - 143 268
Web : www.LeicaBiosystems.com