

ライカ ST4020

LINEAR STAINER





1 オプションのフード付きLeica ST4020 Linear Stainer

迅速な対応が必要な時

Leica ST4020 Linear Stainer

Leica ST4020 Linear Stainerを用いて、術中凍結切片を迅速かつ容易に染色することができます。このコンパクトな染色装置は、クライオスタット周辺に収まるほど小さめのサイズでありながらも、緊急の試料の扱いに十分な迅速性も備えています。

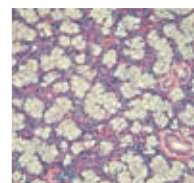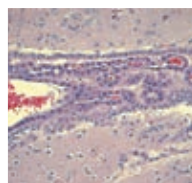

スピードと生産性

患者さんが回答を必要としている時、無駄にできる時間はありません。そのため、Leica ST4020 Linear Stainerは、お客様のクリオスタート近くに収まるサイズで、術中凍結切片を自動染色します。

- ▶ 大容量 – 装置に最大72枚のスライドを同時に搭載できます。
- ▶ 迅速なスピード – 合計処理時間は、ほんの約2分程度です。
- ▶ ウォークアウェイの利便性* – 16枚のスライド用の回収タンクとプロトコール終了を知らせるアラーム
- ▶ 連続ロード – 各ラック搬送間隔で4枚のスライドのラックを追加します。

高品質

いくら迅速なスライド対応が必要でも、品質を妥協することはできません。Leica ST4020 Linear Stainerは、新しい試薬、オプションの攪拌、カスタマイズ可能なプロトコールにより、診断品質が維持されます。

- ▶ 流水を使用して、最良の洗浄品質を確保してください。3つのステーションを新鮮な流水に接続できます。
- ▶ 試薬の消費量が少ない – 少量のコンテナ（50 mL）により、試薬の定期的な交換が容易になり、コストを削減します。
- ▶ 染色のニーズに適応 – 染色時間は簡単に調整できます。
- ▶ 長時間のプロトコールの性能を向上 – 攪拌オプションにより、長時間の染色時間でもプロトコールをサポートします。

柔軟性

ライカ ST4020 Linear Stainerは、小さいですが、機能は十分に備えています。柔軟なプログラミングによりプロトコールを最適化し、多くの試料タイプを実行できます。皮膚試料（モース試料）、凍結切片、細針吸引、および生検を自動する必要がある場合に、Leica ST4020 Linear Stainerを使用します。

- ▶ 幅広いプロトコールと組織タイプを実行 – ステーションあたり2～300秒で染色速度を調整できます。
- ▶ 必要な試薬シーケンスを設定します。14の試薬ステーションにより柔軟な染色シーケンスが可能です。
- ▶ 柔軟性 – 可変の開始位置により、プロトコールの柔軟性が向上します。

当社のコア組織学ソリューションの詳細については、ライカ バイオシステムズの担当者にお問い合わせください。

[LeicaBiosystems.com/ご連絡先](http://LeicaBiosystems.com/)

*可聴範囲内

技術仕様は変更される場合があります。
Leica ST4020 Linear Stainerは、ULの要件に従って設計および製造されており、UL承認記号を有しています。

ライカ バイオシステムズは、世界中に充実したカスタマーサービスネットワークを持つグローバルカンパニーです。最寄りの営業所または販売代理店の連絡先情報については、弊社Webサイトをご覧ください。LeicaBiosystems.com

含まれる製品は、体外診断専用です。



1 16枚のスライド用の回収タンク



2 スライドキャリア/ラックにつきスライドラック×4、スライド×4

LEICA ST4020 LINEAR STAINERの技術仕様

寸法

幅:	24.5"	62 cm
奥行き:	8"	20cm
高さ:	10"	25cm
クリアランスの高さ:	18.2"	47 cm
重量:	35 lbs	16 kg

容量

染色時間:	各ステーションで2~300秒
攪拌:	0~3回浸す
試薬ステーション数:	14
出口タンク容量:	スライドキャリアx4
スライドキャリアの容量:	スライド4枚
試薬コンテナ容量:	50 mL
洗浄ステーション数:	最大3

ライカ バイオシステムズは、ワークフローソリューションとオートメーションにおけるグローバルリーダーです。生検から診断までのワークフローを所有する唯一の企業として、弊社はこれらの各ステップ間にある障壁を取り外すユニークな立場にあります。「Advancing Cancer Diagnostics, Improving Lives」というLBSの使命は、私たちの企業文化の中核を成すものです。使いやすく一貫して信頼性の高いLBSの製品とサービスは、ワークフローの効率と診断の確信度を高めます。当社は、100カ国以上で事業活動を展開しています。9カ国に製造拠点、19カ国に販売・サービス組織を擁し、世界的な販売網を構築しています。本社所在地はドイツのヌスロフです。詳しくはLBSのウェブサイトLeicaBiosystems.comをご覧ください。