

HistoCore SPECTRA ST

Infärgare



Bruksanvisning
Svenska

Beställningsnr: 14 0512 80114 - Revision R

Ska alltid förvaras i närheten av instrumentet.
Ska läsas noggrant innan instrumentet tas i drift.



Informationen, sifferuppgifterna, anvisningarna och värdebedömningarna i denna bruksanvisning speglar den aktuella vetenskapliga och tekniska nivå som vi har kommit fram till i våra grundliga efterforskningar.

Vi är inte skyldiga att regelbundet anpassa denna bruksanvisning efter nya tekniska rön och inte heller att löpande förse våra kunder med nya exemplar, uppdateringar osv. av denna bruksanvisning.

I den omfattning respektive gällande nationell lagstiftning tillåter detta ansvarar vi inte för felaktiga uppgifter, ritningar, tekniska illustrationer osv. som finns i denna bruksanvisning. I synnerhet tar vi inte något ansvar för någon ekonomisk förlust eller följdskada orsakad av eller relaterad till efterlevnad av uppgifter eller annan information i denna bruksanvisning.

Uppgifter, skisser, bilder och övrig information av innehållsmässig samt teknisk karaktär i denna bruksanvisning ska inte tolkas som garanterade egenskaper hos våra produkter.

I det avseendet är det enbart de avtalsenliga bestämmelserna mellan oss och våra kunder som gäller.

Leica förbehåller sig rätten till ändringar av den tekniska specifikationen samt produktionsprocessen utan föregående meddelande. Det är endast på detta sätt som en fortlöpande teknisk och produktionsteknisk förbättringsprocess är möjlig.

Denna dokumentation är upphovsrättsligt skyddad. All upphovsrätt tillhör Leica Biosystems Nussloch GmbH.

All reproduktion av text och bilder (helt eller delvis) genom tryck, kopiering, mikrofilm, webbkamera eller andra metoder – inklusive samtliga elektroniska system och medier – är endast tillåtet med uttryckligt, skriftligt medgivande på förhand från Leica Biosystems Nussloch GmbH.

Serienummer samt tillverkningsår framgår av typskylten på instrumentets baksida.



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Strasse 17 - 19
69226 Nussloch
Tyskland
Tel.: +49 - (0) 6224 - 143 0
Fax: +49 - (0) 6224 - 143 268
Webb: www.LeicaBiosystems.com

Innehållsförteckning

1. Viktig information	7
1.1 Symboler och deras betydelse	7
1.2 Instrumenttyp	11
1.3 Målgrupp.....	11
1.4 Avsedd användning.....	11
1.5 Upphovsrätt – Instrumentets programvara	12
2. Säkerhet	13
2.1 Säkerhetsföreskrifter	13
2.2 Varning.....	14
2.3 Inbyggda säkerhetsfunktioner.....	17
3. Instrumentets komponenter och specifikationer	18
3.1 Standardleverans	18
3.2 Specifikationer.....	19
3.3 Allmän översikt – framsida.....	21
3.4 Allmän översikt – baksida	22
3.5 Allmän översikt – insida.....	23
4. Installation och start.....	24
4.1 Krav för uppställningsplatsen	24
4.2 Kranvattenanslutning	25
4.2.1 Anslutning av samtliga 6 sköljvattenstationer.....	26
4.2.2 Kombinerad anslutning 4+2 sköljvattenstationer	26
4.2.3 Avloppsvattenanslutning	28
4.3 Elektrisk anslutning.....	28
4.3.1 Använda en extern avbrottsfri strömkälla (UPS).....	29
4.4 Frånluftsanslutning	30
4.5 Starta och stänga av instrumentet	31
5. Användning	33
5.1 Användargränssnitt – Översikt.....	33
5.2 Element på statusskärmen	34
5.3 Processtatusvisning.....	35
5.4 Visning av facken.....	37
5.5 Huvudmeny – Översikt	38
5.5.1 Knappsatsen	39
5.6 Användarinställningar	40
5.7 Grundläggande inställningar	42
5.7.1 Språkinställningar	43
5.7.2 Regionala inställningar	44
5.7.3 Datum och tid	45
5.7.4 Meny för larmljud – fel- och signalljud	45
5.7.5 Ugnsinställningar	47
5.7.6 Rörelsehastighet – uppåt-/nedåtrörelse (agitering).....	48
5.7.7 Datahantering	49
5.7.8 Serviceuttag	54
5.7.9 Händelsevisning	55
5.7.10 Nätverksinställningar	56
5.8 Reagenslista.....	57

5.8.1	Kopiera en reagens	60
5.8.2	Ändra RHS-data för en reagens	60
5.8.3	Processklasser	61
5.9	Infärgningsprogram	63
5.9.1	Tilldela ett infärgningsprogram en rackhandtagsfärg	65
5.9.2	Leica-infärgningsprogram (förinstallerade)	66
5.9.3	Anpassa Leica-H&E-färgningsprogram	68
5.9.4	Användardefinierade infärgningsprogram	69
5.9.5	Skapa eller kopiera ett nytt infärgningsprogram	69
5.9.6	Infoga eller kopiera ett nytt programsteg	72
5.9.7	Sortera om programsteg	74
5.9.8	Prioritera program för att skapa reagensuppställningen	75
5.9.9	Skapa reagensuppställningen	76
5.9.10	Fylla på reagenser efter det att reagensuppställningen har skapats	77
5.9.11	Anpassa en reagensuppställning	83
6.	Daglig inställning av instrumentet	87
6.1	Förbereda instrumentet för den dagliga inställningen	87
6.2	Daglig inställning av instrumentet	88
6.2.1	Förbereda och hantera reagenskyveter	88
6.2.2	Automatisk skanning av påfyllningsnivå	90
6.3	Reagenshanteringssystem (RHS)	91
6.4	Stationsinformation	93
6.5	Förbereda racket	98
6.6	Infärgningsprocessen	102
6.6.1	Starta infärgningsprocessen	102
6.6.2	Övervaka infärgningsprocessen	105
6.6.3	Infärgningsprocess slutförd	105
6.6.4	Avbryta infärgningsprogrammet	107
6.6.5	Användning som arbetsstation	109
6.6.6	Slutföra den dagliga användningen	110
7.	Rengöring och underhåll	111
7.1	Viktig information om rengöring av instrumentet	111
7.2	Utvändiga ytor, lackerade ytor, instrumentets kåpa	111
7.3	TFT-pekskärm	111
7.4	Insida och avrinningskärl	112
7.5	Överföringsarmar	112
7.6	Avläsningsstation för objektglas	112
7.7	Laddnings- och utmatningsfack	113
7.8	Torr överföringsstation	113
7.9	Överföringsstation (tillval)	114
7.10	Reagenskyveter och sköljvattenkyveter	114
7.11	Rack och handtag	116
7.12	Vattenavlopp	116
7.13	Vattenavloppsslang	117
7.14	Byta filterpatronen till vatteninloppsfilter	117
7.15	Byta det aktiva kolfiltret	118
7.16	Rengöra ugnarna	119
7.17	Ugnens luftfilter	121
7.18	Intervall för underhåll och rengöring	121
7.18.1	Dagligt underhåll och rengöring	122

Innehållsförteckning

7.18.2	Underhåll och rengöring efter behov.....	122
7.18.3	Rengöring och underhåll varje vecka	123
7.18.4	Rengöring och underhåll varje månad.....	123
7.18.5	Rengöring och underhåll var tredje månad.....	123
7.18.6	Rengöring och underhåll varje år	123
8.	Fel och felsökning	124
8.1	Åtgärder för fel på instrumentet.....	124
8.2	Strömavbrott och fel på instrumentet.....	126
8.2.1	Rutin vid strömavbrott.....	129
8.2.2	Återuppta infärgningsprocessen efter ett strömavbrott	131
8.2.3	Avbryta alla infärgningsprocesser vid ett strömavbrott.....	133
8.2.4	Avlägsna ett rack från griparmekanismen.....	134
8.2.5	Borttagning av rack från överföringsstationen	136
8.3	Byta ut huvudsäkringar.....	137
8.4	Remote Care	138
8.5	Stopp i vattenavloppet.....	138
9.	Instrumentets komponenter och specifikationer	141
9.1	Valbara komponenter till instrumentet	141
9.2	Valbara tillbehör	141
10.	Garanti och service	149
11.	Urdrifftagning och kassering	150
12.	Saneringsbeträffelse	151
A1.	Bilaga 1 – Godkända reagenser.....	152

1. Viktig information

1.1 Symboler och deras betydelse



Varning

Om nedanstående information, i synnerhet med avseende på transport och hantering av produkter, samt anvisningarna om försiktig hantering av instrumentet inte beaktas, tar Leica Biosystems GmbH inget ansvar för eventuella följdskador.

Symbol:



Symbolens rubrik:

Beskrivning:

Varning

Varningar visas i vita fält med orange rubrikfält. Varningar markeras med en varningstriangel.

Symbol:



Symbolens rubrik:

Beskrivning:

OBS!

Information som är viktig för användaren visas i vita fält med blå rubrikfält. Informationen markeras med en informationssymbol.

Symbol:

→ "Bild 7 - 1"

Symbolens rubrik:

Beskrivning:

Objektnummer

Objektnummer som numrerar bilder. Siffror i rött avser objektnummer i bilder.

Symbol:

Arbetsledare

Symbolens rubrik:

Beskrivning:

Funktionsknapp

Programvarubeteckningar som måste visas i inmatningsfönstret visas med fet, grå text.

Symbol:

Spara

Symbolens rubrik:

Beskrivning:

Funktionsknapp

Programvarusymboler som man måste trycka på i inmatningsfönstret visas som fet, grå och understruken text.

Symbol:

Strömbrytare

Symbolens rubrik:

Beskrivning:

Knappar på instrumentet

Knappar på instrumentet, som användaren ska trycka på i olika situationer, visas som fet, grå text.

Symbol:



Symbolens rubrik:

Beskrivning:

Obs!

Anger att användaren måste läsa bruksanvisningen, särskilt säkerhetsinformation som varningar och försiktighetsåtgärder som av olika skäl inte kan anges på den medicintekniska produkten.

Symbol:



Symbolens rubrik:

Beskrivning:

Varning, het yta

Denna varningssymbol indikerar ytor på instrumentet som blir heta när instrumentet är i drift. Direktkontakt ska undvikas eftersom det finns risk för brännskador.

Symbol:	Symbolens rubrik:	Tillverkare
	Beskrivning:	Visar den medicintekniska produktens tillverkare.
Symbol:	Symbolens rubrik:	Tillverkningsdatum
	Beskrivning:	Visar datumet då den medicintekniska produkten tillverkades.
Symbol:	Symbolens rubrik:	CE-överensstämmelse
	Beskrivning:	CE-märkningen innebär att tillverkaren intygar att den medicintekniska produkten uppfyller kraven enligt gällande EU-direktiv.
Symbol:	Symbolens rubrik:	CSA-förklaring (Kanada/USA)
	Beskrivning:	CSA-testmärkningen innebär att produkten har testats och uppfyller följande säkerhetsstandarder: CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04; CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-010-04; CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-101-04 Produkten är listad under huvudkontraktsnummer: 217333
Symbol:	Symbolens rubrik:	In vitro-diagnostik
	Beskrivning:	Indikerar en medicinteknisk produkt som är avsedd att användas för in vitro-diagnostik.
Symbol:	Symbolens rubrik:	China ROHS
	Beskrivning:	Miljöskyddssymbol i China RoHS-riktlinjen. Talet i symbolen anger produktens "miljösäkra användningstid" i år. Symbolen används när ett ämne som är begränsat i kina används över den maximalt tillåtna gränsen.
Symbol:	Symbolens rubrik:	WEEE-symbol
	Beskrivning:	WEEE-symbolen anger att el- och elektronikavfall ska sorteras separat och är en överstruken avfallstunna på hjul (§ 7 ElektroG).
Symbol:	Symbolens rubrik:	Växelström
		
Symbol:	Symbolens rubrik:	Artikelnummer
	Beskrivning:	Anger tillverkarens katalognummer så att den medicinska enheten kan identifieras.
Symbol:	Symbolens rubrik:	Serienummer
	Beskrivning:	Anger tillverkarens serienummer så att en viss medicinteknisk produkt kan identifieras.

Symbol:



Symbolens rubrik:

Beskrivning:

Se bruksanvisningen

Anger att användaren behöver läsa i bruksanvisningen.

Symbol:



Symbolens rubrik:

Beskrivning:

TILL (Strömförsörjning)

Strömförsörjningen kopplas till med hjälp av strömbrytaren.

Symbol:



Symbolens rubrik:

Beskrivning:

FRÅN (Strömförsörjning)

Med huvudströmbrytaren bryts strömförsörjningen.

Symbol:



Symbolens rubrik:

Beskrivning:

Varning, risk för elektrisk stöt

Denna varningssymbol indikerar ytor eller områden på instrumentet som står under elektrisk spänning när instrumentet är i drift. Direktkontakt ska därför undvikas.

Symbol:



Symbolens rubrik:

Varning: fara för krosskador

Symbol:



Symbolens rubrik:

Beskrivning:

Brandfara

Brandfarliga reagenser, lösningsmedel och rengöringsmedel är märkta med den här symbolen.

Symbol:



Symbolens rubrik:

Beskrivning:

Observera varningen för laserstrålar och se Bruksanvisningen

Produkten använder en laserkälla av klass 1. Bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna för hantering av lasrar måste följas.

Symbol:




Symbolens rubrik:

Beskrivning:

Använd inte någon form av alkohol vid rengöring och följ instruktionerna i bruksanvisningen

Indikerar att användningen av alkohol eller rengöringsmedel innehållande alkohol vid rengöring av artikeln/delen inte är tillåten. Artikeln/delen blir förstörd om alkohol eller rengöringsmedel innehållande alkohol används vid rengöring.

Symbol:

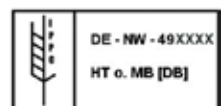

Symbolens rubrik:

Beskrivning:

IPPC-symbol

IPPC-symbolen innehåller:

IPPC-symbol

- Landskod enligt ISO 3166, t.ex. DE för Tyskland
- Regionkod, t.ex. NW för Nordrhein-Westfalen
- Registreringsnummer, ett unikt nummer som börjar med 49
- Behandlingsmetod, t.ex. HT (värmebehandling)

Symbol:



Symbolens rubrik:

Beskrivning:

Ömtåligt, hanteras varsamt

Betecknar en medicinteknisk produkt som vid oförsiktig hantering kan gå sönder eller skadas.

Symbol:



Symbolens rubrik:

Beskrivning:

Förvaras torrt

Betecknar en medicinteknisk produkt som ska skyddas mot fukt.

Symbol:



Symbolens rubrik:

Beskrivning:

Begränsad stapling

Det största antal identiska kollin som får staplas på varandra; "2" anger tillåtet antal kollin.

Symbol:



Symbolens rubrik:


Beskrivning:

Denna sida upp

Visar korrekt upprätt placering av förpackningen.

Symbol:

Transport temperature range:

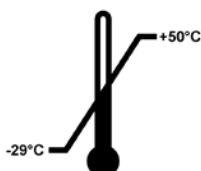

Symbolens rubrik:


Beskrivning:

Temperaturbegränsning vid transport

De angivna temperaturgränsvärdena vid transport är de som den medicintekniska produkten kan utsättas för utan risk.

Symbol:

Storage temperature range:

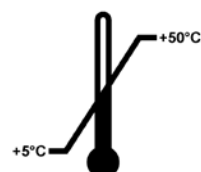

Symbolens rubrik:

Beskrivning:

Temperaturbegränsning vid förvaring

De angivna temperaturgränsvärdena vid förvaring är sådana som den medicintekniska produkten kan utsättas för utan risk.

Symbol:



Symbolens rubrik:

Beskrivning:

Luftfuktighetsgräns vid transport och förvaring

Betecknar den luftfuktighet som den medicintekniska produkten kan utsättas för utan risk vid transport och förvaring.

Utseende:**Beteckning:****Beskrivning:****Tippindikator**

Indikator för att kontrollera att sändningen har transporterats och förvarats upprätt i enlighet med kraven. Från och med en lutning på 60° rinner blå kvartssand in i det pilformade visningsfältet och fastnar där. En eventuellt felaktig hantering av den tippkänsliga produkten syns genast och kan bevisas utan tvivel.

**Obs!**

- Vid leverans av instrumentet måste mottagaren kontrollera att tippindikatorn är intakt. Om alla indikatorer har utlösts måste den ansvariga Leica-representanten underrättas.
- Med Bruksanvisningen följer en inbunden broschyr för RFID-registrering. Broschyren innehåller landsspecifik information gällande betydelsen av RFID-symboler och registreringsnummer som finns på förpackningen eller på typskylten på HistoCore SPECTRA ST.

1.2 Instrumenttyp

Alla uppgifter i denna bruksanvisning gäller enbart för den instrumenttyp som anges på titelsidan. En typskylt som indikerar instrumentets serienummer finns på baksidan av instrumentet. Dessutom finns en typskylt med kinesisk och japansk registreringsinformation på den bakre panelen på instrumentet.

1.3 Målgrupp

- HistoCore SPECTRA ST får endast användas av auktoriserad personal som har omfattande utbildning i att använda reagenser i ett laboratorium och tillämpa dessa histologiskt.
- Arbetet med instrumentet får inte påbörjas förrän användaren har läst denna bruksanvisning noggrant och är förtrogen med instrumentets samtliga tekniska detaljer. Instrumentet är endast avsett att användas i professionellt syfte.

1.4 Avsedd användning

HistoCore SPECTRA ST är ett in vitro-diagnostikinstrument. HistoCore SPECTRA ST är en infärgare för användning i laboratoriet och är avsedd för förberedelse av histologisk och cytologiska preparat.

**Varning**

All avvikande användning av instrumentet klassas som ej ändamålsenlig. Felaktig användning kan leda till olyckor, personskador och/eller skador på instrumentet eller tillbehör. Till ändamålsenlig användning räknas att följa samtliga anvisningar i denna bruksanvisning, instruktionerna för inspektions- och underhållsarbeten samt fortlöpande kontroll av reagensernas hållbarhet och kvalitet. HistoCore SPECTRA ST utför de specifika infärgningsstegen automatiskt. Tillverkaren kan därför inte lämna någon garanti för infärgningsresultaten om infärgningssteg och program matas in på ett felaktigt sätt. Därför ansvarar slutanvändaren själv för egenhändigt skapade och applicerade reagenser eller programinmatningar.

1.5 Upphovsrätt – Instrumentets programvara

Programvaran som är installerad på HistoCore SPECTRA ST är föremål för följande licensavtal:

1. GNU General Public License Version 2.0, 3.0
2. GNU Lesser General Public License 2.1
3. ytterligare mjukvara är inte licensierad under GPL/LGPL

De fullständiga licensavtalen för den första och andra licensen finns i den medföljande språk-CD:n ([→ Sida 18 – 3.1 Standardleverans](#)) i mappen **Mjukvarulicenser**.

Leica Biosystems tillhandahåller en komplett, maskinläsbar kopia av källkoden till alla tredjeparter i enlighet med villkoren i GPL/LGPL gällande källkoden eller andra tillämpliga licenser. Kontakta oss på www.leicabiosystems.com och använd respektive kontaktformulär.

2. Säkerhet

2.1 Säkerhetsföreskrifter



Varning

- Säkerhetsanvisningarna och varningsinformationen i detta kapitel måste följas. De ska läsas även om du redan är förtrogen med hanteringen av andra Leica-instrument.
- Skyddsanordningarna på instrument och tillbehör får varken avlägsnas eller modifieras.
- Instrumentet får endast öppnas och repareras av servicetekniker som är auktoriserade av Leica.

Kvarstående risker:

- Instrumentet är tillverkat enligt den senaste tekniken och vedertagna säkerhetstekniska normer och regler. Felaktig användning eller hantering kan medföra livsfara för användaren eller tredje part, eller leda till att instrumentet eller annan materiell egendom skadas.
- Instrumentet får endast användas på ändamålsenligt sätt och om alla säkerhetsanordningar är i ett felfritt skick.
- Skulle det uppstå störningar som kan försämrade säkerheten ska instrumentet genast tas ur drift och ansvarig Leica-servicetekniker informeras.
- Endast originalreservdelar och godkända Leica-originaltillbehör får användas.
- Elektromagnetisk kompatibilitet, störsändningar och störtålighet samt kraven enligt IEC 61326-2-6 gäller. Kraven enligt IEC 61010-1, IEC 61010-2-101, IEC 62366 och ISO 14971 med avseende på säkerhetsinformation gäller.

Denna bruksanvisning innehåller viktiga anvisningar och information för instrumentets driftsäkerhet och underhåll.

Den utgör en viktig del av instrumentet och ska läsas noggrant innan instrumentet tas i drift och används, och ska sedan förvaras i anslutning till instrumentet.



Obs!

Bruksanvisningen ska kompletteras med anvisningar om detta krävs enligt gällande nationella föreskrifter om olycksförebyggande åtgärder och miljöskydd i det land där instrumentet används. EG-försäkran om överensstämmelse för instrumentet hittar du på:
<http://www.LeicaBiosystems.com>

Detta instrument är tillverkat och kontrollerat enligt säkerhetsbestämmelserna för elektrisk mät-, styr-, regler- och laboratorieutrustning. För att bevara instrumentets skick och säkerställa säker drift ska användaren följa samtliga anvisningar och varningar i denna bruksanvisning.

**Varning**

- Förekomst av skadlig mjukvara i systemet kan leda till att systemet uppför sig okontrollerat. instrumentets funktion enligt specifikationen kan i så fall inte längre garanteras! Om användaren misstänker att skadlig programvara finns i systemet ska den lokala IT-avdelningen genast informeras.
- Det är mycket viktigt att alltid se till att all data som överförs till instrumentet är fri från virus. Det ingår inga antivirusprogram i leveransen.
- Instrumentet är endast avsett att integreras i nätverk som skyddas av en brandvägg. Leica tar inget ansvar för fel som uppstår till följd av integrering i ett oskyddat nätverk.
- Anslutning av en USB-enhet (mus, tangentbord osv.) får ENDAST utföras av tekniker som är utbildade och godkända av Leica. Detta gäller även nätverksanslutningen, som endast ska användas tillsammans med Remote Care (servicediagnostik).

För att skydda preparaten indikerar HistoCore SPECTRA ST när användaren behöver ingripa. Detta görs med hjälp av skärmmeddelanden och ljudsignaler. Därmed måste användaren befinna sig inom höravstånd under användning av HistoCore SPECTRA ST.

**Varning**

Produkten använder en laserkälla av klass 1.

Obs! Laserstrålning! Titta inte in i strålen! Det kan ge skador på ögats näthinna.

**Varning**

LASERSTRÅLNING – TITTA INTE

IN I STRÅLEN

ISO 60825-1: 2014

P<1 mW, λ = 630 till 670 nm

Pulslängd = 500 μ s

Laserprodukt klass 1

2.2 Varning

Säkerhetsanordningarna som tillverkaren har monterat på detta instrument utgör endast ett grundläggande olyckskydd. Huvudansvaret för ett olycksfritt arbete ligger framför allt hos företaget där instrumentet används samt hos de utsedda personer som använder, underhåller eller reparerar instrumentet.

För att instrumentets felfria funktion ska kunna garanteras ska följande anvisningar och varningar följas.

Observera att det kan förekomma elektrostatiska urladdningar vid direkt eller indirekt kontakt med HistoCore SPECTRA ST.

**Varning**

En markering med en varningstriangel på instrumentets ytor på instrumentet betyder att användningsinstruktionerna (i enlighet med denna bruksanvisning) måste följas när den märkta delen används eller byts ut. Felaktig användning kan leda till olyckor, personskador och/eller skador på instrumentet/tillbehören eller förstörda, obrukbara prover.

**Varning**

Vissa ytor på instrumentet blir mycket varma även vid korrekt användning. De är försedda med denna varningssymbol. Kontakt med dessa ytor utan lämpliga skyddsåtgärder kan leda till brännskador.

Varningsinformation – transport och installation**Varning**

- Instrumentet får endast transporteras upprätt.
- Instrumentets tomvikt är 165 kg. Därför krävs det fyra kvalificerade personer för att lyfta eller bära instrumentet.
- Använd handskar med bra grepp när instrumentet ska lyftas.
- Leica rekommenderar att transport, uppställning och eventuell flytt av instrumentet överläts åt ett transportföretag.
- Spara instrumentets emballage.
- Ställ instrumentet på ett stabilt laboratoriebord med tillräcklig lastkapacitet och justera det så att det står vågrätt.
- Undvik att utsätta instrumentet för direkt solljus.
- Instrumentet får endast anslutas till ett jordat eluttag. Skyddsverkan får inte upphävas genom användning av en förlängningssladd utan jordningskabel.
- Vid extrema temperaturskillnader mellan förvarings- och uppställningsplats och samtidig hög luftfuktighet kan kondens bildas inuti instrumentet. Vänta i så fall minst två timmar innan instrumentet startas.
- Installationen av instrumentet på användningsplatsen får endast ske med och under anvisning av personal utbildad av Leica. Detta gäller även för eventuell transport till en ny användningsplats. Det rekommenderas att personal utbildad av Leica tar instrumentet i drift igen.
- Enligt gällande nationella regler och föreskrifter kan användarföretaget vara skyldigt att permanent säkra den allmänna vattenförsörjningen mot att förorenas av returvatten från installationen. I Europa sker valet av säkringsarmatur för dricksvatteninstallationen som ska anslutas enligt föreskrifterna i DIN EN 1717:2011-08 (informationen aktuell augusti 2013).

Varningsinformation – hantering av reagenser**Varning**

- Var försiktig när lösningsmedel hanteras.
- Bär alltid lämplig laboratoriekälsel samt handskar och skyddsglasögon vid hantering av kemikalierna som används i detta instrument.
- Uppställningsplatsen ska ha god ventilation. Dessutom rekommenderar vi starkt att man ansluter instrumentet till ett externt ventilationssystem. Kemikalierna som används i HistoCore SPECTRA ST är brandfarliga och kan utgöra en hälsofara.
- Drift i utrymmen med explosionsrisk är inte tillåten.
- När förbrukade reagenser kasseras ska gällande lokala bestämmelser samt avfallshanteringsreglerna på företaget/institutionen där instrumentet används alltid följas.
- Reagenskyvetter ska alltid fyllas på utanför instrumentet och i enlighet med säkerhetsanvisningarna.

Varningsinformation – arbete med instrumentet



Varning

- Instrumentet får endast användas av utbildad laboratoriepersonal. Den får endast användas i enlighet med instruktionerna i denna bruksanvisning. Vid arbete med instrumentet bör antistatisk skyddsklädsel (t.ex. av naturfiber) användas.
- När du arbetar med instrumentet ska du bära lämpliga skyddskläder (labbrock, skyddsglasögon och handskar) för att skydda dig mot reagenser och potentiellt smittsamma mikrobiologiska föroreningar.
- I nödfall ska **strömbrytaren** stängas av och strömkontakten (krets brytare enligt EN ISO 61010-1) dras ur.
- Vid allvarliga instrumentstörningar måste varnings- och felmeddelandena på bildskärmen följas. Prover som befinner sig i en process måste avlägsnas från instrumentet omedelbart. Användaren ansvarar för att den fortsatta bearbetningen av proverna sker på ett säkert sätt.
- Vid arbete med öppen eld (t.ex. bunsenbrännare) i närheten av instrumentet föreligger brandrisk på grund av ångor från lösningsmedel. Därför ska ett säkerhetsavstånd på minst två meter hållas.
- Du måste vara helt säker på att instrumentet används med ett aktivt kolfilter. Dessutom rekommenderar vi starkt att man ansluter instrumentet till ett externt ventilationssystem eftersom användningen av instrumentet kan leda till att det bildas lösningsmedelsångor som både är brandfarliga och skadliga för hälsan, även när instrumentet används korrekt.



Obs!

För att hantera avgaser från instrumentet rekommenderar Leica att en lufttillförsel på 50 m³/h och en 8x luftcirkulation (25 m³/m²/h) används i labbet.



Varning

- Vid arbeten rakt ovanför reagenskylvetter som innehåller lösningsmedel måste personlig skyddsutrustning i form av andningsskydd användas.
- Om kåpan öppnas samtidigt som en eller flera infärgningsprogram är aktiva fördröjs respektive bearbetningssteg, eftersom det inte sker några överföringsrörelser under den tiden. Detta kan leda till förändringar av infärgningskvaliteten.
- Låt alltid kåpan vara stängd under tiden infärgningsprogram är aktiva. Leicas garantiansvar gäller inte kvalitetsförsämringar av infärgningsprogram som beror på att kåpan har öppnats under pågående infärgningsprocess.
- OBSERVERA vid stängning av kåpan: Klämrisk! Sträck dig inte in i kåpans rörelseområde.
- Det får inte läcka in någon vätska bakom locken eller i mellanrummen medan utrustningen är i drift eller rengörs. Detta gäller även överföringsarmarna.
- VAR FÖRSIKTIG med program som börjar med ett ugnssteg! Laddningsstationen som överföringsarmen tar ut objektglasen ur får då INTE innehålla någon lättantändlig reagens (t.ex. xylol, xylolsubstitut eller alkoholer). Ugnens temperatur är max 70 °C. Det kan leda till att reagensen antänds, vilket kan skada instrumentet och preparaten.
- I samband med pauser i arbetet och när instrumentet har stängts av ska vattentillförseln stängas av.

Varningar – Rengöring och underhåll



Varning

- Före allt underhåll ska instrumentet stängas av och strömkontakten dras ur.
- Bär lämpliga skyddskläder (labbrock och handskar) när du rengör instrumentet för att skydda dig mot reagenser och potentiellt smittsamma mikrobiologiska föroreningar.
- Vid hantering av rengöringsmedel ska tillverkarens säkerhetsföreskrifter och laborieföreskrifterna följas.
- Använd inget av följande vid rengöring av instrumentets utvändiga ytor: alkohol, rengöringsmedel med alkohol (glasputsmedel), rengöringspulver med slipmedel, lösningsmedel med aceton, ammoniak, klor eller xylol.
- Använd ingen form av alkohol eller rengöringsmedel innehållande alkohol vid rengöring av vattenfilterkåpan (→ "Bild 5-5"). Det kan resultera i att vatten läcker ut okontrollerat och skadar laboriet och laboriemiljön.
- Kåpor och hölje ska rengöras med mildt, pH-neutralt kommersiellt hushållsrengöringsmedel. De lackerade ytorna tål inte lösningsmedel och xylolsubstitut!
- Reagenskvetterna i plast som hör till sköljvatten- och reagensstationerna kan rengöras i diskmaskin vid en temperatur på högst +65 °C. Vanligt diskmedel för laboriediskmaskiner kan användas. Reagenskvetterna i plast får under inga omständigheter rengöras vid högre temperaturer, eftersom det kan leda till att de deformeras.

2.3 Inbyggda säkerhetsfunktioner

Så fort instrumentets kåpa öppnas kommer överföringsarmarnas rörelser att stanna i ett horisontellt läge (x och y-axel) av säkerhetsskäl, för att förhindra kollision med rörliga delar som kan utgöra fara för användaren och preparaten.



Varning

- Låt alltid kåpan vara stängd under tiden infärgningsprogram är aktiva. Leicas garantiansvar gäller inte kvalitetsförsämringar av infärgningsprogram som beror på att kåpan har öppnats under pågående infärgningsprocess.
- Om kåpan öppnas samtidigt som ett eller flera infärgningsprogram är aktiva fördröjs respektive bearbetningssteg, eftersom det inte sker några överföringsrörelser under den tiden. Detta kan leda till förändringar av infärgningskvaliteten.

3. Instrumentets komponenter och specifikationer

3.1 Standardleverans

Antal	Beteckning	Beställningsnr
1	HistoCore SPECTRA ST Grundinstrument (lokal nätsladd ingår)	14 0512 54354
1	Reagenskyvettsats: 46 reagenskyvetter med lock 6 blå sköljvattenkyvetter 6 O-ringar 7x2	14 0512 47507
1	Sats med etiketter för laddnings- och utmatningsfacket: • 10 st. blanka • 5 st. "H ₂ O" = vatten • 5 st. "A" = alkohol • 5 st. "S" = lösningsmedel (t.ex. xylen)	14 0512 55161
1	Sats med aktiva kolfilter (2 st.)	14 0512 53772
1	Avloppsvattenslang, 2 m	14 0512 55279
1	Slangklämma 30 45/12 DIN 3017 RF	14 0422 31972
1	Vattenanslutningssats:	14 0512 49324
2	Vattentillförselslang, 10 mm, 2,5 m	14 0474 32325
1	Förlängningsslang 1,5 m	14 0512 49334
1	Y-koppling G3/4	14 3000 00351
2	Dubbelnippel G3/4 G1/2	14 3000 00359
1	Filterhus	14 0512 49331
1	Filterpatron	14 0512 49332
1	Rörkoppling G3/4	14 3000 00360
1	Blindkåpa G3/4	14 3000 00434
1	Packningsbricka	14 0512 54772
1	Skiftnyckel SW30 DIN894	14 0330 54755
1	Ventilationsslang, 2 m	14 0512 54365
2	Slangklämma 30 45/12 DIN 3017 RF	14 0422 31972
1	Skruvmejsel 5,5 x 150	14 0170 10702
2	Säkring T16 A	14 6000 04696
1	Molykote 111 smörjfett, 100 g	14 0336 35460
3	Rack för 30 objektglas; 3 st. per förpackning	14 0512 52473
1	Rackhandtag för 30 objektglas; gula, 3 st. per förpackning	14 0512 52476
1	Rackhandtag för 30 objektglas; mörkblå, 3 st. per förpackning	14 0512 52478
1	Rackhandtag för 30 objektglas; röda, 3 st. per förpackning	14 0512 52480
1	Rackhandtag för 30 objektglas; vita, 3 st. per förpackning	14 0512 52484
1	Bruksanvisning, utskriven (engelska med språk-CD 14 0512 80200)	14 0512 80001

Om den medföljande nätsladden är trasig eller försvinner, kontakta din lokala Leica-representant.

**Obs!**

De levererade komponenterna ska jämföras noggrant med packsedeln, leveranssedeln och beställningen. Om du upptäcker några avvikelser ska du kontakta ansvarigt Leica-försäljningskontor direkt.

3.2 Specifikationer

Märkspänning:	100–240 V AC $\pm 10\%$
Märkfrekvens:	50/60 Hz
Effektförbrukning:	1580 VA
Säkringar:	2 x T16 A H 250 V AC
Klassificering enligt IEC 1010:	Skyddsklass 1
Föroreningsgrad	2
Överspänningskategori:	II
Färskvattenanslutning:	
Slangmaterial:	PVC
Slanglängd:	2500 mm
Anslutningsstycke:	G3/4
Innerdiameter:	10 mm
Ytterdiameter:	16 mm
Invändigt tryck: Min./max.:	2 bar/6 bar
Nödvändig flödesmängd:	Min. 1,7 l/minut
Nödvändig vattenkvalitet:	Typ 1, ISO 3696
Avloppsvattenanslutning:	
Slanglängd:	2000 mm/4000 mm
Innerdiameter:	32 mm
Ytterdiameter:	36,8 mm
Frånluft:	
Slanglängd:	2000 mm
Innerdiameter:	50 mm
Ytterdiameter:	60 mm
Utsugseffekt:	27,3 m ³ /h
Utsug av frånluft:	Aktivt kolfilter och ventilationsslang för anslutning till ett externt ventilationssystem
Värmealstring:	1580 J/s
A-viktad bullernivå:	< 70 dB (A)
Internationell skyddsklass:	IP20
Anslutningar:	1 x RJ45 Ethernet (bak): RJ45 – LAN (extern datahantering)
	1 x RJ45 Ethernet (fram): Endast för serviceändamål
	2 x USB 2.0: 5 V/500 mA (service och datalagring)

**Obs!**

Vid användning av en extern avbrottsfri strömförsörjning (UPS) bör denna vara konstruerad för en kapacitet på minst 1 580 VA och kunna säkra driften i minst 10 minuter.

Omgivningsvillkor:

Drift:

Temperatur:	+18 °C till +30 °C
Relativ luftfuktighet:	20 % till 80 %, icke kondenserande
Driftshöjd:	Upp till max. 2 000 m över havet

Förvaring:

Temperatur:	+5 °C till +50 °C
Relativ luftfuktighet:	10 % till 85 %, icke kondenserande

Transport:

Temperatur:	–29 °C till +50 °C
Relativ luftfuktighet:	10 % till 85 %, icke kondenserande

Mått och vikt:

Mått (bredd x djup x höjd):	Stängd kåpa: 1 354 x 785,5 x 615 mm
	Öppen kåpa: 1 354 x 785,5 x 1 060 mm
Tomvikt (utan överföringsstation, reagenser, och tillbehör)	165 kg
Fullvikt (med överföringsstation, reagenser, och tillbehör)	215 kg

3.3 Allmän översikt – framsida

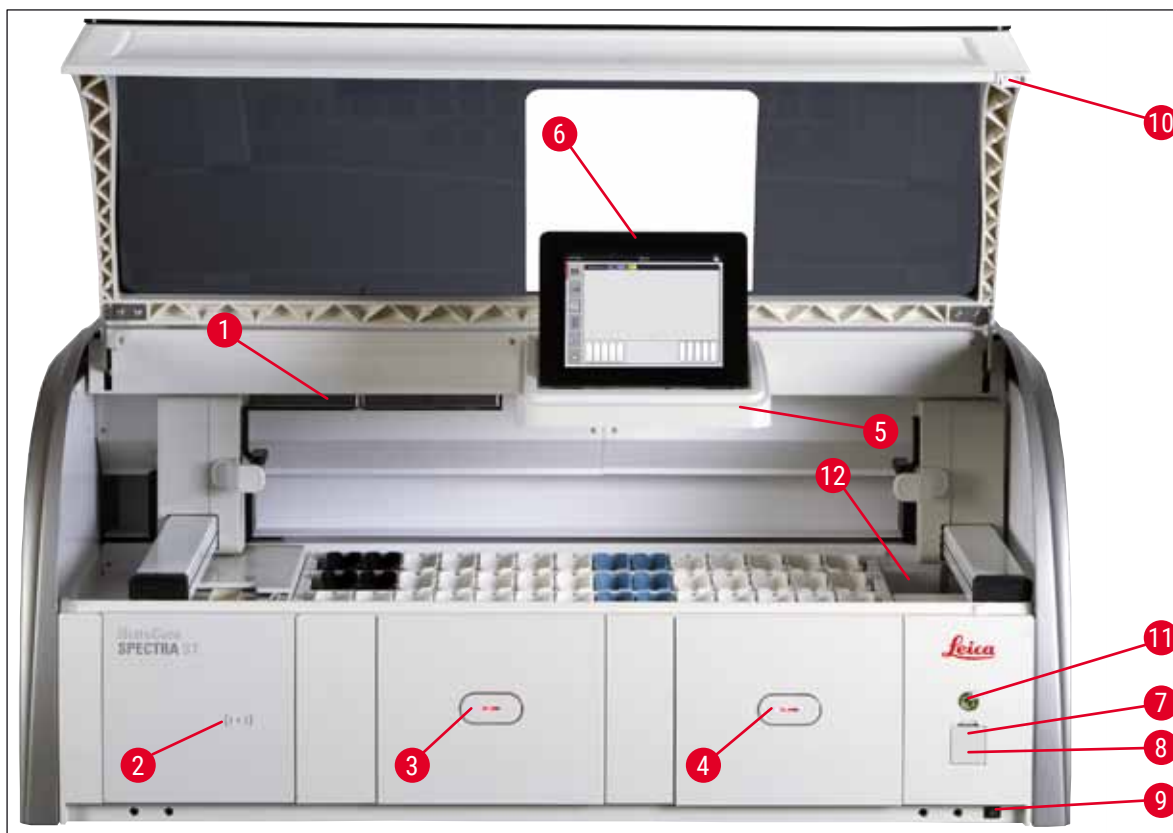


Bild 1

- | | | | |
|---|--------------------------------------|----|---|
| 1 | Isättning av aktivt kolfilter | 7 | USB-uttag (2 st.) |
| 2 | Inläsningsområde för Leica-reagenser | 8 | Serviceuttag |
| 3 | Laddningsfack (inmatare) | 9 | <u>TILL/FRÅN</u> -brytare (<u>strömbrytare</u>) |
| 4 | Utmatningsfack (utmatare) | 10 | Kåpa |
| 5 | Skärmhållare med intern belysning | 11 | <u>Driftströmbrytare</u> |
| 6 | Bildskärm med användargränssnitt | 12 | Överföringsstation (tillval) |

**Varning**

- Serviceuttaget (→ "Bild 1-8") får endast användas av servicetekniker certifierade av Leica!
- Luckan till inläsningsområdet (→ "Bild 1-2") får endast avlägsnas av servicetekniker certifierade av Leica.

3.4 Allmän översikt – baksida

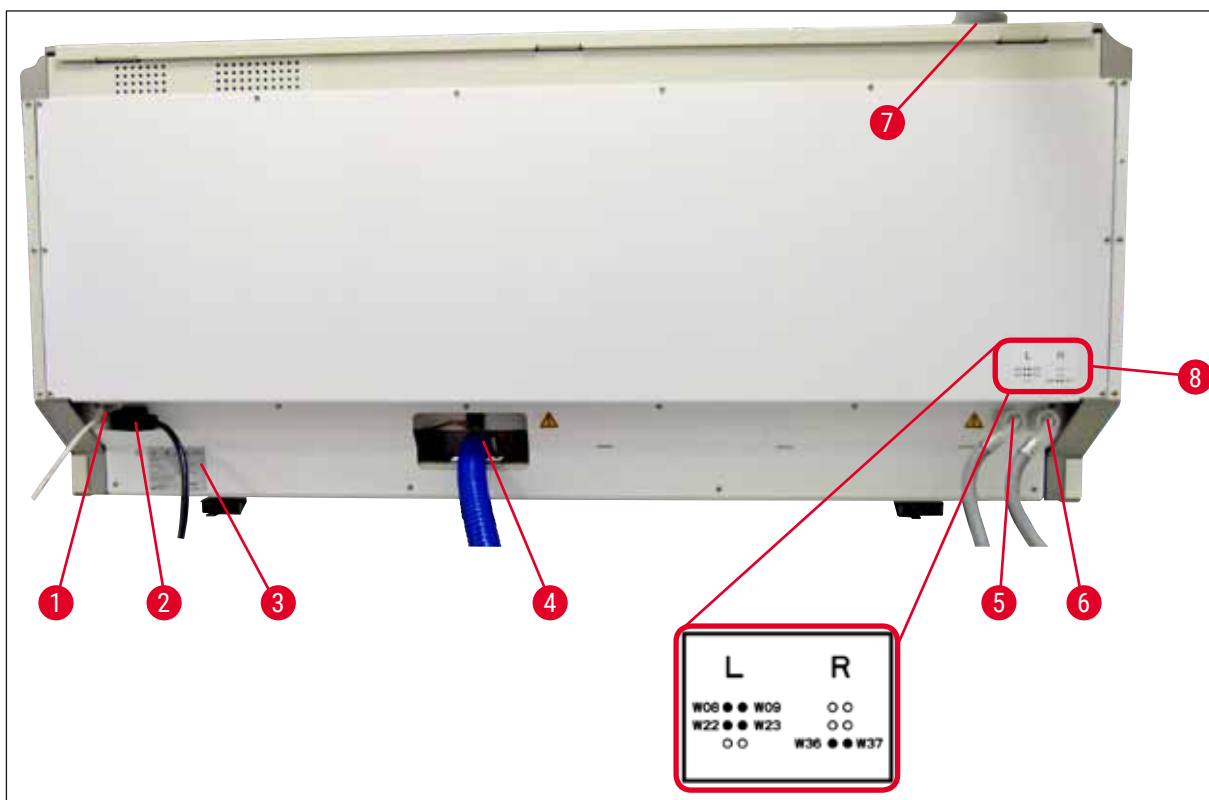


Bild 2

- 1 Nätverksanslutning (Remote Care)
- 2 Strömanslutning
- 3 Typskylt
- 4 Avloppsvattenanslutning
- 5 Sköljvattenanslutning (grupp om 4)
- 6 Anslutning för destillerat vatten eller kranvatten (grupp om två)
- 7 Frånluftsanslutning
- 8 Vattenanslutningsschema

3.5 Allmän översikt – insida

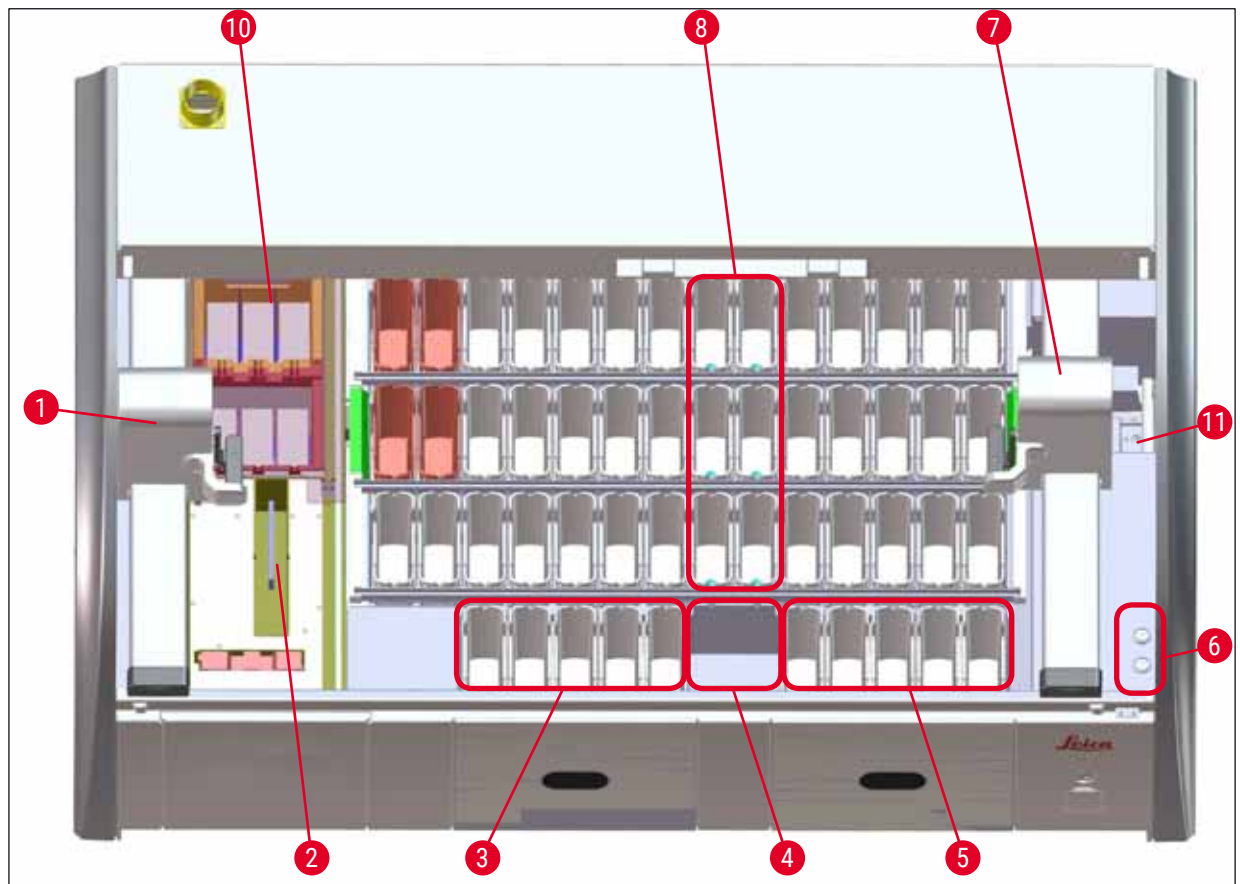


Bild 3

- 1 Vänster överföringsarm
- 2 Avläsningsstation för objektglas
- 3 Laddningsstationer, 5 st.
- 4 Torra överföringsstationer, 2 st.
- 5 Utmatningsstationer, 5 st.
- 6 Säkringshållare, 2 st.
- 7 Höger överföringsarm
- 8 Sköljvattenstationer, 6 st.
- 10 Torkugnsstationer, 6 st.
- 11 Överföringsstation till HistoCore SPECTRA CV (tillval)

4. Installation och start

4.1 Krav för uppställningsplatsen



Obs!

- Uppställning och planjustering utförs som en del av instrumentets installation och får endast utföras av auktoriserad Leica-personal!
 - Det krävs fyra kvalificerade personer för att lyfta instrumentet; Ta tag i alla hörn på ramen och lyft jämnt.
-
- Golvet ska i möjligaste mån vara vibrationsfritt och det ska finnas tillräckligt med fritt utrymme (ca 1,10 m) ovanför laboriebordet så att kåpan kan öppnas obehindrat.
 - Det är användarens ansvar att säkerställa en elektromagnetiskt kompatibel omgivning för instrumentet så att det fungerar som det ska.
 - Vid extrema temperaturskillnader mellan förvarings- och uppställningsplats och samtidig hög luftfuktighet kan kondens bildas. Vänta i minst två timmar innan instrumentet startas. Instrumentet kan skadas om dessa anvisningar inte följs.
 - Stabilt, absolut vågrätt och plant laboriebord, minst 1,40 m brett och 0,80 m djupt.
 - Bordsytan måste vara vibrationsfri och vågrät.
 - Dragskåp på högst 2,0 m avstånd från instrumentet.
 - Instrumentet är endast avsett för drift inomhus.
 - Platsen där det används ska ha god ventilation. Dessutom rekommenderas starkt att det finns ett externt ventilationssystem.
 - Det måste finnas en kravvattenanslutning på högst 2,5 m avstånd från instrumentet. Denna anslutning måste vara lättillgänglig även efter att instrumentet har installerats.
 - Det måste finnas en avloppsvattenanslutning på högst 2 m avstånd. Denna anslutning måste vara ansluten till instrumentet på ett sätt som gör att avloppsvattenslangen har ett permanent fall.



Varning

- En anslutning till ett externt ventilationssystem (rekommenderas starkt), teknisk ventilation samt ett integrerat utsugssystem med aktivt kolfilter minskar koncentrationen av lösningsmedelsångor i rumsluften. Även vid anslutning till ett externt ventilationssystem måste aktiva kolfilter användas. Detta är obligatoriskt.
 - Användarföretaget ansvarar för att arbetsplatsens gränsvärden inte överskrids samt de åtgärder som krävs för detta, inklusive dokumentation.
-
- Ett **JORDAT ELUTTAG** måste finnas på högst 3 m avstånd.

4.2 Kranvattenanslutning



Obs!

- Det finns två olika anslutningar att välja mellan (→ Sida 26 – 4.2.1 Anslutning av samtliga 6 sköljvattenstationer). Instrumentet måste programmeras för den anslutningsvariant som används (→ Sida 95 – Bild 73).

För båda anslutningsvarianter gäller följande installationsanvisningar:

- Ta ur kranvattenslangen (→ "Bild 4-1") ur förpackningen.
- Vattenanslutningsslangen är rak (→ "Bild 4-3"), anslutningsslangen till instrumentet är böjd (→ "Bild 4-4").
- Kontrollera att tätningsringarna (→ "Bild 4-2") sitter fast på vattenanslutningsslangen (→ "Bild 4-3") och på anslutningen till instrumentet (→ "Bild 4-4").



Varning

Slangen kan inte anslutas om tätningsringarna saknas! Kontakta i så fall ansvarig Leica-service.

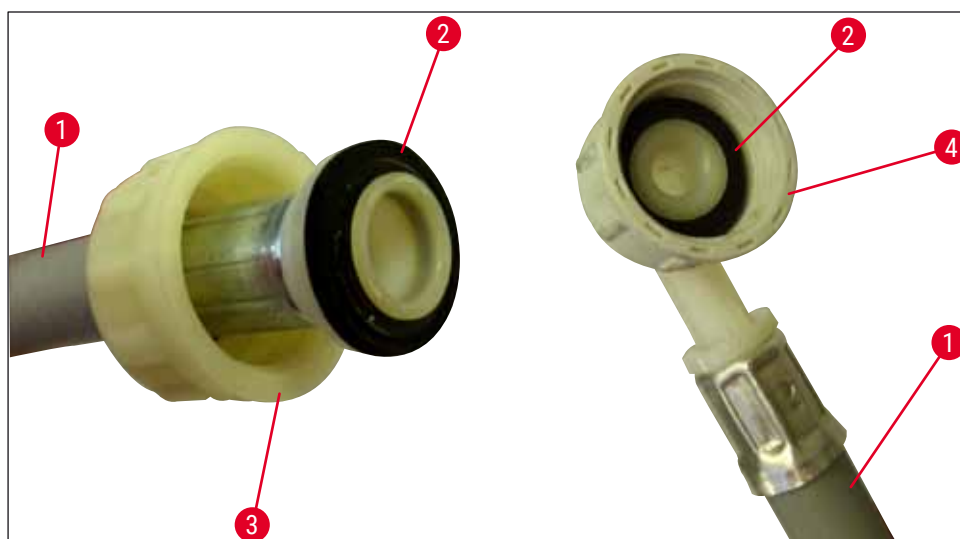


Bild 4



Varning

Oberoende av vilken anslutningsvariant som väljs (sex kranvattenstationer eller fyra kranvattenstationer och två stationer för destillerat/avjoniserat vatten) måste alltid båda tillloppsslangarna anslutas till instrumentet.

Vattentillförseln ska stängas av i samband med pauser i arbetet och när instrumentet har stängts av.

4.2.1 Anslutning av samtliga 6 sköljvattenstationer

Om alla sköljvattenkyvetter (6 sköljvattenstationer) ska anslutas måste båda tilloppslangarna (→ "Bild 5") användas enligt anvisningarna. Båda anslutningarna för rinnande vatten är (→ "Bild 5-4") anslutna till en vattenkran med (→ "Bild 5-8") ett Y-rör:

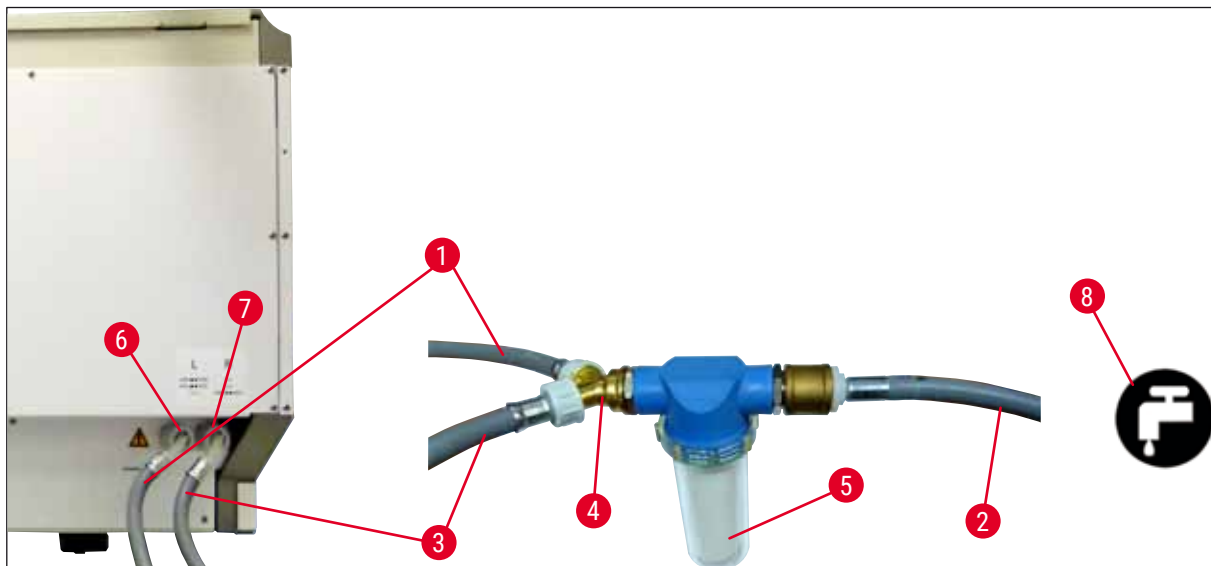


Bild 5

1	Vattentillförselslang 1 (2,5 m)	Beställningsnr: 14 0474 32325
2	Förlängningsslang 1,5 m	Beställningsnr: 14 0512 49334
3	Vattentillförselslang 2 (2,5 m)	Beställningsnr: 14 0474 32325
4	Y-koppling	Beställningsnr: 14 3000 00351
5	Filterhus	Beställningsnr: 14 0512 49331
6	Sköljvattenanslutning (grupp om 4)	
7	Anslutning för destillerat vatten eller kranvatten (grupp om två)	
8	Kranvattenanslutning i laboratoriet	

4.2.2 Kombinerad anslutning 4+2 sköljvattenstationer

Om huvudanslutningen (fyra sköljvattenstationer) ska anslutas till färskvatten och den andra anslutningen (2 sköljvattenstationer) till en källa för destillerat eller avjoniserat vatten i laboratoriet ska följande anslutningsschema användas:

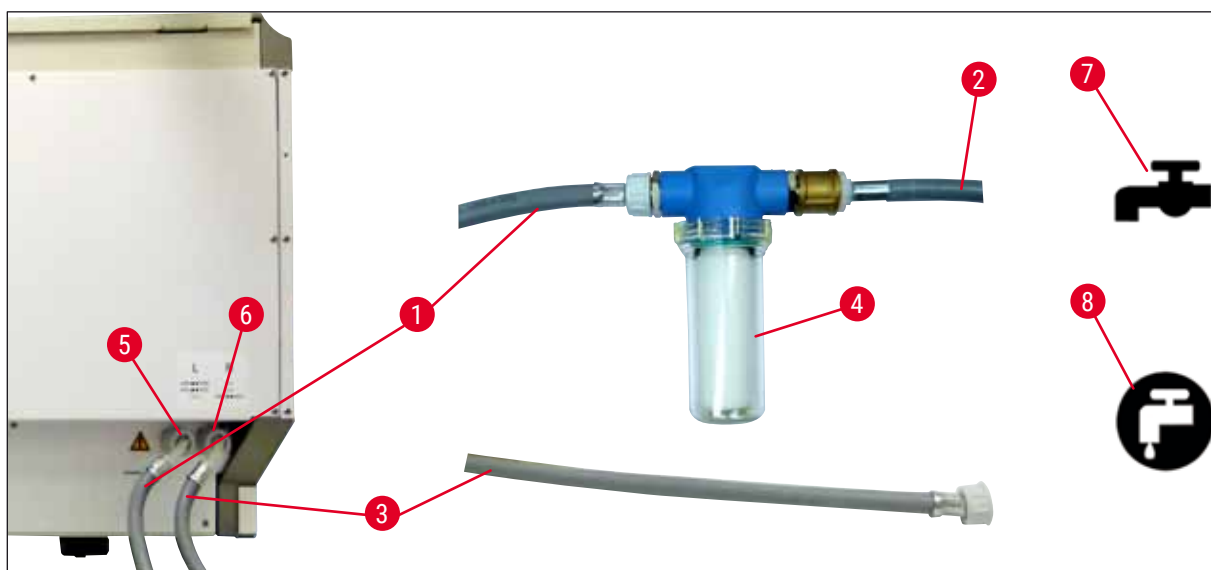


Bild 6

- | | | |
|---|---|-------------------------------|
| 1 | Vattentillförselslang 1 (2,5 m) | Beställningsnr: 14 0474 32325 |
| 2 | Förlängningsslang 1,5 m | Beställningsnr: 14 0512 49334 |
| 3 | Vattentillförselslang 2 (2,5 m) | Beställningsnr: 14 0474 32325 |
| 4 | Filterhus | Beställningsnr: 14 0512 49331 |
| 5 | Sköljvattenanslutning (grupp om 4) | |
| 6 | Anslutning för destillerat vatten eller kranvatten (grupp om två) | |
| 7 | Kranvattenanslutning i laboratoriet | |
| 8 | Anslutning för destillerat/avjoniserat vatten i laboratoriet | |

**Varning**

Det är viktigt att slangarna ansluts på rätt sätt (→ "Bild 2-8")!

4.2.3 Avloppsvattenanslutning

**Obs!**

Instrumentet har en passiv avloppsvattenavrinning. Laboratoriets avloppssifon måste därför sitta minst 50 cm under instrumentets avloppsvattenanslutning.

**Varning**

Avloppsslangen (→ "Bild 7-1") måste ledas med ett jämnt fall nedåt och får inte höjas.

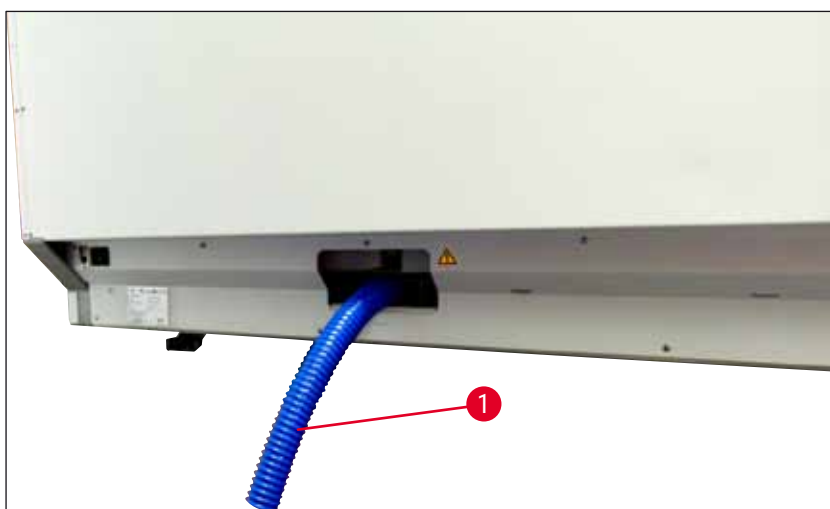


Bild 7

4.3 Elektrisk anslutning

**Varning**

- Använd endast den medföljande strömkabeln som är till för lokal strömförsörjning.
- Innan strömkontakten ansluts till uttaget måste du kontrollera att **strömbrytaren** nere till höger på instrumentets framsida står på **FRÅN** ("0").

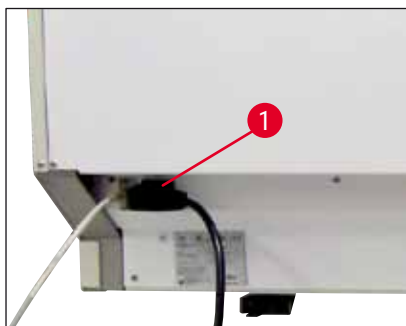


Bild 8

- Anslut strömkabeln till uttaget på baksidan av instrumentet (→ "Bild 8-1").
- Sätt i strömkontakten i ett jordat eluttag.

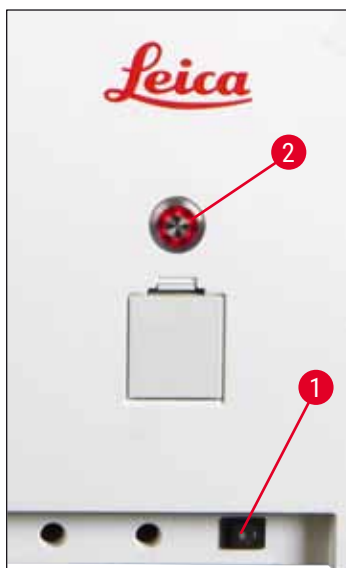


Bild 9

- Koppla till strömbrytaren (→ "Bild 9-1").
- Efter en liten stund börjar driftströmbrytaren att lysa orange. När programmets startsekvens är slutförd lyser brytaren röd (→ "Bild 9-2") och instrumentet är i standby-läge.
- Driftströmbrytaren kan nu användas (→ Sida 31 – 4.5 Starta och stänga av instrumentet).

4.3.1 Använda en extern avbrottsfri strömkälla (UPS)

Ett avbrott av infärgningsprocessen vid tillfälliga strömvavbrott kan undvikas med hjälp av en batteridrivnen avbrottsfri strömkälla (→ "Bild 10-1") (UPS). UPS:n bör kunna leverera en effekt på minst 1 580 VA i tio minuter. UPS:n måste vara avsedd för driftspänningen på uppställningsplatsen. Anslut den genom att ansluta strömkabeln på HistoCore SPECTRA ST till UPS-uttaget. UPS:n ansluts till laboratoriets eluttag.

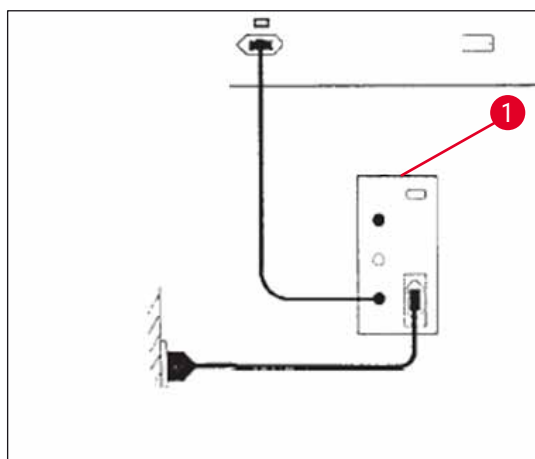


Bild 10



Varning

Strömkabeln till UPS:en måste alltid vara ansluten till eluttaget i labbet, även vid strömvavbrott. Eftersom instrumentets jordning annars inte är säkerställd!

4.4 Frånluftsanslutning

- » Anslut ena änden av ventilationsslangen (→ "Bild 11-1") till ventilationsuttaget (→ "Bild 11-2") på instrumentets ovansida. Och den andra änden till laboratoriets frånluftsventilation.

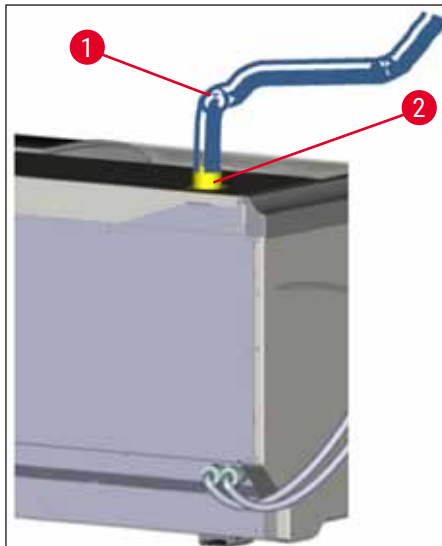


Bild 11



Varning

- En anslutning till ett externt ventilationssystem (rekommenderas starkt) och ett integrerat utsugssystem med ett aktivt kolfilter minskar koncentrationen lösningsmedel i luften och måste användas. För att undvika onödig avdunstning av reagenser ska kyvetterna täckas över när de inte används.
- Vid arbeten med farliga ämnen ska användarföretaget kontrollera att arbetsplatsens gränsvärden inte överskrids.

4.5 Starta och stänga av instrumentet



Varning

Instrumentet ska vara anslutet till ett jordat eluttag. För att skydda (de elektriska) säkringarna ytterligare rekommenderar vi att HistoCore SPECTRA ST kopplas till ett uttag med en jordfelsbrytare (RCCB).

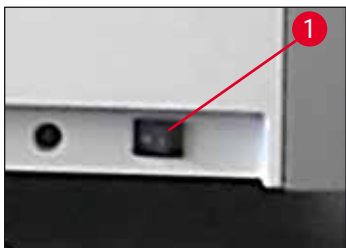


Bild 12

- Sätt strömbrytaren längst ner på instrumentets främre högra sida på TILL ("I") (→ "Bild 12-1").



Bild 13

- Några sekunder efter att strömbrytaren har kopplats till kommer driftströmbrytaren att lysa orange (→ "Bild 13"). Mjukvarans startprocess är slutförd när driftströmbrytaren lyser rött.



Obs!

Om du trycker på driftströmbrytaren medan den lyser orange startar inte instrumentet.



Bild 14

- För att starta instrumentet trycker du på driftströmbrytaren (→ "Bild 13") som blinkar rött. En ljudsignal hörs.
- Under initieringen utförs automatiskt en kontroll av alla stationer (skanning av påfyllningsnivå).
- Driftströmbrytaren lyser grönt när instrumentet är redo för start.
- När initieringsfasen är slutförd visas huvudmenyn (→ "Bild 14") på skärmen.

Avstängning av instrumentet

- Tryck två gånger på **driftströmbrytaren** (→ "Bild 13") för att försätta instrumentet i standby-läge (t.ex. över natten). Driftströmbrytaren lyser då rött.
- Inför rengöring och underhåll ska instrumentet stängas av med **strömbrytaren** (→ "Bild 12-1").



Obs!

När instrumentet installeras eller om inga reagenser har tillsatts identifieras de ofyllda stationerna och markeras på skärmen (→ Sida 90 – 6.2.2 Automatisk skanning av påfyllningsnivå).



Varning

Om ett ugnssteg har programmerats som första steg i infärgningsprogrammet kan programmet markeras som "ej körbart" efter start av instrumentet, eftersom ugnen ännu inte har nått drifttemperaturen. Så snart drifttemperaturen har uppnåtts visas programmet som startklart.

5. Användning

5.1 Användargränssnitt – Översikt

HistoCore SPECTRA ST programmeras och används via en pekskärm i färg. När bildskärmen har slagits på ser den ut på följande sätt om ingen infärgningsprocess (inget program) är i gång.

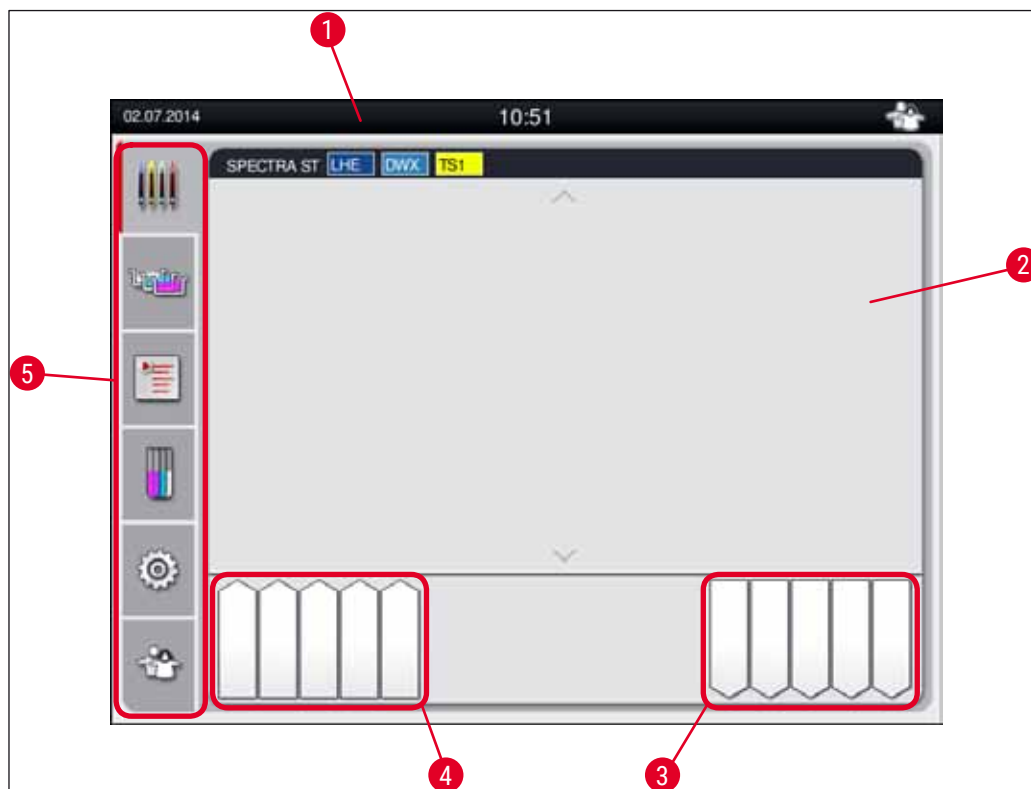


Bild 15

- 1 Statusrad
- 2 Processtatusvisning
- 3 Statusvisning för utmatningsfacket
- 4 Statusvisning för laddningsfacket
- 5 Huvudmeny (→ [Sida 38 – 5.5 Huvudmeny – Översikt](#))

5.2 Element på statusskärmen

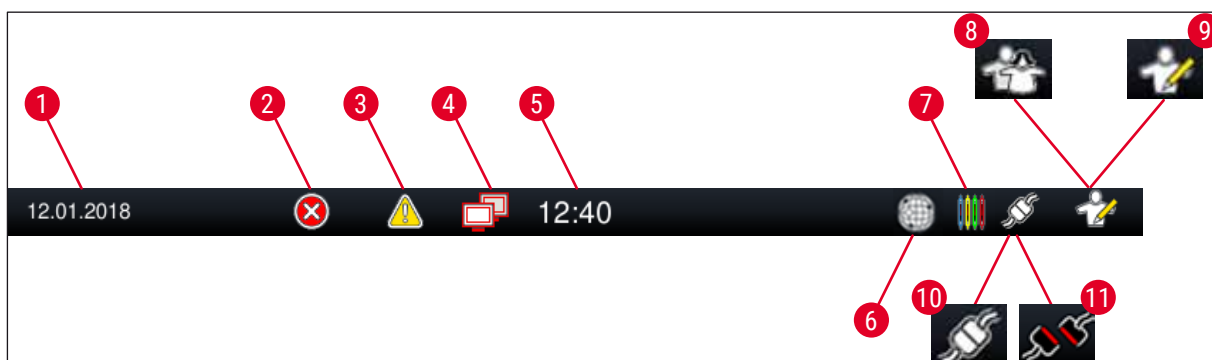


Bild 16

- 1 Aktuellt datum
- 2 Om larm och felinformation visas när instrumentet är i drift syns denna larmsymbol. Genom att trycka på denna symbol kan du öppna de 20 senaste aktiva informationsmeddelandena igen.
- 3 Om varningar och information visas när instrumentet är i drift syns denna informationssymbol. Genom att trycka på denna symbol kan du öppna de 20 senaste aktiva informationsmeddelandena igen.
- 4 Denna symbol visar att en anslutning till Remote Care-servern har upprättats och att en Leica-servicetekniker har åtkomst till bildskärmen. Genom att trycka på denna symbol kan användaren avbryta anslutningen igen.
- 5 Lokal tid
- 6 "**Remote Care**"-symbolen visar att detta instrument är anslutet till Leicas Remote Care-tjänst via en nätverksanslutning.
- 7 "**Process**"-symbolen indikerar att det finns aktiva infärgningsprocesser och att det fortfarande kan finnas rack i utmatningsfacket.
- 8 Den här "**användar**"-symbolen indikerar att instrumentet är i användarläge, vilket möjliggör en förenklad användning av instrumentet, utan lösenord.
- 9 När instrumentet används i "**arbetsledarläge**" indikeras det av denna symbol. Detta läge ger ännu fler användnings- och inställningsmöjligheter för utbildad personal. Åtkomst till detta läge kräver lösenord.
- 10 Anslutning har upprättats mellan HistoCore SPECTRA ST och HistoCore SPECTRA CV.
- 11 Anslutningen mellan HistoCore SPECTRA ST och HistoCore SPECTRA CV har avbrutits.

5.3 Processtatusvisning

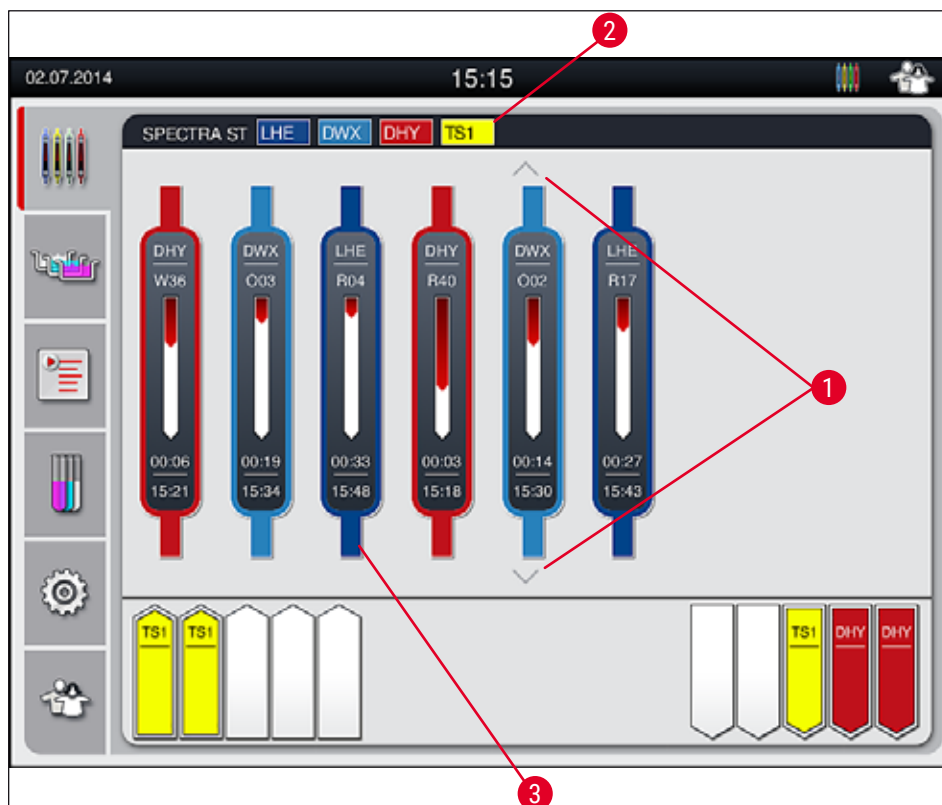


Bild 17

Huvudfönstret (→ "Bild 17") visar alla rack (→ "Bild 17-3") som finns i processen.

**Obs!**

För att visa en aktiv infärgningsprocess visas den övre delen av handtaget i respektive färg (→ "Bild 17-3"). Om antalet rack i processen överstiger det maximala antal som kan visas i huvudfönstret (max. 9) kan du bläddra uppåt och nedåt i skärmområdet med hjälp av (→ "Bild 17-1")-knapparna. Om en knapp är gråmarkerad är den inaktiv och det finns inga andra element i det område som inte visas.

Namnlisten i huvudfönstret (→ "Bild 17-2") indikerar instrumenttypen [SPECTRA ST] och listar de infärgningsprogram som kan startas för tillfället med angivna förkortningar och den färg som har tilldelats racket.



Obs!

Varje pågående infärgningsprocess illustreras med en rackhandtagssymbol. Den visas i samma färg som det faktiska rackhandtaget. Olika typer av informationen visas på handtagssymbolen (→ "Bild 18").

Om HistoCore SPECTRA ST-infärgaren är permanent ansluten till en HistoCore SPECTRA CV automatisk täckglasapplikator kan båda instrumenten användas som arbetsstation. Detta möjliggör ett kontinuerligt arbetsflöde, från infärgningsprocessen till avlägsnandet av de slutförda objektglasen med täckglas. Tiden för överföring till HistoCore SPECTRA CV visas också i processtatusraden (→ "Bild 18-6").

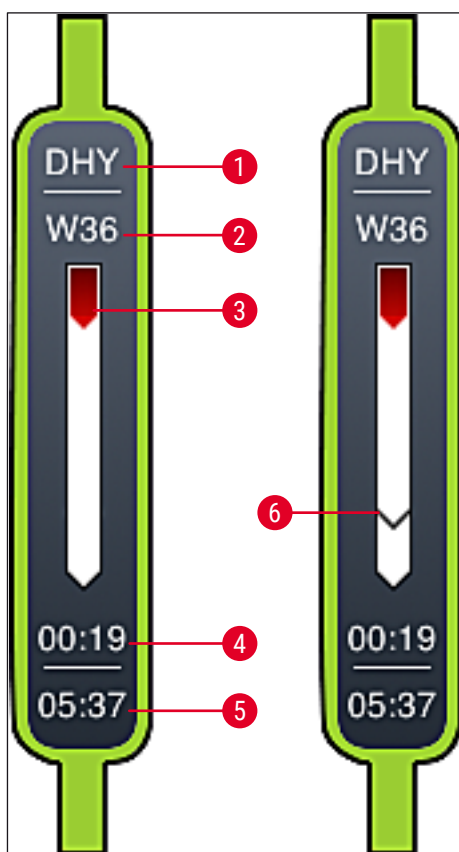


Bild 18

- 1 Programnamnets förkortning
- 2 Rackets aktuella position i instrumentet
- 3 Visning av förloppet för hela infärgningsprocessen
- 4 Förväntad återstående tid för programmet (hh:mm)
- 5 Klockslag vid programmets slut
- 6 Tid för överföring till den automatiska täckglasapplikatorn HistoCore SPECTRA CV vid användning som arbetsstation (→ Sida 109 – 6.6.5 Användning som arbetsstation)

5.4 Visning av facken

Längst ner i huvudfönstret visas status för laddnings- och utmatningsfacken.

- Stationerna med en pil som pekar i riktning in mot instrumentet (→ "Bild 19-1") symboliserar laddningsfacket och stationerna med en pil som pekar bort från instrumentet (→ "Bild 19-2") symboliserar utmatningsfacket, vart och ett med fem positioner.
- Respektive fack öppnas och stängs automatiskt när du trycker på fackknappen (→ "Bild 19-3") eller (→ "Bild 19-4").
- Instrumentet känner automatiskt av om rack sätts i eller tas ur när facket stängs.
- De rack som är placerade i inmatnings- eller utmatningsfacket visas med respektive rackhandtagsfärg och den tilldelade programförkortningen på skärmen.
- Lediga positioner visas i vitt.



Obs!

Laddnings- och utmatningsfacken kan öppnas när fackknappen lyser grönt (→ "Bild 19-4"). När rack transporteras ut ur laddningsfacket eller in i utmatningsfacket lyser knappen för respektive fack röd (→ "Bild 19-3") och facket kan inte öppnas.

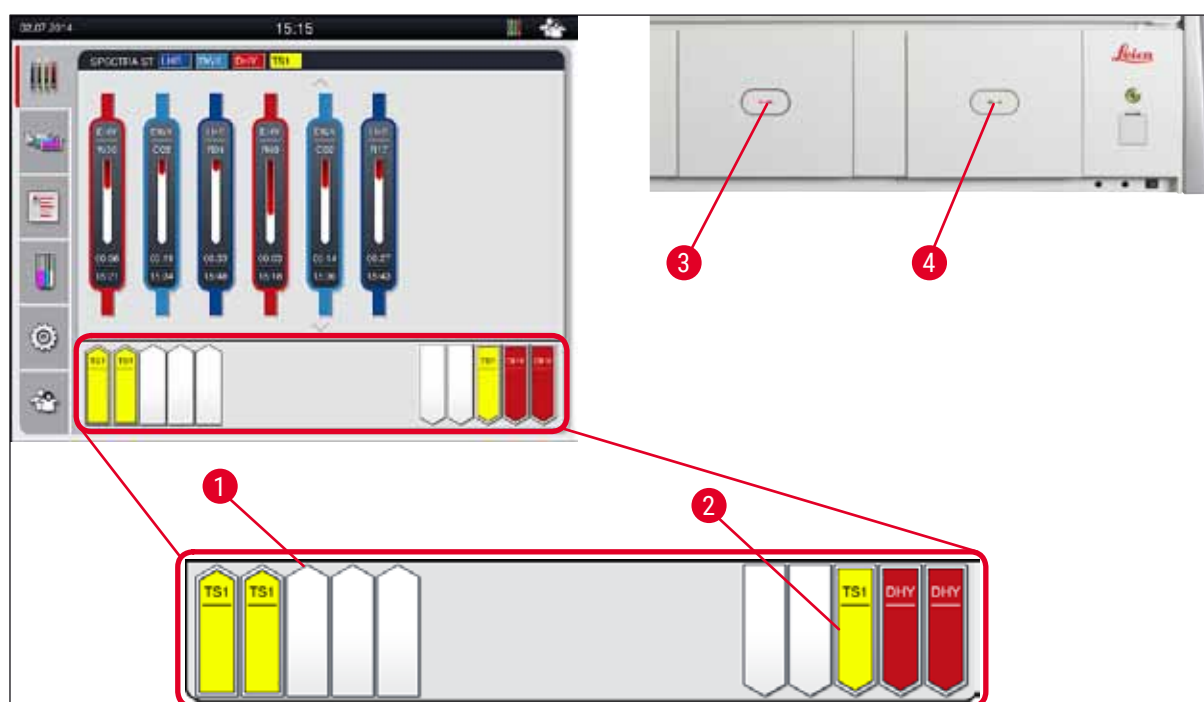


Bild 19



Varning

Se upp när facken öppnas eller stängs. Klämrisk! Facken är motordrivna och öppnas automatiskt när knappen trycks in. Blockera inte fackens rörelseområde.

5.5 Huvudmeny – Översikt

Huvudmenyn är placerad till vänster på skärmen (→ "Bild 15-5") och indelad enligt beskrivningen nedan. Denna meny syns i alla undermenyer och gör att du när som helst kan byta till en annan undermeny.



Processtatusvisningen visar aktuell status för alla pågående rack. Här visas respektive handtag som en symbol på racket i respektive färg.

Denna visning utgör standardvisningen.



Reagensuppställning visar alla stationer i instrumentet ovanifrån. De enskilda reagensstationerna visas med förkortningar av reagensnamnen, stationsnumren och de pågående racken.



När **Programlista** aktiveras visas alla infärgningsprogram som är tillgängliga i instrumentet i listform. I menyn kan du mata in infärgningsprogram på nytt eller ändra dem, ändra deras prioritet samt skapa reagensuppställningen.



När **Reagenslista** aktiveras visas alla tidigare inmatade reagenser i listform. Med hjälp av menyn kan du ändra befintliga eller lägga in nya infärgningsreagenser, t.ex. för integrering av nya infärgningsprogram. Reagenserna måste läggas in innan programmet skapas.



I menyn **Inställningar** kan grundinställningar göras. Här kan språk, datum och tid, ugnstemperatur och andra parametrar anpassas efter lokala behov.



I menyn **Användarinställningar** kan ett individuellt lösenord läggas in, så att inga obehöriga kan göra ändringar i program och reagenslistor (**Arbetsledarläge**).

I **Användarläge** kan instrumentet dock användas utan lösenord.

5.5.1 Knappsatsen

**Obs!**

En knappsats visas (→ "Bild 20") när något måste matas in (t.ex. för att skapa program, redigera program eller för att ange ett lösenord). Användningen sker via pekskärmen.

Observera att knappsatsens beror på vilket språk som är inställt.

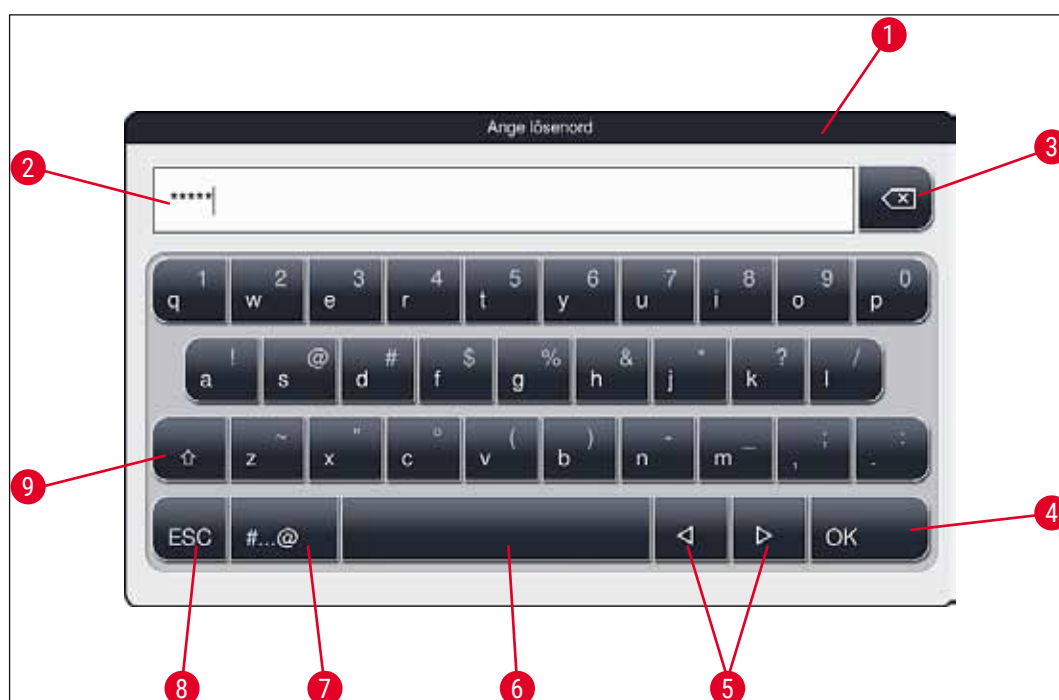


Bild 20

- 1 Namnlist
- 2 Inmatningsfält
- 3 Radera senast inmatat tecken
- 4 Bekräftelse
- 5 Flytta markören åt vänster eller höger
- 6 Mellanslagstangent
- 7 Shifttangent för specialtecken (→ "Bild 21")
- 8 Avbryt (inmatningar sparas inte!)
- 9 Stora/små bokstäver (om man trycker två gånger på tangenten aktiveras versaler permanent, vilket visas genom att tangenten blir röd. Trycker man på tangenten igen aktiveras gemener.)

Knappsats med specialtecken



Bild 21

Ytterligare specialtecken



Bild 22

- För att skriva ett specialtecken eller diakritiskt tecken som inte finns på knappsatsen med specialtecken (→ "Bild 21") håller du in motsvarande normal tangent på knappsatsen.
- Exempel: Om du håller in **a**-tangentsen får du en rad andra alternativ (→ "Bild 22").
- Tryck på önskat tecken för att välja det på det nya, enradiga tangentbordet.



Obs!

Följande teckenbegränsningar gäller för lösenord och beteckningar:

- Reagensnamn: max. 30 tecken/reagensförkortningar: max. 10 tecken
- Programnamn: max. 32 tecken/programförkortningar: max. 3 tecken
- Lösenord: minst 4 och max. 16 tecken

5.6 Användarinställningar



I den här menyn kan motsvarande behörighetsnivå ställas in. Man skiljer mellan:

- Standardanvändare
- Arbetsledare (lösenordsskyddad)
- Servicetekniker (lösenordsskyddad)

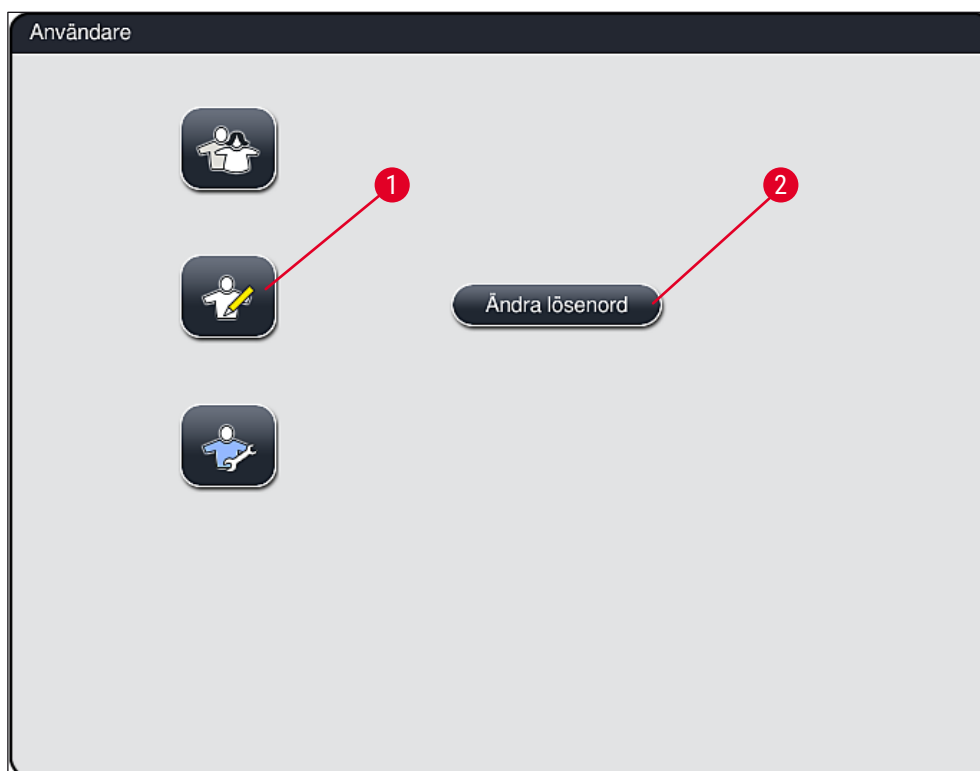


Bild 23

**Standardanvändare:**

Standardanvändaren behöver inget lösenord och kan använda det färdiginställda instrumentet för alla vanliga användningsområden. Ändringar i program och inställningar kan inte göras av denna användargrupp.

**Arbetsledare:**

Arbetsledaren har samma behörighet som standardanvändaren men kan dessutom skapa program och ställa in instrumentet när det tas i drift. Arbetsledarebehörigheten är därför lösenordsskyddad.

Gör så här för att aktivera arbetsledarläget:

1. Tryck på knappen **Arbetsledare** (→ "Bild 23-1").
2. Sedan visas en knappsats (→ "Bild 24") som kan användas för att ange lösenordet.
3. Med **OK** avslutas inmatningen och det angivna lösenordets giltighet kontrolleras.
4. Aktuell användarstatus visas med respektive symbol i statusraden (→ "Bild 16") längst upp till höger.



Bild 24



Obs!

Lösenordet som är inställt från fabrik bör ändras första gången det används.

Gör så här för att ändra arbetsledarens lösenord:

1. För att ändra lösenordet trycker du på knappen **Ändra lösenord** (→ "Bild 23-2") och anger det gamla lösenordet.
2. Ange sedan det nya lösenordet två gånger med hjälp av knappsatsen och bekräfta med **OK**.



Obs!

Ett lösenord måste innehålla minst 4 tecken och får vara högst 16 tecken långt.



Servicetekniker:

Serviceteknikern har åtkomst till systemfiler och kan utföra grundläggande inställningar och tester.

5.7 Grundläggande inställningar



Obs!

Vissa inställningar kan endast ändras i arbetsledarläge, till exempel när instrumentet installeras för första gången (→ Sida 41 – Gör så här för att aktivera arbetsledarläget:).

Om du trycker på kugghjulssymbolen (→ "Bild 25-1") öppnas menyn **Inställningar** (→ "Bild 25"). I denna meny kan grundläggande instrument- och mjukvaruinställningar göras.

- Om du trycker på en symbol (→ "Bild 25-2") väljs den och markeras med rött.
- I bildskärmens högra område visas respektive inställningsfönster.
- De enskilda undermenyerna beskrivs nedan.

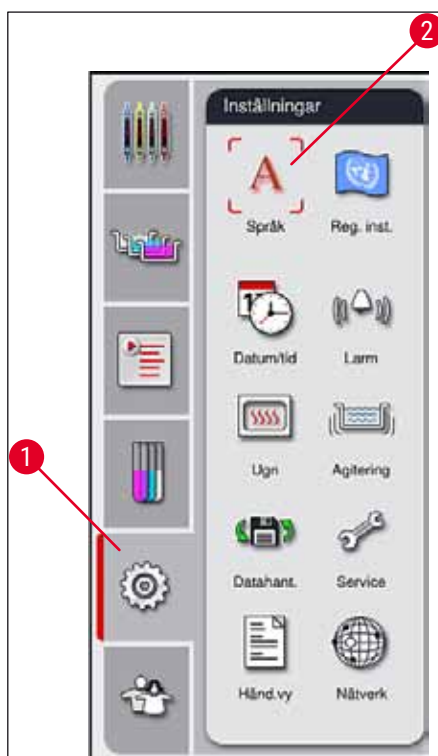


Bild 25

5.7.1 Språkeställningar



- Menyn för språkval visas när du trycker på symbolen för **Språk** (→ "Bild 25-2"). Denna meny innehåller en översikt över alla språk som är installerade på instrumentet. Här kan du välja önskat visningsspråk.

- Välj önskat språk och bekräfta med knappen **Spara**.
- Skärmbilden, informationsmeddelanden och etiketter visas omedelbart på det aktuella konfigurerade språket.



Obs!

En arbetsledare eller Leica-servicetekniker kan lägga till fler språk med hjälp av Import (→ Sida 49 – 5.7.7 Datahantering).

5.7.2 Regionala inställningar



I den här menyn kan grundläggande skärminställningar (→ "Bild 26") konfigureras.

Temperaturenhet

- Ställ in temperaturenheten (→ "Bild 26-1") på Celsius eller Fahrenheit. Dra skjutreglaget till önskad enhet för att göra detta.

Tidsformat

- Tidsvisningen (→ "Bild 26-2") kan ändras från 24-timmarsformat till 12-timmarsformat (a.m. = morgon/p.m. = eftermiddag) med hjälp av skjutreglaget.

Datumformat:

- Konfigurera datumvisningen (→ "Bild 26-3") till internationellt, ISO- eller USA-format genom att trycka på motsvarande radioknapp bredvid formatet.
- Den aktiva inställningen markeras med en röd ram (→ "Bild 26-4").
- Tryck på knappen **Spara** för att spara inställningarna.

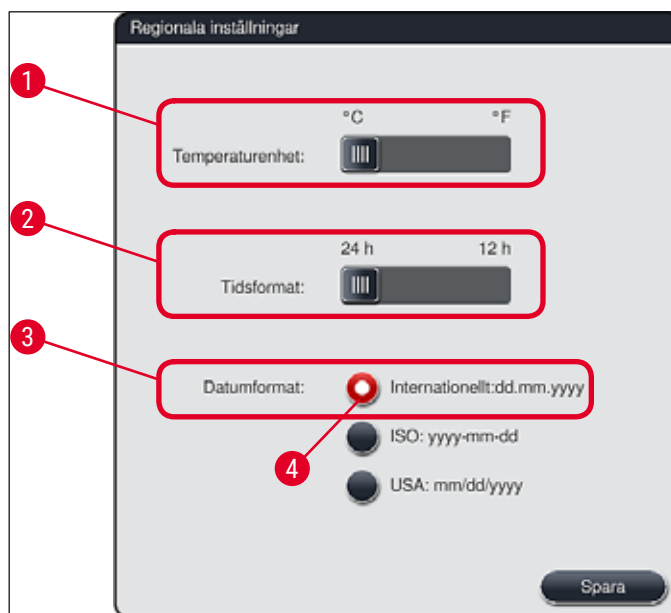


Bild 26

5.7.3 Datum och tid



I den här menyn (→ "Bild 27") kan du ställa in aktuellt datum och lokal tid genom att vrida på de enskilda hjulen.



Obs!

I 12-timmarsvisningen anges dessutom a.m. (förmiddag) och p.m. (eftermiddag) under timsiffrorna, så att en korrekt inställning kan göras.

Inställningen av tid och datum får inte avvika med mer än 24 timmar från systemtiden som är inställd från fabrik.

- Tryck på knappen **Spara** för att spara inställningarna.



Bild 27

5.7.4 Meny för larmljud – fel- och signalljud



I den här menyn kan du välja larm- och ljudsignaler, justera volymen och kontrollera att de fungerar (→ "Bild 28-6").

När menyn har öppnats visas aktuell inställning av larm- och ljudsignaler.

5 Användning



Varning

- När instrumentet startas spelas en larmsignal upp. Om så inte är fallet får instrumentet inte användas, detta för att skydda proverna och användaren. Kontakta i så fall ansvarig Leica-service.
- De akustiska larmsignalerna kan inte avaktiveras. Minsta konfigurerbara värde för volymen är 2. Det högsta värdet är 9.

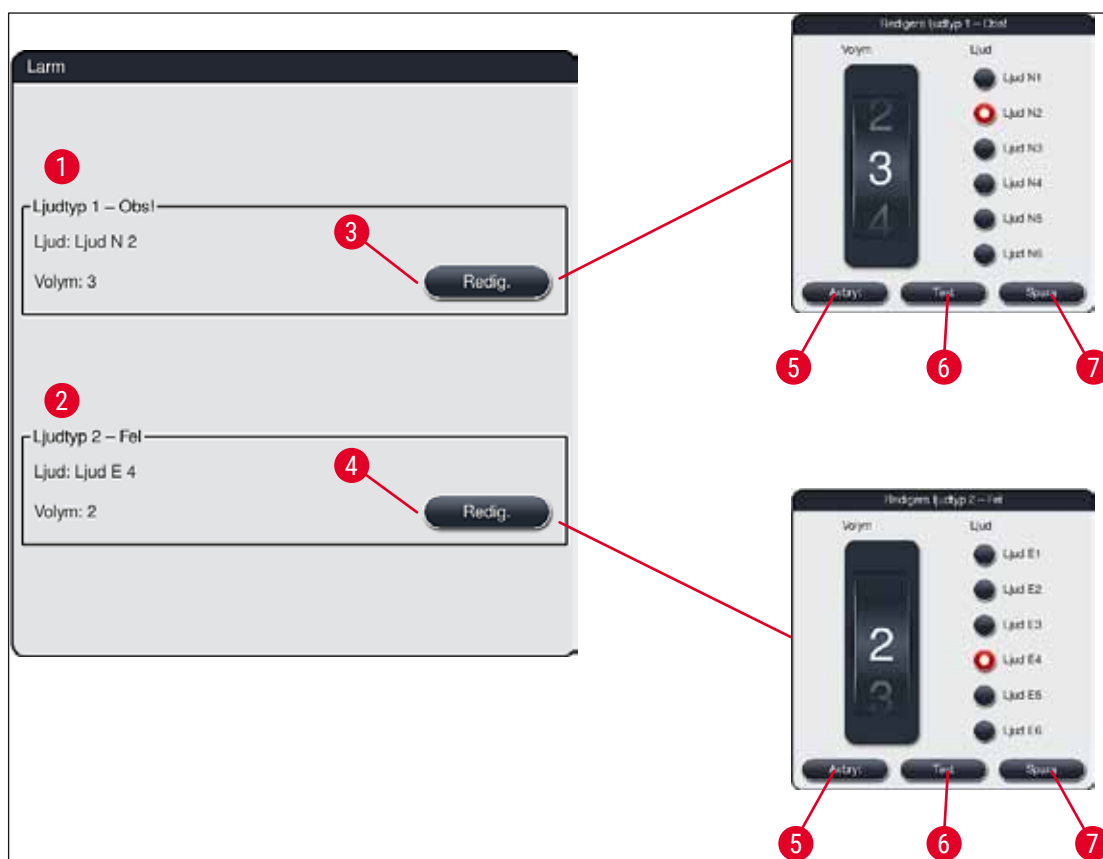


Bild 28



Ljudtyp 1 – Obs! (→ "Bild 28-1")

Ljudsignaler avges när varningsmeddelanden eller anvisningar visas på skärmen. Det går att välja en av sex olika ljudsignaler. För att ändra inställningarna trycker du på knappen **Redig.** (→ "Bild 28-3"). Volymen kan ställas in stegvis (0 till 9) med hjälp av hjulet.



Ljudtyp 2 – Fel (→ "Bild 28-2")

Larmsignaler hörs när ett felmeddelande visas på bildskärmen. Detta kräver att användaren genast ingriper. Det går att välja en av sex olika ljudsignaler. För att ändra inställningarna trycker du på knappen **Redig.** (→ "Bild 28-4").

- Med hjälp av hjulet **Volym** kan larmsignalernas volyminställning anpassas. För larmtyperna finns det sex olika ljudsignaler att välja mellan. Knappen **Test** (→ "Bild 28-6") kan användas för att lyssna på de olika ljuden.
- Tryck på knappen **Spara** (→ "Bild 28-7") för att spara inställningarna. Använd knappen **Avbryt** (→ "Bild 28-5") för att stänga fönstret utan att bekräfta inställningarna.

5.7.5 Ugnsinställningar



Ugnens temperatur och driftläge kan konfigureras i menyn för ugnsinställningar (→ "Bild 29"). När menyn har öppnats visas de aktuella ugnsinställningarna.



Varning

Ändringar av ugnstemperaturen kan leda till att infärgningsresultatet påverkas. Om ugnstemperaturen är för högt inställd kan det påverka provet.

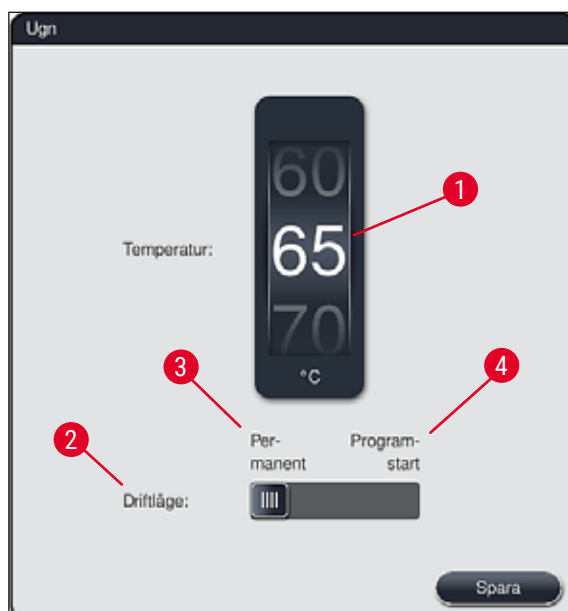


Bild 29

Temperatur:

Ugnens måltemperatur kan ställas in i steg om 5 °C från 40 °C till 70 °C med hjälp av hjulet (→ "Bild 29-1").

Driftläge:

För driftläget (→ "Bild 29-2") kan du välja mellan:

- uppvärmning av ugnen i samband med att ett program (→ "Bild 29-4") startas (**Programstart**) eller
- start av ugnen i samband med att instrumentet (→ "Bild 29-3") startas (**Permanent**).
- Inställningen ändras genom att skjutreglaget ställs i motsvarande läge.
- Inställningarna sparas genom att man trycker på knappen **Spara**.



Obs!

- För att ändringarna ska sparas måste det lösenordsskyddade användarläget **Arbetsledare** användas. I det vanliga användarläget är knappen **Spara** grå och därmed inaktiv.
- Om Leica-infärgningsprogram har integrerats i reagensuppställningen (→ Sida 76 – 5.9.9 Skapa reagensuppställningen) kan inte temperaturinställningen ändras. Se informationen som medföljer Leica Reagent Kit för standardtemperaturen.



Varning

- Det rekommenderas att **Permanent** används som inställning för att undvika upprepade väntetider till följd av ugnens uppvärmning.
- På grund av omgivningsvillkoren kan den inställda ugnstemperaturen ibland avvika med –8 °C till +5 °C från det inställda värdet. För särskilt känsliga preparat bör den inställda temperaturen därför väljas med hänsyn till detta (t.ex. den inställda temperaturen sänkas med 5 °C och ugnsmomentet förlängas motsvarande).

5.7.6 Rörelsehastighet – uppåt-/nedåtrörelse (agitering)



I menyn **Agitering** (→ "Bild 30") kan hastigheten för rackhållarens uppåt-/nedåtrörelse justeras. Rackhandtagen ligger på hållarens ram som rör sig uppåt och nedåt under infärgningsprocessen (agitering).

När menyn har öppnats visas den aktuella inställningen.



Obs!

Agiteringen bidrar till att de påfyllda reagenserna blandas ordentligt under pågående infärgningsprocess. För att rörelsehastigheten (agitering) ska kunna justeras måste det lösenordsskyddade användarläget **Arbetsledare** användas.


Hastighet:

Genom att rotera hjulet **Hastighet** (→ "Bild 30-1") kan du ställa in agiteringsfrekvensen (provernas rörelse) i fem steg (0 = agitering inaktiverad, 5 = högsta hastighet). Högre värden innebär en högre agiteringsfrekvens.

Inställningarna sparas genom att man trycker på knappen **Spara**.

**Obs!**

- Agiteringshastigheten för användardefinierade program kan bara ändras om inget validerat Leica-program är aktivt. Hjulet är i så fall svart och aktivt.
- Agiteringen är förinställd (fast) för validerade Leica-program (se bruksanvisningen till Leica Reagent Kit). Hjulet är då grått och inaktivt.

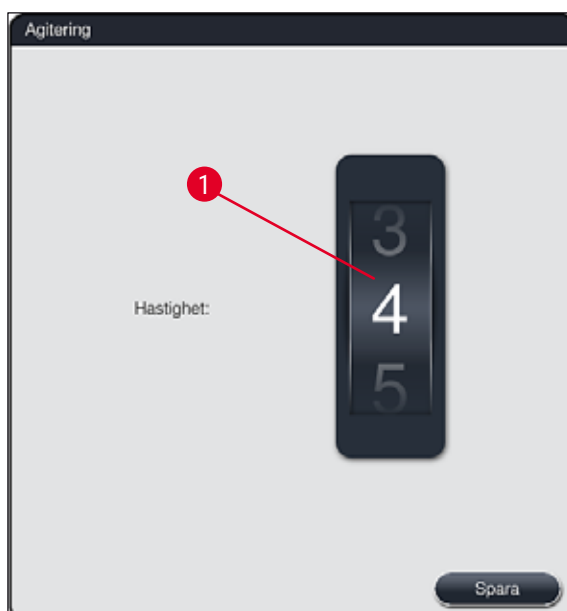**Bild 30****5.7.7 Datahantering**

I menyn **Datahantering** (→ "Bild 31") kan du exportera och importera data, inställningar och händelseloggar (loggfiler). Ett USB-minne som ansluts till ett av USB-uttagen på instrumentets framsida (→ "Bild 1-7") krävs för alla exporter och importer (förutom fjärrjukvaruuppdateringar).

**Obs!**

Det anslutna USB-minnet måste vara formaterat med FAT32.

Användarexport (→ "Bild 31-1")

Funktionen **Användarexport** används för att spara information på ett anslutet USB-minne (→ "Bild 1-7"):

- En **zip**-fil med händelseloggarna från de 30 senaste arbetsdagarna och **RHS**-information i CSV-format.
- En krypterad **lpkg**-fil som innehåller alla användardefinierade program samt reagenslistan.



Obs!

lpkg-filen kan inte öppnas och visas av användaren.



Bild 31

Användardefinierade program och reagenslistan kan överföras till en annan HistoCore SPECTRA ST med samma konfiguration med hjälp av funktionen **Import** (→ "Bild 31-3").

- Medan dataexporten pågår visas informationsmeddelandet **Användardata exporteras....**
- Informationsmeddelandet **Export lyckades** informerar användaren om att dataöverföringen är slutförd och att säker borttagning av USB-minnet kan ske.
- Om informationsmeddelandet **Export misslyckades** visas har ett fel inträffat (t.ex. har USB-minnet tagits bort för tidigt). Utför i så fall exporten på nytt.



Obs!

Det rekommenderas att man gör en export av data när instrumentet har installerats, så att denna data är åtkomliga vid en eventuell ominstallation.

Serviceexport (→ "Bild 31-2")

Funktionen **Serviceexport** används för att spara **lpkg**-filer på ett anslutet USB-minne (→ "Bild 1-7"):

Den krypterade **lpkg**-filen innehåller ett fördefinierat antal händelseloggar samt följande:

- Information från reagenshanteringssystemet (**RHS**)
- Reagensdata
- Användardefinierade programnamn
- Annan servicerelaterad data

**Obs!**

lpkg-filen kan inte öppnas och visas av användaren.

- När man trycker på knappen **Serviceexport** visas en urvalsmeny där användaren kan välja önskat antal dataposter som ska exporteras (5, 10, 15 eller 30 dagar).
- Tryck på **OK** för att bekräfta valet.
- Medan dataexporten pågår visas informationsmeddelandet **Servicedata exporteras....**
- Informationsmeddelandet **Export lyckades** informerar användaren om att dataöverföringen är slutförd och att säker borttagning av USB-minnet kan ske.
- Om informationsmeddelandet **Export misslyckades** visas har ett fel inträffat (t.ex. har USB-minnet tagits bort för tidigt). Utför i så fall exporten på nytt.

Import (→ "Bild 31-3")



Obs!

- Det lösenordsskyddade användarläget **Arbetsledare** krävs för import.
- Om det finns en eller flera filer i dialogrutan kan du använda filnamnet för att ange datumet då filen sparades och instrumentets serienummer. Välj filen som ska importeras och bekräfta meddelandet som följer på bildskärmen med **OK**.
- Instrumentets mjukvara ser till att inga befintliga Leica-program och -reagenser skrivs över när data importeras (program och reagenser). Dubbletter av förkortningar för program och reagenser samt dubbletter av reagensnamn ersätts automatiskt av en platshållare, alternativt läggs en platshållare till i namnet. Om det finns objektglas med dubblerade handtagsfärger får det importerade programmet färgen vit.

Handtagsfärg objektglas:

- Om ett program som importeras innehåller ett objektglas vars handtagsfärg redan har ett tilldelat program, byts denna handtagsfärg ut till vit vid importen.

Förkortning av programnamn:

- Om ett program ska importeras vars förkortning redan används för ett befintligt ersätter mjukvaran automatiskt denna förkortning med en platshållare. Det långa programnamnet förblir detsamma.
- Förkortning av det befintliga programmet: PAS
- Ändrad förkortning av det importerade programmet: +01

Reagensnamn och förkortning av reagensnamn:

- Om en reagens importeras vars namn och/eller förkortning redan används lägger mjukvaran automatiskt till en platshållare ("_?").
- Befintligt reagensnamn: 100 % alkoholdehyd 1 S
- Ändrat reagensnamn på den importerade reagensen: 100 % alkoholdehyd 1 S_?
- Befintlig förkortning: 100Dhy 1S
- Ändrad förkortning av den importerade reagensen: 100Dhy 1+01

Importerade program och reagenser kan integreras i reagensuppställningen, även med platshållare. Du kan byta namn på dem senare.



Varning

När du importerar data från ett USB-minne skrivs alla användardefinierade program och reagenser som redan finns på instrumentet över och ersätts av den data som importeras. Det går inte att markera endast enstaka filer för import! Leica rekommenderar att denna funktion endast används för att importera säkerhetskopior eller för att installera ytterligare en HistoCore SPECTRA ST med samma parametrar.

Funktionen **Import** gör det möjligt att importera data från den krypterade listan med program och reagenser, ytterligare validerade Leica-program och ytterligare språkpaket från ett anslutet USB-minne.

Denna data kan också användas för att förse en annan HistoCore SPECTRA ST med samma data med hjälp av funktionen Export/Import.

- För att göra detta sätter du i USB-minnet med tidigare exporterad data i ett av USB-uttagen på instrumentets framsida (→ "Bild 1-7").
- Välj sedan funktionen **Import**. Data importeras.
- Ett informationsmeddelande bekräftar att dataimporten har lyckats.

**Varning**

I allmänhet behöver en ny reagensuppställning skapas när funktionen **Import** används (och när ett nytt Leica-infärgningsprogram importeras). Alla Leica-reagenser som finns i instrumentet kommer att förfalla och måste ersättas med ett nytt, motsvarande Leica Reagent Kit.

Mjukvaruuppdatering (→ "Bild 31-4")

Om det finns mjukvaruuppdateringar och ytterligare språkpaket tillgängliga kan dessa köras eller installeras på följande sätt i användarläget **Arbetsledare** eller av en servicetekniker som är auktoriserad av Leica.

Utföra en mjukvaruuppdatering

1. Kopiera filen för mjukvaruuppdateringen till ett USB-minne som är formaterat med FAT32.
2. Sätt i USB-minnet i ett av de två USB-uttagen (→ "Bild 1-7") på instrumentets framsida.
3. Byt därefter till menyn **Datahantering** och klicka på **Mjukvaruuppdatering** (→ "Bild 31-4").
4. Mjukvaruuppdateringen startar.

✓ Ett informationsmeddelande informerar användaren om att uppdateringen har utförts.

**Varning**

Om uppdateringen inte kan genomföras får användaren information om detta. Kontakta Leica-service om orsaken till detta inte är uppenbar.

**Obs!**

Labororiespecifika inställningar raderas inte när mjukvaran till HistoCore SPECTRA ST uppdateras. Efter en mjukvaruuppdatering måste det kontrolleras att instrumentet fungerar korrekt.

Fjärrmjukvaruuppdatering (→ "Bild 31-5")

Den här funktionen gör det möjligt att utföra mjukvaruuppdateringar via ett anslutet nätverk. För att detta ska kunna göras måste instrumentet vara integrerat i underhålls- och diagnossystemet Leica Remote Care.

- Så snart det finns en ny mjukvaruversion för denna instrument laddas den ner automatiskt. När nedladdningen är färdig blir knappen (→ "Bild 31-5") svart och aktiveras.
- När du trycker på knappen **Fjärrmjukvaruuppdatering** startar den automatiska uppdateringsprocessen när instrumentet är i viloläge.

**Obs!**

- Ett informationsmeddelande på bildskärmen informerar användaren om att en mjukvaruuppdatering är tillgänglig.
- Mjukvaran HistoCore SPECTRA ST uppdateras; labororiespecifika inställningar raderas inte.

5.7.8 Serviceuttag



Den här menyn (→ "Bild 32") ger Leica-auktoriserade servicetekniker åtkomst till tekniska funktioner för diagnos och reparationer av HistoCore SPECTRA ST.

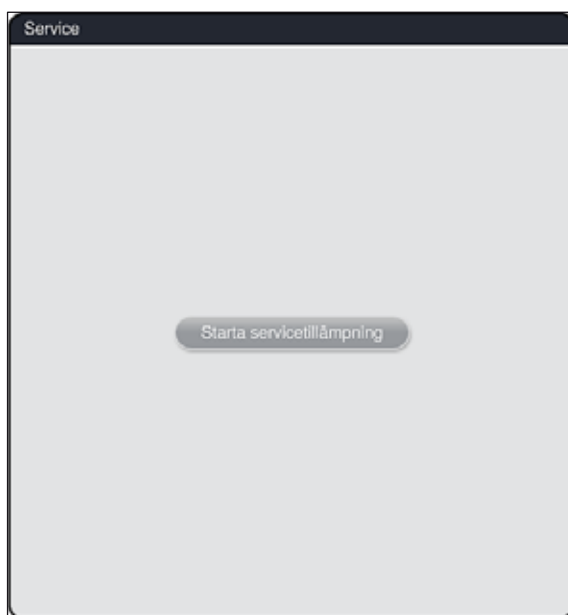


Bild 32

**Obs!**

Åtkomsten till servicemjukvaran är spärerad för alla andra användargrupper.

5.7.9 Händelsevisning



För varje dag som instrumentet har varit påslaget skapas en ny protokollfil. Öppna denna fil genom att välja filen **DailyRunLog** i händelsevisningen (→ "Bild 33").

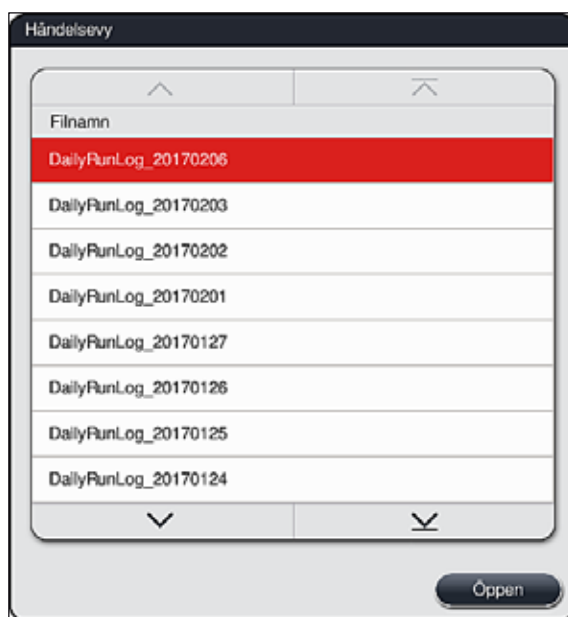


Bild 33

- I händelsevisningen kan du välja en händelselogg från en lista med tillgängliga loggar och öppna den genom att trycka på knappen Öppna.



Obs!

Filnamnet kompletteras med datumet då filen skapades i ISO format, vilket gör det lättare att organisera filerna. Filen skapas på det språk som är inställt.

- Alla händelseposter börjar med en tidsstämpel (→ "Bild 34-1"), som visar det datum och klockslag då posten skapades.
- Namnlisterna i händelsevisningen visar också serienumret (→ "Bild 34-2") och den aktuella installerade mjukvaruversionen (→ "Bild 34-3") för HistoCore SPECTRA ST.
- Du kan bläddra uppåt och nedåt i listan och loggfilen med hjälp av piltangenterna (→ "Bild 34-4"). Genom att trycka på den vänstra knappen kan du bläddra genom händelsevisningen sida för sida. Om du trycker på den högra knappen bläddrar du till början eller slutet av händelsevisningen.

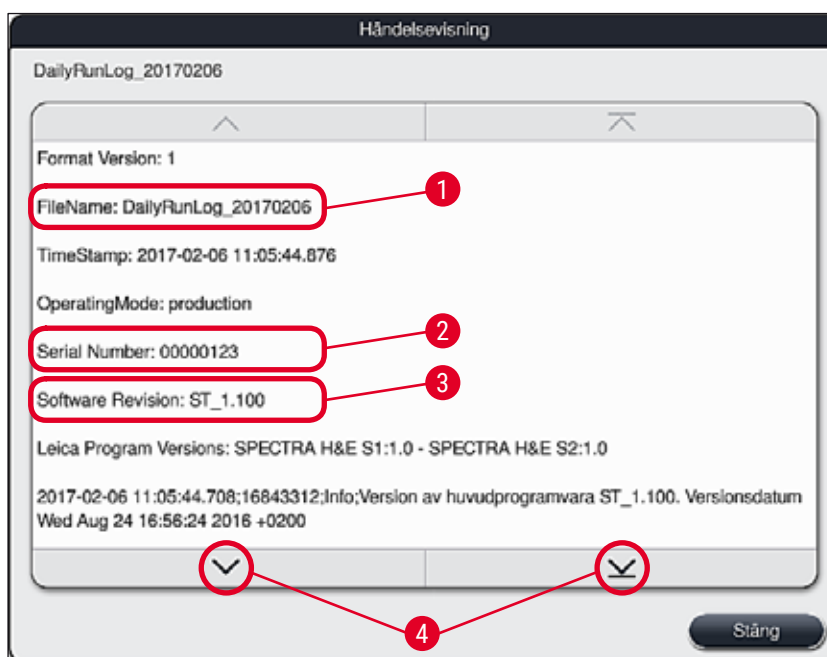


Bild 34

5.7.10 Nätverksinställningar



Använd den här menyn för att konfigurera nätverksparametrar så att instrumentet kan anslutas till ett nätverk.



Obs!

För att kunna utföra instrumentdiagnoser och mjukvaruuppdateringar har Leicas tekniska service tillgång till instrumentspecifika tekniska data via ett servicenätverk (Remote Care). Användaren kan avsluta en befintlig Remote Care-anslutning genom att trycka på motsvarande symbol (→ "Bild 16-4").



Varning

- Anslutning av instrumentet till ett tillgängligt nätverk, t.ex. i samband med första installationen, får endast utföras av en servicetekniker auktoriserad av Leica i samarbete med den lokala IT-avdelningen.
- Remote Care använder sig av nätverksprotokollet TCP/IP, på användarnivån https (128-bits kryptering).
- Om nätverksanslutningen avbryts (t.ex. om nätverkskabeln dras ur) måste en kontrollerad nedstängning av instrumentet utföras. (→ Sida 31 – 4.5 Starta och stänga av instrumentet) Nätverkskabeln ska sedan sättas i igen och instrumentet startas om.

5.8 Reagenslista



Öppna reagenslistan genom att trycka på knappen här bredvid. Listan visar alla definierade reagenser i alfabetisk ordning.

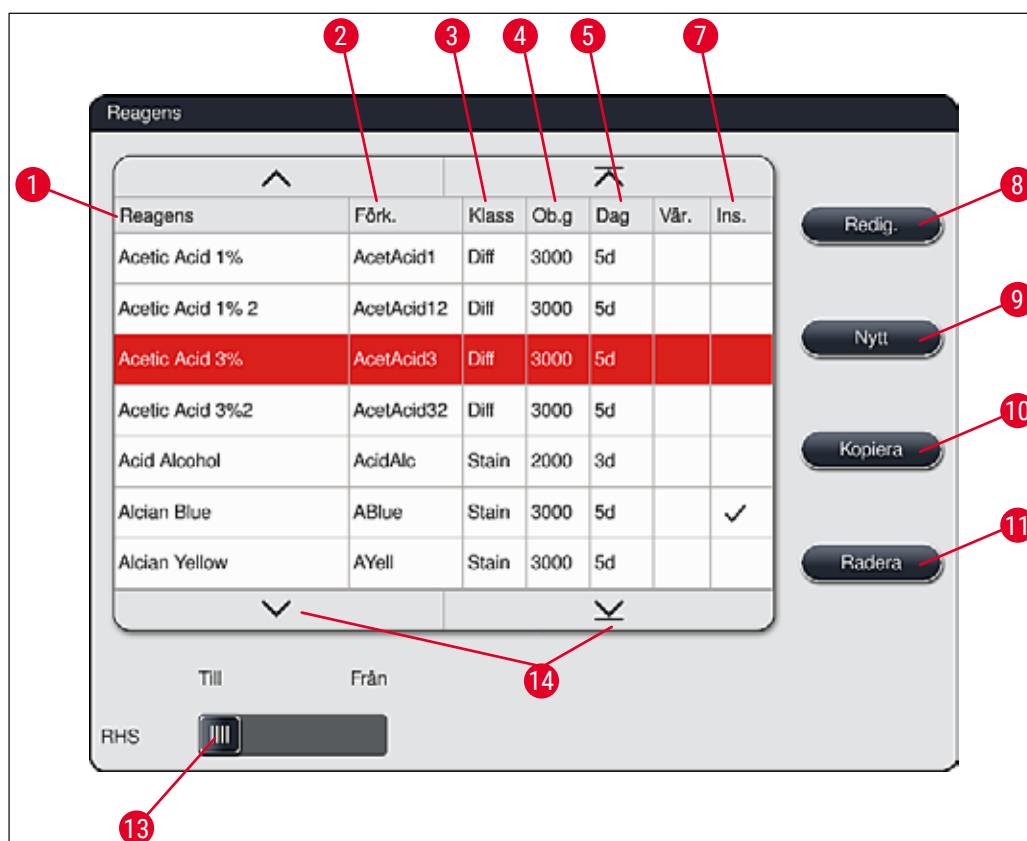


Bild 35

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Reagensnamn | 8 | Redigera vald reagens |
| 2 | Reagensnamnets förkortning | 9 | Skapa en ny reagens |
| 3 | Processklass | 10 | Kopiera vald reagens |
| 4 | Maximalt antal objektglas | 11 | Radera vald reagens |
| 5 | Maximal användningstid | | |
| 7 | Mellanlägg för specialinfärgning ja/nej | 13 | Aktivera/inaktivera RHS |
| | | 14 | Med hjälp av piltangenterna kan du bläddra genom reagenslistan |

**Obs!**

- När instrumentet installeras innehåller reagenslistan endast reagenser från de förinstallerade Leica-programmen.
- Vid behov kan ytterligare reagenser läggas till i reagenslistan eller deras egenskaper ändras.
- För att skapa eller redigera en reagens måste läget "Arbetsledare" användas. I läget **Användare** är det endast möjligt att visa reagensdata.
- Reagenser som har integrerats i reagensuppställningen i aktiva program kan inte raderas från reagenslistan.

**Varning**

- **RHS**-skjutreglage: **Till – Från** (→ "Bild 35-13") gör det möjligt att slå av och på reagenshanteringssystemet = **RHS** (→ Sida 91 – 6.3 Reagenshanteringssystem (RHS)). Systemet styr övervakningen av reagensförbrukningen. Vi rekommenderar att **RHS** alltid är aktiverat och att instruktionerna för att ersätta en reagens följs. Det går inte att inaktivera reagenshanteringen för reagenser i Leica-infärgningskit.
- Om de föreskrivna intervallen inte följs kan infärgningskvaliteten påverkas negativt. **RHS** fungerar tillförlitligt endast om användaren har lagt in data korrekt i förväg.
- Tillverkaren tar inget ansvar för infärgningsresultaten om reagensdata har matats in felaktigt.
- **RHS**-data för de reagenser som är validerade av Leica samt deras beteckningar kan inte redigeras av användaren.

Skapa en ny reagens eller kopiera en reagens**Obs!**

- En ny reagens kan skapas med knappen **Nytt** (→ "Bild 35-9") eller **Kopiera** (→ "Bild 35-10").
- För att skapa, kopiera eller redigera en reagens måste arbetsledarläget användas. I läget **Användare** är det endast möjligt att visa reagensdata.

- För att lägga till en ny reagens i reagenslistan trycker du på knappen **Nytt** (→ "Bild 35-9").
- Ett inmatningsfönster öppnas (→ "Bild 38") där du kan skapa den nya reagensen.

Bild 38

Följande parametrar kan anges:

- Reagensnamn:**
- Tryck på knappen **Reagensnamn** (→ "Bild 38-1") och använd knappsatsen på skärmen för att ange ett unikt reagensnamn som inte har använts tidigare. Du kan använda upp till 30 tecken (inklusive mellanslag).
- Förkortning:**
- Tryck på knappen **Förkortning** (→ "Bild 38-2") och använd knappsatsen på skärmen för att ange en unik förkortning för reagensen (max. 10 tecken inklusive blanksteg).
- Max objektglas:**
- Hjulet (→ "Bild 38-3") används för att konfigurera det maximala antalet objektglas som kan bearbetas med den här reagensen innan ett reagensbyte begärs. Med hjälp av hjulet kan värden från 1 till 3999 väljas.
- Max dagar:**
- Ställ in det maximala antalet dagar (→ "Bild 38-4") som reagensen får befinna sig i instrumentet genom att vrida på hjulet. Värden från 1 till 99 kan anges.
- Mellanlägg:**
- Om en reagenskyvett är utrustad med ett mellanlägg för specialinfärgning (→ Sida 88 – 6.2.1 Förbereda och hantera reagenskyvetter) för att möjliggöra en mindre reagensvolym, går det endast att använda ett rack för 5 objektglas i kyvetten. För att göra detta måste du dra skjutreglaget till **Ja** (→ "Bild 38-5").
 - Användning av ett rack för 30 objektglas i den här kyvetten är nu inaktiverad.



Varning

Om du vill använda mellanlägget för specialinfärgning i en eller flera reagenskyvetter måste du dra skjutreglaget till läget **Ja**. Om skjutreglaget inte är korrekt inställt för den berörda reagenskyvetten kan det leda till att ett rack för 30 objektglas används i kyvetten, vilket orsakar allvarliga fel på utrustningen och möjlig förlust av preparat.

Processklass:

- Reagenserna måste tilldelas till processklasser (→ "Bild 38-6") (→ Sida 61 – 5.8.3 Processklasser) eftersom detta, tillsammans med prioritering av program, är avgörande för den automatiska beräkningen av de enskilda positionerna i reagensuppställningen (→ Sida 75 – 5.9.8 Prioritera program för att skapa reagensuppställningen).
- Spara inmatningarna med knappen **Spara** (→ "Bild 38-7") eller stäng inmatningsfönstret med knappen **Avbryt** (→ "Bild 38-8") utan att spara ändringarna.



Obs!

Det går inte längre att ändra processklassen i efterhand när man har sparat första gången. Reagensen kan bara raderas och skapas på nytt, eller kopieras och sedan ändras.

5.8.1 Kopiera en reagens



Obs!

Om en reagens med olika parametrar används i HistoCore SPECTRA ST kan en befintlig reagens kopieras.

- Markera den reagens som ska kopieras i reagenslistan (→ "Bild 35") genom att trycka lätt på den. Tryck sedan på knappen **Kopiera** (→ "Bild 35-10").
- Ett inmatningsfönster öppnas (→ "Bild 38") där du kan skapa den nya reagensen.
- Använd det föreslagna reagensnamnet eller skriv över det med ett nytt reagensnamn.
- Den föreslagna förkortningen kan användas eller skrivas över med en ny förkortning.
- Ändra parametrarna för reagenserna vid behov på motsvarande sätt eller använd de befintliga.
- Spara inmatningarna med knappen **Spara** (→ "Bild 38-7") eller stäng inmatningsfönstret med knappen **Avbryt** (→ "Bild 38-8") utan att spara ändringarna.

5.8.2 Ändra RHS-data för en reagens



Obs!

Om du ska göra ändringar i **RHS-data** (**Max objektglas** och/eller **Max dagar**) måste du utföra följande steg så att ändrade inställningar visas korrekt i stationsinformationen (→ Sida 97 – Bild 75).

- Markera den reagens som ska ändras i reagenslistan (→ "Bild 35") genom att trycka lätt på den. Tryck sedan på knappen **Redigera** (→ "Bild 35-8").
- Använd hjulen för att ange nya värden för **Max objektglas** (→ "Bild 38-3") och/eller **Max dagar** (→ "Bild 38-4") och bekräfta ändringarna med **Spara**.
- Observera efterföljande informationsmeddelande och bekräfta med **OK**.
- Öppna sedan reagensuppställningen och tryck på den tillhörande reagensstationen för att välja den.
- I stationsinformationen som visas, tryck på knappen **Uppdatera reagens** (→ "Bild 75-10").
- Visningen av stationsinformationen stängs, **RHS-data** har sparats.

5.8.3 Processklasser



Varning

Processklasser måste tilldelas korrekt. Annars finns det en risk för fördröjda arbetsflöden i infärningsprocesserna samt avvikande eller bristfälliga infärningsresultat.

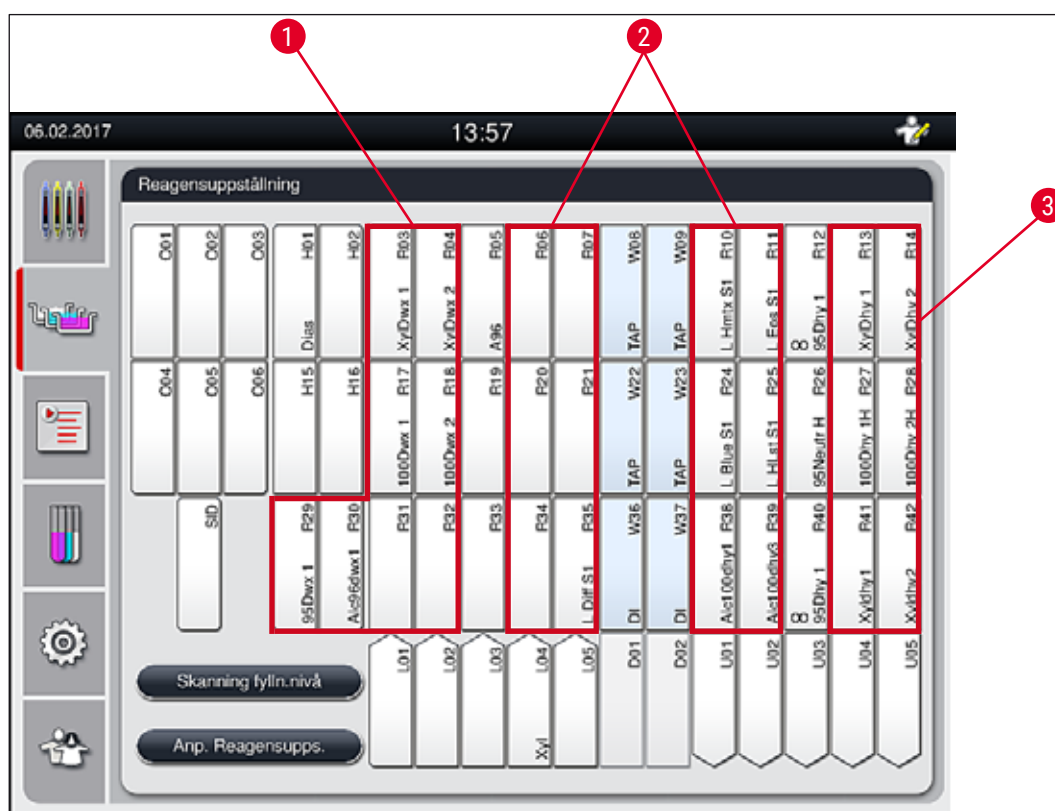


Bild 39

- 1 Den föredragna zonen för avväxningsreagenser är vänster sida av reagensuppställningen.
- 2 Den föredragna zonen för infärningslösningar eller differentieringslösningar är de två raderna till vänster och höger om sköljvattenstationerna.
- 3 Den föredragna zonen för dehydratiserande reagenser är höger sida av reagensuppställningen.

**Obs!**

Det går inte att programmera två på varandra följande sköljvattensteg (sköljvattensteg till destillerat vatten eller omvänt). Om denna ordningsföljd ska gälla för programstegen måste ett av stegen definieras som reagens med processklassstilldelning (t.ex. neutralisering).

Processklass	Beskrivning	Exempel på reagenser
Avvaxning (Dewaxing)	Lösningsmedel som avlägsnar paraffinet eller som hör till den efterföljande sjunkande alkoholserien, i början av ett infärgningsprogram.	- Xylen - Xylensubstitut - Sjunkande alkoholserie: 100 %, 95 %, 70 % alkohol
Neutraliserande (Neutralizing)	- Reagenser som har ingen eller endast liten påverkan på färgbeläggningen respektive färgutvecklingen och som är närmast pH-neutrale. - Exempel: Steg med destillerat vatten före ett infärgningssteg.	- Destillerat (avjoniserat)/ färskvatten (inte i kranvattenstationer!) - Thinner med destillerat vatten - Vattenhaltiga alkohollösningar (t.ex. 70 % etanol)
Infärgning (Staining)	- Infärgningslösningar - Betning - Oxidationsmedel (t.ex. PAS-infärgningens perjodsyra)	- Alla infärgningslösningar - Betning och oxidationsmedel
Differentiering (Differentiating)	- Reagenser som avlägsnar överflödig färg från produkten. - Reagenser som är nödvändiga för färgutvecklingen eller ett färgomslag.	- HCL-lösning (alkohol- eller vattenhaltig) - Ättiksyra - Ammoniakvatten - Scott's Tap water - Bluing Solution - Blue Buffer - Litiumkarbonat - Alkoholer (olika koncentrationer)
Dehydratiserande (Dehydrating)	- Reagenser i den stigande alkoholserien, i slutet av ett infärgningsprogram. - Efterföljande steg med lösningsmedel (xylen eller xylensubstitut) i slutet av ett infärgningsprogram, för förberedelse av täckglasappliceringen.	Dehydrering: - Stigande alkoholserie: 70 %, 95 %, 100 % alkohol Förberedelse av täckglasappliceringen: - Xylen - Xylensubstitut
Ingen klass (no class)	Reagenser som inte kräver någon särskild tilldelning i reagensuppställningen	

**Varning**

Observera följande när du förbereder täckglasappliceringen:

- Det lösningsmedel som används i slutet av programmet och i den följande bearbetningen måste vara kompatibelt med monteringsmedlet.

**Obs!**

Det är viktigt att tilldelningen till processklasserna är korrekt för att kunna beräkna en optimal reagensuppställning och för att undvika långa transportsträckor och -tider.

Följande grundläggande riktlinjer för att skapa en reagensuppställning automatiskt bör följas:

- Överföringen från det vänstra till det högra kyvettfältet ska om möjligt ske via en sköljvattenstation.
- Program som inte innehåller något steg med en sköljvattenstation använder sig av den torra överföringsstationen för denna överföring.
- Infärgningsreagenser som kräver ett efterföljande sköljvattensteg ska placeras nära sköljvattenkyvetterna (→ "Bild 39").
- Reagenser som har tilldelats **Ingen klass** som processklass kan placeras i vilken position som helst när reagensuppställningen skapas automatiskt.
- I stället för tilldelningen **Ingen klass** rekommenderar vi att dessa reagenser tilldelas till processklassen **Different.** eller **Neutralis.** så att angränsande stationer i reagensuppställningen kan tas med i beräkningen för programstegsserier.

5.9 Infärgningsprogram



Listan över infärgningsprogram som är installerade på HistoCore SPECTRA ST kan öppnas med hjälp av knappen **Program**.

Det finns två olika typer av infärgningsprogram:

- Förinstallerade Leica-infärgningsprogram (→ Sida 66 – 5.9.2 Leica-infärgningsprogram (förinstallerade))
- Användardefinierade infärgningsprogram (→ Sida 69 – 5.9.4 Användardefinierade infärgningsprogram)

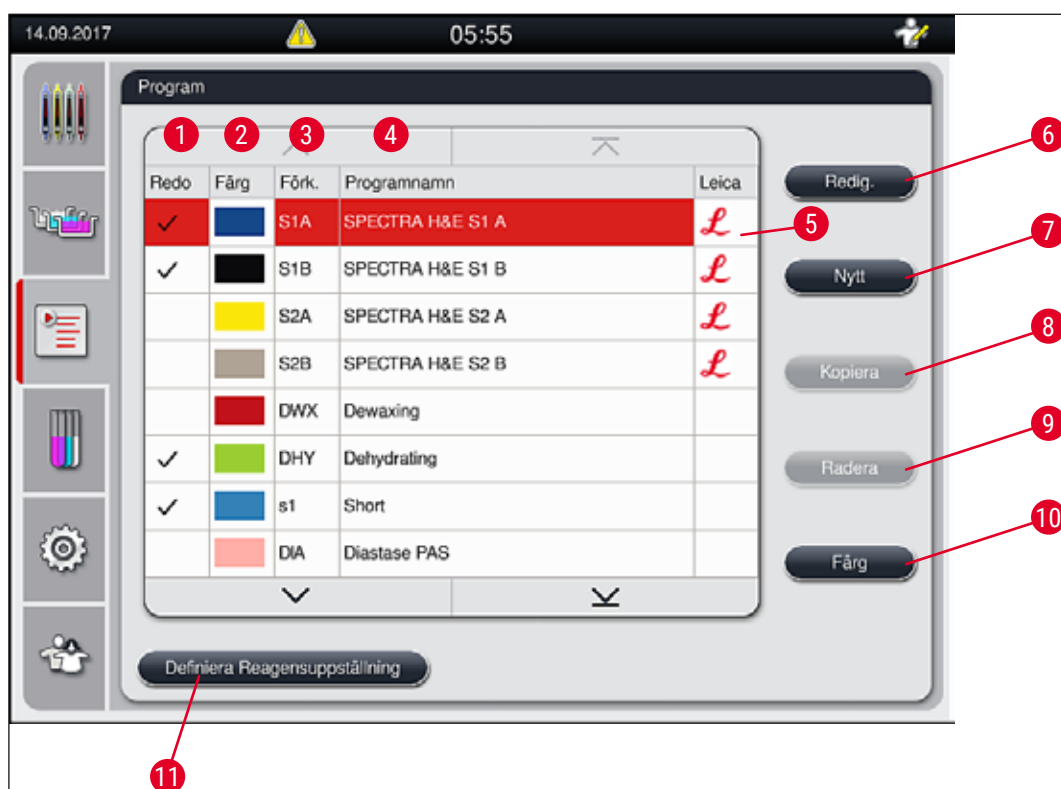


Bild 40

- 1 En bock i den här kolumnen innebär att programmet tas med i den aktuella reagensuppställningen.
- 2 Tilldelad programfärg
- 3 Programförkortning
- 4 Programnamn
- 5 Förinstallerat Leica-program
- 6 Redigera program
- 7 Skapa nytt program
- 8 Kopiera valt program
- 9 Radera valt program
- 10 Tilldela valt program en färg
- 11 Definiera reagensuppställning

5.9.1 Tilldela ett infärgningsprogram en rackhandtagsfärg

**Obs!**

Varje program måste tilldelas en rackhandtagsfärg.
För att tilldela rackhandtagsfärger till program krävs användarläget **Arbetsledare**.

- För att tilldela en rackhandtagsfärg till ett program trycker du på motsvarande program i programlistan (→ "Bild 40") för att markera det.
- Om du trycker på knappen **Färg** (→ "Bild 40-10") visas ett urvalsfält (→ "Bild 41") där du kan tilldela det valda programmet en rackhandtagsfärg.



Bild 41

**Obs!**

Alla tillgängliga färger visas i (→ "Bild 41"). Om det står en förkortning i färgfältet har ett program redan tilldelats den färgen.
Om en redan tilldelad färg väljs visas en dialogruta med en säkerhetsfråga om den befintliga tilldelningen ska upphävas. Detta kan bekräftas med **OK** eller avbrytas med **Avbryt**.

- Välj en färg som ännu inte har tilldelats genom att trycka på den.
- Med **Spara** tilldelar du färgen och stänger dialogrutan.
- Med **Avbryt** stängs dialogrutan utan att ändringarna tillämpas.

**Obs!**

Om det inte finns tillräckligt många tillgängliga rackhandtag i en färg kan ett rackhandtag i vitt, den så kallade **JOKERFÄRGEN**, användas.
När du lägger in ett rack med ett vitt handtag öppnas ett programvalsfönster där ett färgprogram som är aktiverat i reagensuppställningen måste tilldelas till det vita handtaget (endast för detta program).
När det valda programmet är avslutat slochnar denna tilldelning igen.

5.9.2 Leica-infärgningsprogram (förinstallerade)

Beteckningar på reagenskiten



Obs!

I följande avsnitt förenklas HistoCore SPECTRA ST-infärgningssystemen och programmen som tillverkas av Leica i enlighet med användargränssnittet och namnges med beteckningen på Leica Reagent Kit och Leica-infärgningsprogrammen.

Nya Leica-infärgningsprogram kan beställas från den ansvariga Leica-försäljningsavdelningen.



Varning

Bruksanvisningen som medföljer Leica Reagent Kit innehåller viktig information om förinställda värden, loggar och nödvändiga tillägg till reagensuppställningen som måste följas noggrant. Följ bruksanvisningen.

För att importera nya Leica-infärgningsprogram följer du instruktionerna i kapitel (→ Sida 49 – 5.7.7 Datahantering). Nya Leica-program läggs till i den befintliga programlistan (→ Sida 63 – 5.9 Infärgningsprogram). Ingen data raderas.

- Leica-infärgningsprogram förinstalleras på fabriken, där deras funktion och infärgningsegenskaper testas. Programmen garanterar en jämn infärgningskvalitet för ett angivet antal objektglas.
- Leica-infärgningsprogram markeras med ett kursivt Leica-*L* (→ "Bild 40-5") i kolumnen längst till höger.



Bild 42

**Obs!**

- Med Leica-infärgningsprogram måste det specifika Leica Reagent Kit användas.
- Leica-infärgningsprogram kan inte kopieras, vilket innebär att ett Leica-infärgningsprogram endast kan läggas till i programlistan en gång.
- De enskilda programstegen i Leica-infärgningsprogrammet kan inte visas, redigeras, kopieras eller raderas.
- En rackhandtagsfärg (→ "Bild 42-3") kan tilldelas till Leica-infärgningsprogrammet.
- Om Leica-infärgningsprogrammet tillåter det kan ugnsstegets aktivering eller inaktivering i Arbetsledarläget (→ "Bild 42-1") och **utmatningsstation** eller **överföringsstation** (→ "Bild 42-2") kan definieras som sista steg. **Överföringsstation** visas endast om HistoCore SPECTRA ST används med en HistoCore SPECTRA CV som arbetsstation.
- Reagenser (t.ex. xylen, alkohol) som används i ett Leica-infärgningsprogram kan inte raderas.

**Varning**

- Om ett steg för avlägsnande av paraffin inte är det första steget i Leica-infärgningsprogrammet får ugnsstegets (→ "Bild 42-1") (→ "Bild 43-1") inte aktiveras, eftersom det kan leda till att preparaten förstörs!
- Den fastställda ugnstemperaturen för Leica-infärgningsprogrammen används för användardefinierade infärgningsprogram och kan inte anpassas individuellt.

Flera installationer och användning av Leica-infärgningsprogram**Obs!**

Vissa av Leica-infärgningsprogrammen kan användas parallellt med olika inställningar (infärgningsintensitet, ugnssteg) (→ Sida 68 – 5.9.3 Anpassa Leica-H&E-färgningsprogram). De här programmen har förinstallerats två gånger i programlistan (→ "Bild 40"). Förkortningarna för dessa dubbelt förinstallerade hematoxylin-eosin-infärgningsprogram från Leica är S1A och S1B, eller S2A och S2B. Detta för att lättare kunna skilja dem åt. Dessa program innehåller exakt samma programsteg. Om två identiska program integreras i reagensuppställningen måste även två identiska Leica-infärgningspaket skannas och fyllas på.

5.9.3 Anpassa Leica-H&E-färgningsprogram



Obs!

- Med Leica-H&E-färgningsprogrammet kan infärgningsintensiteten för hematoxylin och eosin justeras i Arbetsledarläget. Andra Leica-infärgningsprogram tillåter inga justeringar av infärgningsintensiteten.
- Om Leica-infärgningsprogrammet tillåter det kan ugnssteget aktiveras eller inaktiveras (→ "Bild 43-1").
- För Leica-infärgningsprogram kan överföring till en ansluten automatisk täckglasapplikator HistoCore SPECTRA CV väljas som sista steg om man väljer **Överföringsstation** (→ "Bild 43-4") eller **Utmatare** och överför det redan infärgade racket till utmatningsfacket (→ "Bild 43-3").
- Justeringar och ändringar av Leica-infärgningsprogram och användardefinierade program kan endast konfigureras om inga infärgningsprocesser är aktiva och alla rack har avlägsnats från instrumentet.

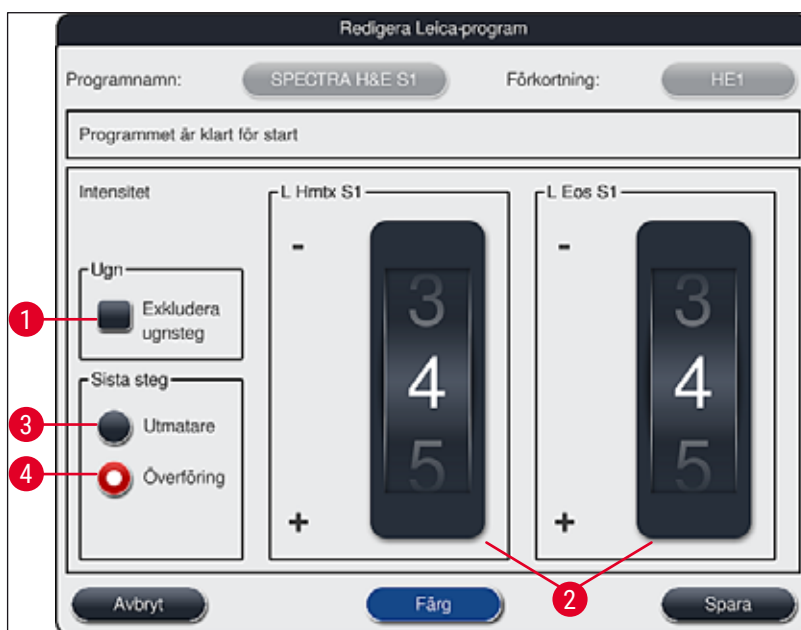


Bild 43



Varning

När användaren har justerat infärgningsintensiteten måste infärgningsresultaten kontrolleras med ett kontrollobjektglas med representativa vävnadsprover innan inställningarna används för att utföra kliniska diagnoser av patientpreparat.

Välj Leica-programmet i programlistan och tryck på **Redigera** (→ "Bild 40-6"). En dialogruta öppnas där du kan konfigurera inställningarna.

- Ställ in värdena för infärgningsintensitet genom att vrida på hjulen (→ "Bild 43-2"). Lägre numeriska värden ger en ljusare infärgningsintensitet; högre numeriska värden ger en mörkare infärgningsintensitet.

- En handtagsfärg måste tilldelas till programmet (→ Sida 65 – 5.9.1 Tilldela ett infärgningsprogram en rackhandtagsfärg).
- Använd **Spara** för att spara inställningarna och stänga dialogrutan.
- Använd **Avbryt** för att stänga dialogrutan utan att spara ändringarna.

5.9.4 Användardefinierade infärgningsprogram



Varning

- Leica kan varken kontrollera eller ansvara för användardefinierade program.
- Användaren måste testa dessa infärgningsprogram i labbet med de olika reagenser som används och de inställda temperaturerna. För detta ändamål måste infärgningsresultatet först kontrolleras med ett provförlopp (testsnitt) innan programmet används på patientprover för klinisk diagnostik.



Obs!

Ett nytt program kan skapas med knapparna **Nytt** (→ "Bild 44-1") och **Kopiera** (→ "Bild 44-2"). För att skapa, kopiera eller redigera ett program måste läget "Arbetsledare" användas. I läget **Användare** kan man endast visa programstegen.

5.9.5 Skapa eller kopiera ett nytt infärgningsprogram

- Tryck på **Nytt** (→ "Bild 44-1") i listvyn för program.



Bild 44

5 Användning

- Ett fönster för ett nytt program öppnas (→ "Bild 45").

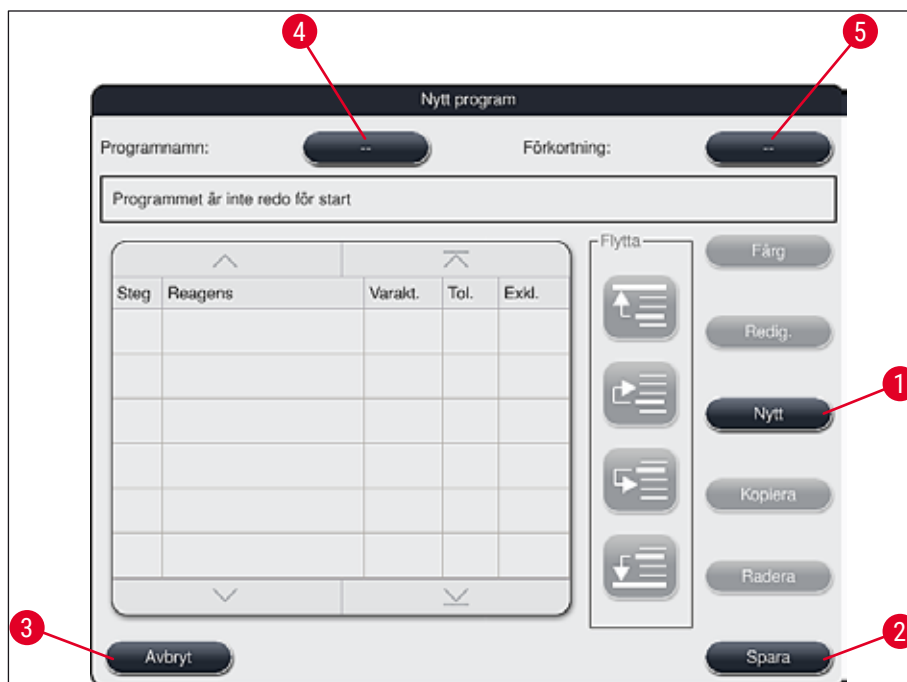


Bild 45

Upptill i detta fönster är två tomma tangenter avbildade som är avsedda för programnamnet och dess förkortning.

- Tryck på knappen -- bredvid **Programnamn**. beteckning (→ "Bild 45-4"). Ett inmatningsfönster med knappsats visas.
- Ange programnamnet och bekräfta namnet med **OK**.

Gör på samma sätt som ovan för **Förkortning** (→ "Bild 45-5").



Obs!

För att skapa ett nytt infärgningsprogram lägger du till flera programsteg efter varandra till programmet.

Obs! Användardefinierade program kan inte sparas med beteckningen **SPECTRA** som programnamn. Ett informationsmeddelande informerar användaren om detta om hen försöker spara. Det går att spara först när ett annat programnamn har angetts.

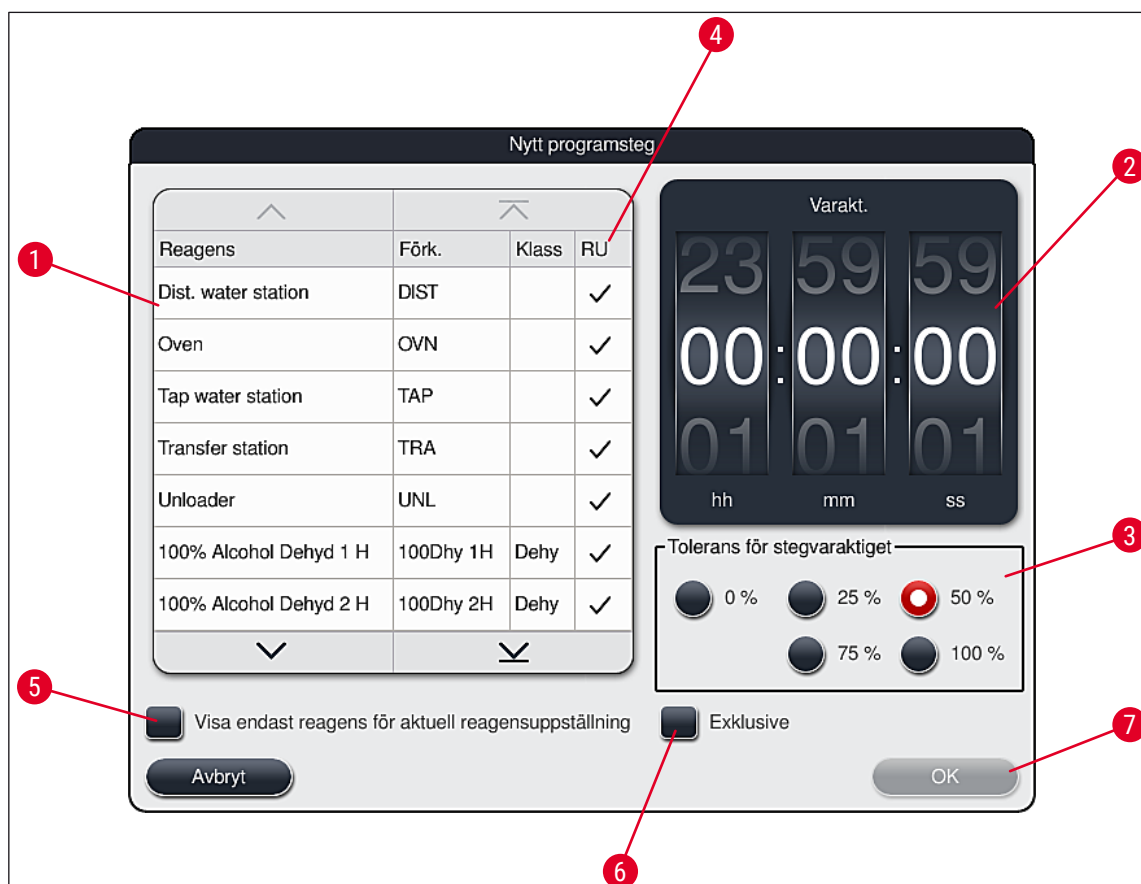


Bild 46

- När ett nytt program har skapats trycker du på knappen **Nytt** (→ "Bild 45-1").
- Ett fönster öppnas där du kan ange programsteget (→ "Bild 46").
- De reagenser som redan har definierats av användaren visas i en lista till vänster (→ "Bild 46-1"). Om du väljer en reagens markeras den.
- Vrid på hjulen (→ "Bild 46-2") till höger för att ange reaktionstiden (hh/mm/ss) för preparaten i reagensen.
- Det giltiga inställningsområdet sträcker sig från 1 sek. upp till 23 tim. 59 min. och 59 sek.
- Här konfigureras den tillåtna **Toleransen** (→ "Bild 46-3") för steget. Om ett exakt programsteg krävs som inte tillåter någon tidsmässig utökning av den angivna tiden måste toleransen ställas in på 0 %. Toleransen kan väljas i steg om 25 % upp till ett maximalt överskridande med 100 %, dvs. instrumentet kan vid behov låta steget ta dubbelt så lång tid som den angivna tiden.

**Obs!**

De enskilda programstegens varaktighet består av de programmerade stegtiderna plus de inställda toleranserna. Om toleranser > 0 % ställs in för ett program kan återstående stationstider och programmets preliminära återstående tid komma att överskridas.

Kopiera ett program

**Obs!**

Om ett befintligt program med andra parametrar ska användas kan programmet kopieras.

- Markera det program som ska kopieras i listvyn (→ "Bild 44") genom att trycka lätt på det. Tryck sedan på **Kopiera** (→ "Bild 44-2").
- Ett inmatningsfönster öppnas (→ "Bild 45") där du kan skapa det nya programmet.
- Använd det föreslagna programnamnet eller skriv över det med ett nytt programnamn.
- Ange därefter en förkortning.
- Ändra/redigera de enskilda stegen eller lägg till nya programsteg efter behov (→ "Bild 45-1") (→ Sida 72 – 5.9.6 Infoga eller kopiera ett nytt programsteg).
- Spara inmatningarna med knappen **Spara** (→ "Bild 45-2") eller stäng inmatningsfönstret med knappen **Avbryt** (→ "Bild 45-3") utan att spara ändringarna.

5.9.6 Infoga eller kopiera ett nytt programsteg

Infoga ett nytt programsteg

**Obs!**

En hög tidstoleransinställning rekommenderas om det inte förväntas leda till några negativa effekter på infärgningsresultatet. Det innebär nämligen att instrumentet ges större utrymme att tidsmässigt stämma av steg i flera program som pågår samtidigt.

- Om det finns en bock i kolumnen **RU** (→ "Bild 46-4") innebär det att reagensen redan är integrerad i reagensuppställningen.
- För att endast visa reagenser som redan används aktivt i reagensuppställningen markerar du radioknappen **Visa endast reagens för aktuell reagensuppställning** (→ "Bild 46-5").
- Om kryssrutan **Exklusiv** (→ "Bild 46-6") är markerad kan den valda reagensen endast användas för det skapade programmet och inte i andra program.
- Programstegets inmatning slutförs med **OK** (→ "Bild 46-7").
- Allt efter behov kan ytterligare programsteg läggas till på samma sätt tills samtliga infärgningsprocessteg i programmet är avbildade.

**Obs!**

Ett program måste alltid avslutas med ett sista målstationssteg. Som sista steg måste utmatningsfacket eller, om HistoCore SPECTRA ST är permanent ansluten som arbetsstation med en HistoCore SPECTRA CV, överföringsstationen väljas.

Ett varningsmeddelande (→ "Bild 47") indikerar att det inte går att spara programmet utan att ange målstationen som det sista steget.



Bild 47

Kopiera ett programsteg**Obs!**

När ett nytt program skapas eller ett befintligt ändras kan ett programsteg med redan inställda parametrar kopieras och anpassas, om reagensen förekommer mer än en gång i reagenslistan.

- Markera respektive programsteg genom att trycka lätt på det och sedan trycka på knappen **Kopiera** (→ "Bild 48-5").
- Fönstret **Redigera program** (→ "Bild 48") öppnas.
- Om en reagens har valts som endast förekommer en gång informerar ett informationsmeddelande användaren om detta. I detta fall måste en annan reagens väljas för programsteget.
- Parametrarna (Tolerans, Varaktighet och Exklusiv) för det ursprungligen valda programsteget bibehålls.
- Ändra vid behov parametrarna för programsteget på motsvarande sätt eller använd de befintliga och tryck på knappen **OK**.
- Programsteget placeras i slutet av programmet.
- Sortera om programsteget enligt beskrivningen i (→ Sida 74 – 5.9.7 Sortera om programsteg).

5 Användning

5.9.7 Sortera om programsteg

- När ett programsteg väljs blir det rödmarkerat. Nu är **Flytta**-knapparna (→ "Bild 48-1") (→ "Bild 48-2") (→ "Bild 48-3") (→ "Bild 48-4") aktiva.

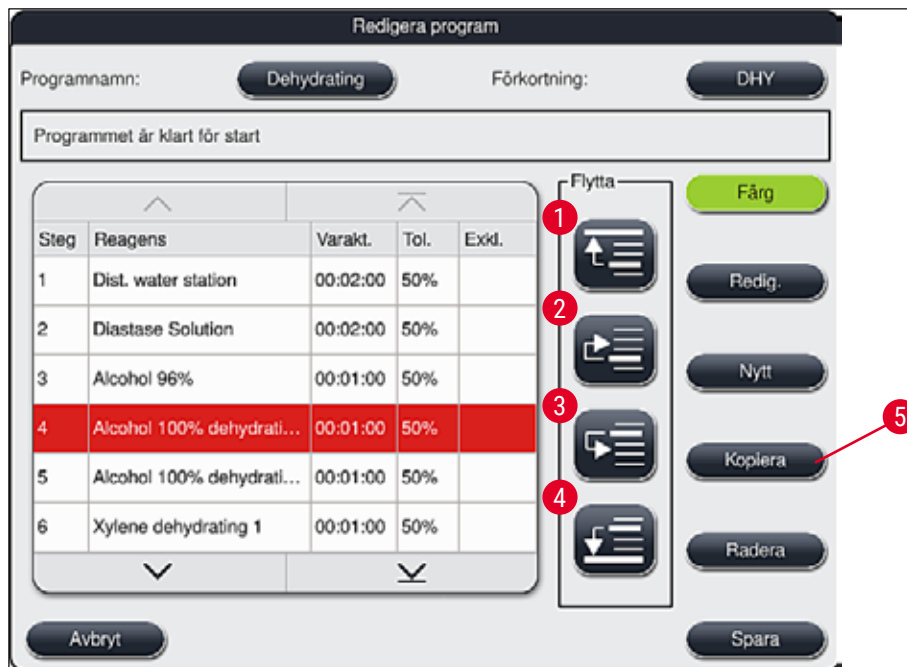


Bild 48

- Tryck för att flytta det valda programsteget till första raden.
- Tryck för att flytta det valda programsteget en rad uppåt.
- Tryck för att flytta det valda programsteget en rad nedåt.
- Tryck för att flytta det valda programsteget till sista raden.



Varning

Om ett ugnssteg används som första programsteg får det under inga omständigheter finnas något lättantändligt lösningsmedel i laddningsfackets laddningsstation.

Det kan nämligen medföra brand i ugnen och leda till brännskador på användaren, förlust av prover och skador på instrument och utrustning.

- Ändringarna kan sparas med knappen **Spara** (→ "Bild 48"). Om man trycker på knappen **Avbryt** raderas ändringarna.

5.9.8 Prioritera program för att skapa reagensuppställningen



Bild 49

När alla önskade infärgningsprogram har matats in måste reagensuppställningen genereras. För att göra detta går du tillväga på följande sätt:

- I det första steget anger **arbetsledaren** vilka program som ska inkluderas i reagensuppställningen. Programmen aktiveras med hjälp av radioknapparna (→ "Bild 49-1").
- Programmets position avgör dess prioritet för integreringen i reagensuppställningen.

**Obs!****Prioritet:**

- Det är bara positioner för användardefinierade program som kan flyttas. Leica-infärgningsprogram står alltid på de översta positionerna i reagenslistan.
- De användardefinierade programmen med låga positionsnummer är lättare att inkludera än program med höga positionsnummer när reagensuppställningen skapas.
- Det rekommenderas att användardefinierade program med hög provgenomströmning placeras i början av programlistan, i anslutning till Leica-infärgningsprogrammen.

Om ett infärgningsprogram ska tilldelas en högre eller lägre prioritet markerar du programmet i listan och flyttar det högre upp eller längre ner i listan med hjälp av **Flytta**-knapparna:

- Programmet flyttas till högst upp i listan (→ "Bild 49-2")
 - Programmet flyttas en rad uppåt (→ "Bild 49-3")
 - Programmet flyttas en rad nedåt (→ "Bild 49-4")
 - Programmet flyttas till sist i listan (→ "Bild 49-5")
- Reagensuppställningen måste skapas om utifrån den nya prioriteringsordningen (→ Sida 76 – 5.9.9 Skapa reagensuppställningen).

5.9.9 Skapa reagensuppställningen



Obs!

Placeringen av reagensstationerna i instrumentet beräknas med hjälp av de prioriterade infärgningsprogrammen (→ Sida 75 – 5.9.8 Prioritera program för att skapa reagensuppställningen).

I samband med det tas hänsyn bland annat till att

- Leica-infärgningsprogram inkluderas först,
- infärgnings- och differentieringslösningar placeras så nära kranvattenkyvetterna som möjligt,
- programprioriteringen och processklasstilldelningen beaktas,
- sekventiella processreagenser måste placeras i närheten av varandra.

- Välj de program som ska ingå i reagensuppställningen genom att trycka på knappen **Definiera Reagensuppställning** (→ "Bild 44-3").
- Markera och ange prioritet för respektive program. Tryck sedan på knappen **Utför Reagensuppställning** (→ "Bild 49-6") eller på knappen **Avbryt** för att återgå till val av program.



Varning

Läs det informationsmeddelande (→ "Bild 50") som visas efter det att knappen **Definiera Reagensuppställning** har tryckts in. Tryck på **Fortsätt** för att visa resultatet av beräkningen i reagensuppställningen.

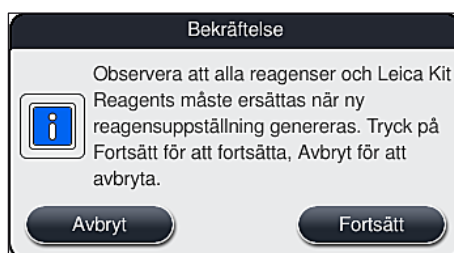


Bild 50

**Obs!**

- Om fler program har valts än vad som kan integreras i reagensuppställningen informeras användaren i fönstret **Resultat av reagensuppställninggenerering** (→ "Bild 51"). Program som har integrerats markeras med en bock i kolumnen **Redo** (→ "Bild 51-1").
- För program som inte kan integreras anges orsaken (→ "Bild 51-2") i kolumnen **Ej redo, orsak** (→ "Bild 51-3").
- Observera att listan måste kontrolleras ända till slutet.

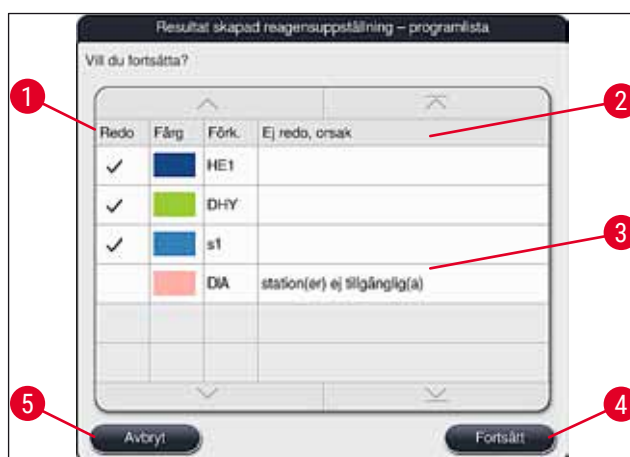


Bild 51

- Tryck på knappen **Fortsätt** (→ "Bild 51-4") för att gå vidare eller på knappen **Avbryt** (→ "Bild 51-5") för att återgå till val av program (→ "Bild 49").

**Varning**

Även bruksanvisningen som medföljer Leica Reagent Kit måste läsas innan Leica-reagenser skannas!

5.9.10 Fylla på reagenser efter det att reagensuppställningen har skapats

**Obs!**

- Skapa reagensuppställningen och fortsätt enligt beskrivningen (→ Sida 76 – 5.9.9 Skapa reagensuppställningen).
- Om reagensuppställningen som visas ska sparas utan konfigurering av reagenspåfyllning trycker du på knappen **Spara** (→ "Bild 52-3"). Den sparade reagensuppställningen kan sedan öppnas i reagensuppställningsmenyn. Vid behov kan ytterligare justeringar göras i den här menyn (→ Sida 83 – 5.9.11 Anpassa en reagensuppställning). Fyllningen av reagenskyvetten kan också konfigureras så att den sker vid en önskad tidpunkt med hjälp av reagensuppställningsmenyn (→ Sida 93 – 6.4 Stationsinformation).
- Efter att mjukvaran har beräknat reagensuppställningen med hjälp av de prioriterade programmen visas en översikt över resultaten på skärmen (→ "Bild 52").



Obs!

- Om inga Leica-program har integrerats i reagensuppställningen ser skärmen (→ "Bild 52") annorlunda ut än den som visas här. I detta fall kan reagenserna fyllas på enligt beskrivningen (→ Sida 80 – Fylla på reagenser).
- Om Leica-program har integrerats i reagensuppställningen måste reagensen **95 % alkoholdehyd 1** först dupliceras. Den berörda stationen är markerad med en blå ram i reagensuppställningen (→ "Bild 52-1").
- Reagensen **95 % alkoholdehyd 1** som ska dupliceras visas med förkortningen **95Dhy1** i reagensuppställningen.

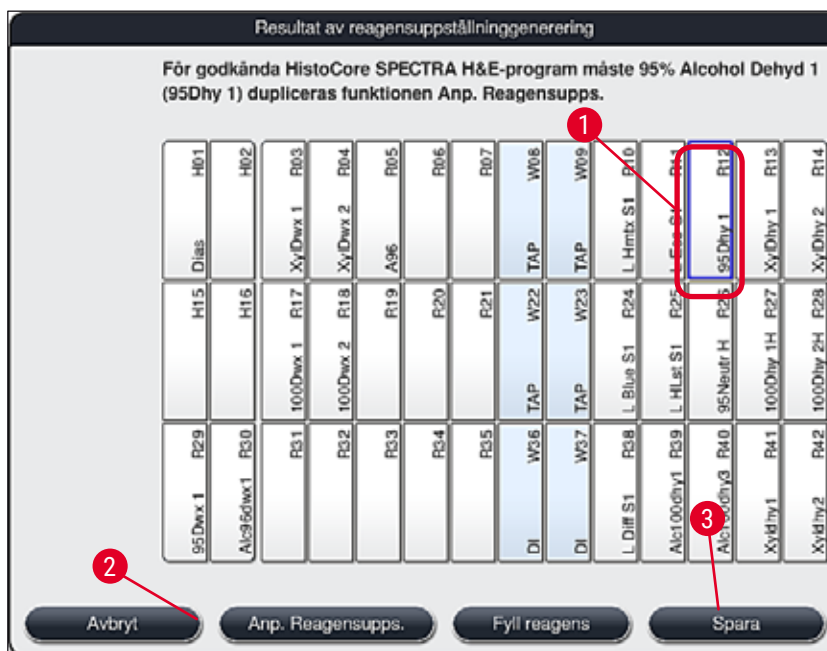


Bild 52

Duplicera reagensen **95Dhy1**



Obs!

Om det inte finns någon tillgänglig reagensstation baserat på de valda programmen kan du ta hjälp av Leicas försäljningsavdelning och försöka optimera användardefinierade program.

Så här gör du för att duplicera reagensen **95Dhy1**:

1. Tryck på knappen **Anp. Reagensups.** (→ "Bild 52-2").
2. Observera alltid det efterföljande informationsmeddelandet och bekräfta det med **OK**. Ett nytt fönster, **Urklipp** (→ "Bild 53"), öppnas.

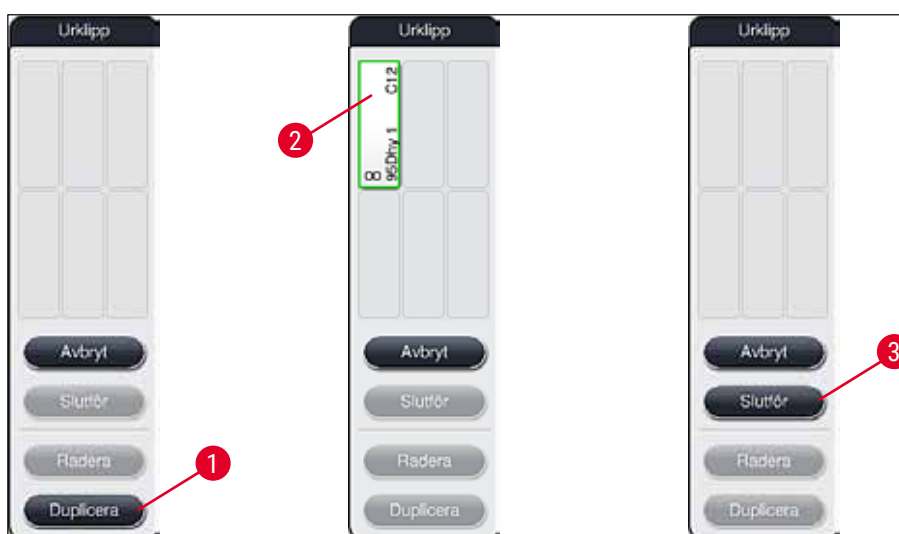


Bild 53

3. Markera stationen **95Dhy1** (→ "Bild 52-1") i reagensuppställningen genom att trycka lätt på den (stationen är markerad i grönt). Klicka sedan på **Duplicera** (→ "Bild 53-1") i fönstret **Urklipp**. En identisk kopia av den valda stationen visas nu i **Urklipp** (→ "Bild 53-2").
4. Markera stationen i **Urklipp** och klicka sedan på en ledig position i **Reagensuppställning**. Den duplicerade stationen flyttas från urklippsfönstret till reagensuppställningen (→ "Bild 54-1").

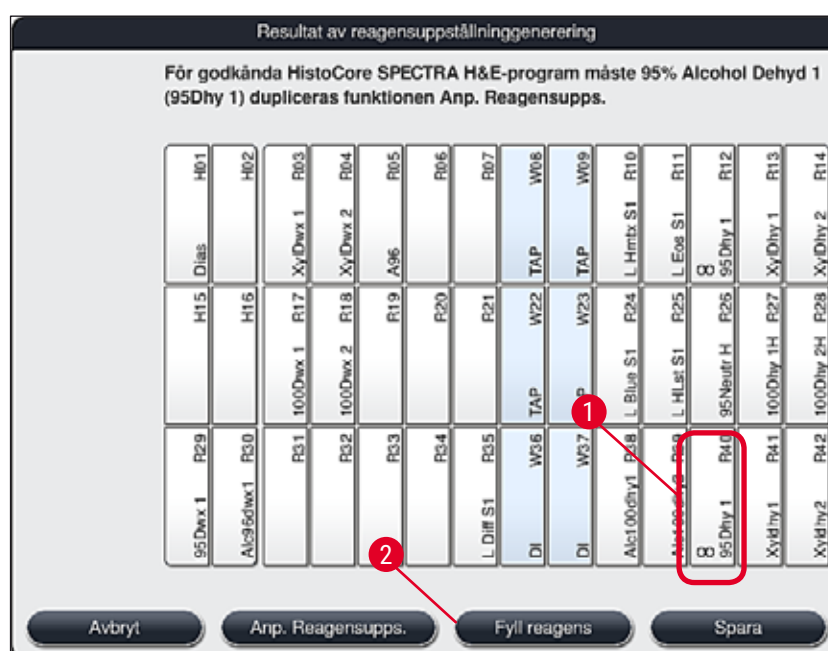


Bild 54

5. Tryck på **Slutför** (→ "Bild 53-3") i **Urklipp** och bekräfta det efterföljande informationsmeddelande med **Ja** för att tillämpa ändringen och stänga urklippsfönstret.
- ✓ Den duplicerade stationen **95Dhy1** och den ursprungliga stationen markeras med en oändlighetssymbol (∞) i reagensuppställningen (→ "Bild 54-1").

5 Användning

Fylla på reagenser

1. Tryck på knappen **Fyll reagens** (→ "Bild 54-2").
2. I det nya fönstret **Fyll reagens** (→ "Bild 55") är de stationer som ska fyllas markerade med orange (→ "Bild 55-1").



Obs!

Endast användardefinierade och tillagda reagenser från Leica-infärgningsprogram får en orange markering (→ "Bild 55"). Därefter skannas reagenserna från Leica Reagent Kit (→ Sida 81 – Fylla på reagenser från Leica Reagent Kit).

3. Fyll de markerade reagenskyvetterna en och en med respektive reagens utanför instrumentet och sätt tillbaka dem i rätt position i instrumentet.
4. Bekräfta att reagenskyvetterna har fyllts och satts tillbaka genom att trycka på respektive station (→ "Bild 55-1") på skärmen.
5. Upprepa dessa steg för alla stationer som är markerade med orange.

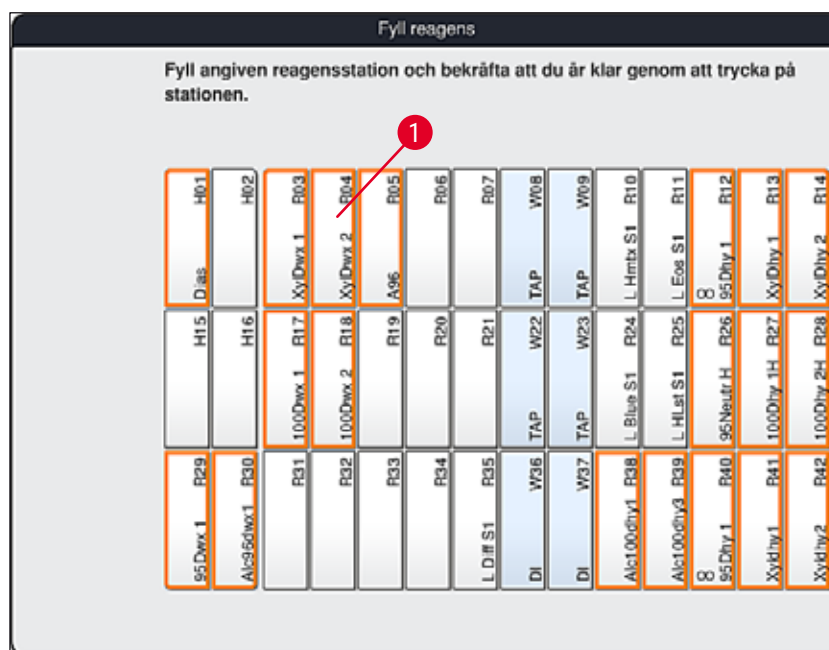


Bild 55



Varning

Ordningen i tilldelningsplanen ska följas exakt. En avvikelse kan leda till oönskade infärgningsresultat.

Fylla på reagenser från Leica Reagent Kit

**Obs!**

När reagensstationen **95 % Alcohol Dehyd1** (→ Sida 78 – Duplicera reagensen 95Dhy1) har duplicerats och reagenserna har fyllts på (→ Sida 80 – Fylla på reagenser), skannas Leica Reagents Kit.

1. Om ett informationsmeddelande (→ "Bild 56") visas på skärmen ska du placera förpackningens etikett framför RFID-sensorn på instrumentets framsida (→ "Bild 57-1") för att skanna den.
2. Börja sedan med att skanna den första Leica Reagent-flaskan när ett informationsmeddelande om detta visas (→ "Bild 57-2"). Håll etiketten på reagensflaskan framför RFID-sensorn på instrumentets framsida (→ "Bild 57-1") för att skanna den.
3. I det nya fönstret **Byt Leica Kit Reagent** (→ "Bild 58"), är den station som ska fyllas markerad med orange (→ "Bild 58-1").
4. Fyll den markerade reagenskyvetten med respektive Leica-reagens utanför instrumentet och sätt tillbaka den i rätt position i instrumentet.
5. Bekräfta att reagenskyvetten har fyllts och satts tillbaka genom att trycka på respektive station (→ "Bild 58-1") på skärmen.
6. Skanna sedan etiketterna på de enskilda reagensflaskorna när du uppmanas att göra det (→ "Bild 57-2") och upprepa steg 2-5.



Bild 56

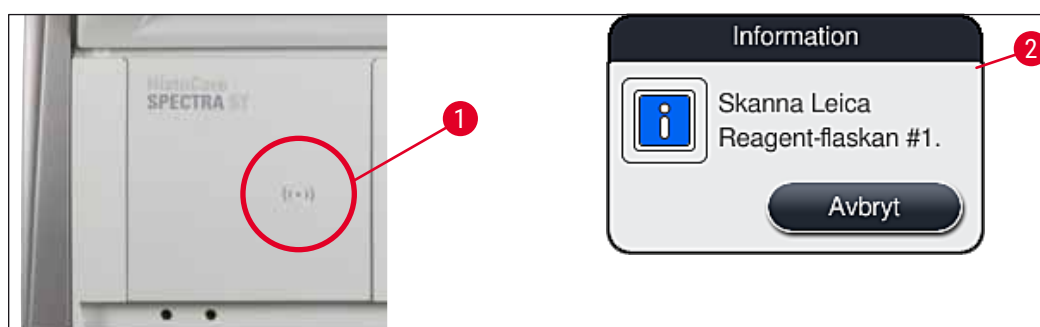


Bild 57

Byt Leica Kit Reagent

Fyll angiven reagensstation och bekräfta att du är klar genom att trycka på stationen: R05

H01	H02	R03	R04	R05	R06	R07	W08	W09	R10	R11	R12	R13	R14
Dias		XylDwx 1	XylDwx 2	L Hst S1		L Hmtx S1	TAP	TAP	L Blue S1	L Eos S1	8 95Dhy 1	XylDhy 1	XylDhy 2
H15	H16	R17	R18	R19	R20	R21	W22	W23	R24	R25	R26	R27	R28
		100Dwx 1	100Dwx 2				TAP	TAP	A96	95Neutr H	Alc100dhy1	100Dhy 1H	100Dhy 2H
R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	W36	W37	R38	R39	F40	R41	R42
95Dwx 1						L Diff S1	DI	DI	Alc96dwx1	Alc100dhy3	8 95Dhy 1	XylDhy1	XylDhy2

Bild 58



Obs!

Användaren har 5 minuter på sig att skanna reagenser med hjälp av förpackningens etikett och 5 minuter per reagensflaska.

Om skanningen av en reagensflaska eller etikett misslyckas har användaren ytterligare två försök på sig innan reagensetiketten blir ogiltig.



Varning

Varje Leica Reagent Kit kan endast skannas en gång!

- Skanningen av Leica Reagent Kit kan endast avbrytas med knappen **Avbryt** i informationsmeddelandet som visas i (→ "Bild 56"). Den måste avbrytas innan förpackningens etikett börjar läsas in för att inte Leica Reagent Kit ska förfalla.
- Skanningen kan utföras senare. Mer information som kan behövas för denna åtgärd finns i (→ Sida 97 – Reagensbyte) (→ "Bild 75") och (→ "Bild 76").
- Om åtgärden inte avbryts förrän efter det att den första etiketten (förpackning av kartong) har skannats förfaller Leica Reagent Kit.



Obs!

Reagenshanteringssystemet (**RHS**) tillämpar automatiskt följande data för Leica-reagenserna:


- Bäst före-datum (efter öppnande)
- Kvarstående antal objektglas
- Högsta antal objektglas
- Utgångsdatum
- Partinummer

**Varning**

- Ordningen i reagensuppställningen ska följas exakt. En avvikelse kan leda till oönskade infärgningsresultat.
- Alla Leica Reagent Kit-flaskor ska skannas.
- Se till att inga Leica-reagenser från andra Leica Reagent Kit används.
- Reagenskyvetter ska alltid fyllas på utanför instrumentet och i enlighet med säkerhetsanvisningarna.

**Obs!**

Slutligen får användaren ett informationsmeddelande på skärmen med en uppmaning om att starta skanning av påfyllningsnivån. Tryck på knappen **OK** i informationsmeddelandet (→ "Bild 59") för att starta skanningen.

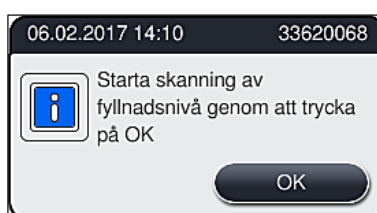**Bild 59****5.9.11 Anpassa en reagensuppställning****Varning**

Den automatiskt genererade reagensuppställningen är optimerad och ska endast anpassas om det finns specifika användarbehov eller om detta krävs av ett Leica-program. I detta fall måste bruksanvisningen som medföljer Leica Reagent Kit följas! Arbetsledarläget krävs för att anpassa reagensuppställningen.

Alla anpassningar av reagensuppställningen kan påverka preparatgenomströmningen och infärgningsresultatet negativt!

Följande regler måste följas när reagensuppställningen anpassas:

- Undvik att flytta reagensstationer från ena sidan av kyvettfältet till den andra, eftersom detta medför onödigt långa överföringstider.
- Duplicerade stationer måste befinna sig på samma sida i kyvettfältet (→ "Bild 39") (→ "Bild 64"), annars kan inte anpassningen av reagensuppställningen sparas.

Om du behöver anpassa den reagensuppställning som har skapats av HistoCore SPECTRA ST, som inkluderar alla regler för optimering, kan du göra detta med hjälp av funktionen **Anp. Reagensupps.** (→ "Bild 60-1").

Med den här funktionen kan stationerna flyttas till sina positioner inom reagensuppställningen och/eller dupliceras.

5 Användning

För att göra detta går du tillväga på följande sätt:

- I reagensuppställningsvyn (→ "Bild 60"), trycker du på knappen **Anp. Reagensupps.** (→ "Bild 60-1").
- Observera de informationsmeddelanden som följer (→ "Bild 61") (→ "Bild 62") och bekräfta dem eller tryck på **Avbryt** (→ "Bild 62") för att återgå till reagensuppställningsvyn.
- När du har bekräftat kommer **Urklipp** (→ "Bild 63") att öppnas. Upp till 6 reagensstationer (→ "Bild 63-1") kan flyttas hit.

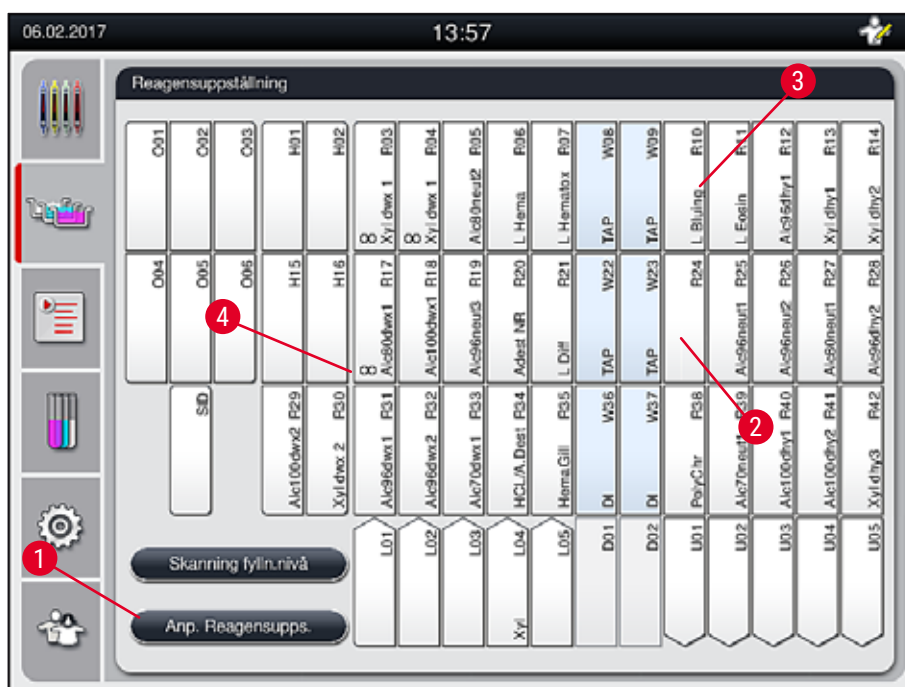


Bild 60

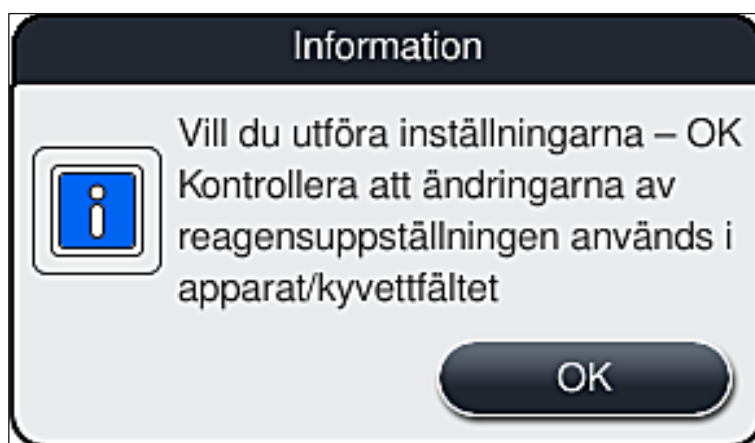


Bild 61

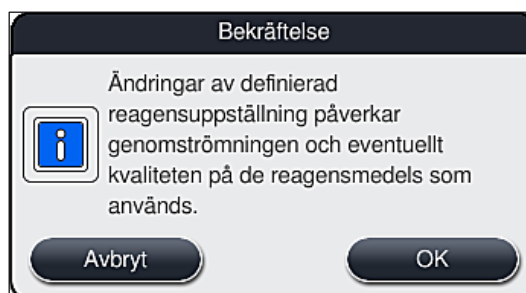


Bild 62

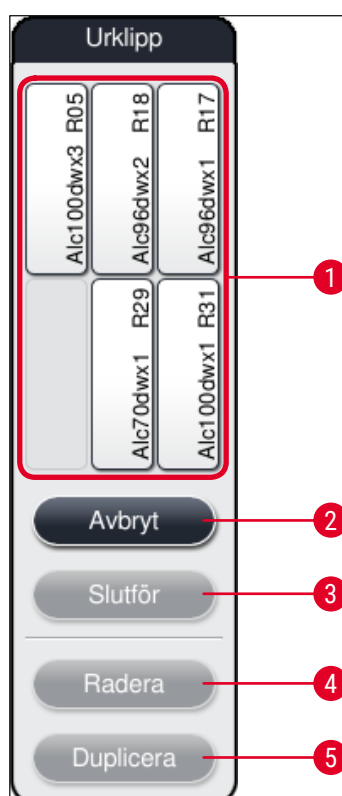


Bild 63

**Obs!**

- Leica-reagensstationer med ett L före reagensnamnet (→ "Bild 60-3") kan flyttas men inte dupliceras.
-

**Obs!**

- Urklippsfönstret kan stängas först när det inte längre finns några reagensstationer i det.
- Efter varje ändring som utförs med funktionen **Anp. Reagensupps.** visas ett informationsmeddelande på skärmen som uppmanar användaren att starta den automatiska skanningen av påfyllningsnivån. Tryck på knappen **OK** i informationsmeddelandet för att starta skanningen.

Det finns två alternativ för att ändra reagensuppställningen:

Flytta reagensstationer:

1. För att flytta reagensstationer markerar du dem en och en i reagensuppställningen (→ "Bild 60") genom att trycka på skärmen och sedan trycka lätt på en ledig position i urklippsfönstret (→ "Bild 63-1").
2. Reagensstationen flyttas då till urklippsfönstret (→ "Bild 63-1").
3. Markera slutligen reagensstationen i urklippsfönstret genom att trycka lätt på den och dra den sedan till önskad (ledig) station (→ "Bild 60-2") i reagensuppställningen.
4. För att spara ändringarna trycker du på knappen **Slutför** (→ "Bild 63-3"). Bekräfta efterföljande informationsmeddelande med **Ja** eller återgå till urklippsfönstret med **Nej**.
5. För att ångra ändringarna trycker du på **Avbryt** (→ "Bild 63-2") och bekräftar det efterföljande informationsmeddelandet med **Ja**.

Duplicera en reagensstation

1. För att duplicera en reagensstation markerar du den i reagensuppställningen genom att trycka på skärmen.
 2. Därefter trycker du på knappen **Duplicera** (→ "Bild 63-5").
 3. Reagensstationen dyker då upp i urklippsfönstret. Denna station och den ursprungliga stationen markeras med en oändlighetssymbol (→ "Bild 60-4").
 4. Markera därefter den duplicerade reagensstationen i urklippsfönstret genom att trycka på skärmen och placera den sedan i önskad (ledig) station, i närheten av den ursprungliga stationen, i reagensuppställningen.
 5. För att spara ändringarna trycker du på knappen **Slutför**. Bekräfta efterföljande informationsmeddelande med **Ja** eller återgå till urklippsfönstret med **Nej**.
- För att ångra ändringarna trycker du på **Avbryt** och bekräftar det efterföljande informationsmeddelandet med **Ja**.



Obs!

- Duplicerade reagensstationer är lämpliga för programsteg med reagenser som har en lång verkningstid. Duplicerade stationer innebär att ett programsteg har tillgång till två likvärdiga reagensstationer, vilket garanterar en hög reagensgenomströmning.
- Duplicerade reagensstationer kan raderas med hjälp av knappen **Radera** (→ "Bild 63-4"). För att göra detta markerar du dem i reagensuppställningen genom att trycka på dem och därefter på **Radera**.

6. Daglig inställning av instrumentet

6.1 Förbereda instrumentet för den dagliga inställningen

**Obs!**

- (→ "Bild 64") visar en översikt över de olika stationerna i kyvettfältet.
- Kyvettfältet består av totalt 36 reagensstationer och 6 sköljvattenstationer.
- Varje reagenskyvett rymmer max. 380 ml.

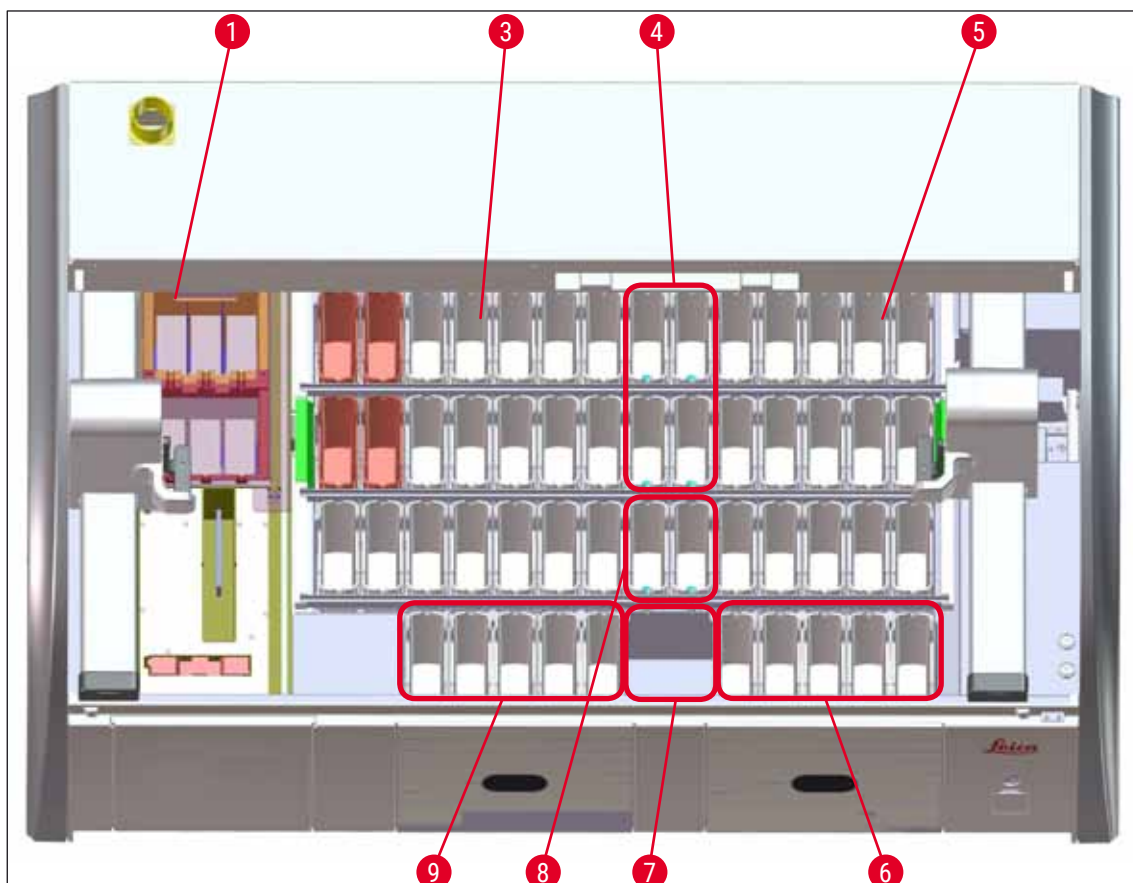


Bild 64

- 1 6 ugnsstationer
- 3 Vänster kyvettfält
- 4 Sköljvattenstationer (grupp om fyra)
- 5 Höger kyvettfält
- 6 5 utmatningsstationer
- 7 Torr överföringsstation
- 8 Sköljvattenstationer (grupp om två)
- 9 5 laddningsstationer

6.2 Daglig inställning av instrumentet**Obs!**

Före den dagliga idrifttagningen av instrumentet ska vattentillförseln till instrumentet kontrolleras och vid behov kopplas till.

- Öppna instrumentets kåpa och ta bort locken från reagenskyvetterna.
- Starta instrumentet.

Automatisk skanning av fyllnadsnivå i samband med att instrumentets initieras

Under initieringen utförs skanningen av fyllnadsnivå automatiskt i följande områden:

- Reagenskyvetter
- Sköljvattenkyvetter
- Laddnings- och utmatningsstationens reagenskyvetter
- Ugnstation

**Obs!**

Om instrumentet fortfarande innehåller rack, reagenskyvetter som inte är tillräckligt fyllda eller fortfarande täckta, och/eller sköljvattenkyvetter som inte är redo att användas, upptäcks detta under den automatiska skanningen av fyllnadsnivån och visas när denna är slutförd.

6.2.1 Förbereda och hantera reagenskyvetter

För att säkerställa att allt fungerar som det ska i instrumentet ska du följa anvisningarna nedan och gå tillväga på följande sätt.

Sätta fast reagenskyvetthandtaget

Kontrollera att reagenskyvetthandtaget är korrekt fastsatt på reagenskyvetten. Om detta inte är fallet ska handtaget sättas fast enligt (→ "Bild 65").

Fylla på och tömma reagenskyvetter**Varning**

Reagenskyvetterna ska normalt fyllas på eller tömmas utanför instrumentet för att undvika eller minska risken för att spilla reagenser i andra reagenskyvetter eller på instrumentets invändiga delar. Var försiktig när du fyller eller tömmer reagenskyvetterna och följ de gällande laboratorieföreskrifterna. Om reagenser har spillts ut eller om andra reagensstationer har kontaminerats måste dessa rengöras och fyllas på igen. För att undvika onödig avdunstning av reagenser ska kyvetterna täckas över när de inte används.

Korrekt fyllnadsnivå i reagenskyvetter

- Observera nivåmarkeringen på insidan av reagenskyvetten när du fyller den, oavsett typ av kyvett (→ "Bild 65") (→ "Bild 66").
- En tillräcklig fyllnadsnivå garanteras om reagensernas nivå ligger mellan markeringarna för högsta (→ "Bild 65-1") och lägsta (→ "Bild 65-2") fyllnadsnivå.
- Om mellanlägg för specialinfärgning (→ "Bild 66") används i reagenskyvetterna för att reducera reagensvolymen ska dessa sättas i reagenskyvetten innan reagensen fylls på (minst upp till den markerade lägsta fyllnadsnivån (→ "Bild 66-2"), men inte över den högsta fyllnadsnivån (→ "Bild 66-1").

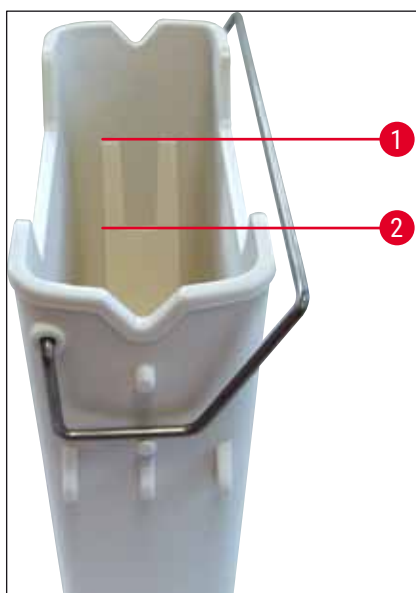


Bild 65

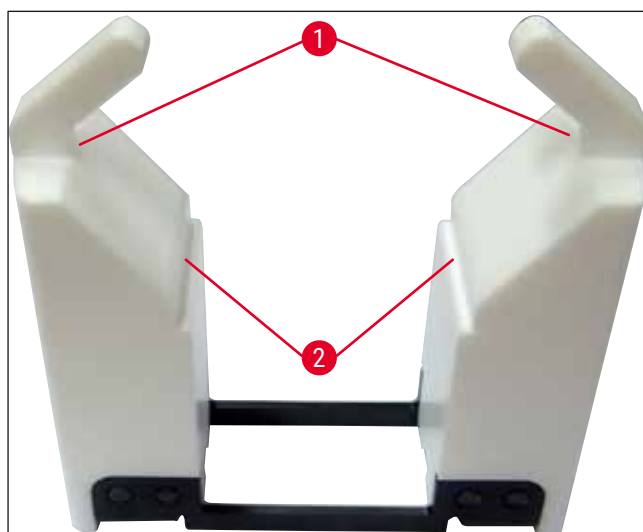


Bild 66

Sätta i reagenskyvetten i kyvettfältet

- Välj **Reagensuppställning** (→ Sida 38 – 5.5 Huvudmeny – Översikt) i huvudmenyn och placera reagenskyvetten i rätt position enligt ordningen i reagensuppställningen.

**Obs!**

Sätt försiktigt i reagenskyvetten med handtaget i kyvettfältet så att handtaget sitter på höger sida om reagenskyvetten när du tittar på kyvettfältet (→ "Bild 67-1"). Denna riktning på handtaget rekommenderas också för placeringen av reagenskyvetterna i laddnings- eller utmatningsstationen

**Obs!**

Liksom rackhandtaget för 5 objektglas är mellanlägget för specialinfärgning försett med en specialbeläggning som förhindrar kemiska interaktioner med reagenser för särskilda användningsområden (t. ex. berlinerblå infärgning för påvisning av järn eller silverinfärgning som Grocott eller Gömöri). För mer information om reagenser som ska användas med belagda tillbehör, se (→ Sida 152 – A1. Bilaga 1 – Godkända reagenser).

6 Daglig inställning av instrumentet

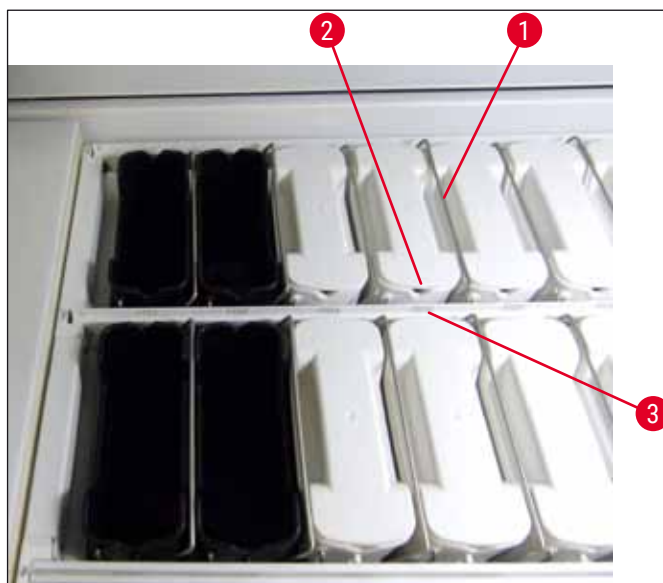


Bild 67



Varning

Reagenskyvettarna får inte stå vridna i sidled i förhållande till stationsnumret. Se till att skåran på reagenskyvettens framsida (→ "Bild 67-2") och stationsnumret (→ "Bild 67-3") är på samma höjd.

6.2.2 Automatisk skanning av påfyllningsnivå

När reagenskyvetten har fyllts och satts i ska den automatiska skanningen av påfyllningsnivån (→ "Bild 68-1") utföras för att bekräfta att alla reagenser som används har rätt påfyllningsnivå.



Obs!

- Laddnings- och utmatningsstationerna tas inte med i beräkningen när reagensuppställningen skapas. Reagenser i in- och utmatningsstationerna måste definieras och övervakas av användaren.
- Reagenserna i laddnings- och utmatningsstationerna övervakas inte av reagenshanteringssystemet. Därför ansvarar användaren för att reagenserna i dessa stationer är i ett felfritt skick.

Skanningen av påfyllningsnivån startas på följande sätt:

1. Öppna **Reagensuppställning** (→ Sida 38 – 5.5 Huvudmeny – Översikt) i huvudmenyn.
2. Knappen **Skanning fylln.nivå** (→ "Bild 68-1") finns nere till vänster på menyskärmen.
3. Tryck på den knappen för att starta skanningen av påfyllningsnivån.



Obs!

Avvikelser under skanningen visas på bildskärmen. Följ meddelandena och korrigera till exempel påfyllningsnivåer, ta bort lock, lägg till reagenskyvetter osv.

6.3 Reagenshanteringssystem (RHS)



Reagensuppställningen (→ "Bild 68") i instrumentet visas när du trycker på motsvarande menyknapp. Denna visning återger den aktuella uppställningen av reagensstationerna, sköljvattenstationerna samt laddnings- och utmatningsstationerna i instrumentet.



Bild 68

Reagensuppställningen är tom när instrumentet levereras eftersom reagenserna inte har angetts ännu och ingen reagensuppställning har skapats.

När reagenser (→ Sida 58 – Skapa en ny reagens eller kopiera en reagens) och program (→ Sida 69 – 5.9.5 Skapa eller kopiera ett nytt infärgningsprogram) har angetts och reagensuppställningen har skapats (→ Sida 76 – 5.9.9 Skapa reagensuppställningen), visar översikten (→ "Bild 68") alla stationer i instrumentet i rätt ordning.

Varje reagenskyvett som visas i reagensuppställningen innehåller ytterligare information:

- Stationsnummer (→ "Bild 68-2")
- Reagensnamnets förkortning (→ "Bild 68-3")
- En bakgrundsfärg (→ "Bild 69")
- Oändlighetssymbol för en duplicerad reagensstation (→ "Bild 68-4")



Obs!

- Bakgrundsfärgen anger reagensens förbrukningsstatus (→ "Bild 69"). När reagensen är förbrukad stiger färgpelaren nedifrån och upp och ändrar färg beroende på förbrukningsstatus.
- En reagens måste bytas ut så snart dess förbrukningsstatus blir **RÖD** (→ "Bild 69-3") och absolut senast när stationen blinkar rött. Om detta inte görs kan inga Leica-infärgningsprogram startas.
- För mer information om RHS, se (→ Sida 57 – 5.8 Reagenslista).

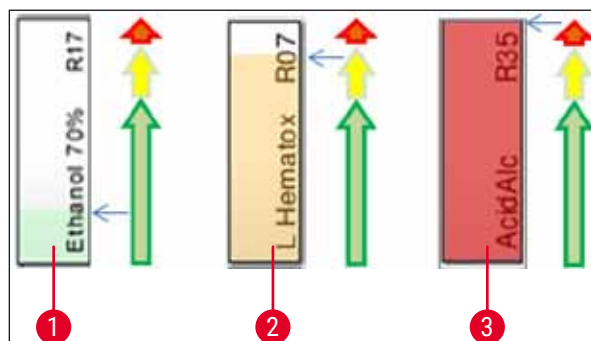


Bild 69

- 1 Grön: Förbrukningsstatus 0-80 % av den maximala förbrukningsnivån
- 2 Gul: Förbrukningsstatus 80-95 % av den maximala förbrukningsnivån
- 3 Röd: Förbrukningsstatus 95-100 % av den maximala förbrukningsnivån

6.4 Stationsinformation

Om du trycker på en station i reagensuppställningen visas mer information (stationsinformation). Man skiljer mellan följande stationstyper med hjälp av deras förkortningar:

L01-L05	Laddningsstationer
SID	Avläsningsstation för objektglas och skrivfälts-ID (tillval)
001-006	Ugnsstationer för torkning av objektglas och smältning av paraffin
R01-R42	Reagensstationer
W08-W09	Sköljvattenstationer (grupp om fyra)
W22-W23	
W36-W37	Sköljvattenstationer (grupp om två)
D01-D02	Torra överföringsstationer
U01-U05	Utmatningsfackets utmatningsstationer

Avläsningsstation för objektglas (SID):

Om du trycker på den här stationen visas ett meddelande som indikerar att det här är stationen för inläsning av objektglas. Använd knappen **Stäng** (→ "Bild 70") för att stänga visningen.



Bild 70

Ugnsstationer:

Den detaljerade visningen (→ "Bild 71") för en ugnsstation innehåller:

- Aktuell temperatur (→ "Bild 71-1"),
- Den inställda måltemperaturen (→ "Bild 71-2") och
- Driftläget (→ "Bild 71-3") för de 6 ugnsstationerna.

Använd knappen **Stäng** (→ "Bild 71-4") för att stänga visningen.

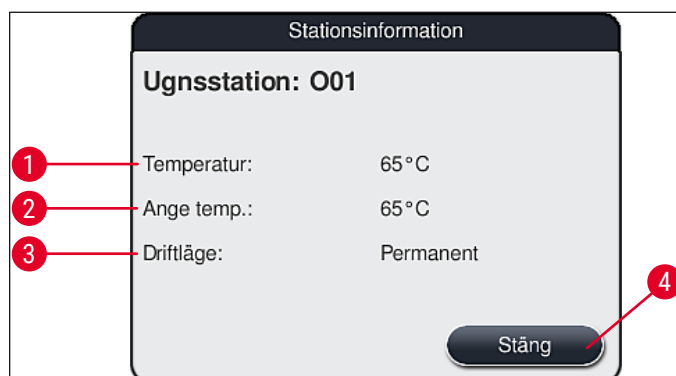


Bild 71

Sköljvattenstationer (grupp om fyra):

Den detaljerade visningen för en sköljvattenstation (→ "Bild 72") visar alla sköljvattenstationer som är anslutna till samma vattenkrets. Använd knappen **Stäng** för att stänga visningen.



Bild 72

Sköljvattenstation (grupp om två):

När du trycker på en sköljvattenstation som ingår en grupp av två öppnas ett informationsfönster som visar de 2 vattenstationerna som är anslutna till den andra vattenkretsen med till exempel destillerat vatten, avjoniserat vatten (→ "Bild 73-1") eller kranvatten (→ "Bild 73-2").



Obs!

Beroende på anslutningen (→ Sida 26 – 4.2.1 Anslutning av samtliga 6 sköljvattenstationer) (→ Sida 26 – 4.2.2 Kombinerad anslutning 4+2 sköljvattenstationer), måste du göra ett motsvarande val i den här menyn.

Sköljvattenstationerna (grupp med två) kan endast programmeras i **arbetsledar**-läge.



Varning

Rätt tilldelning och korrekt anslutning av kranvattenkyvetterna är ett krav för att uppnå en god infärgningskvalitet.

- Tryck på knappen **Spara** (→ "Bild 73-3") för att tillämpa inställningarna eller på **Avbryt** (→ "Bild 73-4") för att stänga fönstret utan att tillämpa eventuella ändringar.



Bild 73

Laddningsfackets laddningsstationer

När instrumentet levereras till kund har laddningsstationen ännu inte tilldelats några reagenser.

Utför följande steg för att tilldela en reagens till en laddningsstation:

1. Markera stationen i reagensuppställningen (→ "Bild 19-1") genom att trycka lätt på den.
2. I fönstret **Stationsinformation** trycker du på den svarta knappen **Reagensnamn** (→ "Bild 74-1") för att öppna listan med tillgängliga reagenser (→ Sida 57 – 5.8 Reagenslista).
3. Välj önskad reagens genom att trycka lätt på den och tryck sedan på **Tillämpa**.
4. Tryck på knappen **Spara** (→ "Bild 74-2") för att tillämpa inställningarna eller på **Avbryt** (→ "Bild 15-3") för att stänga fönstret utan att tillämpa eventuella ändringar.

✓ Det tilldelade reagensnamnet visas i reagensuppställningen.

Om reagensen inte längre behövs i den valda laddningsstationen kan tilldelningen till respektive reagens tas bort med hjälp av knapparna **Radera** (→ "Bild 74-4") och **Spara** (→ "Bild 74-2") i fönstret **Stationsinformation**.



Bild 74

**Obs!**

Laddnings- och utmatningsstationerna tas inte med i beräkningen när reagensuppställningen skapas. Reagenser i in- och utmatningsstationerna måste definieras och övervakas av användaren.

**Varning**

Racken transporteras till en ledig utmatningsstation i slutet av ett program. Därför måste alla utmatningsstationer vara fyllda med samma reagens.

Om detta inte följs kan det leda till att proverna skadas.

Reagensstationer

När du trycker på reagensstationen öppnas ett informationsfönster. Det visar ytterligare relevant information om stationstypen (reagensstation (→ "Bild 75"), Leica-reagensstation (→ "Bild 76")).

Reagensnamn (→ "Bild 75-1"), Förkortning (→ "Bild 75-2")	(→ Sida 58 – Skapa en ny reagens eller kopiera en reagens)
Förbrukningsstatus (→ "Bild 75-3")	(→ Sida 91 – 6.3 Reagenshanteringssystem (RHS))
Återstående objektglas (→ "Bild 75-4"), Max objektglas. (→ "Bild 75-6")	Visar antalet återstående objektglas som kan behandlas. När ett rack sätts i instrumentet räknas objektglasen i racket av avläsningsstationen för objektglas och subtraheras från antalet återstående objektglas.
Objektglas ef. utbyte (→ "Bild 75-5")	Visar antalet objektglas som har bearbetats sedan det senaste reagensbytet.
Längsta lagringsdatum efter bruten förpackning (→ "Bild 75-7")	Visar lagringsdatumet för den reagens som reagenskvyetten har fyllts med.
Mellanlägg Ja/Nej (→ "Bild 75-8")	Ja indikerar att mellanlägget för specialinfärgning och rack för 5 objektglas används. Den här stationen kan inte användas för program med rack för 30 objektglas (→ Sida 57 – 5.8 Reagenslista).
Exklusive Ja/Nej (→ "Bild 75-9")	Inställningen Ja innebär att reagensen enbart tilldelas till ett enda program. Nej gör det möjligt att använda den med flera program (→ Sida 72 – 5.9.6 Infoga eller kopiera ett nytt programsteg).
Utgångsdatum (→ "Bild 76-1"), Partinummer (→ "Bild 76-2")	läggs in automatiskt när förpackningen till Leica Reagent Kit skannas.

Detaljerad visning av reagensstation

Stationsinformation

Reagensstation: R39

1	Reagensnamn:	Alcohol 100% dehydrating 3
2	Förkortning:	Alc100dhy3
3	Reagensanvändn.status:	0%
4	Återstående objektglas:	3000
5	Objektglas ef. utbyte:	0
6	Max objektglas:	3000
7	Längsta lagring-datum:	11.02.2017
8	Insats:	Nej
9	Exklusive:	Nej
10	Uppdatera reagens	
11	Stäng	

Bild 75

Detaljerad visning av Leica-reagensstation

Stationsinformation

Reagensstation: R05

	Reagensnamn:	SPECTRA Hemalast S1 A
	Förkortning:	L HLst S1A
	Reagensanvändn.status:	11%
	Återstående objektglas:	1600
	Objektglas ef. utbyte:	0
	Max objektglas:	1600
	Längsta lagring-datum:	19.09.2017
1	Utgångsdatum:	07.09.2018
2	Partinr:	43256
	Insats:	Nej
	Exklusive:	Ja
	Uppdatera reagens	
	Stäng	

Bild 76

Reagensbyte

- Om reagenshanteringssystemet RHS visar att en reagens är nästan eller helt förbrukad måste ett reagensbyte göras. Detta byte måste bekräftas med en tryckning på knappen **Uppdatera reagens** (→ "Bild 75-10").
- När du byter ut Leica-reagenser ska du trycka på **Uppdatera reagens** och sedan följa instruktionerna för fyllning och skanning på skärmen.
- Använd knappen **Stäng** (→ "Bild 75-11") för att stänga visningen.

**Obs!**

- Obs! Ett byte av reagenser följt av en uppdatering av RHS-data är endast möjligt om instrumentet befinner sig i ett driftläge och det inte längre finns några rack i instrumentet (inklusive laddnings- och utmatningsfacken).

Om ett användardefinierat infärgningsprogram fortfarande används trots att ett reagensbyte måste utföras, kommer antalet objektglas att överstiga värdet **Max objektglas** (→ "Bild 75-6"). Det överskridna antalet objektglas kan avgöras genom att man jämför informationen på raderna **Objektglas ef. utbyte** och **Max objektglas** i stationsinformationen (→ "Bild 75-5").

- För reagenser i Leica Reagent Kit gäller ett gränsvärde på 30 överskridande objektglas. Detta gränsvärde gäller inte övriga reagenser som hör till Leica-programmet (t.ex. alkohol, xylene).

**Varning**

- En uppdatering av reagensstatusen utan att motsvarande reagens har bytts kommer att påverka infärgningskvaliteten negativt.
- Tryck **ALDRIG** på knappen **Uppdatera reagens** om inte reagensen har bytts ut.

**Obs!**

Varje Leica Reagent Kit kan endast skannas en gång!

Redan tillagda Leica-reagenser går ut innan bäst före-datumet om en reagensuppställning skapas på nytt.

6.5 Förbereda racket

**Varning**

Varje rackhandtag (→ "Bild 78-1") innehåller 2 RFID-chip. Därför kan rackhandtagen fästas på racket (→ "Bild 78-2") först efter ett mikrovågssteg för förberedelse av preparat.

Det finns två olika typer av rack med kompatibla handtag som kan användas i infärgaren HistoCore SPECTRA ST:

- Rack för 30 objektglas för vanlig infärgning (→ "Bild 78").
- Rack för 5 objektglas för specialinfärgning (→ "Bild 79").

**Obs!**

Om en täckglasapplikator från en annan tillverkare används för täckglasapplicering av HistoCore SPECTRA ST-infärgade rack kan HistoCore SPECTRA ST användas med rack från andra tillverkare. Dessa rack måste vara försedda med rackhandtag från Leica och vara godkända för tillverkaren. Rack från andra tillverkare överförs normalt till utmatningsfacket i HistoCore SPECTRA ST efter infärgningen, och användaren måste ta bort dem därifrån.

Tillgängliga rackhandtag anges i (→ Sida 143 – Rackhandtag för rack från andra tillverkare).

De färgade handtagen måste sättas fast korrekt innan racket används i instrumentet.

Rackhandtagen måste sättas fast i enlighet med den fördefinierade programfärgen (→ Sida 65 – 5.9.1 Tilldela ett infärgningsprogram en rackhandtagsfärg).

Objektglashandtagen finns i 9 färger (8 programfärger & vit) (→ Sida 141 – 9.2 Valbara tillbehör).

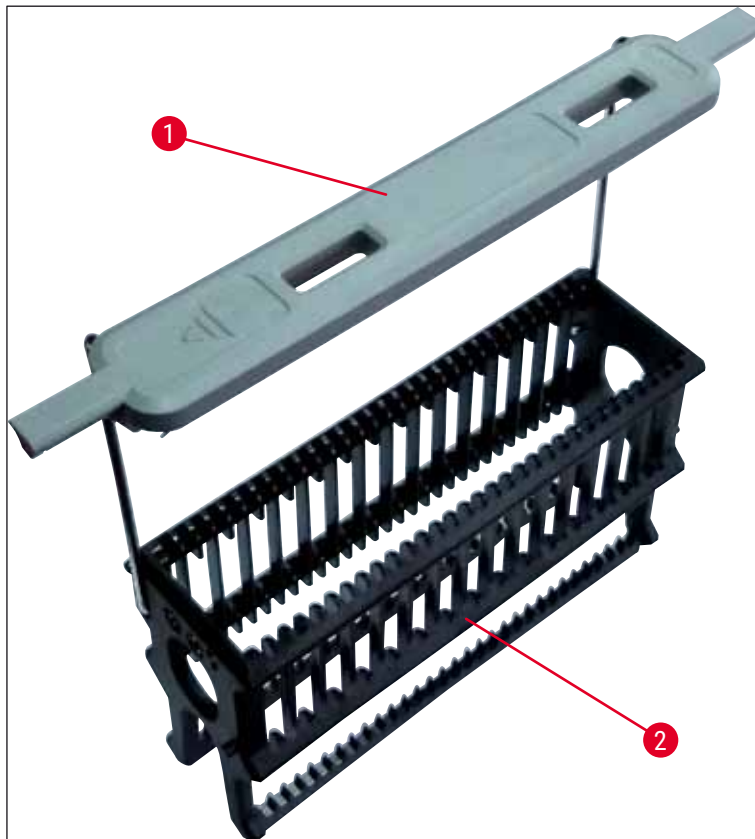


Bild 78



Bild 79

**Obs!**

Rackhandtaget för 5 objektglas har en specialbeläggning som förhindrar kemiska interaktioner med reagenser för särskilda användningsområden (t.ex. berlinerblå infärgning för påvisning av järn eller silverinfärgning som Grocott eller Gömöri). För mer information om reagenser som ska användas med belagda tillbehör, se (→ Sida 152 – A1. Bilaga 1 – Godkända reagenser).

Det vita handtagets specialfunktion:

- Det vita handtaget kan inte tilldelas till ett infärgningsprogram permanent.
- På grund av handtagets **JOKERFUNKTION** måste en programfärg tilldelas det vita handtaget på nytt vid varje programstart.
- För detta ändamål öppnas en urvalsmeny automatiskt på skärmen när racket har satts i.

Gör på följande sätt för att sätta fast eller byta ut rackhandtagen:

Lossa ett handtag från racket:

- Dra handtaget lätt åt sidorna (→ "Bild 80") så att ståltrådarna kan dras ut ur hålen i racket.

Sätta fast ett handtag på racket:

- Dra handtaget lätt åt sidorna och lyft racket så att ståltråden snäpper fast i hålen på höger och vänster sida i racket (→ "Bild 80-1") (→ "Bild 80-2").



Bild 80

**Obs!**

- Se till att handtaget sitter korrekt i den övre positionen, centrerat ovanför racket (→ "Bild 80").
- För att göra racket stabilare vid fyllning (→ "Bild 81-3") kan du vika handtaget (→ "Bild 81-1") åt sidan så långt det går (→ "Bild 81-2") så att det fungerar som ett ytterligare skydd och gör att racket inte tippas.

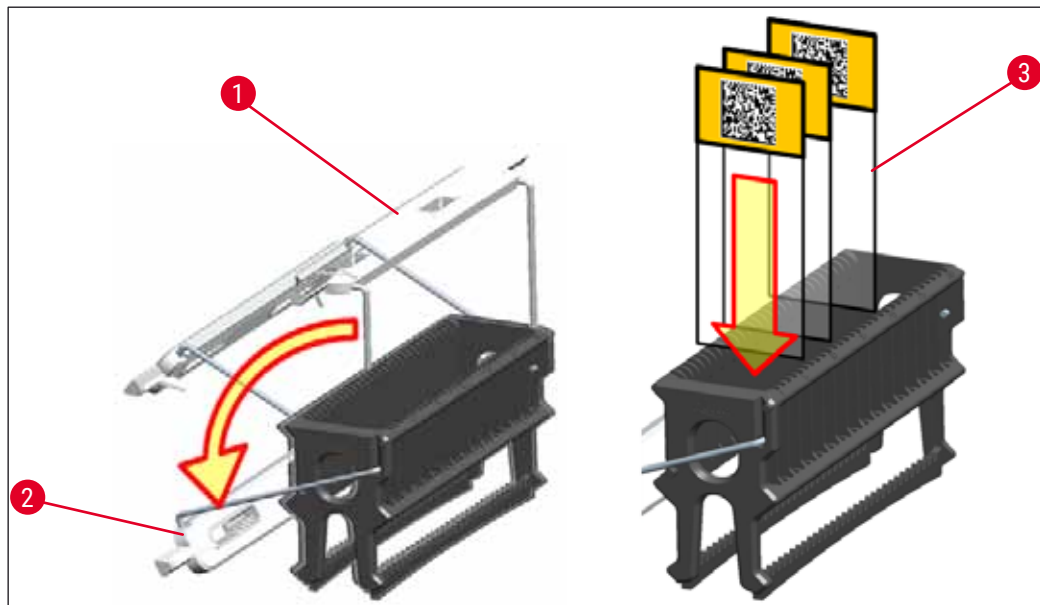


Bild 81

**Varning**

- När du sätter i objektglaset (→ "Bild 81-3"), måste du se till att objektglasetiketten pekar uppåt och är vänd mot användaren. Sidan av glaset med preparatet på måste vara vänd mot rackets framsida.
- Rackets framsida är markerad med Leica-logotypen. När handtaget är fastsatt går det att läsa texten **FRONT** på handtaget (→ "Bild 81").
- Om objektglaset inte sätts i korrekt kan proverna skadas under den fortsatta processen.
- Etiketterna och/eller den skriftliga märkningen som används på objektglas måste tåla de lösningsmedel som förekommer i instrumentet.

**Obs!**

- Endast objektglas som motsvarar DIN ISO-standard 8037-1 får användas.
- Om tomma eller handskrivna etiketter används på rackhandtagen och objektglaset måste du kontrollera att de tål lösningsmedel innan de används.
- När du sätter i objektglaset i racket måste du se till att glaset placeras i respektive fack för det önskade infärgningsprogrammet. De färgade rackhandtagen gör att de kan tilldelas till respektive infärgningsprogram på ett tillförlitligt sätt.
- Se till att endast ett objektglas placeras i varje utrymme och att glaset inte fastnar.

6.6 Infärgningsprocessen

För att infärgningsprocessen ska kunna genomföras måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

- Alla inställningar har optimerats (parametrar för ugn, etc.).
- De program som krävs för infärgningen har skapats (→ Sida 69 – 5.9.5 Skapa eller kopiera ett nytt infärgningsprogram).
- Reagensstationerna är fyllda med rätt reagenser (→ Sida 88 – 6.2.1 Förbereda och hantera reagenskvetter).
- En skanning av fyllnadsnivån har utförts (→ Sida 88 – 6.2 Daglig inställning av instrumentet).
- De rack som är avsedda för infärgning är fyllda och rätt handtag är fästa på dem (→ Sida 98 – 6.5 Förbereda racket).



Obs!

En kontrollerad avstängning av instrumentet inleds om driftströmbrytaren (→ "Bild 13") trycks in under en pågående infärgningsprocess (→ Sida 110 – 6.6.6 Slutföra den dagliga användningen). Användaren måste bekräfta avstängningen av instrumentet genom att trycka på driftströmbrytaren två gånger.

6.6.1 Starta infärgningsprocessen



Varning

- Sträck dig inte in i laddningsfackets rörelseområde. Då kan du skada dig.
- Racket kan endast sättas i med hjälp av laddningsfacket. Det är inte tillåtet att sätta i det direkt i en reagens eller ugnstation genom att öppna instrumentets kåpa. Rack som sätts i på detta sätt kan inte identifieras av instrumentet och därmed orsaka kollisioner!
- Om kåpan öppnas medan infärgningsprogram är aktiva fördröjs respektive bearbetningssteg, eftersom det inte sker några överföringsrörelser under denna tidsperiod. Detta kan leda till förändringar av infärgningskvaliteten.
- Låt alltid kåpan vara stängd under tiden infärgningsprogram är aktiva. Leica tar inget ansvar för kvalitetsförsämringar som uppstår på detta sätt.
- Om rack med vita handtag har placerats i laddningsfacket och tilldelats till ett program, måste programmets tilldelning göras om efter det att facket och/eller kåpan har öppnats igen. Följ informationsmeddelandena som visas på bildskärmen när det ska göras.

Starta infärgningsprocessen

1. Fäll upp rackhandtaget så att det är upprätt (→ "Bild 81").
2. Om laddningsfacket lyser grönt (→ "Bild 82-1") trycker du på det och öppnar facket.
3. Sätt i racket i en ledig position i laddningsfacket enligt (→ "Bild 82-2").



Bild 82

4. Sätt i racket så att både Leica-logotypen på rackets framsida och markeringen "Front" (Framsida) på det färgade handtagets ovansida pekar mot användaren. Pilen på ovansidan av det färgade handtaget ska peka in mot instrumentet.
5. Tryck på laddningsfackets knapp igen för att stänga det.
6. Om laddningsfacket är öppet i mer än 60 sekunder informerar ett informationsmeddelande användaren om detta.

**Varning**

Se upp när facken öppnas eller stängs. Klämrisk! Facken är motordrivna och öppnas automatiskt när knappen trycks in. Blockera inte fackens rörelseområde.

7. När laddningsfacket stängs känner instrumentet av RFID-chipet i det färgade handtaget.
8. Den identifierade handtagsfärgen och den tilldelade programförkortningen visas på respektive station i reagensuppställningen (→ "Bild 83").

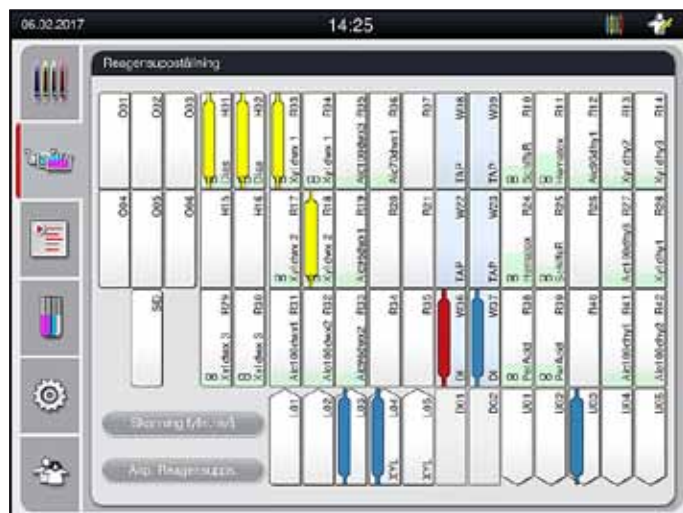


Bild 83

**Obs!**

- Instrumentet upptäcker och indikerar när ett rack har satts i på fel sätt och måste korrigeras av användaren.
- Om ett rack har satts i laddningsfacket med en rackhandtagsfärg för vilken det inte finns något angett program i reagensuppställningen (→ "Bild 84") upptäcker instrumentet detta och informerar användaren genom att visa ett informationsmeddelande. Racket måste avlägsnas från instrumentet. Fäst ett handtag med rätt färg enligt programmen (→ Sida 69 – Bild 44) och sätt tillbaka det i laddningsfacket.

SPECTRA ST

LHE

DWX

DHY

TS1

Bild 84

**Obs!**

För de isatta racken beräknar instrumentet genomströmningsoptimerade starttider som kan avvika från de isatta rackens ordningsföljd.

- Före det första programsteget räknar instrumentet de glas som har satts i racket i avläsningsstationen för objektglas (→ "Bild 3-2").
- Det fastställda antalet objektglas registreras och bearbetas i **RHS** och förbrukningsstatusen för respektive reagens uppdateras.
- Därefter transporteras racket till en ugnstation eller reagensstation, beroende på vad som har angetts som första programsteg.

**Varning**

Om laddningsfacket och instrumentets kåpa har öppnats samtidigt innan en infärningsprocess startas (t.ex. för okulärbesiktning av reagenserna), visar instrumentet efter 60 sekunder ett informationsmeddelande som uppmanar användaren att stänga laddningsfacket. Om racket sätts i innan laddningsfacket stängs måste du se till att kåpan är stängd och att programmen startar. Om programmet inte startas automatiskt ska laddningsfacket öppnas och stängas igen.

6.6.2 Övervaka infärningsprocessen

Med hjälp av följande menyer kan användaren öppna eller kontrollera övervaka information om program som är i gång:


- Reagensuppställning med stationsinformation (→ "Bild 83").
- Visning av processtatus med beräknade kvarvarande programtider och stegtider (→ Sida 35 – 5.3 Processtatusvisning).
- Statusrad (→ Sida 34 – 5.2 Element på statusskärmen) med datum, tid och symboler gällande informationsmeddelanden och varningar som har visats.

**Obs!**

De 20 senaste aktiva informationsmeddelandena och varningarna kan öppnas genom att man trycker på respektive symbol i statusraden (→ "Bild 16-2") (→ "Bild 16-3"). På så vis kan användaren hålla sig informerad om aktuella situationer när han eller hon har varit borta från instrumentet, och vidta nödvändiga åtgärder vid behov.

6.6.3 Infärningsprocess slutförd

- När ett rack har gått igenom infärningsprocessen transporteras det till utmatningsfacket (→ "Bild 19-4") och placeras i en ledig position (→ "Bild 85"). Användaren informeras om detta via ett informationsmeddelande och en ljudsignal.

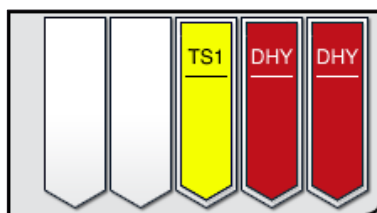**Bild 85**

- För att avlägsna racket från utmatningsstationen trycker du på knappen på utmatningsfacket (→ "Bild 19-4") för att öppna det och ta bort racket.
- Tryck sedan på knappen igen för att stänga utmatningsfacket.

**Varning**

- Sträck dig inte in i utmatningsfackets rörelseområde. Då kan du skada dig.
- Utmatningsfacket måste öppnas och racken avlägsnas senast när varningsmeddelandet om att utmatningsstationen är helt full visas (→ "Bild 86"). Om du inte tar hänsyn till varningsmeddelandet kan det resultera i att det inte går att transportera fler rack till utmatningsstationerna. Avvikande stegtider och fördröjningar i infärgningsprocessen kan leda till förändrade infärgningsresultat som kan vara svåra eller omöjliga att analysera.



Bild 86

- Om utmatningsfacket är öppet i mer än 60 sekunder informerar ett informationsmeddelande (→ "Bild 87") användaren om detta.

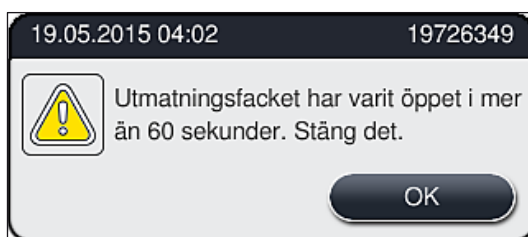


Bild 87

**Obs!**

Varningsmeddelandet uppmanar användaren att stänga utmatningsfacket för att undvika eventuella fördröjningar. När utmatningsfacket är öppet kan instrumentet inte placera färdiga rack i utmatningsstationerna. Avvikande stegtider och fördröjningar i infärgningsprocessen kan leda till förändrade infärgningsresultat som kan vara svåra eller omöjliga att analysera.

- Tryck på knappen på utmatningsfacket för att stänga det.

6.6.4 Avbryta infärgningsprogrammet

**Obs!**

- Infärgningsprogram kan endast avslutas via **processtatusvisningen**.
- Ett program som redan befinner sig vid avläsningsstationen för objektglas (→ "Bild 3-2") kan inte avbrytas.

1. För att avbryta ett infärgningsprogram markerar du motsvarande rack i **processtatusvisningen** (→ "Bild 17-3") genom att trycka lätt på det.
2. En lista med programsteg (→ "Bild 88") visas; det aktuella steget är rödmarkerat (→ "Bild 88-1").

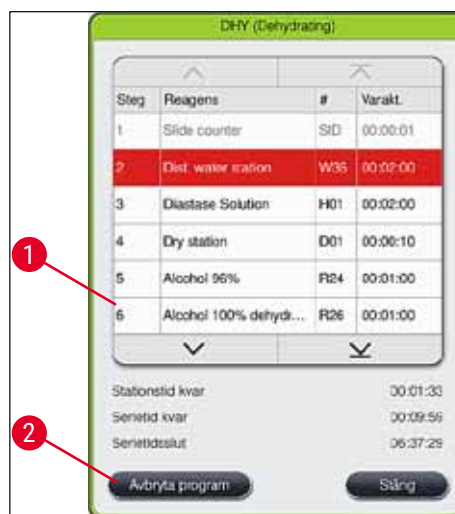


Bild 88

3. Fönstrets ram visar färgen som har tilldelats programmet, programnamnet samt förkortningen som har lagts in.
4. Tryck på knappen **Avbryta program** (→ "Bild 88-2").
5. I det efterföljande informationsmeddelandet (→ "Bild 89") bekräftar du att programmet ska avslutas med **Ja** eller återgår till processtatusvisningen med **Nej**.

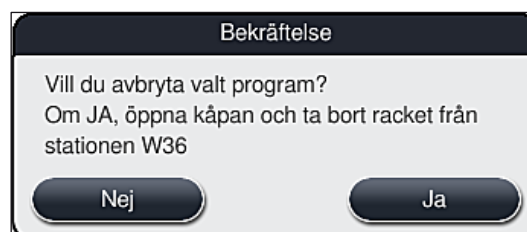


Bild 89

**Obs!**

Informationen i meddelandet (→ "Bild 89") måste följas.

6. Reagensuppställningen visas när du trycker på **Ja**. Rackets position i instrumentet är markerad med orange (→ "Bild 90-1").
7. Öppna instrumentets kåpa och ta bort racket från den markerade stationen.



Varning

Om den markerade stationen är en ugnstation kan den vänstra överföringsarmen (→ "Bild 3-1") behöva flyttas till mitten av instrumentet. Dra sedan den öppna kåpan framåt och ta bort racket.

- Bekräfta att racket har tagits bort genom att trycka på den markerade stationen (→ "Bild 90-1").

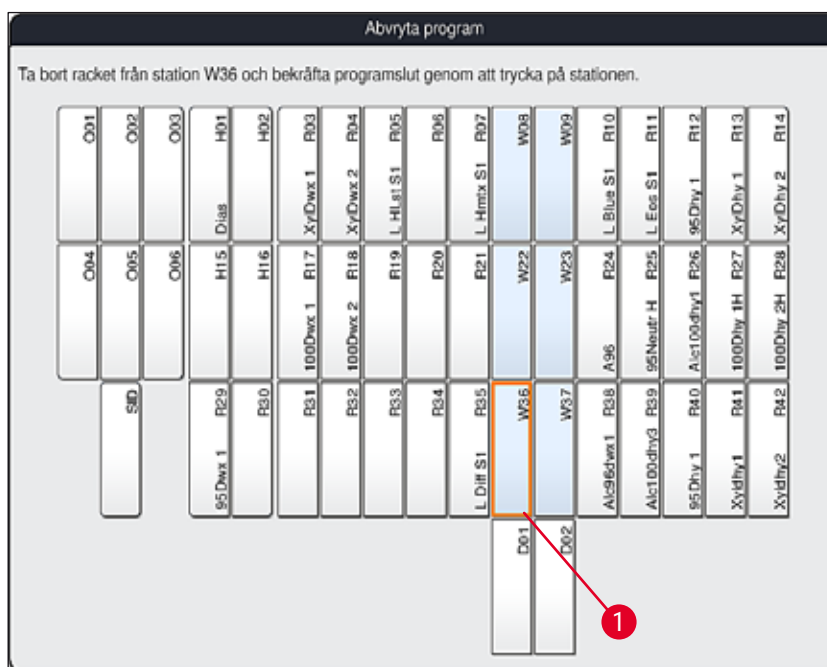


Bild 90

- Stäng sedan kåpan igen.



Varning

- Var snabb när du tar bort racket och se till att kåpan endast är öppen en kort stund. Av säkerhetsskäl avbryts alla rörelser när kåpan öppnas och startar inte igen förrän den stängs. Att öppna kåpan under en pågående infärkningsprocess kan medföra avvikande stegtider, fördröjningar och förändrade infärkningsresultat.
- Sträck dig inte in i ugnsluckans rörelseområde (ugns svängradie).



Obs!

Återstående infärkningsprogram fortsätter efter ett programavbrott.

6.6.5 Användning som arbetsstation

HistoCore SPECTRA ST kan användas som en arbetsstation tillsammans med en HistoCore SPECTRA CV automatisk täckglasapplikator. Detta möjliggör ett arbetsflöde utan avbrott, från infärgningsprocessen till avlägsnandet av de färdiga objektglasen med täckglas.

En överföringsstation finns som tillval för detta ändamål
(→ Sida 141 – 9.1 Valbara komponenter till instrumentet).



Obs!

- Överföringsstationen (tillval) och anslutningen av en HistoCore SPECTRA CV till HistoCore SPECTRA ST kan endast installeras i efterhand av en servicetekniker certifierad av Leica.
- Alla program måste programmeras med en slutlig målstation. I arbetsstationsläge ska överföringsstationen väljas som sista steg.



Varning

Användaren måste följa nedanstående punkter om instrumentet används som arbetsstation!

- Utmatningsstationerna i HistoCore SPECTRA ST måste fyllas med samma reagens (xylen) som laddningsstationerna i HistoCore SPECTRA CV.
- Alla reagenser som läggs till måste vara kompatibla med det monteringsmedel som används.
- Det är absolut nödvändigt att utmatningsstationerna i HistoCore SPECTRA ST och laddningsstationerna i HistoCore SPECTRA CV fylls med samma reagens, eftersom racken överförs till utmatningsstationen under infärgningsprocessen om HistoCore SPECTRA CV inte är tillgänglig. Denna situation kan uppstå om reagenskvetterna i laddningsfacket i HistoCore SPECTRA CV är fyllda med rack på grund av att användaren inte har fyllt på förbrukningsartiklar i tid eller på grund av instrumentfel.
- Ett rack för 5 objektglas kan inte överföras till HistoCore SPECTRA CV. Dessa rack placeras alltid i utmatningsfacket i slutet av infärgningsprocessen, oavsett om överföringsstationen har angetts som sista station i infärgningsprogrammet eller inte.
- Om ett vitt rackhandtag används måste färgen i infärgningsprogrammet väljas när racket förs in i laddningsfacket. Därefter öppnas ett andra fönster där en parameteruppsättning måste väljas för HistoCore SPECTRA CV. Färgen i parameteruppsättningen i HistoCore SPECTRA CV behöver inte överensstämma med färgen i det valda infärgningsprogrammet. Om HistoCore SPECTRA CV-parameteruppsättningen inte tilldelas transporteras racket till utmatningsfacket i HistoCore SPECTRA ST efter infärgningen. Ett meddelande informerar användaren om det.
- Om HistoCore SPECTRA CV inte kan ta emot rack från HistoCore SPECTRA ST (t. ex. på grund av instrumentfel i HistoCore SPECTRA CV eller på grund av att laddningsfacket i HistoCore SPECTRA CV är upptaget) transporteras de till utmatningsfacket i HistoCore SPECTRA ST.
- Om instrumentfel uppstår i överföringsstationen i HistoCore SPECTRA ST transporteras inte racken till HistoCore SPECTRA CV utan till utmatningsfacket i HistoCore SPECTRA ST. Om funktionsfelet kvarstår i **överföringsstationen** måste ansvarig Leicas tekniska service kontaktas.
- Användningen som arbetsstation beskrivs i detalj i bruksanvisningen för HistoCore SPECTRA CV.

**Varning**

Om de angivna stationerna inte har fyllts enligt rekommendationerna kan det leda till skadade preparat med sämre infärgningsresultat och lägre täckglasappliceringskvalitet. Att inte fylla de angivna stationerna kan leda till att preparat förstörs på grund av att de torkar ut.

6.6.6 Slutföra den dagliga användningen

När den dagliga infärgningen har slutförts ska instrumentet försättas i **standby**-läge:

1. Kontrollera om det finns rack kvar i följande stationer och avlägsna dem:
 - Laddningsfack (→ "Bild 64-9")
 - Utmatningsfack (→ "Bild 64-6")
 - Ugn (→ "Bild 64-1")
 - Torr överföringsstation (→ "Bild 64-7")
 - Reagenskyvettfält (→ "Bild 64-3"), (→ "Bild 64-4"), (→ "Bild 64-5") och (→ "Bild 64-8")
2. Täck därefter över alla reagenskyvetter med reagenskyvettlocken.
3. Tryck en gång på den gröna **driftströmbrytaren** (→ "Bild 9-2").
4. Instrumentet uppmanar användaren att bekräfta att instrumentet ska stängas av genom att trycka på **driftströmbrytaren** igen.
5. Efter den andra tryckningen på **driftströmbrytaren** sker en kontrollerad avstängning av instrumentet.
6. **Driftströmbrytaren** lyser nu rött och instrumentet befinner sig i **standby**-läge.
7. Stäng avslutningsvis av vattentillförseln.

**Varning**

Om rengöring eller underhåll ska utföras på instrumentet måste det också stängas av med hjälp av **huvudströmbrytaren** (→ "Bild 9-1").

7. Rengöring och underhåll

7.1 Viktig information om rengöring av instrumentet



Varning

Allmän information:

- Före all rengöring ska instrumentet stängas av med **driftströmbrytaren** (→ "Bild 9-2") och sedan kopplas från med **huvudströmbrytaren** (→ "Bild 9-1").
- Bär lämpliga skyddskläder (labbrock och handskar) när du rengör instrumentet för att skydda dig mot reagenser och potentiellt smittsamma mikrobiologiska föroreningar.
- Ingen vätska får komma i kontakt med de elektriska anslutningarna, komma in i instrumentet eller i höljet under överföringsarmarna.
- Vid hantering av rengöringsmedel ska tillverkarens säkerhetsföreskrifter och de laboratorie-föreskrifter som gäller i användarlandet följas.
- Kassera förbrukade reagenser i enlighet med de riktlinjer för laboratorier som gäller i användarlandet.

För alla ytor på instrumentet gäller:

- Torka genast upp utspillda lösningsmedel (reagenser). Kåpans yta tål inte att utsättas för lösningsmedel under längre tid!
- Använd inget av följande vid rengöring av instrumentets utvändiga ytor: alkohol, rengöringsmedel som innehåller alkohol (t.ex. fönsterputsmedel), rengöringspulver med slipmedel, lösningsmedel som innehåller aceton eller xylene.

7.2 Utvändiga ytor, lackerade ytor, instrumentets kåpa

Ytorna kan rengöras med ett mildt och pH-neutralt kommersiellt rengöringsmedel. Efter rengöringen ska ytorna torkas av med en trasa som har fuktats med vatten.



Varning

Lackerade instrumentytor och ytor av plast (t.ex. instrumentets kåpa) får inte rengöras med lösningsmedel såsom aceton, xylene, toluol, xylensubstitut, alkohol, alkoholblandningar eller slipande medel! Ytorna och instrumentets kåpa tål inte att utsättas för lösningsmedel under längre tid.

7.3 TFT-pekskärm

Rengör bildskärmen med en luddfri trasa. Lämpliga rengöringsmedel för bildskärmar kan användas om tillverkarens anvisningar följs.

7.4 Insida och avrinningskärl

- Vid rengöring av det invändiga utrymmet och avrinningskärllet ska reagenskyvetterna och sköljvattenkyvetterna tas bort.

Använd ett mildt och pH-neutralt kommersiellt rengöringsmedel när du rengör dessa områden.

- När avrinningskärllet har rengjorts ska det tvättas noggrant med vatten.

7.5 Överföringsarmar

Rengör överföringsarmarnas ytor (→ "Bild 91-1") genom att torka av dem med en trasa fuktad med vatten eller ett mildt och pH-neutralt rengöringsmedel.



Varning

Se till att inga vätskor spills under höljet (→ "Bild 91-2") till överföringsarmarna eftersom det finns ömtåliga komponenter där.

7.6 Avläsningsstation för objektglas

Kontrollera att det inte finns någon smuts eller rester av reagenser i fördjupningen under avläsningsstationen för objektglas. Om objektglas med skadade kanter används kan små glasskärvor och flisor ha samlats upp här (→ "Bild 91-3"). Därför måste alla föroreningar avlägsnas försiktigt så att skador undviks.



Varning

Bär lämpliga skyddskläder (labbrock och handskar) för att skydda dig mot skärsår.

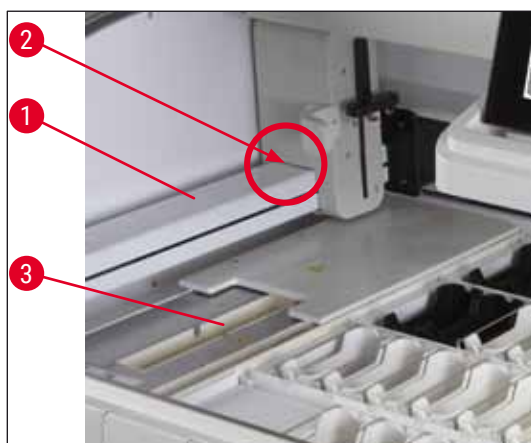


Bild 91

7.7 Laddnings- och utmatningsfack

- Ta ut reagenskyvetterna ur båda facken och förvara dem utanför instrumentet.
- Kontrollera att det inte finns någon reagens kvar i facken. Avlägsna eventuella rester.
- Sätt avslutningsvis tillbaka reagenskyvetterna på rätt plats.
- Observera märkningen (→ "Bild 92-1") för stationer i facken.



Bild 92



Obs!

Använd etiketterna som finns i (→ Sida 18 – 3.1 Standardleverans) för att märka reagenskyvetterna i laddnings- och utmatningsfacken. De präglade bokstäverna har följande innebörd:

- H₂O = vatten eller destillerat vatten
- A = alkohol
- S = lösningsmedel (engelska: solvent), t.ex. xylol

7.8 Torr överföringsstation

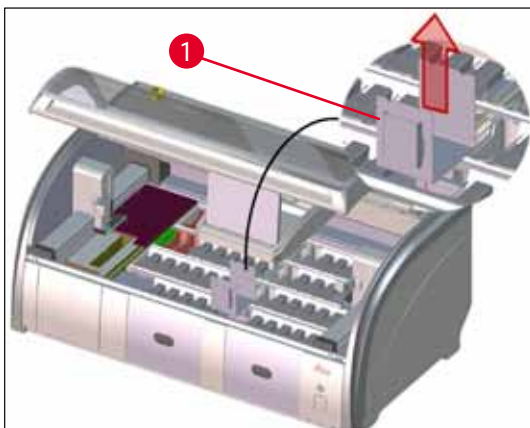


Bild 93

Reagenser kan droppa ner på den torra överföringsstationens mellanlägg. Dessa rester ska avlägsnas regelbundet.

- För att göra detta avlägsnar du mellanlägget (→ "Bild 93-1") till den torra överföringsstationen genom att dra det uppåt. Kontrollera om det är kontaminerat och rengör det vid behov.
- Sätt därefter tillbaka mellanlägget och se till att det hakar fast korrekt.

7.9 Överföringsstation (tillval)

- Kontrollera överföringsstationen (→ "Bild 94") regelbundet för att se om det finns kvarvarande reagenser i den.
Rengör den med ett kommersiellt mildt, pH-neutralt rengöringsmedel vid behov.

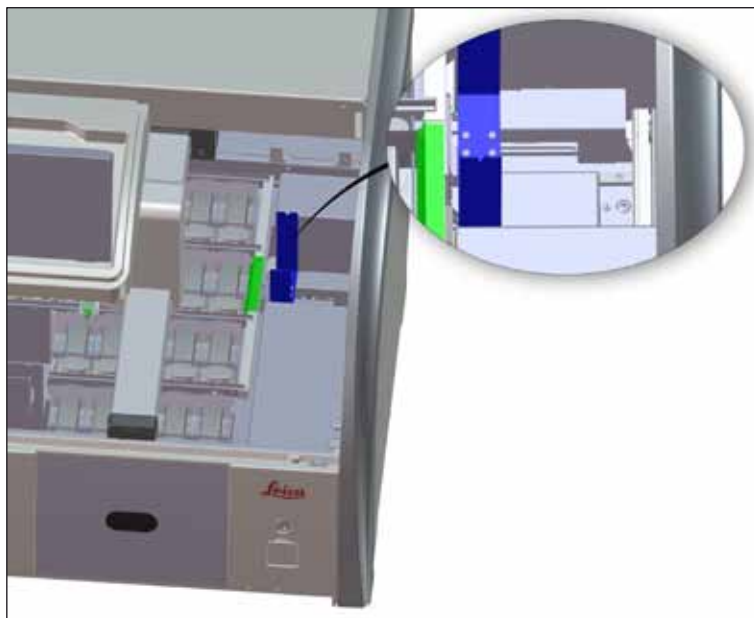


Bild 94

7.10 Reagenskyvetter och sköljvattenkyvetter

- Lyft ut kyvetterna en och en i handtaget. Se till att handtaget sitter i rätt position (→ Sida 88 – 6.2.1 Förbereda och hantera reagenskyvetter) för att förhindra att reagensen spills.
- Tätningsringen (→ "Bild 95-1") måste sitta fast på sköljvattenkyvetten.
- Kassera reagenserna enligt de lokala laboratorieföreskrifterna.
- Reagens- och sköljvattenkyvetter kan rengöras i diskmaskin med en maxtemperatur på 65 °C och ett vanligt, kommersiellt diskmedel för laboratoriediskmaskiner. Handtagen kan sitta kvar på de olika kyvetterna när de rengörs.



Varning

- För att förhindra skador på beläggningen på belagda tillbehör (mellanlägg för specialinfärgning och objektglashandtag för 5 objektglas) får dessa inte rengöras i diskmaskin. Se också till att beläggningen inte skadas när tillbehören rengörs för hand. Om belagda tillbehör är skadade kan de orsaka kemiska reaktioner med reagenser för särskilda användningsområden (→ Sida 152 – A1. Bilaga 1 – Godkända reagenser).
- Färgningsreagenskyvetter ska rengöras för hand innan de körs i diskmaskin. Färgrester ska i möjligaste mån avlägsnas så att de övriga reagenskyvetterna i diskmaskinen inte missfärgas.
- Reagenskyvetterna av plast får under inga omständigheter rengöras vid högre temperaturer än 65 °C, eftersom det kan leda till att reagenskyvetterna deformeras.

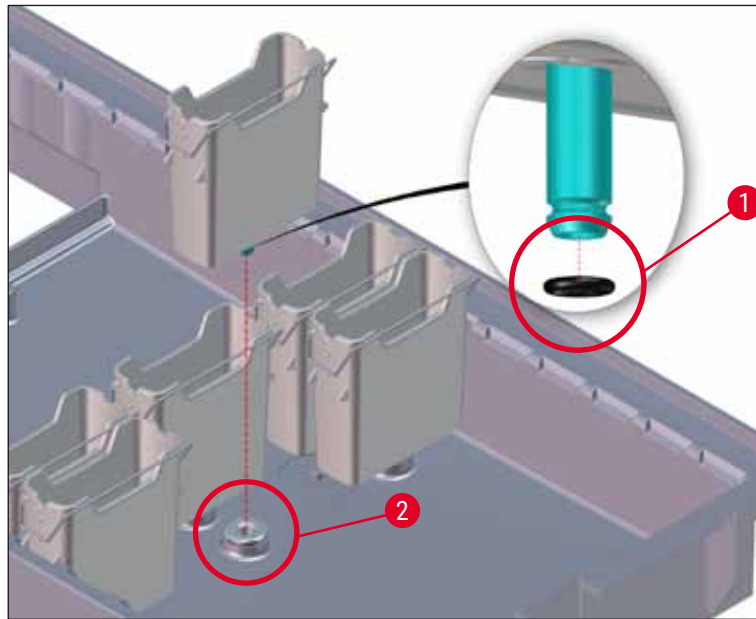


Bild 95

**Obs!**

- Sköljvattenkyvetterna ska kontrolleras regelbundet med avseende på kalkavlagringar, synliga mikrobiologiska bakteriebeläggning, svamp, alger samt genomsläpplighet. Kalkrester kan avlägsnas med hjälp av en mild ättikslösning. Därefter ska kyvetterna sköljas med rent vatten tills inga rester av rengöringsmedlet finns kvar.
- Efter att du har rengjort sköljvattenkyvetterna och innan du sätter i dem i instrumentet igen måste anslutningsstycket till vattentillförselsystemet kontrolleras så att det sitter rätt på den svarta O-ringen (→ "Bild 95-1").
- Om det finns O-ringar kvar i instrumentet när en sköljvattenkyvett tas ur (→ "Bild 95-2") ska de avlägsnas försiktigt med en tång och sättas tillbaka på anslutningsstycket.
- Om en O-ring saknas eller sitter fel får sköljvattenkyvetterna inte sättas tillbaka efter rengöringen eftersom det då finns risk för att sköljningen inte fungerar som den ska under infärgningsprocessen.
- När en O-ring har satts fast eller rättats till ska den smörjas med Molykote 111 smörjfett som ingår i (→ Sida 18 – 3.1 Standardleverans).
- Därefter kan sköljvattenkyvetterna sättas tillbaka på sin plats.

**Varning**

Om de rengjorda och fyllda reagenskyvetterna ska sättas tillbaka i instrumentet måste de placeras i rätt position enligt ordningen i reagensuppställningen (→ Sida 76 – 5.9.9 Skapa reagensuppställningen). Starta instrumentet och initiera instrumentet för att göra detta.

7.11 Rack och handtag

- Racket ska kontrolleras regelbundet så att det inte finns några infärgningsrester eller andra möjliga föroreningar på det.
- Det färgade handtaget måste avlägsnas från instrumentet när det ska rengöras.
- För att avlägsna infärgningsrester från racken ska de sänkas ner i ett bad med ljummet vatten och ett milt, pH-neutralt rengöringsmedel för laboratorier. Låt rengöringsmedlet verka. Det är viktigt att noggrant följa tillverkarens anvisningar för rengöringsmedlet samt rekommenderat användningsområde.
- Svåra infärgningsföroreningar kan avlägsnas med en borste.
- Tvätta sedan racken noggrant med rent vatten tills inga rester av infärgning eller rengöringsmedel kvarstår.
- Om det finns kvar rester av monteringsmedel på racken kan de läggas i ett bad med lösningsmedel.



Varning

Racken och handtagen får inte ligga kvar i lösningsmedlet för länge (t.ex. flera timmar eller över natten), eftersom det kan leda till deformationer!

Det är viktigt att säkerställa att det lösningsmedel som används är kompatibelt med monteringsmedlet. Xylen- eller toluenbaserade monteringsmedel kan avlägsnas i xylenbad. Xylensubstitutbaserade monteringsmedel kan avlägsnas i bad bestående av motsvarande xylensubstitut.



Obs!

Verkningstiden i badet med lösningsmedel får vara högst en till två timmar. Därefter kan lösningsmedlet tvättas bort med alkohol. Tvätta racken noggrant med vatten och torka dem. Om en extern torkugn används för torkning får temperaturen inte överstiga 70 °C.

7.12 Vattenavlopp



Varning

Instrumentets inbyggda avloppssystem måste regelbundet rengöras och kontrolleras så att flödet är korrekt. Om denna åtgärd inte har utförts kan det bli stopp i avloppssystemet, vilket kan leda till avbrott eller fel i infärgningsprocessen.

- För att rengöra av avloppssystemet tar du bort de fyra sköljvattenkyvetterna (→ "Bild 64-4") och alla kringliggande reagenskyvetter.
- Resterande reagenskyvetter ska täckas över med lock.
- Ta bort avloppssilen och rengör den vid behov (→ "Bild 96-1").
- För att avlägsna diverse rester (reagenser, bakterier, svamp, alger): Lägg en eller två rengöringstabletter med aktivt syre (t.ex. tandprotesrengöring) i avloppet och lös upp dem med vatten.
- Rengör sedan hela det svängda avloppsområdet inuti instrumentet med en lång, böjbar borste (→ "Bild 96-2").
- Spola ordentligt med vatten för att kontrollera att genomflödet är tillräckligt.
- Sätt in avloppssilen igen och sätt tillbaka kyvetterna i deras ursprungliga, angivna position.

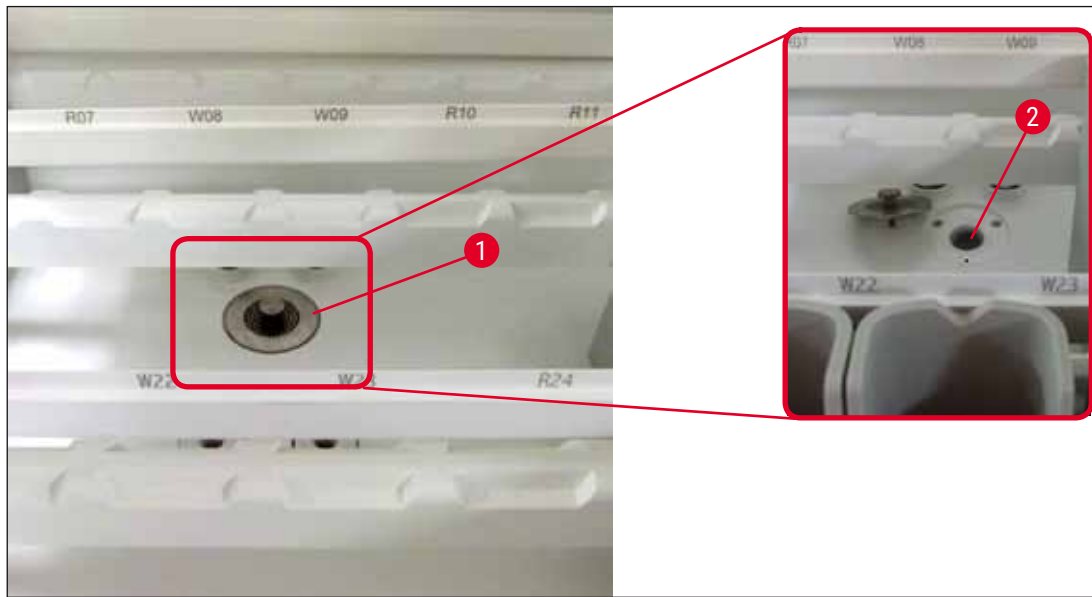


Bild 96

7.13 Vattenavloppsslang

Vattenavloppsslangen måste kontrolleras en gång om året av en Leica-auktoriserad servicetekniker.

7.14 Byta filterpatronen till vatteninloppsfiltret



Varning

Vattenfilterkåpan är inte lösningsmedelsbeständig och kan därför bli skör och gå sönder. Använd ingen form av alkohol eller rengöringsmedel innehållande alkohol vid rengöring av vattenfilterkåpan (→ "Bild 97-2"). Det kan resultera i att vatten läcker ut okontrollerat och skadar laboratoriet och laboratoriemiljön.

Vatteninloppsfiltret med filterpatron bör kontrolleras och bytas en gång om året av en Leica-auktoriserad servicetekniker.

Det inbyggda vatteninloppsfiltret (→ "Bild 97-1") skyddar instrumentets invändiga vattenkretskomponenter mot skador som orsakas av avlagringar och mineralbeläggningar.

Vattenfiltrets hållbarhet beror på vattenkvaliteten på installationsplatsen. Den maximala livslängden för vattenfiltret är ett år.

Vatteninloppsfiltret ska därför kontrolleras regelbundet genom att man tittar genom filterhuset för att se om det finns synliga föroreningar.

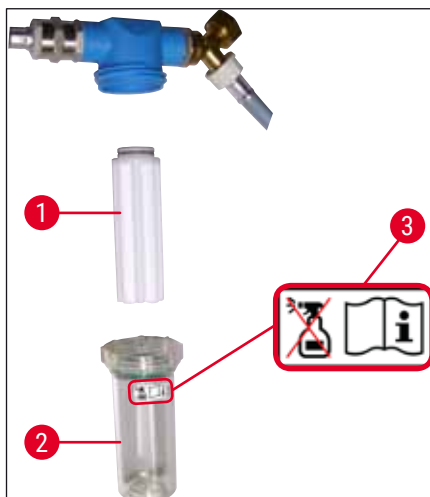


Bild 97

- 1 Filterhus
- 2 Filterpatron, Beställningsnr 14 0512 49332
- 3 Varningsetikett: Använd inte någon form av alkohol vid rengöring och följ instruktionerna i bruksanvisningen

**Obs!**

Om det finns betydande mängder synliga föroreningar i vattenfiltret innan underhållsintervallet (1 år) har passerat måste det bytas ut av en servicetekniker från Leica.

7.15 Byta det aktiva kolfiltret

De aktiva kolfiltren (→ "Bild 1-1") som är installerade i instrumentet bidrar till att reducera mängden reagensångor i den luft som släpps ut. Filtrets livslängd kan variera kraftigt beroende på hur ofta instrumentet används och reagenserna. Byt därför det aktiva kolfiltret regelbundet varannan eller var tredje månad och kassera det på ett korrekt sätt enligt de laboratieföreskrifter som gäller i användarlandet.

- Filterenheten består av två separata filterelement (→ "Bild 98-1") som användaren kommer åt från instrumentets framsida.
- Du kommer åt dem utan verktyg och avlägsnar dem genom att dra i dragflikarna (→ "Bild 98-2").
- Sätt i de nya filterelementen så att det går att komma åt dragflikarna när de är helt isatta och så att artikelnumret (→ "Bild 98-3") som är tryckt på dem går att läsa.
- Skriv isättningsdatumet för filterelementet på den vita etiketten och fäst etiketten på det aktiva kolfiltrets vänstra eller högra sida (→ "Bild 98-4").
- Båda de aktiva kolfiltren måste skjutas in tills det känns att de ligger an mot instrumentets bakvägg.



Bild 98

**Varning**

Om de sätts i fel kan de aktiva kolfiltren sticka ut i de två överföringsarmarnas rörelseområde och på så sätt hindra eller avbryta infärgningsprocessen.

7.16 Rengöra ugnarna**Varning**

- Varning för heta ytor: När ugnen har använts i infärgningsprocessen ska instrumentet först stängas av och ugnen svalna i minst 10 minuter innan den rengörs. Vidrör bara ugnsinseterna på de anvisade ställena.
- Ugnens insida får inte rengöras med lösningsmedel eftersom det finns risk för att rester av lösningsmedlet tränger in i ugnen och sedan förångas när processen startar.

Kontrollera regelbundet om det finns smuts på plåtinsatserna som samlar upp paraffinrester i ugnen.

- Dra ut det rörliga locket till ugnen för hand (→ "Bild 99-1") i riktning mot instrumentets framsida. Ugnsluckan får då inte vara uppfälld i sidled.
- Vid behov kan den vänstra överföringsarmen försiktigt skjutas åt sidan så att det går att komma åt ugnsinsetsen utan problem.

- Ta först tag i sidorna på den främre ugnsinnsatsen (→ "Bild 99-2") och lyft den uppåt, ut ur instrumentet. Ta sedan bort den bakre ugnsinnsatsen (→ "Bild 100-2").
- Ta isär de båda ugnskamrarna genom att dra dem uppåt, från varandra.
- Du kan sedan dra ut insatsen som samlar upp paraffinrester ur respektive ugnsinsats (→ "Bild 100-3") och (→ "Bild 100-4").
- Kontrollera om det finns paraffinrester och föroreningar på plåtmellanlägggen. För att smälta paraffinet kan mellanlägggen läggas i en extern laboratorieugn.
- När de har värmts upp kan paraffinresterna torkas bort med en luddfri trasa.
- Kontrollera att ventilationsspjällen som sitter i ugnskamrarna fungerar korrekt. Torka försiktigt bort eventuell synlig smuts med en luddfri trasa.
- Skjut tillbaka plåtmellanlägggen åt rätt håll (den perforerade sidan uppåt) i respektive ugnsinnsats.
- Efter rengöringen sätter du först tillbaka den bakre ugnsinnsatsen (→ "Bild 100-2") i instrumentet och därefter det främre ugnsinnsatsen (→ "Bild 99-2"). Se till att de hopsatta ugnsinnsatserna sitter korrekt.

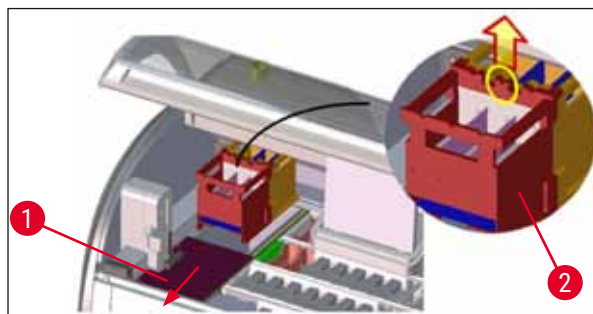


Bild 99

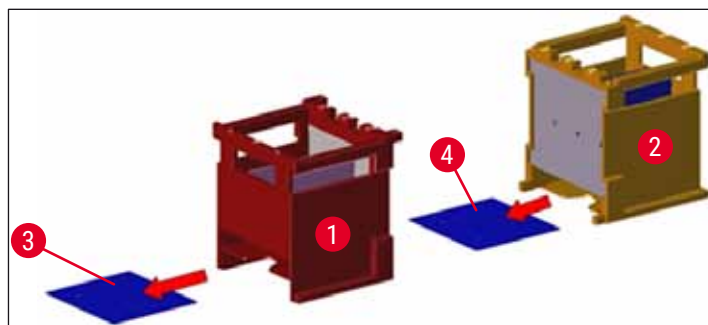


Bild 100

7.17 Ugnens luftfilter

Ugnens luftfilter bör kontrolleras regelbundet och rengöras eller bytas ut.

- För att göra detta tar du först bort filterinsatsen (→ "Bild 101-1") och skakar ur den eller ersätter den med en ny filterinsats (→ Sida 141 – 9.2 Valbara tillbehör).
- Efter kontroll och rengöring ska den sättas tillbaka i ugnen på samma sätt.

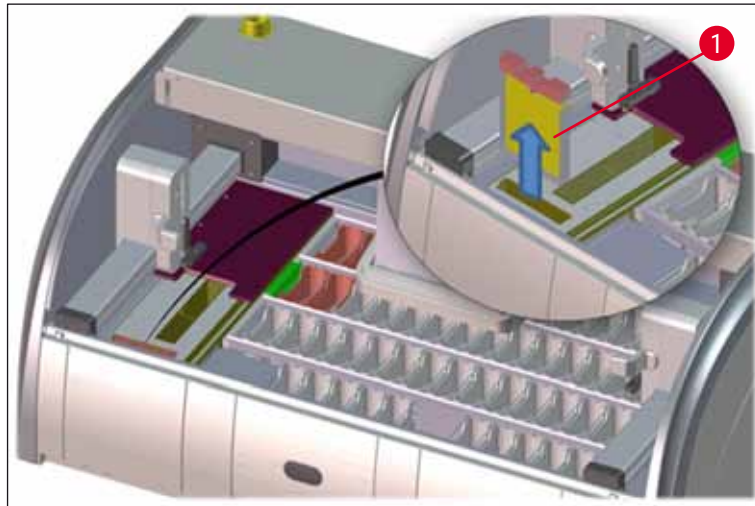


Bild 101



Obs!

Monteringen sker i omvänd ordning.

7.18 Intervall för underhåll och rengöring



Varning

- Följande underhålls- och rengöringsarbeten måste utföras.
- Minst en gång om året ska instrumentet kontrolleras av en Leica-auktoriserad servicetekniker för att en fortsatt funktionsduglighet ska kunna garanteras.

För att säkerställa att instrumentet fungerar felfritt på lång sikt rekommenderas följande:

- Att ett underhållsavtal tecknas efter garantitidens utgång. Mer information om detta finns hos ansvarig serviceorganisation.

7.18.1 Dagligt underhåll och rengöring



Varning

Om ömtåliga instrumentdelar och -områden blir väldigt smutsiga eller om reagenser spills på dem måste delarna rengöras direkt för att säkerställa ett driftsäkert arbetsflöde.

- 1 Kontrollera och fyll/fyll på reagenskyvetterna. (→ Sida 88 – 6.2.1 Förbereda och hantera reagenskyvetter)
- 2 Täck över reagenskyvetterna och förvara dem övertäckta i kylskåp vid behov.
- 3 Kontrollera om det finns paraffin- eller färgrester och krossat glas i racken och på handtagen. (→ Sida 116 – 7.11 Rack och handtag)
- 4 Kontrollera om det finns reagensrester i avläsningsstationen för objektglas och rengör den vid behov. (→ Sida 112 – 7.6 Avläsningsstation för objektglas)
- 5 Kontrollera om det finns lösningsmedelsrester på ytorna kring laddnings- och utmatningsfacken och rengör dem vid behov. (→ Sida 113 – 7.7 Laddnings- och utmatningsfack)
- 6 Kontrollera och rengör den torra överföringsstationens mellanlägg vid behov. (→ Sida 113 – 7.8 Torr överföringsstation)
- 8 Kontrollera om det finns reagensrester i överföringsstationen (tillval) och rengör den vid behov. (→ Sida 114 – 7.9 Överföringsstation (tillval))

7.18.2 Underhåll och rengöring efter behov

- 1 Rengör bildskärmen med en luddfri trasa. Ett rengöringsmedel för bildskärmar kan användas om tillverkarens anvisningar följs. (→ Sida 111 – 7.3 TFT-pekskärm)
- 2 Rengör utvändiga/målade ytor. (→ Sida 111 – 7.2 Utvändiga ytor, lackerade ytor, instrumentets kåpa)
- 3 Rengör instrumentets kåpa. (→ Sida 111 – 7.2 Utvändiga ytor, lackerade ytor, instrumentets kåpa)

7.18.3 Rengöring och underhåll varje vecka

- | | | |
|----------|--|---|
| 1 | Kontrollera/rengör sköljvattenkyvetterna om det finns bakteriella kontamineringar och kontrollera tätningsringarna för att se till att de sitter på plats. | (→ Sida 114 – 7.10 Reagenskyvetter och sköljvattenkyvetter) |
| 2 | Rengör reagenskyvetterna. | (→ Sida 114 – 7.10 Reagenskyvetter och sköljvattenkyvetter) |
| 4 | Rengör racken och handtagen. | (→ Sida 116 – 7.11 Rack och handtag) |
| 5 | Kontrollera att vattenavloppet och silen inuti instrumentet fungerar och rengör vid behov. | (→ Sida 116 – 7.12 Vattenavlopp) |
| 6 | Kontrollera om det finns smuts på överföringsarmarna och rengör dem vid behov. | (→ Sida 112 – 7.5 Överföringsarmar) |

7.18.4 Rengöring och underhåll varje månad

- | | | |
|----------|---|---|
| 1 | Kontrollera vattentilloppsfiltret (visuell kontroll genom filterhuset). | (→ Sida 117 – 7.14 Byta filterpatronen till vatteninloppsfiltret) |
| 2 | Kontrollera, rengör eller byt vid behov ut luftfiltret till torkugnen. | (→ Sida 141 – 9.2 Valbara tillbehör)
(→ Sida 121 – 7.17 Ugnens luftfilter) |
| 3 | Rengör dräneringstråget. | (→ Sida 112 – 7.4 Insida och avrinningskärl) |
| 4 | Kontrollera om det finns paraffinrester på torkugnsinsatsen och uppsamlingsbrickan. Rengör vid behov. | (→ Sida 119 – 7.16 Rengöra ugnarna) |

7.18.5 Rengöring och underhåll var tredje månad

- | | | |
|----------|----------------------------|--|
| 1 | Byt det aktiva kolfiltret. | (→ Sida 118 – 7.15 Byta det aktiva kolfiltret) |
|----------|----------------------------|--|

7.18.6 Rengöring och underhåll varje år

- | | |
|----------|---|
| 1 | Kontroll och underhåll av instrumentet som utförs av en Leica-auktoriserad servicetekniker. |
|----------|---|

8. Fel och felsökning

8.1 Åtgärder för fel på instrumentet

Fel/avvikelse

Stigande vattennivå i avrinningskärlet med larm.

Orsak

Vattenavloppet helt eller delvis blockerat

Avloppssystemet inuti instrumentet och/eller avloppssilen helt eller delvis blockerade.

Felsökning

Kontroll och underhåll av vattenavloppsslangen (→ "Bild 7-1"). Kontakta ansvarig Leica-service för detta.

Kontroll och underhåll av avloppssystemet i instrumentet.

Se rengöringsanvisningarna i avsnittet (→ Sida 121 – 7.18 Intervall för underhåll och rengöring).

Om blockeringen kvarstår stoppas vattenflödet till kranvattenkyvetterna och infärgningsprocessen avbryts. Därför måste preparaten avlägsnas från instrumentet och placeras på en säker plats eller på en tillfällig förvaringsplats (→ Sida 126 – 8.2 Strömavbrott och fel på instrumentet).

Kontroll och underhåll av kranvattenkyvetterna.

Se rengöringsanvisningarna (→ Sida 114 – 7.10 Reagenskyveter och sköljvattenkyveter).

Följ regelbundna underhållsintervall.

Minskad tvättning under pågående infärgningsförlopp med möjliga inkonsekventa infärgningsresultat.

Vattentillförseln i kranvattenkyvetterna reducerad/blockerad.

Möjliga orsaker:

- Kranvattenkyvetterna sitter inte ordentligt (kontrollera O-ringen).
- Kalkavlagringar i kranvattenkyvetterna.

Kranvattenkyvetterna töms inte automatiskt under instrumentets driftuppehåll. Stillastående vatten kan utgöra en källa till mikrobiologisk förorening av kranvattenkyvetterna och proverna.

Det extra avloppshålet längst ner i kranvattenkyvetterna är igensatt av avlagringar/smuts.

Kontroll och underhåll av kranvattenkyvetterna.

Se rengöringsanvisningarna (→ Sida 114 – 7.10 Reagenskyveter och sköljvattenkyveter).

Följ regelbundna underhållsintervall.

Fel/avvikelse	Orsak	Felsökning
Otillräcklig sköljning under pågående infärgningsprocesser kan leda till inkonsekventa infärgningsresultat.	Vattentrycket i labbets vattensystem är för lågt eller växlar under dagen.	De angivna minimikraven för vattentryck (→ Sida 19 – 3.2 Specifikationer) måste uppfyllas (även under eventuella avvikelser under dagtid).
Reagenskyvetterna är deformerade.	Användning av otillåtna reagenser (t.ex. fenol i Ziehl-Neelsen-infärgning eller Gram-infärgning osv.). Felaktigt utförd rengöring.	Kontrollera reagenserna med hjälp av listan över godkända reagenser (→ Sida 152 – A1. Bilaga 1 – Godkända reagenser). Se rengöringsanvisningarna (→ Sida 114 – 7.10 Reagenskyvetter och sköljvattenkyvetter).
Inkonsekventa infärgningsresultat	Toleransen för ett programsteg för infärgningsreagenser är inte korrekt angiven.	Kontrollera infärgningsprogram och reagenser. De flesta korta programsteg kräver att infärgningssteget följs exakt. Reagensens tolerans måste ställas in på 0 %.
Avvikande infärgningsresultat	Processklasserna (avlägsnande av paraffin, infärgning osv.) för reagenser har inte tilldelats korrekt. Det här innebär att reagensuppställningen inte har skapats på ett korrekt sätt. Reagenser som endast ska användas i ett program används av flera program. Reagensen var förorenad eftersom den inte hade programmerats som Exklusive .	Kontroll och korrigering av tilldelade reagensklasser (→ Sida 58 – Skapa en ny reagens eller kopiera en reagens). Kontroll och korrigering av programmeringen av berörda reagenser.
Bristfällig infärgningskvalitet	Vattenkvaliteten motsvarar inte typ 1, ISO 3696	Kontrollera vattenkvaliteten enligt ISO 3696 och korrigera den vid behov.
Vävnad fäster dåligt på objektglaset efter torkning och flyter iväg under infärgningsprocessen.	Kunddefinierade program: Den valda uppvärmningstiden och/eller ugnstemperaturen är för lågt inställda.	Kontrollera och korrigera uppvärmningstid och ugnstemperatur för kunddefinierade program.
Trots att infärgningsprocesserna är slutförda går det inte att utföra nya eller ytterligare programmeringar (arbetsledarläge).	Programmering kan endast slutföras när instrumentet befinner sig i viloläge. Detta innebär att inga rack får vara aktiva, inklusive utmatningsfacken.	Avlägsna racken från utmatningsfacket. Utför därefter programmeringen.

Fel/avvikelse	Orsak	Felsökning
Initieringen av instrumentet kan inte slutföras.	Armarna är blockerade.	Kontrollera att det aktiva kolfiltret sitter korrekt.
Den automatiska skanningen av påfyllningsnivå visar felaktiga resultat.	De handtag som används till reagenskyvetterna sticker ut över reagenskyvetterna och tolkas felaktigt i skanningen av påfyllningsnivån.	Kontrollera att reagenskyvetternas handtag sitter korrekt och korrigera vid behov.
Den automatiska skanningen av påfyllningsnivå visar felaktiga resultat för laddningsfackets stationer och/eller den torra överföringsstationen. Enstaka stationer rapporteras som "Saknas".	Avlagringar på botten av de tomma reagenskyvetterna och/eller den torra överföringsstationen påverkar mätmetoden för den automatiska skanningen av påfyllningsnivån.	Rengör reagenskyvetterna och/eller den torra överföringsstationen och avlägsna eventuella kalkrester. Upprepa därefter skanningen av påfyllningsnivån (→ Sida 90 – 6.2.2 Automatisk skanning av påfyllningsnivå)

8.2 Strömavbrott och fel på instrumentet



Obs!

- I händelse av ett kortvarigt strömavbrott (några sekunder) har HistoCore SPECTRA ST en intern UPS (avbrotts säker strömkälla). Användaren informeras om det kortvariga strömavbrottet via ett informationsmeddelande på skärmen. Informationsmeddelandet försvinner så fort strömmen kommer tillbaka. Händelsen läggs till i händelseloggen.
- Att kringgå ett längre strömavbrott är endast möjligt med hjälp av en extern UPS ([→ Sida 29 – 4.3.1 Använda en extern avbrottsfri strömkälla \(UPS\)](#)).

Instrumentet stängs av vid ett längre strömavbrott (> 3 sekunder). Händelsen läggs till i händelseloggen.

Den interna UPS:en säkerställer att överförbara rack placeras i en säker position ovanför två reagensstationer ([→ "Bild 102"](#)) för att förhindra att dessa av misstag sänks ner i en felaktig reagens.



Varning

Reagenser kan hamna fel till följd av att det finns reagenser kvar när ett rack flyttas. Kontrollera om det finns föroreningar i reagenskyvetterna och byt ut dem vid behov innan en infärgningsprocess startas ([→ Sida 97 – Reagensbyte](#)).



Bild 102

Instrumentet startas om så fort strömmen kommer tillbaka.

Under initieringen skickar instrumentets mjukvara ut en serie meddelanden och instruktioner till användaren, vilket ger hen information om strömbavbrottet samt instruktioner om åtgärder.

Användaren kan avbryta eller fortsätta infärningsprocessens mjukvara med hjälp av informationen på skärmen.

**Varning**

Rack som befinner sig i en "kritisk" position måste omedelbart avlägsnas från instrumentet av användaren.

Reagensstationer som räknas som i "kritiska" positioner är de vars överdrivet långa verkningstid kan leda till försämrad infärningskvalitet eller förstörda prover.

Kritiska positioner:

- » Stationer för kranvatten (→ "Bild 103-1") och avjoniserat vatten (→ "Bild 103-2")
- ① Kyvetterna kan tömmas och preparaten kan torka ut genom automatisk, kontinuerlig uttömning av vatten i kyvetternas botten. Preparaten måste avlägsnas från instrumentet och förvaras på ett säkert sätt, dvs. infärgningen måste slutföras manuellt.
- » Torr överföringsstation (→ "Bild 103-3")
- ① Preparatet är inte placerat i en reagens och kan torka ut. Preparaten måste avlägsnas från instrumentet och förvaras på ett säkert sätt, dvs. infärgningen måste slutföras manuellt.
- » Avläsningsstation för objektglas (SID): (→ "Bild 103-4")
- ① Vid strömavbrott placeras ett rack som är isatt i avläsningsstationen för objektglas på en säker plats mellan två reagensstationer (→ "Bild 102"). Avlägsna racket enligt beskrivningen i (→ Sida 134 – 8.2.4 Avlägsna ett rack från griparmekanismen) och sätt tillbaka det i laddningsfacket.
- » Ugnstationer: (→ "Bild 103-5")
- ① Temperaturen i ugnstationen kan sjunka under ett långvarigt strömavbrott. Det kan leda till att preparaten inte torkar ordentligt. De berörda racken ska avlägsnas från ugnen och sättas tillbaka i laddningsfacket.
- » Överföringsstation (→ "Bild 103-8")
- ① Preparaten är inte placerade i en reagens och kan torka ut. Preparaten ska avlägsnas från instrumentet och förvaras säkert eller sättas i manuellt och förses med täckglas i laddningsfacket i HistoCore SPECTRA CV.

**Varning**

Användaren måste kontrollera om det finns ytterligare rack i de kvarvarande reagensstationerna (→ "Bild 103-6"), i vilka för långa verkningstider kan leda till dålig infärgningskvalitet beroende på vilka reagenser som används i dessa stationer. Preparaten måste avlägsnas från instrumentet och förvaras på ett säkert sätt, dvs. infärgningen måste slutföras manuellt.

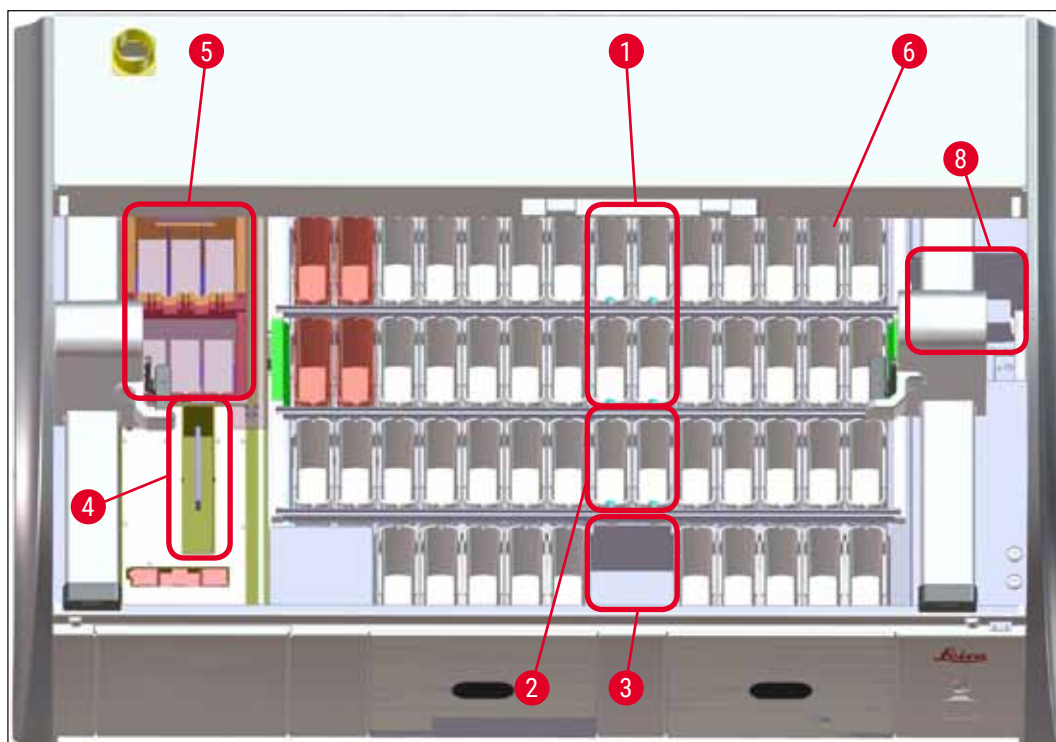


Bild 103

8.2.1 Rutin vid strömbrott

- ① Det första informationsmeddelandet efter det att enheten har startats om informerar operatören om tidpunkten för strömbrottet (→ "Bild 104"). Bekräfta informationsmeddelandet genom att trycka på **OK** för att få instruktioner för att fortsätta infärgningen.

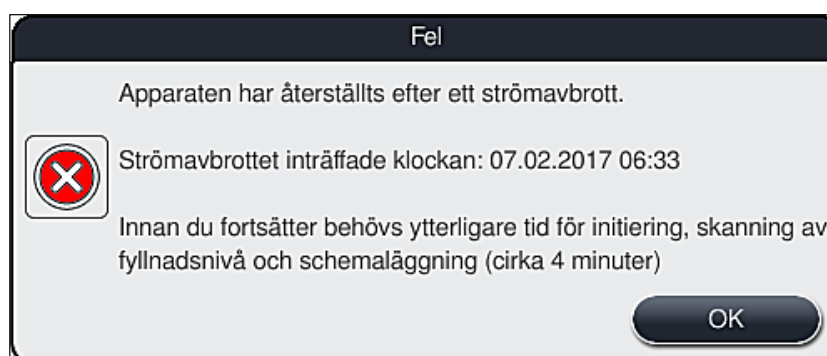


Bild 104

1. Efter det att informationsmeddelandet har bekräftats får användaren information om att infärgningsperioderna kan ha överskridits, dvs. enskilda rack kan ha legat för länge i en reagens vid vissa förhållanden eller i en kritisk station, vilket kan försämra infärgningskvaliteten. Bekräfta informationsmeddelandet (→ "Bild 105") och fortsätt genom att trycka på **OK**.



Bild 105

2. Därefter uppmanas användaren att kontrollera (→ "Bild 106") om instrumentet har placerat ett eller två rack i en säker position mellan två reagenskyvetter (→ "Bild 102").

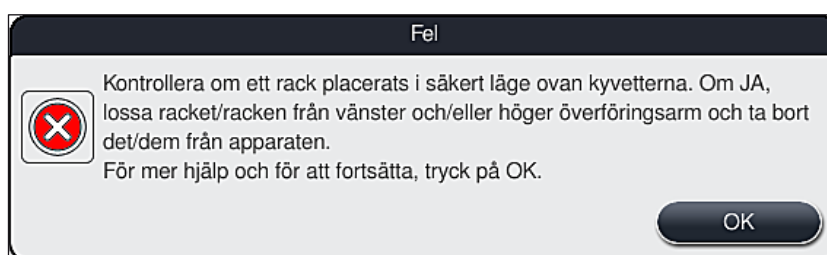


Bild 106

3. Efter det att användaren har tryckt på knappen **OK** (→ "Bild 106") visas ett annat informationsmeddelande (→ "Bild 107") som informerar om hur respektive rack ska avlägsnas på ett korrekt sätt.

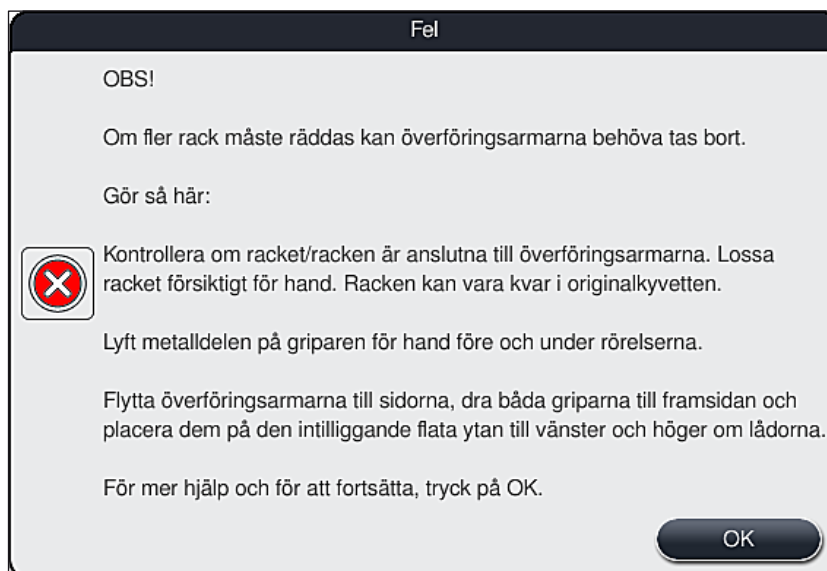


Bild 107

4. Därefter kan användaren välja att återuppta infärgningsprocessen (→ Sida 131 – 8.2.2 Återuppta infärgningsprocessen efter ett strömavbrott) eller avbryta den (→ Sida 133 – 8.2.3 Avbryta alla infärgningsprocesser vid ett strömavbrott) (→ "Bild 108").

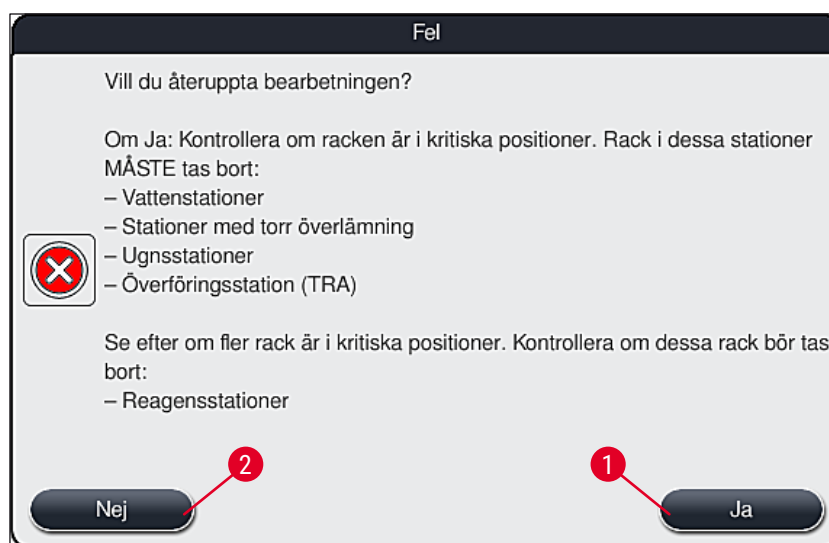


Bild 108

8.2.2 Återuppta infäringsprocessen efter ett strömavbrott

1. För att återuppta infäringsprocessen trycker du på knappen **Ja** (→ "Bild 108-1").

**Obs!**

I följande meny visas racken som är aktiva i översikten av reagensuppställningen (→ "Bild 109").

2. Avlägsna kritiska rack från instrumentet enligt instruktionerna i det tidigare informationsmeddelandet (→ "Bild 108") och bekräfta borttagningen genom att trycka på motsvarande station (→ "Bild 109-1") på skärmen.

**Obs!**

- Vid strömavbrott kan de aktiva racken endast avlägsnas på det sätt som beskrivs här.
- Preparaten från de borttagna racken måste förvaras på ett säkert sätt utanför instrumentet, dvs. infärgningen måste slutföras manuellt.

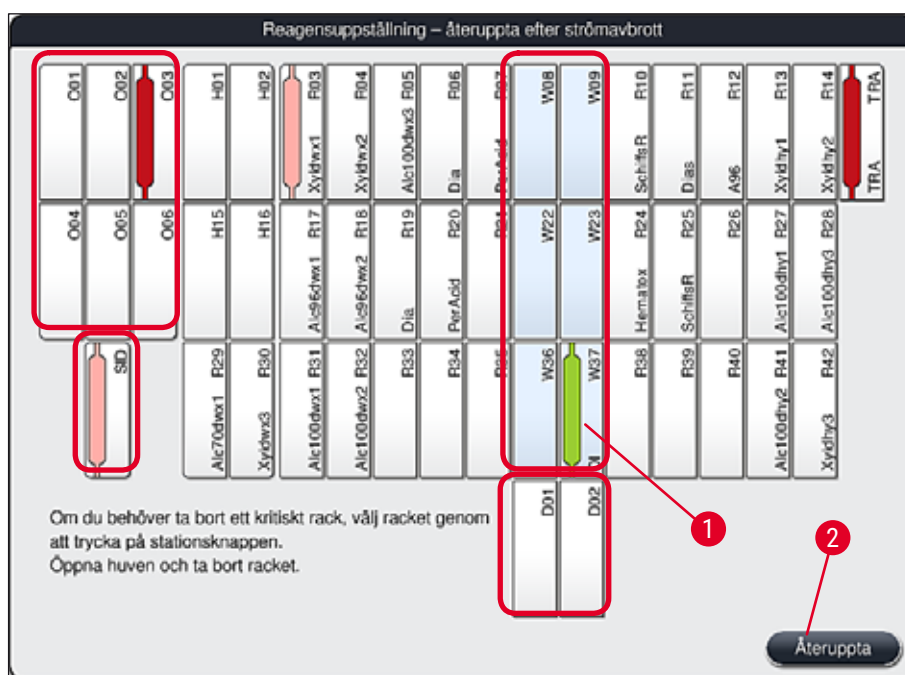


Bild 109

- När alla kritiska rack har avlägsnats trycker du på knappen **Återuppta**. Se det efterföljande informationsmeddelandet och bekräfta genom att trycka på knappen **OK**.
- Instrumentet kommer slutligen att utföra en automatisk skanning av påfyllningsnivån och återupptar infäringsprocessen för de rack som är kvar i instrumentet.



Varning

- De kvarvarande racken i laddningsfacket upptäcks inte under vissa omständigheter. Öppna i så fall laddningsfacket och stäng det igen.
- Ett program måste tilldelas till de vita racken igen.
- När det gäller vita rack måste laddningsfacket öppnas och objektglasmarkeringen kontrolleras för att identifiera det program som ska tilldelas igen.

8.2.3 Avbryta alla infärgningsprocesser vid ett strömavbrott

1. Om infärgningsprocessen ska avbrytas för alla rack trycker du på knappen **Nej** (→ "Bild 108-2") och bekräftar det efterföljande varningsmeddelandet genom att trycka på **OK** (→ "Bild 110-1") för att börja avlägsna racken.



Obs!

Du kan ångra avbrottet av infärgningen och återgå till den tidigare urvalsmenyn (→ "Bild 108") genom att trycka på knappen **Avbryt** (→ "Bild 110-2").

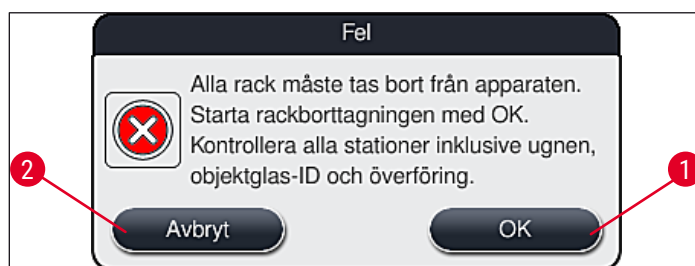


Bild 110

2. Öppna instrumentets kåpa och avlägsna alla rack.
3. Bekräfta borttagningen av rack genom att trycka på motsvarande station (→ "Bild 111-1") på skärmen.

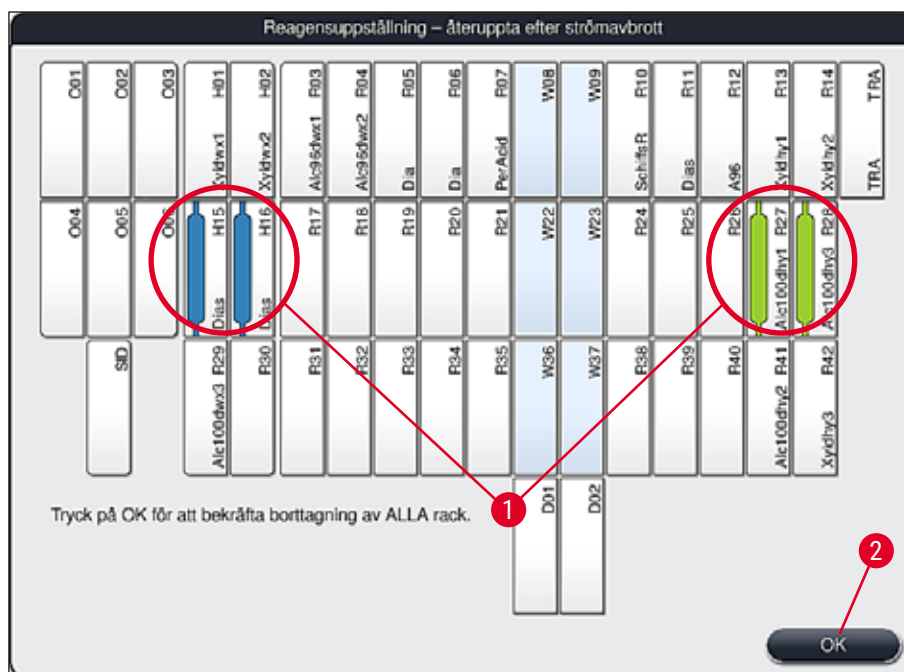


Bild 111

4. Efter att ha tagit bort alla rack trycker du på knappen **OK** (→ "Bild 111-2") för att lämna menyn och återgå till instrumentets initiering.


**Varning**

- De kvarvarande racken i laddningsfacket upptäcks inte under vissa omständigheter. Öppna i så fall laddningsfacket och stäng det igen.
- Ett program måste tilldelas till de vita racken igen.
- När det gäller vita rack måste laddningsfacket öppnas och objektglasmarkeringen kontrolleras för att identifiera rätt program.

- ✓ Efter det att kritiska rack har avlägsnats från instrumentet fortsätter behandlingen av kvarvarande rack och nya rack kan sättas i laddningsfacket.

8.2.4 Avlägsna ett rack från griparmekanismen

- ① Racken är fästa i den nedre delen av griparmekanismen med hjälp av två krokar. Vid strömavbrott måste racken avlägsnas från griparmekanismen för att kunna tas bort från instrumentet.
1. Ta tag i undersidan av det färgade rackhantaget med en hand (→ "Bild 113-2") och tryck det försiktigt uppåt (→ "Bild 113-3").
 2. Skjut racket ca 1 cm mot preparatet (→ "Bild 113-4").
 3. Ta tag i griparmekanismen (→ "Bild 113-1") med din lediga hand, skjut det uppåt (→ "Bild 113-5") och håll fast ordentligt.
 4. Racket kan nu avlägsnas från instrumentet och läggas åt sidan.
 5. Slutligen ska du dra griparmekanismen framåt och försiktigt lägga den på den fria ytan bredvid det vänstra laddningsfacket (→ "Bild 114-3") eller bredvid det högra utmatningsfacket (→ "Bild 114-6").

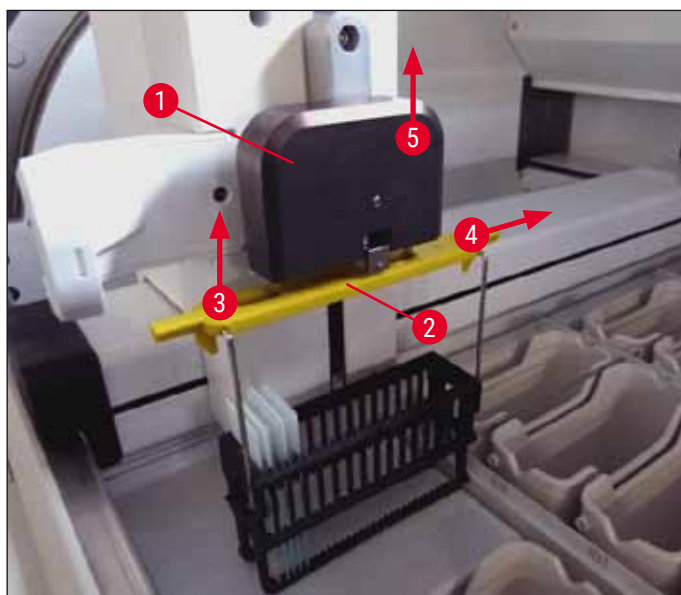**Bild 113**

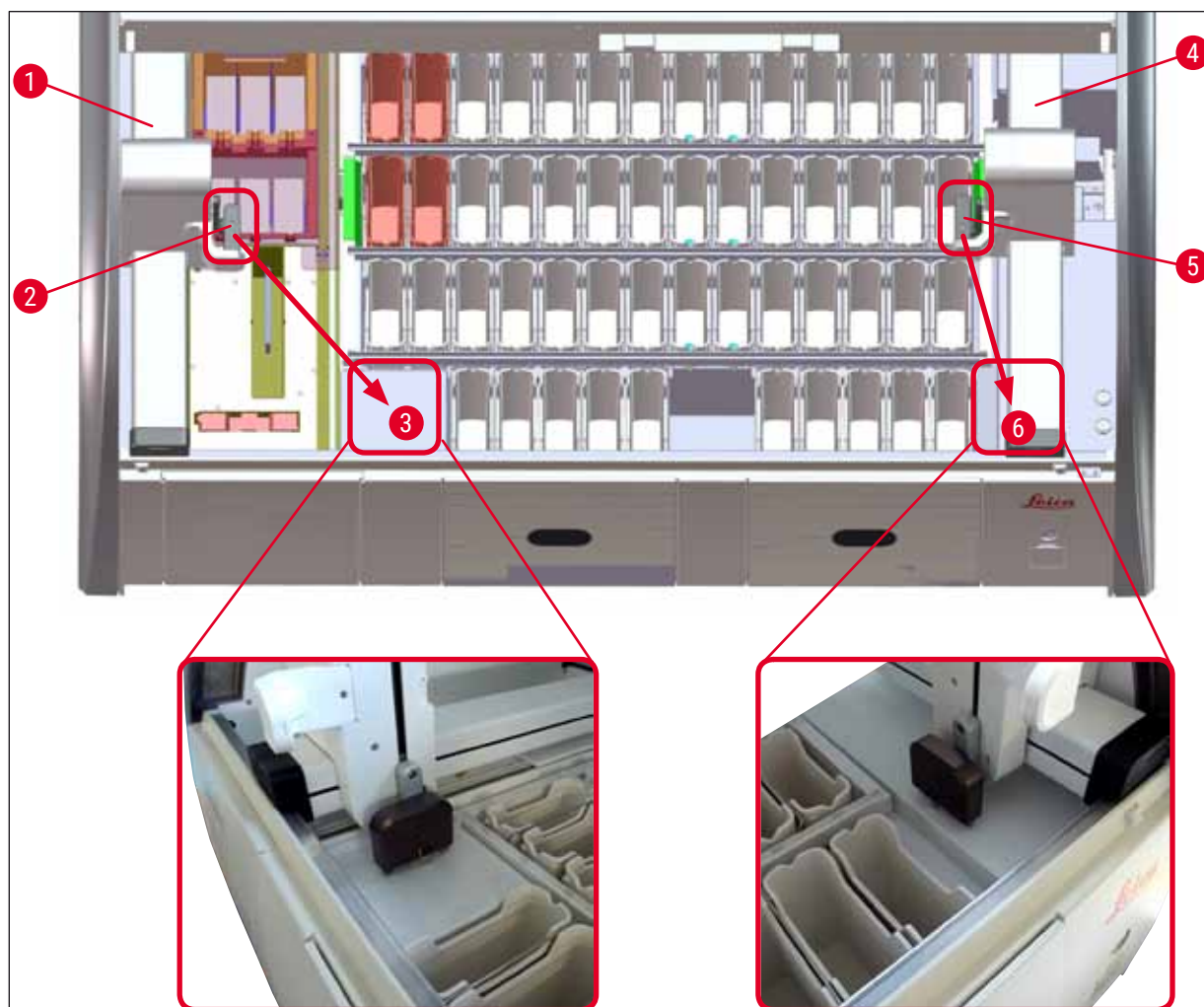


Bild 114

**Varning**

När instrumentet har startats om kommer ett felmeddelande att visas, vilket kan användas för att öppna reagensuppställningen (→ "Bild 39") för att få hjälp med att ta bort det specifika racket. Alla aktiva rack måste avlägsnas manuellt från instrumentet av användaren. Kontrollera även avläsningsstationen för objektglas (→ "Bild 3-2") samt ugnen (→ "Bild 3-10") på racket och byt ut dem vid behov:

Preparaten måste förvaras i en lämplig reagens utanför instrumentet och de påbörjade infärkningsprogrammen måste slutföras manuellt. Användaren är ansvarig för den fortsatta bearbetningen av proverna.

- När strömförsörjningen är återställd kan instrumentet startas på nytt och laddas med nya preparat.

**Obs!**

Vid allvarliga funktionsfel som kräver att proverna avlägsnas ur instrumentet på grund av att infärkningsprocessen avbryts ska anvisningarna i strömavbrottsscenarioet följas. Allvarliga instrumentfel indikeras av en särskild larmsignal (→ Sida 45 – 5.7.4 Meny för larmljud – fel- och signalljud).

8.2.5 Borttagning av rack från överföringsstationen

- ① Om funktionsfel uppstår i arbetsstationsläge medan överföringsenheten i HistoCore SPECTRA ST för över rack till HistoCore SPECTRA CV med överföringsstationen, måste användaren se efter var racken är placerade.
1. Öppna kåpan på HistoCore SPECTRA ST.
 2. Se efter om något rack fortfarande syns från överföringsstationen (→ "Bild 115-1").

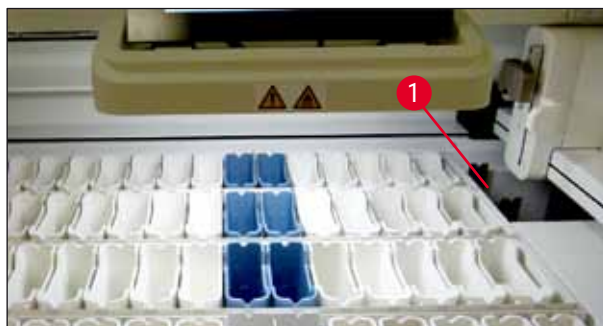


Bild 115

3. Om så är fallet, tryck tillbaka överföringsstationens släde (→ "Bild 116-1") i HistoCore SPECTRA ST manuellt (→ "Bild 116-2") och ta bort racket (→ "Bild 116-3") från hållaren (→ "Bild 116-4").

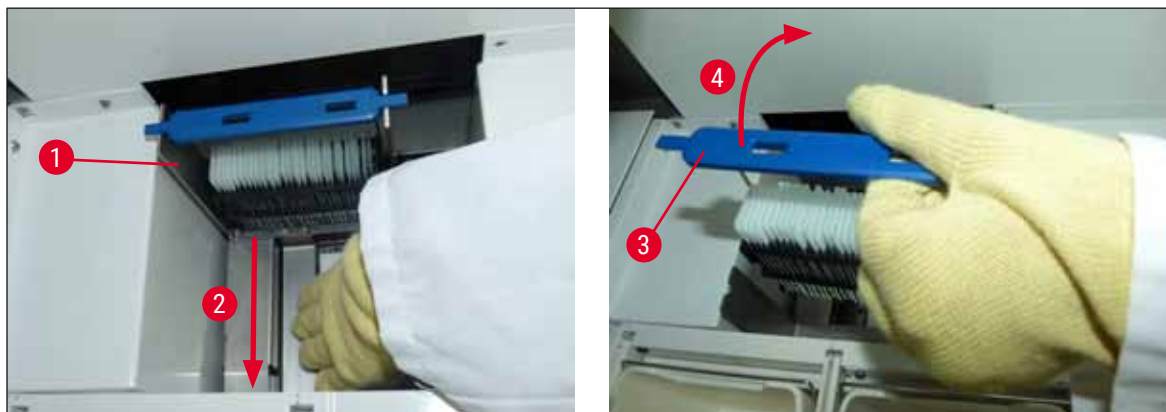


Bild 116

4. Ta därefter bort racket från instrumentet och förvara det på ett säkert sätt.
5. När instrumentets funktionsfel har åtgärdats, för in racket i laddningsfacket på HistoCore SPECTRA CV så att täckglasappliceringen startar.

8.3 Byta ut huvudsäkringar



Varning

Om instrumentet slutar fungera ska det stängas av med hjälp av strömbrytaren och kopplas bort från elnätet. Huvudsäkringarna kan nu kontrolleras.

- Öppna kåpan och skruva loss de två säkringshållarna överst på höger lucka (→ "Bild 117-1") med en spårskruvmejsel och kontrollera att de är hela.



Varning

Använd en lämplig spårskruvmejsel så att säkringshållaren inte skadas.



Varning

Se upp om säkringen är trasig! Det kan finnas risk för skador på grund av krossat glas!



Bild 117

- Om en säkring är trasig, avlägsna den från säkringshållaren och sätt i en ny säkring (→ Sida 18 – 3.1 Standardleverans).
- Monteringen sker i omvänd ordning.

8.4 Remote Care

Med hjälp av Remote Care kan en Leica-servicetekniker på distans övervaka, få åtkomst till och reparera produkterna som används hos användaren.

Om instrumentet är anslutet till Remote Care (→ Sida 56 – 5.7.10 Nätverksinställningar) och ett fel uppstår kan en servicetekniker från Leica komma åt skärmen direkt efter godkännande från användaren.

- För att göra detta möjligt ska Leicas service kontaktas och informeras om störningen som har uppstått.
- Leica-serviceteknikern kan då komma åt instrumentet via Remote Care.
- Användaren informeras via ett informationsmeddelande på bildskärmen och godkänner åtkomsten till instrumentet genom att bekräfta meddelandet.
- Leica-serviceteknikern försöker tillsammans med användaren att åtgärda störningen.
- När fjärrstyrningen är färdig kan Remote Care kopplas från av användaren (→ "Bild 16-4") eller av serviceteknikern från Leica.



Obs!

Användaren kan avsluta en pågående Remote Care-anslutning när som helst genom att trycka på anslutningssymbolen (→ "Bild 16-4").

8.5 Stopp i vattenavloppet

Blockeringar i vattenavloppssystemet (i avloppssilen (→ "Bild 96-1") eller i avloppsslangen (→ "Bild 7-1") kan leda till förhöjda vattennivåer i avrinningskärlet. Detta kan leda till kritiska vattennivåer i instrumentet. Användaren får ett felmeddelande (→ "Bild 118") på skärmen och en larmsignal utlöses.

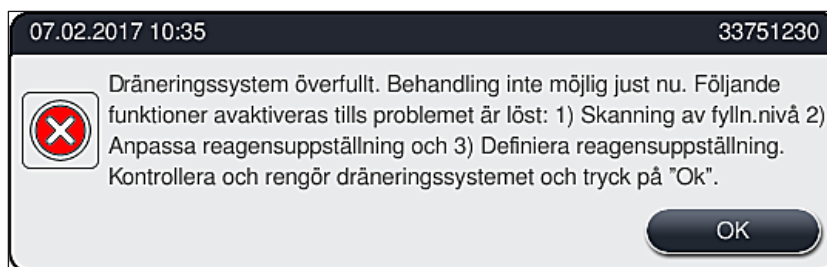


Bild 118



Varning

Dålig kvalitet och fördröjd infärgning kan uppstå vid alltför höga vattennivåer i instrumentet till följd av blockeringar stopp i vattenavloppssystemet. Pågående infärgningsprogram stoppas tillfälligt. Blockeringen ska omedelbart åtgärdas av användaren enligt beskrivningen nedan.

Åtgärda blockeringar i vattenavloppssystemet**Varning**

- Om racken är kvar i sköljvattenkyvetterna ska de avlägsnas och förvaras i vatten utanför instrumentet.
- Notera det borttagna racks position så att infärgningen kan återupptas efter det att blockeringen har åtgärdats.
- De närliggande reagenskyvetterna ska täckas över för att skyddas och kan vara kvar i instrumentet.

1. Öppna instrumentets kåpa om varningsmeddelandet visas (→ "Bild 118").
2. Avlägsna försiktigt sköljvattenkyvetterna och (vid behov) reagenskyvetterna som sitter ovanför avloppssilen (→ Sida 116 – 7.12 Vattenavlopp).

**Varning**

Var försiktig när du avlägsnar sköljvattenkyvetterna. Plocka ur varje sköljvattenkyvett för sig och låt vattnet som är inuti rinna av i avrinningskärlet. Sköljvattenkyvetterna måste tömmas helt för att de ska kunna avlägsnas från instrumentet utan att vatten droppar ner i reagenskyvetterna.

3. Kontrollera om det är stopp i avloppssilen eller den böjda avloppsslangen inuti instrumentet (→ "Bild 96-2") och rengör dem enligt anvisningarna i (→ Sida 116 – 7.12 Vattenavlopp) och (→ Sida 117 – 7.13 Vattenavloppsslang) vid behov.
4. Om vattnet rinner undan kan de borttagna sköljvattenkyvetterna, reagenskyvetterna och racken sättas tillbaka.

**Varning**

Observera att du måste ta bort locken från reagenskyvetterna innan du stänger instrumentets kåpa.

5. Stäng instrumentets kåpa och bekräfta informationsmeddelandet (→ "Bild 119") genom att trycka på **OK**.

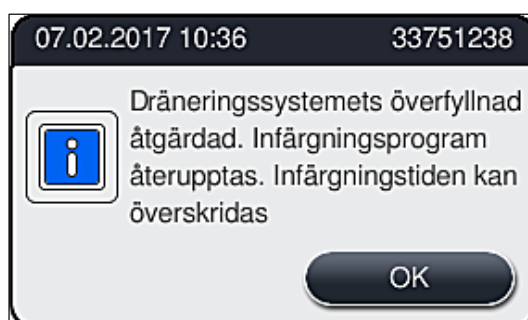


Bild 119

**Varning**

Om blockeringen inte kan åtgärdas av användaren och om vattennivån i avrinningskärlet fortsätter att vara kritisk måste alla rack avlägsnas från instrumentet. Informationsmeddelandet (→ "Bild 120") om att rack måste avlägsnas ska alltid följas. Informationsmeddelandet visas efter det att instrumentets kåpa har stängts och efter det att instrumentet har registrerat att blockeringen inte kan åtgärdas.

Notera att programmen inte längre är körbara och att Leica Service måste kontaktas.

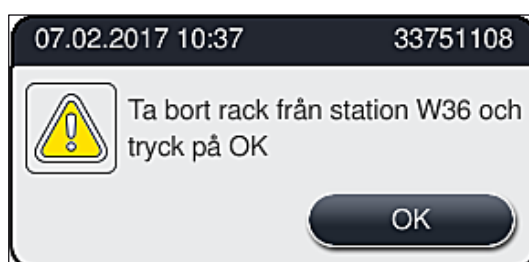


Bild 120

9. Instrumentets komponenter och specifikationer

9.1 Valbara komponenter till instrumentet

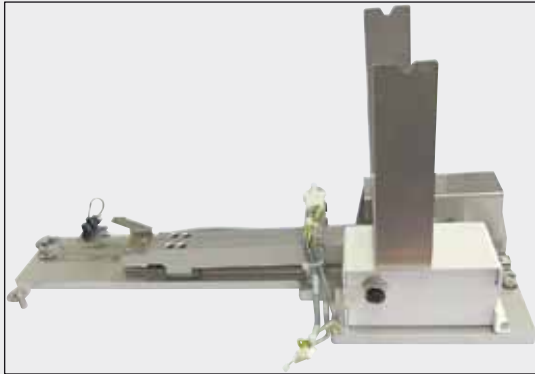


Bild 122

HistoCore arbetsstationssats

Till för användning i HistoCore SPECTRA ST för att överföra provet till en ansluten automatisk täckglasapplikator, HistoCore SPECTRA CV. De två instrumenten bildar en arbetsstation efter det att satsen har installerats.

Satsen innehåller överföringsmodulen och alla delar som behövs för integrering i HistoCore SPECTRA ST.

Beställningsnr:

14 0512 54355

9.2 Valbara tillbehör

Beteckning	Beställningsnr
Ventilationsslang, 2 m	14 0512 54365
Sats med aktiva kolfilter (2 st.)	14 0512 53772
Reservfilter till ugnens luftfilter (3 st.)	14 0512 54943
Avloppsvattenslang, 2 m	14 0512 55279
Tilloppsslang	14 0474 32325
Reagenskyvett, komplett, inklusive reagenskyvettlock	14 0512 47086
Sats med kyvettlock, 3 stycken per sats	14 0512 57846
Vattenanslutningssats:	14 0512 49324
2 st. vattentillförselslang, 10 mm, 2,5 m	14 0474 32325
1 st. förlängningsslang 1,5 m	14 0512 49334
1 st. Y-koppling G3/4	14 3000 00351
1 st. dubbelnippel G3/4 G1/2	14 3000 00359
1 st. filterhus	14 0512 49331
1 st. filterpatron	14 0512 49332
1 st. rörkoppling G3/4	14 3000 00360
1 st. blindkåpa G3/4	14 3000 00434
1 st. packningsbricka	14 0512 54772
1 st. skiftnyckel SW30 DIN894	14 0330 54755

Beteckning	Beställningsnr
HistoCore arbetsstationssats	14 0512 54355
Mellanlägg för speciell infärgning	14 0512 49261
Vattenfilterhållare	14 0512 59363
Sköljvattenkyvett, blå, sats	14 0512 47087
Molykote 111 smörjfett, 100 g	14 0336 35460
Sats med etiketter för matnings- och utmatningsfack (10 blanka, 5 st "H2O"=vatten, "A"=alkohol och "S"=lösningsmedel, t.ex. xylen)	14 0512 55161
O-ringar 7x2, för anslutningsstycke till sköljvattenkyvett (12 st. per förpackning)	14 0253 54716
Rack för 30 objektglas* (3 st. per förpackning)	14 0512 52473
Rack för 5 objektglas* (3 st. per förpackning)	14 0512 52475
Handtag till rack för 30 objektglas* (gula, 3 st. per förpackning)	14 0512 52476
Handtag till rack för 30 objektglas* (ljusblå, 3 st. per förpackning)	14 0512 52477
Handtag till rack för 30 objektglas* (mörkblå, 3 st. per förpackning)	14 0512 52478
Handtag till rack för 30 objektglas* (rosa, 3 st. per förpackning)	14 0512 52479
Handtag till rack för 30 objektglas* (röda, 3 st. per förpackning)	14 0512 52480
Handtag till rack för 30 objektglas* (gröna, 3 st. per förpackning)	14 0512 52481
Handtag till rack för 30 objektglas* (svarta, 3 st. per förpackning)	14 0512 52482
Handtag till rack för 30 objektglas* (grå, 3 st. per förpackning)	14 0512 52483
Handtag till rack för 30 objektglas* (vita, 3 st. per förpackning)	14 0512 52484
Handtag till rack för 5 objektglas* (gula, 3 st. per förpackning)	14 0512 52494
Handtag till rack för 5 objektglas* (ljusblå, 3 st. per förpackning)	14 0512 52495
Handtag till rack för 5 objektglas* (mörkblå, 3 st. per förpackning)	14 0512 52496
Handtag till rack för 5 objektglas* (rosa, 3 st. per förpackning)	14 0512 52497
Handtag till rack för 5 objektglas* (röda, 3 st. per förpackning)	14 0512 52498
Handtag till rack för 5 objektglas* (gröna, 3 st. per förpackning)	14 0512 52499
Handtag till rack för 5 objektglas* (svarta, 3 st. per förpackning)	14 0512 52500
Handtag till rack för 5 objektglas* (grå, 3 st. per förpackning)	14 0512 52501
Handtag till rack för 5 objektglas* (vita, 3 st. per förpackning)	14 0512 52502

(* Objektglas)



Obs!

- Information om tillgängliga Leica Reagent Kit och godkända Leicaprogram kan fås på begäran av ansvarig försäljningsavdelning på Leica.
- Dessutom medföljer en bruksanvisning varje Leica Reagent Kit, där källan för import av godkända Leica-program anges.

Rackhandtag för rack från andra tillverkare**Obs!**

Användning av den här rackadaptern har kontrollerats en gång i HistoCore SPECTRA ST tillsammans med Sakura-objektglashållare (Sakura 20 objektglaskorg, produktkod 4768) finns från och med oktober 2017.

Eftersom objektglashållarens tillverkare kan ha ändrat hållarens utformning efter det att Leica provat den, rekommenderar vi att kunden testkör hållaren innan adaptern används för kliniska prov.

Adapterhandtag för Sakura 20-rack (gula, 3 st per förpackning)	14 0512 55661
Adapterhandtag för Sakura 20-rack (ljusblå, 3 st per förpackning)	14 0512 55662
Adapterhandtag för Sakura 20-rack (mörkblå, 3 st per förpackning)	14 0512 55663
Adapterhandtag för Sakura 20-rack (rosa, 3 st per förpackning)	14 0512 55664
Adapterhandtag för Sakura 20-rack (röda, 3 st per förpackning)	14 0512 55665
Adapterhandtag för Sakura 20-rack (ljusgröna, 3 st per förpackning)	14 0512 55666
Adapterhandtag för Sakura 20-rack (svarta, 3 st per förpackning)	14 0512 55667
Adapterhandtag för Sakura 20-rack (grå, 3 st per förpackning)	14 0512 55668
Adapterhandtag för Sakura 20-rack (vita, 3 st per förpackning)	14 0512 55669



Bild 123

Avloppsslang

Längd: 2 m

Beställningsnr:**14 0512 55279**

Bild 124

Tilloppsslang för kranvatten

Längd: 2,50 m sats med 3/4" anslutning för vattenkran, inkl. reservtätning

Beställningsnr:**14 0474 32325**

Bild 125

Vattenanslutningssats**Beställningsnr:****14 0512 49324**

Bestående av:

- 2 st. vattentillförselslångar, 10 mm, 2,5 m 14 0474 32325
- Förlängningsslang, 1,5 m 14 0512 49334
- Y-koppling G3/4 14 3000 00351
- 2 st. dubbelnippel G3/4 G1/2 14 3000 00359
- Filterhus 14 0512 49331
- Filterpatron 14 0512 49332
- Rörskoppling G3/4 14 3000 00360
- Blindkåpa G3/4 14 3000 00434
- Packningsbricka 14 0512 54772
- Skiftnyckel SW30 DIN894 14 0330 54755



Bild 126

Ventilationsslang

Längd: 2 m

Beställningsnr:

14 0512 54365



Bild 127

Aktivt kolfilter

1 sats bestående av 2 st.

Beställningsnr:

14 0512 53772



Bild 128

Reagenskyvett

Sats inkl. reagenskyvettlock

Beställningsnr:

14 0512 47086

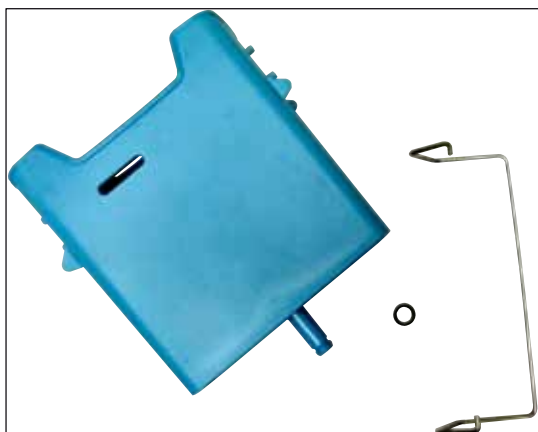


Bild 129

Sköljvattenkyvett
sats**Beställningsnr:** 14 0512 47087

Bild 130

Mellanlägg för speciell infärgning
(endast för rack som är till för 5 objektglas)**Beställningsnr:** 14 0512 49261

Bild 131

Rack

30 objektglas (3 st. per förpackning)

Beställningsnr: 14 0512 52473



Bild 132

Rackhandtag

30 objektglas (3 st. per förpackning)

Färg

- gult
- ljusblå
- mörkblå
- rosa
- rött
- ljusgrönt
- svart
- grått
- vitt

Beställningsnr:

14 0512 52476
14 0512 52477
14 0512 52478
14 0512 52479
14 0512 52480
14 0512 52481
14 0512 52482
14 0512 52483
14 0512 52484



Bild 133

Rack

5 objektglas (3 st. per förpackning)

Beställningsnr:

14 0512 52475

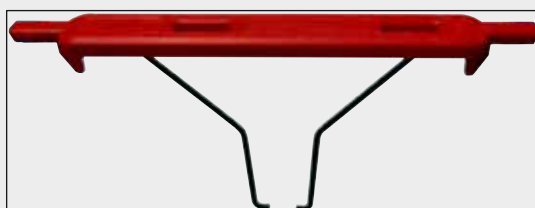


Bild 134

Rackhandtag

5 objektglas (3 st. per förpackning)

Färg

- gult
- ljusblå
- mörkblå
- rosa
- rött
- ljusgrönt
- svart
- grått
- vitt

Beställningsnr:

14 0512 52494
14 0512 52495
14 0512 52496
14 0512 52497
14 0512 52498
14 0512 52499
14 0512 52500
14 0512 52501
14 0512 52502



Bild 135

Sats med kyvettlock

Med ett lock kan en hel rad med reagenskyvetter (14 stycken) i kyvettfältet (→ "Bild 64") täckas.

Beställningsnr: 14 0512 57846

Bestående av:

- 3 kyvettlock 14 0512 57847

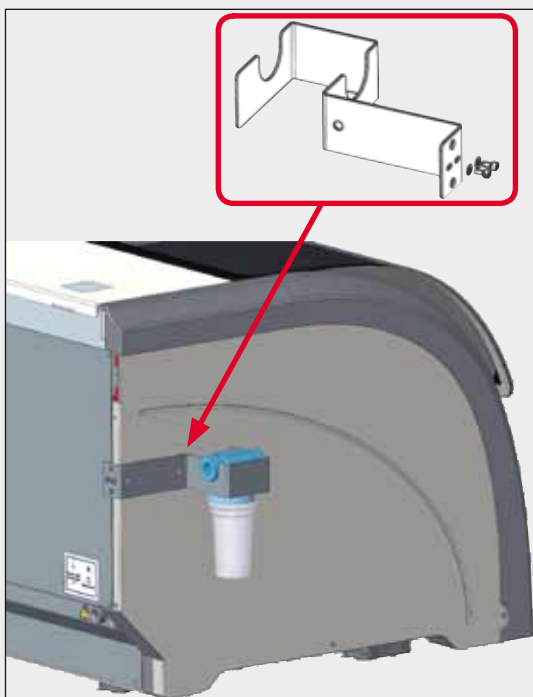


Bild 136

Vattenfilterhållare

Ska placeras till vänster om HistoCore SPECTRA ST

Vattenfilterhållaren kan användas för att fästa vattenfiltret och för att ge användaren förbättrad åtkomst och sikt.

Beställningsnr: 14 0512 59363

Bestående av:

- 1 Vattenfilterhållare 14 0512 59364
- 2 insexskruvar 14 2101 03234
- 2 brickor 14 2171 02114

Obs! Installationen av vattenfilterhållaren får endast utföras av auktoriserad Leica-personal!

10. Garanti och service

Garanti

Leica Biosystems Nussloch GmbH garanterar att den kontraktssenliga levererade produkten har genomgått omfattande kvalitetstester baserade på Leicas lokala teststandarder, samt att produkten är felfri och uppfyller samtliga tekniska specifikationer och/eller överenskomna egenskaper.

Garantins omfattning styrs av innehållet i avtalet som har slutits. Endast garantivillkoren från din ansvariga Leica-försäljningsavdelning eller den organisation där du har köpt instrumentet gäller.

Serviceinformation

Om du behöver teknisk service eller reservdelar ska du vända dig till din Leica-representant eller Leica-återförsäljaren där du har köpt instrumentet.

Ange följande information om instrumentet:

- Instrumentets modellbeteckning och serienummer.
- Instrumentets uppställningsplats och namn på en kontaktperson.
- Orsaken till serviceförfrågan.
- Instrumentets leveransdatum.

11. Urdrifttagning och kassering



Varning

Instrumentet eller dess delar ska kasseras i enlighet med gällande lokala föreskrifter. Alla föremål som har kontaminerats av utspillda reagenser ska genast desinficeras med ett lämpligt desinfektionsmedel för att utesluta spridning till andra delar av laboratoriet eller till laboratoriepersonalen.

Se avsnittet (→ Sida 111 – 7. Rengöring och underhåll) och avsnittet gällande saneringsbekräftelse (→ Sida 151 – 12. Saneringsbekräftelse) i slutet av denna bruksanvisning för information om rengöring av infärgaren HistoCore SPECTRA ST.

Instrumentet kan ha kontaminerats vid användning av biologiskt farliga prover. Innan instrumentet tas i drift igen eller kasseras krävs en grundlig desinficering (t.ex. flera rengöringssteg, desinficering eller sterilisering). Följ gällande laboratorieföreskrifter när instrumentet kasseras.

För mer information kan du vända dig till din ansvariga Leica-representant.



Komponenter i ditt instrument som är märkta med en överstruken avfallstunna, t.ex. datorn, bildskärmen osv., omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om hantering av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning.

Dessa föremål ska kasseras via samlingsställen i enlighet med lokala föreskrifter. Mer information om kasseringen av instrumentet kan du få av ditt lokala avfallshanteringsföretag eller en medarbetare på din lokala Leica-support.

12. Saneringsbekräftelse

Alla produkter som returneras till Leica Biosystems eller som behöver underhållas på plats måste rengöras och dekontamineras ordentligt. Den särskilda mallen för saneringbekräftelse finns i produktmenyn på vår hemsida www.LeicaBiosystems.com. Denna mall måste användas för att samla in alla data som behövs.

Vid produktretur måste en kopia av den ifyllda och undertecknade bekräftelsen bifogas eller skickas vidare till serviceteknikern. Avsändaren har fullt ansvar för produkter som returneras utan denna bekräftelse eller med en ofullständig bekräftelse. Returnerade varor som bedöms vara en potentiell fara för företaget skickas tillbaka på avsändarens bekostnad och risk.

A1. Bilaga 1 – Godkända reagenser



Varning

- Användning av reagenser som inte listas här (t.ex. aceton eller fenolhaltiga lösningar), eller reagenser och syror i högre koncentration än vad som beskrivs, kan leda till att prover förstörs eller till att användaren eller instrumentet skadas. Sådan användning av instrumentet sker på egen risk. Inga som helst garantianspråk eller andra krav på ansvar kan göras gällande mot Leica Biosystems eller associerade försäljnings- och serviceorganisationer.
- På grund av risken för brand och explosion får brännbara reagenser och lösningsmedel inte upphettas. Vid hantering av brännbara lösningsmedel och reagenser ska alla antändningskällor hållas borta.



Obs!

Alla Leica-reagenser för förinställda Leica-program har testats med instrumentet gällande infärgningskvalitet och kompatibilitet med andra material.

Infärgningsmetod eller reagensgrupp	Reagensnamn	Anteckningar
H&E-sats	Leica Infinity	ST Hemalast ST Hematoxylin ST Differentiator ST Bluing ST Eosin
	Leica SelecTech	Hemotoxylin 560 Hemotoxylin 560MX Define MX-aq Blue Buffer-8 (buffertlösning) Alcoholic Eosin Y 515 (alkoholhaltigt eosin) Alcoholic Eosin Y 515LT (alkoholhaltigt eosin) Eosin Trichrome 515 (trefärgning) Eosin Phloxine

Infärgningsmetod eller reagensgrupp		Reagensnamn	Anteckningar
Andra H&E-reagenser	Leica	Gill II Hematoxylin Gill III Hematoxylin Harris Hematoxylin Mayer's Hemalaun	
	Leica	Alcoholic Eosin (alkoholhaltigt eosin) Aqueous Eosin (1 %) (vattenhaltigt eosin)	
	Leica	Scott's Tap Water Solution (vattenlösning)	
	Leica	Acid Alcohol 0,5 % (syrahaltig alkohol)	
	Leica	Acid Alcohol 1,0 % (syrahaltig alkohol)	
	Användardefinierat	Hydrochloric Acid 2 % (saltsyra)	
PAS	Leica	Periodic Acid 0,5 % (perjodsyra)	
	Användardefinierat	Periodic Acid (up to 10 %) (perjodsyra, upp till 10 %)	
	Leica	Schiff's Reagent (Schiffreagens)	
Diastas-PAS	Leica	Diastase solution (37 °C) (diastaslösning)	
Alcianblå-PAS	Leica	Alcian Blue-Solution (alcianblå lösning)	
Alcianblå	Leica		
Alcianblå och andra infärgningsmetoder	Leica	Nuclear fast Red	
Gömöri trefärgning, blå och grön kollagenfärgning	Leica	Weigert Hematoxylin (A+B Solution) (A+B-lösning) Gömori Trichrome Blue Stain (Gömöri trefärgning blå) 1 % Acetic Acid (ättiksyra) Light green (ljusgrön)	
Perl's järninfärgning	Leica	Potassium ferrocyanide solution (kaliumferrocyanidlösning) Hydrochloride Acid Solution (saltsyralösning)	• Får inte komma i kontakt med metalljoner • Använd endast med belagda rackhandtag från 5-serien

Infärgningsmetod eller reagensgrupp	Reagensnamn	Anteckningar
Giemsa	Leica	Methanol Solution A (metanollösning) Stain 1 Solution B (infärgning 1, lösning B) Stain 2 Solution C (infärgning 2, lösning C) Buffer Solution D (buffertlösning D)
Kongoröd amyloidinfärgning	Leica	Congo Red Solution (kongoröd lösning)
	Leica	1 % Potassium Hydroxide Solution (kaliumhydroxidlösning)
	Användardefinierat	Saturated Lithium Carbonate Solution (mättad litiumkarbonatlösning)
Alciangul för heliobacter pylori	Leica	Alcian Yellow-Solution (0,25 % Alcian Yellow) (alciangul lösning, 0,25 % alciangul) 5 % Periodic Acid (perjodsyra) 5 % Sodium Metabisulfite (natriummetabisulfit) 6,8 pH Sorensen Buffer (Sörensenbuffert) Toluidin Blue Solution (toluidinblå lösning)
Elastisk infärgning/ Verhoeff's van Gieson	Leica	5 % Alcoholic Hematoxylin (alkoholhaltigt hematoxylin) 10 % Ferric Chloride (järntriklorid) Lugol's Iodin Solution (Lugols jodlösning) 2 % Ferric Chloride (järntriklorid) Verhoeff's Staining Solution (Verhoeffs infärgningslösning) Van Gieson's Stain (Van Giesons infärgning)

Infärgningsmetod eller reagensgrupp		Reagensnamn	Anteckningar
Gömöri metenamin silverinfärgning	Leica	Modified Chromic Acid (up to 5 %) (modifierad kromlösning, upp till 5 %)	• Får inte komma i kontakt med metalljoner • Använd endast med belagda rackhandtag från 5-serien
		Methenamine Borax (metenaminborax)	
		0,5 % Silver Nitrate (silverniträt)	
		1 % Sodium Bisulfate (natriumbisulfat)	
		1 % Gold Chloride (guldklorid)	
Cellprov (PAP)	Leica	2 % Sodium Thiosulfate (natriumtiosulfat)	
		Light green (ljusgrön)	
		EA-50	
		Orange G-6	
Schmorls reduktion		EA-65 (Secondary Counter Stain) (sekundär/motfärgning)	
		Schmorl's Solution (Schmorls lösning)	
(Müller) Kolloidalt järn		• Använd endast med belagda rackhandtag från 5-serien	
		Colloidal Iron Solution (kolloidal järnlösning)	
Andra reagenser	Användardefinierat	Ferrocyanide-Hydrochloric Acid Solution (ferrocyanid-saltsyralösning)	
		Anilin Blue (anilinblå)	
		Methylene Blue (metylenblå)	
		Fast Green (snabbgrön)	
		Carmin	
		Southgate or Mayer's Micicarmine (Southgate eller Mayers mucicarmin)	
		Neutral Red (neutralrött)	
		Safranin	

Infäringsmetod eller reagensgrupp		Reagensnamn	Anteckningar
Lösningsmedel	Leica/ Användardefinierat	Xylen, toluol	
	Leica	Leica Ultra ST	Xylensubstitut baserat på alifatiska kolväten
	Leica	Leica Clearene	Limonenbaserat xylensubstitut
	Merck	Merck Neo-Clear	Xylensubstitut baserat på alifatiska kolväten
	Carl Roth	Roti®-Histol	Limonenbaserat xylensubstitut
	Richard-Allen Scientific/Thermo Scientific	Clear-Rite 3	Xylensubstitut baserat på alifatiska kolväten
	Richard-Allen Scientific/Thermo Scientific	Citrus Clearing Solvent (klarningslösning citrus)	Limonenbaserat xylensubstitut
Alkohol	Leica/ Användardefinierat	2-Propanol (Isopropanol)	
	Leica/ Användardefinierat	Etanol Metanol	
	Richard-Allen Scientific/Thermo Scientific	Dehydrant (dehydrerare)	Etylalkohol, metylalkohol
	Richard-Allen Scientific/Thermo Scientific	Flex	Isopropyl, alkohol, metylalkohol
Vanliga syror, max. koncentration	Användardefinierat	Ättiksyra (upp till 15 %) Saltsyra (upp till 5 %) Piric Acid (up to 3 %) (pirkinsyra, upp till 3 %)	

www.LeicaBiosystems.com



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Strasse 17 - 19
69226 Nussloch
Tyskland

Tel.: +49 - (0) 6224 - 143 0
Fax: +49 - (0) 6224 - 143 268
Webb: www.LeicaBiosystems.com